




Reinigen en desinfecteren Ascom mobile devices

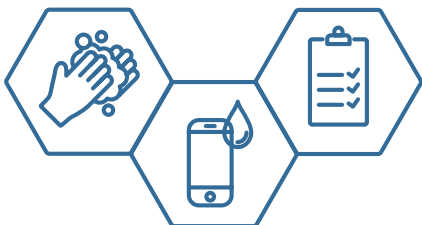

In tegenstelling tot mobiele apparaten van consumentenkwaliteit, zijn Ascom mobiele devices speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg, maakindustrie, petrochemie en andere werkomgevingen met strikte voorschriften en hoge eisen.

Onze mobiele devices zijn getest met verschillende reinigings- en desinfectieproducten en hieronder vindt u een lijst met goedgekeurde oplossingen die de handsets niet beschadigen, maar wel desinfecteren conform strenge reinigingsprotocollen.



Reinigingsinstructies

- 1.** Voordat u de handset reinigt, moeten uw handen worden gereinigd.
- 2.** U kunt vloeibare desinfectiemiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken.

Vermijd reinigings- en desinfectiemiddelen met vochtinbrengende bestanddelen voor de huid of bijtende componenten.

- 3.** Reinig de handset voor het desinfecteren met een doek, vochtig gemaakt met een milde zeepoplossing, om het vuil te verwijderen.

Raadpleeg de volgende pagina's voor verdere instructies

Reiniging met vloeibare desinfectiemiddelen

Breng het vloeibare desinfectiemiddel voorzichtig aan met een niet-schurende doek.

De volgende vloeibare desinfectiemiddelen kunnen worden gebruikt:

VLOEIBAAR DESINFECTIEMIDDEL	Ascom 914D/914T	Ascom a51/a71	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
Ethanol 85% *Sporadische desinfectie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ethanol 85% **Dagelijkse desinfecties	X	X			X	X	X	X	X
Virkon S 1% **Dagelijkse desinfecties	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actichlor Plus 0,1% Chlorine **Dagelijkse desinfecties						X	X	X	X
Aseptix (H ₂ O ₂) **Dagelijkse desinfecties			X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml *Sporadische desinfectie		X	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml **Dagelijkse desinfecties						X			X
Isopropyl/Isopropanol 85% **Dagelijkse desinfecties	X	X				X		X	X
DAX Ytidesinfektion Plus (Isopropanol 30-45%)	X	X				X		X	X
Sodium Hypochlorite (5%) **Dagelijkse desinfecties		X							
Hypochlorite (5%) *Sporadische desinfectie		X							

*Sporadische desinfectie: één desinfectie per week

**Dagelijkse desinfecties: tot 5 desinfecties per dag

Reiniging met doekjes

Breng het desinfectiemiddel voorzichtig aan met de vooraf gedrenkte doekjes uit het reinigingsblik. Uitgebreid wrijven tijdens het reinigen/desinfecteren kan leiden tot oppervlakteschade aan het apparaat. De volgende reinigingsdoekjes kunnen worden gebruikt:

REINIGINGSDOEKJE	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
PDI Super Sani-Cloth (Paars)				X		X	
PDI Sani-Cloth Plus (Rood)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth Bleach (Oranje)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth HB (Groen/blauw)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth AF3 (Grijs)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth AF (Wit)			X	X		X	
Certol Prospray			X	X		X	
Clorox Hydrogen Peroxide (Groen)				X		X	
Clorox ontsmettingsdoekjes			X	X		X	X
CaviWipes and CaviWipes XL			X	X		X	X
Cal Tech Dispatch (met bleek)			X	X		X	
Tuffie 5 Universele reinigingsdoekjes						X	X
Clinell Universele doekjes						X	X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (vervangt Aseptix H ₂ O ₂)							X
Hartmann, BacilloI AF							X
Hartmann, BacilloI 30						X	X

Reinigingsfrequentie

Reinig de handset volgens de plaatselijke procedures.

Ascom (Nederland) B.V.
Savannahweg 31
3542 AW Utrecht
info.nl@ascom.com
T: +31302409100
ascom.nl

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de procedure van iedere gebruiker, waarvoor Ascom geen verantwoordelijkheid kan nemen. Hoewel de handset bestand is tegen de oplossingen die op pagina 2 en 3 worden genoemd, kan deze tijdens het gebruik substanties uit bijvoorbeeld cosmetica of voedingsmiddelen absorberen. Deze substanties kunnen een oppervlakteverzachend effect hebben op de handset, waardoor het gevoeliger wordt voor slijtage.