

# ascom

## DIGISTAT® V5.1

**Ghid de referință rapidă**

**DIG QRG IU 0007 ROU V01**

ASCOM UMS s.r.l., societate cu asociat unic

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

# Cuprins

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Procedura de pornire.....</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| 1.1 Instalarea DIGISTAT® .....                                                                           | 3         |
| 1.2 Cum să rulați DIGISTAT® .....                                                                        | 3         |
| 1.3 Procedura de conectare .....                                                                         | 4         |
| 1.3.1 Conectarea cu codul de bare .....                                                                  | 6         |
| 1.3.2 Cum să dezactivați deconectarea automată a utilizatorului (funcția „Blocarea utilizatorului”)..... | 6         |
| 1.4 Deconectarea .....                                                                                   | 6         |
| <b>2. Indisponibilitatea sistemului .....</b>                                                            | <b>7</b>  |
| <b>3. Instrucțiuni de utilizare a sistemului DIGISTAT® .....</b>                                         | <b>8</b>  |
| 3.1 Actualizarea online a manualului de utilizare .....                                                  | 8         |
| 3.1.1 Cum se descarcă manualele.....                                                                     | 9         |
| <b>4. Cum se afișează caseta Despre pe sistemul DIGISTAT® .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 4.1 Instrucțiunile de utilizare tipărite .....                                                           | 10        |
| <b>5. Contacte .....</b>                                                                                 | <b>11</b> |

## 1. Procedura de pornire

### 1.1 Instalarea DIGISTAT®

Sistemul DIGISTAT® poate fi instalat numai de către tehnicieni ASCOM UMS sau tehnicieni autorizați în mod explicit de ASCOM UMS. Utilizatorul final va avea sistemul deja instalat și configurat corespunzător pe stația sa de lucru.

### 1.2 Cum să rulați DIGISTAT®

Pentru a rula DIGISTAT®:

- faceți dublu clic pe pictograma  de pe desktopul stației de lucru.

Următoarea fereastră este afișată în timp ce sistemul se încarcă (Fig. 1).



Fig. 1

După câteva secunde, se afișează zona de lucru DIGISTAT® (Fig. 2).

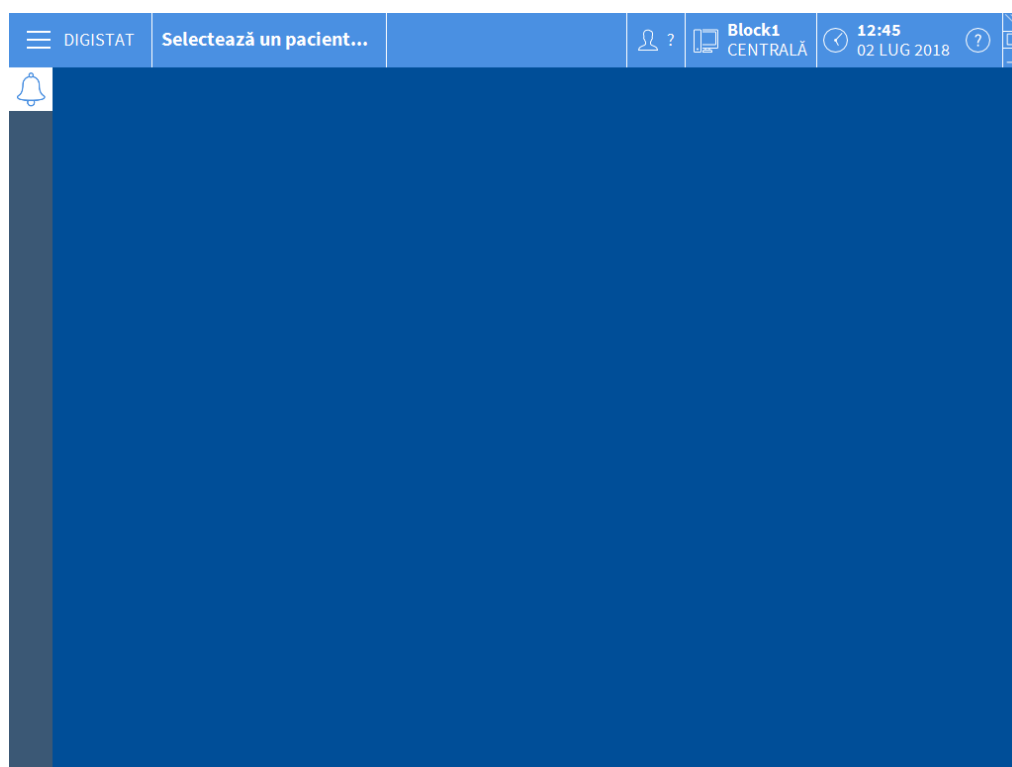


Fig. 2

### 1.3 Procedura de conectare

Pentru a utiliza DIGISTAT® este necesar să vă conectați la sistem. Utilizatorul trebuie să introducă acreditările (numele de utilizator și parola) la începutul fiecărei sesiuni de lucru.

- Apăsați pe butonul **Utilizator** indicat în Fig. 3 **A**. Se afișează următorul ecran.

NUME UTILIZATOR

PAROLA

Q W E R T Y U I O P " Backspace

A S D F G H J K L ( )

Tab Z X C V B N M , : ? Enter

Blocare + - = Ștergere

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

RECENT

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 1 ADMIN | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6       | 7 | 8 | 9 |   |
|         |   |   |   |   |

+ MAI M... BLOCARE X ANULARE ✓ OK

Fig. 3

Apoi, pe ecran:

- introduceți numele dvs. de utilizator în câmpul „Nume de utilizator” (Fig. 3 **B**);
- introduceți parola în câmpul „Parolă” (Fig. 3 **C**);
- faceți clic pe butonul **Ok** (Fig. 3 **D**).

Utilizatorul este conectat. Pe butonul **Utilizator** din bara de control se afișează acronimul corespunzător utilizatorului conectat în prezent (acronimul este „ADM” în Fig. 4).

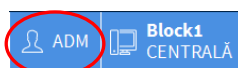


Fig. 4

### 1.3.1 Conectarea cu codul de bare

În cazul în care organizația medicală utilizează această tehnologie, este posibilă conectarea prin scanarea codului de bare.

Pentru a utiliza această funcție, atunci când sistemul afișează ecranul de conectare (Fig. 3):

- scanați codul de bare personal al utilizatorului.

Dacă acesta este recunoscut, utilizatorul este conectat imediat.

### 1.3.2 Cum să dezactivați deconectarea automată a utilizatorului (funcția „Blocarea utilizatorului”)

Dacă sistemul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp (configurabilă), utilizatorul este deconectat automat.

Dezactivarea acestei funcții trebuie să aibă loc după introducerea numelui de utilizator și a parolei, dar înainte de a face clic pe **Ok**.

- Apăsați pe butonul **Blocare** din bara de comandă de pe ecranul „Conectare” (Fig. 5 A).



Fig. 5

Dacă utilizatorul este blocat, pe butonul utilizatorului se afișează pictograma lacăt

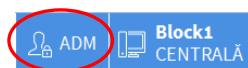


Fig. 6

## 1.4 Deconectarea

Pentru a închide o sesiune de lucru cu DIGISTAT®, utilizatorul trebuie să se deconecteze de la sistem.

Pentru a vă deconecta:

- faceți clic pe **Utilizator** în bara de comandă (Fig. 7 și Fig. 3 A).

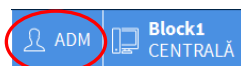


Fig. 7

Acronimul utilizatorului dispare de pe butonul **Utilizator**.

## 2. Indisponibilitatea sistemului

Dacă în timpul pornirii întâmpinați probleme la conectarea la server, sistemul va afișa fereastra „Recuperare sistem” (Fig. 8).



Fig. 8

Problema de conectivitate este uneori rezolvată automat, în scurt timp. În caz contrar, contactați serviciul de asistență tehnică ASCOM UMS. Consultați secțiunea 5 pentru persoanele de contact ASCOM UMS.

În cazuri rare, este posibil să nu puteți utiliza sistemul DIGISTAT® (din cauza penelor de curent îndelungate, a unor evenimente catastrofale etc.).

Organizația medicală care utilizează DIGISTAT® trebuie să definească o procedură de urgență pentru a face față unor astfel de evenimente și pentru a:

- 1) face posibil ca departamentele spitalului să fie din nou operaționale;
- 2) repune sistemul în funcțiune cât mai curând posibil.

ASCOM UMS poate oferi asistență pentru procedura de urgență, însă organizația medicală este responsabilă pentru definirea și executarea procedurii.

Consultați secțiunea 5 pentru persoanele de contact ASCOM UMS.

### 3. Instrucțiuni de utilizare a sistemului DIGISTAT®

Instrucțiunile de utilizare a sistemului DIGISTAT® sunt furnizate împreună cu produsul. Acestea pot fi afișate în format digital pe sistemul DIGISTAT® (numai acest ghid de pornire rapidă este furnizat pe hârtie). Pentru a accesa instrucțiunile de utilizare:

- Faceți clic pe butonul **Ajutor** din bara de comandă (Fig. 9).



Fig. 9

Se deschide un ecran care oferă posibilitatea de a accesa:

- 1) manualele de utilizare DIGISTAT® relevante,
- 2) posibile ghiduri de referință rapidă referitoare la anumite proceduri.

Documentația online este în format PDF.

#### 3.1 Actualizarea online a manualului de utilizare

Manualul de utilizare DIGISTAT® poate fi descărcat de pe un site ftp de pe internet. Fiecare client DIGISTAT® poate accesa o zonă protejată unde sunt disponibile toate versiunile existente ale manualelor. Astfel, utilizatorul poate verifica dacă există o versiune actualizată a manualelor sale. ASCOM UMS/distribuitorii își vor informa clienții în cazul unor actualizări care afectează siguranța. În astfel de cazuri vor fi furnizate manualele de utilizare actualizate. Zona poate fi accesată numai după autentificarea utilizatorului. Fiecare client are un nume de utilizator și o parolă pe care trebuie să le introducă pentru a accesa zona protejată. Aceste acreditări se găsesc în cutia produsului, în plicul cu parolele aferente. Fiecare manual este identificat printr-un cod specific în formatul de mai jos:

„DIGQRGIU.NNN/ENG. **Versiunea MM**”

De exemplu:

„DIGQRGIU.0001ENG.**V01**”

Cifrele finale ale codului („V01”) cresc progresiv în cazul versiunilor actualizate ale aceluiași manual.

În cazul în care se fac actualizări ale unui document (de exemplu, după detectarea și remedierea unor greșeli minore, greșeli de ortografie, omisiuni etc., atât în sistemul DIGISTAT®, cât și în document), sunt lansate noi versiuni ale acestuia.

Dacă sunt lansate noi versiuni ale sistemului DIGISTAT®, se lansează un nou manual (nu o nouă versiune a unui manual existent). În astfel de cazuri, codul documentului se modifică (în exemplul de mai sus, codul documentului este „0001”, subliniat mai jos).

„DIGQRGIU.0001ENG.V01”

Noul document este furnizat clientului împreună cu actualizarea DIGISTAT®. Codul documentului poate fi consultat pe frontispiciu și în subsolul fiecărei pagini. Versiunea DIGISTAT® relevantă este indicată în frontispiciu. Versiunea DIGISTAT® instalată în prezent apare în caseta „Despre” (vedeți mai jos instrucțiunile despre afișarea casetei „Despre”). Versiunea DIGISTAT® este indicată printr-un număr, de exemplu, „1.0.1”. Primele două cifre indică versiunile noi și actualizările majore ale sistemului DIGISTAT®. Ultima cifră indică actualizările minore și remedierile erorilor. Un manual de utilizare se referă la toate versiunile sistemului DIGISTAT® care au primele două cifre în comun. Acesta este valabil dacă este ultima versiune publicată pe site-ul ftp. În cazul în care uitați numele de utilizator și/sau parola, contactați ASCOM UMS sau distribuitorii pentru a obține acreditări noi. Lista de contacte se găsește la pagina 11.

### 3.1.1 Cum se descarcă manualele

Manualele de utilizare pot fi descărcate de pe serverul nostru cloud folosind orice browser (de exemplu, IExplorer, Chrome, Firefox). Pentru a descărca manualele DIGISTAT®, introduceți următoarea adresă în bara de adrese a browserului web:

**Adresa URL gazdă:** <https://confluence.ascom-ws.com>

Se afișează o pagină de întâmpinare. Acum trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru a accesa lista manualelor de utilizare.

**Numele de utilizator** – numele de utilizator furnizat de ASCOM UMS

**Parola** – parola furnizată de ASCOM UMS

## 4. Cum se afișează caseta Despre pe sistemul DIGISTAT®

Pentru a afișa caseta Despre pe sistemul DIGISTAT®

- Faceți clic pe butonul **Meniu** din bara de control (Fig. 10 **A**).



Fig. 10

Se va deschide un meniu care conține diferite opțiuni (Fig. 11).



Fig. 11

- În meniu, faceți clic pe butonul **Despre** (Fig. 11 A).

Se deschide caseta Despre pe sistemul DIGISTAT® (Fig. 12).



Fig. 12

## 4.1 Instrucțiunile de utilizare tipărite

Clienții pot solicita versiunea tipărită a manualelor de utilizare pentru produsele achiziționate. ASCOM UMS va furniza manualele de utilizare solicitate cât mai curând posibil.

Solicitarea trebuie trimisă serviciului de asistență tehnică. Consultați secțiunea 5 pentru lista contactelor ASCOM UMS.

## 5. Contacte

Pentru orice problemă, vă rugăm să consultați mai întâi distribuitorul care a instalat produsul.

Mai jos sunt furnizate datele de contact ale producătorului:

### **ASCOM UMS s.r.l., societate cu asociat unic**

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italia  
Tel. (+39) 055 0512161  
Fax (+39) 055 8290392

### **Asistență tehnică**

[support.it@ascom.com](mailto:support.it@ascom.com)

800999715 (număr fără taxă, apelabil numai în Italia)

### **Informații despre vânzări și produse**

[it.sales@ascom.com](mailto:it.sales@ascom.com)

### **Informații generale**

[it.info@ascom.com](mailto:it.info@ascom.com)