

ascom

PIKAOPAS

DIGISTAT® V4.3

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1. Käynnistys.....	3
1.1 DIGISTAT®-järjestelmän asennus	3
1.2 DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys	3
1.3 Sisäänkirjautuminen.....	4
1.3.1 Viivakoodikirjautuminen	5
1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus -toiminto)	5
1.4 Uloskirjautuminen.....	5
2. Järjestelmän käyttökatkot.....	5
3. DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet.....	7
3.1.1 DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö.....	7
3.2 Painettu käyttöohje	8
4. Yhteystiedot.....	9

1. Käynnistys

1.1 DIGISTAT®-järjestelmän asennus

Ainoastaan ASCOM UMS -tekniikot tai ASCOM UMS:n erityisesti valtuuttamat teknikot saavat asentaa DIGISTAT®-järjestelmän. Kun järjestelmä toimitetaan loppukäyttäjälle, se on jo asennettu ja määritetty asianmukaisesti työasemaan.

1.2 DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys

DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys:


- Kaksoisklikkaa  -kuvaketta työaseman työpöydällä.

Seuraava ikkuna näytetään järjestelmän latautuessa (Kuva 1).



Kuva 1

Muutaman sekunnin kuluttua DIGISTAT®-työalue näytetään (Kuva 2).

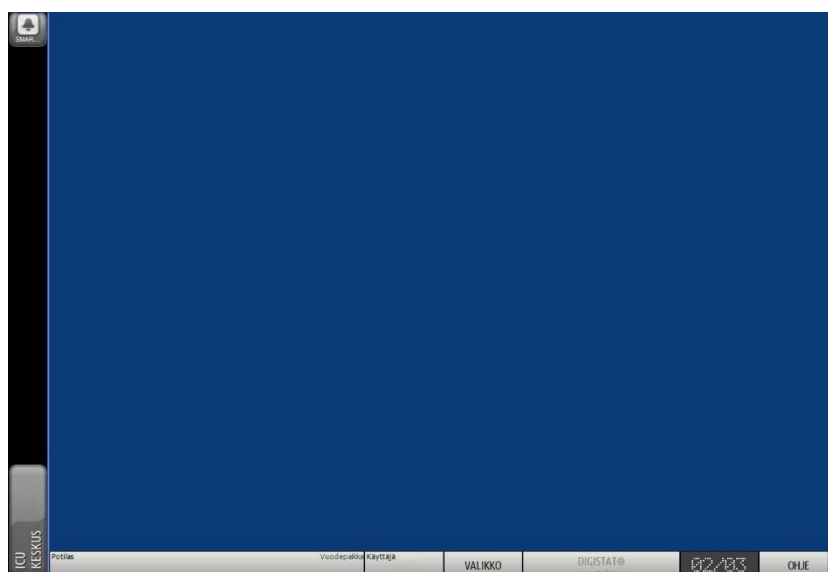

Kuva 2

1.3 Sisäänkirjautuminen

DIGISTAT®-järjestelmän käyttö vaatii sisäänkirjautumista. Toisin sanoen käyttäjän täytyy syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasansa. Kirjaudu sisään työistunnon aluksi seuraavasti:

- Klikkaa **Käyttäjä**-painiketta kohdassa Kuva 3 **A**. Seuraava sivu näytetään.

Kuva 3

Tämän jälkeen:

- Kirjoita käyttäjätunnuksesi Käyttäjätunnus-kenttään (Kuva 3 **B**).
- Kirjoita salasiansi Salasana-kenttään (Kuva 3 **C**).
- Klikkaa **Ok**-painiketta (Kuva 3 **D**).

Olet kirjautunut sisään. Kirjautunutta käyttäjää osoittava lyhenne näytetään tehtäväpalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on kuvassa 4 "ADM").



Kuva 4

1.3.1 Viivakoodikirjautuminen

Terveystieteiden tutkimuskeskuksen on mahdollista ottaa käyttöön sisäänkirjautuminen viivakoodinlukijan avulla.

Käytä toimintoa seuraavasti, kun järjestelmässä näkyy sisäänkirjautumissivu (Kuva 3):

- Lue käyttäjän henkilökohtainen viivakoodi.

Jos viivakoodi tunnustetaan, sinut kirjataan välittömästi sisään.

1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus-toiminto)

Jos järjestelmä on käyttämättömänä tietyn (määriteltävän) ajan, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.

Poista toiminto käytöstä seuraavasti käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamisen jälkeen mutta ennen kuin klikkaat **Ok**:

- Klikkaa **Lukitse**-painiketta sisäänkirjautumissivun komentopalkissa (Kuva 5 **A**).



Kuva 5

Jos käyttäjä on lukittu, käyttäjätunnuksen lyhenne komentopalkissa on punainen (Kuva 6).



Kuva 6

1.4 Uloskirjautuminen

Sulkeakseen DIGISTAT®-työistunnon käyttäjän tulee kirjautua ulos järjestelmästä.

Uloskirjautuminen:

- Klikkaa komentopalkin **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 7 ja Kuva 3 **A**).




Kuva 7

Käyttäjätunnuksen lyhenne katoaa **Käyttäjä**-painikkeesta.

2. Järjestelmän käyttökätköt

Jos käynnistyksen aikana esiintyy ongelmia yhteyden saamisessa palvelimeen, järjestelmä ilmoittaa siitä Järjestelmän palautus -ikkunalla (Kuva 8).

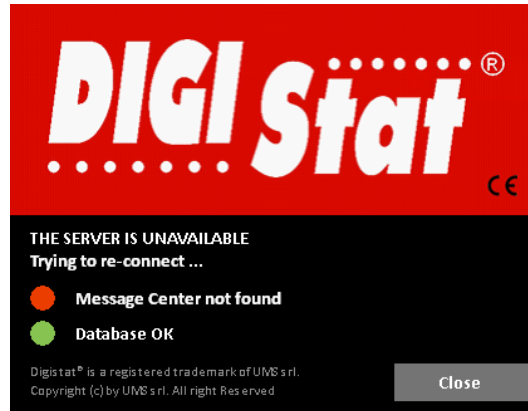

Kuva 8

Yhteysongelmat selviävät toisinaan itsekseen hetken kuluttua. Jos eivät, ota yhteyttä ASCOM UMS:n tekniseen tukeen. ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 4.

On olemassa harvinaisia joskin mahdollisia tapauksia, jolloin DIGISTAT®-järjestelmän käyttö on mahdotonta (esim. luonnonmullistukset, pitkät sähkökatkot tms.).

DIGISTAT®-järjestelmää käyttävien terveydenhoito-organisaatioiden tulee määritellä hätätilannemenettely tällaisten tilanteiden varalta

- 1) sairaalaosastojen toiminnan palauttamiseksi
- 2) järjestelmän palauttamiseksi käyttöön mahdollisimman pian.

ASCOM UMS tukee ja auttaa mielellään hätätilannemenettelyn kehittämisessä, mutta sen määrittely ja toteutus on terveydenhoito-organisaation vastuulla.

ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 4.

3. DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet

DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet toimitetaan tuotteen mukana. Ne ovat luettavissa sähköisessä muodossa DIGISTAT®-järjestelmässä (ainoastaan tämä pikaopas toimitetaan paperilla). Käyttöohjeiden lukeminen:

- Klikkaa **Ohje**-painiketta komentopalkissa (Kuva 9).



Kuva 9

Näytölle avautuvalta sivulta voidaan avata

- 1) aihekohtaiset DIGISTAT®-käyttöohjeet
- 2) mahdollisiin erityisiin toimenpiteisiin liittyvät pikaohjeet.

Sähköiset asiakirjat ovat PDF-muodossa.

3.1.1 DIGISTAT® -järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö

DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruutu asetetaan näytölle seuraavasti:

- Klikkaa tehtäväpalkin **Valikko**-painiketta (Kuva 10 **A**)



Kuva 10

Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 11).



Kuva 11

- Klikkaa valikon **Tietoja**-painiketta (Kuva 11 **A**).

DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruutu avautuu (Kuva 12).



Kuva 12

3.2 Painettu käyttöohje

Asiakas voi pyytää ostamiensa tuotteiden käyttöohjeet painettuina. ASCOM UMS toimittaa pyydetyt käyttöohjeet mahdollisimman pian.

Pyyntö tulee osoittaa tekniselle tuelle. ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 4.

4. Yhteystiedot

Ota kaikissa tilanteissa ensin yhteyttä tuotteen asentaneeseen jälleenmyyjään.

Valmistajan yhteystiedot:

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Tekninen tuki

support@unitedms.com

800999715 (maksuton numero, vain Italia)

Myynti ja tuotetietoja

sales@unitedms.com

Yleisiä tietoja

info@unitedms.com