



HURTIGVEILEDNING

DIGISTAT® V4.3

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Innhold

1. Oppstartprosedyre.....	3
1.1 Installasjon av DIGISTAT®	3
1.2 Hvordan kjøre DIGISTAT®	3
1.3 Påloggingsprosedyre	4
1.3.1 Pålogging med strekkode.....	5
1.3.2 Hvordan deaktivere den automatiske brukeravloggingen.....	5
1.4 Logg av.....	5
2. Manglende tilgang til systemet	6
3. Brukerhåndbøker til DIGISTAT®	7
3.1.1 Hvordan vise DIGISTAT® Om-rute.....	7
3.2 Brukerhåndbøker i papirutgave	8
4. Kontakter.....	9

1. Oppstartprosedyre

1.1 Installasjon av DIGISTAT®

DIGISTAT® systemet kan kun installeres av teknikere fra ASCOM UMS eller teknikere som er autorisert av ASCOM UMS. Ved levering er arbeidsstasjonen installert og konfigurert for sluttbrukeren.

1.2 Hvordan kjøre DIGISTAT®

Kjøre DIGISTAT®

- Dobbelklikk på -ikonet på arbeidsstasjonens skrivebord.

Følgende vindu vises mens systemet laster (Fig. 1).



Fig. 1

Etter et par sekunder vises DIGISTAT® arbeidsområde (Fig. 2).

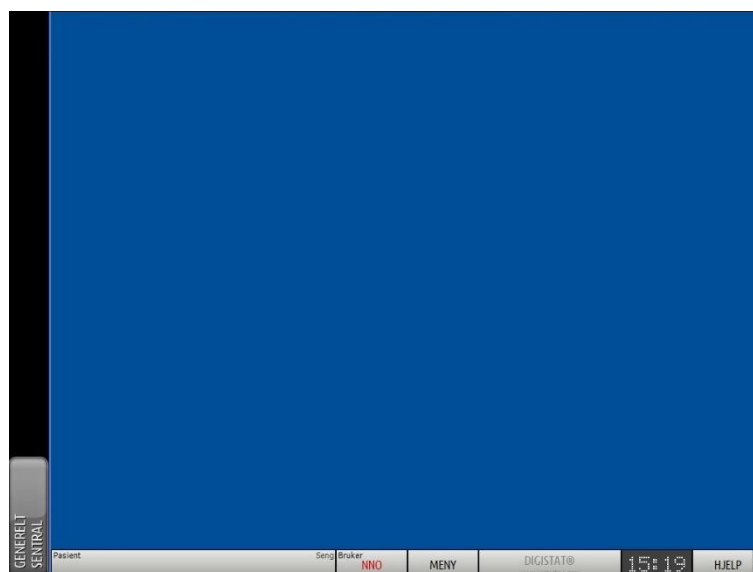


Fig. 2

1.3 Påloggingsprosedyre

For å bruke DIGISTAT® er det nødvendig å logge på systemet. Brukeren må f.eks. legge inn sine tilgangsinformasjoner (brukernavn og passord). For å logge på i begynnelsen av hver arbeidssesjon:

- Klikk på **Bruker**-knappen vist i Fig. 3 **A**. Følgende skjermbilde vises.

Fig. 3

Deretter på skjermen

- Legg inn ditt brukernavn i “Brukernavn”-feltet (Fig. 3 **B**).
- Legg inn ditt passord i “Passord”-feltet (Fig. 3 **C**).
- Klikk på **Ok**-knappen (Fig. 3 **D**).

Brukeren er dermed pålogget. Et akronym som angir brukeren som er pålogget, vises på **Bruker**-knappen på kontrollinjen (akronymet er “ADM” på Fig. 4).

Fig. 4

1.3.1 Pålogging med strekkode

I helseinstitusjoner som anvender denne typen teknologi, er det mulig å logge på gjennom strekkodeskanning.

For å bruke denne funksjonen når systemet viser påloggingsskjermen (Fig. 3):

- Skann brukerens personlige strekkode.

Hvis strekkoden gjenkjennes, er brukeren umiddelbart pålogget.

1.3.2 Hvordan deaktivere den automatiske brukeravloggingen

Hvis systemet står ubrukt over en viss tid (konfigurerbart), logges brukeren automatisk av.

For å deaktivere denne funksjonen, er det nødvendig å gjøre følgende, etter å ha lagt inn brukernavn og passord og før det klikkes på **Ok**-knappen:

- Klikk på **Lås**-knappen i “Pålogging”-skjermens kommandolinje (Fig. 5 **A**).

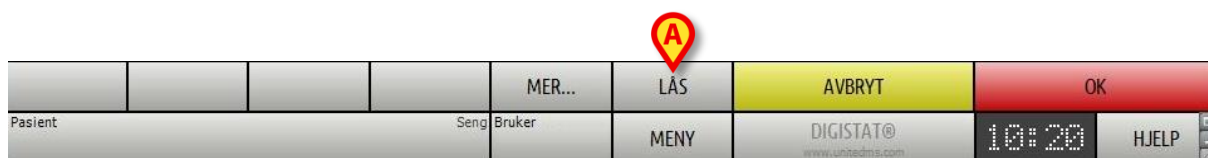


Fig. 5

Hvis brukeren er låst, er brukerens akronym på kommandolinjen rødt (Fig. 6).



Fig. 6

1.4 Logg av

For å lukke en arbeidssesjon med DIGISTAT®, må brukeren “logge av” systemet.

For å logge av:

- Klikk på **Bruker**-knappen på kommandolinjen (Fig. 7 og Fig. 3 **A**).



Fig. 7

Brukerens akronym forsvinner fra **Bruker**-knappen.

2. Manglende tilgang til systemet

Ved problemer med oppkobling til serveren under oppstart viser systemet et spesifikt "Systemgjenoppretting"-vindu (Fig. 8).

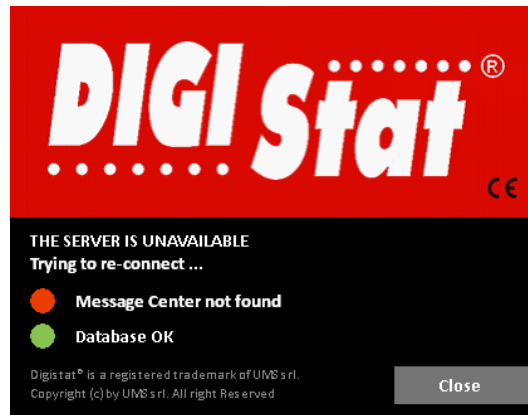


Fig. 8

Oppkoblingsproblemet løses noen ganger automatisk etter kort tid. Hvis ikke, kontakt ASCOM UMS tekniske assistanse. Se avsnitt 4 for ASCOM UMS kontakter.

I veldig sjeldne tilfeller er det fysisk umulig å bruke DIGISTAT® systemet (langvarige strømbrydd, katastrofehendelser, osv.).

Helseinstitusjonen som bruker DIGISTAT® bør definere en nødprosedyre som trer i kraft ved denne typen hendelser, for å:

- 1) tillate en sykehusavdeling til å være operativ igjen,
- 2) gjenopprette systemtilgjengeligheten så snart som mulig.

ASCOM UMS kan gi støtte og assistanse for nødprosedyren, men helseinstitusjonen er ansvarlig for definering og gjennomføring av prosedyren.

Se avsnitt 4 for ASCOM UMS kontakter.

3. Brukerhåndbøker til DIGISTAT®

Brukerhåndbøkene til DIGISTAT® systemet følger med produktet. De kan også vises i digitalt format i DIGISTAT® systemet (det er kun denne hurtigveiledningen som følger med i papirutgave). Tilgang til brukerhåndbøker

- Klikk på **Hjelp**-knappen på kommandolinjen (Fig. 9)



Fig. 9

Det vises et skjermbilde med tilgang til følgende:

- 1) relevante brukerhåndbøker til DIGISTAT®,
- 2) mulig hurtigveiledning som refererer til spesifikke prosedyrer.

Nettdokumentasjonen er i PDF-format.

3.1.1 Hvordan vise DIGISTAT® Om-rute

Vise DIGISTAT® Om-rute

- Klikk på **Meny**-knappen på kontrollinjen (Fig. 10 A)

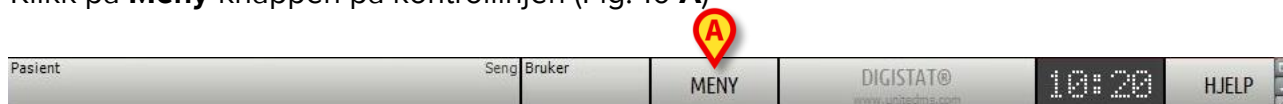


Fig. 10

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 11).



Fig. 11

- Klikk på **Om**-knappen (Fig. 11 A) i menyen.

DIGISTAT® Om-rute åpnes (Fig. 12).



Fig. 12

3.2 Brukerhåndbøker i papirutgave

Kunden kan be om en utskrevet versjon av brukerhåndbøkene til de kjøpte produktene. ASCOM UMS vil levere de forespurte håndbøkene så snart som mulig.

Forespørselen må sendes til teknisk assistanse. Se avsnitt 4 for listen over ASCOM UMS kontakter.

4. Kontakter

Ved spørsmål, kontakt først distributøren som installerte produktet.

Her er produsentkontaktene:

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia
Tlf. +39 055 0512161
Faks +39 055 8290392

Teknisk assistanse

support.it@ascom.com
800999715 (grønt nummer i Italia)

Salgs- og produktinformasjon

it.sales@ascom.com

Generell informasjon

it.info@ascom.com