

ascom

DIGISTAT® V5.0

PIKAOPAS

DIG UD IU 0006 FIN V01

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1. Käynnistys	3
1.1 DIGISTAT®-järjestelmän asennus.....	3
1.2 DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys	3
1.3 Sisäänkirjautuminen.....	4
1.3.1 Viivakoodikirjautuminen	5
1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus -toiminto).....	5
1.4 Uloskirjautuminen	5
2. Järjestelmän käyttökatkot.....	5
3. DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet.....	7
3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet	7
3.1.1 Käyttöohjeiden lataus	8
4. DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö.....	9
4.1 Painettu käyttöohje	10
5. Yhteystiedot.....	11

1. Käynnistys

1.1 DIGISTAT®-järjestelmän asennus

Ainoastaan ASCOM UMS -tekniikat tai ASCOM UMS:n erityisesti valtuuttamat teknikot saavat asentaa DIGISTAT®-järjestelmän. Kun järjestelmä toimitetaan loppukäyttäjälle, se on jo asennettu ja määritetty asianmukaisesti työasemaan.

1.2 DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys

DIGISTAT®-järjestelmän käynnistys:


- Kaksoisklikkaa  -kuvaketta työaseman työpöydällä.

Seuraava ikkuna näytetään järjestelmän latautuessa (Kuva 1).



Kuva 1

Muutaman sekunnin kuluttua DIGISTAT®-työalue näytetään (Kuva 2).

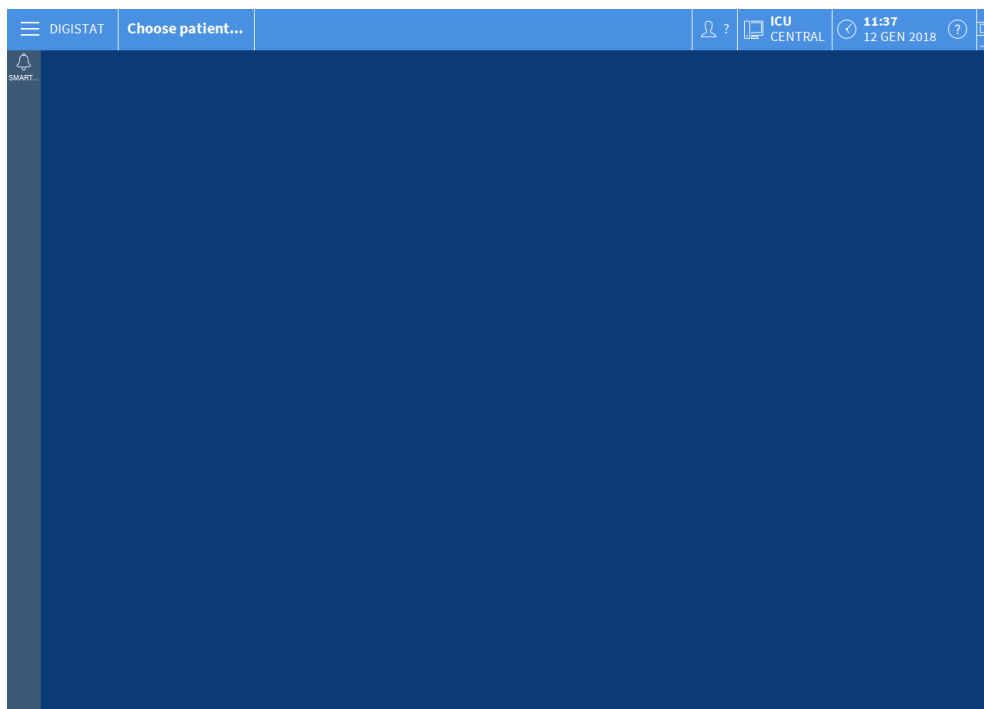

Kuva 2

1.3 Sisäänkirjautuminen

DIGISTAT®-järjestelmän käyttö vaatii sisäänkirjautumista. Toisin sanoen käyttäjän täytyy syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasansa. Kirjaudu sisään työstunnon aluksi seuraavasti:

- Klikkaa **Käyttäjä**-painiketta kohdassa Kuva 3 **A**. Seuraava sivu näytetään.

KÄYTTÄJÄTUNNUS

SALASANA

Q W E R T Y U I O P " Backspace

A S D F G H J K L ()

Välilehti Z X C V B N M , ; ' ? Enter

Lukitse

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

VIIMEIKAINEN

1	finnish finnish	2	ADMIN	3	spanish spanish	4	french french	5
6		7		8		9		


+ LISÄÄ... LUKITSE X PERUUTA ✓ OK

Kuva 3

Tämän jälkeen:

- Kirjoita käyttäjätunnuksesi Käyttäjätunnus-kenttään (Kuva 3 **B**).
- Kirjoita salasanasasi Salasana-kenttään (Kuva 3 **C**).
- Klikkaa **Ok**-painiketta (Kuva 3 **D**).

Olet kirjautunut sisään. Kirjautunutta käyttäjää osoittava lyhenne näytetään tehtäväpalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on kuvassa 4 "FFI").

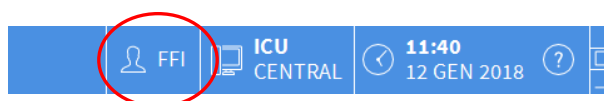

Kuva 4

1.3.1 Viivakoodikirjautuminen

Terveystieteiden tutkimuskeskus on mahdollista ottaa käyttöön sisäänkirjautuminen viivakoodinlukijan avulla.

Käytä toimintoa seuraavasti, kun järjestelmässä näkyy sisäänkirjautumissivu (Kuva 3):

- Lue käyttäjän henkilökohtainen viivakoodi.


Jos viivakoodi tunnistetaan, sinut kirjataan välittömästi sisään.

1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus-toiminto)

Jos järjestelmä on käyttämättömänä tietyn (määriteltävän) ajan, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.

Poista toiminto käytöstä seuraavasti käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamisen jälkeen mutta ennen kuin klikkaat **Ok**:

- Klikkaa **Lukitse**-painiketta sisäänkirjautumissivun komentopalkissa (Kuva 5 **A**).

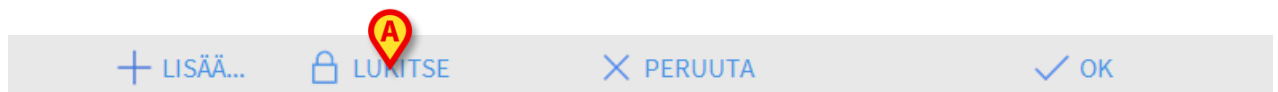

Kuva 5

Jos käyttäjä on lukittu, riippulukko näkyy käyttäjän kuvakkeen alareunassa (Kuva 6).




Kuva 6

1.4 Uloskirjautuminen

Sulkeakseen DIGISTAT®-työistunnon käyttäjän tulee kirjautua ulos järjestelmästä.

Uloskirjautuminen:

- Klikkaa komentopalkin **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 7 ja Kuva 3 **A**).

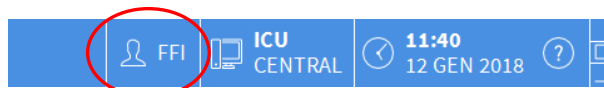

Kuva 7

Käyttäjätunnuksen lyhenne katoaa **Käyttäjä**-painikkeesta.

2. Järjestelmän käyttökatkot

Jos käynnistyksen aikana esiintyy ongelmia yhteyden saamisessa palvelimeen, järjestelmä ilmoittaa siitä Järjestelmän palautus -ikkunalla (Kuva 8).



Kuva 8

Yhteysongelmat selviävät toisinaan itsekseen hetken kuluttua. Jos eivät, ota yhteyttä ASCOM UMS:n tekniseen tukeen. ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

On olemassa harvinaisia joskin mahdollisia tapauksia, jolloin DIGISTAT®-järjestelmän käyttö on mahdotonta (esim. luonnonmullistukset, pitkät sähkökatkot tms.).

DIGISTAT®-järjestelmää käyttävien terveydenhoito-organisaatioiden tulee määritellä hätätilannemenettely tällaisten tilanteiden varalta

- 1) sairaalaosastojen toiminnan palauttamiseksi
- 2) järjestelmän palauttamiseksi käyttöön mahdollisimman pian.

ASCOM UMS tukee ja auttaa mielellään hätätilannemenettelyn kehittämisessä, mutta sen määrittely ja toteutus on terveydenhoito-organisaation vastuulla.

ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

3. DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet

DIGISTAT®-järjestelmän käyttöohjeet toimitetaan tuotteen mukana. Ne ovat luettavissa sähköisessä muodossa DIGISTAT®-järjestelmässä (ainoastaan tämä pikaopas toimitetaan paperilla). Käyttöohjeiden lukeminen:

- Klikkaa **Ohje**-painiketta komentopalkissa (Kuva 9).



Kuva 9

Näytölle avautuvalta sivulta voidaan avata

- 1) aihekohtaiset DIGISTAT®-käyttöohjeet
- 2) mahdollisiin erityisiin toimenpiteisiin liittyvät pikaohjeet.

Sähköiset asiakirjat ovat PDF-muodossa.

3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet

Digistat Smart Central -käyttöohjeet voidaan myös ladata erityiseltä internetsivulta.

Digistat Smart Central -asiakkailla on pääsy suojatulle alueelle, jolla säilytetään kaikkia käyttöohjeversioita. Käyttäjän on näin mahdollista tarkistaa, onko käyttöohjeista tullut päivitettyjä versioita. Ascom UMS/jälleenmyyjä ilmoittaa turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista ja toimittaa niissä tapauksissa päivitettyt käyttöohjeet asiakkaille.

Suojatulle alueelle pääsee ainoastaan käyttäjätunnistuksen jälkeen. Asiakkaalla on käyttäjätunnus ja salasana, jotka tulee syöttää suojatun alueen avaamiseksi. Tunnukset toimitetaan Digistat Smart Central -järjestelmän asennuksen yhteydessä tuotemerkintöjen kanssa.

Jokaista käyttöohjetta vastaa tietty koodi, jonka muoto on seuraava:

DIG DD [tuotteen nimi] IU NNNN FIN **Versio MM**

Esim.

DIG DD IU 0001 FIN **V01**

Koodin viimeiset luvut (V01) kasvavat saman käyttöohjeen päivitettyjen versioiden myötä.

Käyttöohjeista julkaistaan uusia versioita, jos niihin tehdään päivityksiä (esimerkiksi pienten virheiden tai puutteiden korjaamiseksi jne. sekä tuotteessa että asiakirjassa). Jokaista uutta tuoteversiota vastaa uusi käyttöohje (ei uusi versio vanhasta käyttöohjeesta). Tällöin myös asiakirjan koodi vaihtuu (esimerkin tuotekoodi on 0001, joka on alleviivattu).

DIG DD IU 0001 V01

Uusi asiakirja toimitetaan asiakkaalle yhdessä tuotepäivityksen kanssa.

Asiakirjan koodi lukee etusivulla ja jokaisen sivun alaviitteessä. Vastaava tuoteversio ilmoitetaan etusivulla.

Asennetun tuotteen versio ilmoitetaan Tietoja-ruudussa (etsi kappaleesta 0 Tietoja-ruudun näyttöohjeet).

Tuoteversio ilmoitetaan numerolla, esim. 3.0.1. Ensimmäiset kaksi lukua osoittavat uusia versioita ja tärkeimpiä järjestelmäpäivityksiä. Viimeinen luku osoittaa pieniä päivityksiä ja virheiden korjauksia. Käyttöohje viittaa kaikkiin tuoteversioihin, joiden kaksi ensimmäistä lukua ovat samat. Se on voimassa, jos se on viimeisin julkaistu versio ftp-sivustolla.

Jos käyttäjätunnus ja/tai salasana katoaa, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjän tekniseen tukeen puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla saadaksesi uudet tunnukset.

3.1.1 Käyttöohjeiden lataus

Käyttöohjeet voidan ladata erityiseltä Ascom-sivulta millä tahansa selaimella (esim. Explorer, Chrome, Firefox).

Lataa käyttöohjeet kirjoittamalla seuraava osoite internetselaimesi osoitekenttään:

Verkko-osoite: <https://confluence.ascom-ws.com>

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana avataksesi käyttöohjelistan.

Käyttäjätunnus – paikallisen jälleenmyyjän toimittama käyttäjätunnus

Salasana – paikallisen jälleenmyyjän toimittama salasana

Valitse Digistat ja sen jälkeen Digistat Smart Central.

Valitse tuoteversio. Aihekohtaiset käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-muodossa.

4. DIGISTAT® -järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö

DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruutu asetetaan näytölle seuraavasti:

- Klikkaa tehtäväpalkin **Valikko**-painiketta (Kuva 10 **A**)



Kuva 10


Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 11).



Kuva 11

- Klikkaa valikon **Tietoja**-painiketta (Kuva 11 **A**).

DIGISTAT®-järjestelmän Tietoja-ruutu avautuu (Kuva 12).

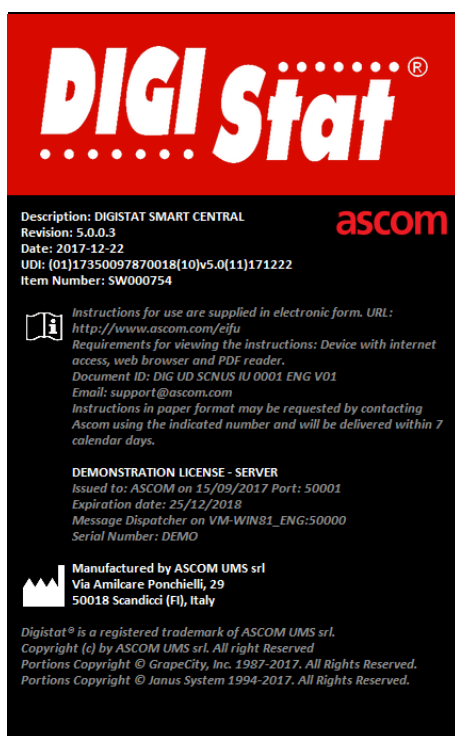

Kuva 12

4.1 Painettu käyttöohje

Asiakas voi pyytää ostamiensa tuotteiden käyttöohjeet painettuina. ASCOM UMS toimittaa pyydettyt käyttöohjeet mahdollisimman pian.

Pyyntö tulee osoittaa tekniselle tuelle. ASCOM UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

5. Yhteystiedot

Ota kaikissa tilanteissa ensin yhteyttä tuotteen asentaneeseen jälleenmyyjään.

Valmistajan yhteystiedot:

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Tekninen tuki

support@unitedms.com

800999715 (maksuton numero, vain Italia)

Myynti ja tuotetietoja

sales@unitedms.com

Yleisiä tietoja

info@unitedms.com