



Digistat Suite

Gyors referencia-útmutató

1.0 -s verzió

2022-09-02

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Olaszország

Tel.: (+39) 055 0512161 – Fax: (+39) 055 829030

www.ascom.com

Digistat Suite, 8.0-es verzió

A Digistat csomag a következő termékekből áll:

Digistat® Care, 1.3-es verzió

Digistat® Docs, 1.3-es verzió

A Digistat® Care és a Digistat® Docs gyártója az Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>).

A Digistat® Care az orvostechikai eszközökről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (MDR) szerint jelöléssel rendelkezik.  0476

Az Ascom UMS az EN ISO 13485:2016 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a következő tevékenységi körrel: „termék- és specifikációfejlesztés, gyártásirányítás, marketing, értékesítés, gyártás, telepítés és szerviz az egészségügyi ellátásban használt információs, kommunikációs és munkafolyamat-szoftvermegoldások területén, beleértve az orvosi eszközökkel és a betegekkel kapcsolatos információs rendszerekkel való integrációt”.

Szoftverlicenc

A Digistat® csomag csak az Ascom UMS vagy a forgalmazó érvényes licencének beszerzése után használható.

Licencek és bejegyzett védjegyek

A Digistat® az Ascom UMS védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

E kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, továbbítható, másolható, rögzíthető és fordítható le semmilyen formában, semmilyen eszközzel, semmilyen adathordozón az Ascom UMS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tartalom

1. Indítási eljárás.....	4
1.1 Telepítés	4
1.2 A Digistat csomag futtatása ábra	4
1.3 Bejelentkezési eljárás	5
1.3.1 Vonalkódos bejelentkezés	5
1.3.2 Hogyan lehet letiltani az automatikus felhasználói kijelentkezést.....	6
1.4 Kijelentkezés.....	6
2.A rendszer elérhetetlensége	7
3.Használati utasítás	7
3.1 A felhasználói kézikönyv online frissítése	8
4.Hogyan jeleníthető meg a Névjegy mező?	8
4.1 Nyomtatott használati utasítás.....	9

1. Indítási eljárás

1.1 Telepítés

A Digistat csomagot csak az Ascom UMS szakemberei vagy az Ascom UMS által kifejezetten felhatalmazott szakemberek telepíthetik. A végfelhasználó a rendszert már telepítve és megfelelően konfigurálva találja a munkaállomásán.


1.2 A Digistat csomag futtatása ábra

A Digistat csomag futtatása:

- Kattintson duplán az  ikonra a munkaállomás asztalán.

A rendszer betöltése közben megjelenik egy indítóképernyő.

Néhány másodperc múlva megjelenik a munkaterület (1. ábra).

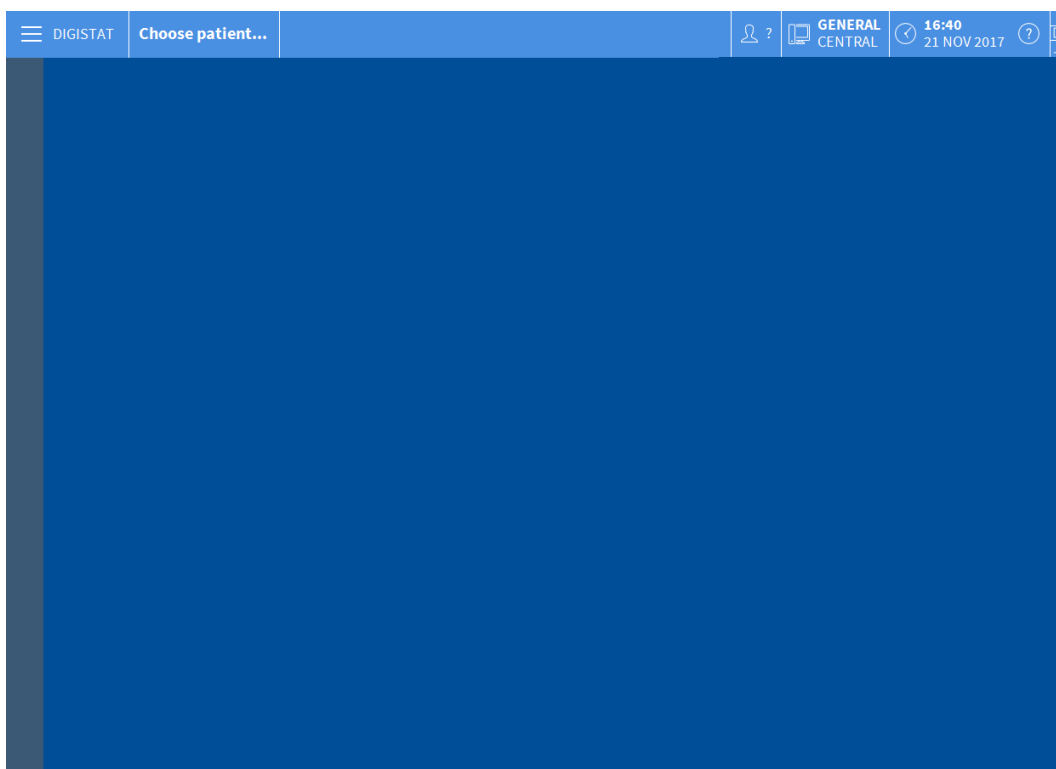

1. ábra

1.3 Bejelentkezési eljárás

A Digistat csomag használatához be kell jelentkezni a rendszerbe. A felhasználónak minden munkamenet elején be kell adnia a hitelesítő adatait (felhasználónév és jelszó).

- Kattintson a 2. ábrán **A**-val jelzett **Felhasználó** gombra. Ekkor a következő képernyő jelenik meg.

2. ábra

Ekkor a képernyőn:

- Írja be a felhasználónevét a „Felhasználónév” mezőbe (2. ábra **B**).
- Írja be a jelszavát a „Jelszó” mezőbe (2. ábra **C**).
- Kattintson az **OK** gombra (2. ábra **D**).

Ezzel a felhasználó bejelentkezett. Az aktuálisan naplózott felhasználót jelző rövidítés a vezérlősáv **Felhasználó** gombján jelenik meg (a 3. ábra esetében a rövidítés „ADM”).



3. ábra

1.3.1 Vonalkódos bejelentkezés

Lehetőség van vonalkódolvasással történő bejelentkezésre, amennyiben az egészségügyi szervezet ezt a technológiát használja.

A funkció használatához, amikor a rendszer megjeleníti a bejelentkezési képernyőt (2. ábra):

- olvassa be a felhasználó személyes vonalkódját.

Ha a vonalkódot a rendszer felismeri, a felhasználó azonnal bejelentkezik.

1.3.2 Hogyan lehet letiltani az automatikus felhasználói kijelentkezést.

Ha a rendszer egy bizonyos (konfigurálható) ideig inaktív marad, a felhasználót automatikusan kilépteti.


A funkció letiltásához a felhasználónév és a jelszó megadása után, de az OK gombra kattintás előtt az alábbiakat kell megtenni:

- Kattintson a „Bejelentkezés” („Log in”) képernyő parancssorán a **Zár (LOCK)** gombra (4. ábra **A**).



4. ábra

Ha a felhasználó le van zárva, a **Felhasználó** gombon (5. ábra) egy lakat ikon jelenik meg.

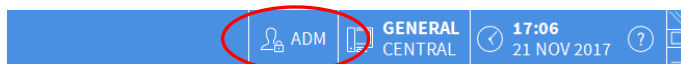

5. ábra

1.4 Kijelentkezés

A munkamenet lezárásához a felhasználónak ki kell jelentkeznie a rendszerből.

Kijelentkezés:

Kattintson a **Felhasználó** gombra a parancssávon (6. ábra és 2. ábra **A**).



6. ábra

A felhasználó rövidítése eltűnik a **Felhasználó** gombról.

2. A rendszer elérhetetlensége

Ha az indítás során problémák merülnek fel a szerverrel való kapcsolódás tekintetében, a rendszer egy speciális „Rendszer helyreállítása” ablakot nyit meg.

A kapcsolódási probléma néha rövid idő után automatikusan megoldódik. Ha nem, forduljon az Ascom UMS műszaki támogatójához. Lásd az Ascom UMS kapcsolattartóira vonatkozó 5. részt.

Ritka esetekben a rendszer használata fizikailag lehetetlenné válhat.

A Digistat csomagot használó egészségügyi szervezetnek meg kell határoznia egy vészhelyzeti eljárást az ilyen jellegű események kezelésére és:

- 1) annak lehetővé tételére, hogy a kórházi osztályok ismét működőképeseek legyenek;
- 2) mindemellett arra, hogy a lehető leghamarabb újra teljesen rendelkezésre álljon a rendszer.

Az Ascom UMS támogatást és segítséget tud nyújtani a sürgősségi eljáráshoz, de az eljárás meghatározása és végrehajtása az egészségügyi szervezet feladata.

Lásd az Ascom UMS kapcsolattartóira vonatkozó 5. részt.

3. Használati utasítás

A használati utasítást a Termékhez mellékeljük. Ezek digitális formátumban is megjeleníthetők a Digistat csomagon belül (csak az első lépések jelen útmutatóját biztosítjuk papíralapon). A használati utasítás elérése:

Kattintson a **Súgó** gombra a parancssávon (7. ábra).



7. ábra

Megnyílik egy képernyő, amely lehetővé teszi az alábbiakhoz való hozzáférést:

- 1) a vonatkozó felhasználói kézikönyvek;
- 2) esetlegesen gyors referencia-útmutatók, amelyek konkrét eljárásokra vonatkoznak.

Az online dokumentáció PDF-formátumú.

3.1 A felhasználói kézikönyv online frissítése

A felhasználói kézikönyv az internetről is letölthető. Minden ügyfél hozzáférhet egy védett területhez, amelyen a kézikönyvek összes létező verziója megtalálható. A felhasználó így ellenőrizheti, hogy létezik-e a kézikönyvének frissített változata.

A kézikönyvek letöltéséhez írja be a következő címet a böngésző címsorába:

[DIGISTAT EU v8.0 - DIGISTAT - Ascom Confluence \(ascom-ws.com\)](http://DIGISTAT EU v8.0 - DIGISTAT - Ascom Confluence (ascom-ws.com))

Ekkor megjelenik egy kezdőlap. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót a „Felhasználói kézikönyvek” („User Manuals”) listához való hozzáféréshez.

Felhasználónév (Username) – Az Ascom UMS/forgalmazó által megadott felhasználónév

Jelszó (Password) – Az Ascom UMS/forgalmazó által megadott jelszó

4. Hogyan jeleníthető meg a Névjegy mező?


A főmenü **Névjegy (About)** gombja megjelenít egy ablakot, amely tájékoztatást tartalmaz a Digistat Suite verziójára, a telepített termékekre és a kapcsolódó licencekre vonatkozóan. A Névjegy mező megjelenítése:

Kattintson a vezérlősávon a **Menü** gombra (8. ábra **A**).



8. ábra

Ekkor megnyílik egy különböző beállításokat tartalmazó menü (9. ábra).

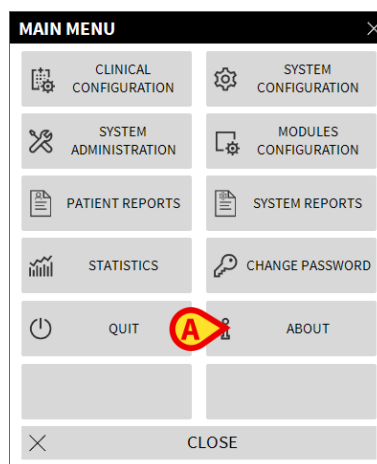

9. ábra

- Kattintson a menüben a **Névjegy** gombra (9. ábra **A**).

Ekkor megnyílik a Névjegy mező. A termék címkéje a Névjegy mező, amely azokon az ügyfél-munkaállomásokon és mobil eszközökön jelenik meg, amelyekre a Digistat Suite telepítve van.

4.1 Nyomtatott használati utasítás

Az ügyfelek kérhetik a megvásárolt termékek használati utasításainak nyomtatott változatát. Az Ascom UMS a lehető leghamarabb rendelkezésre bocsátja a kért felhasználói kézikönyveket.

A kérelmet továbbítani kell a technikai segítségnyújtóhoz. Lásd az Ascom UMS kapcsolattartóira vonatkozó 5. részt.

Bármilyen probléma esetén először a terméket telepítő forgalmazóhoz forduljon.

5. Kapcsolat

Felelős személy az Egyesült Királyságban: Ascom (UK) LTD., Wall Island, Birmingham Rd, Lichfield WS14 0QP, Egyesült Királyság

Gyártói kapcsolat:

Ascom UMS s.r.l unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Olaszország

Tel. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Műszaki segítségnyújtás

support.it@ascom.com

800999715 (díjmentesen hívható, csak Olaszországban)

Értékesítési és termékinformációk

it.sales@ascom.com

Általános információk

it.info@ascom.com