



Digistat Suite

Snabbstartguide

Revision 3.0

2022-03-21

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Digistat Suite version 7.2

Digistat omfattar en hel serie produkter:

Digistat® Care version 1.2

Digistat® Docs version 1.2

Digistat® Care och Digistat® Docs tillverkas av Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>).



Digistat® Care är ⁰⁴⁷⁶ märkt enligt direktiv 93/42/EEG (medicintekniska produkter) ändrat genom direktiv 2007/47/EG.

Ascom UMS är certifierat enligt standarder EN ISO 13485:2016 för “Product and specification development, manufacturing management, marketing, sales, production, installation and servicing of information, communication and workflow software solutions for healthcare including integration with medical devices and patient related information systems”.

Programvarulicens

Digistat® Care måste endast användas efter att ha erhållit en giltig licens från Ascom UMS eller Distributören.

Licenser och registrerade varumärken

Digistat® är ett varumärke för Ascom UMS s.r.l. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. I detta dokument betraktas Android™, Google™ och Google Play™ som varumärken ägda av Google, LLC, varje gång de nämns.

Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras, kopieras, spelas in eller översättas, i någon form, på något sätt, på något media utan skriftligt förhandstillstånd från Ascom UMS.

Innehåll

1. Uppstartsprocedur	4
1.1 Installation av Digistat	4
1.2 Hur Digistat körs	5
1.3 Inloggningsprocedur	5
1.3.1 Inloggning med streckkod	6
1.3.2 Hur automatisk utloggning av användare deaktiveras	7
1.4 Utloggning	7
2. Otillgängligt system	8
3. Manualer för Digistat	9
3.1 Uppdatering av användarmanualen på nätet	9
4. Hur Digistat-fönstret "Info om" visas	10
4.1 Tryckta användarmanualer	10
5. Kontakter	11

1. Uppstartsprocedur

1.1 Installation av Digistat

Digistat systemet får endast installeras av tekniker från Ascom UMS eller tekniker som uttryckligen har auktoriserats av Ascom UMS. Vid leverans är systemet redan installerat och korrekt konfigurerat på slutanvändarens arbetsstation.

1.2 Hur Digistat körs

Köra Digistat

- Dubbelklicka på ikonen  på arbetsstationens skrivbord.

Följande fönster visas under tiden som systemet laddar.

Efter några sekunder visas Digistat arbetsområdet (Fig. 1).

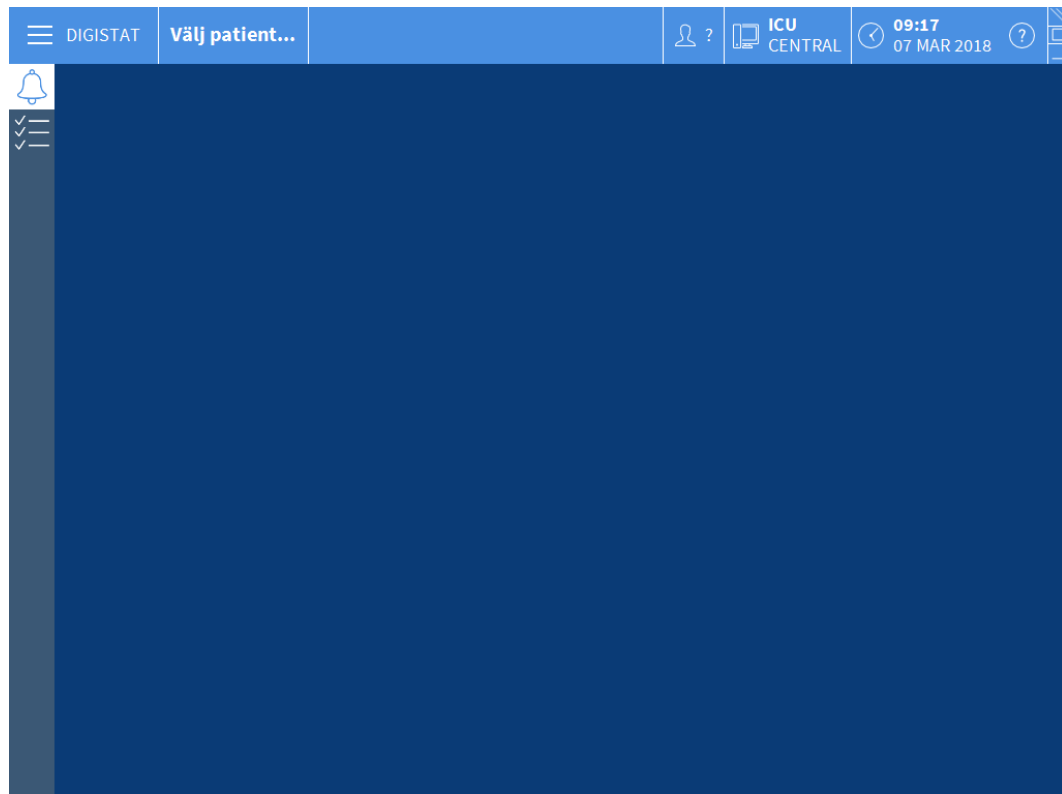


Fig. 1

1.3 Inloggningsprocedur

För att använda Digistat är det nödvändigt att logga in till systemet. Närmare bestämt ska användaren mata in sina autentiseringsuppgifter (användarnamn och lösenord). För att logga på varje arbetssession

- Klicka på knappen **Användare** i Fig. 2 **A**. Följande skärmbild visas.

Fig. 2

Gör sedan följande på skärmbilden:

- Mata in ditt användarnamn i fältet Användarnamn (Fig. 2 **B**).
- Mata in ditt lösenord i fältet Lösenord (Fig. 2 **C**).
- Klicka på knappen **Ok** (Fig. 2 **D**).

Användaren är nu inloggad. En akronym som indikerar den aktuella inloggade användaren visas på knappen **Användare** i kontrollfältet (akronymen är SSW i Fig. 3).



Fig. 3

1.3.1 Inloggning med streckkod

Om sjukvårdsstrukturerna använder denna typ av teknik går det att logga in genom att skanna in den personliga streckkoden.

För att använda denna funktion när systemet visar skärmbilden Inloggning (Fig. 2)

- Skanna in användarens personliga streckkod.

Om streckkoden känns igen, loggas användaren in omedelbart.

1.3.2 Hur automatisk utloggning av användare deaktiveras

Om systemet inte används under en viss tid (kan konfigureras) loggas användaren automatiskt ut.

För att deaktivera denna funktion är det nödvändigt att göra följande efter inmatningen av användarnamnet och lösenordet och innan användaren klickar på **Ok**

- Klicka på knappen **Lås** i kommandofältet på skärmbilden Inloggning (Fig. 4 **A**).

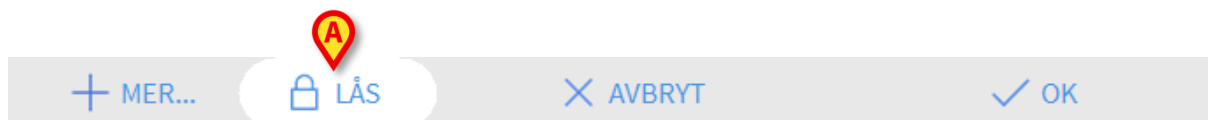


Fig. 4

Om användaren är låst ett lås visas på kommandofältet (Fig. 5).



Fig. 5

1.4 Utloggning

För att avsluta arbetet på en arbetssession med Digistat måste användaren logga ut från systemet.

För att logga ut:

- Klicka på knappen **Användare** i kommandofältet (Fig. 6 och Fig. 2 **A**).



Fig. 6

Användarakronymen försvinner från knappen **Användare**.

2. Otillgängligt system

Om det under uppstarten finns problem med anslutningen till servern visar systemet ett specifikt fönster: Systemåterställning.

Ibland åtgärdas anslutningsproblemet automatiskt efter en kort stund. Kontakta Ascom UMS tekniska service om så inte är fallet. Se avsnitt 5 för Ascom UMS kontakter.

Det finns ovanliga, men möjliga, fall där det är fysiskt omöjligt att använda Digistat systemet.

Sjukvårdsstrukturen som använder Digistat ska fastställa ett förfarande vid nödsituationer för att ta itu med denna typ av händelser så att:

1. Sjukhusavdelningarna åter kan fungera.
2. Systemets tillgänglighet återställs så fort som möjligt.

Ascom UMS kan ge stöd och service i samband med förfarandet vid nödsituationer, men sjukvårdsstrukturen ansvarar för fastställandet och utförandet av förfarandet.

Se avsnitt 5 för Ascom UMS kontakter.

3. Manualer för Digistat

Användarmanualen för Digistat systemet medföljer produkten. Den kan visas i digitalt format i Digistat systemet (endast denna snabbstartguide finns i pappersformat). För att komma åt användarmanualen

- Klicka på knappen **Hjälp** i kommandofältet (Fig. 7).



Fig. 7

En skärmbild öppnas så att du kan komma åt:

- 1) De aktuella användarmanualerna för Digistat.
- 2) Eventuella snabbreferensguider som avser specifika procedurer.

Online-dokumentationen är i PDF-format.

3.1 Uppdatering av användarmanualen på nätet

Användarmanualen om systemet Digistat kan även laddas ned från internet på en speciell FTP-sida. Varje Digistat-kund har ett reserverat område med samtliga befintliga versioner av användarmanualerna. Användaren kan på det sättet kontrollera om det finns en uppdaterad version jämfört med aktuell användarmanual. Du behöver mata in följande adress för att ladda ned användarmanualerna:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v7.2>

Det visas då en välkomstsida. Du behöver nu mata in inloggningsuppgifterna (Användarnamn och Lösenord).

Användarnamn – Användarnamn erhålls från Ascom UMS/distributör

Lösenord – Lösenord erhålls från Ascom UMS/distributör

4. Hur Digistat-fönstret ”Info om” visas

- Klicka på knappen **Meny** i kontrollfältet (Fig. 8 **A**)



Fig. 8

En meny med olika alternativ öppnas (Fig. 9).



Fig. 9

- Klicka på knappen **Info om** i menyn (Fig. 9 **A**).

Digistat fönstret Info om öppnas.

4.1 Tryckta användarmanualer

Kunden kan beställa en tryckt version av användarmanualerna för de inköpta produkterna. Ascom UMS skickar de beställda manualerna så fort som möjligt.

Beställningen ska göras hos den tekniska servicen. Se avsnitt 5 för listan över Ascom UMS kontakter.

5. Kontakter

Kontakta vid eventuella frågor först och främst distributören som installerade produkten.

Här är tillverkarens kontaktuppgifter:

Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italien

Tfn (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Teknisk service

support.it@ascom.com

800999715 (gratisnummer, endast Italien)

Försäljnings- och produktinformation

it.sales@ascom.com

Allmän information

it.info@ascom.com