



# Digistat Suite

## Hızlı Referans Kılavuzu

Versiyon 4.0

2023-06-22

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

**Digistat Suite versiyon 8.2**

Digistat Suite iki üründen oluşur:

Digistat® Care versiyon 1.5

Digistat® Docs versiyon 1.5

Digistat® Care ve Digistat® Docs Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>) tarafından üretilmektedir.

Digistat® Care, tıbbi cihazlara (MDR) ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi

Yönetmeliği (AB) 2017/745 uyarınca  0476 işaretlenmiştir.

Ascom UMS EN ISO 13485:2016 uyarınca şu kapsamda belgelendirilmiştir: "Tıbbi cihazlar ve hastayla ilgili bilgi sistemleri ile entegrasyon dahil olmak üzere sağlık hizmetleri için ürün ve spesifikasyon geliştirme, üretim yönetimi, pazarlama, satış, üretim, kurulum ve bilgi, iletişim ve iş akışı yazılım çözümlerinin sunulması".

**Yazılım lisansı**

Digistat® Care, yalnızca Ascom UMS veya Distribütörden geçerli bir lisans alındıktan sonra kullanılmalıdır.

**Ticari markalar ve telif hakları**

Digistat® Ascom UMS'nin Ticari Markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu yayının hiçbir bölümü, Ascom UMS'nin önceden yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde, herhangi bir ortamda çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, kaydedilemez veya tercüme edilemez.

# İçerik

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Başlatma prosedürü .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| 1.1 Kurulum .....                                                         | 4         |
| 1.2 Kullanıcı Kılavuzları.....                                            | 4         |
| 1.3 Digistat Suite nasıl çalıştırılır .....                               | 5         |
| 1.4 Oturum Açma prosedürü .....                                           | 6         |
| 1.4.1 Barkod girişi.....                                                  | 7         |
| 1.4.2 Otomatik kullanıcı oturumu kapatma ("Kullanıcı kilidi" işlevi)..... | 7         |
| 1.5 Oturumu kapat.....                                                    | 7         |
| <b>2. Sistem kullanılamıyor .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>3. Kullanım Talimatları .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 3.1 Kullanım kılavuzunun çevrimiçi güncellemesi .....                     | 9         |
| 3.2 Basılı Kullanım Talimatları.....                                      | 9         |
| <b>4. Hakkında Kutusu nasıl görüntülenir? .....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>5. Temas Noktaları .....</b>                                           | <b>11</b> |

## 1. Başlatma prosedürü

### 1.1 Kurulum

Digistat Suite yalnızca Ascom UMS teknisyenleri veya Ascom UMS tarafından açıkça yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından kurulabilir. Son kullanıcı, sistemi kendi iş istasyonunda kurulu ve uygun şekilde yapılandırılmış olarak bulacaktır.

### 1.2 Kullanıcı Kılavuzları

Bu bölümde Digistat Suite'e ait ürünlerin güvenli kullanımı için kullanıcıların okuması gereken belgeler hakkında bilgi verilmektedir.

- Digistat Care kullanıcıları şu belgeleri okumalıdır:

*USR TUR Digistat Care* - Bu belge, tüm Digistat Care modüllerinin Kullanım Kılavuzlarının anlaşılması ve güvenli kullanımı için gereklidir. Ürün üzerinde gerçekleştirilen risk analizinden gelen risk kontrol önlemleri olarak tanımlanan Uyarılar ve Güvenlik Tavsiyeleri de içerir. Digistat Care'in tüm Kullanım Kılavuzları bu belgeye dayanır ve bu belgeden ayrı olarak kullanılamaz.

- Digistat Docs kullanıcıları şu belgeleri okumalıdır:

*USR TUR Digistat Docs* - Bu belge, tüm Digistat Docs modüllerinin Kullanım Kılavuzlarının anlaşılması ve güvenli kullanımı için gereklidir. Ürün üzerinde gerçekleştirilen risk analizinden gelen risk kontrol önlemleri olarak tanımlanan Uyarılar ve Güvenlik Tavsiyeleri de içerir. Digistat Docs'un tüm Kullanım Kılavuzları bu belgeye dayanır ve bu belgeden ayrı olarak kullanılamaz.

- Tüm kullanıcılar şu belgeleri okumalıdır:

*USR TUR Control Bar (Kontrol Çubuğu)* - tüm Digistat Masaüstü yapılandırmalarında aynı olan Digistat Kontrol Çubuğu özelliklerini ve prosedürlerini açıklar.

*USR TUR Control Bar Web* - tüm Digistat Web yapılandırmalarında aynı olan Digistat Kontrol Çubuğu Web özelliklerini ve prosedürlerini açıklar.

*USR TUR Mobile Launcher* - Digistat Mobile ortamını ve tüm Digistat Mobile konfigürasyonlarında aynı olan Mobile Launcher modülünün kullanım talimatlarını açıklar.

*USR TUR Patient Explorer (Hasta Gezgini)* - Hasta veri arşivlerini yönetmeye ve sağlık kuruluşunda halihazırda mevcut olan hasta veri arşivleri ile arayüz oluşturmaya olanak tanıyan Hasta Gezgini modülünün özelliklerini ve prosedürlerini açıklar.

*USR ENG Patient Explorer Web* - Hasta veri arşivlerinin bir web ortamında yönetilmesine ve sağlık kuruluşunda halihazırda mevcut olan hasta veri arşivleriyle arayüz oluşturulmasına olanak tanıyan Hasta Gezgini Web modülünün özelliklerini ve prosedürlerini açıklar.

Tüm kullanıcıların okuması zorunlu olan bu belgelerin yanı sıra, ayrıca her Digistat Suite kurulumuna ait modüllerin kullanım talimatları da okunmalıdır. Örneğin, Yoğun Bakım

yapılandırması için Digistat Tedavi (Therapy), Digistat Günlük (Diary) Web/Mobile ve Digistat Sıvı Dengesi (Fluid Balance) modülleri kurulabilir. Bu durumda Digistat Suite kullanıcıları bu modüllerin her biriyle ilgili kullanım kılavuzlarını da okumalıdır.

Standart Digistat Çözümlerinin bazı örneklerini, ilgili kullanım kılavuzlarındaki göstergelerle birlikte burada bulabilirsiniz:

[Digistat Solutions - DIGISTAT - Ascom Confluence \(ascom-ws.com\)](https://ascom-ws.com/DIGISTAT-Solutions-DIGISTAT-Ascom-Confluence)

Digistat Suite sürüm 8.2'nin tüm kullanım kılavuzlarına buradan ulaşabilirsiniz:

[DIGISTAT EU v8.2 - DIGISTAT - Ascom Confluence \(ascom-ws.com\)](https://ascom-ws.com/DIGISTAT-EU-v8.2-DIGISTAT-Ascom-Confluence)


### 1.3 Digistat Suite nasıl çalıştırılır

Digistat Suite'i çalıştırmak için:

- İş istasyonu masaüstündeki  simgesine çift tıklayın.

Sistem yüklenirken bir başlangıç ekranı görüntülenir.

Birkaç saniye sonra çalışma alanı görüntülenir (Şekil 1).

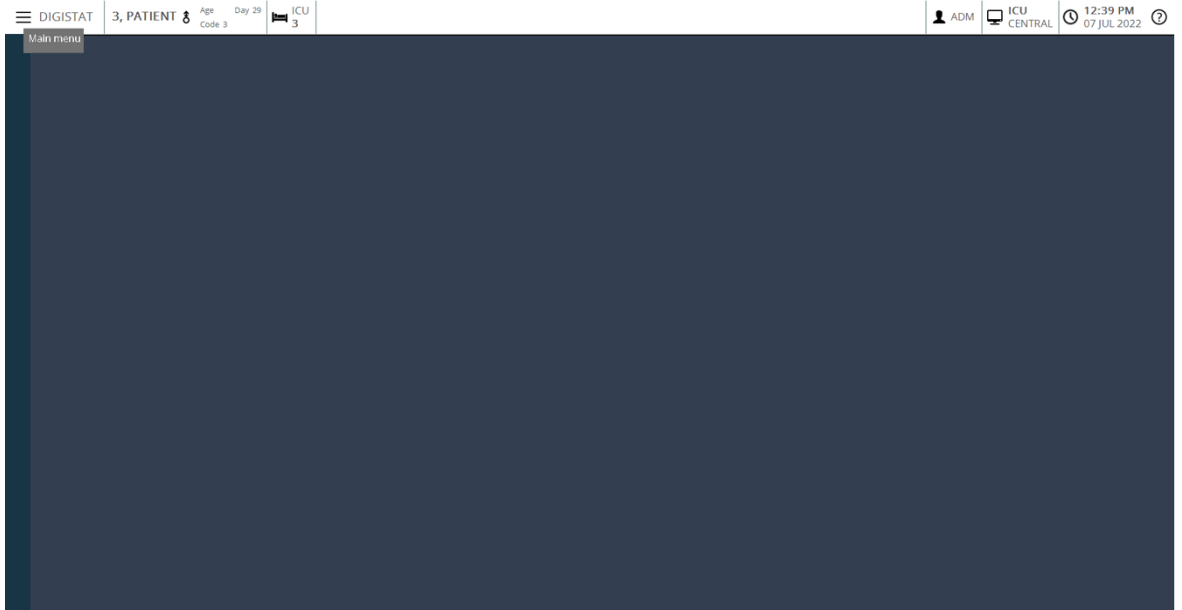

Şekil 1

## 1.4 Oturum Açma prosedürü

Digistat Suite'i kullanmak için sistemde oturum açmak gerekir. Kullanıcı her çalışma oturumunun başında kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) girmelidir.

- Şekil 2 A'da gösterilen **Kullanıcı** düğmesine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

USERNAME

PASSWORD

Q W E R T Y U I O P " Backspace

A S D F G H J K L ( )

Tab Z X C V B N M , : ? Enter

Lock + - = Del

RECENT

|   |       |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|-------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 | ADMIN | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 6 |       | 7 |  | 8 |  | 9 |  |   |  |
|   |       |   |  |   |  |   |  |   |  |

+ MORE... LOCK X CANCEL ✓ OK

Şekil 2

Sonra, ekranda:

- Kullanıcı adınızı "Kullanıcı Adı" alanına girin (Şekil 2 B).
- Şifrenizi "Şifre" alanına girin (Şekil 2 C).
- **Tamam** düğmesine tıklayın (Şekil 2 D).

Kullanıcı artık oturum açmıştır. O anda oturum açmış olan kullanıcıyı gösteren bir kısaltma, kontrol çubuğundaki **Kullanıcı** düğmesinde görüntülenir (kısaltması, Şekil 3'te görülen "ADM"dir).

ADM ICU CENTRAL 12:52 PM 07 JUL 2022

Şekil 3

### 1.4.1 Barkod giriři

Saęlık kuruluřunun bu teknolojiyi kullandığı yerlerde barkod tarama yoluyla giriř yapmak mümkündür.

Bu iřlevi kullanmak için, sistem oturum açma ekranını gösterdiğinde (řekil 2),

- kullanıcının kiřisel barkodunu tarayın.

Barkod tanınırsa kullanıcı hemen oturum açmı olur.

### 1.4.2 Otomatik kullanıcı oturumu kapatma ("Kullanıcı kilidi" iřlevi)

Sistem belirli bir süre boyunca bořta kalırsa (bu süre yapılandırılabilir), kullanıcının oturumu otomatik olarak kapatılır.

Bu iřlevi devre dıřı bırakma iřlemi, kullanıcı adı ve řifre belirlendikten sonra ve **Tamam**'a tıklamadan önce yapılmalıdır,

- "Oturum Aç" ekranı komut çubuęundaki **Kilit**le düęmesine tıklayın (řekil 4 **A**).



řekil 4

Kullanıcı kilitliyse, kullanıcı düęmesinde bir asma kilit simgesi gösterilir (řekil 5).



řekil 5

### 1.5 Oturumu kapat

Bir çalışma oturumunu kapatmak için kullanıcının sistemden "çıkıř" yapması gerekir.

Oturumu kapatmak için:

- Komut çubuęundaki **Kullanıcı** düęmesine tıklayın (řekil 6 ve řekil 2 **A**).



řekil 6

Kullanıcı kısaltması **Kullanıcı** düęmesinden kaybolur.

## 2. Sistem kullanılamıyor

Başlatma sırasında sunucuya bağlanmada sorun yaşanırsa, sistem özel bir "Sistem kurtarma" penceresi açar.

Bağlantı sorunu bazen kısa bir süre sonra otomatik olarak çözülür. Çözülmezse, lütfen Ascom UMS teknik yardım ile iletişime geçin. Ascom UMS iletişim bilgileri için bölüm 5'e bakınız.

Nadir durumlarda sistemi kullanmak fiziksel olarak imkansız olabilir.

Digistat Suite kullanan sağlık kuruluşu, bu tür olayların üstesinden gelmek için bir acil durum prosedürü tanımlamalıdır ve

- 1) Hastane departmanlarının yeniden faaliyete geçmesini sağlamalı;
- 2) Sistemi mümkün olan en kısa sürede yeniden tam işler hale getirmelidir.

Ascom UMS acil durum prosedürü için destek ve yardım sağlayabilir, ancak prosedürün tanımlanması ve yürütülmesinden sağlık kuruluşu sorumludur.

Ascom UMS iletişim bilgileri için bölüm 5'e bakınız.



### 3. Kullanım Talimatları

Kullanım talimatları Ürün ile birlikte verilmektedir. Bunlar, Digistat Suite içinde dijital formatta görüntülenebilir (sadece bu hızlı başlangıç kılavuzu kağıt üzerinde sunulur). Kullanım talimatlarına erişmek için:

- Komut çubuğundaki **Yardım** düğmesine tıklayın (Şekil 7)



Şekil 7

Bir ekran açılır ve:

- 1) İlgili kullanım kılavuzlarına;
- 2) Belirli prosedürlere atıfta bulunan hızlı başvuru kılavuzlarına erişilebilir.

Çevrimiçi belgeler PDF formatındadır.

#### 3.1 Kullanım kılavuzunun çevrimiçi güncellemesi

Kullanım kılavuzu internetten de indirilebilir. Her müşteri, kılavuzların mevcut sürümlerinin bulunduğu korumalı bir alana erişebilir. Kullanıcı böylece kılavuzun güncellenmiş bir versiyonunun olup olmadığını kontrol edebilir.

Kılavuzları indirmek için web tarayıcınızın adres çubuğuna aşağıdaki adresi yazın:

[DIGISTAT EU v8.2 - DIGISTAT - Ascom Confluence \(ascom-ws.com\)](http://DIGISTAT EU v8.2 - DIGISTAT - Ascom Confluence (ascom-ws.com))

Ana sayfa görüntülenir. Kullanıcı Kılavuzları listesine erişmek için kullanıcı adı ve şifresini girin.

**Kullanıcı Adı** - Ascom UMS/Distribütör tarafından verilen kullanıcı adı

**Şifre** - Ascom UMS/Distribütör tarafından verilen şifre

#### 3.2 Basılı Kullanım Talimatları

Müşteriler, satın aldıkları ürünler için kullanım kılavuzlarının basılı bir versiyonunu talep edebilirler. Ascom UMS/Distribütörleri, talep edilen kılavuzları mümkün olan en kısa sürede gönderecektir.

Talep, teknik desteğe iletilmelidir. Ascom UMS irtibat kişilerinin listesi için bölüm 5'e bakınız.

#### 4. Hakkında Kutusu nasıl görüntülenir?


Ana menüdeki **Hakkında** düğmesi Digistat Suite sürümü, yüklü ürünler ve ilgili lisanslar hakkında bilgi içeren bir pencere görüntüler. Hakkında Kutusunu görüntülemek için:

- Kontrol Çubuğundaki **Menü** düğmesine tıklayın (Şekil 8 A)



Şekil 8

Farklı seçenekler içeren bir menü açılır (Şekil 9).

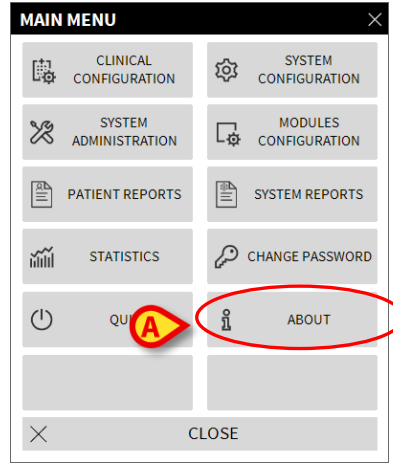

Şekil 9

- Menüdeki **Hakkında** düğmesine tıklayın (Şekil 9 A).

Hakkında Kutusu açılır. Ürünün asıl etiketi, Digistat Suite'in kurulu olduğu istemci iş istasyonlarında ve mobil cihazlarda görüntülenen Hakkında Kutusunda yer alır.

## 5. Temas Noktaları

Herhangi bir sorun için lütfen önce Ürünü kuran Distribütöre başvurun.

İmalatçı iletişim bilgileri:

**Ascom UMS s.r.l unipersonale**

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), İtalya

Tel. (+39) 055 0512161

Faks (+39) 055 8290392

**Teknik yardım**

[support.it@ascom.com](mailto:support.it@ascom.com)

800999715 (ücretsiz, sadece İtalya)

**Satış ve ürün bilgileri**

[it.sales@ascom.com](mailto:it.sales@ascom.com)

**Genel bilgi**

[it.info@ascom.com](mailto:it.info@ascom.com)