



# **Control Bar**

# **Felhasználói kézikönyv**

**1.0-es verzió**

**2022-09-02**

# Tartalomjegyzék

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Control Bar</b>                        | <b>3</b> |
| 1.1 A Digistat Suite – áttekintés            | 3        |
| 1.2 Érintőképernyő                           | 4        |
| 1.3 A Digistat csomag indítása               | 4        |
| 1.4 A munkaterület                           | 5        |
| 1.4.1 Egy modul kiválasztása                 | 6        |
| 1.5 Hozzáférés a Digistat csomaghoz          | 6        |
| 1.5.1 Az automatikus kijelentkezés letiltása | 7        |
| 1.5.2 Legutóbbi felhasználók                 | 8        |
| 1.5.3 A „Felhasználói lista” használata      | 9        |
| 1.6 „Control Bar”                            | 11       |
| 1.6.1 Betegadatok előzmények közé helyezése  | 12       |
| 1.6.2 Tesztkörnyezet jelző                   | 12       |
| 1.6.3 Felhasználói probléma jelentése        | 13       |
| 1.6.4 A „Beteg” gomb leolvasása              | 14       |
| 1.6.5 Többmonitoros funkcionalitás           | 15       |
| 1.7 Súly                                     | 17       |
| 1.8 A Browser modul                          | 17       |
| 1.9 Főmenü                                   | 18       |
| 1.9.1 Betegjelentések                        | 19       |
| 1.9.2 Jelentések nyomtatása                  | 19       |
| 1.9.3 Statisztika                            | 26       |
| 1.9.4 Jelszó módosítása                      | 26       |
| 1.9.5 Névjegy                                | 27       |
| 1.9.6 Kilépés                                | 27       |

# 1. Control Bar



---

*A termék környezetére, az óvintézkedésekre, figyelmeztetésekre és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó információkért lásd: **USR HUN Digistat Care** (a Digistat Suite EU esetében) vagy **USR ENG Digistat Suite NA** (a Digistat Suite NA esetében). A jelen dokumentumban ismertetett Control Bar megfelelő és biztonságos használatához elengedhetetlen e dokumentumok ismerete és megértése.*

---

## 1.1 A Digistat Suite – áttekintés

A Digistat Suite egy moduláris PDMS, amely a betegadatok kezelésével kapcsolatos igények kielégítésére szolgáló megoldások létrehozására szolgál. A különböző megoldások a csomag részét képező szükséges modulok segítségével jönnek létre. Az adott egészségügyi szervezet igényeinek és céljainak megfelelően választhat, hogy az összes rendelkezésre álló modult vagy csak egy részhalmazukat kapcsolja be.

A Digistat Control Bar egy olyan modul, amely munkakörnyezetet biztosít más modulok számára, és a Digistat Suite összes megoldásához szükséges.

## 1.2 Érintőképernyő

A Digistat csomag érintőképernyős és nem érintőképernyős munkaállomásokon egyaránt futtatható. Ugyanazok az eljárások ujjal vagy egérrel is elvégezhetők. Ebben a kézikönyvben az „egér” terminológiát használjuk, például a „koppintás” helyett a „kattintás” kifejezéseket. Íme egy gyors fordítási táblázat, amely lehetővé teszi, hogy ezt a kézikönyvet mindenféle munkaállomásra és felhasználói preferenciára alkalmazza. Ha bizonyos gesztusok bizonyos képernyőkhöz/funkciókhoz alkalmazhatók, akkor azt a megfelelő kontextusban kiemeljük. Általánosságban a fő műveletek így fordíthatók le:

| Egér                    | Érintőképernyő      |
|-------------------------|---------------------|
| Kattintás               | Koppintás           |
| Dupla kattintás         | Dupla koppintás     |
| Húzás                   | Pöccintés           |
| Görgetősávok használata | Görgetés            |
| Nagyítás                | Két ujjas koppintás |

## 1.3 A Digistat csomag indítása

A Digistat csomag indítása:

- Kattintson duplán az asztali ikonra (1. ábra)



1. ábra


A rendszer betöltése közben megjelenik egy indítóképernyő.

Ezután megnyílik a munkaterület. Ha ez nem történik meg, egy külön ablak figyelmezteti a felhasználót a lehetséges okra.

## 1.4 A munkaterület

A munkaterületet a vezérlősáv határozza meg és zárja körül, mely modul a Digistat csomag minden telepítésénél közös eszköz (2. ábra).


A Control Bar Web egy vízszintes parancssávból (melynek neve: „Control Bar“ 2. ábra **A**), egy bal oldali függőleges kiválasztó sávból („Oldalsáv“ – 2. ábra **B**) és egy középső munkaterületből áll. A telepített modulok különböző képernyőit a munkaterületen (2. ábra **C**) jelennek meg.

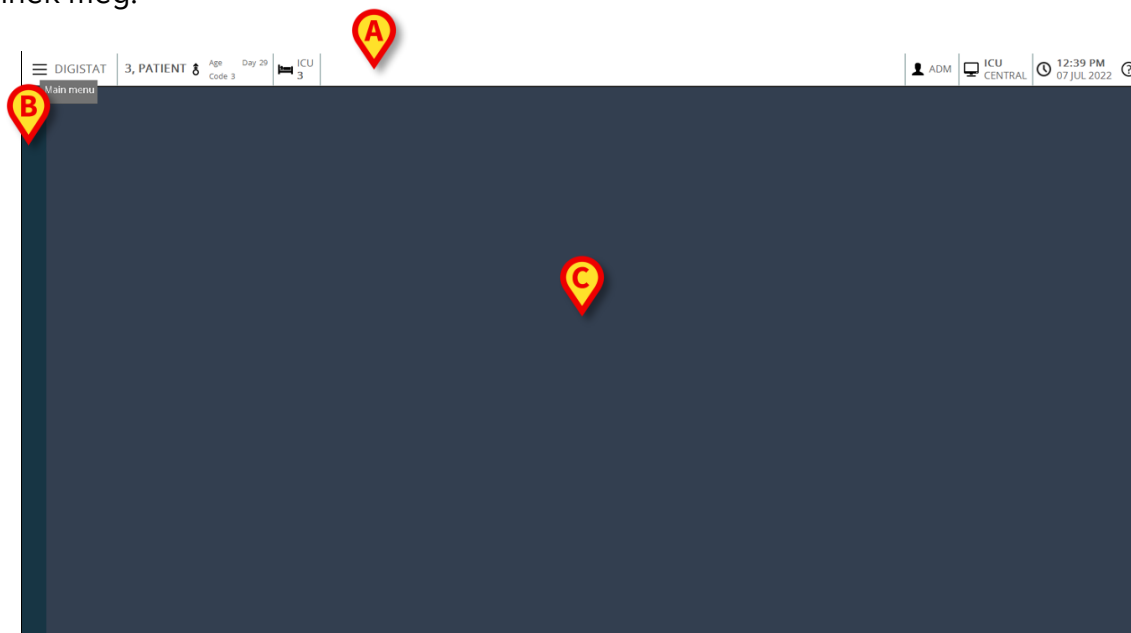

2. ábra

A parancssávot (2. ábra **A**) a(z) 1.4.1 és azt követő bekezdésekben ismertetjük.

Az oldalsávban az aktuálisan rendelkezésre álló modulok ikonjai jelennek meg (pl. lásd: 3. ábra).

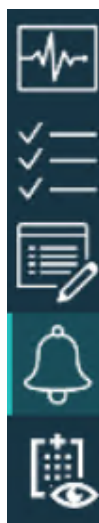

3. ábra

Az aktuálisan kiválasztott modul ki van jelölve.

## 1.4.1 Egy modul kiválasztása

Egy modul kiválasztása:

- Kattintson a megfelelő ikonra- az oldalsávon.

Ekkor az ikon kiemelten jelenik meg, és a modul funkciói megjelennek a munkaterületen. Egy adott modul kiválasztása csak a felhasználó bejelentkezése után lehetséges (lásd a következő bekezdést).

## 1.5 Hozzáférés a Digistat csomaghoz

A Digistat Suite csak felhasználónév és jelszó megadásával érhető el („Bejelentkezés” eljárás).

Ezért minden munkamenet elején a **Felhasználó** gombra (4. ábra **A**) kell kattintani. Ekkor a következő képernyő jelenik meg.

The screenshot shows the Digistat login interface. At the top, there is a header bar with the 'DIGISTAT' logo, a 'Choose patient...' dropdown, and a user profile icon labeled 'A'. Below the header, there are input fields for 'USERNAME' (labeled 'B') and 'PASSWORD' (labeled 'C'). A keyboard is displayed in the center of the screen. At the bottom, there is a 'RECENT' list with five entries, the first of which is 'ADMIN'. Below the list are buttons for '+ MORE...', 'LOCK', 'X CANCEL' (labeled 'E'), and '✓ OK' (labeled 'D').

4. ábra

Hozzáférés a rendszerhez:

- Írja be a felhasználónevét a „**Felhasználónév**” mezőbe (4. ábra **B**)
- Írja be a jelszavát a „**Jelszó**” mezőbe (4. ábra **C**).
- Kattintson az **OK** gombra (4. ábra **D**).

Ezzel a felhasználó bejelentkezett. A művelet megszakítása:


- Kattintson a **Mégse** gombra (4. ábra **E**).



A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda adja meg. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a Digistat csomag használatára.

A felhasználó a felhasználónevet és a jelszavát a képernyőn megjelenő virtuális billentyűzet (az egérrel kattintva vagy érintőképernyő használata esetén a betűk megérintésével) vagy a munkaállomás billentyűzetének segítségével adhatja meg.

A rendszerbe való belépés után a bejelentkezett felhasználónak megfelelő betűszó jelenik meg a „Control Bar” **Felhasználó** gombján (a(z) 5. **A** esetén ez a betűszó: ADM).

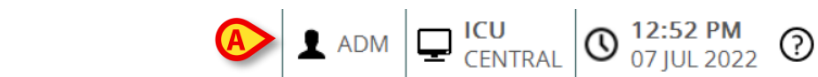

5. ábra



Az a felhasználó, akinek a hitelesítő adatai megjelennek a **Felhasználó** gombon, felelős a Digistat csomagban végrehajtott összes műveletért. A termék nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja az éles rendszerben lévő munkaállomást.

Kijelentkezés:

- Kattintson a munkamenet közben a **Felhasználó** gombra.

Ha erre a gombra kattint, a felhasználó kapcsolata megszakad, és a felhasználó rövidítése eltűnik a gombról.

Az újbóli bejelentkezéshez kattintson ismét a **Felhasználó** gombra. A(z) 4. ábra által bemutatott képernyő ismét megjelenik.

A termék nem támogatja a Microsoft® Windows® „Felhasználóváltás” funkcióját. Ez azt jelenti, hogy ha például:



- Az 1. felhasználó elindítja a Digistat csomagot,
- Az 1. felhasználó átvált a 2. felhasználóra anélkül, hogy a Digistat csomagból kijelentkezne az 1. felhasználó,
- A 2. felhasználó megpróbálja elindítani a Digistat csomag új példányát.


A második példányt nem lehet elindítani, mert az első még mindig fut.

## 1.5.1 Az automatikus kijelentkezés letiltása

Ha a terméket nem használják, vagy bizonyos ideig nem használják, a felhasználót a rendszer automatikusan kilépteti (automatikus kijelentkezés). Ennek ideje egy konfigurációs paramétertől függ.

Az automatikus kijelentkezés megakadályozása érdekében a felhasználónév és a jelszó megadása után, de az **Ok** gombra való kattintás előtt a felhasználónak a következőket kell tennie:

- Kattintson a „Bejelentkezés” gombsávon a zárolás gombra (6. ábra **A**).

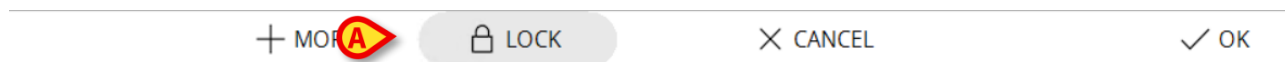

6. ábra

Ha a felhasználó le van zárva, a felhasználó ikonon (7. ábra) egy lakat jelenik meg.




7. ábra



A felhasználó számára nem ajánlott a zár funkció gyakori használata. Az automatikus kijelentkezés megvédi a rendszert az illetéktelen hozzáféréstől.

## 1.5.2 Legutóbbi felhasználók

A „Bejelentkezés” képernyő „Legutóbbiak” területe (8. ábra **A**) a rendszerhez nemrégiben hozzáférő felhasználók nevét jeleníti meg.

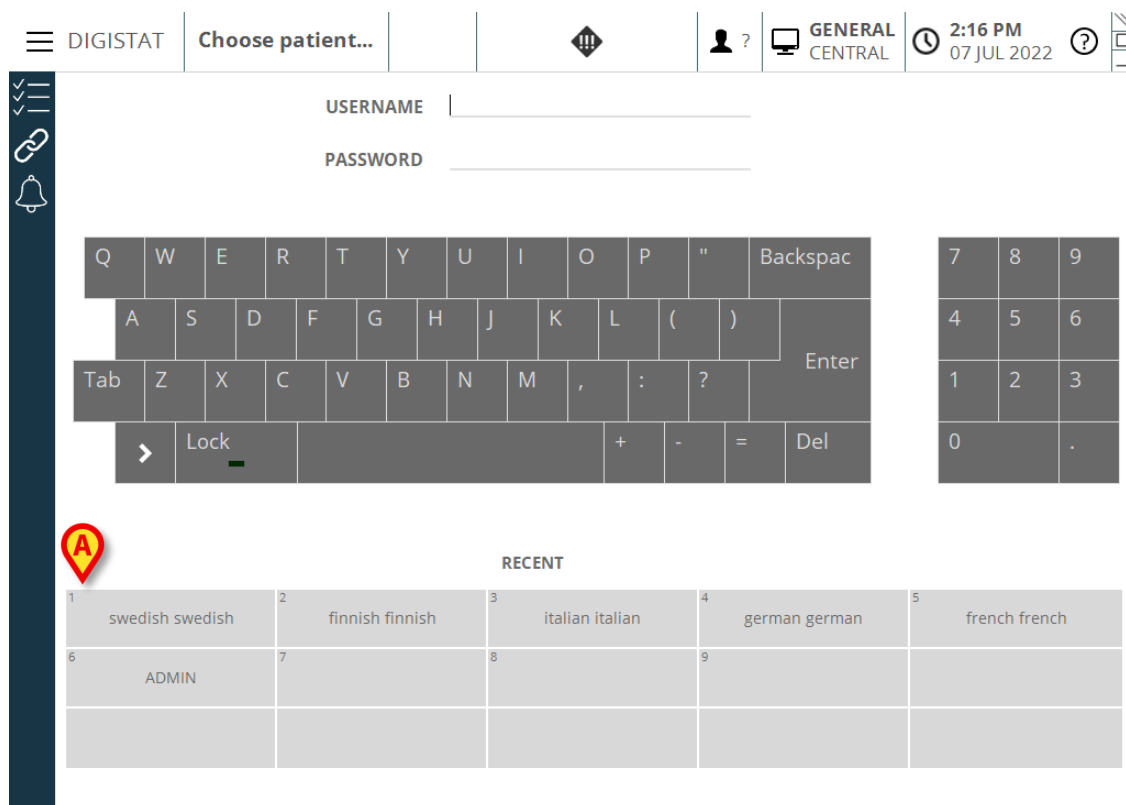


8. ábra

A terület téglalapokra van osztva. A téglalapokban a rendszerhez nemrégiben hozzáférő felhasználók nevei jelennek meg. Amikor a téglalapok közül valamelyikre **rákattint**, a „Felhasználónév” mező automatikusan kitöltődik a téglalap belsejében megjelenő névvel.

### 1.5.3 A „Felhasználói lista” használata

A parancssávon található **További** gomb (9. ábra) lehetővé teszi a lehetséges felhasználók teljes listájának megjelenítését.

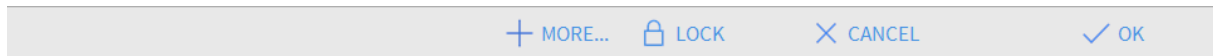


9. ábra

A „Felhasználói lista” megjelenítése:

- Kattintson a **További** gombra

Ekkor megjelenik a következő ablak (10. ábra).

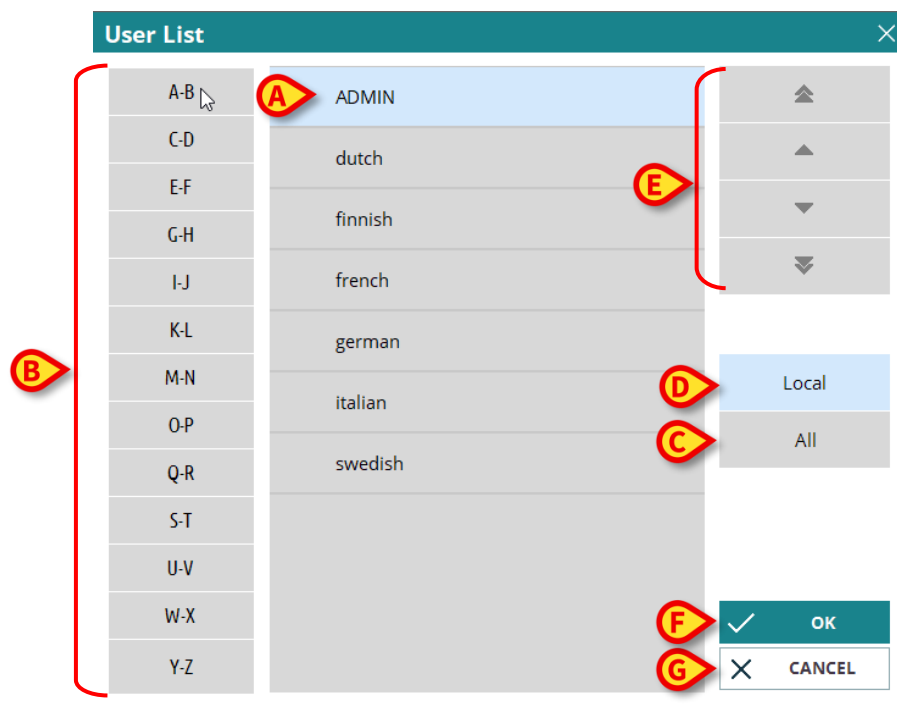

10. ábra

A(z) 10. ábra által bemutatott ablak indexkönyvként használható, amely lehetővé teszi egy felhasználó keresését és kiválasztását az összes lehetséges felhasználó listáján.

Az ablak középső részén a lehetséges felhasználók nevei láthatók betűrendben (10. ábra **B**).

Az ablak bal oldalán lévő betűk (10. ábra **B**) indexként működnek, és lehetővé teszik, hogy csak azokat a felhasználókat lássa, akiknek a neve egy adott betűvel kezdődik. Például kattintson a **C-D** gombra, hogy megjelenjen azoknak a felhasználóknak a listája, akiknek a neve C vagy D betűvel kezdődik.

Az **Összes** gomb (10. ábra **C**) segítségével megjelenik az összes lehetséges felhasználó listája.

A **Helyi** gomb (10. ábra **D**) segítségével megtekintheti az adott munkaállomáshoz tartozó felhasználók listáját, amelyen éppen dolgozik.

Az ablak jobb oldalán található nyilakkal (10. ábra **E**) görgethet fel- és lefelé a felhasználók listáján.

Felhasználó kiválasztása:

- **Kattintson** a felhasználó nevére

A név ekkor kiemelve jelenik meg, majd

- Kattintson az **OK** gombra (10. ábra **F**)

Más módon:

- **Kattintson duplán** a felhasználó nevét megjelenítő sorra

A kiválasztás után a „**Felhasználói lista**“ ablak bezárul, és a kiválasztott felhasználó neve megjelenik a „**Felhasználónév**“ mezőben a „**Bejelentkezés**“ képernyőn (4. ábra **B**).

A **Mégse** gombbal (10. ábra **G**) megszakíthatja a műveletet, és bezárhatja a „Felhasználói lista“ ablakot anélkül, hogy kiválasztaná a felhasználót.

## 1.6 „Control Bar“

A „Control Bar“ közös a Digistat csomag összes megoldásában. Az alábbiakban felsoroljuk főbb jellemzőit, a következő szakaszokban pedig részletesebben ismertetjük a funkciókat.

The screenshot shows the Digistat Control Bar interface. At the top, there is a navigation bar with icons labeled C, A, D, B, E, F, G. Below this is a login section with fields for USERNAME and PASSWORD. A virtual keyboard is displayed, including a numeric keypad on the right. At the bottom, there is a 'RECENT' list showing patient records with columns for language, name, and ID.

| RECENT |                 |   |                 |   |                 |   |               |   |               |
|--------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|
| 1      | swedish swedish | 2 | finnish finnish | 3 | italian italian | 4 | german german | 5 | french french |
| 6      | ADMIN           | 7 |                 | 8 |                 | 9 |               |   |               |
|        |                 |   |                 |   |                 |   |               |   |               |

11. ábra

- A **Beteg** gomb (11. ábra **A**) lehetővé teszi a betegválasztási funkciók elérését. Ez a gomb a beteg kiválasztása után megjeleníti a beteg nevét, és ha rendelkezésre áll, a beteg életkorát, az állandó napokat és az azonosítóját. Ha a beteget egy osztályra vették fel, az osztály neve és ágyszáma is megjelenik.
- A **Felhasználó** gomb (11. ábra **B**) a bejelentkezett felhasználó nevének kezdőbetűit jeleníti meg. A be-, illetve kijelentkezéshez kattintson a **Felhasználó** gombra.
- Kattintson a **Menü** gombra (11. ábra **C**) a következő ablak megnyitásához (12. ábra).

The screenshot shows the MAIN MENU dialog box. It contains a grid of buttons for various system functions: CLINICAL CONFIGURATION, SYSTEM CONFIGURATION, SYSTEM ADMINISTRATION, MODULES CONFIGURATION, PATIENT REPORTS, SYSTEM REPORTS, STATISTICS, CHANGE PASSWORD, QUIT, and ABOUT. There is also a CLOSE button at the bottom.

12. ábra

Az ablakban található gombok segítségével a felhasználó hozzáférhet a későbbiekben ismertetésre kerülő funkciókhoz.

- A(z) 11. ábra **C** jelzésű területet a Termék arra használja, hogy jelezze, ha a felhasználó számára vannak értesítések.
- Dátum – idő kijelzése (11. ábra **E**)
- A Súgó gomb (11. ábra **F**) segítségével hozzáférhet az online dokumentációhoz.
- A(z) 11. ábra **G** jelzéssel kiemelt kis gombok a következőkre használhatók:
  - 1) minimalizálja a Digistat csomag ablakát;
  - 2) kiválasztja a teljes képernyős megjelenítési módot;
  - 3) kiválasztja ki az ablak megjelenítési módot.



*Ez a három gomb csak akkor van jelen, ha a konfiguráció engedélyezi.*

---

### 1.6.1 Betegadatok előzmények közé helyezése

A konfigurációtól függően a lemezterület megtakarítása érdekében a betegadatok egy beállítható számú nap után archiválhatók. Az „archivált” betegek adatainak lekérése időt vesz igénybe. Ezért az „archivált” betegek kiválasztásakor egy előugró ablak jelenik meg, amely arra figyelmeztet, hogy a beteg adatait le kell kérni az archívumból, és ez több percet is igénybe vehet.

- Kattintson az **Igen** gombra az előugró ablakban a folytatáshoz.

A Digistat továbbra is használható más betegekkel, miközben a lekérési eljárás a háttérben zajlik,

Ha az eljárás befejeződött, megjelenik egy párbeszédpanel, amely arról értesíti, hogy most már ki lehet választani a beteget.



*A betegadatok helyreállítása a betegadatok méretétől és a technikai igényektől függően kiszámíthatatlan mennyiségű időt vehet igénybe.*

---


### 1.6.2 Tesztkörnyezet jelző

Ha a **Menü** gombon egy piros zászló (13. ábra **A**) jelenik meg, az azt jelenti, hogy a jelenleg használt Digistat csomag nem egy tényleges, hanem egy tesztelési/képzési/érvényesítési céllal létrehozott virtuális környezet.



*Az „tesztkörnyezeten” végzett felhasználói műveletek nem befolyásolják a tényleges „éles környezet” eljárásait.*

---

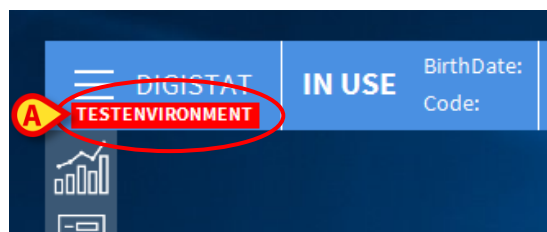


13. ábra



A zászlón megjelenő szöveg az adott licenc létrehozásakor kerül beállításra. További információért forduljon az Ascom UMS / forgalmazóhoz.

### 1.6.3 Felhasználói probléma jelentése

A konfigurációtól függően egy további ikon is jelen lehet a Control Baron (14. ábra **A**).

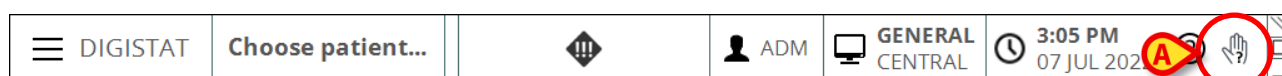

14. ábra




Az ikon jelenléte az *EnableUserIssueReporting* rendszeropciótól függ. További információkért lásd a *DSO ENG Rendszeropciók* című dokumentumot.

A Digistat csomag használatával végzett munka során a felhasználó bármikor rákattinthat a  ikonra, hogy létrehozzon egy „probléma”-jelentést, és adott esetben technikai támogatást kapjon. Ennek menete:

- Kattintson a  ikonra (14. ábra **A**). Ekkor megnyílik a következő ablak (15. ábra).

**CREATE A NEW ISSUE REPORT** ✕

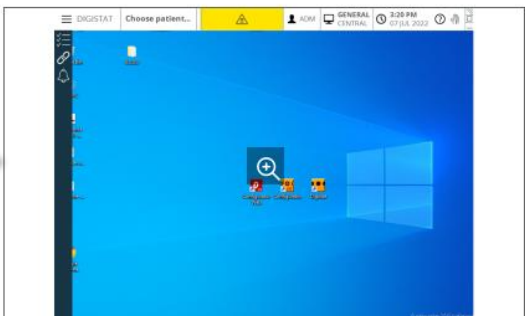

Description

 Describe the issue you have encountered and the actions that you were performing when this issue occurred

 SEND

 CANCEL

15. ábra

Ekkor az aktuális képernyő pillanatképe jelenik meg, a betegadatokat elfedésével (15. ábra **A**). Írja be a probléma leírását a „Leírás” mezőbe (15. ábra **B**). Egy további szöveg is konfigurálható, amely a felhasználók számára tájékoztatást nyújt a probléma feldolgozásának és kezelésének módjáról (15. ábra **C** – a megjelenített szöveg az adott telepítéstől függ).

- Kattintson a **KÜLDÉS** gombra a probléma értesítéséhez, vagy a **MÉGSE** gombra a művelet megszakításához (15. ábra **D**).

## 1.6.4 A „Beteg” gomb leolvasása

### Kiválasztott beteg


Ha van kiválasztott beteg, a **Beteg** gomb megjeleníti a beteg nevét, és ha rendelkezésre áll, a beteg életkorát, az állandó napokat és az azonosítóját (16. ábra **A**). A betegkiválasztási eljárásokat lásd a *USR ENG Patient Explorer* kézikönyvében.



16. ábra

### Felvett beteg


Amikor egy beteget felvesznek, a **Beteg** gomb a beteg neve mellett megjeleníti az ágy számát és annak az osztálynak a nevét, ahol a beteget felvették (17. ábra).

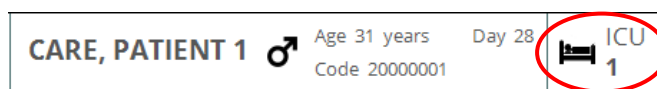

17. ábra

Az osztály neve és az ágy száma nem kerül kiemelésre, ha a beteg a munkaállomás tartományához tartozik (lásd: 17. ábra).

Az osztály neve és az ágy száma sárgával van kiemelve, ha a beteg olyan tartományban található, amely nem tartozik a munkaállomás tartományához (18. ábra – a munkaállomás tartományát a konfiguráció határozza meg).

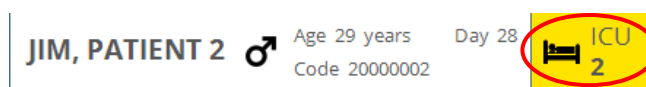

18. ábra



Minden munkaállomás úgy van konfigurálva, hogy egy sor „ágyhoz” (tartományhoz) legyen hozzárendelve. A felhasználó csak azokon a betegeken végezhet bizonyos műveleteket, akiket az ebbe a készletbe tartozó ágyra vettek fel. A **BETEG** gomb piros színnel jelzi a felhasználónak, ha a kiválasztott beteg nem szerepel ebben a készletben.

Az „Egyéb hely” (19) jelzés akkor jelenik meg, ha a beteg felvételekor a felhasználó megadta, hogy a beteg nem a konfigurált osztályok egyikén van.



19. ábra




A betegekkel kapcsolatos adatok bevitelekor ellenőrizze kétszer is, hogy a Digistat csomagban megjelenített betegazonosító, kórházi osztály és ágy megegyezik-e a tényleges adatokkal. Ez rendkívül fontos az olyan kritikus műveletek esetében, mint például a gyógyszerek beadása.

## 1.6.5 Többmonitoros funkcionalitás

A Control Bar képes megjeleníteni a modulokat különböző monitorokon, amelyek ahhoz a munkaállomáshoz csatlakoznak, ahol a Termék telepítve van. Ez a funkció akkor használható, ha a Termék megfelelően van konfigurálva: erről a témáról olvassa el a Termék telepítési és konfigurációs kézikönyvét.


A többmonitoros funkcionalitás engedélyezése

- Lépjen be a termékbe a bejelentkezési eljárással (lásd a kapcsolódó bekezdést);
- Kattintson a „Control Baron” a munkaállomás típusát megjelenítő gombra (20. ábra **A**).

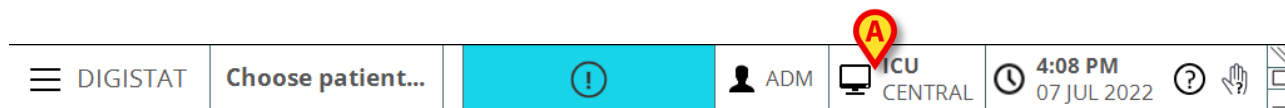


20. ábra

Ekkor a következő ablak („Többmonitoros menü”) jelenik meg:

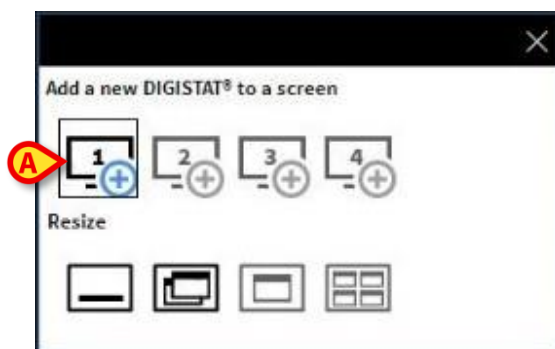

21. ábra

- Kattintson a(z) 21. ábra **A** jelzésű gombra egy új „Control Bar” hozzáadásához.
- Húzza az új „Control Bar” egy másik monitorra (22. ábra):

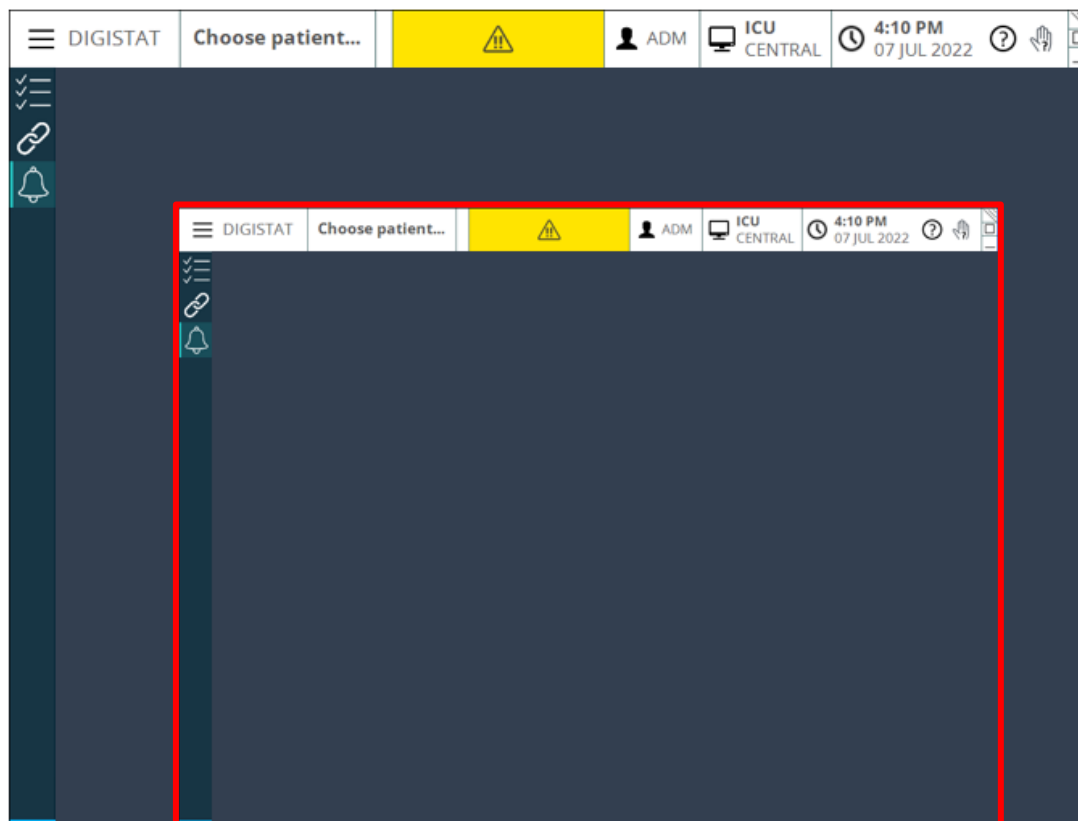


22. ábra

Az új „Control Bar” bezárása:

- Kattintson az új Control Baron a munkaállomás típusát megjelenítő gombra.

Ekkor a(z) 23. ábra által bemutatott menü megjelenik.

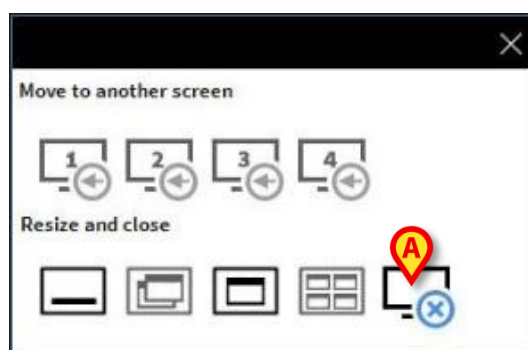


23. ábra

- Kattintson a(z) 23. ábra **A** jelű gombra.

Az új „Control Bar” bezár.

## 1.7 Sútó

A „Control Baron“ l v  Sút  gomb (11.  bra F) seg ts g vel hozz f rhet a rendelkez sre  ll  online dokument ci hoz. A „Sút  k perny “ (a(z) 24.  bra egy p ld t mutat be) a Browser modulban jelenik meg (l sd a(z) 1.9 bekezd st).

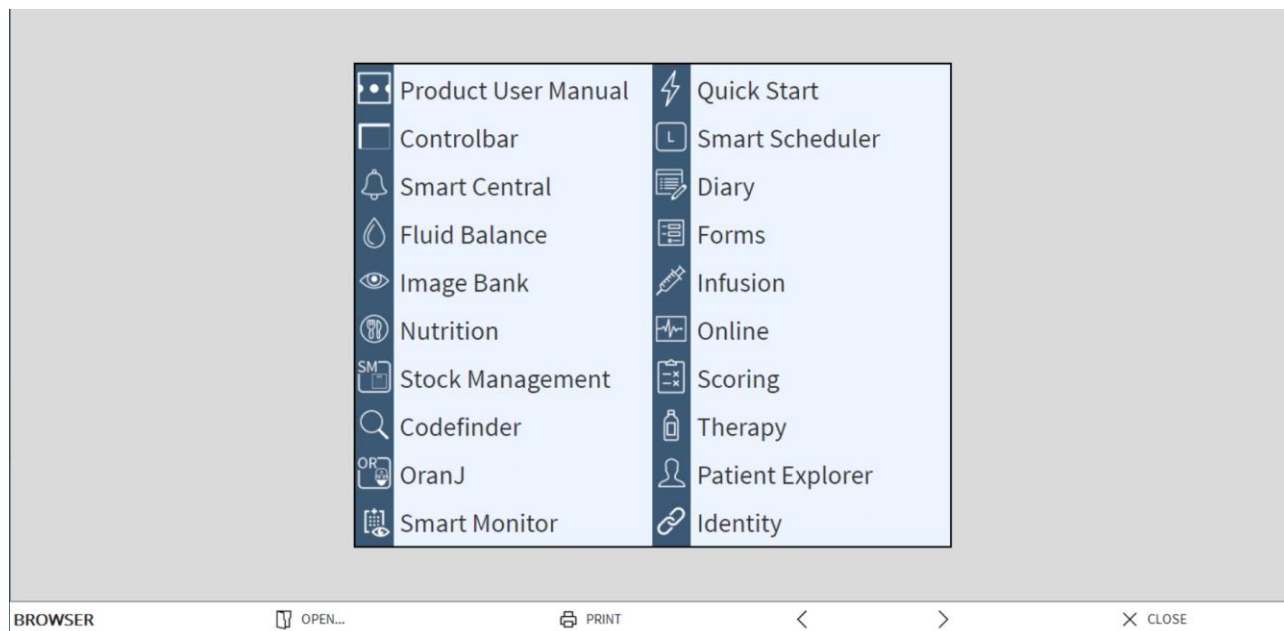

24.  bra

A parancss v (25.  bra) k n l n h ny navig ci s lehet s get.



25.  bra

- a **Megnyit s** gomb lehet v  teszi m s dokumentumok megnyit s t (ha a felhaszn l  rendelkezik a sz ks ges jogosults gokkal,  s ha a dokumentumokat kor bban felt lt tte);
- a **Nyomtat s** gomb kinyomtatja az aktu lisan megjelen tett dokumentumot;
- a <  s > gombok a dokumentum el z  vagy k vetkező oldal t jelen tik meg;
- a **Bez r s** gomb bez rja az online s g t.

## 1.8 A Browser modul


A Browser modul a „Control Bar“ seg ts g vel k l nb z  c lokra ind that  a haszn lt konfigur ci t l f gg en. P ld ul ahogy az el z  fejezetben l ttuk, a s g k perny  megjelen t s re haszn lhat . M s konfigur ci kban a Digistat csomaghoz tartoz  webmodulok asztali munka llom sokon t rt n  megjelen t s re haszn lhat . Tov bbi inform ci  rt l sd a rendelkez sre  ll  dokument ci t.

## 1.9 Főmenü

A „Control Baron” elhelyezett **Menü** gomb (26. ábra) megnyit egy több lehetőséget tartalmazó menüt (27. ábra).



26. ábra

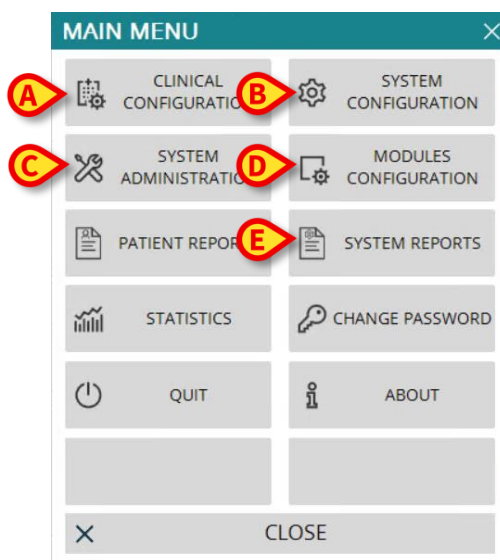

27. ábra

A menü minden egyes gombja egy-egy adott funkciókészletet ér el.

A következő gombokhoz kapcsolódó eljárások a rendszer konfigurálásával kapcsolatosak, ezért a rendszergazdáknak számára állnak rendelkezésre.

**Klinikai konfiguráció - (27. ábra A)**

**Rendszerkonfiguráció – (27. ábra B)**


**Rendszeradminisztráció – (27. ábra C)**

**Modulok konfigurációja – (27. ábra D)**

**Rendszerjelentések – (27. ábra E)**

A gombokhoz kapcsolódó eljárásokért forduljon a rendszergazdához.

A többi gomb, amelyet a(z) 28. ábra bemutat, olyan jellemzők és funkciók elérését teszi lehetővé, amelyeket egyes felhasználók (jogosultsági szintjüknek megfelelően) végezhetnek. Ezeket a következő szakaszok ismertetik.

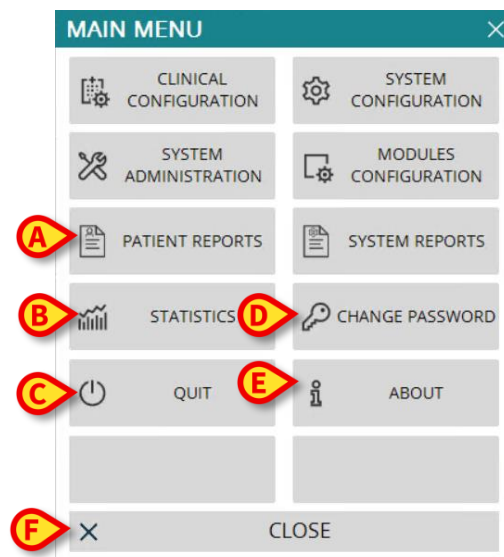

28. ábra

**Betegjelentések** – (28. ábra **A**, 1.9.1 szakasz)

**Statisztika** – (28. ábra **B**, 1.9.3 szakasz)

**Kilépés** – (28. ábra **C**, 1.9.6 szakasz)

**Jelszó módosítása** – (28. ábra **D**, 1.9.4 szakasz)

**Névjegy** – (28. ábra **E**, 1.9.5 szakasz)

A **Bezárás** gomb (28. ábra **F**) bezárja a „Főmenü” ablakot (28).

## 1.9.1 Betegjelentések

A „Betegjelentések” gomb (28. ábra **A**) konfigurálható úgy, hogy megnyisson egy almenüt, amely különböző nyomtatási lehetőségeket jelenít meg, amelyek mindegyike különböző nyomtatott jelentések készítését teszi lehetővé.

## 1.9.2 Jelentések nyomtatása

Ez a bekezdés a termék általános nyomtatási funkcióit írja le. Ha a nyomtatási funkció elérhető, azt a kézikönyv adott szakaszában/bekezdésében jelezzük. Az általános utasításokat lásd a jelen bekezdésben.

Betegjelentés nyomtatása:

- Kattintson a konfigurált **Nyomtatás** gombra

Ekkor megnyílik a nyomtatási előnézet (29. ábra).

**ascom** **DEVICE EVENTS**  
HOSPITAL  
DEPARTMENT  
CHIEF DR.

PATIENT: Patient 4 Rose CODE: 20000004 BIRTHDATE: 5/3/1992

| DATE/TIME           | DEVICE | # | LEVEL | DESCRIPTION          |
|---------------------|--------|---|-------|----------------------|
| 23/11/2017 02:52:17 | MON    |   | I     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 10:20:23 | MON    |   | X     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 10:20:05 | MON    |   | !!!   | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 10:19:44 | MON    |   | I     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 10:10:43 | INF    | 5 | X     | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:10:28 | INF    | 5 | !!!   | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:10:28 | INF    | 5 | X     | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:10:13 | INF    | 5 | !!    | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:09:15 | INF    | 3 | X     | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:09:00 | INF    | 3 | !!!   | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:09:00 | INF    | 3 | X     | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:08:45 | INF    | 3 | !!    | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:07:06 | INF    | 5 | X     | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:06:51 | INF    | 5 | X     | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:06:51 | INF    | 5 | !!!   | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:06:36 | INF    | 5 | !!    | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:03:02 | INF    | 1 | X     | Occlusion            |
| 22/11/2017 10:02:47 | INF    | 1 | !!!   | Occlusion            |
| 22/11/2017 10:00:38 | INF    | 1 | X     | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:00:23 | INF    | 1 | X     | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 10:00:23 | INF    | 1 | !!!   | END OF INFUSION      |
| 22/11/2017 10:00:08 | INF    | 1 | !!    | NEAR END OF INFUSION |
| 22/11/2017 09:23:25 | MON    |   | X     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 09:20:51 | MON    |   | I     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 09:20:45 | MON    |   | X     | Heart Rate High      |
| 22/11/2017 09:19:06 | MON    |   | !!    | Heart Rate High      |

REPORT MASTER 1/1 ADDONS FIND 100% PRINT PRINT... EXPORT CLOSE

29. ábra

A „Nyomtatási előnézet“ képernyő parancssávján található gombokkal különböző műveleteket végezhet, amelyek az alábbiakban vannak felsorolva.

A és gombokkal elérheti a dokumentum elejét és végét.

A és gombokkal az előző vagy a következő oldalra léphet.

A(z) kijelzőn megjelenik az aktuális oldalszám.

A **Bővítmények** gomb aktiválja a lehetséges további nyomtatáskezelési opciókat (ebben a konfigurációban a „Vízjelek“ opció érhető el – az opciók leírását lásd a(z) 1.9.2.1 bekezdésben).

A **Keresés** gomb lehetővé teszi a keresést az aktuális dokumentumban. További utasításokért lásd a(z) 1.9.2.2 bekezdést.

A **100%** százaléértéket jelző gomb egy nagyítási gomb, amely lehetővé teszi a megjelenítési mód megváltoztatását. További utasításokért lásd a(z) 1.9.2.3 bekezdést.

A jelentés kinyomtatásához használja a **Nyomtatás** gombot (29. ábra **G**).

A **Nyomtatás...** gombbal (29. ábra **H**) jelenítheti meg a nyomtatási beállítások ablakot (35. ábra). Ennek az ablaknak a leírását és a kapcsolódó eljárásokat lásd a(z) 1.9.2.4 bekezdésben.

. ábra Az **Exportálás** gomb (29. ábra **I**) segítségével exportálhatja a dokumentum tartalmát különböző fájlkiterjesztésekbe. További utasításokért lásd a(z) 1.9.2.5 bekezdést.

A „Nyomtatási előnézet” képernyő bezárásához használja a **Bezárás** gombot.

### 1.9.2.1 Bővítmények

A **Bővítmények** gomb (29. ábra **D**) aktiválja a lehetséges további nyomtatáskezelési opciókat.

A rendelkezésre álló opciók megjelenítése:

- Kattintson a **Bővítmények** gombra.

Megjelenik egy menü, amely a rendelkezésre álló (konfigurált) beállításokat sorolja fel.


- Kattintson az aktiválni kívánt funkciónak megfelelő gombra.

#### **Bővítmények – Vízjel**

Vízjelek hozzáadása a nyomtatott jelentéshez (szöveg vagy kép, ha az opciót a konfiguráció engedélyezi),

- Kattintson a **Bővítmények**, majd a **Jelölés** gombra.

Ekkor megjelenik a következő ablak (30. ábra).

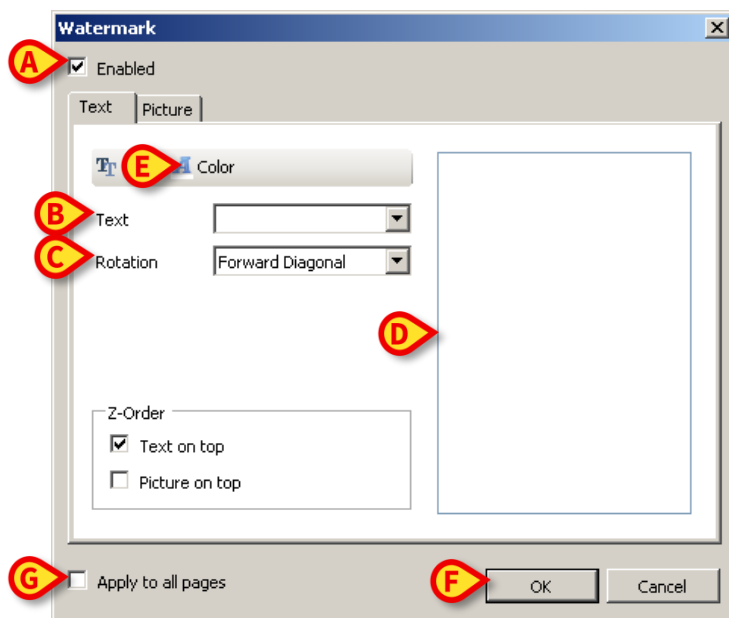

30. ábra

Szöveges vízjel hozzáadása:

- Ellenőrizze, hogy az „**Engedélyezve**” jelölőnégyzet be van-e jelölve (30. ábra **A**). Ha nem, az ablak tartalma nem szerkeszthető.
- Illessze be a szöveget a „**Szöveg**” mezőbe (30. ábra **B**).

- A **„Forgatás“** menü (30. ábra **C**) segítségével megadhatja a vízjel tájolását (átlós, vízszintes, függőleges).

A nyomtatási előnézet megjelenik a(z) 30. ábra **D** jelű területen.

- A vízjel betűtípusának és színének kiválasztásához használja a(z) 30. ábra **E** jelzésű gombokat.
- Kattintson az **OK** gombra (30. ábra **F**).


A szöveg ezzel vízjelként beillesztésre kerül.

Ha az **„Alkalmazás minden oldalra“** jelölőnégyzet be van jelölve (30. ábra **G**), a vízjel a dokumentum minden oldalára alkalmazásra kerül, ellenkező esetben csak az aktuális oldalra.

Kép vízjelként történő beillesztése:

- Kattintson a(z) **A** jelzésű **„Kép“** lapra.

Ekkor megjelenik a következő ablak (31. ábra).

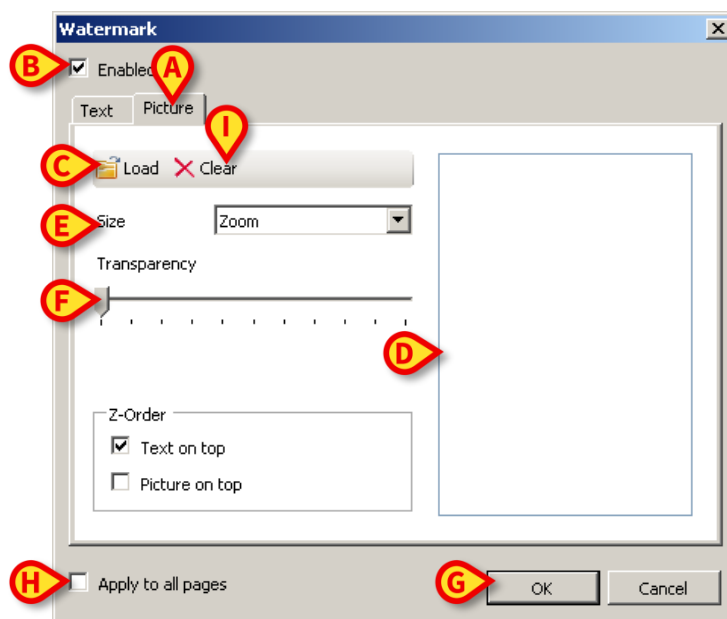

31. ábra

Kövesse az alábbi lépéseket kép vízjelként való beillesztéséhez:

- Ellenőrizze, hogy az **„Engedélyezve“** jelölőnégyzet be van-e jelölve (31. ábra **B**). Ha nem, az ablak tartalma nem szerkeszthető.
- Kattintson a(z) 31. ábra **C** jelű **„Betöltés“** gombra.

Ez megnyitja az ablakot, amely lehetővé teszi a számítógép tartalmának böngészését.

- Keresse meg és válassza ki a feltölteni kívánt képet.

A kép megjelenik a(z) 31. ábra **D** jelű területen.

- A „Méret“ legördülő menü segítségével állítsa be a kép méretét (31. ábra **E**).
- Az „Átlátszóság“ kurzorral állítsa be a vízjelkép átlátszósági szintjét (31. ábra **F**).
- Kattintson az **OK** gombra (31. ábra **G**). A kép ezzel vízjelként beillesztésre kerül.

Ha az „**Alkalmazás minden oldalra**“ jelölőnégyzet be van jelölve (31. ábra **H**), a vízjel a dokumentum minden oldalára alkalmazásra kerül, ellenkező esetben csak az aktuális oldalra.

Már kiválasztott kép törlése:

- Kattintson a(z) 31. ábra **I** jelzésű „**Törlés**“ gombra.

### 1.9.2.2 Keresés

A **Keresés** gomb (29. ábra **E**) lehetővé teszi a keresést az aktuálisan megjelenített dokumentumban. Keresés a nyomtatott jelentésben:

- Kattintson a **Keresés** gombra.

Ekkor megnyílik a következő ablak (32. ábra).



32. ábra

- Illessze be az ablakba a keresendő szöveget (33. ábra **A**).



33. ábra

- Kattintson a  gombra (33. ábra **B**).


A megadott szöveg – ha megtalálható – kiemelésre kerül a dokumentumban.

- Kattintson a  gombra ismét, hogy megkeresse a megadott szöveg lehetséges további előfordulásait.

### 1.9.2.3 Nagyítás

A **Nagyítás** gomb (amelyen alapértelmezés szerint a **100%** méret jelenik meg – 29. ábra **F**) egy olyan nagyítás, amely lehetővé teszi a kijelzés méretének és módjának megváltoztatását. A megjelenítési mód megváltoztatása:

- Kattintson a **Nagyítás** gombra. Ekkor a következő menü (34. ábra) jelenik meg.

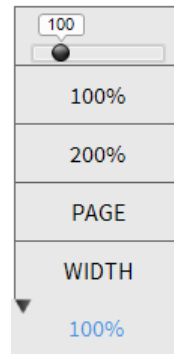

34. ábra

- Kattintson a menüben a kívánt nagyítási lehetőségre.

Ekkor az oldal ennek megfelelően jelenik meg. Az aktuálisan kiválasztott üzemmódot a gomb jelzi.


Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


A **Szélesség** gomb lehetővé teszi az oldal teljes képernyőszélességben történő megjelenítését;

Az **Oldal** gomb az egész oldalt megjeleníti;

A **200%** gomb megduplázza az oldal méretét (200%-os nagyítás);

A **100%** gomb az oldalt a tényleges méretben jeleníti meg (100%-os nagyítás);

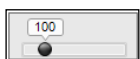


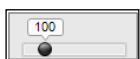A  terület egy kurzort tartalmaz, amely az oldal tartalmának nagyítására használható (balra a kicsinyítés, jobbra a nagyítás). Az oldal méretének megfelelő százalékos érték a kurzor felett jelenik meg. Az értékek 100% és 200% között mozognak. A kiválasztott érték a kiválasztás után a parancssávon lévő **Nagyítás** gombon is megjelenik.

#### 1.9.2.4 Nyomtatás...

A **Nyomtatás...** gomb megnyit egy ablakot, amely több nyomtatási lehetőséget kínál.

- A **Nyomtatás...** gombra (29. ábra **H**) kattintva jelenítheti meg a nyomtatási beállítások ablakot (35. ábra).

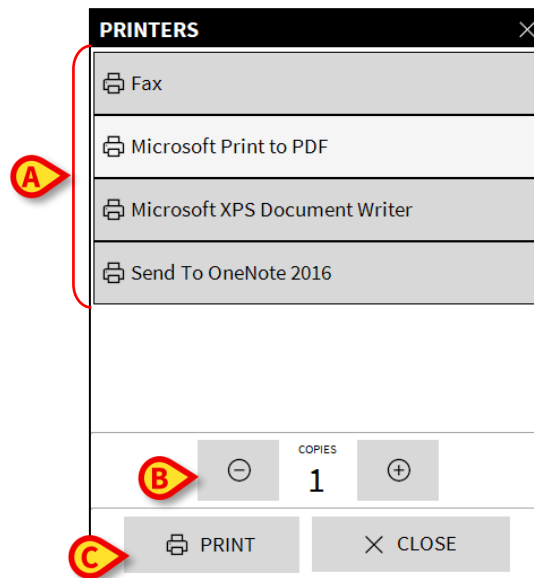

35. ábra

Ez az ablak lehetővé teszi a nyomtató és a nyomtatandó példányszám kiválasztását.

- Kattintson a megfelelő nyomtatóra a menüben a nyomtató kiválasztásához (35. ábra **A**).
- A  (eggyel kevesebb példány) és a  (eggyel több példány) gombok segítségével adja meg a példányok számát (35. ábra **B**).
- A jelentés kinyomtatásához kattintson a **Nyomtatás** gombra (35. ábra **C**).

#### 1.9.2.5 Exportálás

Az **Exportálás** gomb (29. ábra **I**) segítségével exportálhatja a dokumentum tartalmát különböző fájlkiterjesztésekbe.

- Kattintson az **Exportálás** gombra az „Exportálás” menü megnyitásához.


A menü a rendszer által jelenleg támogatott összes fájlformátumot megjeleníti.

- Kattintson a kívánt fájlformátumhoz tartozó lehetőségre.

A dokumentumot a rendszer a megfelelő fájlformátumba exportálja.

### 1.9.3 Statisztika


A főmenü **Statisztika** gombja (36. ábra) lehetővé teszi a rendszer statisztikai számítási eszközeinek elérését. Az utasításokat lásd a Digistat csomag konfigurációs kézikönyvében.

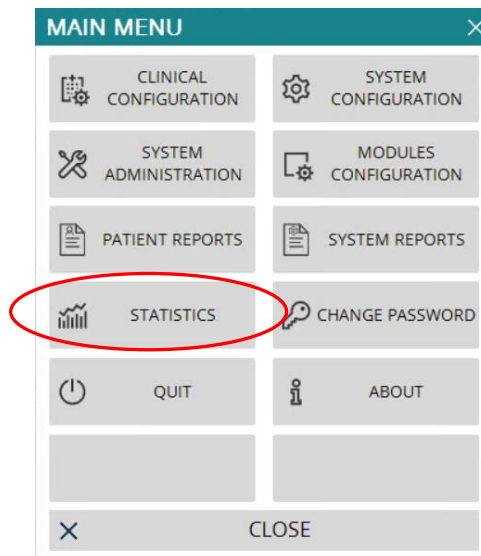

36. ábra

### 1.9.4 Jelszó módosítása

A főmenü **Jelszó módosítása** gombja (37. ábra **A**) megnyit egy olyan ablakot, amely lehetővé teszi a rendszerbe jelenleg bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítását.

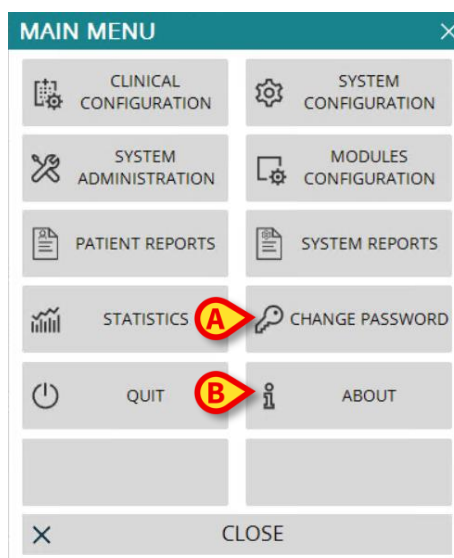

37. ábra

A felhasználói jelszó megváltoztatása:

- Kattintson a **Jelszó módosítása** gombra (37. ábra **A**).

Ekkor megnyílik a „Jelszó módosítása” ablak.

38. ábra

- Írja be az aktuális jelszót az „**Adja meg a RÉGI jelszót**“ (38. ábra **A**) mezőbe.
- Írja be az új jelszót a(z) 38. ábra **B** jelzésű mezőbe.
- Írja be újra az új jelszót az „**Adja meg ismét az új jelszót**“ mezőbe (38. ábra **C**).
- Kattintson az **OK** gombra (38. ábra **D**).



A jelszavak nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket. A jelszavak csak számokból (0–9) és betűkből (A–Z) állhatnak.

### 1.9.5 Névjegy

A főmenü **Névjegy** gombja megjeleníti a Digistat Suite verziójára, a telepített termékekre és a kapcsolódó licencekre vonatkozó adatokat tartalmazó ablakot (további információért lásd a vonatkozó dokumentációt).

A termék tényleges címkéje a Digistat Suite telepítésénél az ügyfél munkaállomásokon, mobil eszközökön és webmodulokban megjelenő Névjegy mező.

### 1.9.6 Kilépés

A főmenüben található **Kilépés** gomb (40. ábra **A**) lehetővé teszi a Termék bezárását.


A kilépés menete:

- Kattintson a „Control Baron“ a **Menü** gombra (39. ábra).




39. ábra

Ekkor megnyílik a főmenü (40. ábra).

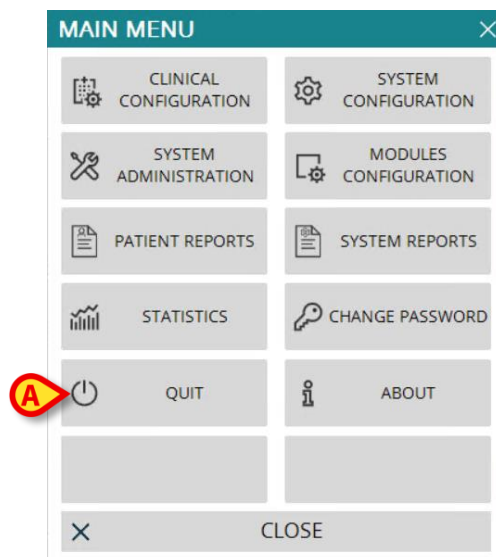


40. ábra

- Kattintson a **Kilépés** gombra (40. **A**). Ekkor megjelenik egy másik menü (41. ábra).

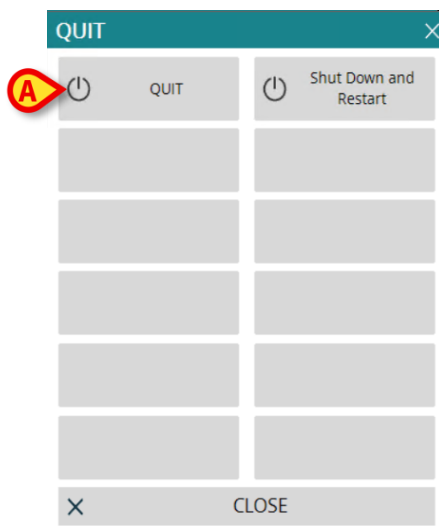

41. ábra

- Kattintson ismét a **Kilépés** gombra (41. ábra **A**). Ekkor felhasználói megerősítés szükséges (42. ábra).

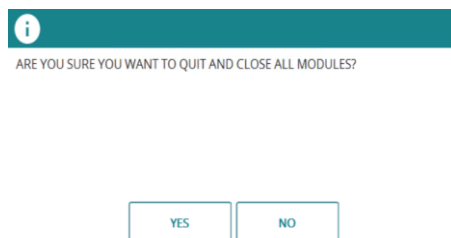

42. ábra

- Kattintson az **Igen** gombra a kilépéshez.



A kilépéshez különleges engedélyek szükségesek. Nem minden felhasználónak van engedélye a Termék bezárására.