



# **Control Bar Web**

## **Használati utasítás**

**4.0-s verzió**

**2024-10-31**

# Tartalom

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1. Control Bar Web.....</b>              | <b>3</b> |
| 1.1 Control Bar Web indítása .....          | 3        |
| 1.2 Felhasználói bejelentkezés .....        | 4        |
| 1.3 Munkaterület.....                       | 6        |
| 1.3.1 Modul kiválasztása .....              | 6        |
| 1.4 Control Bar (vezérlősáv).....           | 7        |
| 1.5 Főmenü .....                            | 7        |
| 1.5.1 Jelszó módosítása .....               | 8        |
| 1.5.2 Felhasználói problémabejelentés ..... | 9        |

# 1. Control Bar Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról további információkat talál: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén) . A jelen dokumentumban leírt *Control Bar Web* megfelelő és biztonságos használatához kötelező a vonatkozó dokumentumok ismerete és megértése.

## 1.1 Control Bar Web indítása

Control Bar Web elindítása:

- Írja be a kívánt címet a böngésző címsorába.


Megnyílik a következő oldal:

Ábra 1

## 1.2 Felhasználói bejelentkezés

A rendszer funkcióinak engedélyezéséhez szükség van a felhasználó bejelentkezésére.

### login

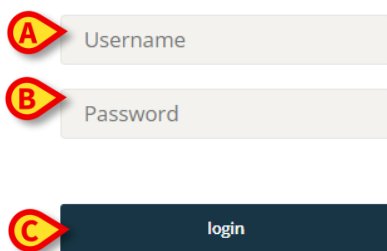

The login form consists of three elements: a text input field labeled 'Username' with a red circle 'A' icon to its left, a text input field labeled 'Password' with a red circle 'B' icon to its left, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' icon to its left.

Ábra 2

Bejelentkezéshez:

- Írja be felhasználónevét a Username vagyis a „Felhasználónév” mezőbe (Ábra 2 **A**)
- Írja be jelszavát a Password vagyis „Jelszó” mezőbe (Ábra 2 **B**)
- Kattintson a **Login** vagyis Bejelentkezés gombra (Ábra 2 **C**)

Ezáltal a felhasználó be lesz jelentkezve.



A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda állítja ki. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a program használatára.



*Lehetőség van a Digistat Suite konfigurálására, hogy lehetővé tegye a bejelentkezést egy külső rendszeren keresztül („Single Sign On”). Ezekben az esetekben a bejelentkezési képernyőn egy erre a célra szolgáló gomb jelenik meg.*

A rendszer elérése után a Control Bar (vezérlősáv) **User** gombján megjelenik a bejelentkezett felhasználónak megfelelő mozaikszó (a mozaikszó: ADMINÁbra 3 **A**).




Ábra 3



A programon végrehajtott összes műveletért az a User (felhasználó) felelős, akinek a hitelesítő adatai a User (felhasználó) gombon megjelennek. A rendszer nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja a Product munkahálózatot.


A kijelentkezéshez kattintson a munkamenet közben a **User** (felhasználó) gombra. Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 4).

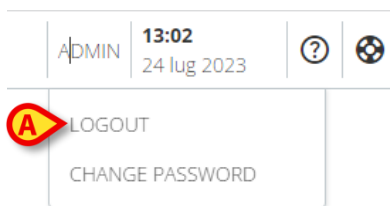

Ábra 4

- Kattintson a **LOGOUT** (Ábra 4 A).

Felhasználói megerősítés szükséges. A megerősítés után a felhasználó ki va jelentkezve. A bejelentkezéshez kattintson ismét a **User** (felhasználó) gombra. A Ábra 2 látható képernyő ismét megjelenik.

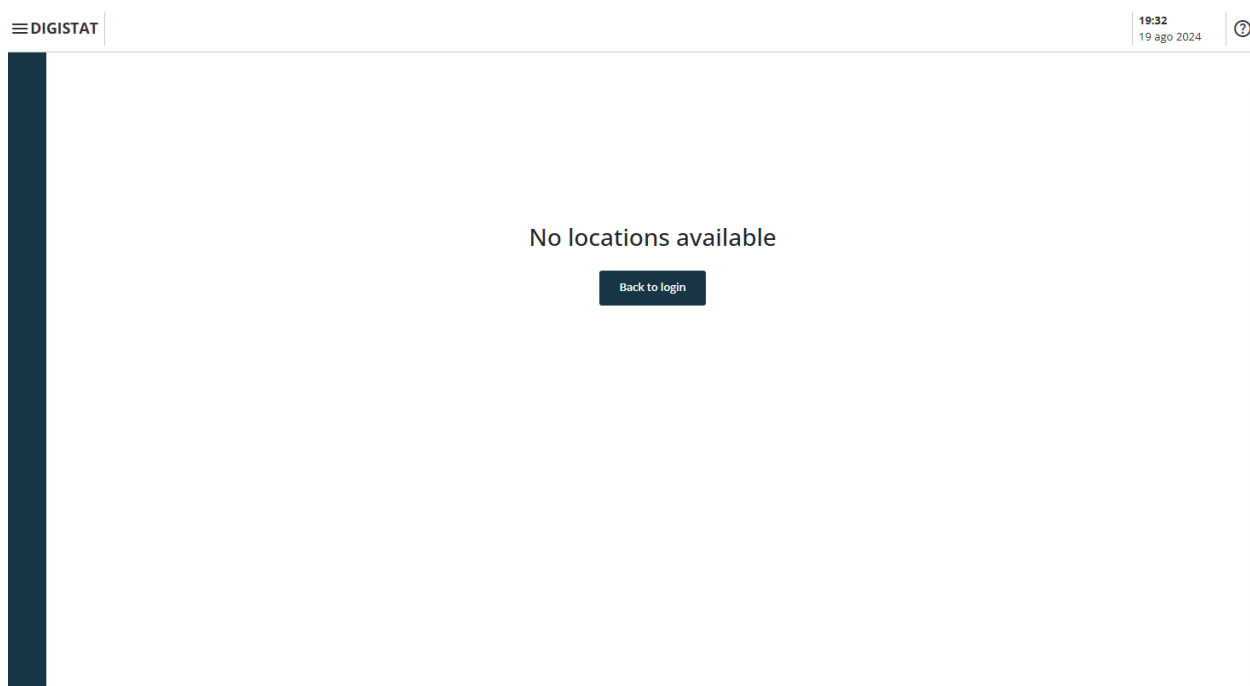

Ábra 5

Ha a felhasználónak nincs korábban hozzárendelt helye (a felhasználó és a hely közötti kapcsolat beállítását lásd a *CGF ENG Digistat Suite MDR* útmutatójában), akkor nem lehet bejelentkezni a modulba. Ebben az esetben a „Nincs elérhető hely” üzenet jelenik meg (Ábra 5). Ezenkívül egy **Vissza a bejelentkezéshez** gomb segítségével visszatérhet a bejelentkezési oldalra, és új felhasználóval vagy ugyanazzal a felhasználóval próbálhatja meg újra a bejelentkezést, miután a felhasználó és a helyszín összekapcsolása megtörtént.



A „Hely” egy Digistat beállítási egység, amely az egészségügyi struktúra egy adott területének felel meg. Ez lehet például egy osztály, egy kórterem, egy műtőblokk stb. az egészségügyi struktúra követelményeitől függően. További információkért forduljon a rendszergazdákhoz.

## 1.3 Munkaterület

A felhasználó bejelentkezése után az oldalsó sávban ( A) megjelennek az elérhető Digistat Web moduloknak megfelelő ikonok (Ábra 6 A). A (Ábra 6 B) munkaterület az oldalsó sávban kiválasztott modul kijelzőit és funkcióit jeleníti meg.



Ábra 6

A Control Bar-t (vezérlősávot) (Ábra 6 C) a következő 1.4 szakaszokban és pontokban ismertetjük.


A kiválasztott modul ki van emelve.

### 1.3.1 Modul kiválasztása

Modul kiválasztásához:

- Kattintson a megfelelő ikonra az oldalsávon.

Az ikon ki lesz emelve, és a modul funkciói láthatóvá válnak a Work Area-n (munkaterületen) belül.

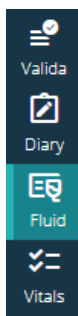

Ábra 7

## 1.4 Control Bar (vezérlősáv)

A képernyő felső részén megjelenő control bar (vezérlősáv) minden modulban azonos. Főbb jellemzőit az alábbiakban soroljuk fel:




Ábra 8

- A **Menu** (menü) gomb (Ábra 8 **A**) megnyitja a Control Bar Web főmenüt. Lásd a 1.5 részt.
- A **Patient** (páciens) gomb (Ábra 8 **B**) a páciens kiválasztása után megjeleníti a páciens nevét és a főbb adatait. Ha a páciens fel van véve, akkor megjelenik az ágy száma. A páciens adatok mellett található lehetséges ikonok személyre szabható gyorsbillentyűk, amelyek lehetővé teszik bizonyos konfigurált információk elérését. Ha egy lakat ikon -  - jelenik meg a páciens neve mellett, ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók nem érhetők el az adott páciens esetében.
- A Ábra 8 **C**-ben jelzett terület arra használható, hogy a felhasználó számára jelezze, hogy értesítések érkeztek.
- A felhasználói gomb biztosítja a be- és kijelentkezést, valamint a jelszóváltoztatás funkciót (Ábra 8 **D**).
- Dátum-idő jelzés (Ábra 8 **E**).
- Használja a **Help** (súgó) gombot (Ábra 8 **F**) az online súgó eléréséhez.
- A  (Ábra 8 **G**) ikonra kattintva létrehozhat egy problémajelentést, amelyet elküldhet a technikai ügyfélszolgálatnak támogatás céljából. Lásd a 1.5.2 részt.

## 1.5 Főmenü

A **Menu** (menü) gomb (Ábra 8 **A**) megnyitja a következő menüt (Ábra 9).

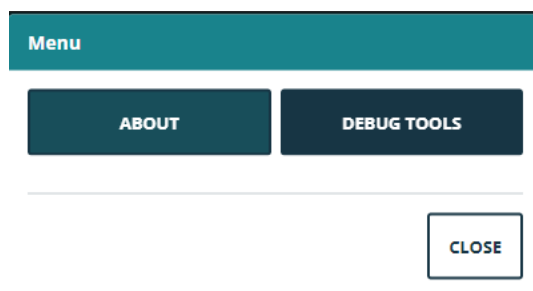

Ábra 9

Az **About** (tudnivalók) gomb megjeleníti a telepített Digistat Suite verzióra és a kapcsolódó licencekre vonatkozó információkat tartalmazó ablakot (további információkért lásd az adott dokumentációt).

A termék konkrét címkézése az About Box amely az ügyfelek munkaállomásain, mobil eszközein és webes moduljain jelenik meg, ahol a Digistat Suite telepítve van.

A **Debug Tools** (hibakereső eszközök) gomb a rendszergazdák számára van fenntartva.

## 1.5.1 Jelszó módosítása


Felhasználói jelszó módosítása

- Kattintson a **User** (felhasználó) gombra a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 10 **A**).



Ábra 10

- Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 11).

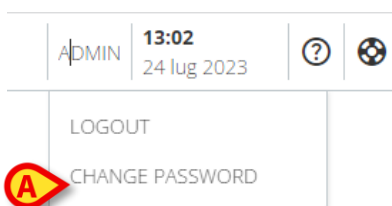

Ábra 11

- Kattintson a: **Change Password** (Jelszó módosítása) (Ábra 11 **A**). Megnyílik a következő képernyő (Ábra 12):

### CHANGE PASSWORD


A screenshot of the 'CHANGE PASSWORD' form. It contains three input fields and a button. The first field is labeled 'Old password' and has a red circle with a yellow 'A' next to it. The second field is labeled 'New Password' and has a red circle with a yellow 'B' next to it. The third field is labeled 'Confirm new password' and has a red circle with a yellow 'C' next to it. Below the fields is a dark blue button labeled 'SAVE' with a red circle with a yellow 'D' next to it.

Ábra 12

- Írja be az aktuális jelszót az "OLD password" (régi jelszó) mezőbe (Ábra 12 **A**).
- Írja be az új jelszót a „New password” (új jelszó) mezőbe (Ábra 12 **B**).
- Írja be újra az új jelszót az „Confirm new password” (Új jelszó megerősítése) mezőbe (Ábra 12 **C**).
- Kattintson ide: **Save** (Mentés) (Ábra 12 **D**).

## 1.5.2 Felhasználói problémabejelentés

Ha jelen van, a  ikon a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 13 **A**) lehetővé teszi egy „probléma” jelentés létrehozását, és adott esetben technikai támogatás igénylését.

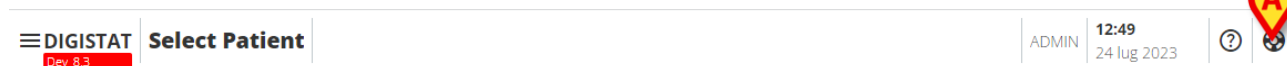


Ábra 13

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Az ikon jelenléte az EnableUserIssueReporting System Option-tól (rendszerbeállítástól) függ. További információért forduljon a rendszergazdához.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ehhez:

- Kattintson a  ikonra (Ábra 13 **A**). Megnyílik a következő ablak (Ábra 14).

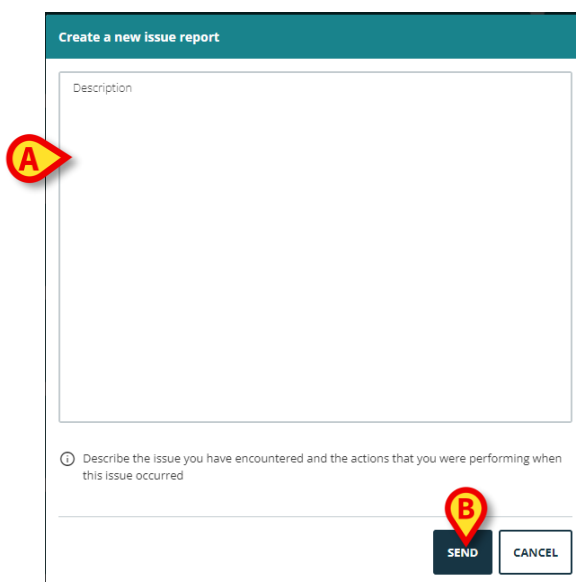

Ábra 14

- Írja be a probléma leírását a "Description" (leírás) mezőbe (Ábra 14 **A**).
- Kattintson a **Send** (küldés) gombra (Ábra 14 **B**).

A visszaigazolás tartalmazza a probléma azonosító számát.