

ascom

Identity.net Benutzerhandbuch

Version 2.0

03/12/2020

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Inhalt

1. Identity.Net	4
1.1. Einführung	4
1.2. Auswahl des Moduls	5
1.3. Zuordnungsverfahren	5
1.4. Trennverfahren	6

1. Identity.Net



Allgemeine und detaillierte Informationen über die Produktumgebung und die Anweisungen zur Verwendung der Control Bar-Software finden Sie in den jeweiligen Dokumentationen des Produkts. Die Kenntnis und das Verständnis dieser Dokumentation ist Voraussetzung für eine sachgemäße und sichere Nutzung des in dieser Dokumentation beschriebenen Identity.Net.

1.1. Einführung

Das Identity.Net Modul ermöglicht die Zuordnung/Aufhebung der Zuordnung von Geräten zu Patienten.



Nur ein Teil der konfigurierten Geräte ist für das schnelle Zuordnungs-/Aufhebungsverfahren berechtigt. Im Allgemeinen gilt das Verfahren für Wi-Fi-Geräte, die häufig von einem Patienten zu einem anderen transportiert werden. In allen Fällen sind es die Merkmale des Geräts, die Art und Weise, wie es verwendet wird, und seine Konfiguration, die es für das in diesem Handbuch beschriebene Verfahren verwendbar machen oder nicht. Im Identity.Net-Modul werden nur die Geräte angezeigt, die verwendet werden können.



Wenn Wi-Fi-Infusionspumpen verwendet werden, sie werden automatisch vom Patienten getrennt, wenn keine WLAN-Verbindung besteht oder das Gerät länger als die in der Konfigurationsoption „PatientDeviceAssocTimeout“ angegebene Anzahl von Sekunden ausgeschaltet ist.



Wenn Wi-Fi-Infusionspumpen verwendet werden, bei jedem Start einer neuen Infusion muss die Infusionspumpe dem Patienten zugeordnet werden.



Wenn ein Patient entlassen und dann wieder aufgenommen wird, bleiben die Geräte mit der vorherigen Patientenaufnahme verbunden. Verwenden Sie das Identitätsmodul, um die Geräte der letzten Patientenaufnahme zuzuordnen.

1.2. Auswahl des Moduls

So greifen Sie auf das Identity-Modul auf Desktop-Arbeitsstationen zu:

- Klicken Sie auf das  Symbol im Seitenmenü.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt (Abb. 1).



Abb. 1

Auf zwei Registerkarten, die in Abb. 1 **A** dargestellt sind, können Sie entweder die Liste der einem Patienten zugeordneten Geräte („Zugewiesen“) oder die Liste der einem Patienten nicht zugewiesenen Geräte („Nicht zugewiesen“) auswählen. Die Standardeinstellung ist "Nicht zugewiesen".

1.3. Zuordnungsverfahren

So weisen Sie einem Patienten ein Gerät zu:

- Wählen Sie die Registerkarte "Nicht zugewiesen" (falls nicht bereits ausgewählt).

Die Liste der nicht zugewiesenen Geräte wird auf diese so angezeigt. Jede Zeile entspricht einem Gerät.

- Suchen Sie das zugewiesene Gerät.

Ein Suchprogramm ist verfügbar (Abb. 1 **B**). Sie können nach der Seriennummer des Geräts suchen.

Suche mit Barcode-Scan ist ebenfalls verfügbar. Scannen Sie den gewünschten Geräte-Barcode, um eine Zeile anzuzeigen, die sich auf das betreffende Gerät bezieht.

In der Zeile, die dem gewünschten Gerät entspricht,

- Klicken Sie auf das in Abb. 1 **C** dargestellte Symbol.

Der folgende Bildschirm wird geöffnet (Abb. 2). Hier muss der Patient ausgewählt werden, dem das Gerät zugewiesen werden soll.

Zuweisen

Station: ICU

Bett: 4 - John JD Doe - Code: 34526

Bestätigen sie die zuordnung des patienten:

John, Doe JD ♂
Code: 34526 Geburtsdatum: 01/01/1954
Aufgenommen auf ICU - Bett 4

Mit gerät:

Alaris neXus PK - IP1M12401
0.48 mL/h

Zuweisen Löschen

Abb. 2

- Verwenden Sie die in Abb. 2 **A** dargestellten Dropdown-Listen, um den Patienten auszuwählen.

Die ausgewählten Patienten- und Gerätedaten werden im Fenster (Abb. 2 **B**) angezeigt. Wenn die Daten korrekt sind, dann

- klicken Sie auf die Schaltfläche in Abb. 2 **C**.

Die Geräte-Patienten-Zuweisung wird so abgeschlossen.

1.4. Trennverfahren

So trennen Sie ein Gerät von einem Patienten.

- Greifen Sie auf das Identity-Modul zu.
- Wählen Sie die Registerkarte „Zugewiesen“(Abb. 3 **A**).

Der folgende Inhalt wird angezeigt.

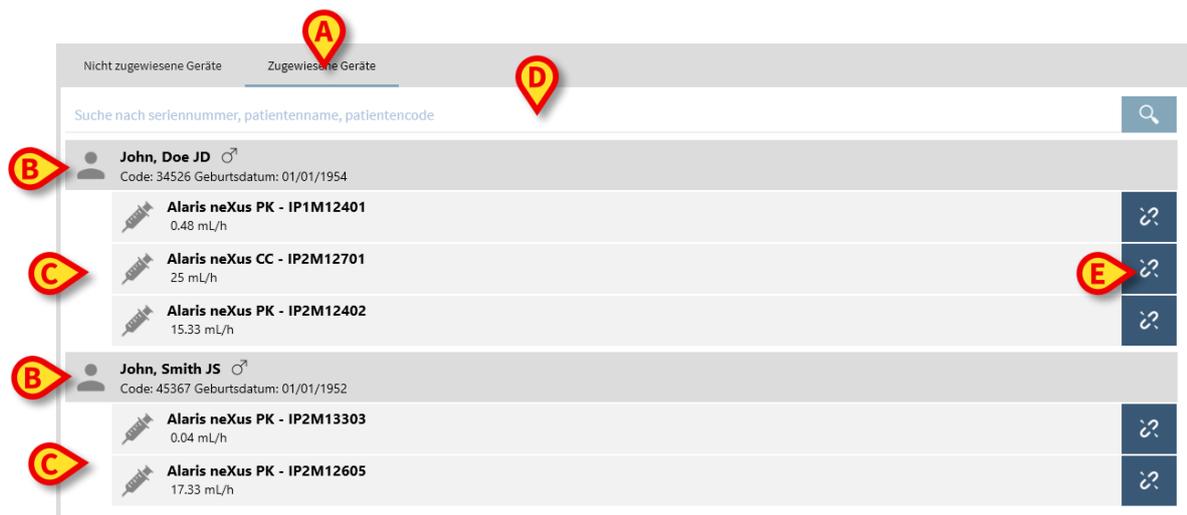


Abb. 3

Dunkelgraue Zeilen beziehen sich auf Patienten (Abb. 3 **B**).

Hellgraue Zeilen beziehen sich auf Geräte (Abb. 3 **C**).

Alle einem Patienten zugewiesenen Geräte werden unter dem Patientennamen aufgelistet. Ein Suchprogramm ist verfügbar (Abb. 3 **D**). Mit ihm können nach einem bestimmten Gerät suchen. Die Suche kann durchgeführt werden, indem die Seriennummer des Geräts/Patientenname/Patientencode in das Suchfeld eingegeben.

- Suchen Sie die dem zu trennenden Gerät entsprechende Zeile.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Abb. 3 **E**).

Das folgende Fenster wird geöffnet und fordert die Bestätigung des Benutzers an (Abb. 4).



Abb. 4

- Klicken Sie auf die in Abb. 4 **A** dargestellte Schaltfläche, um das Trennverfahren abzuschließen