



Identity Web Brugermanual

Version 0.1

2024-10-21

Indhold

Identity Web	3
1. Introduktion	3
2. Valg af patient.....	3
3. Valg af "Identity Web"	4
4. Liste over tilknyttede enheder.....	5
5. Frakoblingssprocedure	6
6. Søgning og tilknytningsprocedure	8
6.1. Frakobling efter søgning	10
6.2. Allerede parrede enheder	11
7. Stregkode søgning og valg	12

Identity Web



For information om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tilsigtet brug se *USR DNK Digistat Care* og/eller *USR DNK Digistat Docs* (afhængigt af de installerede moduler - til *Digistat Suite EU*) eller *USR ENG Digistat Suite NA* (til *Digistat Suite NA*). Kendskab til og forståelse af det relevante dokument er obligatorisk for en korrekt og sikker brug af "Identity Web", beskrevet i dette dokument.

1. Introduktion



Identity Web er et undermodul til Control Bar Web, der kan aktiveres eller ej afhængigt af den konfiguration, der er i brug i den specifikke sundhedsorganisation. Se systemadministratorerne for mere information.

"Identity Web" gør det muligt hurtigt at tilknytte/frakoble medicinsk udstyr til patienter i forbindelse med Digistat Web-miljøet.



Kun et undersæt af de konfigurerede enheder er berettiget til den hurtige tilknytnings-/frakoblingsprocedure. Normalt gælder proceduren for wi-fi-enheder, der ofte flyttes fra én patient til en anden. I alle tilfælde er det funktionerne, brugsmåden og konfigurationen af enheden, der gør den kvalificeret eller ikke kvalificeret til proceduren beskrevet her.

2. Valg af patient

"Identity Web" kan kun åbnes efter der er valgt en patient. For at vælge en patient,

- Klik på knappen **Vælg patient** angivet i Fig 1 A.



Fig 1

Webmodulet Patient Explorer åbnes. Se brugervejledning til Digistat® Patient Explorer Web (*USR ENG Patient Explorer Web*) for yderligere instruktioner om patientstyringsfunktioner.



Andre moduler kan konfigureres til patientvalget i stedet for Patient Explorer Web, afhængigt af konfigurationen. Hvis dette er tilfældet, se den specifikke dokumentation for instruktioner.

Når en patient er valgt vises patientens navn og hoveddata på knappen **Patient** (Fig 2 A).



Fig 2

3. Valg af "Identity Web"

Hvis "Identity Web" er tilgængeligt,  vises ikonet på patientknappen (Fig 3 **A**).



Fig 3

For at åbne Identity Web:

- Klik på ikonet .

Der vises et rullemenu, der indeholder yderligere patientdata og de tilgængelige applikationer, der kan startes på kontrollinjen (Fig 4).

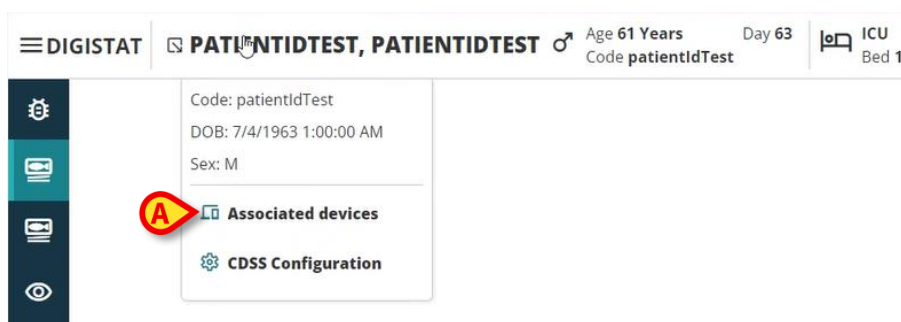


Fig 4

- Klik på "Tilknyttede enheder" (Fig 4 **A**).

Følgende vindue vises med en liste over de enheder, der er knyttet til den aktuelt valgte patient (Fig 5).

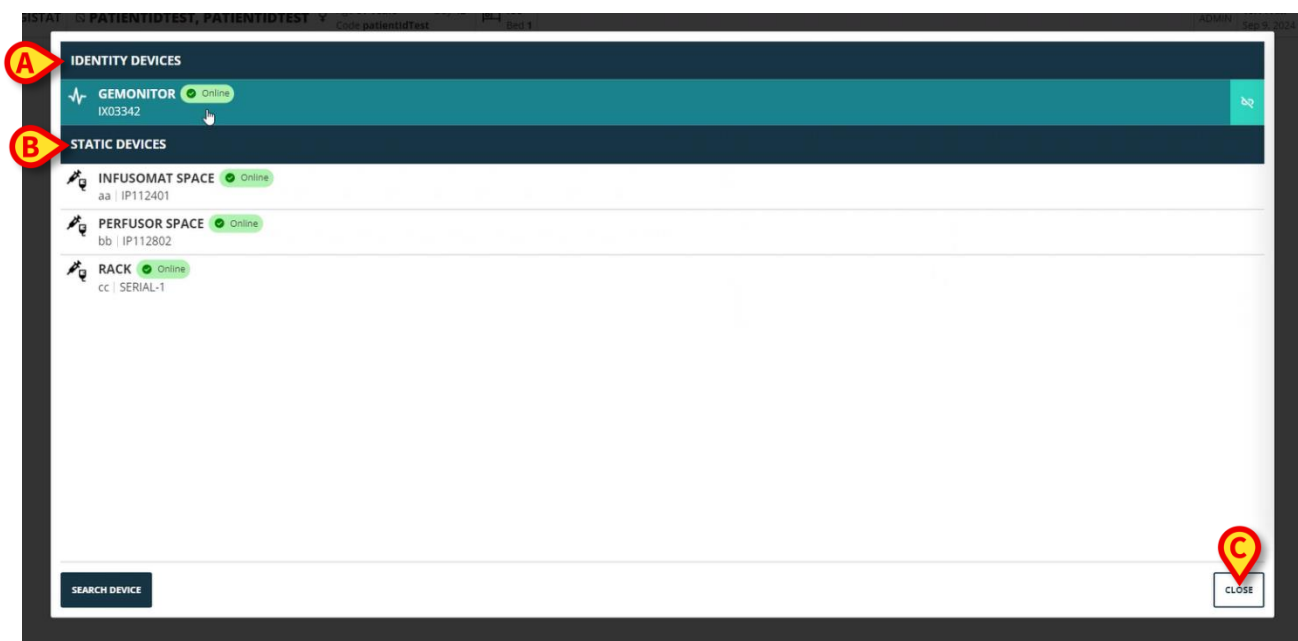


Fig 5

4. Liste over tilknyttede enheder

Vinduet "Liste over tilknyttede enheder" (Fig 5) er opdelt i to sektioner:

Sektionen **Identity-enheder** (Fig 5 **A**) viser de bevægelige enheder, der i øjeblikket er knyttet til den valgte patient.

Sektionen **Statistiske enheder** (Fig 5 **B**) viser de enheder, der er knyttet til den valgte seng, og som ikke kan flyttes.

"Identity Web" fungerer kun på **Identity-enheder**.

Hver række i vinduet svarer til en enhed (se Fig 6 for et eksempel).



Fig 6

For hver enhed vises følgende information:

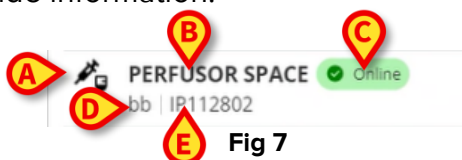


Fig 7

- Et ikon, der karakteriserer enhedstypen (Fig 7 **A**)
- Navnet på enheden (Fig 7 **B**).
- Indikationen af enhedens status (Fig 7 **C** - enten online eller offline).
- En etiket, der kan knyttes til enheden under konfigurationen for at give yderligere information (Fig 7 **D**)
- Enhedens serienummer, der entydigt identificerer enheden (Fig 7 **E**).

Sådan lukker du listen over tilknyttede enheder:

- Klik på knappen **Close** (Luk) angivet i Fig 5 **C**.

Det er muligt at vise et vindue for hver tilsluttet enhed, der viser de parametre, der er erhvervet af den specifikke enhed, med deres værdier og måleenhed. For at gøre dette:

- Klik på rækken, der svarer til enheden (Fig 8 **A**).

Vinduet angivet i Fig 8 **B** vises.

Dette vindue viser de parametre, der er erhvervet af enheden, med angivelse af deres navn, seneste værdi og måleenhed.

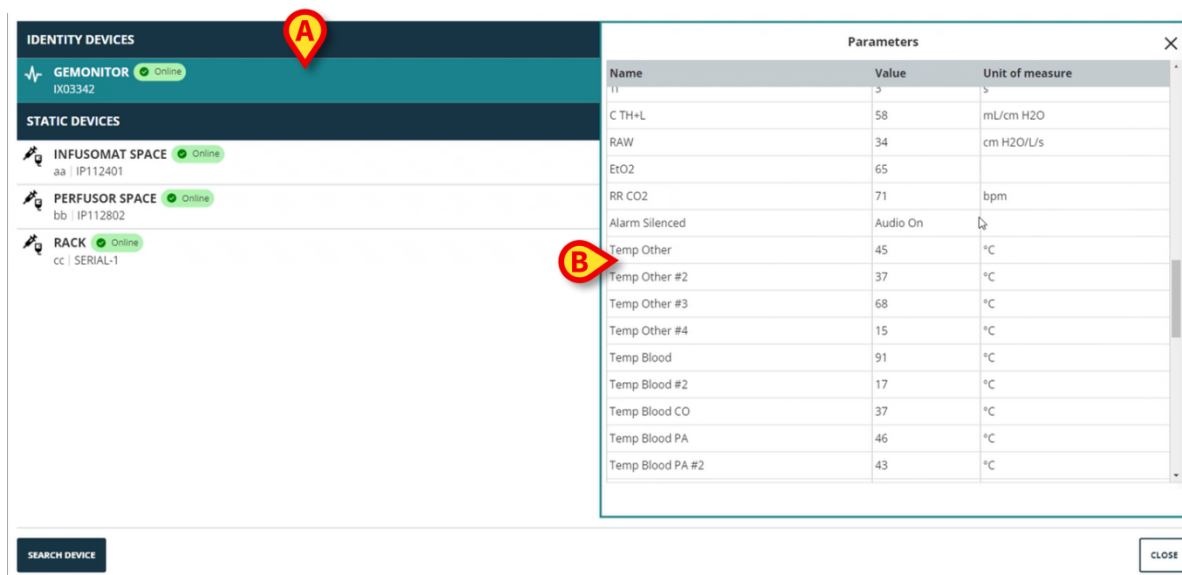


Fig 8

5. Frakoblingsprocedure

"Identity Web" tillader kun at operere på "Identity-enheder" (de bevægelige, dem, der er knyttet til patienten, ikke knyttet til sengen).

En frakoblingsknapp vises til højre for rækkerne, der svarer til "Identity-enhederne" (Fig 9 A).



Fig 9

For at frakoble en enhed

- Klik på knappen  (Fig 9 A).

Brugerbekræftelse er påkrævet, som vist i Fig 10 A.

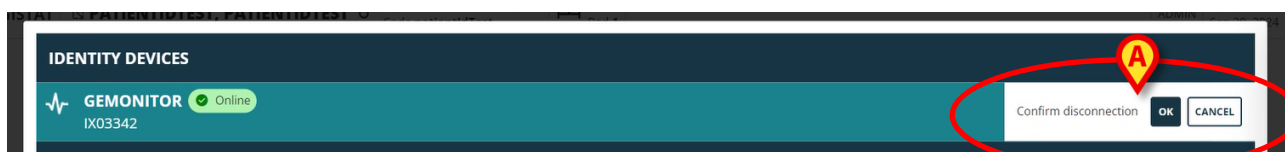


Fig 10

Efter bekræftelse frakobles enheden, men på grund af uddybende årsager, der kræver en progressiv afbrydelse, er rækken, der svarer til den frakoblede enhed:

a) først vist i området "statiske enheder" i "Online"-status (Fig 11 **A**);



Fig 11

b) derefter, efter en konfigurerbar tid, vist som "Offline" (Fig 12 **A**);



Fig 12

c) derefter, efter en konfigurerbar tid, fjernet fra listen (Fig 13).



Fig 13



Se også afsnittet 6.1 for frakoblingsproceduren efter søgning.

6. Søgning og tilknytningsprocedure

For at søge efter en enhed og knytte den til den aktuelt valgte patient:

- Klik på knappen **Search Device** (Søg enhed) i vinduet "Liste over tilknyttede enheder" (Fig 14 **A**).

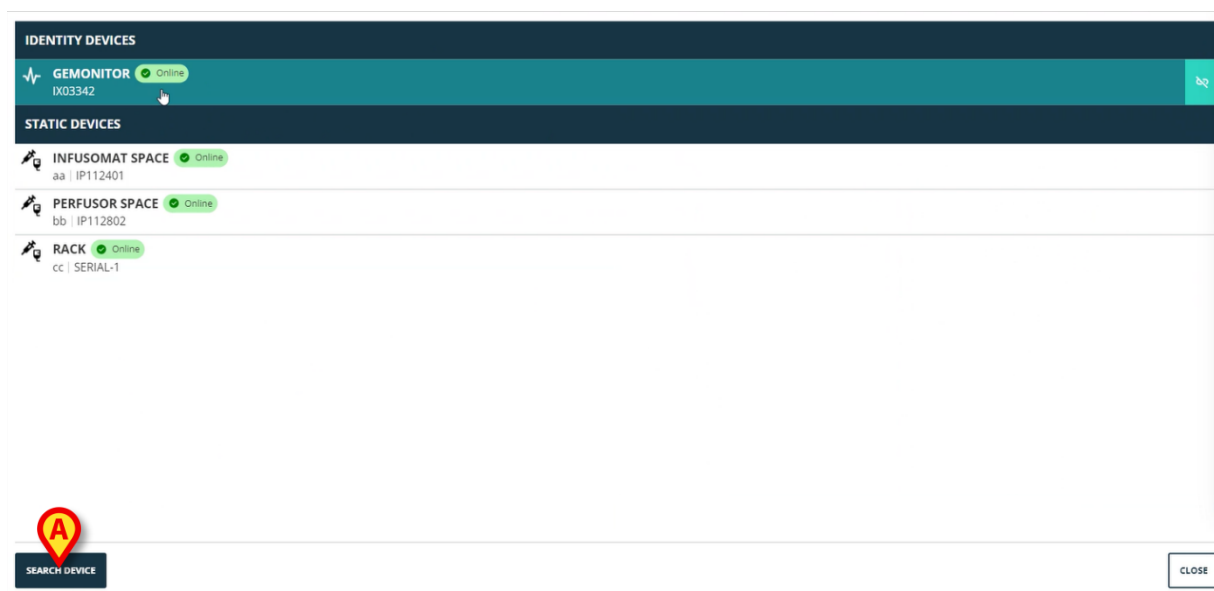


Fig 14

Et søgeværktøj vises til højre (Fig 15 **A**).

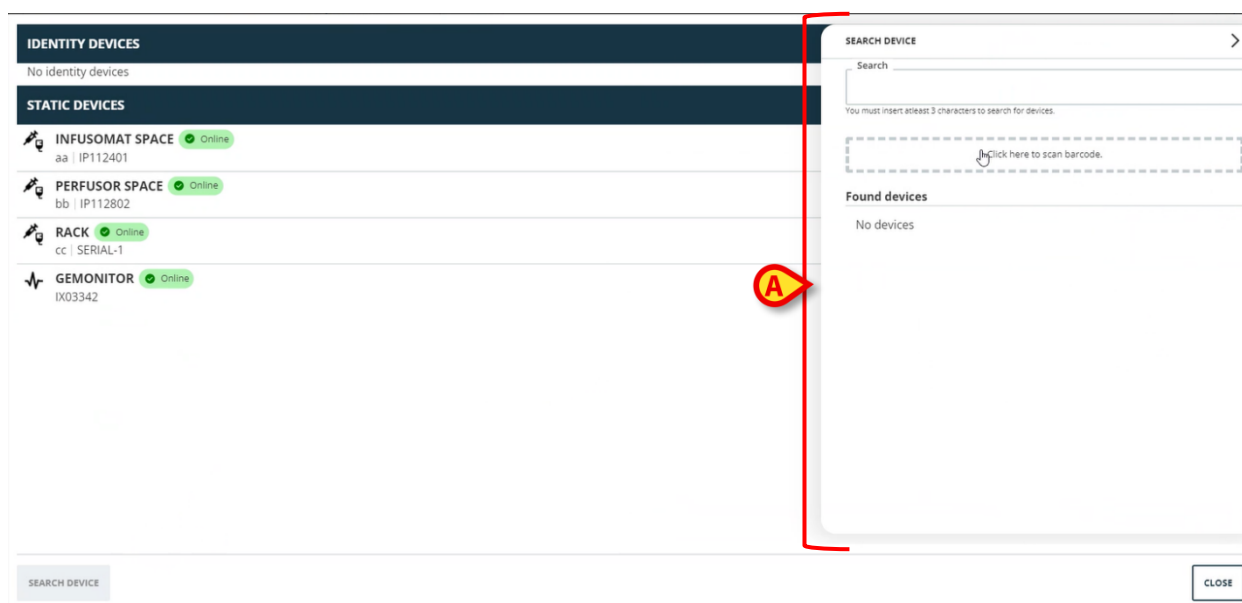


Fig 15

- Indtast navnet eller serienummeret på den relevante enhed i feltet angivet i Fig 16 **A**.

Der skal angives mindst tre tegn for at få vist resultaterne. Listen over enheder, der matcher den angivne streng, vises i området "Fundne enheder" (Fig 16 **B**).

Stregkodesøgning er også aktiveret (se afsnittet 7 for instruktioner).

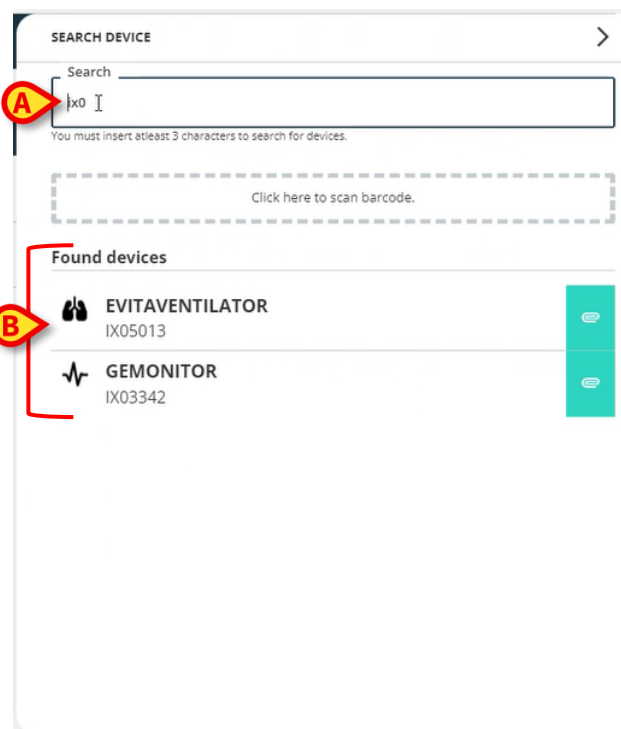


Fig 16

- Klik på knappen  placeret til højre for den enhed, der skal tilknyttes.

Den tilsvarende række ændres som vist i Fig 17 A.

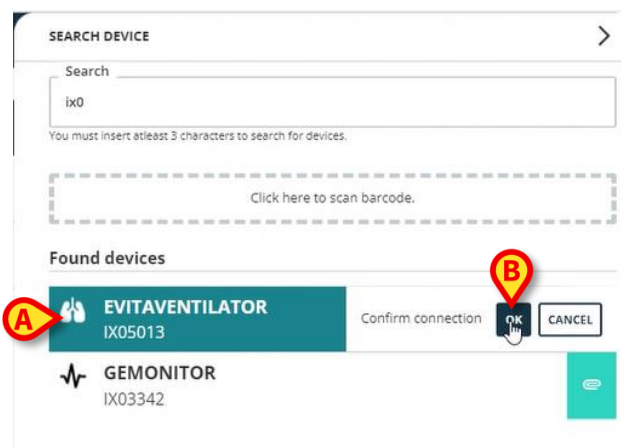


Fig 17

For at bekræfte tilknytningen

- Klik på knappen **Ok** (Fig 17 B).

Enheden vises derefter på listen over tilknyttede enheder i området "Identity-enhed" (Fig 18 A).

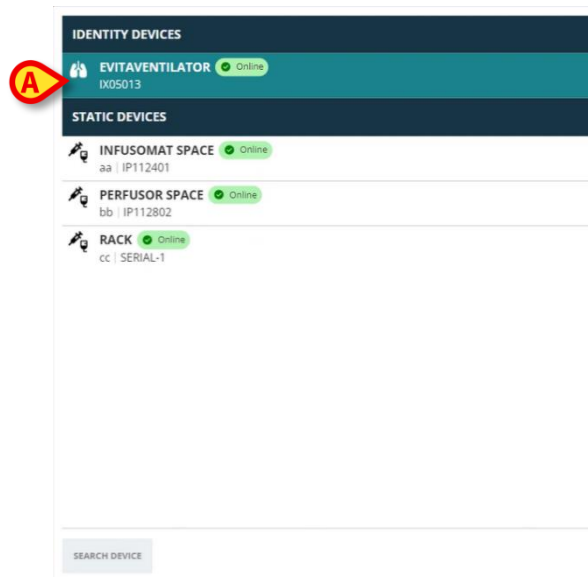


Fig 18

6.1. Frakobling efter søgning

De allerede tildelte enheder vises også som søgeresultater, men til højre er der en frakoblingsknap  der vises i stedet for tilknytningsknappen  (Fig 19 A).

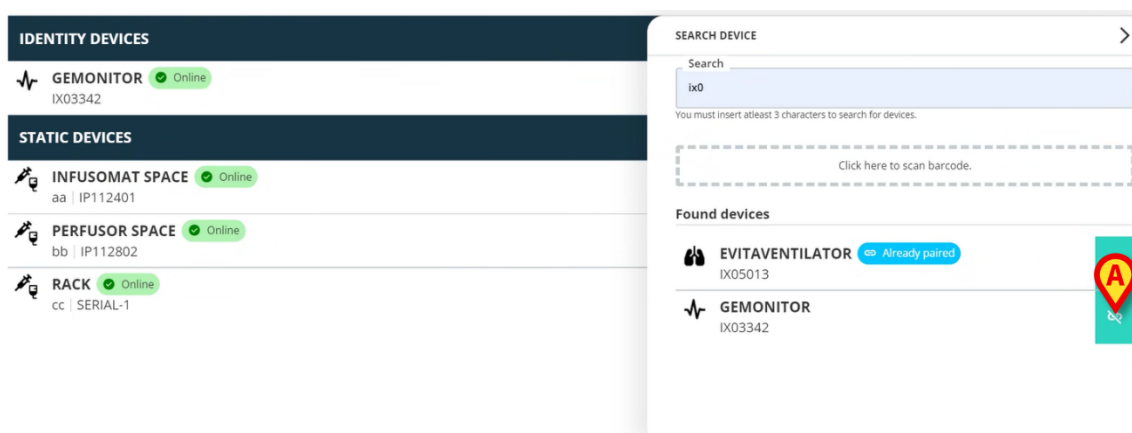


Fig 19

- Klik på knappen  for at frakoble enheden.

Brugerbekræftelse er påkrævet.

- Klik på knappen **Ok** for at bekræfte frakoblingen (Fig 20 A).

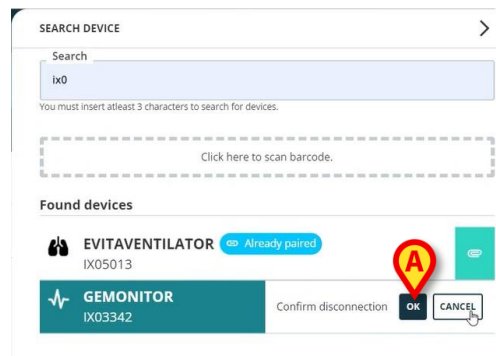


Fig 20

Den adskilte enhed forsvinder fra området "Identity-enheder" på listen over tilknyttede enheder. Den vises stadig i søgeresultaterne som "tilslutbar" enhed.

6.2. Allerede parrede enheder

Enheder, der er knyttet til andre patienter, vises i søgeresultaterne som "Allerede parret" (Fig 21 A).



Fig 21

De "Allerede parrede" enheder kan knyttes til den aktuelt valgte patient ved hjælp af standardproceduren beskrevet i afsnit 6. I disse tilfælde kræves en specifik brugerbekræftelse (Fig 22).

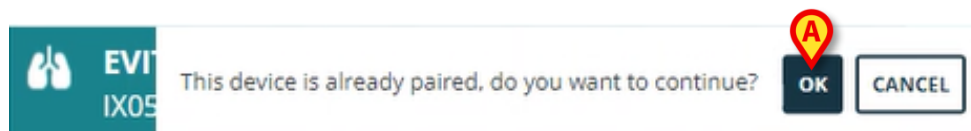


Fig 22

- Klik på **Ok** for at knytte enheden til den aktuelt valgte patient (Fig 22 A).

Enheden er på denne måde frakoblet fra den tidligere patient og knyttet til den aktuelt valgte.

7. Stregkode søgning og valg

Det er muligt at vælge en enhed efter stregkodesøgning. For at aktivere stregkodevalg, i vinduet "Søg enhed":

- Klik på det område, der er angivet i Fig 23 **A**.



Fig 23

Arbejdsstationens kamera aktiveres (Fig 24 **A**).



Fig 24

- Scan stregkoden på den relevante enhed.

Enhedsdataene vises i området "Fundne enheder" i vinduet "Søg enhed" (Fig 25 **A**).

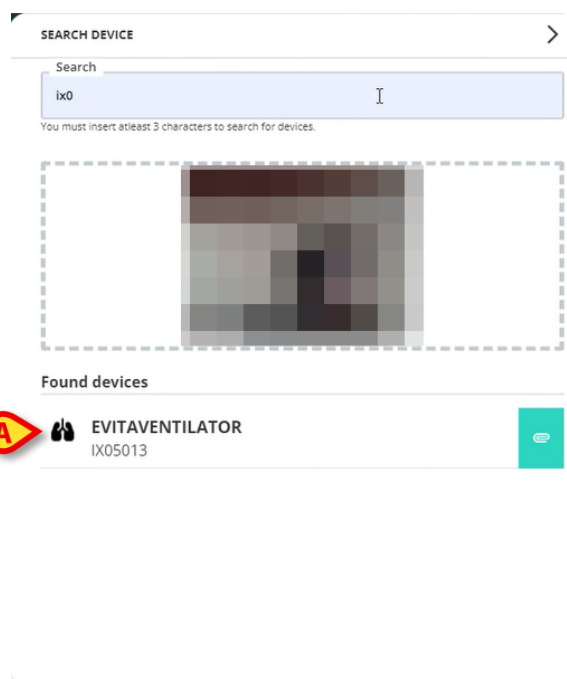


Fig 25

- Fortsæt med tilknytningsproceduren som beskrevet i afsnit 6.

Det kamera, der er aktiveret som standard, er det bageste kamera. "Identity Web" kan konfigureres til at tillade kameraskift. I dette tilfælde vises en dedikeret knap -



*- i området "Stregkodelæser" i vinduet "Søgenhed" (Fig 26 **A**). Kontakt systemadministratorerne for yderligere oplysninger om denne funktionalitet.*

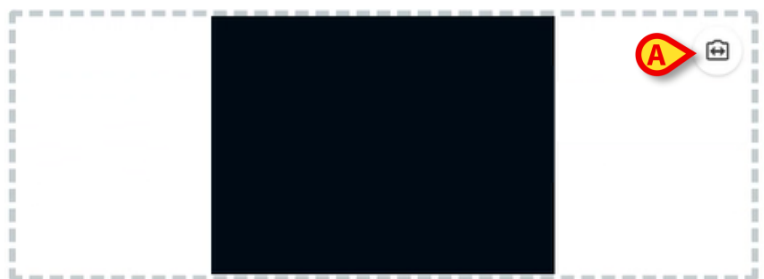


Fig 26



En systemindstilling kan konfigureres til at spore de valgte enheder via stregkode ved at tilføje et præfiks og et suffiks til enhedens serienummer. Præfikset og suffikset vises ikke på brugergrænsefladen.
