



Identity Web

Manual del usuario

Versión 0.1

2024-10-22

Contenido

Identity Web	3
1. Introducción.....	3
2. Selección de pacientes	3
3. Selección de "Identity Web"	4
4. Lista de dispositivos asociados.....	5
5. Procedimiento de disociación	6
6. Procedimiento de búsqueda y asociación	8
6.1. Disociación tras la búsqueda	10
6.2. Dispositivos ya emparejados	11
7. Búsqueda por código de barras y selección.....	12

Identity Web



Para obtener información sobre las condiciones, precauciones, advertencias y uso previsto del producto, consulte *USR ESP Digistat Care* y/o *USR ESP Digistat Docs* (dependiendo de los módulos instalados - para *Digistat Suite EU*) o *USR ENG Digistat Suite NA* (para *Digistat Suite NA*). El conocimiento y comprensión del documento apropiado son obligatorios para un uso correcto y seguro de "Identity Web", descrito en este documento.

1. Introducción



Identity Web es un submódulo de Control Bar Web que puede estar habilitado o no, dependiendo de la configuración utilizada en la organización sanitaria específica. Consulte a los administradores del sistema para obtener más información.

"Identity Web" permite asociar/desasociar rápidamente dispositivos médicos a pacientes en el contexto del entorno Digistat Web.



Sólo un subconjunto de los dispositivos configurados es elegible para el procedimiento de asociación / disociación rápida. Normalmente, el procedimiento se aplica a los dispositivos wi-fi que suelen trasladarse de un paciente a otro. En todos los casos, son las características, el modo de uso y la configuración del dispositivo los que lo hacen o no apto para el procedimiento aquí descrito.

2. Selección de pacientes

"Identity Web" sólo puede iniciarse tras la selección del paciente. Si desea seleccionar un paciente:

- Haga clic en el botón **Seleccionar paciente** como se indica Fig 1 A.



Fig 1

El módulo Patient Explorer Web se abre. Consulte el manual de usuario de Digistat® Patient Explorer Web (*USR ESP Patient Explorer*) para obtener más instrucciones sobre las funcionalidades de gestión de pacientes.



Se pueden configurar otros módulos para la selección de pacientes en lugar de Patient Explorer Web, dependiendo de la configuración. En ese caso, consulte la documentación específica para obtener las instrucciones.

Cuando se selecciona un paciente, el nombre y los datos principales del paciente se muestran en el botón **Paciente** (Fig 2 **A**).



Fig 2

3. Selección de "Identity Web"

Si "Identity Web" está disponible, el icono  aparece en el botón del paciente (Fig 3 **A**).



Fig 3

Para iniciar Identity Web:

- Haga clic en el icono .

Aparece una ventana desplegable con datos adicionales del paciente y las aplicaciones disponibles que pueden iniciarse en la barra Control Bar (Fig 4).

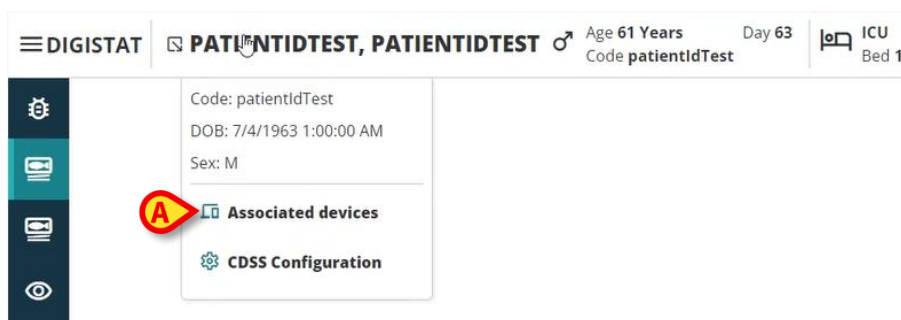


Fig 4

- Haga clic en "Dispositivos asociados" (Fig 4 **A**).

Aparece la siguiente ventana, con una lista de los dispositivos asociados al paciente actualmente seleccionado (Fig 5).

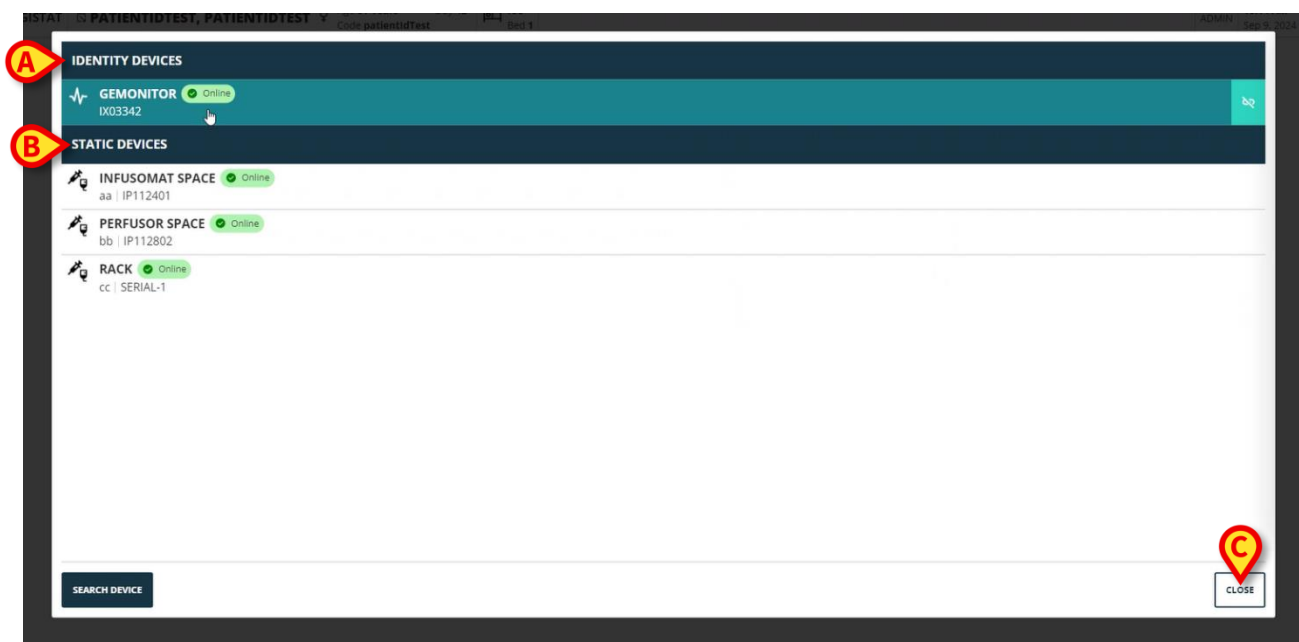


Fig 5

4. Lista de dispositivos asociados

La ventana "Lista de dispositivos asociados" (Fig 5) está dividida en dos secciones:

La sección **Dispositivos Identity** (Fig 5 **A**) enumera los dispositivos móviles que están actualmente asociados al paciente seleccionado.

La sección **Dispositivos estáticos** (Fig 5 **B**) enumera los dispositivos que están vinculados a la cama seleccionada y que no se pueden mover.

"Identity Web" sólo funciona en los **Dispositivos Identity**.

Cada fila de la ventana corresponde a un dispositivo (véase Fig 6, por ejemplo).



Fig 6

Para cada dispositivo se muestra la siguiente información:

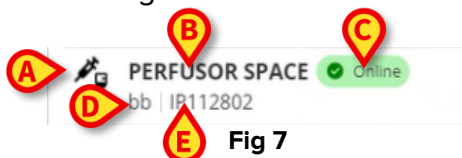


Fig 7

- Un icono que caracteriza el tipo de dispositivo (Fig 7 **A**)
- El nombre del dispositivo (Fig 7 **B**).
- La indicación del estado del dispositivo (Fig 7 **C** - En línea o Sin conexión).
- Una etiqueta, que puede asociarse al dispositivo durante la configuración para proporcionar información adicional (Fig 7 **D**)
- El número de serie del dispositivo, que lo identifica de forma exclusiva (Fig 7 **E**).

Para cerrar la lista de dispositivos asociados:


- Haga clic en el botón **Cerrar** como se indica en Fig 5 **C**.

Es posible mostrar una ventana, para cada dispositivo conectado, que enumere los parámetros adquiridos por el dispositivo específico, con sus valores y unidad de medida. Para hacerlo:

- Haga clic en la fila correspondiente al dispositivo (Fig 8 **A**).

Aparece la ventana como se indica en Fig 8 **B**.

Esta ventana enumera los parámetros adquiridos por el aparato, indicando su nombre, valor más reciente y unidad de medida.

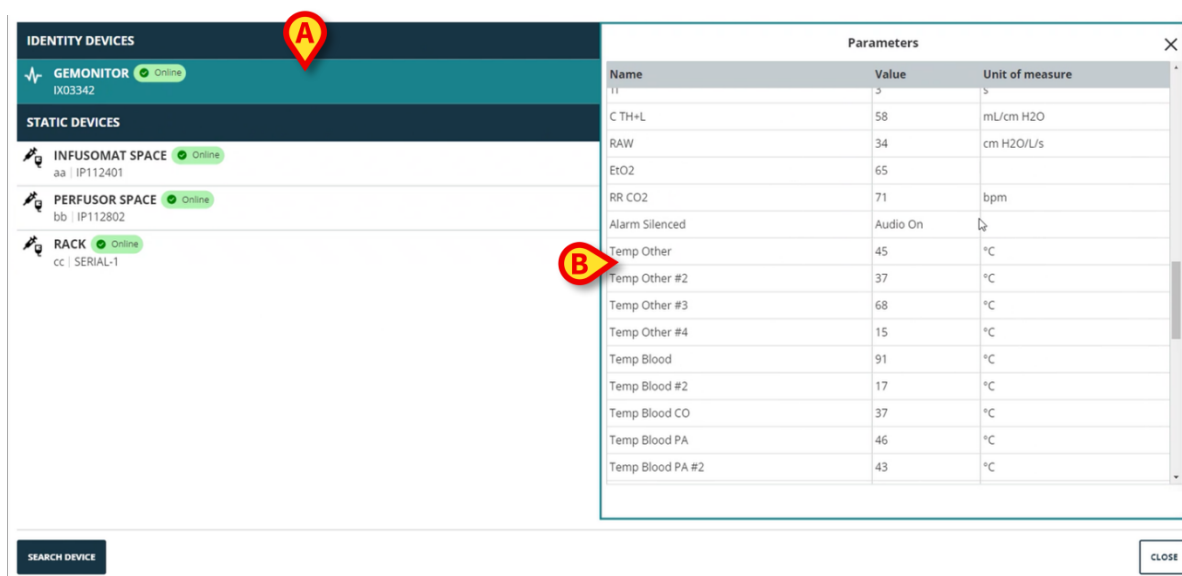

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red circle 'A' highlights the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of parameters for the selected device. A red circle 'B' highlights the 'Parameters' window.

Name	Value	Unit of measure
TH	3	°C
C TH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Fig 8

5. Procedimiento de disociación

"Identity Web" sólo permite operar sobre "Dispositivos Identity" (los móviles, los asociados al paciente, no vinculados a la cama).

A la derecha de las filas correspondientes a los "Dispositivos Identity" (Fig 9 **A**) aparece un botón de disociación.



The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with the GEMONITOR device (IX03342) highlighted. A red circle 'A' highlights the dissociation button (a small icon) located to the right of the device name.

Fig 9

Para desasociar un dispositivo

- Haga clic en el botón  (Fig 9 **A**).

Se requiere la confirmación del usuario, como se muestra en Fig 10 **A**.

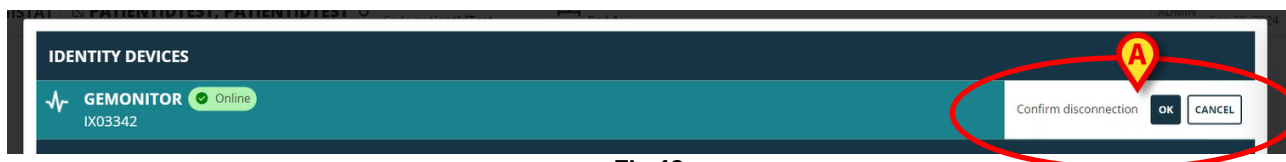


Fig 10

Tras la confirmación, el dispositivo se desvincula pero, por motivos de elaboración, requiere una desconexión progresiva, la fila correspondiente al dispositivo desvinculado es:

- a) aparece por primera vez en la zona "Dispositivos estáticos", en estado "En línea" (Fig 11 A);



Fig 11

- b) después de un tiempo configurable, aparece como "Sin conexión" (Fig 12 A);



Fig 12

- c) después de un tiempo configurable, se elimina de la lista (Fig 13).



Fig 13



Véase también la sección 6.1 para el procedimiento de disociación después de la búsqueda.

6. Procedimiento de búsqueda y asociación

Para buscar un aparato y asociarlo al paciente actualmente seleccionado:

- Haga clic en el botón **Buscar dispositivo** de la ventana "Lista de dispositivos asociados" (Fig 14 A).

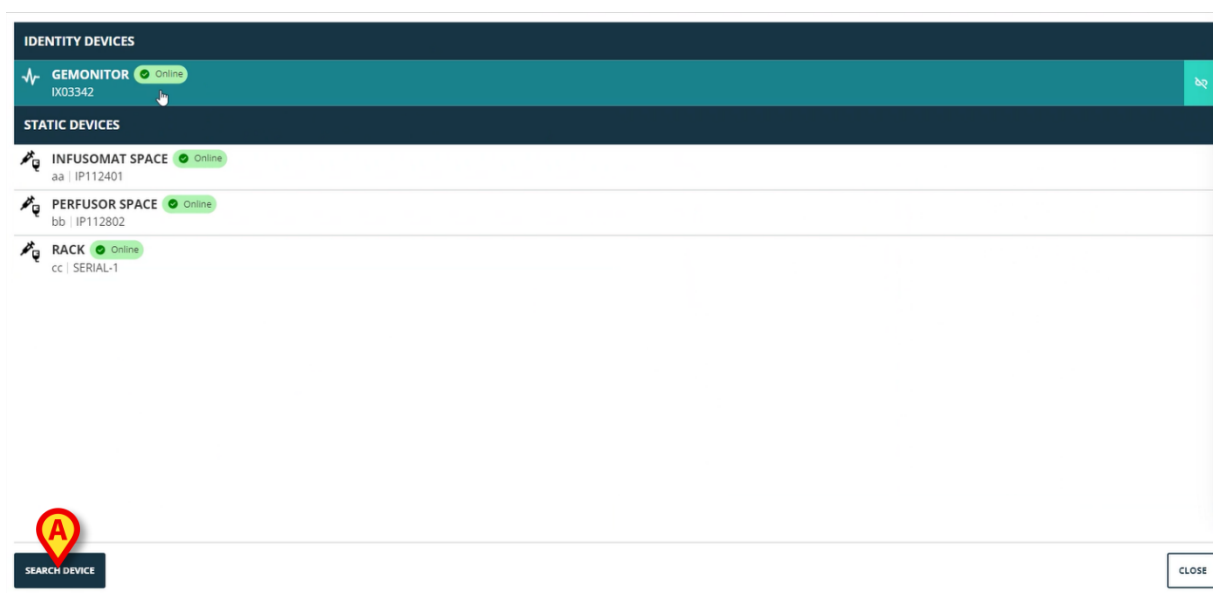


Fig 14

A la derecha aparece una herramienta de búsqueda (Fig 15 A).

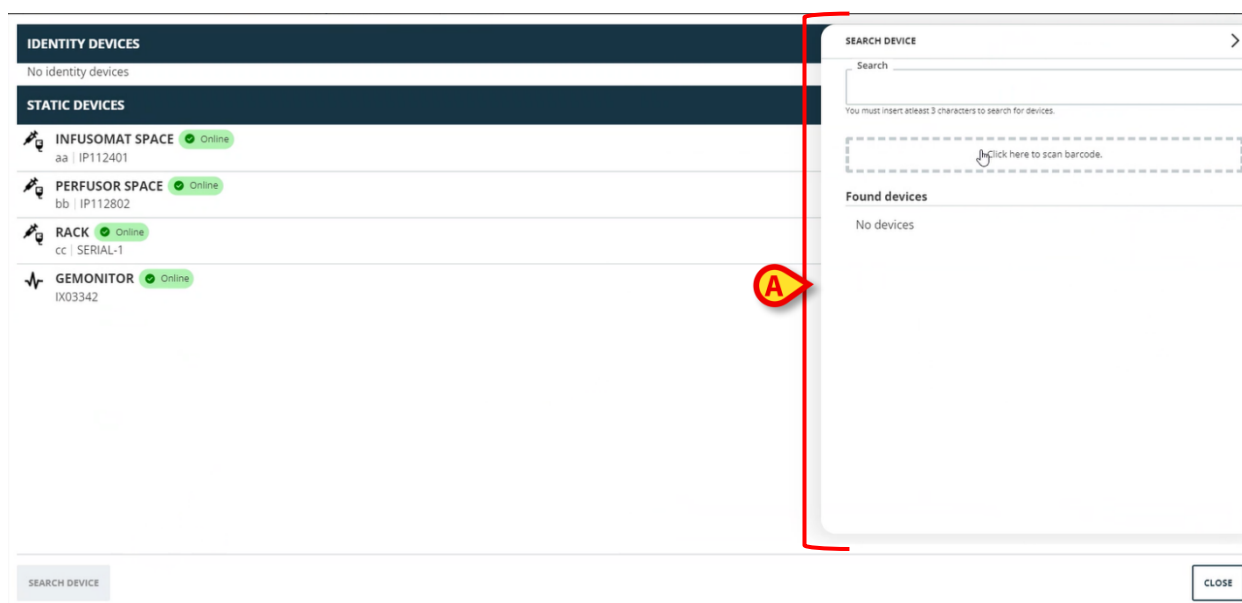


Fig 15

- Escriba el nombre o el número de serie del dispositivo correspondiente en el campo como se indica en Fig 16 **A**.

Deben especificarse al menos tres caracteres para que se muestren los resultados. La lista de dispositivos que coinciden con la cadena especificada se muestra en el área "Dispositivos encontrados" (Fig 16 **B**).

También se habilita la búsqueda por código de barras (consulte las instrucciones en la sección 7).

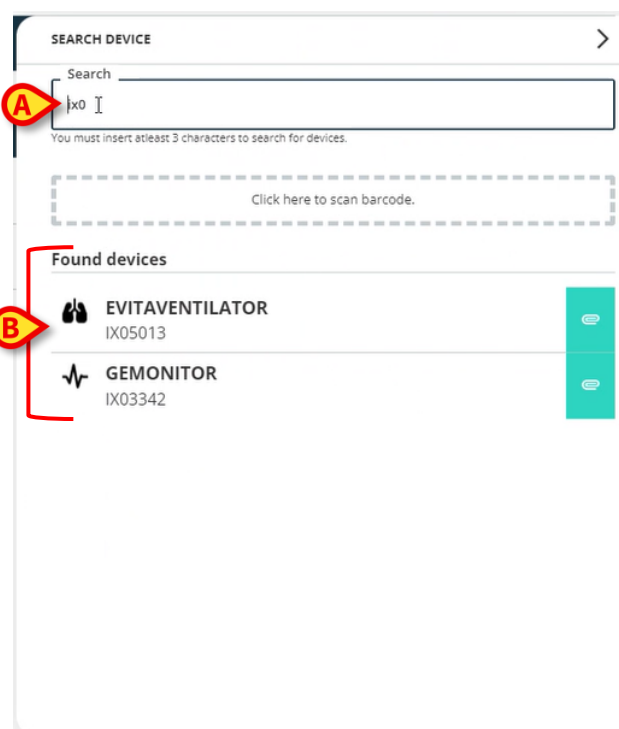


Fig 16

- Pulse el botón  situado a la derecha del dispositivo que desea asociar.

La fila correspondiente cambia como se muestra en Fig 17 **A**.

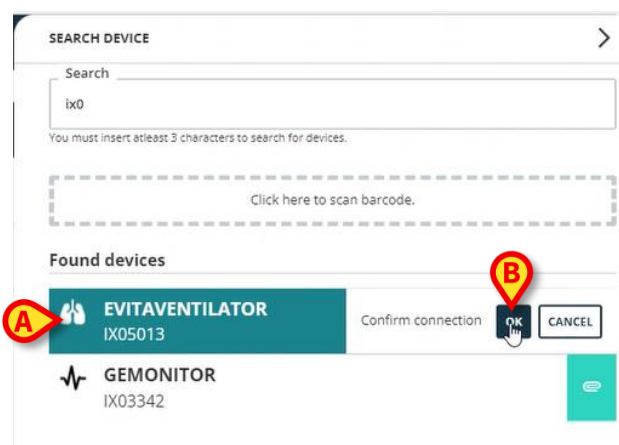


Fig 17

Para confirmar la asociación

- Pulse el botón **Aceptar** (Fig 17 B).

A continuación, el dispositivo aparece en la lista de dispositivos asociados, en la zona de "dispositivo Identity" (Fig 18 A).

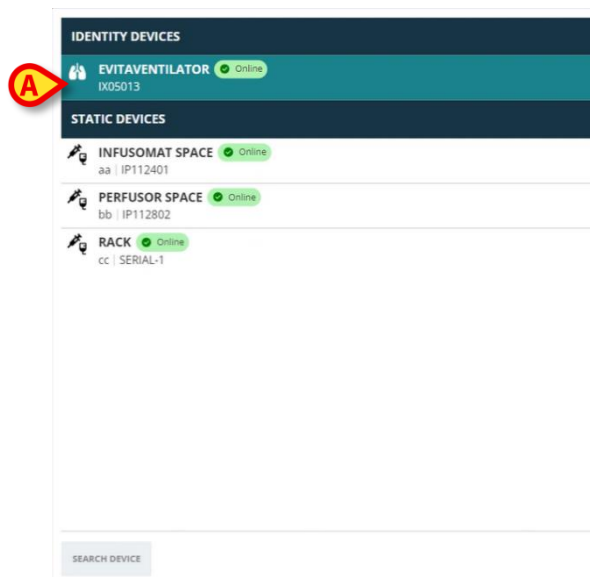


Fig 18

6.1. Disociación tras la búsqueda

Los dispositivos ya asignados también se muestran como resultados de la búsqueda pero, a la derecha, aparece un botón de disociación  en lugar del botón de asociación  (Fig 19 A).

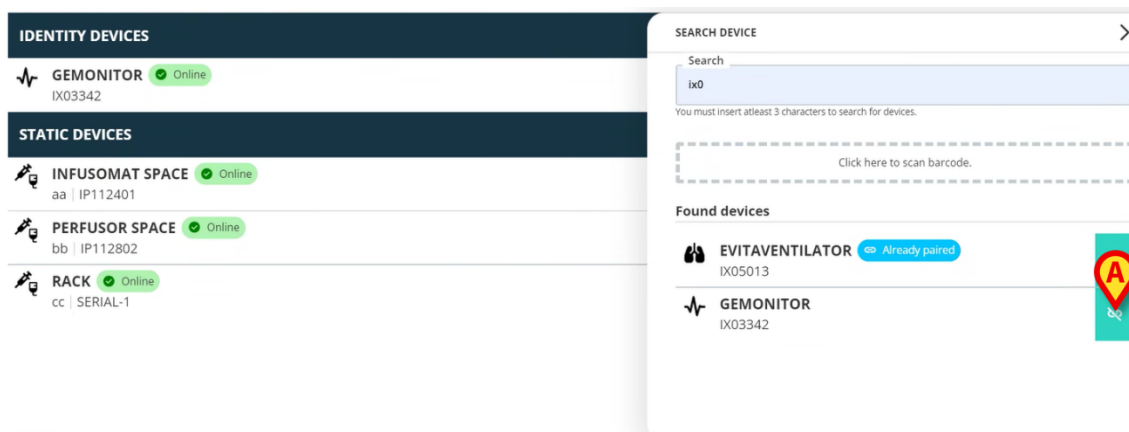


Fig 19

- Haga clic en el botón  para desasociar el dispositivo.

Se requiere la confirmación del usuario.

- Pulse el botón **Aceptar** para confirmar la disociación (Fig 20 A).

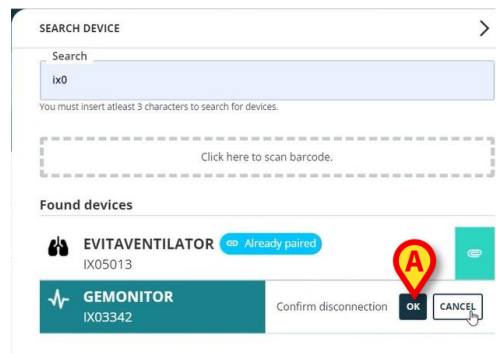


Fig 20

El dispositivo disociado desaparece del área "Dispositivos Identity" de la lista de dispositivos asociados. Sigue apareciendo en los resultados de búsqueda como dispositivo "conectable".

6.2. Dispositivos ya emparejados

Los dispositivos que están asociados a otros pacientes aparecen en los resultados de la búsqueda como "Ya emparejados" (Fig 21 A).



Fig 21

Los dispositivos "Ya emparejados" pueden asociarse al paciente actualmente seleccionado mediante el procedimiento estándar descrito en la sección 6. En estos casos se requiere una confirmación específica del usuario (Fig 22).

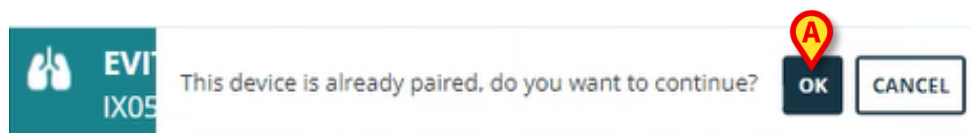


Fig 22

- Haga clic en **Ok** para asociar el dispositivo al paciente actualmente seleccionado (Fig 22 A).

De este modo, el dispositivo se desconecta del paciente anterior y se asocia al seleccionado en ese momento.

7. Búsqueda por código de barras y selección

Es posible seleccionar un dispositivo tras la búsqueda del código de barras. Para activar la selección del código de barras, en la ventana "Buscar dispositivo":

- Haga clic en la zona que se indica en Fig 23 **A**.



Fig 23

La cámara de la estación de trabajo se activa (Fig 24 **A**).

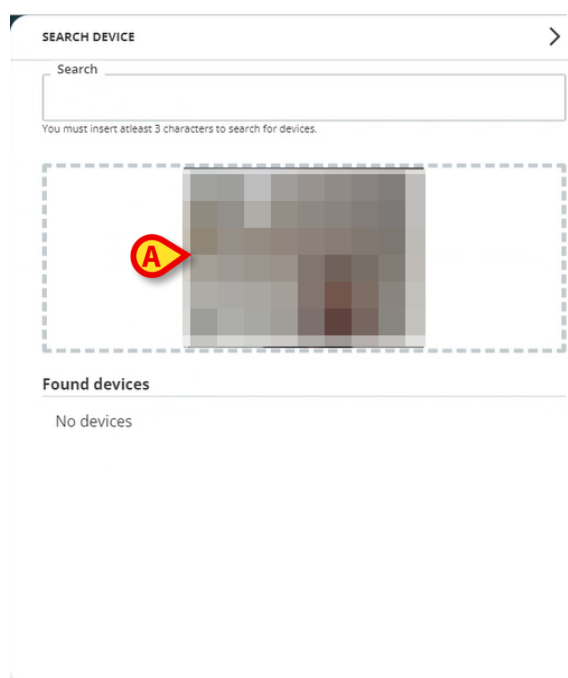


Fig 24

- Escanee el código de barras del dispositivo correspondiente.

Los datos del dispositivo se muestran en el área "Dispositivos encontrados" de la ventana "Buscar dispositivo" (Fig 25 **A**).

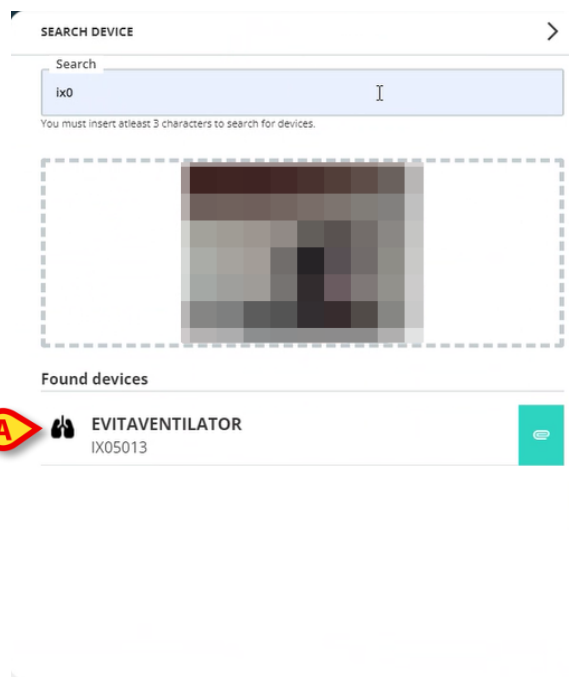


Fig 25

- Proceda con el procedimiento de asociación tal y como se describe en el apartado 6.

La cámara que se activa por defecto es la cámara trasera. "Identidad Web" puede configurarse para permitir el cambio de cámara. En ese caso, aparece un botón específico -  - en la zona "Lector de códigos de barras" de la ventana "Buscar dispositivo" (Fig 26 **A**). Póngase en contacto con los administradores del sistema para obtener información adicional sobre esta funcionalidad.

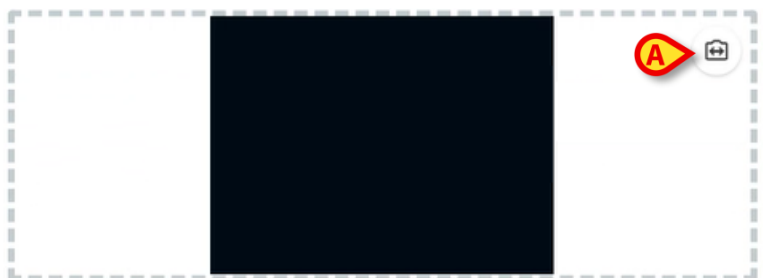


Fig 26



Se puede configurar una opción del sistema para rastrear los dispositivos seleccionados mediante código de barras añadiendo un prefijo y un sufijo al número de serie del dispositivo. El prefijo y el sufijo no se muestran en la interfaz de usuario.