



Collect Mobile

Käyttäjän ohjekirja

Versio 3.0

14/12/2020

Sisällysluettelo

1. "Collect"	3
1.1 Johdanto	3
1.2 Sovelluksen käynnistys.....	3
1.3 Pääsivu	4
1.3.1 Potilasluettelo	4
1.3.2 Potilasluettelon potilassivu	5
1.3.3 Potilasvalinnan potilassivu	5
1.4 Potilassivu.....	7
1.4.1 Uuden tiedonkeruun aloittaminen.....	7
1.4.2 Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen.....	9
1.4.3 Näytä viimeksi hankitut tiedot.....	9

1. “Collect”



Tuoteympäristöä koskevat yleiset ja yksityiskohtaiset tiedot ja Mobile Launcher -ohjelmiston käyttöohjeet ovat tuotteen erityisasiakirjoissa. Näiden asiakirjojen tuntemus ja ymmärtäminen on pakollista tässä asiakirjassa kuvatun Collect Mobile -moduulin asianmukaiselle ja turvalliselle käytölle.



Huomaa, että “Collect”-moduulin ominaisuudet ja toiminnot ovat täysin käytettävissä silloin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Ponnahdusviesti ilmoittaa sovellusta käyttävälle käyttäjälle, jos hän ei ole kirjautunut sisään.

1.1 Johdanto

“Collect”-moduulin avulla käyttäjä voi hankkia tietoja potilaaseen liittyvistä laitteista (jopa väliaikaisesti) ja hän voi valita tietojen toisto- ja kestoajat.

“Collect”-moduuli käsittelee potilaiden tietoja, vaikka he eivät olisikaan vuoteessa. Tietojen hankinta- ja toistoajoja voidaan muokata täysin.

1.2 Sovelluksen käynnistys

“Collect”-moduulin käynnistäminen:

- Kosketa vastaavaa riviä kädessä pidettävän laitteen näytöltä (Kuva 1).



Kuva 1

Käynnissä olevien tiedonkeruusessiodien määrä näkyy punaisessa ympyrässä sovelluskuvakkeen yläpuolella (Kuva 1 A).

Kun olet koskettanut moduulikuvaketta, pääsivu "Collect" avautuu (Kuva 2):



Kuva 2

1.3 Pääsivu


Sovelluksen pääsivulla näytetään kaikki potilaat (Kuva 2), joiden tietojen katsomiseen käyttäjällä on oikeudet. Lisäksi näytetään myös potilaat, joihin liittyvä tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä.

Kun tiedonkeruu on käynnissä, tiedonkeruutyyppi näytetään käyttäjälle. Tiedonkeruutyyppinä on kolmenlaisia:

- Jatkuva, jonka kuvake on .
- Käynnistys ja pysäytys, jonka kuvake on .
- Sekoitettu (eli käynnistys ja pysäytys -keräystyyppi, joka korvaa Jatkuva-keräystyyppin), jonka kuvake on .

1.3.1 Potilasluettelo

Jokaista potilasta edustaa yksi laatikko (Kuva 3).

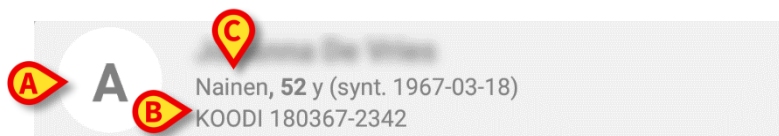


Kuva 3

Laatikossa näkyvät seuraavat tiedot:

- vuoteen numero (jos saatavilla – Kuva 3 **A**)
- potilastiedot (sukupuoli, ikä, syntymäaika, potilastunnus – Kuva 3 **B**)
- kyseisessä vuoteessa olevan potilaan nimi (Kuva 3 **C**)

Käynnissä olevaan tiedonkeruuseen liittyvän potilaan laatikko on väriltään erilainen (Kuva 4):

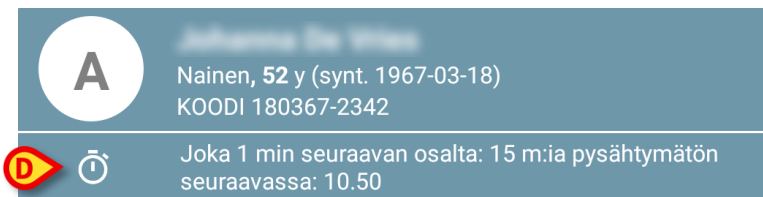

Kuva 4

Jos tietoja kerätään, lisätään rivi, jossa näytetään keräystyyppi sekä keräyksen kesto ja toistoajat (Kuva 4 **D**).

1.3.2 Potilasluettelon potilassivu

Potilassivun käyttäminen:


- Kosketa potilasluettelossa olevaa laatikkoa.

Potilassivulla näkyy luettelo laitteista, jotka voivat kerätä tietoja valitusta potilaasta (Kuva 2).

1.3.3 Potilasvalinnan potilassivu


“Collect”-sovellus suorittaa tiedonkeruuta myös sellaisista potilaista, joiden tietojen katsomiseen käyttäjällä ei ole oikeuksia. Se voidaan suorittaa hakemalla ja valitsemalla potilas ennen sovelluksen avaamista. Voit lukea yksityiskohtaisen kuvauksen menettelystä Mobile Launcher käyttöoppaasta.

- Voit etsiä haluamasi potilaan koskettamalla Mobile Launcher -päänäytöllä hakukuvaketta (Kuva 5 **A**):

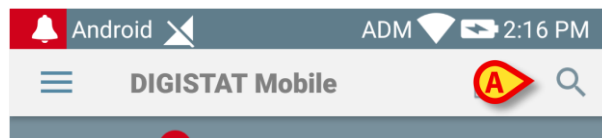


Kuva 5

- Etsi haluamasi potilas tekstihaulla tai viivakoodilla (Kuva 6).

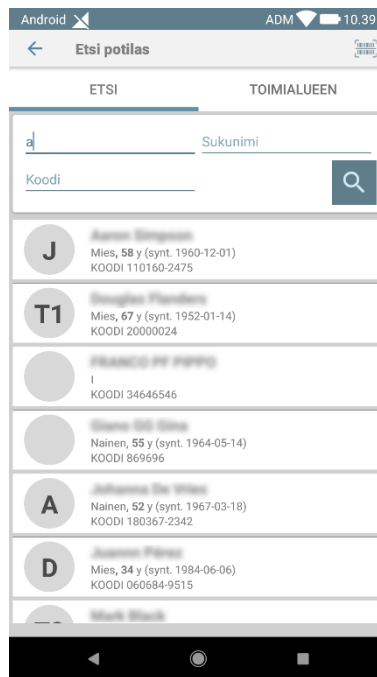

Kuva 6

- Valitse haluamasi potilas. Käyttäjän vahvistuksen jälkeen näkyy mobiilisovelluksen pääsivu (Kuva 7):

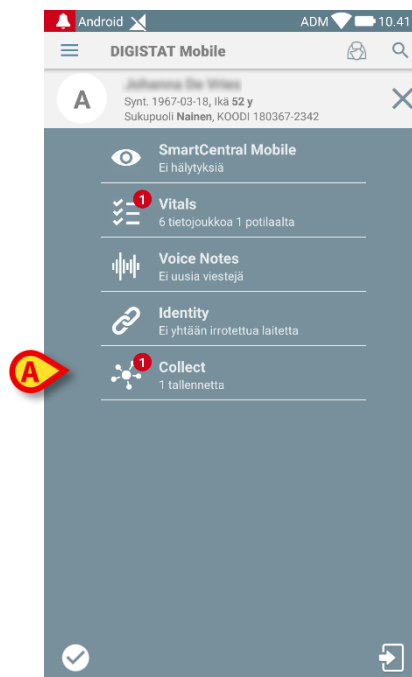


Kuva 7

- Kosketa "Collect"-sovellusta vastaavaa riviä kädessä pidettävän laitteen näytöllä (Kuva 7)

Potilassivu tulee näkyviin (1.3.1).

1.4 Potilassivu

Potilassivunäyttö koostuu kahdesta alueesta: otsikko-alueesta (Kuva 8 **A**) ja potilaaseen yhdistetystä laiteluettelosta (Kuva 8 **B**):

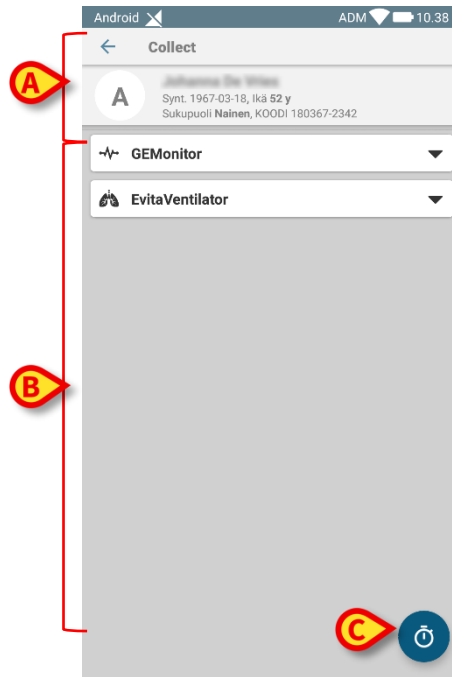

Kuva 8

Otsikkoalueessa näkyvät samat tiedot kuin laatikossa, joka liittyy potilasluettelonäytössä tarkasteltavaan potilaaseen (katso Kuva 9).


Laiteluettelossa näkyvät kaikki laitteet, jotka voivat hankkia tietoja potilaasta.

1.4.1 Uuden tiedonkeruun aloittaminen

Uuden tiedonkeruun aloittaminen:

- Kosketa  -kuvaketta potilassivulla (Kuva 8 **C**):


Näyttöön tulee seuraava valintaikkuna, jonka avulla käyttäjä voi valita tiedonkeruun keston ja toistumistiheyden (eli toistoajan) (Kuva 9):

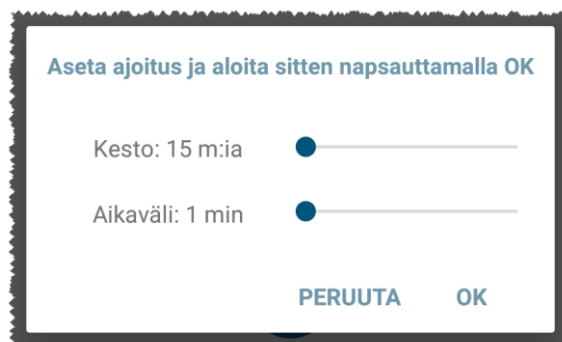

Kuva 9

- Valitse haluamasi kesto ja aikaväli ja paina sitten **OK**.

Potilassivu tulee näkyviin, ja sitä on muutettu hieman seuraavasti (Kuva 10):

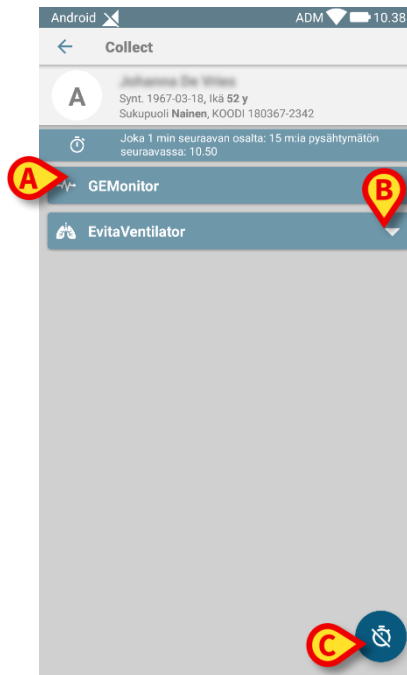

Kuva 10

Nyt lisätään rivi, jossa näkyy käynnissä olevan tiedonkeruun kesto ja toistumisajat (Kuva 10 **A**). Lisäksi tiedonkeruun käynnistävä kuvake korvataan nyt kuvakkeella, joka mahdollistaa sen pysäyttämisen (– Kuva 10 **C**).

Kuten aikaisemmin on havaittu, silloin kun tiedonkeruu on aloitettu, potilasluettelon näytössä oleva kyseessä olevaan potilaaseen liittyvä laatikko on myös väriltään erilainen (Kuva 11):




Kuva 11

1.4.2 Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen

Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen:

- Kosketa  potilassivulla olevaa kuvaketta (Kuva 10 C):

Näyttöön tulee seuraava valintaikkuna, joka pyytää käyttäjän vahvistusta (Kuva 12):

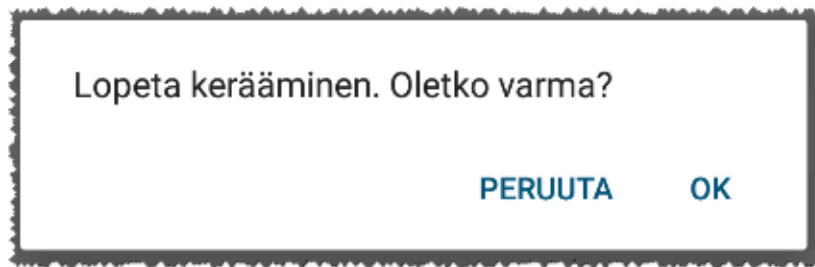


Kuva 12

1.4.3 Näytä viimeksi hankitut tiedot

Nähdäksesi viimeksi hankitut tiedot toimi seuraavalla tavalla riippumatta siitä, onko tiedonkeruu käynnissä vai ei:

- Kosketa liitettyyn laitteeseen liittyvää laatikkoa (Kuva 13):

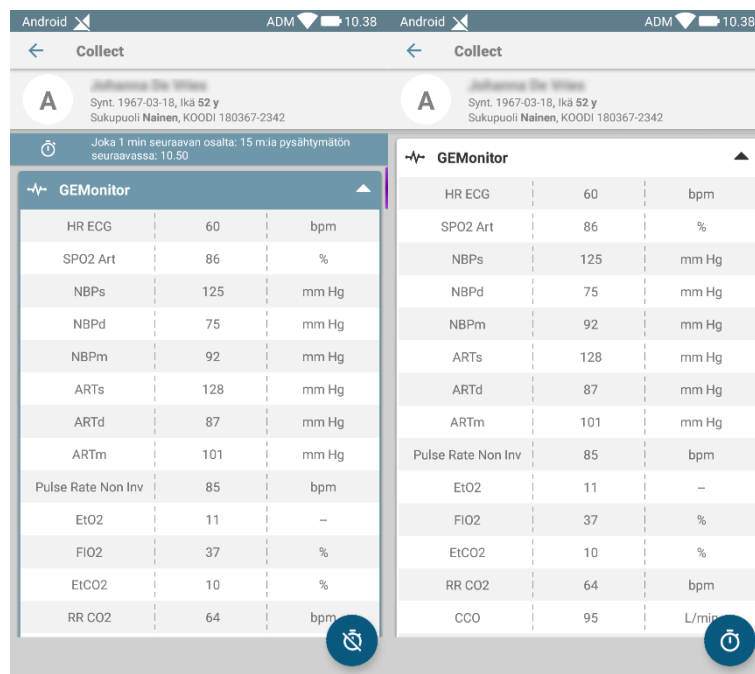

Kuva 13