



Identity Web Käyttöopas

Versio 1.0

7/8/2025

Sisältö

Identity Web	3
1. Johdanto	3
2. Potilaan valinta.....	3
3. "Identity Web" valinta	4
4. Luettelo liitetyistä laitteista	5
5. Irrottamismenettely.....	6
6. Haku- ja assosiaatiomenettely	8
6.1. Irrottaminen haun jälkeen	10
6.2. Jo pariliitetyt laitteet	11
7. Viivakoodin haku ja valinta	12

Identity Web



Lisätietoja tuoteympäristöstä, varotoimista, varoituksista ja käyttötarkoituksesta on asiakirjoissa *USR FIN Digistat Care* ja/tai *USR FIN Digistat Docs* (asennetuista moduuleista riippuen - *Digistat Suite EU*) tai *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA*). Asianmukaisen asiakirjan tuntemus ja ymmärtäminen ovat pakollisia tässä asiakirjassa kuvatun "Identity Webin" oikean ja turvallisen käytön kannalta.

1. Johdanto



Identity Web on Control Bar Webin alimoduuli, joka voidaan ottaa käyttöön tai ottaa pois käytöstä tietyssä terveydenhuollon organisaatiossa käytössä olevan konfiguraation mukaan. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.

"Identity Web" mahdollistaa lääkinnällisten laitteiden nopean yhdistämisen/irrottamisen potilaisiin Digistat Web -ympäristön yhteydessä.



Vain konfiguroitujen laitteiden alisarja on kelvollinen nopeaan yhdistämis-/irrottamismenettelyyn. Toimenpidettä sovelletaan yleensä Wi-Fi-laitteisiin, joita siirretään usein potilaalta toiselle. Kaikissa tapauksissa laitteen ominaisuudet, käyttötapa ja konfiguraatio tekevät siitä tässä kuvatun menettelyn mukaisen tai ei.

2. Potilaan valinta

"Identity Web" voidaan käynnistää vasta potilaan valinnan jälkeen. Potilaan valitseminen

- Napsauta kohdassa Kuva 1 **A** näkyvää **Valitse Potilas** -painiketta.



Kuva 1

Patient Explorer Web (Potilaan verkkoselain) -moduuli avautuu. Katso Digistat® Patient Explorer Web -käyttöoppaasta (*USR FIN Patient Explorer Web*) lisäohjeita potilaan hoitotoiminnoista.



Potilaan valintaan voidaan konfiguroida muita moduuleja Patient Explorer Webin sijaan konfiguroinnista riippuen. Jos näin on, katso ohjeet erityisistä asiakirjoista.

Kun potilas valitaan, potilaan nimi ja tärkeimmät tiedot näkyvät **Potilas**-painikkeessa (Kuva 2 A).



Kuva 2

3. "Identity Web" valinta

Jos "Identity Web" on käytettävissä,  kuvake näkyy potilaan painikkeessa (Kuva 3 A).




Kuva 3

Identity Webin käynnistäminen:

- Napsauta  kuvaketta.


Näyttöön tulee avattava ikkuna, joka sisältää lisää potilastietoja ja käytettävissä olevat sovellukset, jotka voidaan käynnistää ohjauspalkissa (Kuva 4).

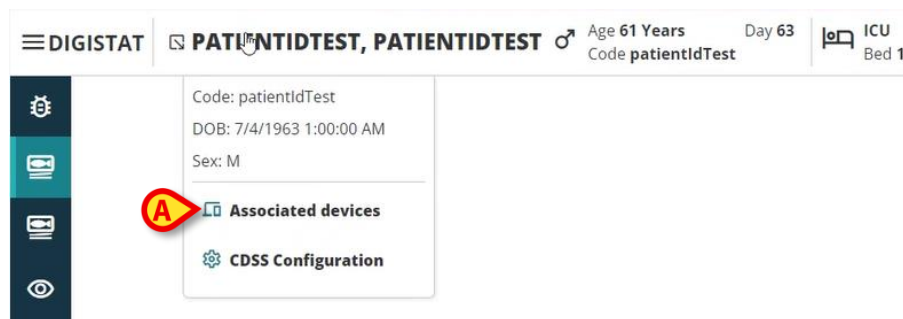

Kuva 4

- Napsauta "Associated Devices" (Kuva 4 A).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät laitteet (Kuva 5).

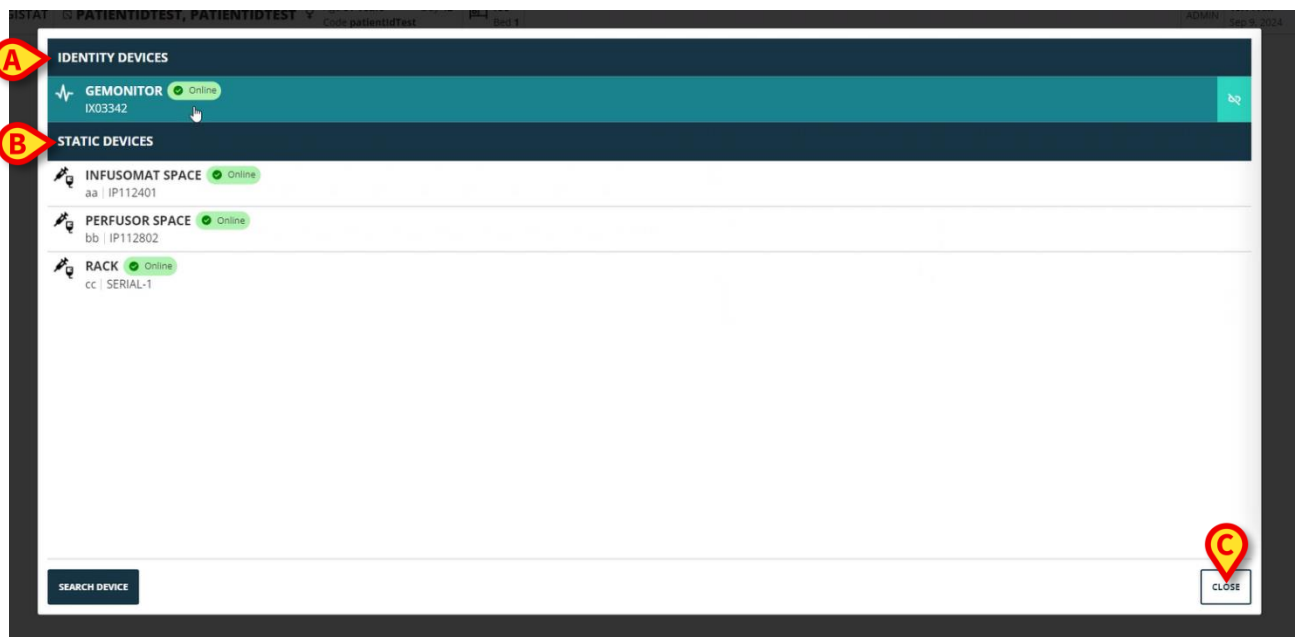

Kuva 5

4. Luettelo liitettyistä laitteista

"Associated Devices list" -ikkuna (Kuva 5) on jaettu kahteen osaan:

Identity Devices -osiossa (Kuva 5 **A**) luetellaan siirrettävät laitteet, jotka on tällä hetkellä liitetty valittuun potilaaseen.

Staattiset laitteet -osiossa (Kuva 5 **B**) luetellaan laitteet, jotka on linkitetty valittuun sänkyyn ja joita ei voi siirtää.

"Identity Web" toimii vain **Identity Devices** -laitteissa.

Jokainen ikkunan rivi vastaa laitetta (ks. Kuva 6 esimerkki).



Kuva 6

Jokaisesta laitteesta näytetään seuraavat tiedot:



Kuva 7

- Laitetyyppiä kuvaava kuvake (Kuva 7 **A**)
- Laitteen nimi (Kuva 7 **B**).
- Laitteen tilan ilmaisu (Kuva 7 **C** - joko online- tai offline-tilassa).
- Merkintä, joka voidaan liittää laitteeseen konfiguroinnin aikana lisätietojen antamiseksi (Kuva 7 **D**)
- Laitteen sarjanumero, joka yksilöi laitteen (Kuva 7 **E**).

Liittyvien laitteiden luettelon sulkeminen:


- Napsauta kohdassa **C** Kuva 5 näkyvää **Sulje-painiketta**.

Jokaiselle liitetylle laitteelle on mahdollista näyttää ikkuna, jossa luetellaan tietyn laitteen hankkimat parametrit, niiden arvot ja mittayksikkö. Toimi näin:

- Napsauta laitetta vastaavaa riviä (Kuva 8 **A**).

Näyttöön tulee kohdassa **B** Kuva 8 ilmoitettu ikkuna.

Tässä ikkunassa luetellaan laitteen hankkimat parametrit ja ilmoitetaan niiden nimi, viimeisin arvo ja mittayksikkö.

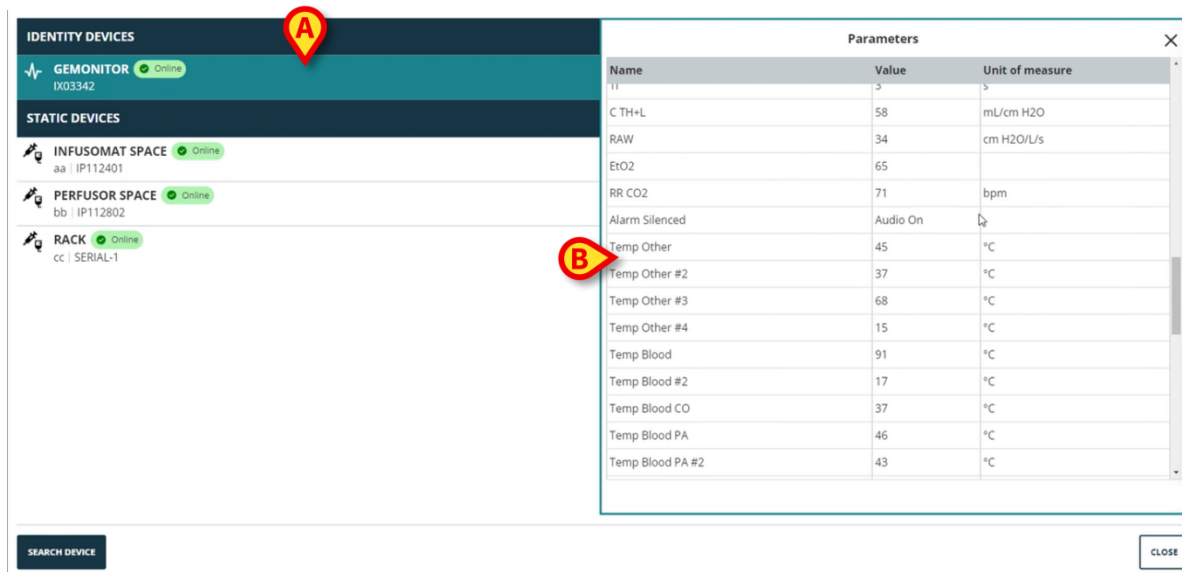

Kuva 8

5. Irrottamismenettely

"Identity Web" sallii toiminnan vain "Identity Devices" -laitteissa (siirrettävissä laitteissa, potilaaseen liittyvissä laitteissa, joita ei ole liitetty sänkyyn).

Irrottamispainike näkyy "Identity Devices" -laitteita (Kuva 9 **A**) vastaavien rivien oikealla puolella.



Kuva 9

Laitteen irrottaminen

- Napsauta  painiketta (Kuva 9 **A**).

Käyttäjän vahvistus vaaditaan, kuten kohdassa Kuva 10 **A** on esitetty.



Kuva 10

Vahvistuksen jälkeen laite irrotetaan, mutta kehityssyistä, jotka edellyttävät asteittaista irrottamista, irrotettua laitetta vastaava rivi on:

a) näytetään ensin "static devices" -alueella "Online" -tilassa (Kuva 11 **A**);



Kuva 11

b) sitten konfiguroitavan ajan kuluttua näytetään "Offline" (Kuva 12 **A**);



Kuva 12

c) sitten konfiguroitavan ajan kuluttua, poistetaan luettelosta (Kuva 13).



Kuva 13




Katso myös 6.1 osio irrottamismenettelystä haun jälkeen.

6. Haku- ja assosiaatiomenettely


Voit etsiä laitetta ja liittää sen tällä hetkellä valittuun potilaaseen seuraavasti:

- Napsauta **Etsi laite** -painiketta "Liitettyjen laitteiden luettelo" -ikkunassa (Kuva 14 **A**).

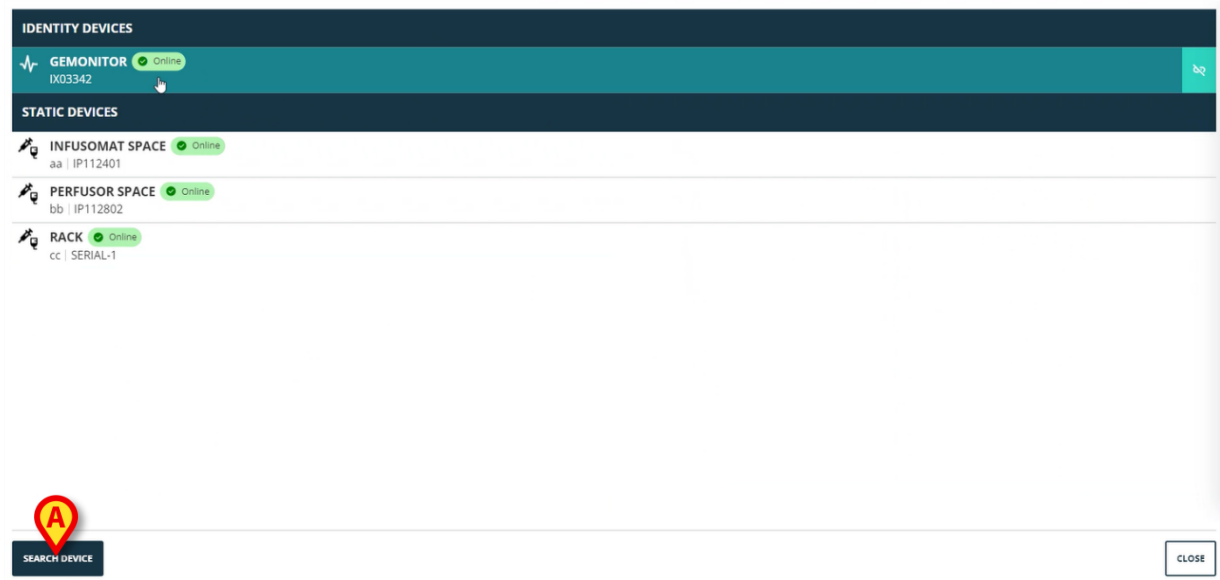

Kuva 14

Oikealla näkyy hakutyökalu (Kuva 15 **A**).

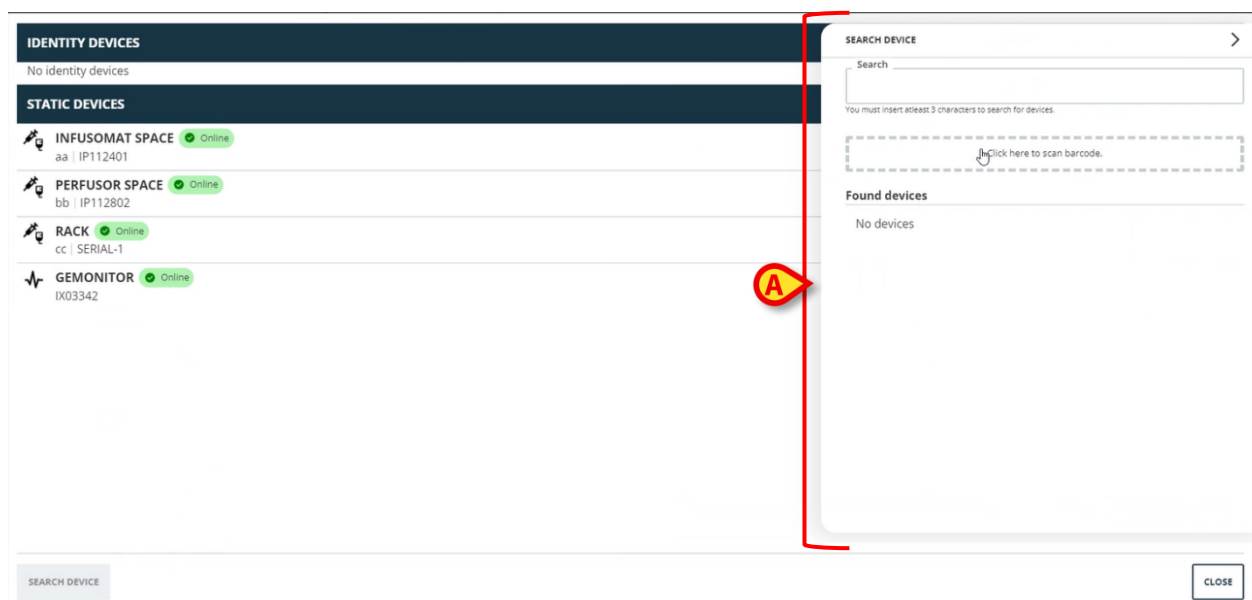


Kuva 15

- Kirjoita kyseisen laitteen nimi tai sarjanumero kohdassa Kuva 16 **A** ilmoitettuun kenttään.

Tulosten näyttämiseksi on määritettävä vähintään kolme merkkiä. Määritettyä merkkijonoa vastaavien laitteiden luettelo näkyy "Associated Devices List" -alueella (Kuva 16 **B**).


Viivakoodihaku on myös käytössä (katso 7 ohjeet osiosta).

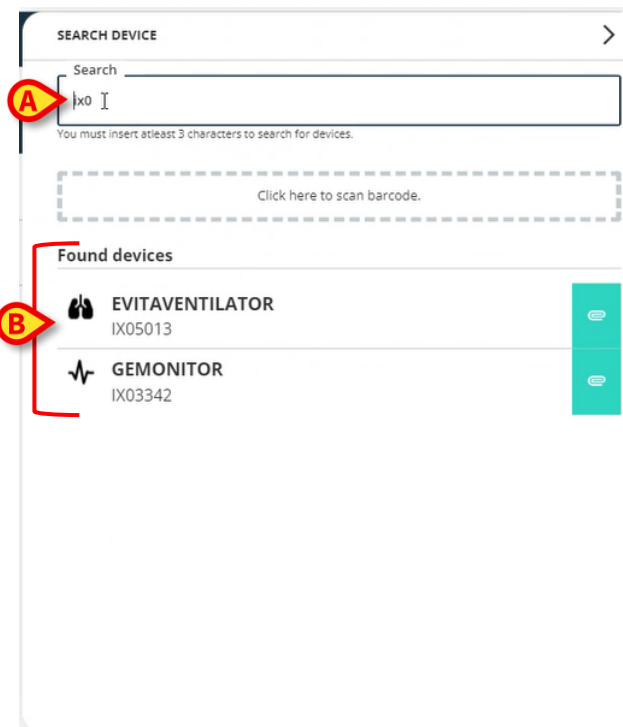

Kuva 16

- Napsauta liitettävän laitteen oikealla puolella olevaa  painiketta.

Vastaava rivi muuttuu kohdassa Kuva 17 **A** esitetyllä tavalla.

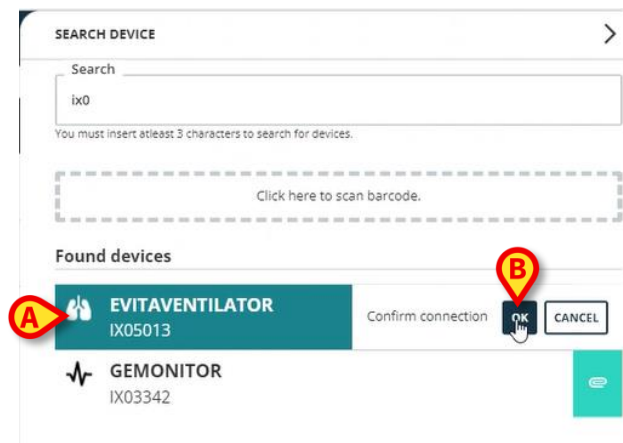


Kuva 17

Yhdistämisen vahvistaminen

- Napsauta **OK-painiketta** (Kuva 17 **B**).

Laite näkyy sitten siihen liittyvien laitteiden luettelossa "Identity device" -alueella (Kuva 18 **A**).

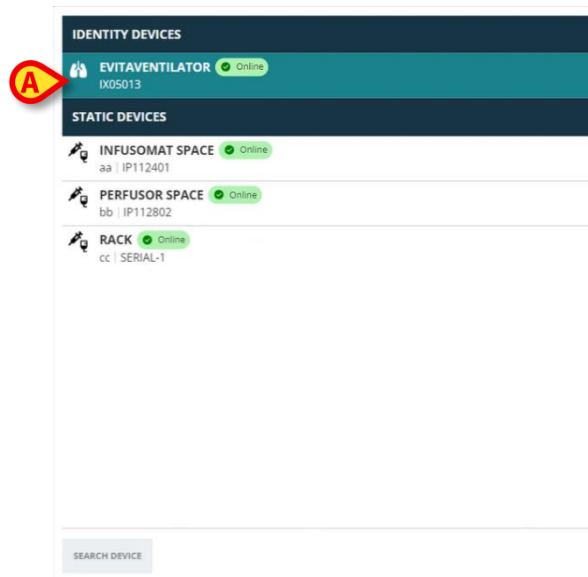


Kuva 18

6.1. Irrottaminen haun jälkeen

Jo määritetyt laitteet näkyvät myös hakutuloksina, mutta oikealla näkyy irrottamispainikkeen

 (Kuva 19 A) sijaan irrotuspainike.

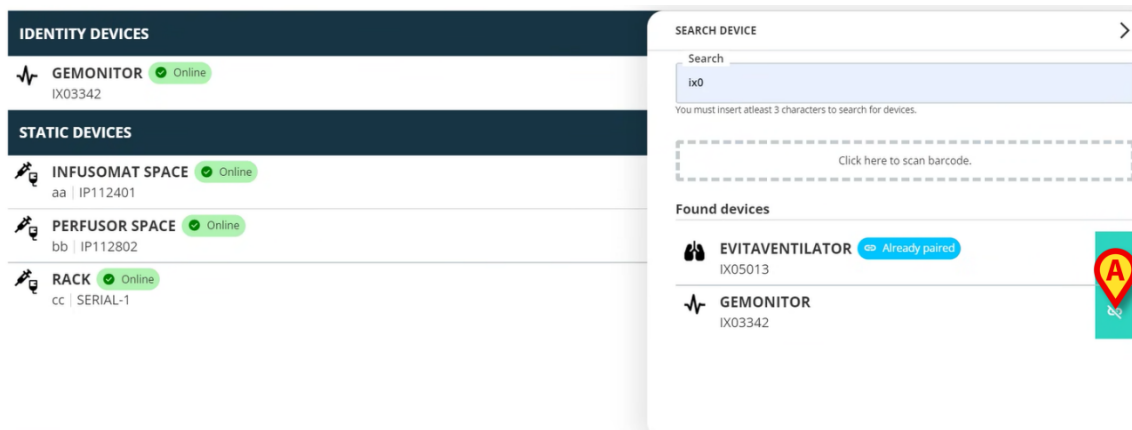


Kuva 19

- Irrota  laitteen yhteys napsauttamalla painiketta.

Käyttäjän vahvistus vaaditaan.

- Vahvista irrottaminen (AKuva 20) napsauttamalla **OK-painiketta**.

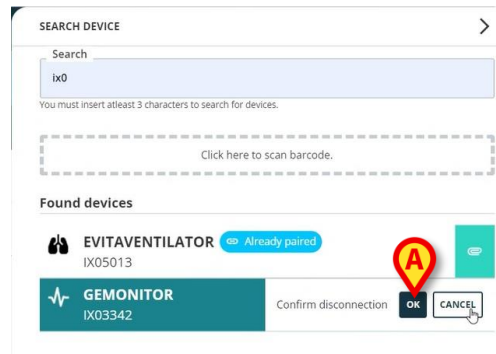

Kuva 20

Irrotettu laite katoaa "Identity Devices" -alueelta liitettyjen laitteiden luettelossa. Se näkyy edelleen hakutuloksissa yhdistettävänä laitteena.


6.2. Jo pariliitetyt laitteet

Muihin potilaisiin liitettyt laitteet näkyvät hakutuloksissa nimellä "Already paired" (Kuva 21 **A**).



Kuva 21

"Already paired" -laitteet voidaan liittää tällä hetkellä valittuun potilaaseen kohdassa kuvatulla vakiomenettelyllä. Näissä tapauksissa vaaditaan erityinen käyttäjän vahvistus (Kuva 22).

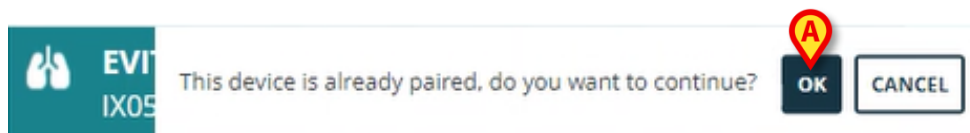

Kuva 22

- Napsauta **OK** liittääksesi laitteen tällä hetkellä valittuun potilaaseen (Kuva 22 **A**).

Laite irrotetaan näin edellisestä potilaasta ja liitetään tällä hetkellä valittuun potilaaseen.

7. Viivakoodin haku ja valinta


Laite voidaan valita viivakoodihakujen jälkeen. Viivakoodin valinnan ottamiseksi käyttöön Etsi laite -ikkunassa:

- Napsauta kohdassa Kuva 23 **A** ilmoitettua aluetta.



Kuva 23


Työaseman kamera aktivoituu (Kuva 24 **A**).

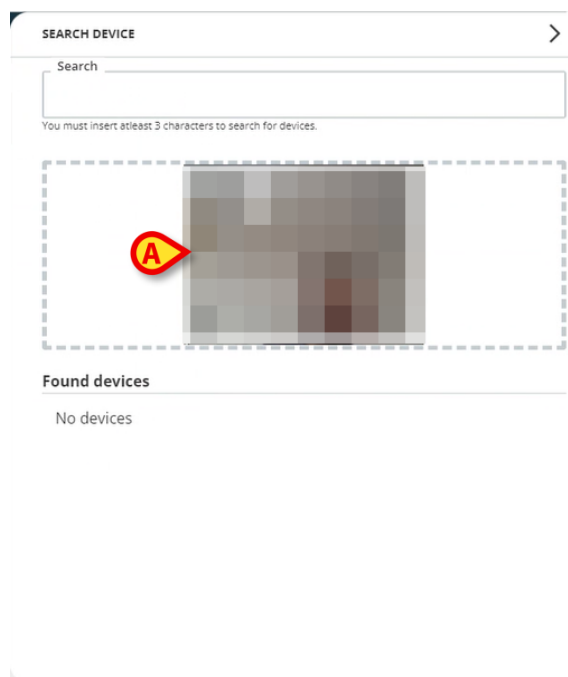

Kuva 24

- Skannaa kyseisen laitteen viivakoodi.

Laitteen tiedot näkyvät "Found devices" -alueella "Search Device" -ikkunassa (Kuva 25 **A**).

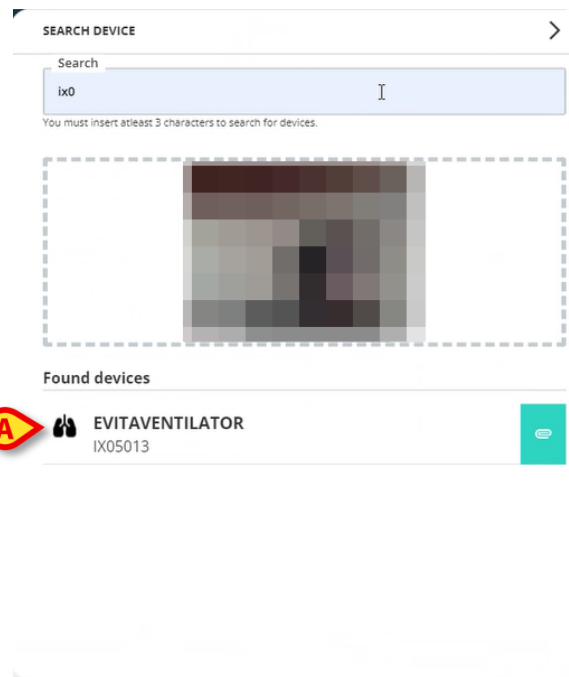

Kuva 25

- Jatka liitettämismenettelyä kohdassa kuvatulla tavalla6.

Oletusarvoisesti aktivoitu kamera on takakamera. "Identity Web" voidaan konfiguroida sallimaan kameran vaihto. Siinä tapauksessa erityinen painike -  - näkyy "Barcode reader" -alueella "Search Device" -ikkunassa (Kuva 26 **A**). Ota yhteyttä järjestelmänvalvojiin saadaksesi lisätietoja tästä toiminnosta.



Kuva 26



Järjestelmävaihtoehto voidaan määrittää jäljittämään valitut laitteet viivakoodin avulla lisäämällä etuliite ja jälkiliite laitteen sarjanumeroon. Etuliite ja jälkiliite eivät näy käyttöliittymässä.
