

ascom

Identity Web Manuel d'utilisation

Version 1.0

7/8/2025

Ascom UMS s.r.l. Unipersonnelle
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italie
Tél. (+39) 055 0512161 - Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Contenu

Identity Web	3
1. Introduction.....	3
2. Sélection des patients	3
3. Sélection du module	4
4. Liste des appareils associés	5
5. Procédure de dissociation.....	6
6. Procédure de recherche et d'association	8
6.1. Dissociation après la recherche	10
6.2. Appareils déjà appariés.....	11
7. Recherche et sélection de codes-barres.....	12

Identity Web



Pour des informations sur l'environnement du produit, les précautions, les avertissements et l'utilisation prévue, voir *USR FRA Digistat Care* et/ou *USR FRA Digistat Docs* (en fonction des modules installés - pour la *Digistat Suite EU*) ou *USR ENG Digistat Suite NA* (pour la *Digistat Suite NA*). La connaissance et la compréhension des documents appropriés sont obligatoires pour une utilisation correcte et sûre de "Identity Web", décrit dans ce document.

1. Introduction



Identity Web est un sous-module de la *Control Bar Web* qui peut être activé ou non en fonction de la configuration utilisée dans l'organisme de soins de santé concerné. Référez-vous aux administrateurs du système pour plus d'informations.

"Identity Web" permet d'associer/dissocier rapidement les appareils médicaux aux patients dans le cadre de l'environnement Digistat Web.



Seul un sous-ensemble des appareils configurés peut bénéficier de la procédure d'association/dissociation rapide. La procédure s'applique généralement aux appareils wi-fi qui sont souvent déplacés d'un patient à l'autre. Dans tous les cas, ce sont les caractéristiques, le mode d'utilisation et la configuration du dispositif qui le rendent ou non éligible à la procédure décrite ici.

2. Sélection des patients

"Identity Web" ne peut être lancé qu'après la sélection du patient. Pour sélectionner un patient,

- Cliquez sur le bouton **Select Patient** (Sélectionner un Patient) indiqué à l'adresse Fig 1 A.



Fig 1

Le module Patient Explorer Web s'ouvre. Voir le manuel d'utilisation de Digistat® Patient Explorer Web (*USR FRA Patient Explorer Web*) pour plus d'instructions sur les fonctionnalités de gestion des patients.



D'autres modules peuvent être configurés pour la sélection des patients à la place de Patient Explorer Web, en fonction de la configuration. Si c'est le cas, voir la documentation spécifique pour les instructions.

Lorsqu'un patient est sélectionné, le nom et les données principales du patient s'affichent sur le bouton **Patient** (Fig 2 **A**).



Fig 2

3. Sélection du "Identity Web"

Si "Identity Web" est disponible, l'icône  est affichée sur le bouton du patient (Fig 3 **A**).



Fig 3

Pour lancer "Identity Web":

- Cliquez sur l'icône .

Une fenêtre déroulante s'affiche, contenant des données supplémentaires sur le patient et les applications disponibles qui peuvent être lancées sur Control Bar (Fig 4).

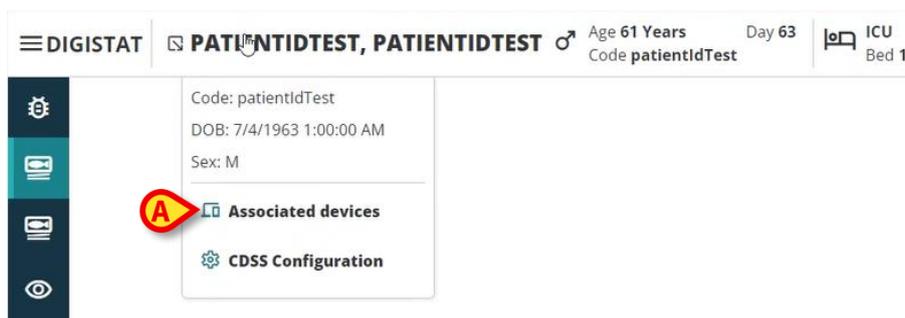


Fig 4

- Cliquez sur **Associated Devices** (Appareils associés - Fig 4 **A**).

La fenêtre suivante s'affiche, répertoriant les appareils associés au patient actuellement sélectionné (Fig 5).

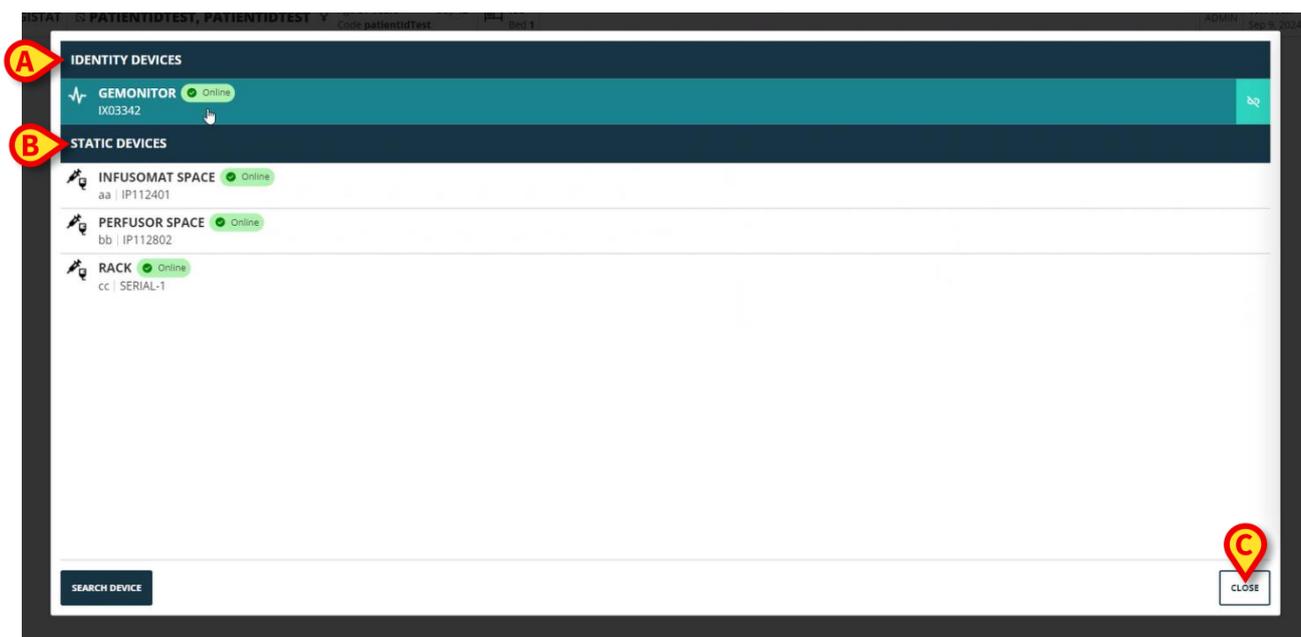


Fig 5

4. Liste des appareils associés

La fenêtre "Liste des Appareils Associés" (Fig 5) est divisée en deux sections :

La section **Identity devices** (Appareils Identity - Fig 5 **A**) répertorie les appareils mobiles qui sont actuellement associés au patient sélectionné.

La section **Static devices** (Appareils statiques - Fig 5 **B**) répertorie les périphériques qui sont liés au lit sélectionné et qui ne peuvent pas être déplacés.

"Identity Web" ne fonctionne que sur les **Appareils Identity**.

Chaque ligne de la fenêtre correspond à un appareil (voir Fig 6, par exemple).



Fig 6

Pour chaque appareil, les informations suivantes sont affichées :



Fig 7

- Une icône caractérisant le type d'appareil (Fig 7 **A**)
- Le nom de l'appareil (Fig 7 **B**).
- L'indication de l'état de l'appareil (Fig 7 **C** - soit En ligne, soit Hors ligne).
- Une étiquette qui peut être associée à l'appareil lors de la configuration afin de fournir des informations supplémentaires (Fig 7 **D**)
- Le numéro de série de l'appareil, qui identifie l'appareil de manière unique (Fig 7 **E**).

Pour fermer la liste des appareils associés :

- Cliquez sur le bouton **Close** (Fermer) indiqué en Fig 5 **C**.

Il est possible d'afficher une fenêtre, pour chaque appareil connecté, énumérant les paramètres acquis par l'appareil spécifique, avec leurs valeurs et l'unité de mesure. Pour ce faire :

- Cliquez sur la ligne correspondant à l'appareil (Fig 8 **A**).

La fenêtre indiquée en Fig 8 **B** est affichée.

Cette fenêtre dresse la liste des paramètres acquis par l'appareil, en indiquant leur nom, la valeur la plus récente et l'unité de mesure.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red callout 'A' points to the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of parameters for the selected device. A red callout 'B' points to the 'Temp Other' row in the table.

Name	Value	Unit of measure
CTH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Fig 8

5. Procédure de dissociation

"Identity Web" ne permet d'opérer que sur les "appareils Identity" (les appareils mobiles, ceux qui sont associés au patient, non liés au lit).

Un bouton de dissociation est affiché à droite des lignes correspondant aux "Appareils Identity" (Fig 9 **A**).

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with the GEMONITOR device (IX03342) highlighted. A red callout 'A' points to a small blue button with a white 'X' icon, located to the right of the device name, which is used for dissociation.

Fig 9

Pour dissocier un appareil

- Cliquez sur le bouton  (Fig 9 **A**).

La confirmation de l'utilisateur est requise, comme le montre la Fig 10 **A**.



Fig 10

Après confirmation, l'appareil est dissocié mais, pour des raisons d'élaboration, nécessitant une déconnexion progressive, la ligne correspondant à l'appareil dissocié est :

- a) d'abord affichée dans la zone des "appareils statiques", à l'état "En ligne" (Fig 11 A) ;



Fig 11

- b) puis, après un temps configurable, affichée comme "Hors ligne" (Fig 12 A) ;



Fig 12

- c) puis, après un délai configurable, retiré de la liste (Fig 13).



Fig 13



Voir également la section 6.1 pour la procédure de dissociation après la recherche.

6. Procédure de recherche et d'association

Pour rechercher un appareil et l'associer au patient actuellement sélectionné :

- Cliquez sur le bouton **Search device** (Rechercher un appareil) dans la fenêtre "Liste des Appareils Associés" (Fig 14 A).

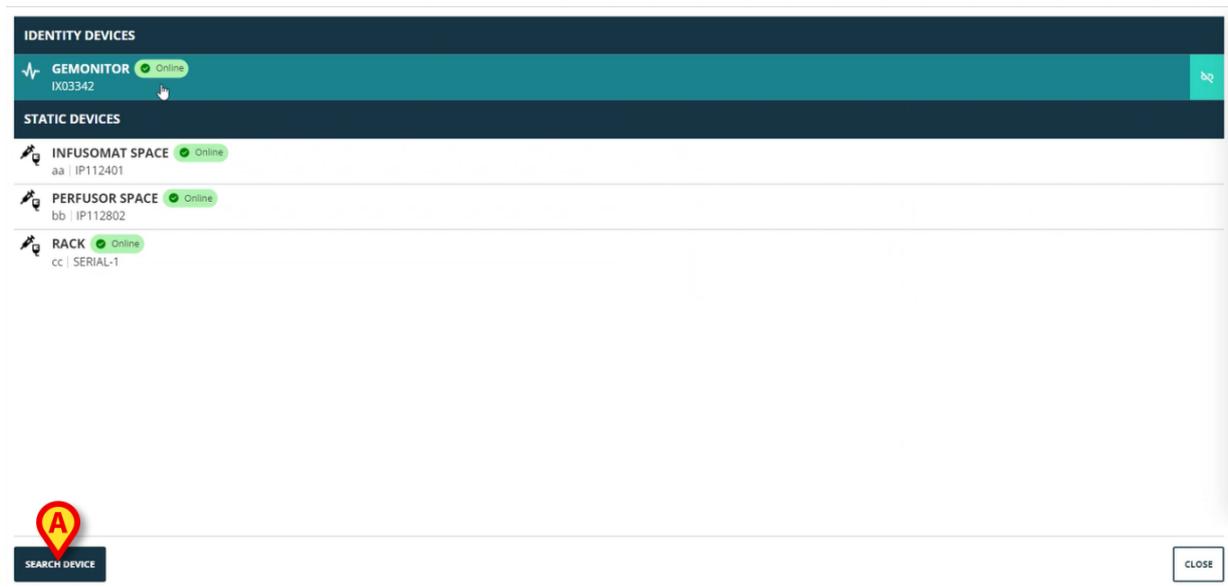


Fig 14

Un outil de recherche est affiché à droite (Fig 15 A).

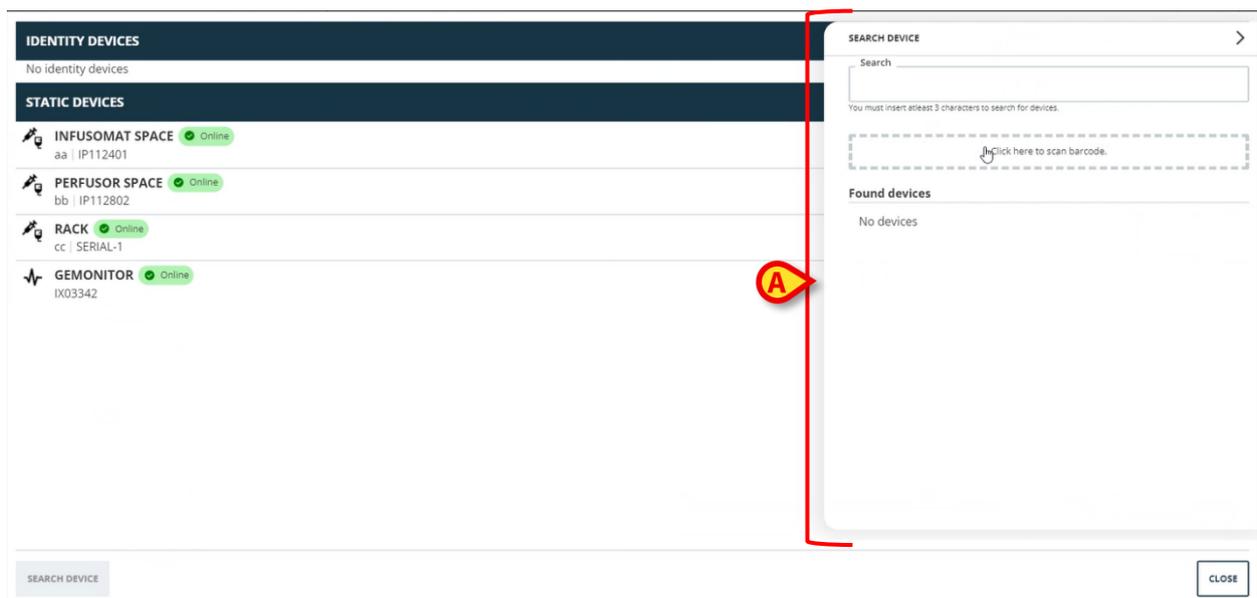


Fig 15

- Tapez le nom ou le numéro de série de l'appareil concerné dans le champ indiqué en Fig 16 **A**.

Au moins trois caractères doivent être spécifiés pour que les résultats soient affichés. La liste des appareils correspondant à la chaîne spécifiée s'affiche dans la zone "Appareils trouvés" (Fig 16 **B**).

La recherche par code-barres est également activée (voir la section 7 pour les instructions).

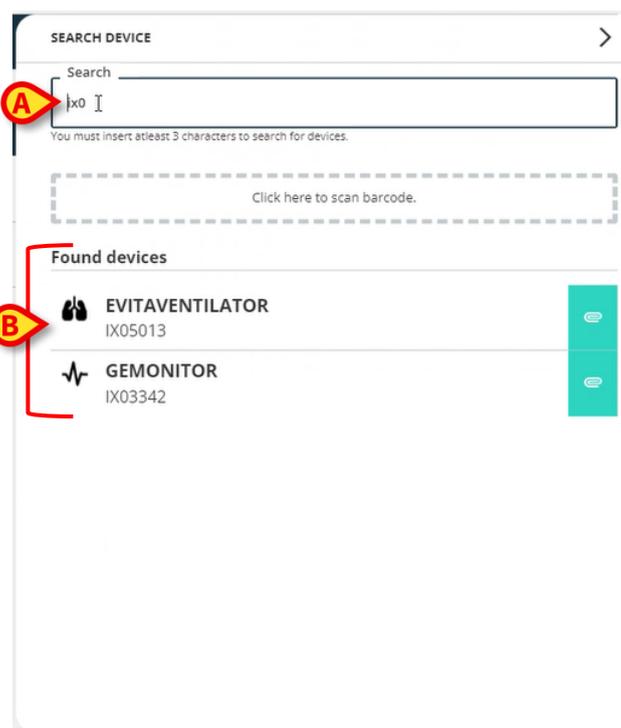


Fig 16

- Cliquez sur le bouton  situé à droite de l'appareil à associer.

La ligne correspondante est modifiée comme indiqué en Fig 17 **A**.



Fig 17

Pour confirmer l'association

- Cliquez sur le bouton **Ok** (Fig 17 **B**).

L'appareil est alors affiché dans la liste des appareils associés, dans la zone "appareils Identity" (Fig 18 A).

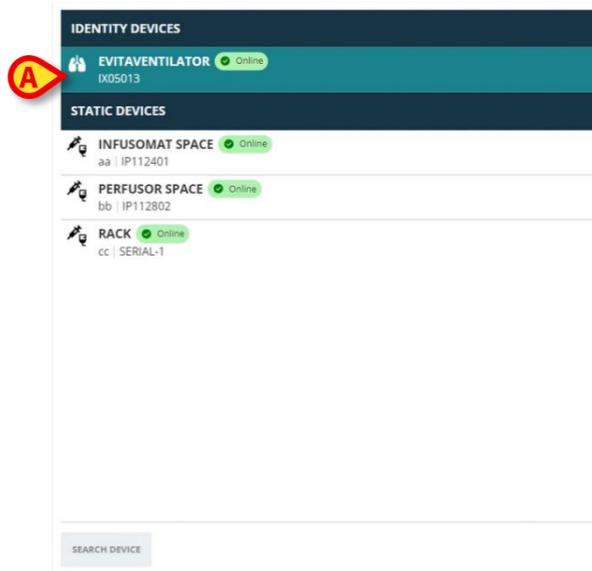


Fig 18

6.1. Dissociation après la recherche

Les appareils déjà attribués sont également affichés en tant que résultats de la recherche, mais, à droite, un bouton de dissociation  est affiché à la place du bouton d'association  (Fig 19 A).

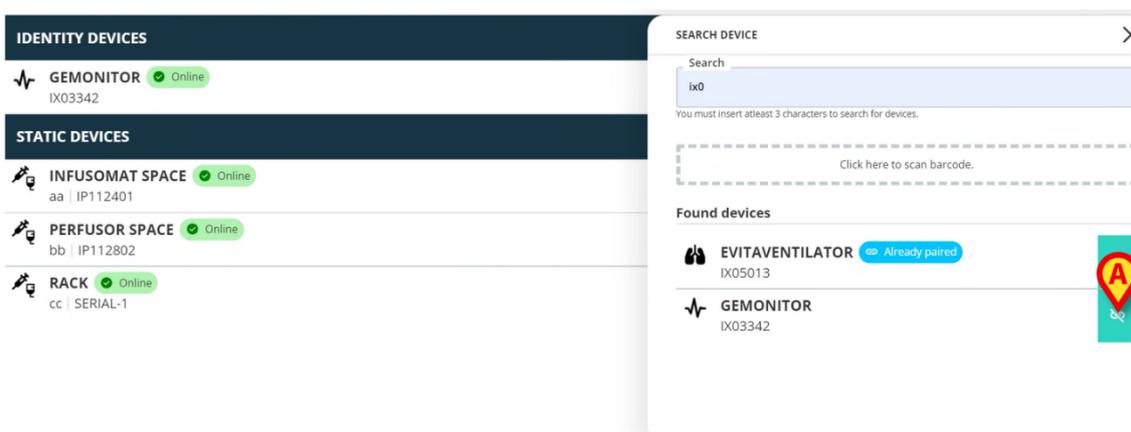


Fig 19

- Cliquez sur le bouton  pour dissocier l'appareil.

La confirmation de l'utilisateur est requise.

- Cliquez sur le bouton **Ok** pour confirmer la dissociation (Fig 20 A).

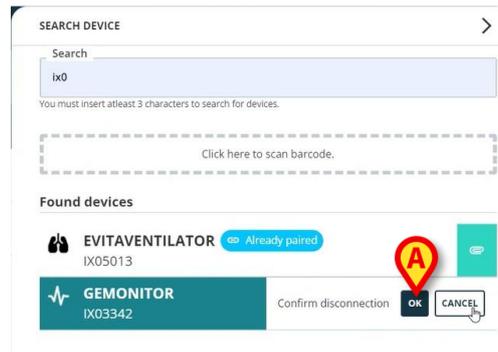


Fig 20

L'appareil dissocié disparaît de la zone "Appareils Identity" de la liste des appareils associés. Il est toujours affiché dans les résultats de recherche en tant qu'appareil "connectable".

6.2. Appareils déjà appariés

Les appareils associés à d'autres patients sont affichés dans les résultats de la recherche comme "Déjà appariés" (Fig 21 A).



Fig 21

Les appareils "Déjà appariés" peuvent être associés au patient sélectionné à l'aide de la procédure standard décrite dans la section 6. Dans ces cas, une confirmation spécifique de l'utilisateur est requise (Fig 22).

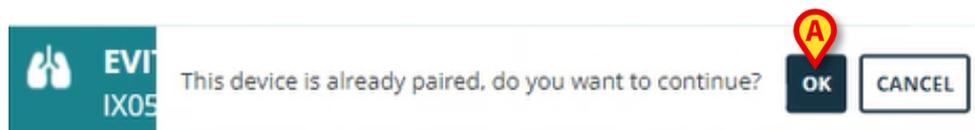


Fig 22

- Cliquez sur **Ok** pour associer l'appareil au patient sélectionné (Fig 22 A).

L'appareil est ainsi déconnecté du patient précédent et associé à celui qui est actuellement sélectionné.

7. Recherche et sélection de codes-barres

Il est possible de sélectionner un appareil après la recherche du code-barres. Pour activer la sélection des codes-barres, dans la fenêtre « Search Device » (Rechercher un appareil):

- Cliquez sur la zone indiquée en Fig 23 **A**.



Fig 23

La caméra du poste de travail s'active (Fig 24 **A**).



Fig 24

- Scannez le code-barres de l'appareil concerné.

Les données de l'appareil sont affichées dans la zone « Found devices » (Appareils trouvés) de la fenêtre "Rechercher un appareil" (Fig 25 **A**).

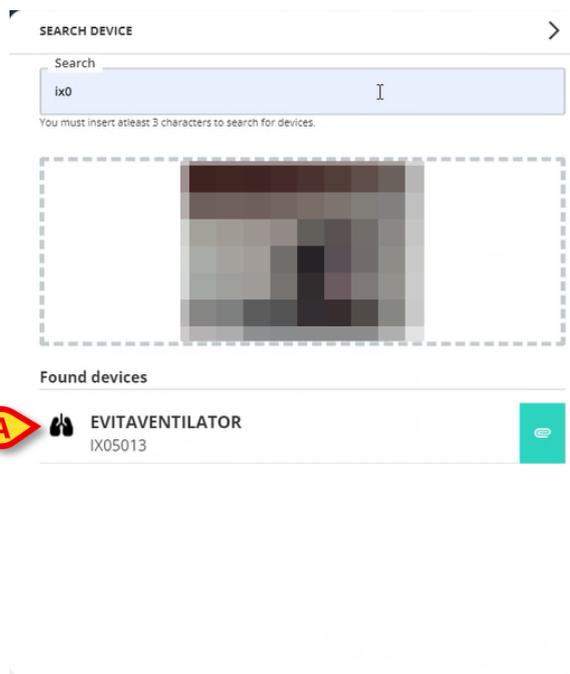


Fig 25

- Procédez à la procédure d'association comme décrit dans la section 6.

*La caméra activée par défaut est la caméra arrière. L'option "Identity Web" peut être configurée pour permettre le passage d'une caméra à l'autre. Dans ce cas, un bouton dédié -  - est affiché dans la zone "Lecteur de code-barres" de la fenêtre "Rechercher un appareil" (Fig 26 **A**). Contactez les administrateurs du système pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.*



Fig 26



Une option du système peut être configurée pour tracer les appareils sélectionnés par code-barres en ajoutant un préfixe et un suffixe au numéro de série de l'appareil. Le préfixe et le suffixe ne sont pas affichés sur l'interface utilisateur.
