



Identity Web

Használati utasítás

1.0 verzió

7/8/2025

Tartalom

Identity Web	3
1. Bevezetés	3
2. Beteg kiválasztása	3
3. Az „Identity Web” almodul kiválasztása	4
4. A társított eszközök listája	5
5. Leválasztási eljárás.....	6
6. Keresés és társítási eljárás	8
6.1. Leválasztás a keresés után	10
6.2. Már párosított eszközök	11
7. Vonalkód keresés és a kiválasztás.....	12

Identity Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: *USR HUN Digistat Care* és/vagy *USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén). A megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező a jelen dokumentumban leírt „Identity Web” helyes és biztonságos használatához.

1. Bevezetés



Az Identity Web a Control Bar Web egy almodulja, amely az adott egészségügyi szervezetben használt konfigurációtól függően engedélyezhető vagy sem. További információkért forduljon a rendszergazdához.

Az „Identity Web” almodul lehetővé teszi az orvosi eszközök gyors hozzárendelését/eltávolítását a betegekhez a Digistat Web környezetében.




A konfigurált eszközöknek csak egy alcsoportja jogosult a gyors társítási / szétkapcsolási eljárásra. Az eljárás általában olyan wi-fi eszközökre vonatkozik, amelyeket gyakran áthelyeznek egyik betegről a másikra. Minden esetben az eszköz jellemzői, használati módja és konfigurációja az, ami alapján az itt leírt eljárás alkalmazható vagy nem alkalmazható.

2. Beteg kiválasztása

Az „Identity Web” csak a páciens kiválasztása után indítható el. A páciens kiválasztásához

- Kattintson az Ábra 1 A jelű **Páciens kiválasztása** gombra.

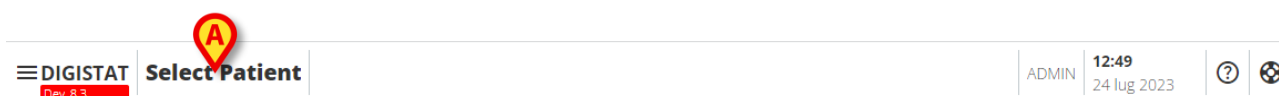

Ábra 1

Megnyílik a Patient Explorer webmodul. Tekintse meg a Digistat® Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (*USR HUN Patient Explorer Web*) a betegkezelési funkciókkal kapcsolatos további információkért.



A Patient Explorer Web helyett más modulok is konfigurálhatók a páciensek kiválasztásához, a konfigurációtól függően. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

A páciens kiválasztásakor a beteg neve és főbb adatai jelennek meg a **Páciens** gombon (Ábra 2 A).



Ábra 2

3. Az „Identity Web” almodul kiválasztása

Ha elérhető az „Identity Web” almodul, a  ikon jelenik meg a beteggombon (Ábra 3 A).




Ábra 3

Az Identity Web elindítása:

- Kattintson az  ikonra.


Megjelenik egy legördülő ablak, amely további páciens adatokat és a Vezérlőpulton (Ábra 4) indítható elérhető alkalmazásokat tartalmazza.

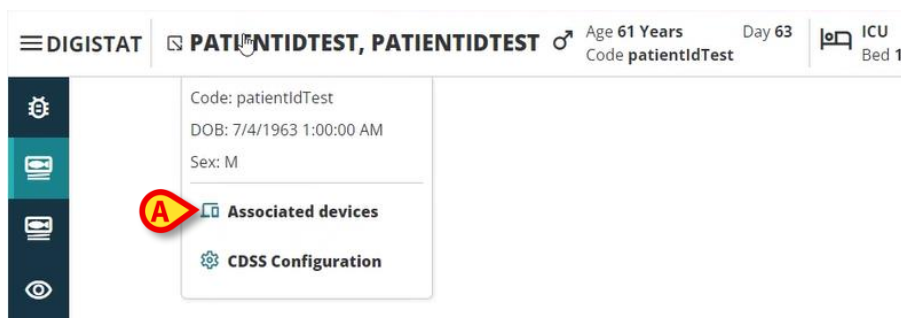

Ábra 4

- Kattintson a „Kapcsolódó eszközök” elemre (Ábra 4 A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez társított eszközöket (Ábra 5).

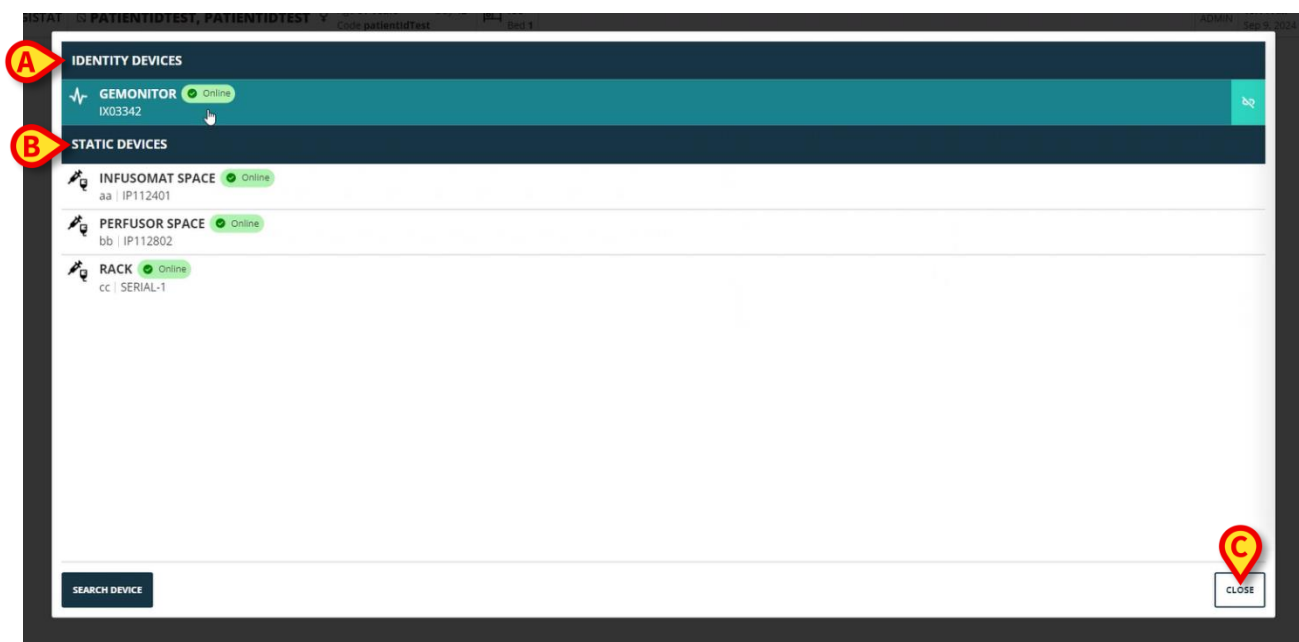

Ábra 5

4. A társított eszközök listája

A „társított eszközök listája” ablak (Ábra 5) két részre oszlik:

Az **Identity Devices** rész (Ábra 5 **A**) felsorolja azokat a mobil eszközöket, amelyek jelenleg a kiválasztott pácienshez vannak társítva.

A **Statikus eszközök** szakasz (Ábra 5 **B**) felsorolja azokat az eszközöket, amelyek a kiválasztott ágyhoz vannak társítva, és amelyek nem mozgathatók.

Az „Identity Web” almodul csak az **Identity Devices** -en működik.

Az ablak minden sora egy eszköznek felel meg (lásd Ábra 6 például).



Ábra 6

Minden eszköz esetében a következő információk jelennek meg:



Ábra 7

- Az eszköz típusát jellemző ikon (Ábra 7 **A**)
- Az eszköz neve (Ábra 7 **B**).
- Az eszköz állapotának jelzése (Ábra 7 **C** – online vagy offline).
- Címke, amely a konfiguráció során az eszközhöz rendelhető, hogy további információkat szolgáltatasson (Ábra 7 **D**)
- Az eszköz sorozatszáma, amely egyedileg azonosítja az eszközt (Ábra 7 **E**).

A társított eszközök listájának bezárása:

- Kattintson a Ábra 5 **C**-ben jelzett **Bezárás** gombra.

Lehetőség van arra, hogy minden egyes csatlakoztatott eszközhöz megjelenítsen egy ablakot, amely felsorolja az adott eszköz által mért paramétereket, azok értékével és mértékegységével együtt. Ehhez:

- Kattintson az eszköznek megfelelő sorra (Ábra 8 **A**).

A jelzett ablak Ábra 8 **B**-ben jelenik meg.

Ebben az ablakban az eszköz által mért paramétereket listázza, feltüntetve azok nevét, legutóbbi értékét és mértékegységét.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red circle 'A' highlights the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of measured parameters for the selected device. A red circle 'B' highlights the 'Temp Other' parameter row.

Name	Value	Unit of measure
ti	5	5
C TH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Ábra 8

5. Leválasztási eljárás

Az „Identity Web” almodul csak az „Identity eszközökön” (a mobil eszközökön, a pácienshez rendelt, nem az ágyhoz kapcsolódó eszközökön) való működést teszi lehetővé.

Az „Identity eszközöknek” megfelelő sorok jobb oldalán egy leválasztási gomb jelenik meg (Ábra 9 **A**).




Ábra 9

Egy eszköz leválasztása

- Kattintson a  gombra (Ábra 9 **A**).

Felhasználói megerősítés szükséges, amint az az Ábra 10 **A** ábrán látható.

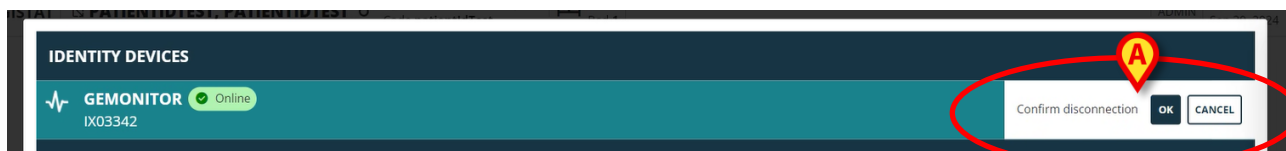

Ábra 10

A megerősítést követően az eszközt szétkapcsolják, de a kidolgozás miatt fokozatos szétkapcsolást igényel, a szétkapcsolt eszköznek megfelelő sor:

- a) először a „statikus eszközök” területen, „Online” állapotban jelenik meg (Ábra 11 A);



Ábra 11

- b) majd egy konfigurálható idő után „Offline”-ként jelenik meg (Ábra 12 A);



Ábra 12

- c) majd egy beállítható idő elteltével töröljük a listáról (Ábra 13).



Ábra 13




Lásd még a 6.1 részt a keresés utáni leválasztási eljáráshoz.

6. Keresés és társítási eljárás


Eszköz keresése és az aktuálisan kiválasztott pácienshez való társítása:

- Kattintson az **Eszköz keresése** gombra a „Kapcsolódó eszközök listája” ablakban (Ábra 14 **A**).

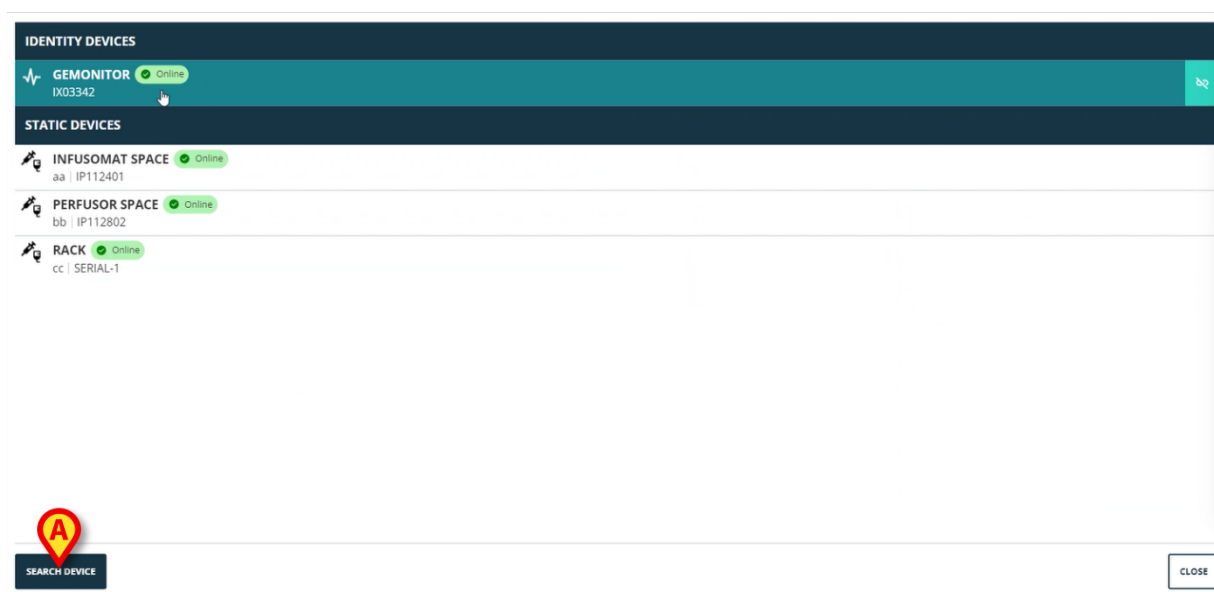

Ábra 14

A jobb oldalon egy keresőeszköz jelenik meg (Ábra 15 **A**).

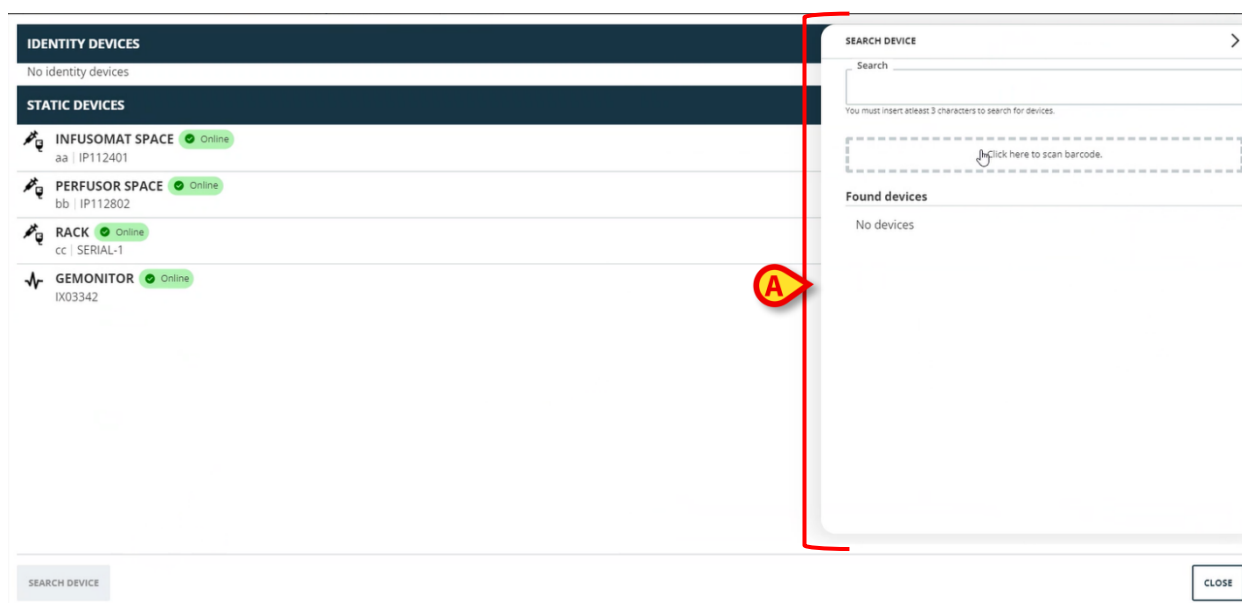


Ábra 15

- Írja be a megfelelő eszköz nevét vagy sorozatszámát a jelzett mezőbe Ábra 16 **A**.

Az eredmények megjelenítéséhez legalább három karaktert kell megadni. A megadott karakterláncnak megfelelő eszközök listája megjelenik a „Talált eszközök” területen (Ábra 16 **B**).


A vonalkódkeresés is engedélyezve van (lásd a 7.részt utasításokért).

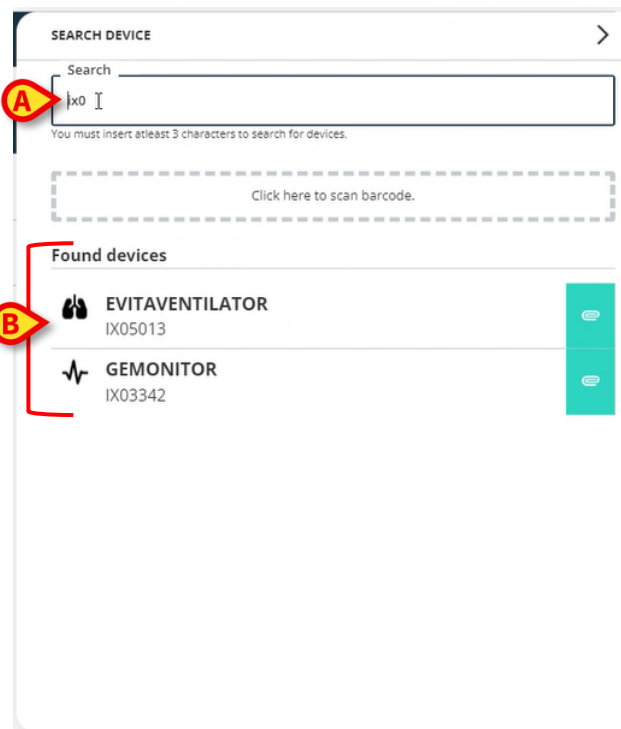

Ábra 16

- Kattintson a  gombra a társítandó eszköz jobb oldalán.

A megfelelő sor az Ábra 17 **A** ábrán látható módon változik.

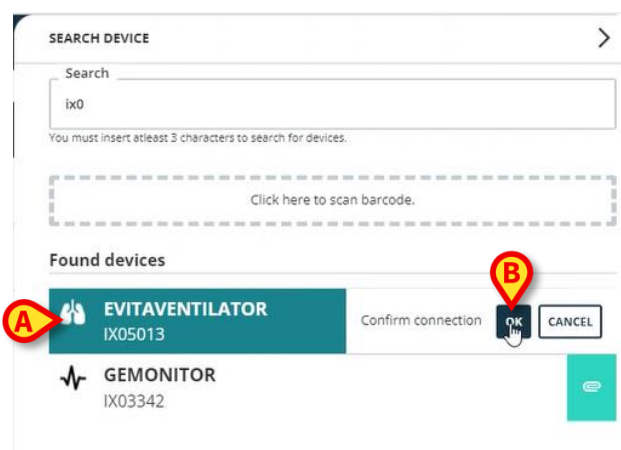


Ábra 17

A társítás megerősítésére

- Kattintson az **OK** gombra (Ábra 17 **B**).


Az eszköz ezután megjelenik a társított eszközök listájában, az „Identity eszköz” területen (Ábra 18 **A**).

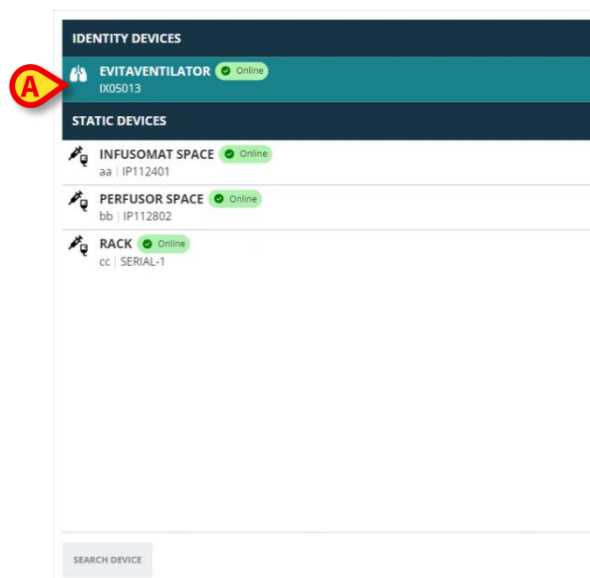

Ábra 18

6.1. Leválasztás a keresés után

A már hozzárendelt eszközök szintén keresési eredményekként jelennek meg, de a jobb oldalon egy leválasztás gomb  jelenik meg a társítási gomb  helyett (Ábra 19 A).

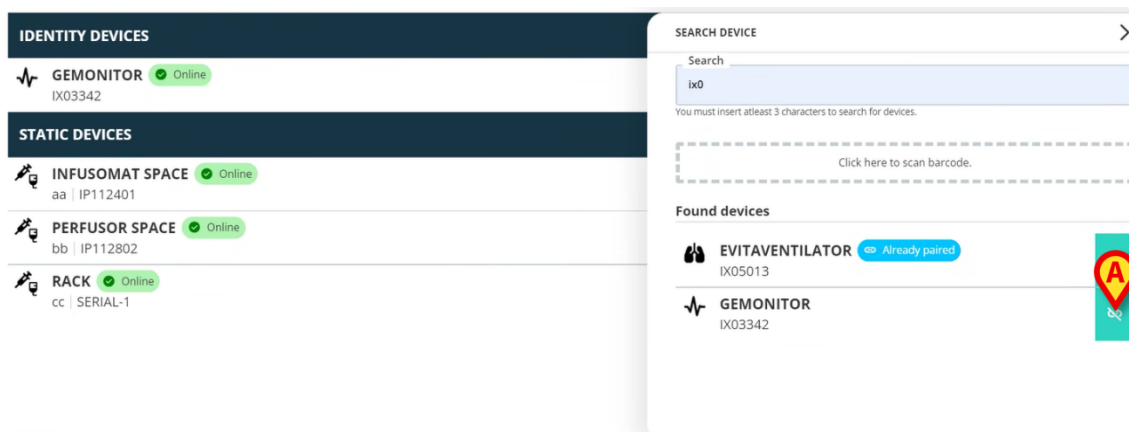


Ábra 19

- Kattintson a  gombra az eszköz leválasztásához.

Felhasználói megerősítés szükséges.

- Kattintson az **OK** gombra a szétválasztás megerősítéséhez (Ábra 20 A).

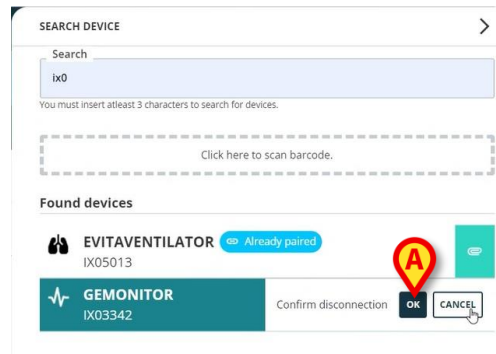

Ábra 20

A leválasztott eszköz eltűnik az „Identity eszköz” területről a társított eszközök listáján. A keresési eredmények között továbbra is „csatlakoztatható” eszközként jelenik meg.


6.2. Már párosított eszközök

A más páciensekhez társított eszközök „Már párosítva”-ként jelennek meg a keresési eredmények között (Ábra 21 A).



Ábra 21

A „Már társított” eszközök az aktuálisan kiválasztott pácienshez társíthatók a fejezetben leírt szabványos eljárással⁶. Ezekben az esetekben külön felhasználói megerősítés szükséges (Ábra 22).

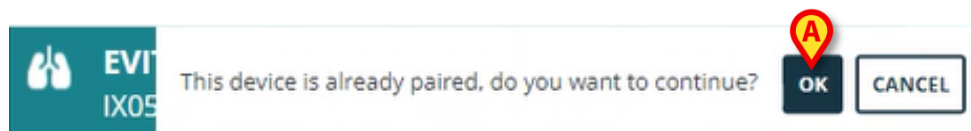

Ábra 22

- Kattintson az **OK** gombra, hogy az eszközt az aktuálisan kiválasztott pácienshez társítsa (Ábra 22 A).

Az eszközt így leválasztják az előző páciensről, és az aktuálisan kiválasztotthoz társítják.

7. Vonalkód keresés és a kiválasztás


Vonalkód keresés után lehetőség van eszköz kiválasztására. A vonalkód kiválasztásának engedélyezéséhez az „Eszköz keresése” ablakban:

- Kattintson a Ábra 23 **A**-ban jelzett területre.



Ábra 23


A munkaállomás kamera bekapcsol (Ábra 24 **A**).

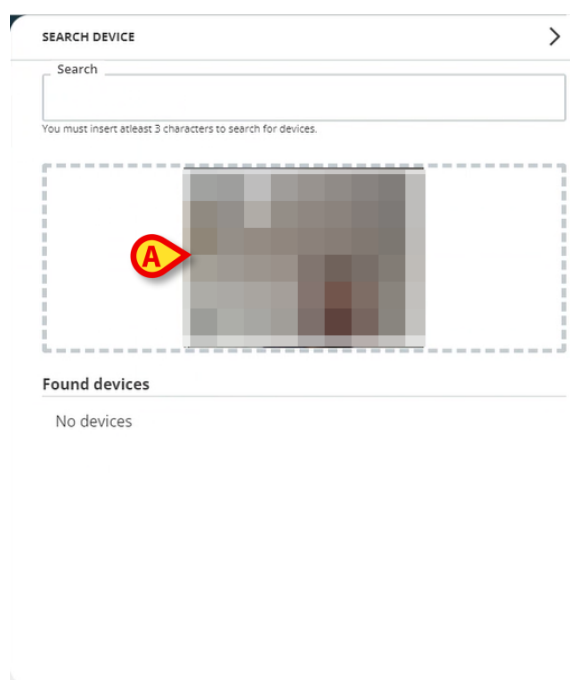

Ábra 24

- Olvassa be a megfelelő eszköz vonalkódját.


Az eszközadatok az „Eszköz keresése” ablak „Talált eszközök” területén jelennek meg (Ábra 25 **A**).

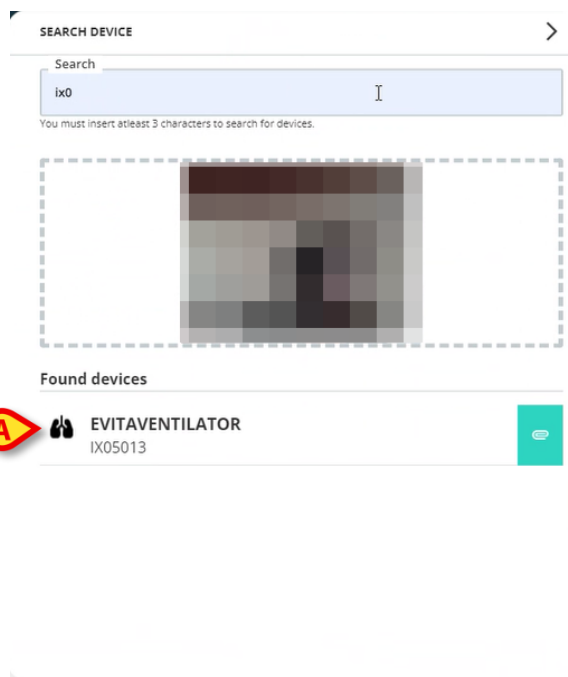

Ábra 25

- Folytassa a társítási eljárást a 6 szakaszban leírtak szerint.

Az alapértelmezés szerint aktivált kamera a hátsó kamera. Az „Identity Web” konfigurálható úgy, hogy engedélyezze a kameraváltást. Ebben az esetben egy dedikált gomb -  - megjelenik a „Keresőeszköz” ablak „Vonalkód olvasó” területén (Ábra 26 **A**). A funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdákhhoz.

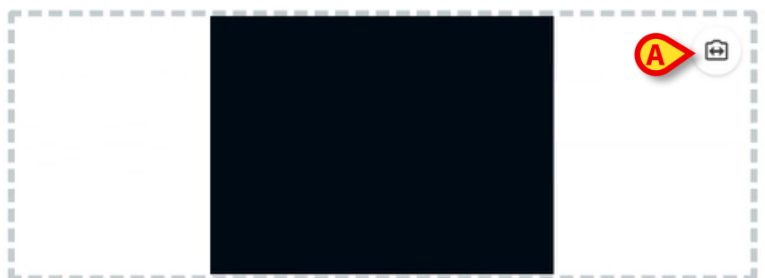

Ábra 26



Egy rendszeropció konfigurálható a vonalkóddal kiválasztott eszközök nyomon követésére úgy, hogy egy előtagot és egy utótagot ad az eszköz sorszámához. Az előtag és az utótag nem jelenik meg a felhasználói felületen.