



Collect Mobile

Gebruikshandleiding

Versie 3.0

2023-11-15

Inhoud

1. "Collect"	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Opstarten van applicatie	3
1.3 Hoofdpagina	4
1.3.1 Lijst met patiënten.....	4
1.3.2 Patiëntpagina uit lijst met patiënten.....	5
1.3.3 Patiëntpagina van de patiëntselectie	5
1.4 Patiëntpagina.....	7
1.4.1 Een nieuwe gegevensverzameling starten.....	7
1.4.2 Een lopende gegevensverzameling stoppen	8
1.4.3 Laatst verkregen gegevens tonen	9

1. "Collect"



Voor informatie over de productomgeving, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en het gebruik zoals bedoeld zie USR NLD Digistat Care en/of USR NLD Digistat Docs (afhankelijk van de modules die zijn geïnstalleerd voor de Digistat Suite EU) of USR ENG Digistat Suite NA (voor Digistat Suite NA). Kennis en begrip na lezing van het juiste document zijn vereist voor het veilige en correcte gebruik van de Collect Mobile, dat in dit document wordt beschreven.



Let op: de kenmerken en functionaliteiten van de Collect-module zijn volledig beschikbaar, aangezien de gebruiker is ingelogd. Een pop-upbericht informeert de gebruiker die toegang krijgt tot de applicatie als deze niet eerder was ingelogd.


1.1 Inleiding

Met de Collect-module kan de gebruiker gegevens verkrijgen van apparaten die (zelfs tijdelijk) aan de patiënt zijn gekoppeld met selecteerbare herhalings- en duurtijden. De verzamel-module verwerkt gegevens van patiënten, zelfs als ze niet in bed liggen, met een volledig op maat gemaakte acquisitie- en herhalingsduur.

1.2 Opstarten van applicatie

Om de Collect-module te starten:

- Tik op de overeenkomstige rij op het scherm van het handapparaat (Afb. 1).

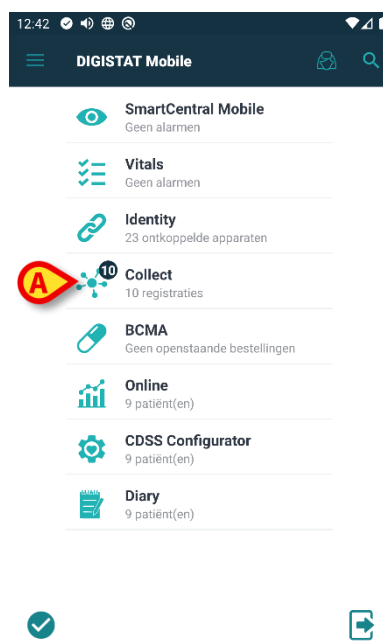

Afb. 1

Het aantal lopende gegevensverzamelingen wordt weergegeven in een cirkel boven het applicatiepictogram (Afb. 1 **A**)

Nadat u op het modulepictogram hebt getikt, wordt de hoofdpagina 'Collect' geopend (Afb. 2):



Afb. 2

1.3 Hoofdpagina


De hoofdpagina "Collect" toont het scherm met de lijst van patiënten (Afb. 2). Een dergelijk scherm geeft de lijst weer van patiënten in bedden die behoren tot het domein van het handapparaat; bovendien worden ook de patiënten weergegeven waarvoor momenteel een gegevensverzameling plaatsvindt.

Wanneer een gegevensverzameling plaatsvindt, wordt het type gegevensverzameling aan de gebruiker getoond. Er zijn eigenlijk drie soorten gegevensverzameling gedefinieerd:

- Continu, waarvan het pictogram  is;
- Starten en stoppen, waarvan het pictogram  is;
- Gemengd (d.w.z. starten en stoppen dat tijdelijk een doorlopende verzameling negeert), waarvan het pictogram  is.

1.3.1 Lijst met patiënten

Elke patiënt wordt weergegeven door een tegel (Afb. 3).

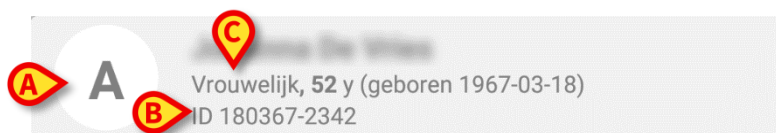

Afb. 3

In de tegel wordt de volgende informatie weergegeven:

- Bednummer (indien beschikbaar – Afb. 3 **A**);
- Patiëntgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, patiënt-ID – Afb. 3 **B**);
- Naam van de patiënt op dat bed (Afb. 3 **C**);

De tegel gekoppeld aan een patiënt met een lopende gegevensverzameling is anders gekleurd (Afb. 4):



Afb. 4

Als gegevens worden verzameld, wordt een rij toegevoegd die het collectietype, de duur en de herhalingstijden (Afb. 4 **D**) toont.

1.3.2 Patiëntpagina uit lijst met patiënten

Om toegang te krijgen tot de patiëntpagina:

- Tik op een tegel in de lijst met patiënten.

Dergelijke pagina toont de lijst met apparaten die gegevens van de geselecteerde patiënt kunnen Collect (Afb. 2).

1.3.3 Patiëntpagina van de patiëntselectie


De applicatie "Collect" zorgt voor de gegevensverzameling, zelfs voor patiënten die niet zijn opgenomen in het domein van het handapparaat. Dit kan worden gedaan door de patiënt te zoeken en te selecteren voordat de applicatie zelf wordt geopend. Een gedetailleerde beschrijving van de procedure is te lezen in de "Gebruikershandleiding voor Mobile Launcher".

- Zoek op het hoofdscherm van Mobile Launcher naar de gewenste patiënt door op het zoekpictogram (Afb. 5 **A**) te tikken:




Afb. 5

- Zoek naar de gewenste patiënt door tekstueel te zoeken of via de barcode (Afb. 6);

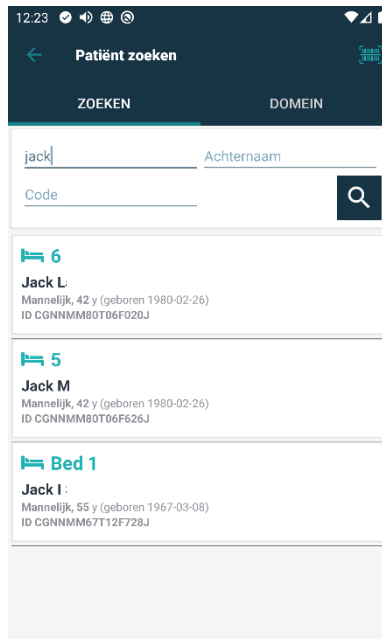

Afb. 6

- Selecteer de gewenste patiënt. Na de bevestiging van de gebruiker wordt de hoofdpagina van de mobiele applicatie getoond (Afb. 7):

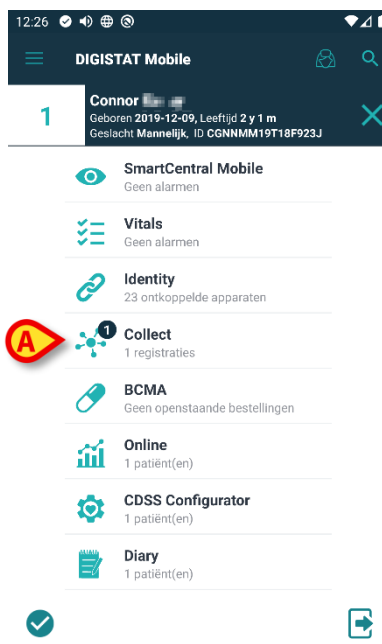


Afb. 7

- Tik op de rij die overeenkomt met de Collect-applicatie op het scherm van het handapparaat (Afb. 7)

De patiëntpagina wordt getoond (Afb. 8).

1.4 Patiëntpagina

Het scherm patiëntpagina bestaat uit twee gedeelten: een kopgedeelte (Afb. 8 **A**) en de lijst met apparaten die op de patiënt zelf zijn aangesloten (Afb. 8 **B**):

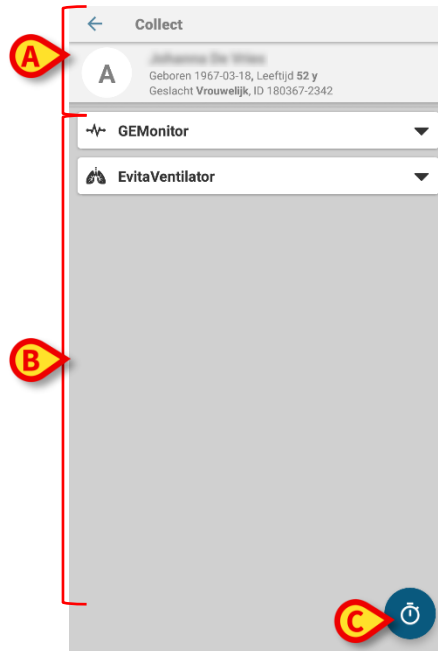

Afb. 8

Het kopgedeelte toont dezelfde informatie van de tegel die verband houdt met de betreffende patiënt in het scherm met de lijst van patiënten (zie paragraaf 1.3.1). De apparatenlijst toont alle apparaten die gegevens van de patiënt kunnen verkrijgen.

1.4.1 Een nieuwe gegevensverzameling starten

Om een nieuwe gegevensverzameling te starten:

- Tik op het  pictogram op de patiëntpagina (Afb. 8 **C**):

Het volgende dialoogvenster verschijnt, waarmee de gebruiker de duur en het interval (d.w.z. de herhalingstijd) van de gegevensverwerking (Afb. 9) kan selecteren:



Afb. 9

- Selecteer de gewenste duur en tijdsinterval en druk vervolgens op **OK**.

De patiëntpagina wordt weergegeven en is als volgt enigszins gewijzigd (Afb. 10):



Afb. 10

Er is nu een rij toegevoegd met de duur en herhalingstijden voor de lopende gegevensverzameling (Afb. 10 **A**). Bovendien wordt het pictogram dat de gegevensverzameling start nu vervangen door het pictogram waarmee het kan worden gestopt (- Afb. 10 **C**).

Zoals eerder gezien is en aangezien een gegevensverzameling is gestart, is de tegel die betrekking heeft op de betreffende patiënt in het scherm met de lijst van patiënten bovendien anders gekleurd (Afb. 11):




Afb. 11

1.4.2 Een lopende gegevensverzameling stoppen

Om een lopende gegevensverzameling te stoppen:

- Tik op het  pictogram op de patiëntpagina (Afb. 10 C):

Het volgende dialoogvenster verschijnt en vraagt de gebruiker om een bevestiging (Afb. 12):

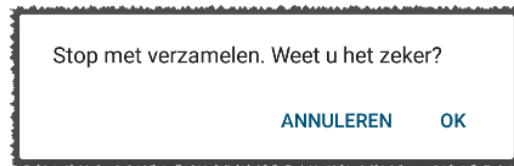


Afb. 12

1.4.3 Laatst verkregen gegevens tonen

Om de laatst verkregen gegevens te tonen, zonder rekening te houden met de vraag of een gegevensverzameling al dan niet aan de gang is:

- Tik op de tegel die betrekking heeft op een aangesloten apparaat (Afb. 13):

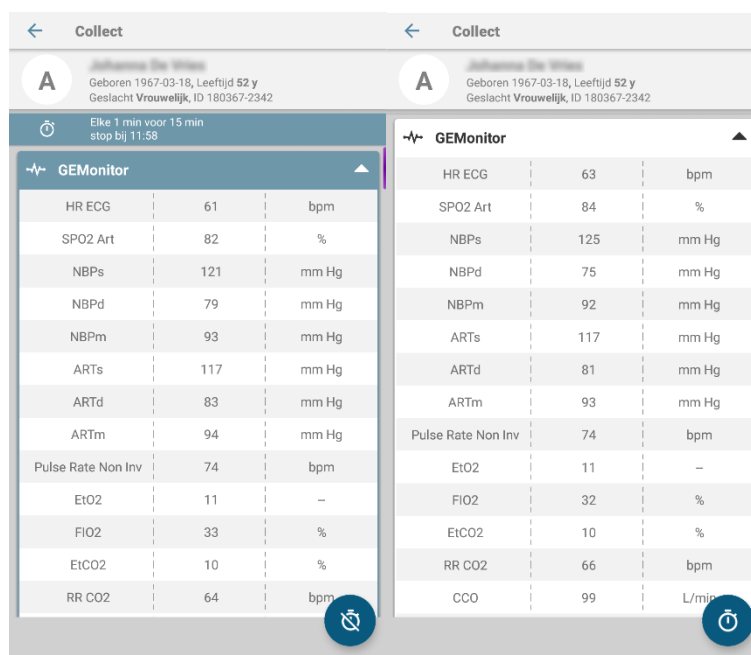

Afb. 13