



Collect Mobile Brukerhåndbok

Versjon 2.0

10/07/2020

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia
Tlf. +39 055 0512161 – Faks +39 055 829030

www.ascocom.com

Innhold

1. "Collect"	3
1.1 Innledning	3
1.2 Programoppstart.....	3
1.3 Hovedside	4
1.3.1 Liste over pasienter	4
1.3.2 Pasientside fra liste over pasienter	5
1.3.3 Pasientside fra pasientvalg.....	5
1.4 Pasientside	7
1.4.1 Starte en ny datainnsamling.....	7
1.4.2 Stopper en pågående datainnsamling.....	9
1.4.3 Vis siste inntatte data	9

1. "Collect"



For generell og detaljert informasjon om produktmiljøet og instruksjoner for bruk av Mobile Launcher-programvaren, se spesifikke dokumenter for produktet. Kunnskap om og forståelse av disse dokumentene er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av Collect Mobile-modulen, beskrevet i dette dokumentet.



Vær oppmerksom på om "Collect" modulens funksjoner og egenskaper er fullt tilgjengelige når brukeren er logget inn. En popup-melding informerer brukeren om tilgang til programmet hvis denne ikke er logget inn tidligere.

1.1 Innledning

Modulen "Collect" tillater brukeren å skaffe seg data fra enheter tilknyttet pasienten (også midlertidig) med valgbare repetisjon- og varighetstider.

Collect-modulen håndterer data fra pasienter, selv om de ikke er i sengen, med opptak og repetisjonstid fullt tilpasset.

1.2 Programoppstart

For å starte "Collect" -modulen:

- Trykk på den tilsvarende raden på den håndholdte enhetens skjerm (Fig 1).



Fig 1

Nnummer for pågående datainnsamling vises i en rød sirkel over programikonet (Fig 1 **A**)

Etter at du har tastet modulikonet, åpnes "Collect"-hovedsiden (Fig 2):



Fig 2

1.3 Hovedside

"Collect" hovedside viser oversikten over pasientlister (Fig 2). En slik skjerm viser listen over pasienter i senger som tilhører den håndholdte enhetens domene; dessuten vises også de pasientene som har en datainnsamling gående.

Når en datainnsamling pågår, vises typen av datainnsamling for brukeren. Egentlig er tre typer datainnsamling definert:

- Kontinuerlig, hvis ikon er ;
- Start og Stopp, hvis ikon er ;
- Blandet (dvs. Start og Stopp midlertidig overstyrer en kontinuerlig samling), hvis ikon er .

1.3.1 Liste over pasienter

Hver pasient er representert av en flis (Fig 3).

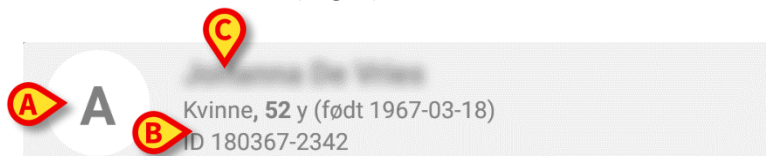


Fig 3

I flisen vises følgende informasjon:

- Sengnummer (hvis tilgjengelig - Fig 3 **A**);
- Pasientdata (kjønn, alder, fødselsdato, pasient ID - Fig 3 **B**).
- Navn på pasienten i den sengen (Fig 3 **C**);

Flisen relatert til en pasient med løpende datainnsamling er annerledes farget (Fig 4):



Fig 4

Hvis data samles inn, legges det til en rad som viser samlingstype, varighet og repetisjonstider (Fig 4 **D**).

1.3.2 Pasientside fra liste over pasienter

Å få tilgang til pasientsiden:

- Trykk på en flis i listen over pasienter.

En slik side viser listen over enheter som er i stand til å samle inn data fra den valgte pasienten (Fig 7).

1.3.3 Pasientside fra pasientvalg

"Collect" -programmet håndterer datainnsamling selv for pasienter som ikke er inkludert i den håndholdte enhetens domene. Dette kan gjøres ved å søke og velge pasienten før du åpner selve applikasjonen. En detaljert beskrivelse av prosedyren kan leses i "Mobile Launcher Brukerhåndbok".

- På hovedskjermbildet for Mobile Launcher, søk etter ønsket pasient ved å trykke på søkeikonet (Fig 5 **A**):

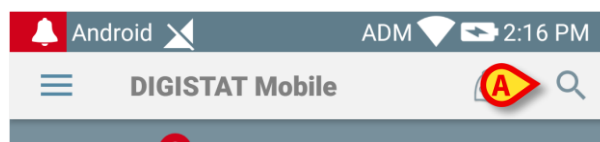


Fig 5

- Søk etter ønsket pasient ved tekstsøk eller strekkode (Fig 6);

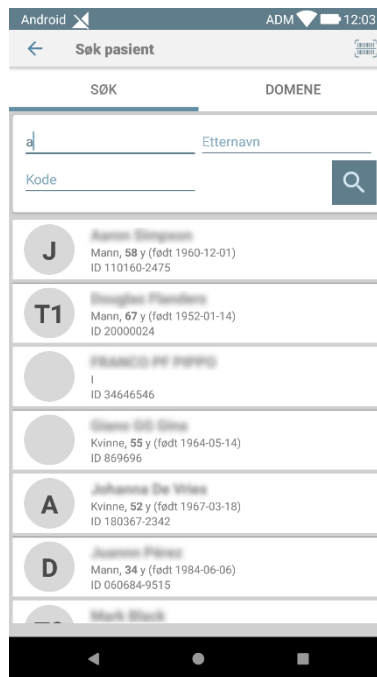


Fig 6

- Velg ønsket pasient. Etter brukerbekreftelsen vises den viktigste siden for mobilapplikasjon (Fig 7):

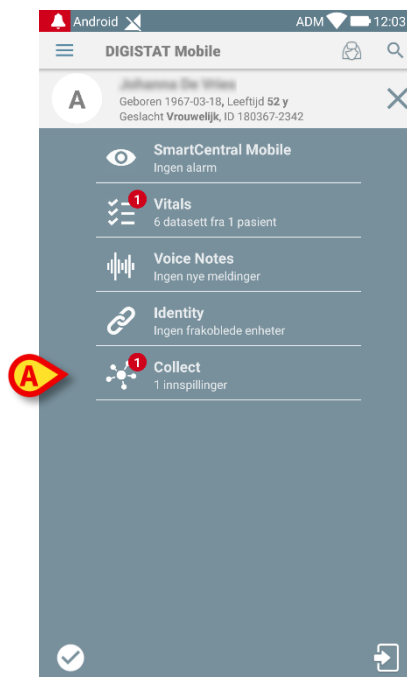


Fig 7

- Trykk på raden som svarer til "Collect" -programmet på den håndholdte enhetens skjerm (Fig 7)

Pasientsiden vil bli vist (Fig 8).

1.4 Pasientside

Pasientside-skjermen er dannet av to områder: et overskriftsområde (Fig 8 **A**) og listen over enheter som er koblet til pasienten selv (Fig 8 **B**):

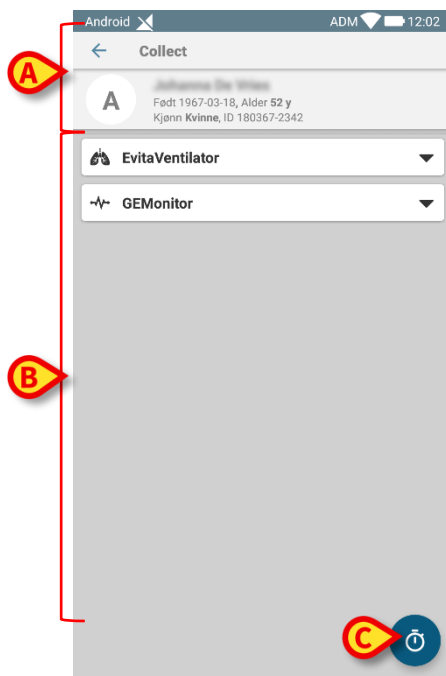


Fig 8

Overskriftsområdet viser samme informasjon som flisen som er relatert til den vurderte pasienten på skjermbildet Pasientliste (se avsnitt 1.3.1). Enhetslisten viser alle enheter som kan skaffe data fra pasienten.

1.4.1 Starte en ny datainnsamling

For å starte en ny datainnsamling:

- Trykk på  ikonet på pasientsiden (Fig 8 **C**):

Følgende dialogvindu vises, slik at brukeren kan velge varighet og intervall (dvs. repetisjonstid) for datainnsamling (Fig 9):

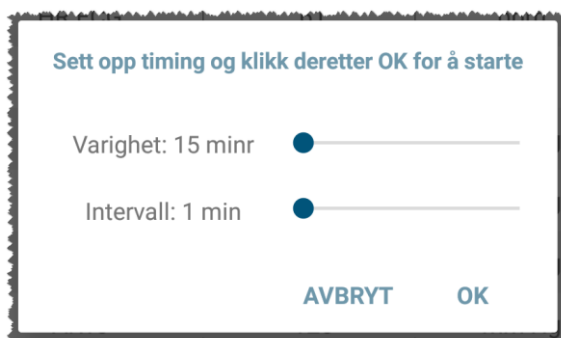


Fig 9

- Velg ønsket varighet og tidsintervall, og trykk deretter på **OK**.

Pasientsiden vil bli vist, noe endret som følger (Fig 10):

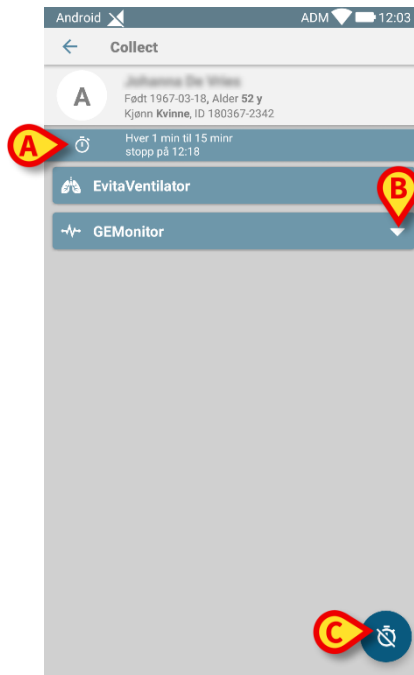


Fig 10

En rad er nå lagt til varighet og gjentakelsestider vedrørende den pågående datainnsamlingen (Fig 10 **A**). I tillegg er ikonet som starter datasamlingen, erstattet av det ikonet som tillater å stoppe den (- Fig 10 **C**).

Som vist tidligere, når en datainnsamling er startet, er flisen relatert til den gjeldende pasienten på skjermbildet Pasientliste i tillegg annerledes farget (Fig 11):



Fig 11

1.4.2 Stopper en pågående datainnsamling

For å stoppe en pågående datainnsamling:

- Trykk på  ikonet i Pasientside (Fig 10 C):

Følgende dialogvindu vises, og dette ber om en bekreftelse fra brukeren (Fig 9):


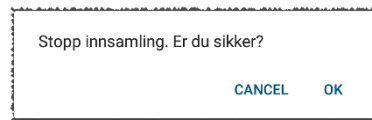


Fig 12

1.4.3 Vis siste inntatte data

Uten hensyn til om en datainnsamling fortsetter eller ikke, for å vise de siste innsamlede dataene:

- Trykk på flisen relatert til en tilkoblet enhet (Fig 13):

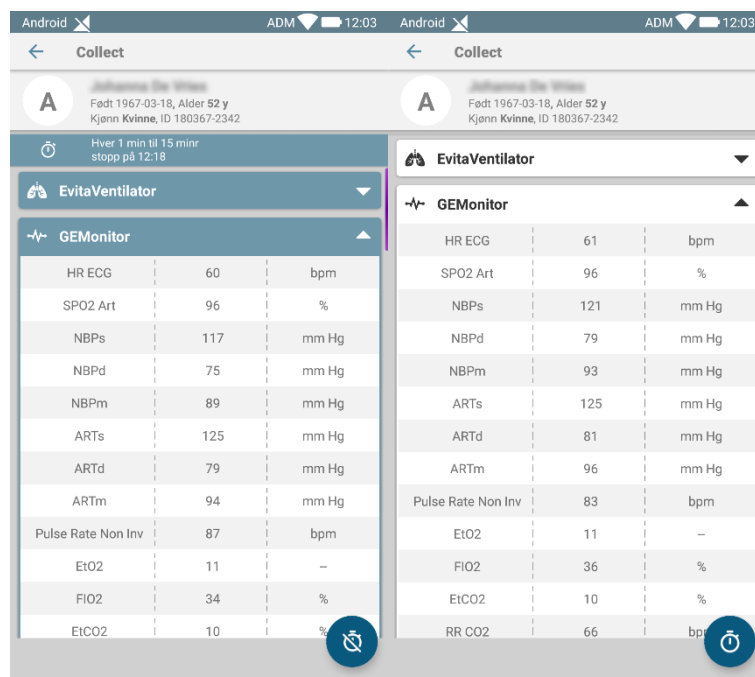

EvitaVentilator		
HR ECG	60	bpm
SPO2 Art	96	%
NBPs	117	mm Hg
NBPd	75	mm Hg
NBPm	89	mm Hg
ARTs	125	mm Hg
ARTd	79	mm Hg
ARTm	94	mm Hg
Pulse Rate Non Inv	87	bpm
EtO2	11	—
FI02	34	%
EtCO2	10	%

GEMonitor		
HR ECG	61	bpm
SPO2 Art	96	%
NBPs	121	mm Hg
NBPd	79	mm Hg
NBPm	93	mm Hg
ARTs	125	mm Hg
ARTd	81	mm Hg
ARTm	96	mm Hg
Pulse Rate Non Inv	83	bpm
EtO2	11	—
FI02	36	%
EtCO2	10	%
RR CO2	66	bpm

Fig 13