



Identity Web Brukermanual

Versjon 0.5

5/27/2025

Innhold

Identity Web	3
1. Introduksjon	3
2. Pasientvalg	3
3. Valg av undermodulen "Identity Web".	4
4. Liste over tilknyttede enheter	5
5. Frakoblingsprosedyre	6
6. Søk- og tilknytningsprosedyre	8
6.1. Frakobling etter søk	10
6.2. Allerede sammenkoblede enheter	11
7. Strekkodesøk og valg	12

Identity Web



For informasjon om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tiltenkt bruk, se *USR NOR Digistat Care* og/eller *USR NOR Digistat Docs* (avhengig av modulene som er installert - for *Digistat Suite EU*) eller *USR ENG Digistat Suite NA* (for *Digistat Suite NA*). Kunnskapen og forståelsen av det aktuelle dokumentet er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av "Identity Web", beskrevet i dette dokumentet.

1. Introduksjon



Identity Web er en undermodul av *Control Bar Web* som kan aktiveres eller ikke avhengig av konfigurasjonen som brukes i den spesifikke helseorganisasjonen. Se systemadministratorene for mer informasjon.

"Identity Web" gjør det mulig å raskt tilknytte/fjerne medisinsk utstyr i sammenheng med Digistat Web-miljøet.



Bare et undersett av de konfigurerte enhetene er kvalifisert for rask tilknytning-/frakoblingsprosedyre. Vanligvis gjelder prosedyren for wi-fi-enheter som ofte flyttes fra en pasient til en annen. I alle tilfeller er det funksjonene, bruksmåten og konfigurasjonen til enheten som gjør den kvalifisert eller ikke for prosedyren beskrevet her.

2. Pasientvalg

"Identity Web" kan bare startes etter pasientvalg. For å velge en pasient,

- Klikk på knappen **Velg pasient** slik som angitt i Fig. 1 A.

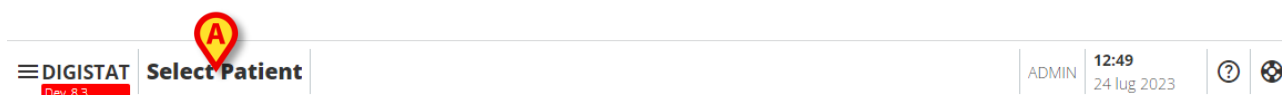


Fig. 1

Patient Explorer Web-modulen åpnes. Se Digistat® Patient Explorer Web-brukerhåndboken (*USR NOR Patient Explorer Web*) for ytterligere instruksjoner om pasientbehandlingsfunksjoner.



Andre moduler kan konfigureres for pasientvalget i stedet for Patient Explorer Web, avhengig av konfigurasjonen. Hvis dette er tilfelle, se den spesifikke dokumentasjonen for instruksjoner.

Når en pasient er valgt, vises navnet og hoveddataene til pasienten på **Pasient** -knappen (Fig. 2 **A**).



Fig. 2

3. Valg av undermodulen "Identity Web".

Hvis "Identity Web" er tilgjengelig,  vises ikonet på pasientknappen (Fig. 3 **A**).



Fig. 3

Slik starter du Identity Web:

- Klikk på  -ikonet.

Et rullegardinwindu vises som inneholder ytterligere pasientdata og tilgjengelige applikasjoner som kan startes på Control Bar (Fig. 4).

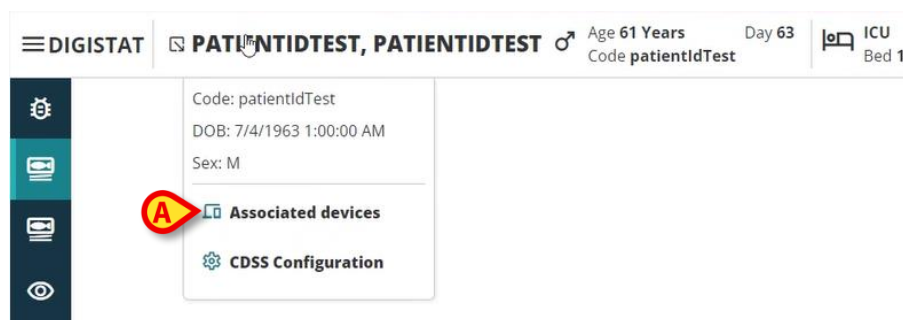


Fig. 4

- Klikk på "Tilknyttede enheter" (Fig. 4 **A**).

Følgende vindu vises med en liste over enhetene som er knyttet til den valgte pasienten (Fig. 5).

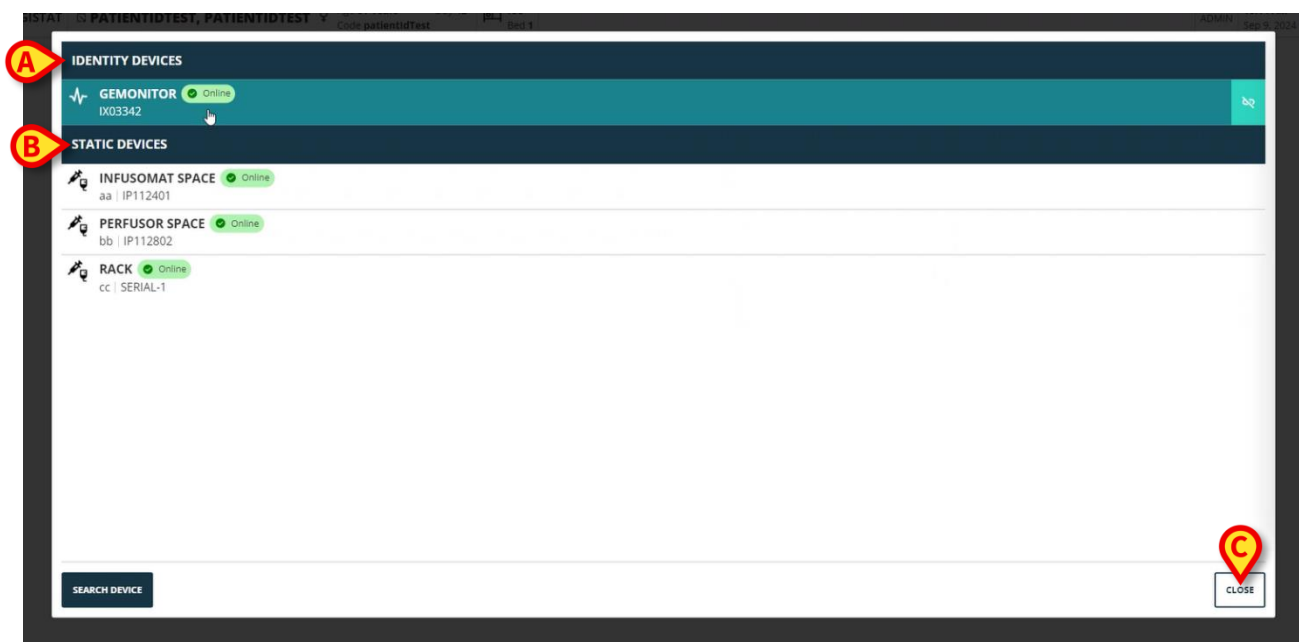


Fig. 5

4. Liste over tilknyttede enheter

Vinduet "Liste over tilknyttede enheter" (Fig. 5) er delt inn i to deler:

Delen **Identitetseenheter** (Fig. 5 **A**) viser de bevegelige enhetene som for øyeblikket er knyttet til den valgte pasienten.

Delen **Statiske enheter** (Fig. 5 **B**) viser enhetene som er knyttet til den valgte sengen og som ikke kan flyttes.

"Identity Web" fungerer bare på **Identity-enheter**.

Hver rad i vinduet tilsvarer en enhet (se Fig. 6, for eksempel).



Fig. 6

For hver enhet vises følgende informasjon:

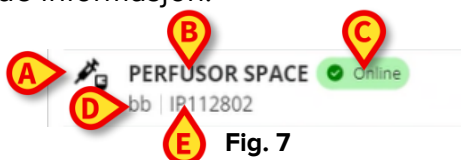


Fig. 7

- Et ikon som karakteriserer enhetstypen (Fig. 7 **A**).
- Navnet på enheten (Fig. 7 **B**).
- Indikasjonen av enhetens status (Fig. 7 **C** - enten tilkoblet eller frakoblet).
- En etikett som kan knyttes til enheten under konfigurasjon for å gi tilleggsinformasjon (Fig. 7 **D**).
- Enhetens serienummer, som identifiserer enheten på unikt vis (Fig. 7 **E**).

Slik lukker du listen over tilknyttede enheter:

- Klikk på **Lukk** -knappen slik som angitt i Fig. 5 **C**.

Det er mulig å vise et vindu, for hver tilkoblet enhet, som viser parameterne som er innhentet av den spesifikke enheten, med deres verdier og måleenhet. Slik gjør du det:

- Klikk på raden som tilsvarer enheten (Fig. 8 **A**).

Vinduet angitt i Fig. 8 **B** vises.

Dette vinduet viser parameterne innhentet av enheten, og indikerer deres navn, siste verdi og måleenhet.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red callout 'A' points to the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of parameters for the selected device. A red callout 'B' points to the 'Temp Other' row in the table.

Name	Value	Unit of measure
CTH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Fig. 8

5. Frakoblingsprosedyre

"Identity Web" tillater kun å operere på "Identity-enheter" (de bevegelige enhetene, de som er knyttet til pasienten, ikke knyttet til sengen).

En frakoblingsknapp vises til høyre for radene som tilsvarer "Identity-enheter" (Fig. 9 **A**).



Fig. 9

For å koble fra en enhet

- Klikk på  -knappen (Fig. 9 **A**).

Brukerbekreftelse kreves, som vist i Fig **A**.

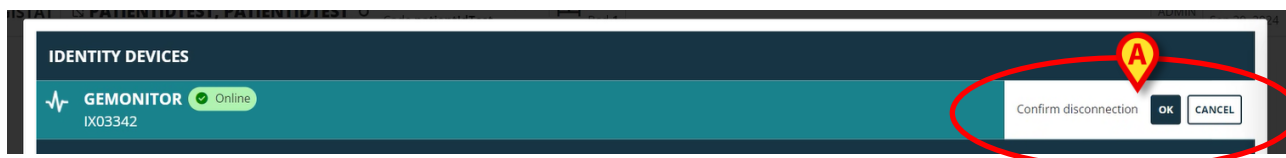


Fig. 10

Etter bekreftelse blir enheten frakoblet, men på grunn av utdypende årsaker, som krever en progressiv frakobling, blir raden som tilsvarer den frakoblede enheten:

- a) først vist i området "statiske enheter", i "Tilkoblet"-status (Fig. 11 **A**);



Fig. 11

- b) deretter, etter en konfigurerbar tid, vises den som "Frakoblet" (Fig. 12 **A**);



Fig. 12

- c) deretter, etter en konfigurerbar tid, fjernes den fra listen (Fig. 13).



Fig. 13



Se også avsnitt 6.1 for frakoblingsprosedyren etter søk.

6. Søk- og tilknytningsprosedyre

Slik søker du etter en enhet og knytter den til den valgte pasienten:

- Klikk på **Søk enhet** -knappen i vinduet "Liste over tilknyttede enheter" (Fig. 14 A).

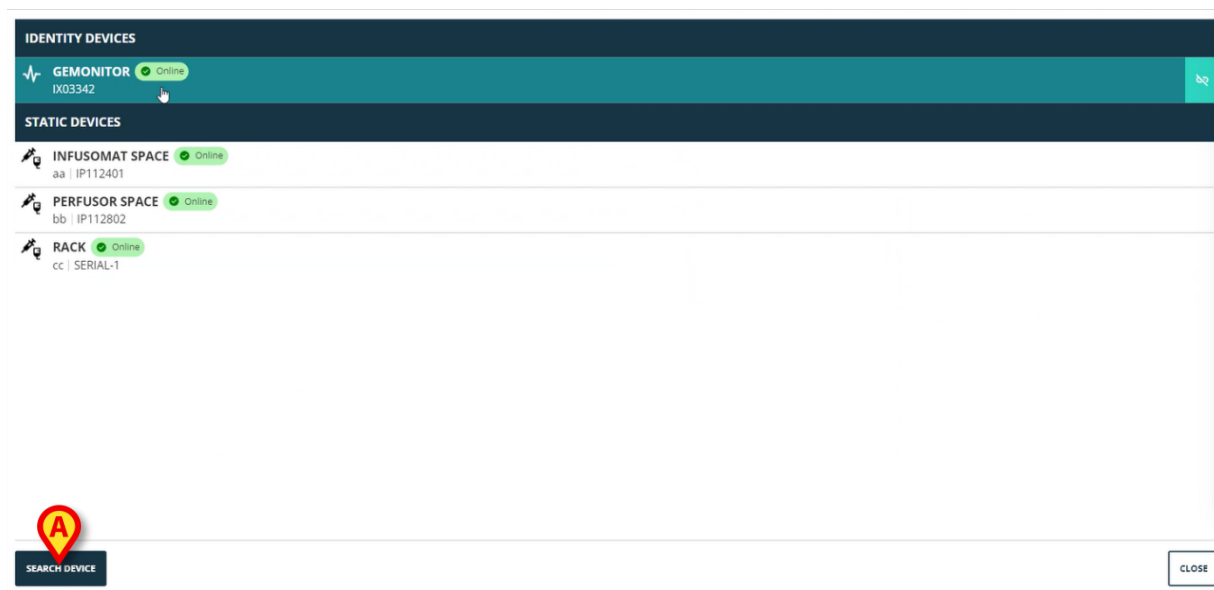


Fig. 14

Et søkeverktøy vises til høyre (Fig. 15 A).

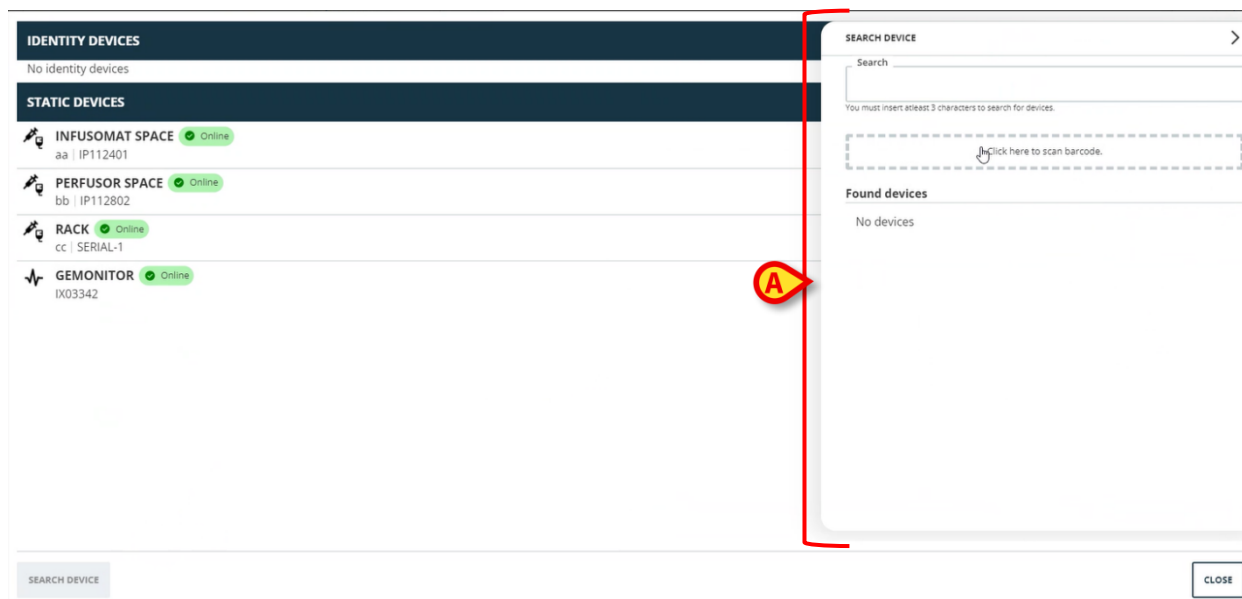


Fig. 15

- Skriv inn navnet eller serienummeret til den aktuelle enheten i feltet som er angitt i Fig. 16 A.

Minst tre tegn må angis for å vise resultatene. Listen over enheter som samsvarer med den angitte strengen vises i området "Enheter funnet" (Fig. 16 **B**).

Strekkodesøk er også aktivert (se avsnitt 7 for instruksjoner).

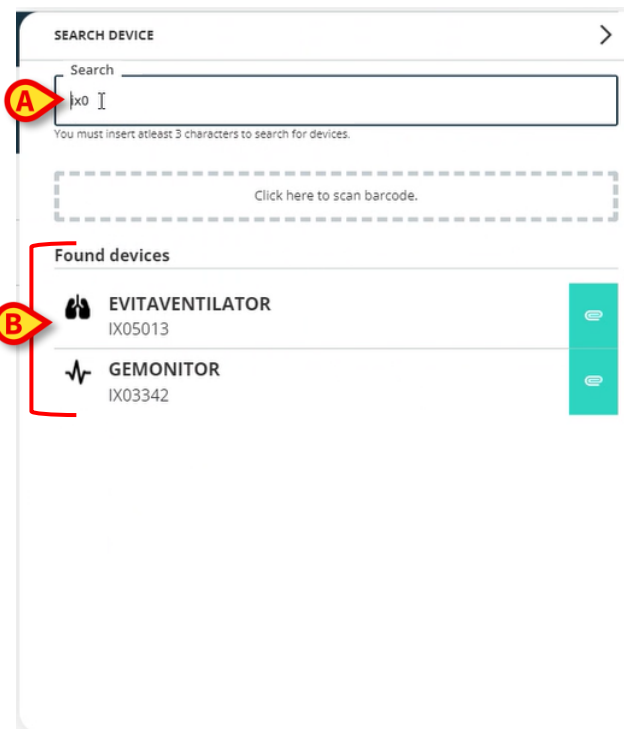


Fig. 16

- Klikk på  -knappen plassert på høyre side av enheten som skal tilknyttes.

Den tilsvarende raden endres som vist i Fig. 17 **A**.

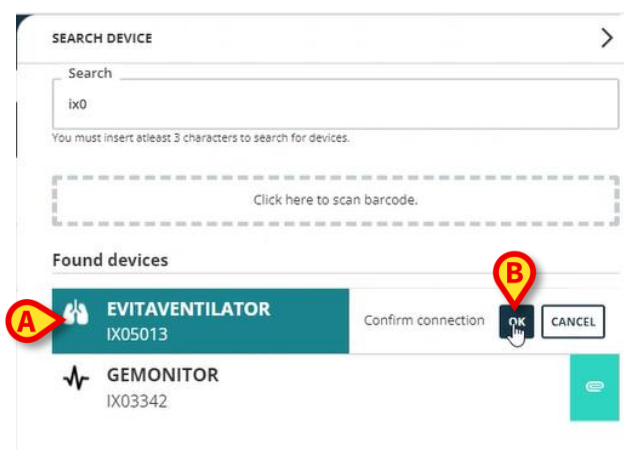


Fig. 17

For å bekrefte tilknytning

- Klikk på **OK** -knappen (Fig. 17 **B**).

Enheter vises deretter i listen over tilknyttede enheter, i området "Identity-enhet" (Fig. 18 **A**).

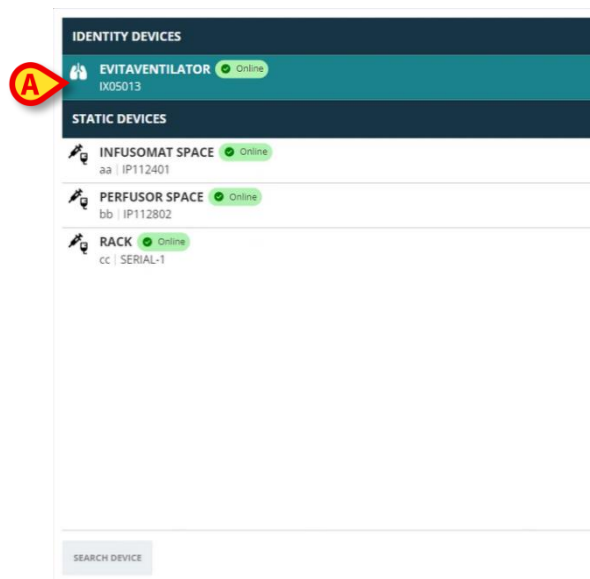


Fig. 18

6.1. Frakobling etter søk

De allerede tilordnede enhetene vises også som søkeresultater, men en frakoblingsknapp  vises til høyre i stedet for tilknytningsknappen  (Fig. 19 A).

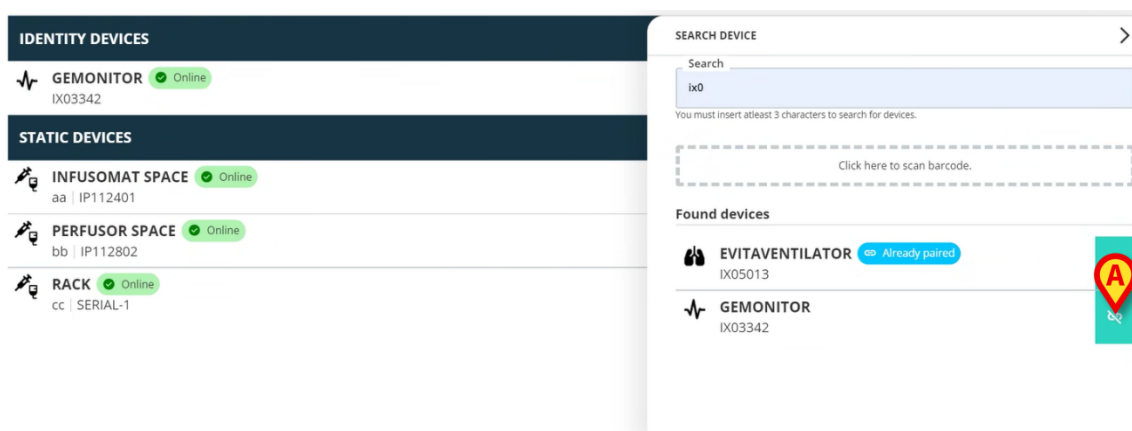


Fig. 19

- Klikk på  -knappen for å koble fra enheten.

Brukerbekreftelse kreves.

- Klikk på **OK** -knappen for å bekrefte frakoblingen (Fig. 20 A).

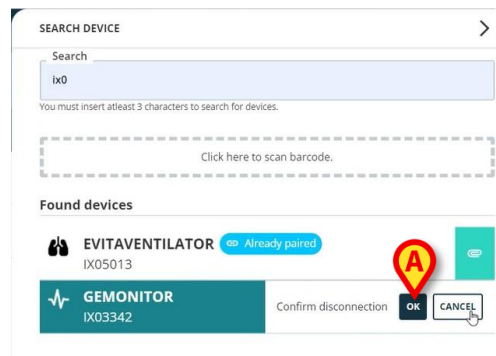


Fig. 20

Den frakoblede enheten forsvinner fra området "Identit-enheter" på listen over tilknyttede enheter. Den vises fortsatt i søkeresultatene som "Kan tilkobles" -enhet.

6.2. Allerede sammenkoblede enheter

Enheter som er knyttet til andre pasienter vises i søkeresultatene som "Allerede sammenkoblet" (Fig. 21 A).



Fig. 21

De "Allerede sammenkoblede" enhetene kan knyttes til den valgte pasienten ved å bruke standardprosedyren beskrevet i avsnitt 6 . I disse tilfellene kreves en spesifikk brukerbekreftelse (Fig. 22).

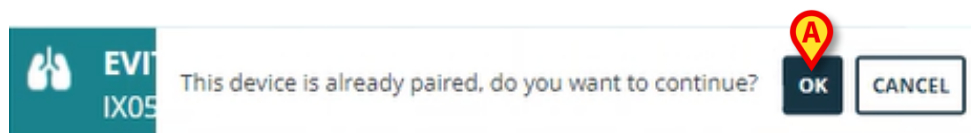


Fig. 22

- Klikk **OK** for å knytte enheten til den valgte pasienten (Fig. 22 A).

Enheter blir på denne måten koblet fra den forrige pasienten og knyttet til den som er valgt.

7. Strekkodesøk og valg

Det er mulig å velge en enhet etter strekkodesøk. For å aktivere strekkodevalg, i vinduet "Søk enhet":

- Klikk på området slik som angitt i Fig. 23 **A**.



Fig. 23

Arbeidsstasjonskameraet aktiveres (Fig. 24 **A**).



Fig. 24

- Skann strekkoden til den aktuelle enheten.

Enhetsdataene vises i området "Enheter funnet" i vinduet "Søk enhet" (Fig. 25 **A**).

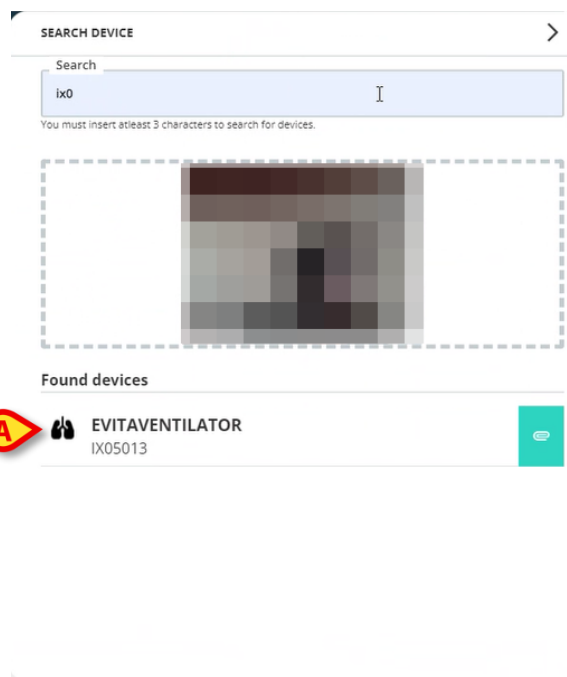


Fig. 25

- Fortsett med tilknytningsprosedyren som beskrevet i avsnitt 6.

Kameraet som er aktivert som standard er bakkameraet. "Identity Web" kan konfigureres for å tillate kamerabytte. I så fall vises en dedikert knapp  i området "Strekkeleser" i vinduet "Søkeenheter" (Fig. 26 **A**). Kontakt systemadministratorer for ytterligere informasjon om denne funksjonaliteten.

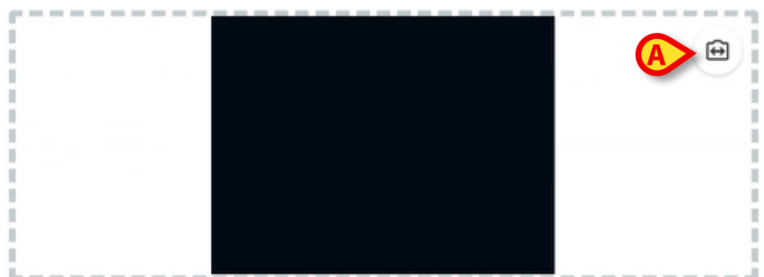


Fig. 26



Et systemalternativ kan konfigureres til å spore enhetene som er valgt via strekkode ved å legge til et prefiks og et suffiks til enhetens serienummer. Prefikset og suffikset vises ikke på brukergrensesnittet.