



Identity Web

Instrukcja obsługi

Wersja 1.0

7/8/2025

Spis treści

Identity Web	3
1. Wstęp	3
2. Wybór pacjenta	3
3. Wybór podmodułu „Identity Web”	4
4. Lista powiązanych urządzeń	5
5. Procedura rozłączenia.....	6
6. Procedura wyszukiwania i powiązania.....	8
6.1. Rozłączenie po przeszukaniu	10
6.2. Urządzenia już sparowane	11
7. Wyszukiwanie kodów kreskowych i wybór.....	12

Identity Web



Informacje na temat środowiska Produktu, środków ostrożności, ostrzeżeń i przeznaczenia znajdują się w dokumentach USR POL Digistat Care i/lub USR POL Digistat Docs (w zależności od zainstalowanych modułów – dla Digistat Suite EU) lub USR ENG Digistat Suite NA (dla Digistat Suite NA). Znajomość i zrozumienie odpowiedniego dokumentu są obowiązkowe w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z „Identity Web” opisanego w tym dokumencie.

1. Wstęp



Identity Web jest podmodułem Control Bar Web, który można włączyć lub nie, zależnie od konfiguracji stosowanej w konkretnej placówce służby zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorami systemu.

„Identity Web” umożliwia szybkie powiązanie/rozłączenie urządzeń medycznych z pacjentami w kontekście środowiska Digistat Web.




Tylko podzbiór skonfigurowanych urządzeń kwalifikuje się do szybkiej procedury powiązania/rozłączenia. Zwykle procedura ta dotyczy urządzeń wi-fi, które są często przenoszone od jednego pacjenta do drugiego. W każdym przypadku cechy, sposób użytkowania i konfiguracja urządzenia decydują o tym, czy kwalifikuje się ono do opisanej tutaj procedury.

2. Wybór pacjenta

„Identity Web” można uruchomić dopiero po dokonaniu wyboru pacjenta. Aby wybrać pacjenta,

- Kliknij przycisk **Wybierz pacjenta** widoczny w Rys. 1 A.

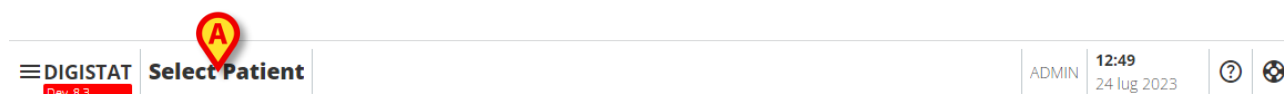

Rys. 1

Otworzy się moduł sieciowy Patient Explorer. Dalsze instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pacjentami można znaleźć w podręczniku użytkownika Digistat® Patient Explorer Web (USR POL Patient Explorer Web).



W zależności od konfiguracji, zamiast Patient Explorer Web można skonfigurować inne moduły, umożliwiające wybór pacjenta. W takim przypadku należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją w celu uzyskania instrukcji.

Po wybraniu pacjenta jego imię i nazwisko oraz główne dane są wyświetlane na przycisku **Pacjent** (Rys. 2 A).



Rys. 2

3. Wybór podmodułu „Identity Web”

Jeżeli dostępny jest podmoduł „Identity Web”,  ikona jest wyświetlana na przycisku pacjenta (Rys. 3 A).




Rys. 3

Aby uruchomić Identity Web:

- Kliknij tę  ikonę.


Wyświetla się okno rozwijane zawierające dodatkowe dane pacjenta i dostępne aplikacje, które można uruchomić na Control Bar (Rys. 4).

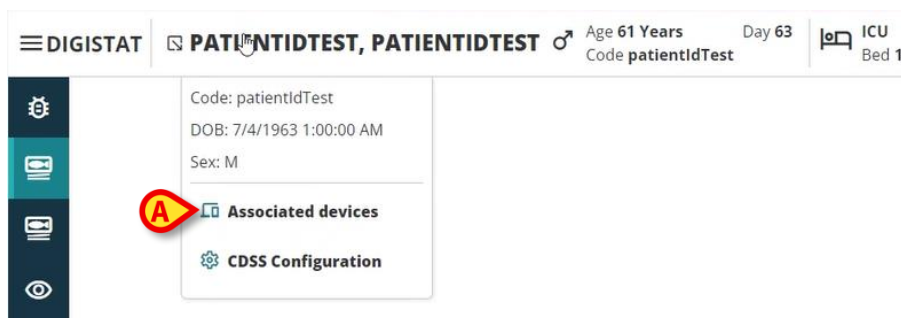

Rys. 4

- Kliknij „Powiązane urządzenia” (Rys. 4 A).

Wyświetla się następujące okno, w którym wymienione są urządzenia powiązane z aktualnie wybranym pacjentem (Rys. 5).

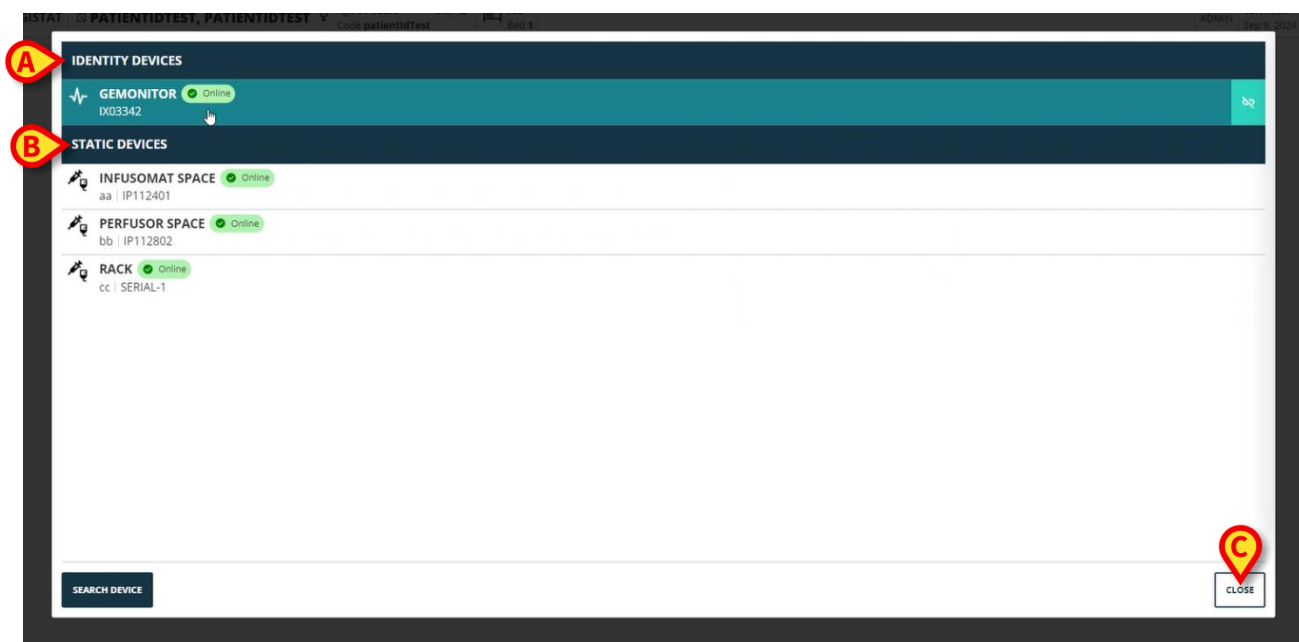

Rys. 5

4. Lista powiązanych urządzeń

Okno „Lista urządzeń powiązanych” (Rys. 5) dzieli się na dwie sekcje:

Sekcja **urządzenia Identity** (Rys. 5 **A**) wyświetla listę urządzeń ruchomych, które są aktualnie powiązane z wybranym pacjentem.

Sekcja **Urządzeń statycznych** (Rys. 5 **B**) wyświetla urządzenia, które są połączone z wybranym łóżkiem i których nie można przenosić.


„Identity Web” działa wyłącznie na **urządzeniach Identity**.

Każdy wiersz w oknie odpowiada urządzeniu (na przykład, patrz Rys. 6).



Rys. 6

Dla każdego urządzenia wyświetlane są następujące informacje:

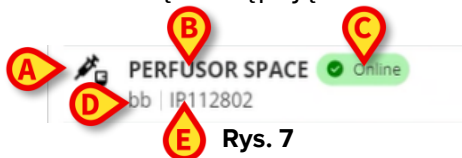

Rys. 7

- Ikona charakteryzująca typ urządzenia (Rys. 7 **A**)
- Nazwa urządzenia (Rys. 7 **B**).
- Wskaźnik stanu urządzenia (Rys. 7 **C** – online lub offline).
- Etykieta, którą można powiązać z urządzeniem podczas konfiguracji w celu dostarczenia dodatkowych informacji (Rys. 7 **D**)
- Numer seryjny urządzenia, jednoznacznie identyfikujący urządzenie (Rys. 7 **E**).

Aby zamknąć listę powiązanych urządzeń:


- Kliknij przycisk **Zamknij** widoczny w Rys. 5 **C**.

Dla każdego podłączonego urządzenia można wyświetlić okno, zawierające listę parametrów zmierzonych przez konkretne urządzenie, ich wartości i jednostki miary. Aby tego dokonać:

- Kliknij wiersz odpowiadający urządzeniu (Rys. 8 **A**).

Wyświetla się okno wskazane w Rys. 8 **B**.

W oknie tym wyświetlane są parametry pobrane przez urządzenie, podając ich nazwę, ostatnią wartość i unite miary.

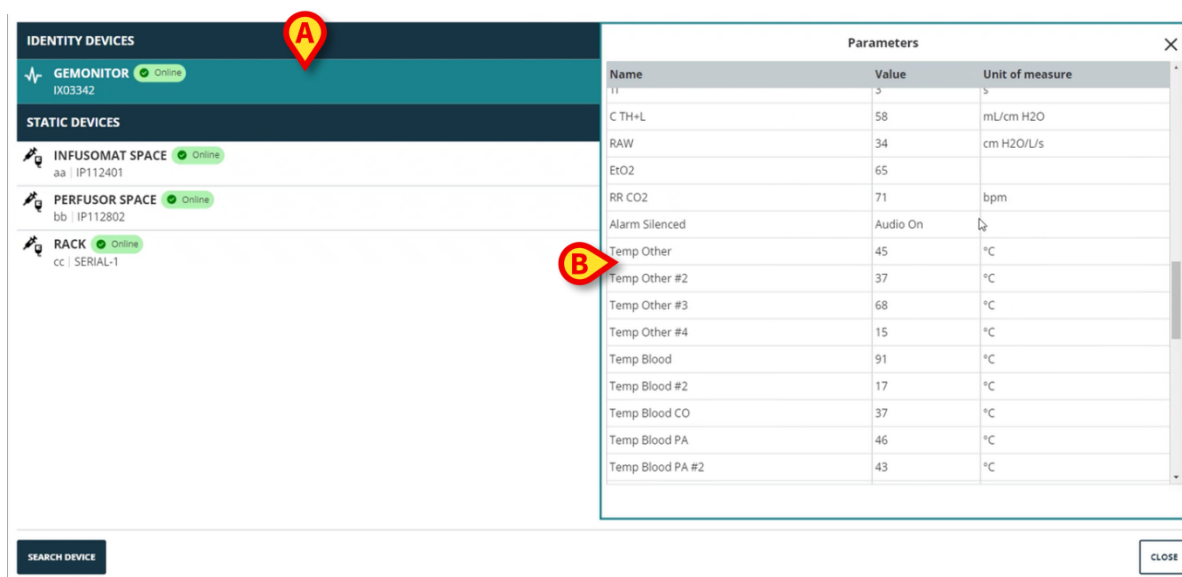

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red circle 'A' highlights the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of measured parameters for the selected device. A red circle 'B' highlights the 'Temp Other' row in the table.

Name	Value	Unit of measure
TH	5	°C
C TH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	%
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Rys. 8

5. Procedura rozłączenia

„Identity Web” pozwala na działanie wyłącznie na „urządzeniach Identity” (ruchomych, powiązanych z pacjentem, a nie połączonych z łóżkiem).

Przycisk rozłączenia jest wyświetlany po prawej stronie wierszy odpowiadających „urządzeniom Identity” (Rys. 9 **A**).




The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section. The GEMONITOR device (IX03342) is highlighted. A red circle 'A' highlights the disconnect button (a small icon) located to the right of the device name.

Rys. 9

Aby rozłączyć urządzenie

- Kliknij przycisk  (Rys. 9 **A**).


Wymagane jest potwierdzenie użytkownika, jak pokazano na Rys. 10 **A**.

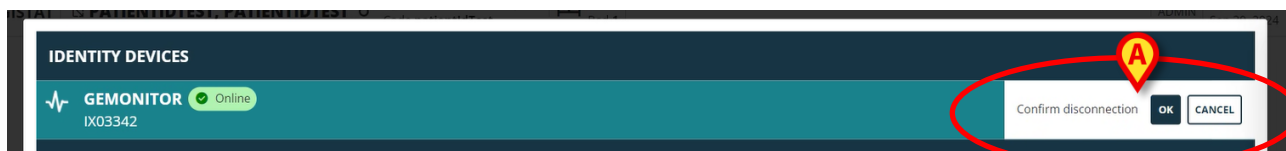

Rys. 10

Po potwierdzeniu urządzenie zostaje rozłączone, ale ze względu na powody techniczne, wymagające stopniowego odłączania, wiersz odpowiadający rozłączonemu urządzeniu jest:

- a) najpierw wyświetlany w obszarze „Urządzenia statyczne” w statusie „Online” (Rys. 11 **A**);

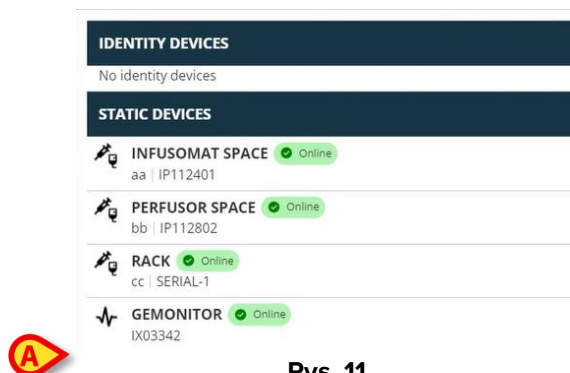

Rys. 11

- b) następnie, po skonfigurowanym czasie, jest wyświetlany jako „Offline” (Rys. 12 **A**);



Rys. 12

- c) następnie, po upływie konfigurowalnego czasu, jest usuwany z listy (Rys. 13).



Rys. 13




Zobacz także sekcję 6.1 w celu przeprowadzenia procedury rozłączenia po przeszukaniu.

6. Procedura wyszukiwania i powiązania


Aby wyszukać urządzenie i powiązać je z aktualnie wybranym pacjentem:

- Kliknij przycisk **Szukaj urządzenia** w oknie „Lista powiązanych urządzeń” (Rys. 14 **A**).

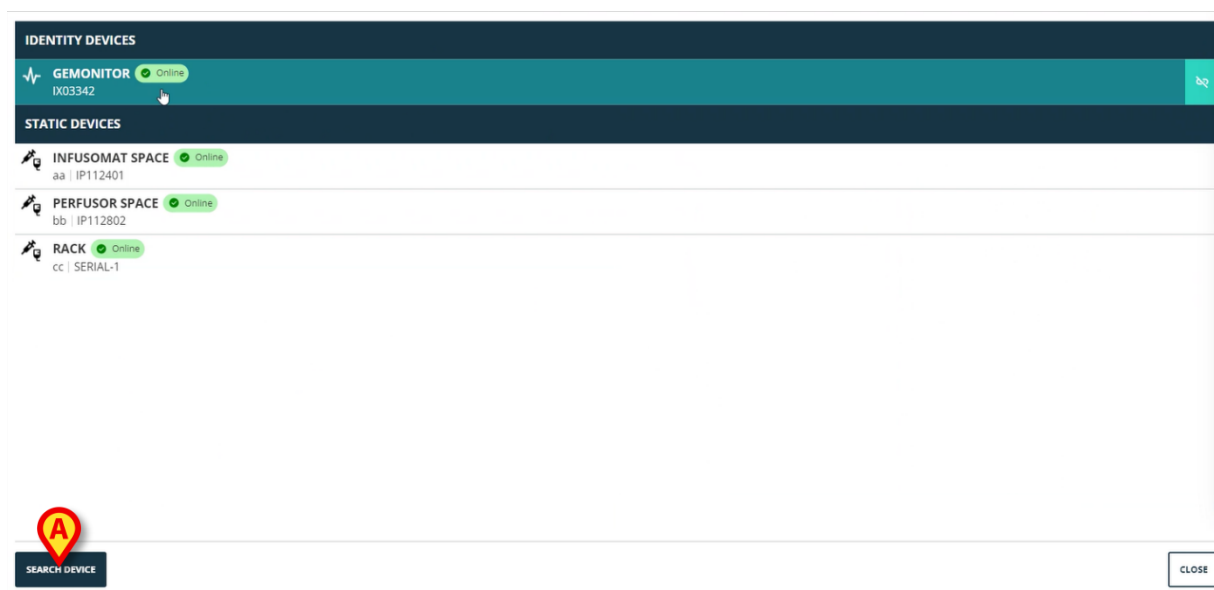

Rys. 14

Po prawej stronie wyświetlane jest narzędzie wyszukiwania (Rys. 15 **A**).

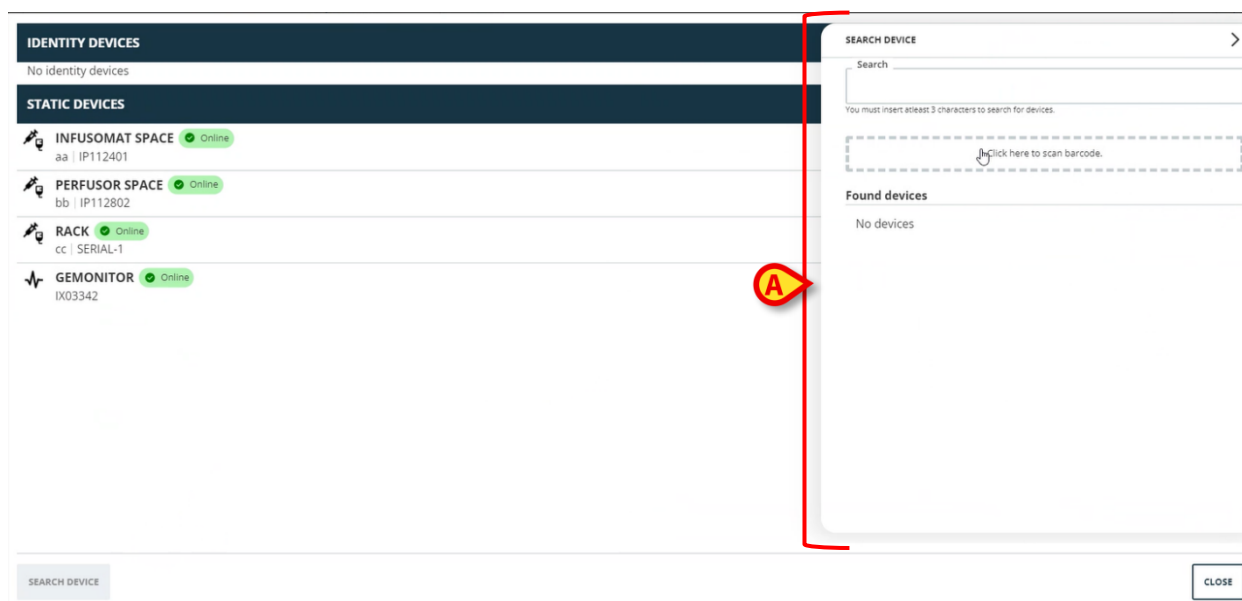


Rys. 15

- Wpisz nazwę lub numer seryjny odpowiedniego urządzenia w polu widocznym w Rys. 16 **A**.

Aby wyświetlić wyniki, należy podać co najmniej trzy znaki. Lista urządzeń pasujących do określonego ciągu jest wyświetlana w obszarze „Znalezione urządzenia” (Rys. 16 **B**).


Włączone jest również wyszukiwanie kodów kreskowych (patrz sekcję 7 w celu uzyskania instrukcji).

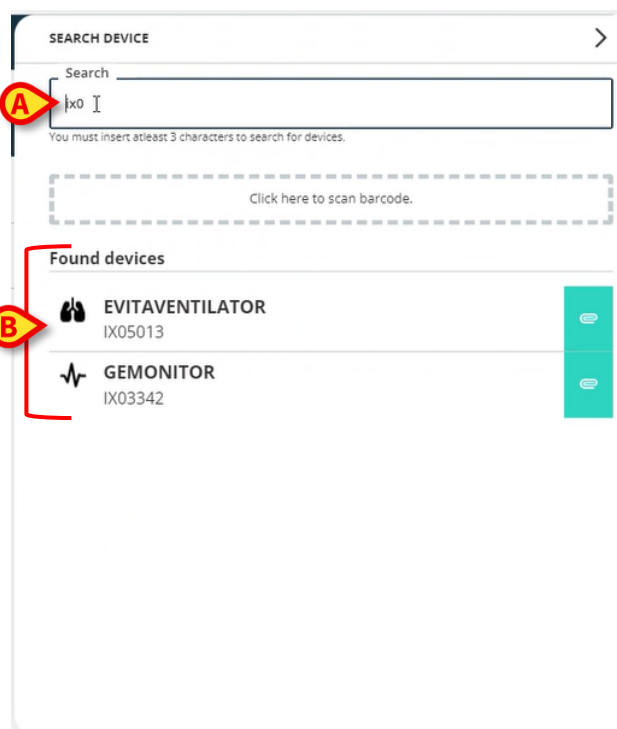

Rys. 16

- Kliknij przycisk  umieszczony po prawej stronie urządzenia, które ma zostać powiązane.

Odpowiedni wiersz zmienia się, jak pokazano na Rys. 17 **A**.

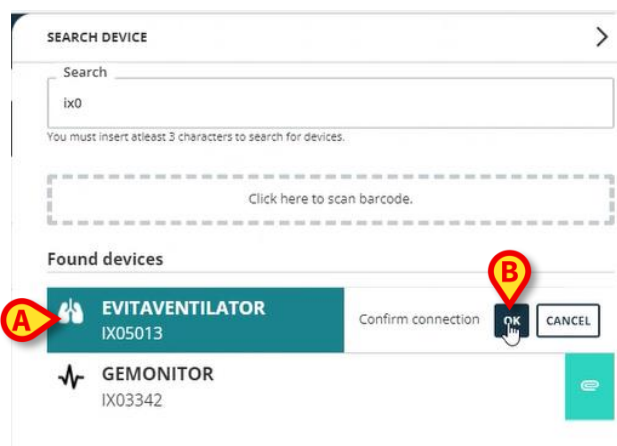


Rys. 17

Aby potwierdzić powiązanie

- Kliknij przycisk **Ok** (Rys. 17 **B**).


Następnie urządzenie jest wyświetlane na liście powiązanych urządzeń w obszarze „urządzenie Identity” (Rys. 18 **A**).

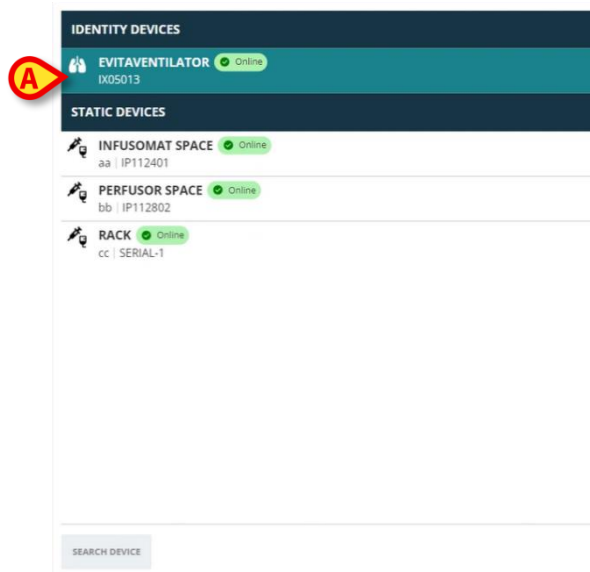

Rys. 18

6.1. Rozłączenie po przeszukaniu

Urządzenia już przypisane są również wyświetlane jako wyniki wyszukiwania, ale po prawej stronie znajduje się przycisk rozłączenia  jest wyświetlany zamiast przycisku powiązania  (Rys. 19 **A**).

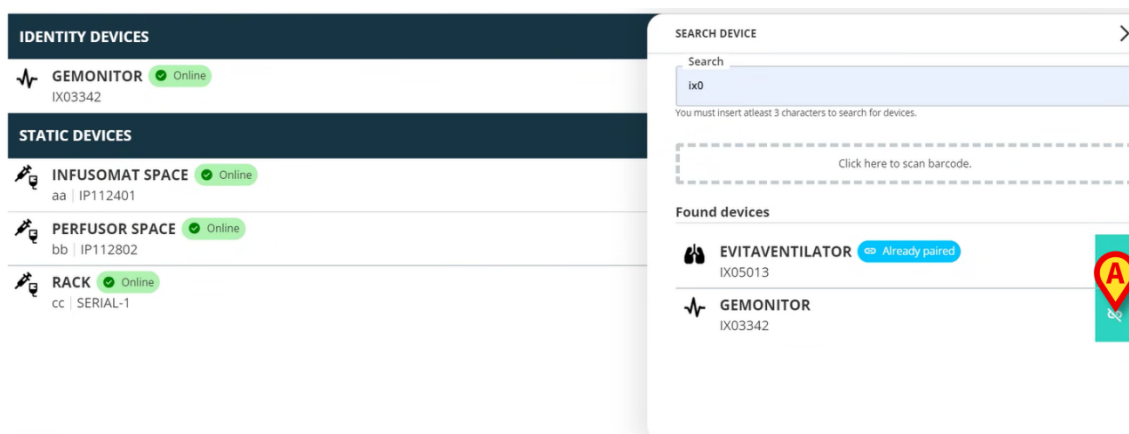


Rys. 19

- Kliknij przycisk , aby rozłączyć urządzenie.

Wymagane jest potwierdzenie użytkownika.

- Kliknij przycisk **Ok**, aby potwierdzić usunięcie powiązania (Rys. 20 **A**).

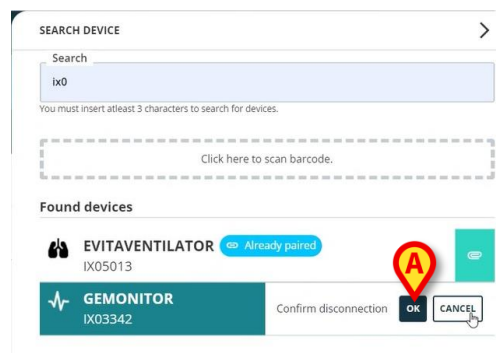

Rys. 20

Rozłączone urządzenie znika z obszaru „urządzenia Identity” na liście powiązanych urządzeń. Urządzenie nadal jest wyświetlane w wynikach wyszukiwania jako urządzenie możliwe do „podłączenia”.


6.2. Urządzenia już sparowane

Urządzenia powiązane z innymi pacjentami są wyświetlane w wynikach wyszukiwania jako „Już sparowane” (Rys. 21 A).



Rys. 21

Urządzenia „Już sparowane” można powiązać z aktualnie wybranym pacjentem, stosując standardową procedurę opisaną w sekcji 6. W takich przypadkach wymagane jest potwierdzenie konkretnego użytkownika (Rys. 22).

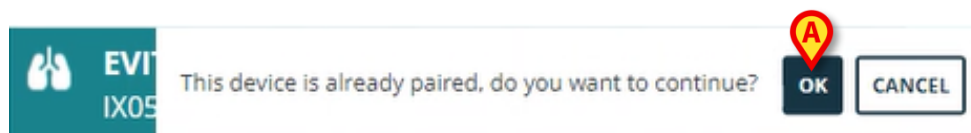

Rys. 22

- Kliknij przycisk **Ok**, aby powiązać urządzenie z aktualnie wybranym pacjentem (Rys. 22 A).

Urządzenie zostaje w ten sposób odłączone od poprzedniego pacjenta i powiązane z aktualnie wybranym.

7. Wyszukiwanie kodów kreskowych i wybór


Możliwe jest wybranie urządzenia po wyszukaniu kodu kreskowego. Aby włączyć wybór kodu kreskowego, w oknie „Szukaj urządzenia”:

- Kliknij obszar widoczny w Rys. 23 **A**.



Rys. 23


Kamera na stanowisku roboczym zostaje aktywowana (Rys. 24 **A**).

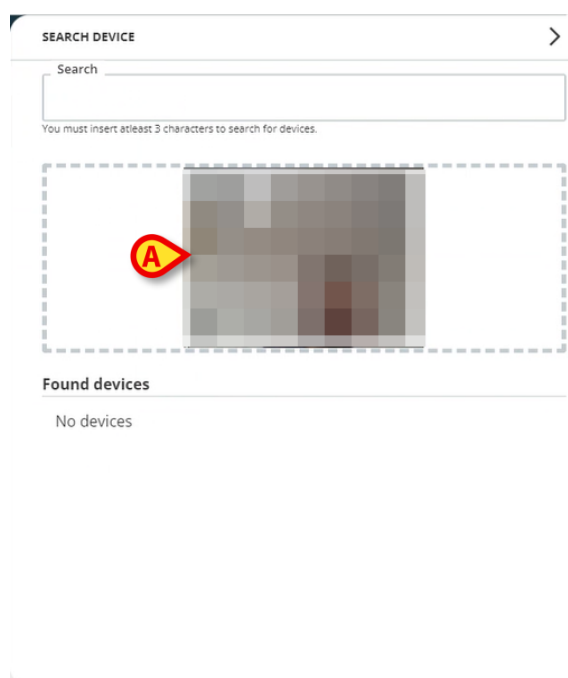

Rys. 24

- Zeskanuj kod kreskowy odpowiedniego urządzenia.

Dane urządzenia wyświetlane są w obszarze „Znalezione urządzenia” w oknie „Szukaj urządzenia” (Rys. 25 **A**).

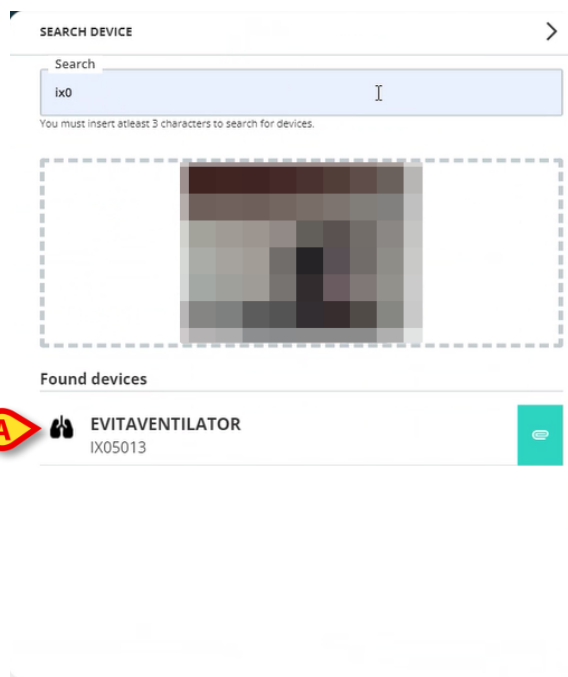


Rys. 25

- Kontynuuj procedurę powiązania zgodnie z opisem w sekcji 6.

Kamerą domyślnie aktywowaną jest kamera tylna. „Identity Web” można skonfigurować tak, aby umożliwiała przełączanie kamer. W takim przypadku

należy użyć dedykowanego przycisku -  - wyświetla się w obszarze „Czytnik kodów kreskowych” w oknie „Szukaj urządzenia” (Rys. 26 **A**). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej funkcji, należy skontaktować się z administratorami systemu.

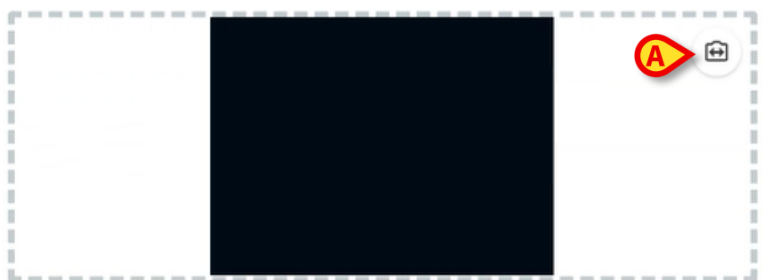

Rys. 26



Można skonfigurować System Option umożliwiającą śledzenie wybranych urządzeń za pomocą kodu kreskowego poprzez dodanie prefiksu i sufiksu do numeru seryjnego urządzenia. Prefiks i sufiks nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika.
