



# **Collect Mobile Användarmanual**

**Version 3.0**

**2023-11-15**

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale  
Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italien  
Tfn (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

# Innehåll

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1. "Collect"</b> .....                     | <b>3</b> |
| 1.1 Introduktion .....                        | 3        |
| 1.2 Uppstart av applikation .....             | 3        |
| 1.3 Huvudsida.....                            | 4        |
| 1.3.1 Patientlista.....                       | 4        |
| 1.3.2 Patientsida från Patientlista .....     | 5        |
| 1.3.3 Patientsida från Patientval .....       | 5        |
| 1.4 Patientsida .....                         | 6        |
| 1.4.1 Starta en ny datainsamling .....        | 7        |
| 1.4.2 Stoppar en pågående datainsamling ..... | 9        |
| 1.4.3 Visa senaste förvärvade data .....      | 9        |

# 1. "Collect"



För information om produktens miljö, försiktighetsåtgärder, varningar och avsedd användning se USR SWE Digistat Care och/eller USR SWE Digistat Docs (beroende på installerade moduler - för Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (för Digistat Suite NA). Du måste läsa de lämpliga underlagen noga och förstå dem för att kunna använda Collect Mobile säkert och på rätt sätt, enligt denna bruksanvisning.



Vänligen observera att "Collect"-modulens egenskaper och funktioner är fullt tillgängliga eftersom användaren är inloggad. Ett popup-meddelande informerar användaren med återkomst till programmet om denne inte tidigare loggat in.

## 1.1 Introduktion

Med "Collect"-modulen kan användaren förvärva data från enheter som är associerade med patienten (även tillfälligt) med valbara upprepningar och varaktigheter.

Collect-modulen hanterar data från patienter, även om de inte är på vårdplatsen, med tider för förvärv och upprepning helt anpassade.

## 1.2 Uppstart av applikation

För att starta "Collect"-modulen:

- Tryck på motsvarande rad på den handhållna enhetens skärm (Fig 1).

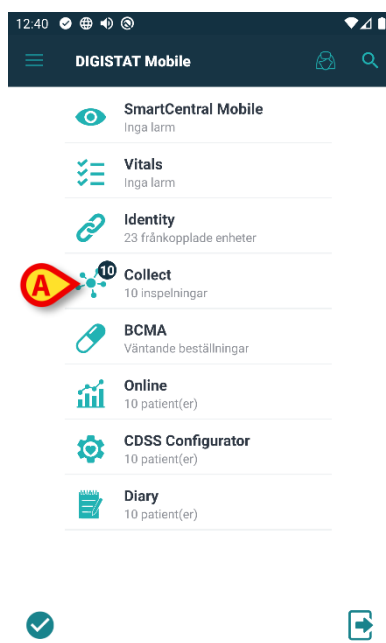


Fig 1

Numret för pågående datainsamling visas i en cirkel ovanför applikationsikonen (Fig 1 A)

När du har tryckt på modulikonen öppnas huvudsidan för "Collect" (Fig 2):



Fig 2

## 1.3 Huvudsida

Huvudsidan för "Collect" visar skärmen med patientlistan (Fig 2). En sådan skärm visar listan över patienter på vårdplatser som hör till den handhållna enhetens domän, och dessutom visas de patienter för vilka en datainsamling för närvarande pågår.

När en datainsamling pågår visas typen av datainsamling för användaren. Faktiskt definieras tre typer av datainsamling:

- Kontinuerlig, vars ikon är .
- Start och Stopp, vars ikon är .
- Blandad (d.v.s. Start och Stopp åsidosätter tillfälligt en Kontinuerlig insamling), vars ikon är .

### 1.3.1 Patientlista

Varje patient representeras av en ruta (Fig 3).

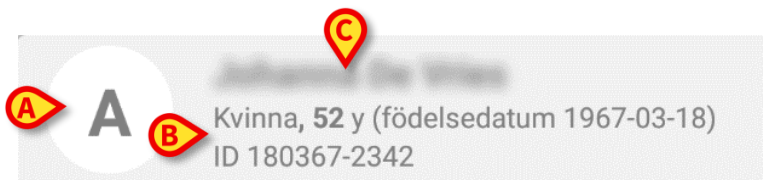


Fig 3

I rutan visas följande information:

- Vårdplatsnummer (om tillgängligt - Fig 3 **A**);
- Patientdata (kön, ålder, födelsedatum, patient-ID - Fig 3 **B**).
- Namn på patienten på den vårdplatsen (Fig 3 **C**);

Rutan som relaterar till en patient med pågående datainsamling har annan färg (Fig 4):

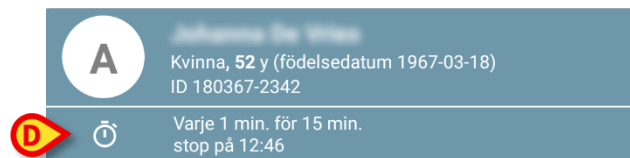


Fig 4

Om data samlas in läggs en rad till som visar insamlingstyp, varaktighet och upprepningstider (Fig 4 D).

### 1.3.2 Patientsida från Patientlista

För att få åtkomst till Patientsida:

- Tryck på en ruta i Patientlistan.

En sådan sida visar listan över enheter som kan samla in data från den valda patienten (Fig 7).

### 1.3.3 Patientsida från Patientval

Applikationen "Collect" hanterar datainsamling även för patienter som inte ingår i den handhållna enhetens domän. Detta kan göras genom att söka och välja patienten innan själva applikationen öppnas. En detaljerad beskrivning av proceduren kan läsas i "Användarmanualen för Mobil Launcher".

- På huvudskärmen för Mobile Launcher söker du efter önskad patient genom att trycka på sökikonen (Fig 5 A):



Fig 5

- Sök efter önskad patient genom textsökning eller med streckkod (Fig 6);

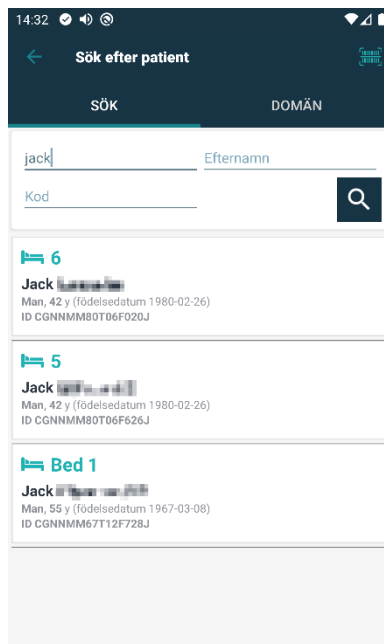


Fig 6

- Välj önskad patient. Efter användarbekräftelsen visas Mobilapplikationens huvudsida (Fig 7):

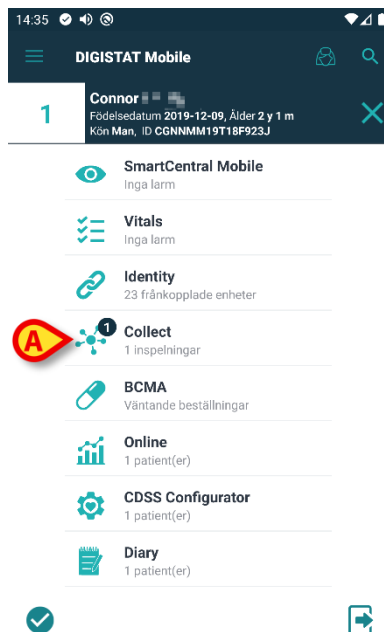


Fig 7

- Tryck på raden som motsvarar applikationen "Collect" på den handhållna enhetens skärm (Fig 7)

Patientsidan visas (Fig 8).

## 1.4 Patientsida

Patientsidan utgörs av två områden: ett rubrikområde (Fig 8 **A**) och listan över enheter som är anslutna till själva patienten (Fig 8 **B**):

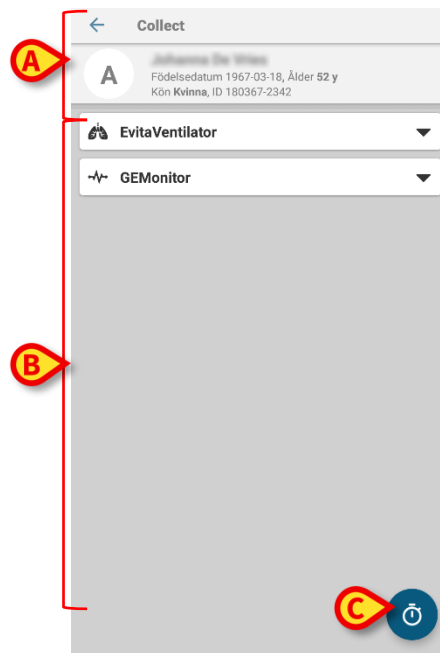


Fig 8

Rubrikområdet visar samma information om plattan som är relaterad till den behandlade patienten på skärmen för Patientlistan (se Avsnitt 1.3.1). Enhetslistan visar alla enheter som kan hämta data från patienten.

### 1.4.1 Starta en ny datainsamling

Så här startar du en ny datainsamling:

- Tryck på ikonen  på Patientsidan (Fig 8 C):

Följande dialogruta visas, så att användaren kan välja varaktighet och intervall (d.v.s. repetitionstid) för datainsamling (Fig 9):

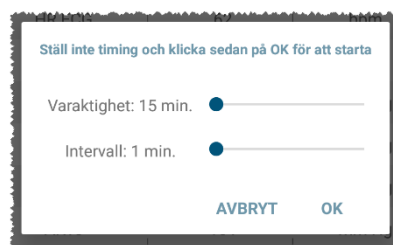


Fig 9

- Välj önskad varaktighet och tidsintervall och tryck sedan på **OK**.

Patientsidan kommer att visas, något ändrad enligt följande (Fig 10):



**Fig 10**

En rad läggs nu till som visar tider för varaktighet och repetition gällande den pågående datainsamlingen (Fig 10 **A**). Dessutom ersätts ikonen som påbörjar datainsamlingen av den som låter stoppa den (  - Fig 10 **C**).

Som tidigare observerats har, sedan en datainsamling startat, rutan relaterad till den behandlade patienten på skärmen för Patientlistan dessutom en annan färg (Fig 11):



**Fig 11**



## 1.4.2 Stoppar en pågående datainsamling

Så här stoppar du en pågående datainsamling:

- Tryck på ikonen  på Patientsidan (Fig 10 C):

Följande dialogruta visas, vilken begär bekräftelse från användaren (Fig 9):

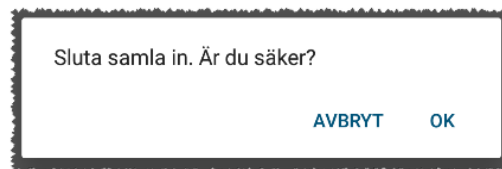


Fig 12

## 1.4.3 Visa senaste förvärvade data

Oavsett om en datainsamling är pågående eller inte, gör du så här för att visa de senaste förvärvade data:

- Tryck på rutan relaterad till en ansluten enhet (Fig 13):

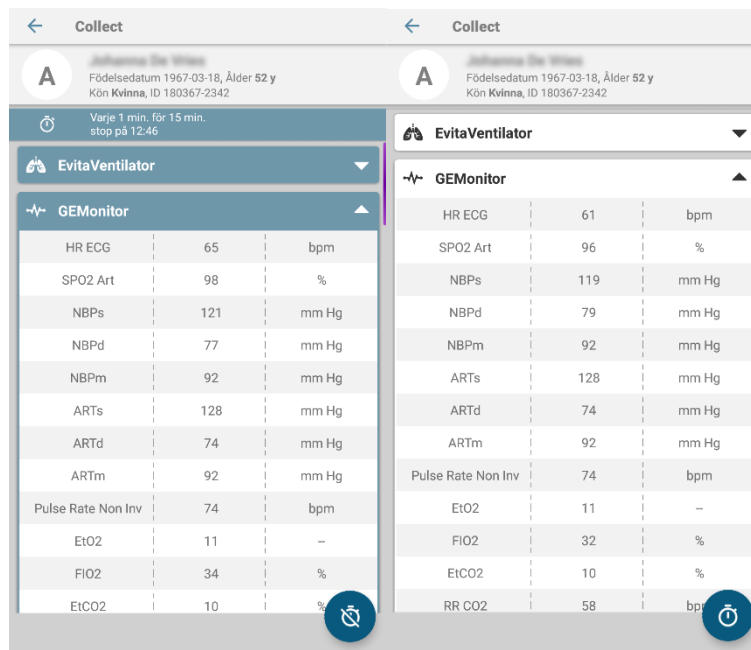


Fig 13