



On Line Mobile Användarhandbok

Version 4.0

2023-10-17

Innehåll

On Line Mobile	3
1. Inledning.....	3
2. Visualisering av data.....	3
3. Datainsamling	3
4. Starta On Line Mobile	4
5. Sida Patientlista	5
6. Skärm Sidolista	6
7. Sidor Online.....	7
7.1. Diagram.....	7
7.1.1. Diagram beskrivning.....	8
7.1.2. Styrfältet	10
7.2. Rutnät.....	11
7.2.1. Rutnätsbeskrivning.....	12
7.2.2. Styrfältet	13
7.3. Mikrobiologi	14
7.3.1. Rubrik.....	15
7.3.2. Filter.....	15
7.3.3. Datarutnät	16
7.4. Laboratorium.....	17
7.4.1. Laboratorium - Datarutnät	18

On Line Mobile



För information om produktens miljö, försiktighetsåtgärder, varningar och avsedd användning se USR SWE Digistat Care och/eller USR SWE Digistat Docs (beroende på installerade moduler - för Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (för Digistat Suite NA). Du måste läsa de lämpliga underlagen noga och förstå dem för att kunna använda On Line Mobile säkert och på rätt sätt, enligt denna bruksanvisning.



On Line Mobile-modulens egenskaper och funktioner är fullt tillgängliga så fort användaren har loggat in. Användare som försöker öppna appen får ett popup-meddelande om att inloggning krävs.

1. Inledning

On Line Mobile är en app som visar mottagna data från de medicinska enheter som finns anslutna till patienten (t.ex. styrenhet, fläkt, laboratorier o.s.v.). Användaren kan spara och bekräfta insamlad rådata för att sammanställa en noggrann och läsbar användardokumentation.

Appen kan också konfigureras för att ansluta sig till andra Digistat®-moduler och visa deras data (t.ex. Digistat® Diary och Digistat® Connect).

2. Visualisering av data

Data kan visas i diagramform. Användaren har stor frihet att välja hur han vill se data. Kontakta systemadministratörerna för att utforska möjligheterna. I handboken visar bilder på ett konfigureringsexempel.

3. Datainsamling

Antingen erhålls data automatiskt eller så anges de för hand av användarna.

Automatisk datainsamling sker för värden som mottas över gränssnitt till medicinsk utrustning (fläktar, patientövervakning o.s.v.) eller av laboratorier (undersökningsresultat o.s.v.).

Användarna kan även kontrollera och validera data manuellt, radera artefakter, motverka redundans och infoga värden om den automatiska insamlingen av någon anledning skulle vara ofullständig.

4. Starta On Line Mobile

Så här startar du modul On Line Mobile:

- Tryck på motsvarande rad på den handhållna medicinska utrustningens skärm (Bild 1).

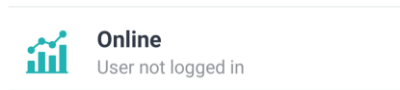


Bild 1

Då öppnas sida On Line Mobile Patient List (Bild 2):

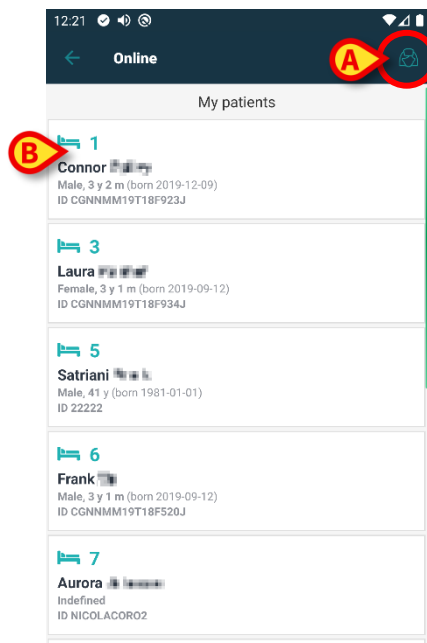


Bild 2

För att använda On Line Mobile måste du välja en patient. Om ingen patient finns vald så påminner en tom skärm om att "Denna modul kräver en patient". Se avsnitt 5.

5. Sida Patientlista

På sidan On Line Mobile Patientlista (Bild 2) visas listan över patienter som ingår i listan "MyPatients". Läs *USR SWE Mobile Launcher* för mer information om listan "MyPatients".

- Tryck på knapp "MyPatients" (Bild 2 **A**) för att hantera listan "MyPatients".

Varje patient representeras av en bricka (Bild 3).



Bild 3

På brickan anges följande anpassningsbara information (kan skräddarsys):

- Sängnummer (om tillgängligt - Bild 3 **A**);
 - Patientdata (kön, ålder, födelsedatum, patient-ID - Bild 3 **B**);
 - Namn på patienten i sängen (Bild 3 **C**).
- Tryck på patientbrickan (t.ex. Bild 2 **B**) för att få tillgång till skärm Sidolista och ta hand om motsvarande On Line-sidor. Se avsnitt 6.

6. Skärm Sidolista

Skärm Sidolista visar alla On Line Mobile-sidor. På varje sida finner du diagram över tillgängliga för vald patient.

För en given patient kan du konfigurera olika On Line Mobile-sidor, där varje sida tar särskild hänsyn till en parametergrupp. Vid konfigureringen förknippar du de olika sidorna med bilder, som symboliserar sidans data.



Kontakta systemadministratörerna för att veta mer om konfigureringsmöjligheterna.

Skärm Sidolista har två fält: ett rubrikfält som visar patientens huvuddata (Bild 4 **A**) och listan på On Line-sidor som konfigurerats för patienten (Bild 4 **B**).

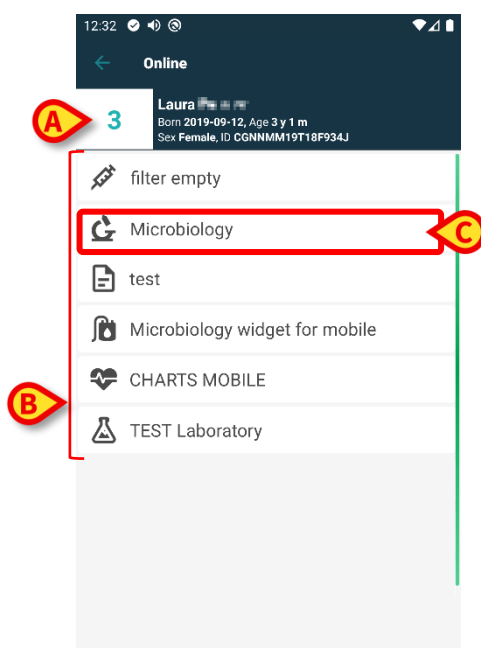


Bild 4

Rubrikfältet (Bild 4 **A**) visar samma information som patientbrickan på skärm Patientlista (se avsnitt 5).

- Tryck på raden som motsvarar önskad On Line-sida (t.ex. Bild 4 **C**) för att öppna den (Bild 5). Läs avsnitt 7.

7. Sidor Online

Det finns fyra möjliga sidtyper:

- 1 - "Diagram" visar data från de konfigurerade patientenheterna i diagram.
- 2 - "Rutnät" visar data från de konfigurerade patientenheterna i rutnät.
- 2 – "Mikrobiologi" visar data från mikrobiologilaboratoriet med rutnät.
- 3 - "Laboratorium" visar laboratoriedata med rutnät.

7.1. Diagram

En diagramsida (Bild 5) visar tillgängliga data för vald patient i diagramform.



Bild 5

- Sängnummer och patientnamn visa överst (Bild 5 **A**).
- Diagrammen visas mitt på sidan (Bild 5 **B**). Diagrammen beskrivs i avsnitt 7.1.1.
- Med det nedre navigationsfältet (Bild 5 **C**) kan du navigera fram och tillbaka i tiden i diagrammen. Navigationsfältet beskrivs i avsnitt 7.1.2.
- Med  i Bild 5 **E** kan du dela tillgängliga uppgifter. Så här gör du:

- Klicka på . Då öppnas detta fönster (Bild 6):

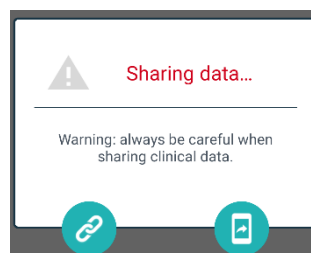


Bild 6

Knapp  kopierar länken till gällande sida på Digistat Mobile till skrivplattan och därefter kan den delas med apparna i den handhållna enheten.

Med knapp  kan du dela en skärmdump av gällande sida.



Funktion "Dela" aktiverar du beroende på konfiguration. Kontakta systemadministratörerna för att få veta mera om konfigureringsmöjligheterna.

- Tryck på knapp **Tillbaka** (Bild 5 **E**) för att gå tillbaka till skärm Sidolista (Bild 4).

Om inga diagram finns konfigurerade för gällande patient visas ett meddelande.

När klockslaget växlar från standardtid till sommartid och vice versa varnas användaren med ett meddelande.

7.1.1. Diagram beskrivning

De konfigurerade parametrarnas trend visas i Diagram (Bild 7).

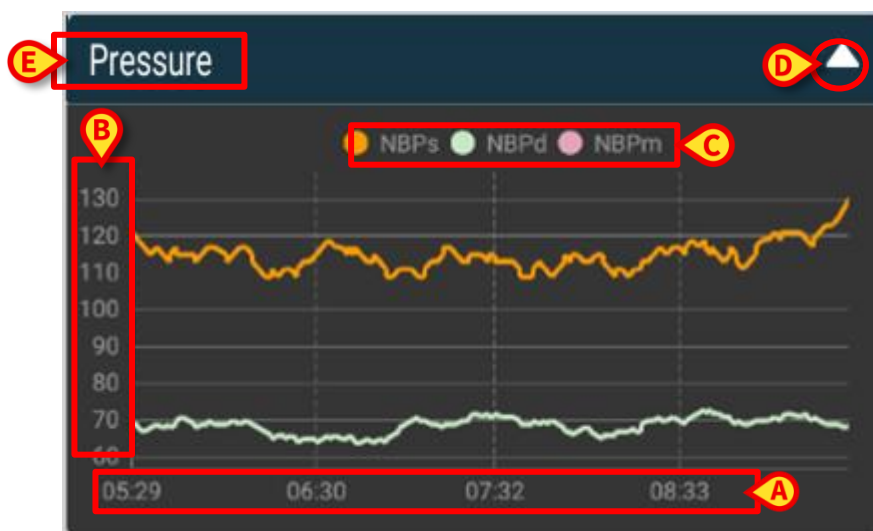


Bild 7

Diagrammets namn står överst (Bild 7 **E**).

Den vågräta axeln (Bild 7 **A**) anger tiden.

De lodräta axlarna (Bild 7 **B**) anger värdet för visad parameter. Du kan använda två skalor, den ena till vänster, den andra till höger.

De visade parametrarnas namn anges ovanför diagrammet (Bild 7 **C**). Bokstävernas har samma färg som parameterns trend i diagrammet.

- Tryck på diagrammet för att visa den angivna positionens värden dynamiskt. Följande popup-fönster öppnas (Bild 8).

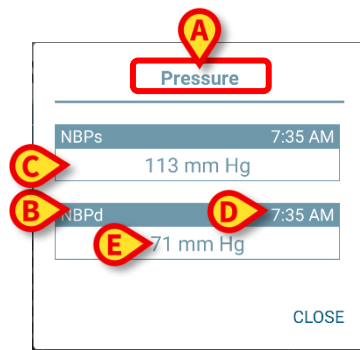


Bild 8

Popup-fönstrets rubrik (Bild 8 A) är densamma som diagrammets.

För varje parameter visas en ruta (Bild 8 B), som rapporterar parameterns namn (Bild 8 C), tid för mätningen (Bild 8 D) och parameterns värde (Bild 8 E). Måttenheten anges bredvid varje parameters värde.

- Tryck på knapp **Stäng** för att stänga detta popup-fönster.
- Tryck på diagrammet och dra det åt vänster eller höger för att skapa ett lodrätt pekstreck (Bild 9 A).

De värden som mottas samtidigt framhävs på sidans övriga diagram. Ett meddelande längst ned (Bild 9 B) visar de närmaste värdena för vald tid enligt ett konfigurerat intervall.

- Tryck på knapp **Stäng** (Bild 9 C) för att stänga meddelandefönstret.
- Tryck på knapp **Info** (Bild 9 D) för att öppna popup-fönstret med information om parametrarna (Bild 8).



Bild 9

- Tryck på knapp **Uppåt** (Bild 7 D) för att dölja diagrammet.



Se *CFG SWE On Line Validation* för att anpassa diagrammens text och färger i modul On Line Mobile.

Välj tema

När du konfigurerar On Line Mobile-diagram kan du välja ett annat tema (vit bakgrund) (se Bild 10 nedan). Kontakta systemadministratörerna om du vill aktivera detta.

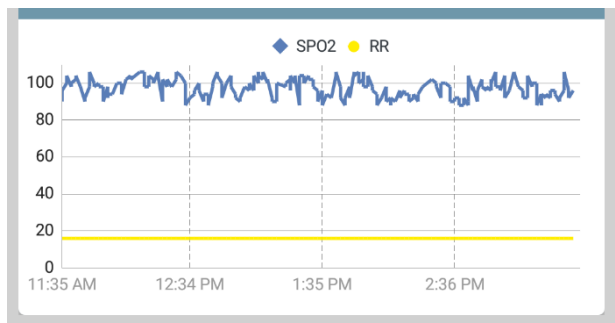


Bild 10

7.1.2. Styrfältet

I styrfältet för On Line Mobile (Bild 11) finner du verktyg för att navigera i diagrammen.

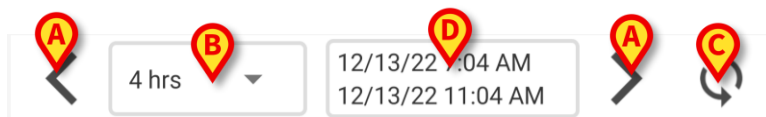


Bild 11

- Använd pilknapparna (Bild 11 **A**) för att rulla skärmens innehåll åt vänster eller höger.
- I intervallmenyn (Bild 11 **B**) väljer du den tidsperiod som skall visas. Så här ser Intervallmenyn ut:

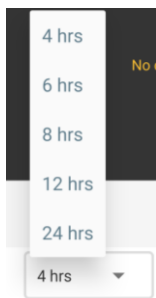


Bild 12

- Tryck på knapp **Ladda om nu** (Bild 11 **C**) för att ladda om skärminnehållet.

Rutan för tidsintervall (Bild 11 **D**) anger vilket tidsintervall du ser i diagrammet.

7.2. Rutnät

En "Rutnät"-sida (Bild 13) visar tillgängliga data för den valda patienten i ett rutnät.

Online

5 Ellen Patient 5

Grid Mobile RAW

Current filter: (Hide empty rows)

	4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTe mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPp mmHg		117	117

8 hrs 7/20/23 8:50 PM 7/21/23 4:50 AM

Bild 13

- Sängnummer och patientnamn visa överst (Bild 13 A).
- Rutnäten visas i sidkroppen (Bild 13 B - Rutnäten beskrivs i avsnitt 7.1.1).
- En nedre navigeringsfält (Bild 13 C) gör det möjligt att flytta rutnäten fram och tillbaka i tiden. Navigationsfältet beskrivs i avsnitt 7.1.2.
- Med  i Bild 13 E kan du dela tillgängliga uppgifter. Så här gör du:

- Klicka på . Då öppnas detta fönster (Bild 14):

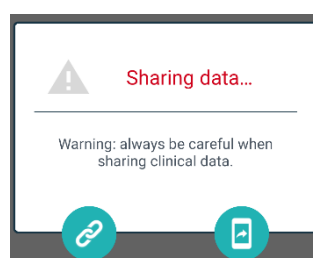


Bild 14

Knapp  kopierar länken till gällande sida på Digistat Mobile till skrivplattan och därefter kan den delas med apparna i den handhållna enheten.

Med knapp  kan du dela en skärmdump av gällande sida.



Funktion "Dela" aktiverar du beroende på konfiguration. Kontakta systemadministratörerna för att få veta mera om konfigureringsmöjligheterna.

- Tryck på  ikon (Bild 13 F) för att filtrera innehållet på skärmen. Se avsnitt 7.3.2 för filterbeskrivningen.

- Tryck på knapp **Tillbaka** (Bild 13 **E**) för att gå tillbaka till skärm Sidolista (Bild 4).

Ett meddelande informerar användaren om det inte finns några rutnät som är konfigurerade för den valda patienten.

När klockslaget växlar från standardtid till sommartid och vice versa varnas användaren med ett meddelande.

7.2.1. Rutnätsbeskrivning

Värdena för de konfigurerade parametrarna visas i rutnät (Bild 15).

Current filter: (Hide empty rows)

GRID			
	4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTe mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPs mmHg		117	117

Bild 15

Rutnätets namn står överst (Bild 15 **A**). Den första kolumnen visar namnet på parametrarna (Bild 16 **A**) och, på samma rad, motsvarande måttenhet (Bild 16 **B**).

	4:48 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45
MON	
HR ECG bpm	69
NBPd mmHg	

Bild 16

Följande kolumner motsvarar hämtningen av en uppsättning parametrar. Hämtningshastigheten är vanligtvis en minut (konfigurerbar). Datumet och tiden då datauppsättningen hämtas visas överst i kolumnen (Bild 17 **A**). Därför innehåller varje kolumn värdena för alla parametrar som hämtats vid en viss tidpunkt.

C Current filter: (Hide empty rows)

GRID			
	A 4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
B HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTc mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPs mmHg		117	117

Bild 17

Värdena för en parameter kan avläsas på motsvarande rad. Därför visar varje rad parameterändringarna i tid. I Bild 17 **B**, till exempel, är HR-EKG-värdena inringade.

Under konfigurationen kan parametrar grupperas för att underlätta avläsningen. Namnen på grupperna kan läsas på rader med olika färger (Bild 18 **A** - i exemplet här som visas är MON för Monitor, VEN är för Ventilator).

A	MON			
	HR ECG bpm	69	67	70
	NBPd mmHg		77	77
	NBPm UNIT		90	90
A	VEN			
	VTc mL	343	370	385
	MVe L/min	4.3	4.4	4.3
	NBPs mmHg		117	117

Bild 18

Om ett filter är aktivt indikerar texten bredvid  ikonen det aktuella filtret (Bild 17 **C**).

7.2.2. Styrfältet

I Navigationsfältet längst ner (Bild 19) innehåller verktyg som gör det möjligt att navigera i rutnäten.

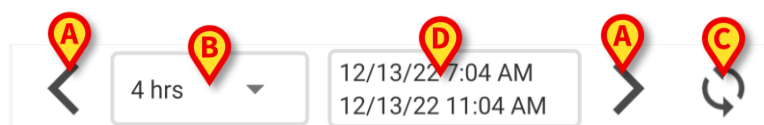


Bild 19

- Använd pilknapparna (Bild 11 **A**) för att rulla skärmens innehåll åt vänster eller höger.
- I intervallmenyn (Bild 11 **B**) väljer du den tidsperiod som skall visas. Så här ser Intervallmenyn ut:

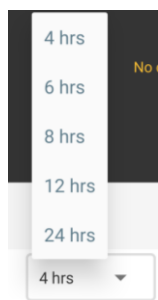


Bild 20

- Tryck på knapp **Ladda om nu** (Bild 11 C) för att ladda om skärminnehållet.

Tidsintervallsrutan (Bild 19 D) indikerar det tidsintervall som för närvarande visas på rutnätet.

7.3. Mikrobiologi

De mikrobiologiska uppgifterna visas på särskilda sidor. Bild 21 ger ett exempel.

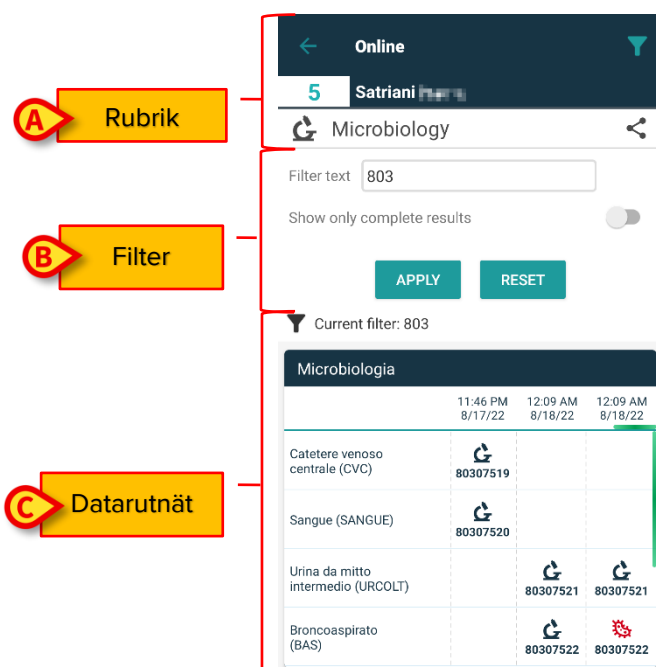


Bild 21

Sidan är uppdelad i tre områden:

- Rubrik, beskrivs i avsnitt 7.3.1.
- Filter, beskrivs i avsnitt 7.3.2. Klicka på  för att visa filterområdet (Bild 22 D). Använd återställningsknappen **Reset** för att dölja det (Bild 24 D).
- Datarutnät, beskrivs i avsnitt 7.3.3.

7.3.1. Rubrik

Bild 22 visar rubrikområdet.

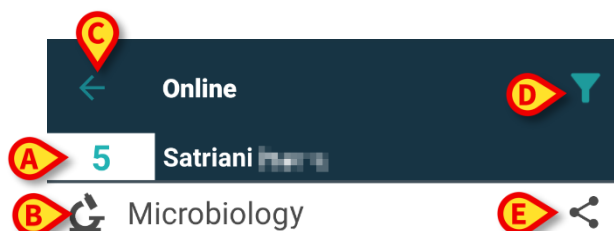


Bild 22

Sängnummer och patientnamn anges överst (Bild 22 **A**).

Sidans namn anges i Bild 22 **B**.

Med tillbakaknappen **Back** (Bild 22 **C**) kan du återvända till listan med sidotyper (Bild 4).

Klicka på  (Bild 22 **D**) för att visa filterområdet.

Med knapp  i Bild 22 **E** kan du dela tillgängliga uppgifter.

Så här gör du:

- Klicka på . Då öppnas följande fönster (Bild 23):

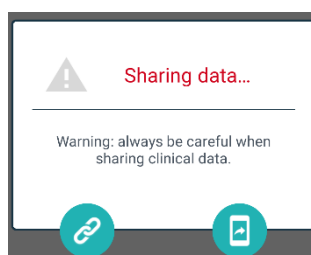


Bild 23

Knapp  kopierar länken till gällande sida på Digistat Mobile till skrivplattan och därefter kan den delas med apparna i den handhållna enheten.

Med knapp  kan du dela en skärmdump av gällande sida.



Funktion "Dela" aktiverar du beroende på konfiguration. Kontakta systemadministratörerna för att få veta mera om konfigureringsmöjligheterna.

7.3.2. Filter

Klicka på  för att visa filterområdet (Bild 22 **D**). Använd återställningsknappen **Reset** för att dölja det (Bild 24 **D**). Bild 24 visar filterområdet.

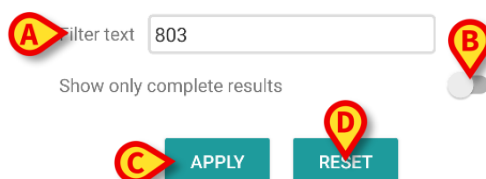


Bild 24

Det finns ett textfilter (Bild 24 **A**). Anger du en söksträng, så visas endast objekt vars namn innehåller samma sträng (t.ex. "803" på bilden).

Använder du knapp "Visa endast fullständiga resultat" så visar rutnätet endast de undersökningar som flaggats som fullbordade (Bild 24 **B**).



Datarutnätet visar även resultat med ofullständiga data, som gäller till pågående undersökningar. Vissa undersökningar behöver tid för att genomföras: då tillfogas resultaten allt eftersom de finns tillgängliga. Med knapp "Visa endast fullständiga resultat" så visar rutnätet endast fullbordade undersökningar.

Klicka på knapp **Apply** för att tillämpa filtret på rutnätets data. Klicka på knapp **Reset** för att återställa filtren och dölja filterområdet (Bild 24 **C - D**).

7.3.3. Datarutnät

Bild 25 visar dataområdet.



Current filter: 803

Microbiologia	11:46 PM 8/17/22	12:09 AM 8/18/22	12:09 AM 8/18/22
Catetere venoso centrale (CVC)	 80307520		
Sangue (SANGUE)		 80307521	 80307521
Urina da midto intermedio (URCOLT)		 80307522	 80307522

Bild 25

De mikrobiologiska uppgifterna visas i ett rutnät. Spalterna anger datum/tid för provinsamlingen. I raderna anges olika typer av undersökningar. T.ex avser rutan i Bild 25 **A** tillgängliga resultat för ett blodprov som togs kl. 23.46 den 17 augusti 2022.

Om två olika spalter har samma datum och tid så innehåller de olika uppdateringar av samma undersökning. Spalten längst till höger innehåller den senaste uppdateringen.

Använd knapp "Visa endast fullständiga resultat" i filterområdet för att endast visa fullbordade undersökningar i rutnätet (Bild 24 **B**).

Ikon  anger resultat som inte tyder på bakterier. Ikon  anger resultat som tyder på bakterier. Numret under ikonerna är gällande undersökningsreferens.

"Gällande filter" (Bild 25 **B**) betyder att de resultat som visas filtrerats (alltså att endast vissa tillgängliga resultat visas).

- Klicka på en ikon för att öppna ett fönster med utförliga resultat (Bild 26).

Sangue da vena periferica - 9:00 PM
10/9/22 (id:49117402)

EMOCOLTURA Aerobi

Exam id 491174
Observation Date 9:00 PM

Results

Text EMOCOLTURA
Aerobi-EMOCOLTURA
Aerobi-EMO

Value Positivo
Status C
Abnormal N
Code 1@937@1@937@1@EMO@

Microrganismi Identificati

Exam id 491174
Observation Date 9:00 PM

Results

Text Microrganismi Identificati-Micro
organism identified-EMO (1)

Value
Status

Bild 26

7.4. Laboratorium

Laboratoriedata visas på särskilda sidor. Bild 27 visar ett exempel.

A Rubrik

B Filter

C Datarutnät

Online

5 Occupied bed

Laboratory

Filter text

APPLY RESET

HISTORY LIST

EMOCROMO

	3:00 PM 9/18/22	5:00 PM 9/18/22	6:00 AM 9/19/22
EMOCROMO -Eosinofili %SI	0.1	0.9	0.1
EMOCROMO-Basofili %SI	0.1	0.1	0

SIERO

GLUCOSIO-GLUCOSI O-SIE	386		270
74 - 100			
FOSFATASI ALCALINA (ALP)-FO...			158

Bild 27

Sidan är uppdelad i tre områden:

- Rubrik, beskrivs i avsnitt 7.3.1.
- Filter, beskrivs i avsnitt 7.3.2. Klicka på  för att visa filterområdet (Bild 22 **D**). Använd återställningsknappen **Reset** för att dölja det (Bild 24 **D**).
- Datarutnät, beskrivs i avsnitt 7.4.1.

7.4.1. Laboratorium - Datarutnät

Laboratoriedata kan visas på två sätt (Bild 28 **A - B**):

- Historik (t.v.), beskrivs i avsnitt 7.4.1.1.
- Lista (t.h.), beskrivs i avsnitt 7.4.1.2.

Flik "Historik" visas som standard när du anger sidotyp Laboratorium.

- Klicka på flik Historik eller Lista för att växla till motsvarande.

HISTORY

LIST

EMOCROMO

	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
EMOCROMO-Mielocit i-SI	?	N V	N V

HISTORY

LIST

0 EMOCROMO
8/19/22 6:00 AM

PL.Citrato * T. Celeste*

PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG 0.8 - 1.2	0.91	?
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG 150 - 400	621	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG 70 - 120	63	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38	?
Sangue intero		
EMOCROMO-Neutrofil-SI 2 - 8	23.97	
EMOCROMO-L infociti-SI		

Bild 28

7.4.1.1. Datarutnät - Historik

Bild 29 visar läge "Historik".

HISTORY		LIST	
EMOCROMO			
	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
EMOCROMO-Mielocit i-SI	N V	N V	N V

Bild 29

Läge "Historik" ger en kronologisk översikt över alla tillgängliga resultat för gällande patient inom ett konfigurerat tidsintervall.

Varje spalt motsvarar en undersökning. Spalten i Bild 29 **A** anger t.ex. resultat som erhöles kl. 06.00 den 19 september 2022.

Varje rad avser ett objekt i undersökningen. Raden i Bild 29 **B** innehåller t.ex. alla Emocromo-Linfociti-resultat (räkning av antal lymfocyter i blodet). Under namnet på varje objekt i undersökningen anges värdeområde, när sådant finns tillgängligt (Bild 29 **C**).

Varje ruta visar alltså erhållt värde för ett visst objekt i undersökningen, med uppgift om datum och tid. Värde 0,8 i Bild 29 **D** anger t.ex. antal lymfocyter i blodet i samband med de resultat som erhöles kl. 06.00 den 19 september 2022.

De ljusblå raderna anger grupp rubrik för en grupp besläktade objekt. T.ex.: "Sangue intero" (helblod) som i Bild 29 **E**. Alla vita rader under en ljusblå rad tillhör samma grupp, vars namn visas överst på den ljusblå raden.



Gruppernas sammansättning anger du med konfigureringsverktyget Online Web. Kontakta systemadministratörerna för att få veta mera om konfigureringsmöjligheterna. Jfr CFG ENG Online Validation för ytterligare information.

Under "Historik" finns alla objekt förtecknade. Om ett objekt inte är relevant för en viss undersökning, så står motsvarande ruta tom.

- Klicka på en ruta för att fler detaljer kring ett värde (jfr exempel i Bild 30):

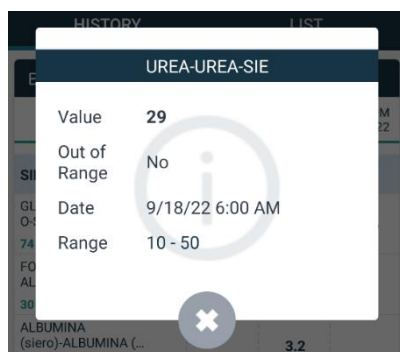


Bild 30

7.4.1.2. Datarutnät - Lista

Bild 31 visar läge "Lista".

HISTORY		LIST
EMOCROMO		
8/19/2022 6:00 AM		
PL.Citrato * T. Celeste*		
PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG	0.91	
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG	621	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG	63	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38	?
Sangue intero		
EMOCROMO-Neutrofili-SI	23.97	
EMOCROMO-Linfociti-SI		

Bild 31

Läge "Lista" visar en undersökning i taget.

Namn och tid för undersökningen visas överst (Bild 31 **A**).

Varje rad i tabellen visar ett undersökningsobjekt (Bild 31 **B**).

Under namnet på varje undersökningsobjekt anges värdeområdet, om sådant finns tillgängligt (Bild 31 **C**).

De ljusblå raderna anger grupprubrik för en grupp besläktade objekt. T.ex.: "Sangue intero" (helblod) som i Bild 31 **D**. Alla vita rader under en ljusblå rad tillhör samma grupp, vars namn visas överst på den ljusblå raden.



Gruppernas sammansättning anger du med konfigureringsverktyget Online Web. Kontakta systemadministratörerna för att få veta mera om konfigureringsmöjligheterna. Jfr CFG ENG Online Validation för ytterligare information.

Den ljusblå spalten anger erhållna värden för undersökningsobjekten i Bild 31 **E**. Alla värden hänvisar till objektet på samma rad.

Spalten i Bild 31 **F** visar måttenhet, om sådan finns tillgänglig.

När sidan väljs visas det senaste resultatet som standard.

- I läge "Lista" kan du rulla åt vänster och höger för att se föregående eller följande undersökning.
- Klicka på en ruta för att fler detaljer kring ett värde (jfr exempel i Bild 32):

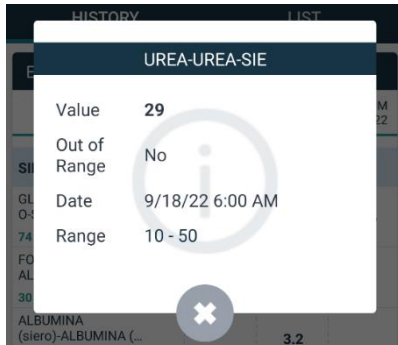


Bild 32