



Identity Web Kullanım kılavuzu

Sürüm 0.5

4/22/2025

İçerik

Identity Web	3
1. Giriş	3
2. Hasta seçimi	3
3. "Identity Web" alt modülünün seçimi	4
4. İlişkili cihazların listesi	5
5. İlişkilendirilmeyi kesme prosedürü	6
6. Arama ve ilişkilendirme prosedürü	8
6.1. Aramadan sonra ilişkilendirilmeyi kesme	10
6.2. Zaten eşleştirilmiş cihazlar	11
7. Barkod arama ve seçme	12

Identity Web



Ürün ortamı, önlemler, uyarılar ve kullanım amacı hakkında bilgi için USR TUR Digistat Care ve/veya USR TUR Digistat Docs (kurulu modüllere bağlı olarak - Digistat Suite EU için) veya USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA için) bölümüne bakın. Bu belgede açıklanan "Identity Web" in doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması için uygun belgenin bilinmesi ve anlaşılması zorunludur.

1. Giriş



Identity Web, Control Bar Web'in belirli bir Sağlık Kuruluşunda kullanılan yapılandırmaya bağlı olarak etkinleştirilebilen veya etkinleştirilemeyen bir alt modüldür. Daha fazla bilgi için sistem yöneticilerine başvurun.

"Identity Web", tıbbi cihazların Digistat Web ortamı bağlamında hastalarla hızlı bir şekilde ilişkilendirilmesine / ilişkilendirilmenin kesilmesine olanak tanır.




Yapılandırılan cihazların yalnızca bir alt kümesi hızlı ilişkilendirme / ilişkilendirilmeyi kesme prosedürü için uygundur. Bu prosedür genellikle bir hastadan diğerine taşınan wi-fi cihazları için geçerlidir. Her durumda, cihazı burada açıklanan prosedür için uygun kılan veya olmayan cihazın özellikleri, kullanım şekli ve yapılandırmasıdır.

2. Hasta seçimi

"Identity Web" ancak hasta seçiminden sonra başlatılabilir. Hasta seçmek için,

- Şekil 1A bölümünde gösterilen **Hasta Seç** düğmesine tıklayın.

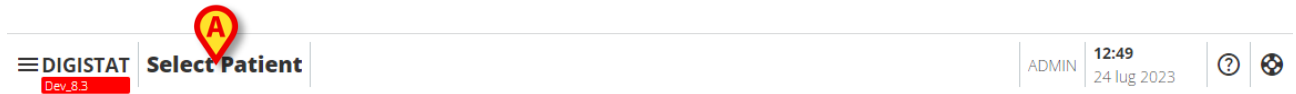

Şekil 1

Patient Explorer Web modülü açılır. Hasta yönetimi işlevleri hakkında daha fazla talimat için Digistat® Patient Explorer Web kullanım kılavuzuna (USR TUR Patient Explorer Web) bakın.



Yapılandırmaya bağlı olarak Patient Explorer Web yerine hasta seçimi için başka modüller de yapılandırılabilir. Bu durumda, talimatlar için özel belgelere bakın.

Bir hasta seçildiğinde, hastanın adı ve ana verileri **Hasta** düğmesinde (Şekil 2 A) görüntülenir.



Şekil 2

3. "Identity Web" alt modülünün seçimi

"Identity Web" mevcutsa,  hasta düğmesi (Şekil 3 A) üzerinde simge görüntülenir.




Şekil 3

Identity Web'i başlatmak için:

-  simgesine tıklayın.


Ek hasta verilerini ve Kontrol Çubuğunda (Şekil 4) başlatılabilecek mevcut uygulamaları içeren bir açılır pencere görüntülenir.

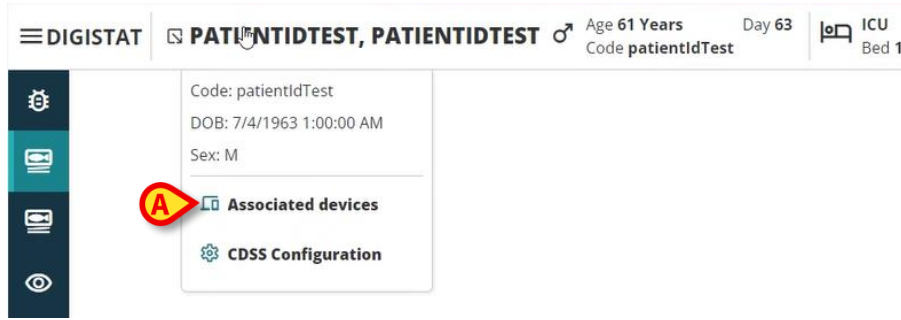

Şekil 4

- "İlişkili Cihazlar" (Şekil 4 A) üzerine tıklayın.

Şu anda seçili olan hastayla ilişkili cihazları listeleyen aşağıdaki pencere görüntülenir (Şekil 5).

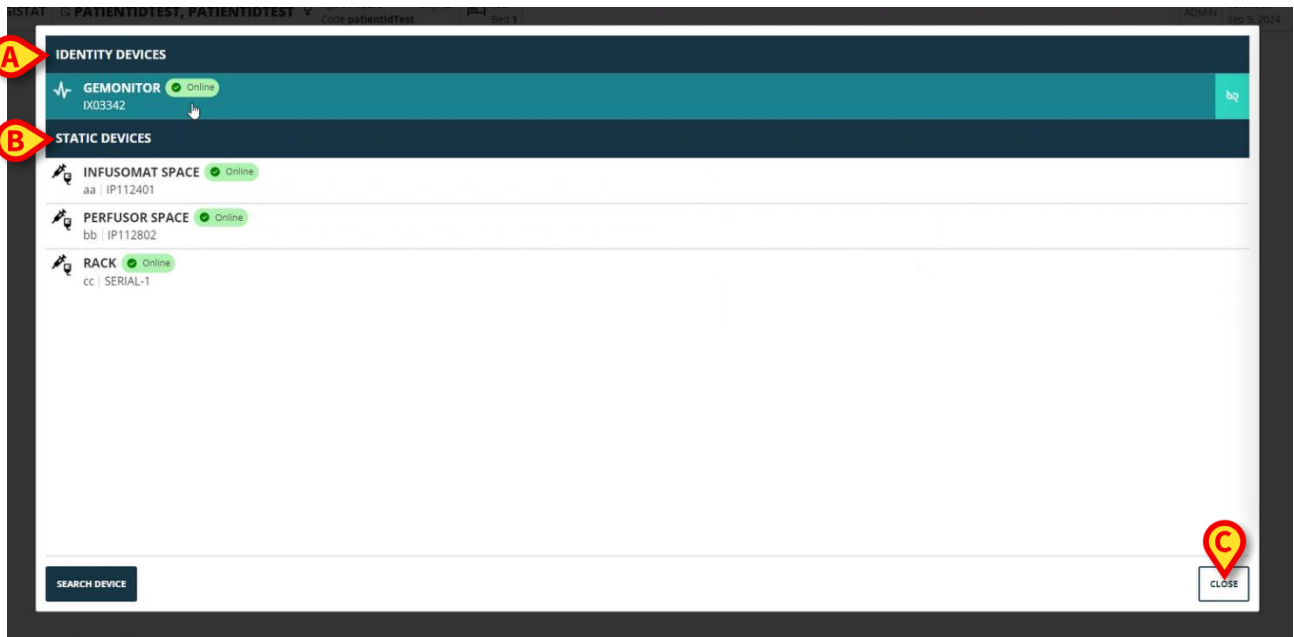

Şekil 5

4. İlişkili cihazların listesi

"İlişkilendirilmiş Cihazlar listesi" penceresi (Şekil 5) iki bölüme ayrılmıştır:

Identity Cihazları bölümü (Şekil 5 **A**), seçili hastayla ilişkili olan taşınabilir aygıtları listeler.

Statik Cihazlar bölümü (Şekil 5 **B**), seçilen yatağa bağlı olan ve taşınamayan cihazları listeler.

"Identity Web" yalnızca **Identity Cihazlarında** çalışır.

Penceredeki her satır bir cihaza karşılık gelir (Şekil 6bkz. , örneğin).



Şekil 6

Her cihaz için aşağıdaki bilgiler görüntülenir:



Şekil 7

- Cihaz türünü karakterize eden bir simge (Şekil 7 **A**)
- Cihazın adı (Şekil 7 **B**).
- Cihaz durumunun göstergesi (Şekil 7 **C** - Çevrim içi veya Çevrim dışı).
- Ek bilgi sağlamak için yapılandırma sırasında cihazla ilişkilendirilebilen bir etiket (Şekil 7 **D**)
- Cihazı benzersiz bir şekilde tanımlayan cihaz seri numarası (Şekil 7 **E**).

İlişkili cihazların listesini kapatmak için:


- Şekil 5 **C** bölümünde gösterilen **Kapat** düğmesine tıklayın.

Bağlı her cihaz için, belirli bir cihaz tarafından elde edilen parametreleri, değerleri ve ölçü birimleriyle birlikte listeleyen bir pencere görüntülemek mümkündür. Bunu yapmak için:

- Cihaza karşılık gelen satırı tıklayın (Şekil 8 **A**).

Şekil 8 **B** bölümünde gösterilen pencere görüntülenir.

Bu pencere, cihaz tarafından alınan parametreleri listeler ve adlarını, en son değerlerini ve ölçü birimlerini gösterir.

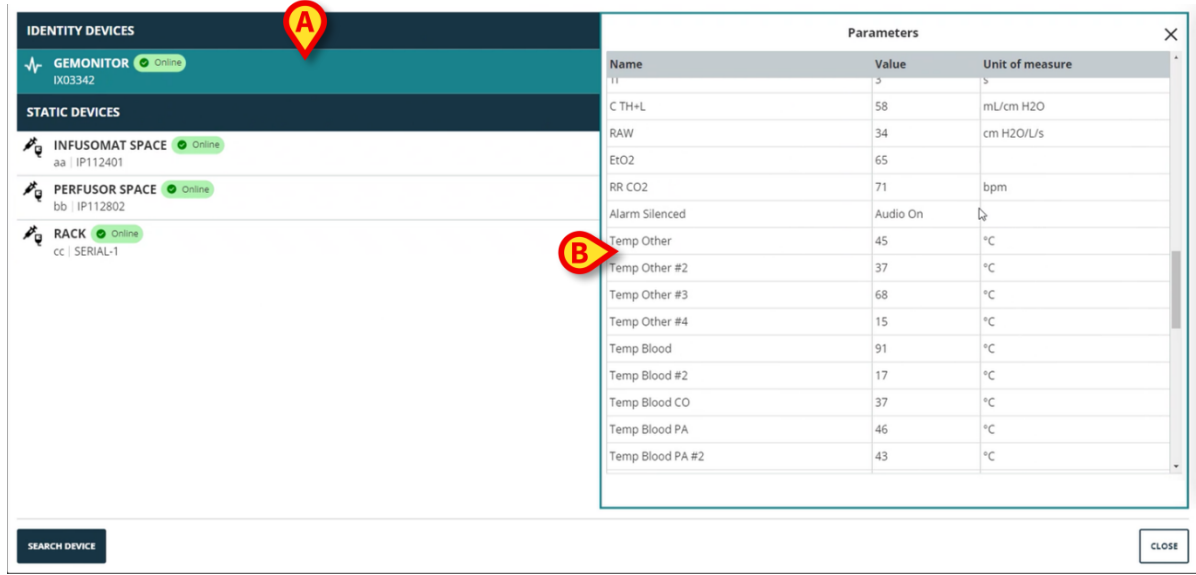

Şekil 8

5. İlişkilendirilmeyi kesme prosedürü

"Identity Web" sadece "Identity cihazları" (taşınabilir olanlar, hastayla ilişkili olanlar, yatağa bağlı olmayanlar) üzerinde çalışmaya izin verir.

"Identity Cihazı"na (Şekil 9 A) karşılık gelen satırların sağında bir ilişkilendirilmeyi kesme düğmesi görüntülenir.




Şekil 9

Bir cihazın ilişkilendirilmesini kesmek için

-  (Şekil 9A) düğmesine tıklayın.

Şekil 10 A bölümünde gösterildiği gibi kullanıcı onayı gereklidir.

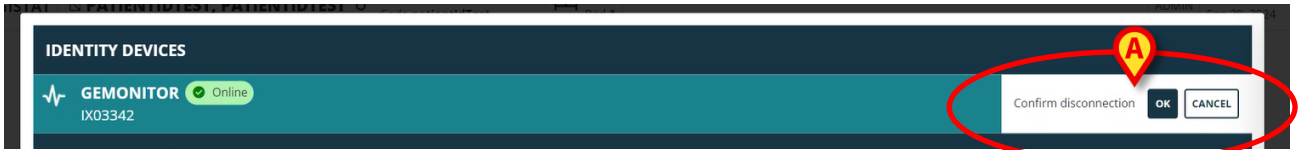

Şekil 10

Onaylandıktan sonra, cihazın ilişkilendirmesi kesilir, ancak kademeli bağlantı kesilmesi gerektiren detaylandırma nedenlerinden dolayı, ilişkilendirmesi kesilen cihaza karşılık gelen satır şu şekildedir:

a) ilk olarak "statik cihazlar" alanında, "Çevrim içi" durumda (Şekil 11 A) görüntülenir;

IDENTITY DEVICES	
No identity devices	
STATIC DEVICES	
 INFUSOMAT SPACE Online	aa IP112401
 PERFUSOR SPACE Online	bb IP112802
 RACK Online	cc SERIAL-1
 GEMONITOR Online	IX03342

Şekil 11

b) ardından, yapılandırılabilir bir süre sonra "Çevrim dışı" (Şekil 12 A) olarak görüntülenir;

IDENTITY DEVICES	
No identity devices	
STATIC DEVICES	
 INFUSOMAT SPACE Online	aa IP112401
 PERFUSOR SPACE Online	bb IP112802
 RACK Online	cc SERIAL-1
 GEMONITOR Offline	IX03342

Şekil 12

c) ardından, yapılandırılabilir bir süre sonra listeden (Şekil 13) kaldırılır.

IDENTITY DEVICES	
No identity devices	
STATIC DEVICES	
 INFUSOMAT SPACE Online	aa IP112401
 PERFUSOR SPACE Online	bb IP112802
 RACK Online	cc SERIAL-1

Şekil 13




Aramadan sonra ilişkilendirilmeyi kesme prosedürü için ayrıca 6.1 bölümüne bakın.

6. Arama ve ilişkilendirme prosedürü


Bir cihazı aramak ve o anda seçili olan hastayla ilişkilendirmek için:

- "İlişkili Cihazlar Listesi" penceresindeki (Şekil 14 **A**) **Cihaz ara** düğmesine tıklayın.

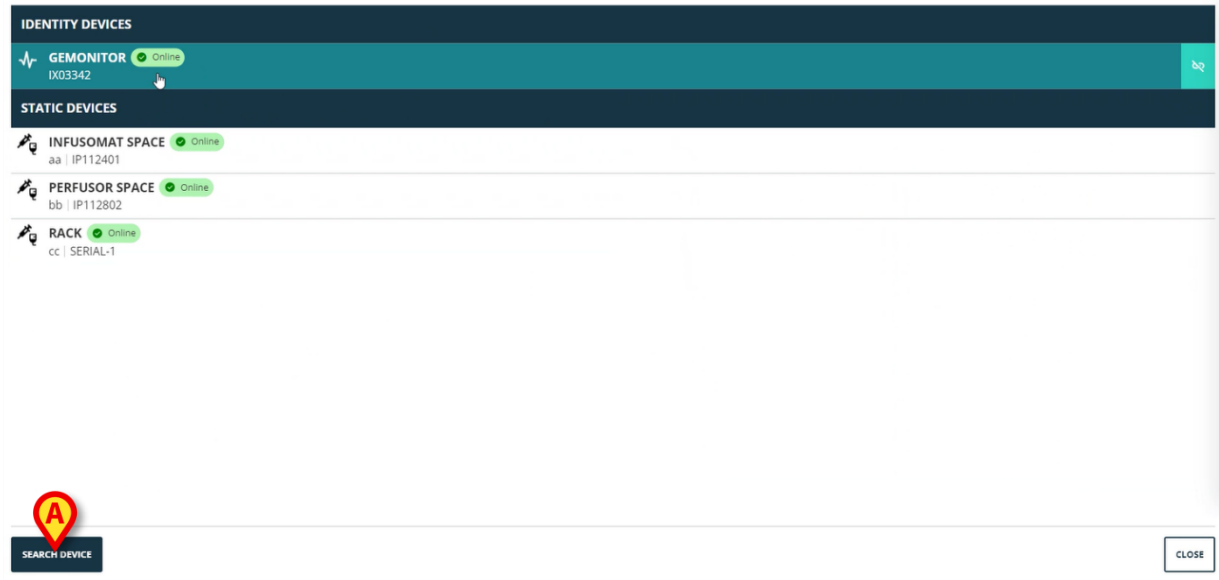

Şekil 14

Sağda bir arama aracı görüntülenir (Şekil 15 **A**).

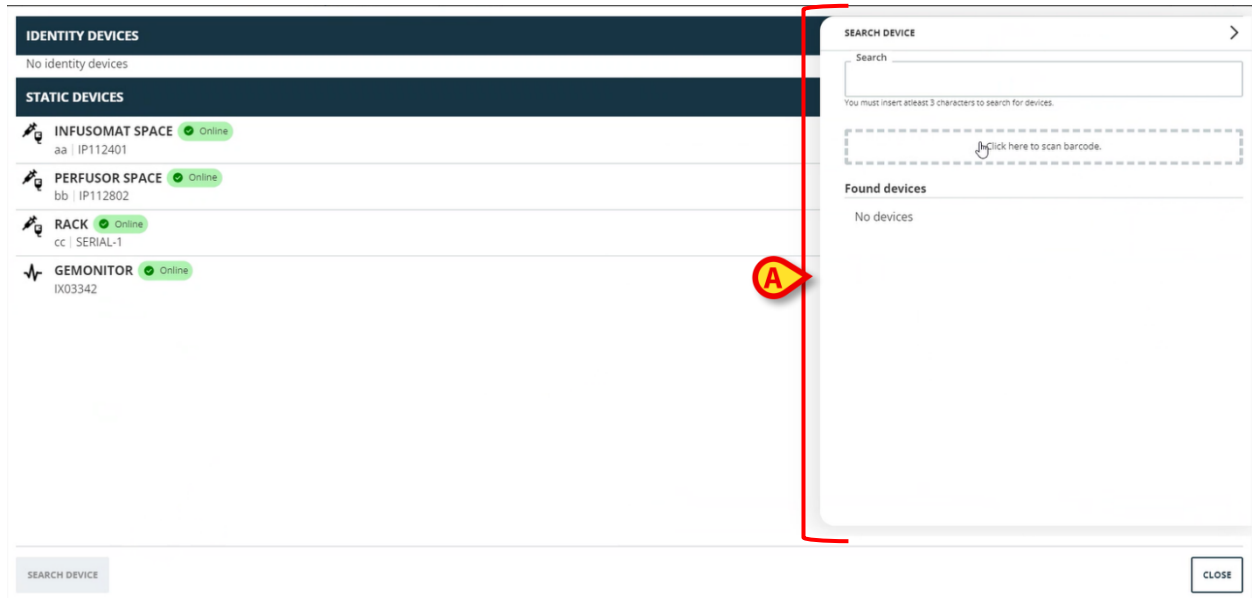


Şekil 15

- Şekil 16 **A** bölümünde belirtilen alana ilgili cihazın adını veya seri numarasını yazın.

Sonuçları görüntülemek için en az üç karakter belirtilmelidir. Belirtilen dizayla eşleşen cihazların listesi "Bulunan cihazlar" alanında (Şekil 16 **B**) görüntülenir.

Barkod araması da etkinleştirilmiştir (talimatlar için 7 bölümüne bakın).

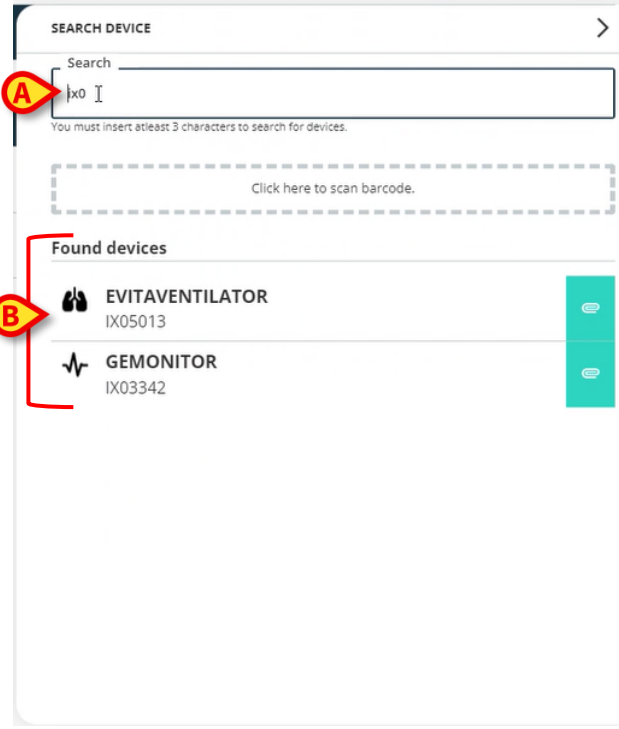

Şekil 16

- İlişkilendirilecek cihazın sağında bulunan  düğmesine tıklayın.

İlgili satır, Şekil 17 **A** bölümünde gösterildiği gibi değişir.




Şekil 17

İlişkilendirmeyi onaylamak için:

- **Tamam** düğmesine (Şekil 17 **B**) tıklayın.


Cihaz daha sonra "Identity cihazı" alanındaki (Şekil 18 **A**) ilişkili cihazlar listesinde görüntülenir.

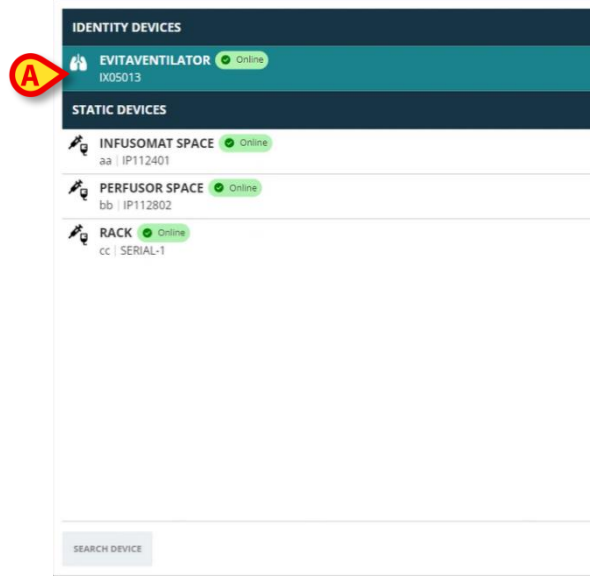

Şekil 18

6.1. Aramadan sonra ilişkilendirilmeyi kesme

Halihazırda atanmış cihazlar da arama sonuçları olarak görüntülenir, ancak sağ tarafta ilişkilendirme düğmesi (Şekil 19 A) yerine bir ilişkilendirilmeyi kesme düğmesi görüntülenir.

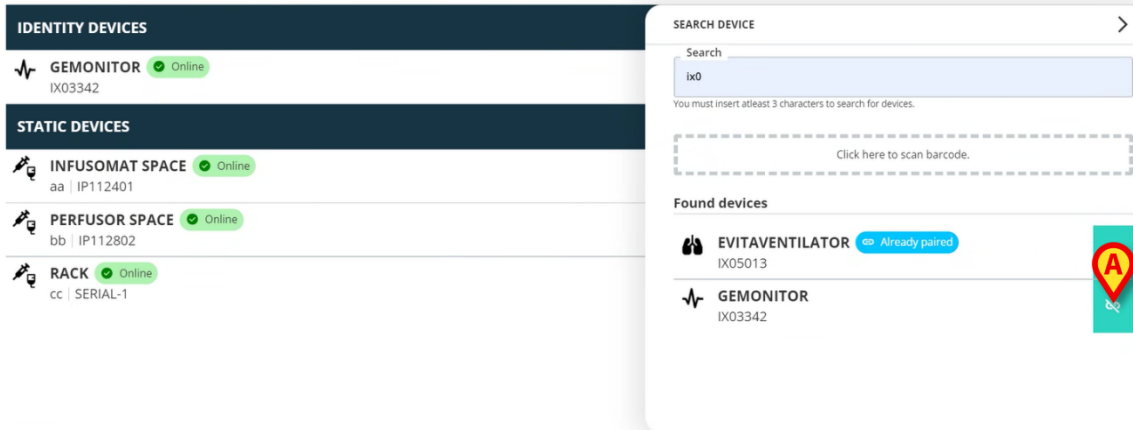


Şekil 19

- Cihazın ilişkilendirilmesini kesmek için düğmesine tıklayın.

Kullanıcı onayı gereklidir.

- İlişkilendirilmeyi kesme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine tıklayın (Şekil 20 A).

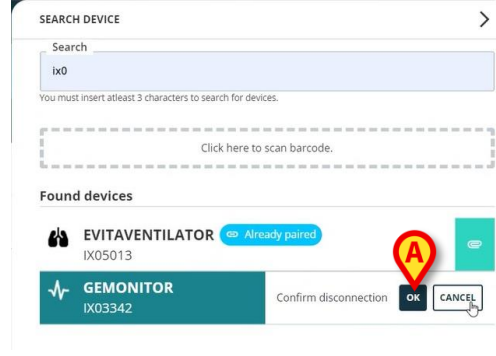

Şekil 20

İlişkilendirilmesi kesilen cihaz, ilişkili cihazlar listesindeki "Identity Cihazları" alanından kaybolur. Arama sonuçlarında "bağlanabilir" cihaz olarak görüntülenmeye devam eder.


6.2. Zaten eşleştirilmiş cihazlar

Diğer hastalarla ilişkili cihazlar, arama sonuçlarında "Zaten eşleştirilmiş" (Şekil 21 A) olarak görüntülenir.



Şekil 21

"Zaten eşleştirilmiş" cihazlar, 6 bölümünde açıklanan standart prosedür kullanılarak o anda seçili olan hastayla ilişkilendirilebilir. Bu durumlarda, belirli bir kullanıcı onayı gereklidir (Şekil 22).

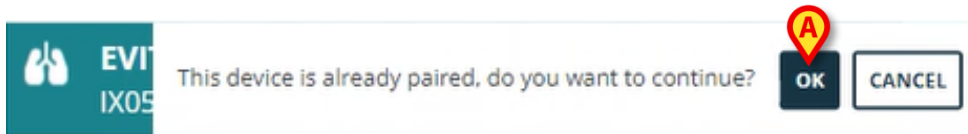

Şekil 22

- Cihazı o anda seçili olan hastayla (Şekil 22 A) ilişkilendirmek için **Tamam** ögesine tıklayın.

Cihaz bu şekilde önceki hastayla bağlantısı kesilir ve şu anda seçili olan hastayla ilişkilendirilir.

7. Barkod arama ve seçme


Barkod aramasından sonra bir cihaz seçmek mümkündür. Barkod seçimini etkinleştirmek için "Cihaz ara" penceresinde:

- Şekil 23 A bölümünde gösterilen alanı tıklayın.



Şekil 23


İş istasyonu kamerası etkinleşir (Şekil 24 A).

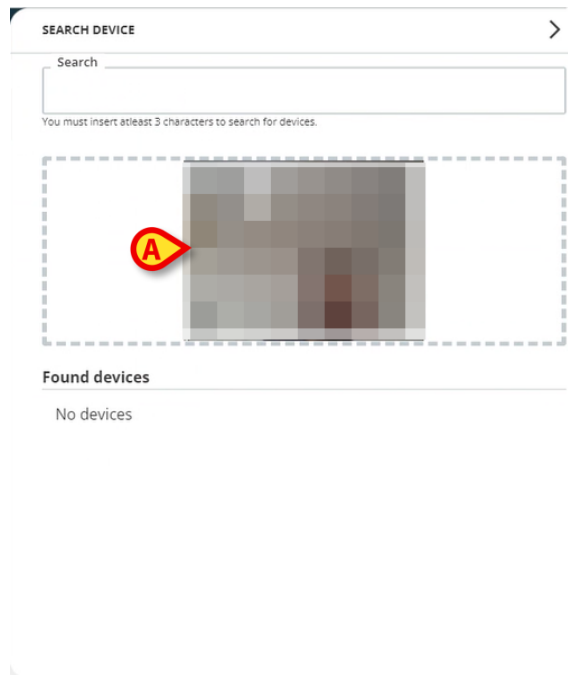

Şekil 24

- İlgili cihazın barkodunu tarayın.

Cihaz verileri, "Cihaz Ara" penceresindeki (Şekil 25 A) "Bulunan cihazlar" alanında görüntülenir.

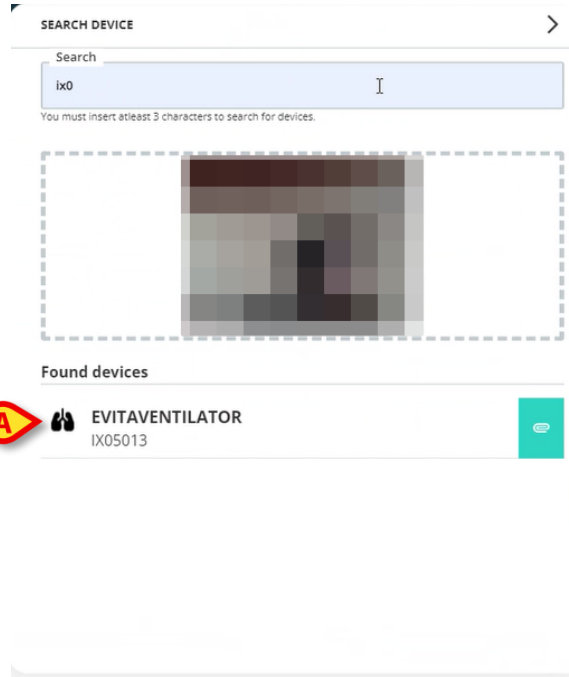

Şekil 25

- 6 bölümünde açıklandığı gibi ilişkilendirme prosedürüne devam edin.

Varsayılan olarak etkinleştirilen kamera arka kameradır. "Identity Web", kamera geçişine izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Bu durumda, "Cihaz Ara" penceresindeki (Şekil 26 A) "Barkod okuyucu" alanında özel bir -  - düğmesi görüntülenir. Bu işlevsellik hakkında daha fazla bilgi için sistem yöneticilerine başvurun.



Şekil 26



Cihaz seri numarasına bir önek ve bir sonek ekleyerek seçilen cihazları barkod aracılığıyla izlemek için bir sistem seçeneği yapılandırılabilir. Önek ve sonek kullanıcı arayüzünde görüntülenmez.