

SNELSTARTGIDS



Ascom d83 DECT Handset

ascom

Inhoud

1	Overzicht	1
2	Interface handset.....	4
2.1	Standby-stand.....	4
2.2	Hoofdmenu	7
3	Basisfuncties	10
4	Bellen.....	12
5	Contacten	13
6	Berichten	15
7	Alarmfuncties.....	17
8	Onderhoud	20
9	Chemische weerstand.....	22
10	Gerelateerde documenten	23

1 Overzicht


De Ascom d83 is een robuuste DECT-handset die is ontworpen voor omgevingen met gemiddelde tot hoge eisen, zoals ziekenhuizen, ouderenzorg, mijnbouw, beveiligde instellingen, detailhandel en ondernemingen. Zijn geavanceerde berichtenfuncties maken hem bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij tweeweg-berichten of interactie met geautomatiseerde apparatuur is vereist.

In dit document wordt beschreven hoe u de basisfunctionaliteit van de Ascom d83-handset gebruikt.

De volgende uitvoeringen van de handset zijn verkrijgbaar:

- Talker
- Messenger
- Protector

Raadpleeg de *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor meer informatie over de kenmerken en functies die beschikbaar zijn voor elke uitvoering van de handset.

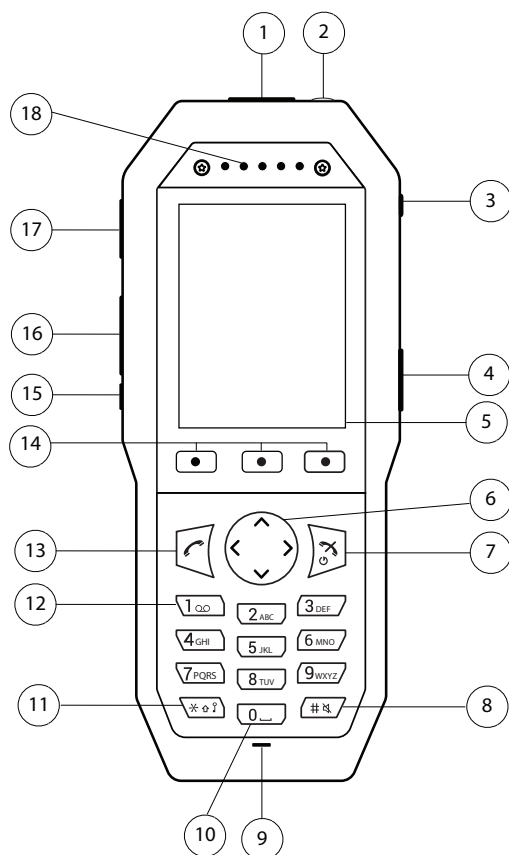

Nummer	Externe kenmerken	Omschrijving
1	Alarmknop	Alleen beschikbaar voor Protector, de knop is een drukknopalarm.
2	LED-indicatielampje	Multicolor LED-indicator. Alleen beschikbaar voor Messenger en Protector, Talker heeft alleen groene, oranje en rode kleuren.
3	Trekkoordstekker	Alleen beschikbaar voor Protector, het wordt gebruikt voor het trekkoordalarm.

4	Multifunctionele toets 2	De toets kan voor verschillende functies worden geconfigureerd. De functie kan worden gebruikt door lang te drukken en door meerdere keren te drukken. Alleen meerdere keren drukken is standaard geconfigureerd om het apparaat in de slaapstand te zetten. Opmerking: Indien geconfigureerd, kan de toets specifiek worden gebruikt als een PTT-toets.
5	Kleurendisplay	2,4-inch TFT-kleurendisplay met verlichting.
6	Navigatietoetsen	Navigatietoetsen links, rechts, omhoog en omlaag. Deze toetsen kunnen worden geconfigureerd voor snelkoppelingen.
7	Verbreek-toets Aan/uit-toets	Wordt gebruikt om een gesprek te beëindigen, terug te keren naar de standby-modus en, door lang ingedrukt te houden, om de handset aan/uit te zetten.
8	Toets Geluid uit	Gebruikt voor het in-/uitschakelen van hoorbare signalen in de standby-stand, het dempen van het belsignaal bij inkomende oproepen en het in-/uitschakelen van de microfoon tijdens gesprekken.
9	Microfoon	Gebruikt voor spraakcommunicatie.
10	Spatietoets	Gebruikt voor het zetten van een spatie tussen woorden.
11	Toetsvergrendeling Hoofdletters/kleine letters	Een combinatie van toetsvergrendeling en schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
12	Voicemailtoegang	Snelle toegang tot de voicemail van de handset. Opmerking: Voicemail is een systeemafhankelijke functie.
13	Opnemen-toets	Gebruikt om een oproep te beantwoorden of als snelkoppeling naar de Bellijst.
14	Programmeerbare toetsen	De drie programmeerbare toetsen bevinden zich net onder het display en de functie van elke programmeerbare toets wordt aangegeven door tekst op het display net boven de toetsen. In de standby-stand kunnen de programmeerbare toetsen worden gebruikt voor specifieke functies op basis van hun configuratie.
15	Multifunctionele toets 1	Standaard wordt deze gebruikt als de Muteknop. Door lang te drukken kunnen geluidssignalen in de standby-stand worden in-/uitgeschakeld. Met één druk op de knop kan het belsignaal bij inkomende oproepen worden gedempt en kan de microfoon tijdens gesprekken worden in-/uitgeschakeld. Deze toets kan worden geconfigureerd om verschillende functies te hebben. Opmerking: Alleen lang indrukken in de standby-stand kan worden geconfigureerd voor een andere functie.
16	Volumeknoppen	Wordt gebruikt voor het verhogen/verlagen van het volume van luidspreker en beltoon.

17	3,5 mm-connector	Standaard/schroefconnector die wordt gebruikt om een headset aan te sluiten of de handset op te laden. Opmerking: Uit de doos wordt de handset beschermd tegen stof door het connectordeksel. Het deksel moet worden losgeschroefd om de connector te gebruiken. Opmerking: De connector is compatibel met bedrade headsets die worden gebruikt voor Android.
18	Oorstuk-luidspreker	Gebruikt voor spraakcommunicatie.

Programmeerbare toetsen, sneltoetsen en multifunctionele toetsen

Sneltoetsen en programmeerbare toetsen kunnen worden geconfigureerd om toegang te geven tot veelgebruikte functies, zoals het kiezen van een specifiek nummer, een snelkoppeling in het menu of het verzenden van een bericht.

Elk van de toetsen **2–9** kan als sneltoets worden ingesteld. Houd een van deze nummers ingedrukt in standby-stand om een snelkoppeling naar de lijst met contacten te gebruiken¹.

Twee multifunctionele toetsen kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende functies door lang of dubbel te drukken.



Multifunctionele toets 1 kan alleen worden geconfigureerd door er lang op te drukken. Raadpleeg de *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor meer informatie.

Raadpleeg de *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor meer informatie over programmeerbare toetsen, sneltoetsen en multifunctionele toetsen.

1. Deze configuratie wordt standaard gebruikt.

2 Interface handset


De interface van de handset is verdeeld in twee afzonderlijke schermen:

- De **standby-stand** is het hoofdscherm van de handset, waar u informatie over de huidige datum en tijd kunt vinden, evenals de eigenaar-ID. Raadpleeg [2.1 Standby-stand, pagina 4](#) voor meer informatie.
- Via het **Hoofdmenu** krijgt u toegang tot functies, zoals Berichten, Bellen, Contacten enz. Raadpleeg [2.2 Hoofdmenu, pagina 7](#) voor meer informatie.
Raadpleeg *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor de complete lijst met functies en hun gebruik.

2.1 Standby-stand

In dit gedeelte ziet u een overzicht van de lay-out van het standby scherm, samen met de pictogrammen en teksten die op het scherm verschijnen.

Figuur 1. Voorbeeld van standby scherm

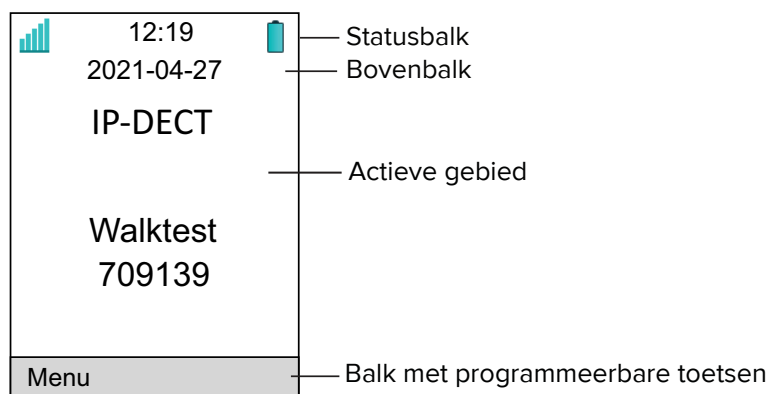

De *statusbalk* toont pictogrammen die de gebruiker informatie geven over signaalsterkte, batterijstatus, geluid uit, gemiste oproepen, nieuwe berichten/voicemail, toetsvergrendeling/telefoonvergrendeling en tijd. Deze rij is altijd zichtbaar op alle schermen.

De *bovenbalk* geeft de headsetverbinding, Bluetooth-verbinding/Bluetooth-headsetverbinding, bedrade headsetpictogram, synchronisatiepictogram en de huidige datum weer.

In het *Actieve gebied* wordt informatie weergegeven zoals de gebruikersidentiteit die door het systeem wordt verstrekt en/of een eigenaar-ID als deze is geconfigureerd, evenals de functies man-down en geen-beweging. Dit is ook het gebied voor tekst in het dialoogvenster, bijvoorbeeld *Gemiste oproepen*, of om een actie te bevestigen.

De *balk met programmeerbare toetsen* wordt gebruikt voor programmeerbare toetsen die kunnen worden gebruikt als snelkoppelingen voor functies in de handset.

De *schuifbalk* bevindt zich rechts van het *Actieve gebied*. Deze wordt zichtbaar wanneer een menuscherm meer dan zes rijen heeft, of als de volledige tekst in een bericht niet op het scherm kan worden weergegeven.

Pictogrammen en teksten weergeven

Functies en instellingen die beschikbaar zijn voor de gebruiker worden weergegeven als pictogrammen en tekst op het display. In dit gedeelte worden de status- en systeempictogrammen en hun functies beschreven.

Tabel 1 Beschrijving van status- en systeempictogrammen

Pictogram	Naam	Omschrijving
	Signaalsterkte	Geeft de sterkte van het signaal aan. Het pictogram bevindt zich in de statusbalk.
	Volle batterij	Geeft aan dat de batterij 75 tot 100% resterende capaciteit heeft. Alle pictogrammen die de status van de batterijcapaciteit aangeven, staan in de statusbalk.
	Hoog batterijniveau	Geeft aan dat de batterij 50 tot 75% resterende capaciteit heeft.
	Gemiddeld batterijniveau	Geeft aan dat de batterij 25 tot 50% resterende capaciteit heeft.
	Laag batterijniveau	Geeft aan dat de batterij 10 tot 25% resterende capaciteit heeft.
	Zeer laag batterijniveau	Geeft aan dat de batterij 7 tot 10% resterende capaciteit heeft.
	Waarschuwing voor lege batterij	Het pictogram knippert in de statusbalk en geeft aan dat de batterij nog 7% of minder capaciteit heeft.
	Opladen gestopt	Het pictogram wordt weergegeven wanneer de omgevingstemperatuur buiten de toegestane grenzen valt. Opmerking: Het pictogram wordt alleen weergegeven als de handset is uitgeschakeld tijdens het opladen.
	Inkomende oproep	Geeft inkomende oproepen en beantwoorde oproepen aan. Het pictogram verschijnt in de Bellijst wanneer de oproep wordt ontvangen.
	Gemiste oproep	Geeft gemiste oproepen aan. Het pictogram verschijnt in de Bellijst en in de lijst met gemiste oproepen.
	Uitgaande oproep	Geeft uitgaande gesprekken aan. Het pictogram verschijnt in de Bellijst wanneer u belt.
	Drukken-voor-spreken	Het pictogram wordt toegevoegd aan alle inkomende, uitgaande, gemiste en beantwoorde PTT-oproepen in de bellijst/lijst met gemiste oproepen. Opmerking: Het pictogram wordt toegevoegd wanneer een PTT-uitnodiging alleen als oproep wordt beheerd.
	Nieuw bericht (verzonden door een andere handset)	Geeft aan dat er een nieuw tekstbericht (of berichten) is (zijn) binnengekomen. Het pictogram verschijnt in de statusbalk en de inbox. Opmerking: Het pictogram wordt weergegeven totdat alle nieuwe berichten in de Inbox zijn gelezen. Opmerking: Alleen van toepassing op Messenger en Protector.

Tabel 1 Beschrijving van status- en systeempictogrammen (vervolg)

	Nieuw bericht (verzonden door het systeem)	Geeft aan dat er een nieuw bericht is verzonden door het systeem. Het pictogram verschijnt in de statusbalk en de inbox. Opmerking: Het pictogram blijft in de statusbalk totdat alle nieuwe berichten in de inbox zijn gelezen. Opmerking: Het pictogram voor berichten verzonden door het systeem heeft een hogere prioriteit boven het pictogram voor berichten verzonden door een andere handset in de statusbalk. Opmerking: Alleen van toepassing op Messenger en Protector.
	Verzonden bericht	Geeft aan dat er een tekstbericht is verzonden. Het pictogram verschijnt in de lijst met Verzonden berichten. Opmerking: Alleen van toepassing op Messenger en Protector.
	Gelezen bericht	Geeft aan dat er een tekstbericht is gelezen. Het pictogram verschijnt in de inbox. Opmerking: Alleen van toepassing op Messenger en Protector.
	Niet verzonden bericht	Geeft aan dat er een bericht niet is verzonden. Het pictogram verschijnt in de lijst met Niet verzonden berichten. Opmerking: Alleen van toepassing op Messenger en Protector.
	Voicemailbericht	Geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht heeft ontvangen. Het pictogram verschijnt in de statusbalk. Opmerking: Het pictogram blijft in de statusbalk totdat de voicemail is beluisterd. Opmerking: Voicemailtoegang is een systeemafhankelijke functie.
	Microfoon uitgeschakeld	Geeft aan dat de microfoon stil is. Het pictogram verschijnt tijdens het lopende gesprek in het Actieve gebied. Opmerking: Tijdens een PTT-oproep is de microfoon inactief wanneer de PTT-toets wordt losgelaten.
	Luidspreker ingeschakeld	Geeft aan dat de luidspreker is ingeschakeld. Het pictogram verschijnt tijdens een gesprek in de balk met programmeerbare toetsen.
	Luidspreker uitgeschakeld	Geeft aan dat de luidspreker is uitgeschakeld. Het pictogram verschijnt tijdens een gesprek in de balk met programmeerbare toetsen.
	Geluid uit	Geeft aan dat de belsignalen zijn gedempt. Het pictogram verschijnt in de statusbalk wanneer de knoppen Geluid uit of Mute ingedrukt worden gehouden.
	Stil volume	Geeft aan dat het belsignaal is gedempt. Het pictogram verschijnt in de statusbalk wanneer het belvolume is ingesteld op <i>Stil</i> .
	Bluetooth	Geeft aan dat Bluetooth is ingeschakeld. Het pictogram verschijnt in de bovenbalk.

Tabel 1 Beschrijving van status- en systeempictogrammen (vervolg)

	Bluetooth-headset	Geeft aan dat er een Bluetooth-headset is aangesloten op de handset. Het pictogram verschijnt in de bovenbalk.
	Headset	Geeft aan dat er een headset met kabel is aangesloten op de handset. Het pictogram verschijnt in de bovenbalk.
	Toetsvergrendeling	Geeft een vergrendeld toetsenbord aan. Het pictogram verschijnt in de statusbalk.
	Telefoonvergrendeling	Geeft een vergrendelde handset aan. Het pictogram verschijnt in de statusbalk.
	Omvalalarm	Geeft aan dat de Man-down alarmfunctie is ingeschakeld. Het pictogram verschijnt in het Actieve gebied. Opmerking: Alleen van toepassing op Protector.
	Geen bewegingsalarm	Geeft aan dat de alarmfunctie Geen beweging is ingeschakeld. Het pictogram verschijnt in het Actieve gebied. Opmerking: Alleen van toepassing op Protector.
	Trekkoord-alarm	Geeft aan dat de trekkoordalarmfunctie is ingeschakeld. Opmerking: Alleen van toepassing op Protector.
	Profiel (actief)	Geeft aan dat een profiel actief is. Het pictogram verschijnt linksonder in het Actieve gebied. Opmerking: Als er een fout- of waarschuwingsbericht op het display van de handset verschijnt, wordt het pictogram verplaatst naar de bovenbalk.
	PDM-synchronisatie	Geeft aan dat de handset communiceert met WinPDM/Device Manager via Desktop Programmer.
	Talker pictogram	Geeft aan dat de handset een Talker is. Het pictogram bevindt zich in het rechtergedeelte van het Actieve gebied.
	Messenger-pictogram	Geeft aan dat de handset een Messenger is. Het pictogram bevindt zich in het rechtergedeelte van het Actieve gebied.
	Protector pictogram	Geeft aan dat de handset een Protector is. Het pictogram bevindt zich in het rechtergedeelte van het Actieve gebied.


2.2 Hoofdmenu

Dit gedeelte geeft een overzicht van de functies die beschikbaar zijn in het **hoofdmenu** en instructies over hoe u toegang krijgt tot het menu op uw handset.



De beschikbare functies in het **hoofdmenu** verschillen per handset-uitvoering. Raadpleeg [Tabel 2 Overzicht hoofdmenu, pagina 8](#) voor de lijst met beschikbare functies in uw handset en hun korte beschrijving.

Figuur 2. Voorbeeld van het scherm hoofdmenu

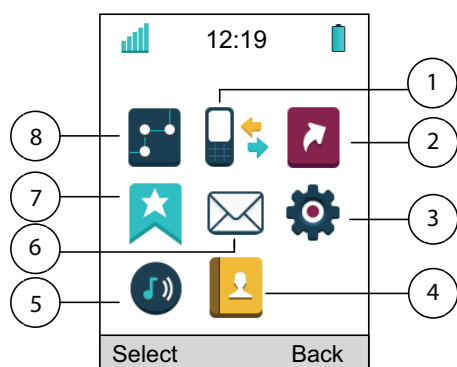

1. Oproepen
2. Sneltoetsen
3. Instellingen
4. Contacten
5. Profielen
6. Berichten
7. Diensten
8. Verbindingen

Tabel 2 Overzicht hoofdmenu

	Het menu Contacten biedt toegang tot alle namen/nummers in lokale en bedrijfstelefoonboeken. Het bedrijfstelefoonboek met maximaal 1000 vermeldingen kan via WinPDM/Device Manager naar de handset worden gedownload. Het centrale telefoonboek* is ook toegankelijk vanuit het menu Contacten .
	Het menu Services bevat voorgeprogrammeerde functies. Opmerking: Services is alleen van toepassing voor Messenger en Protector.
	Het menu Berichten bevat functies voor het verwerken van berichten, zoals het lezen en schrijven van berichten. Opmerking: Berichten is alleen van toepassing voor Messenger en Protector.
	Het menu Oproepen bevat bellijsten, beltijd en belservices*. Belservices worden geconfigureerd in het WinPDM/Device Manager.
	Het menu Verbindingen bevat Bluetooth-verbinding, headsetselectie, netwerkselectie en selectie van laadgedrag.
	Het menu Instellingen bevat persoonlijke instellingen voor de handset, zoals het belvolume wijzigen, taal selecteren enz.
	Het menu Snelkoppelingen bevat snelkoppelingen voor de programmeerbare toetsen, sneltoetsen, navigatietoetsen en multifunctionele toetsen.
	In het menu Profielen kunnen maximaal vier verschillende profielen worden toegevoegd. Het profiel "Normaal" is standaard actief.

* Deze functie is systeemafhankelijk.

Navigeer door het hoofdmenu

Druk in de standby-stand op de programmeerbare toets **Menu** om het menu te openen.

Gebruik de navigatietoetsen om door het menu te navigeren.

Druk op de bijbehorende programmeerbare toets die onder het display staat, om een optie te selecteren.

3 Basisfuncties

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u de basisfuncties van de Ascom d83-handset gebruikt. Wij raden aan om dit gedeelte te lezen wanneer u de handset voor het eerst gaat gebruiken. Raadpleeg de *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor een gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare functies.

Handset inschakelen

Indien uitgeschakeld, moet u de **Verbreektoets** indrukken en vasthouden  totdat de handset trilt en het display wordt verlicht.

Handset uitschakelen

1. Houd in de standby-stand de **Verbreektoets** ingedrukt .
2. Het dialoogvenster *Uitschakelen?* verschijnt. Bevestig door op **Ja** te drukken.

Toetsenbord handmatig vergrendelen/ontgrendelen

Om het toetsenbord te vergrendelen, drukt u op de **vergrendeltoets**  en vervolgens op de programmeerbare toets **Vergrendelen**.

Een vergrendeld toetsenbord wordt aangeduid met het pictogram **Toetsvergrendeling**  in de statusbalk.

Druk op de **vergrendeltoets** om het toetsenbord te ontgrendelen . Wanneer het dialoogvenster *ontgrendelen?* verschijnt, drukt u op **Ja**.

De automatische toetsvergrendeling Aan-/Uitzetten

1. Selecteer in het menu **Instellingen Vergrendelt → Automatische toetsvergrendeling**.
2. Selecteer **Aan** of **Aan behalve bij oproepen** of **Uit**.

De luidspreker aan-/uitzetten

- Druk tijdens het gesprek op de  programmeerbare toets om de luidspreker in te schakelen.
- Druk tijdens het gesprek op de  programmeerbare toets om de luidspreker uit te schakelen.

Geluidssignalen in-/uitschakelen

Er zijn twee verschillende methoden om beltonen en meldingsgeluiden in of uit te schakelen:

- Houd in de standby-stand de toets **Geluid uit**  of de knop **Mute** ingedrukt. Het pictogram **Geluid uit**  verschijnt in de statusbalk om aan te geven dat de handset is gedempt. Houd de toets **Geluid uit** of de knop **Mute** nogmaals ingedrukt om de signalen in te schakelen.
- Druk in de standby-stand herhaaldelijk op de knop **Volume omlaag** totdat het belvolume op **Stil** staat. Het pictogram **Geluid uit**  verschijnt in de statusbalk om aan te geven dat de handset is gedempt. Druk één keer op de knop **Volume omhoog** om het dempen van de handset op te heffen.

Het trilalarm aan-/uitzetten

1. Selecteer in het menu **Instellingen Geluid en waarschuwingen → Trilfunctie**.
2. Selecteer **Aan**, **Aan indien stil** (d.w.z. dat de trilfunctie aanstaat, wanneer de handset gedempt is) of **Uit**.

Het volume aanpassen

Druk op de toets **Volume omhoog** om het volume te verhogen en op de knop **Volume omlaag** om het volume te verlagen. Tijdens een gesprek kunt u de navigatietoetsen omhoog/omlaag of de volumeknoppen gebruiken om het volume aan te passen.

4 Bellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de belfunctie op de Ascom d83-handset kunt gebruiken.

Bellen

Bellen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door handmatig het telefoonnummer te kiezen of de bellijst of het telefoonboek te gebruiken. Voer een van de volgende handelingen uit om te bellen:

- Kies in de stand-bymodus het nummer en druk op de toets **Hoorn van de haak**  of op de programmeerbare toets **Bellen**.
- Druk in de standby-stand op de **Hoorn van de haak** toets  en selecteer een nummer uit de bellijst.
- Druk in de standby-stand op een voorgeprogrammeerde sneltoets of een programmeerbare toets.
- Selecteer een nummer uit het lokale telefoonboek in **Contacten → Contact bellen**. Kies een naam uit de lijst of gebruik de zoekfunctie en druk vervolgens op de **Hoorn van de haak** toets  of de programmeerbare toets **Bellen**.
- Kies een nummer uit het centrale telefoonboek² in **Contacten → Centraal telefoonboek**. Zoek naar het contact op naam, nummer of laatste resultaat. Druk op de toets **Hoorn van de haak**  of de programmeerbare toets **Bellen**.

De oproep beantwoorden

Wanneer de oproep wordt ontvangen, drukt u op de **Hoorn van de haak** toets  of de programmeerbare toets **Accepteren** om de oproep te beantwoorden.

Het gesprek beëindigen

Druk tijdens een gesprek op de **verbreektoets**  of de programmeerbare toets **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen. De duur van het gesprek wordt op het display weergegeven.

De oproepinformatie wordt opgeslagen in **Oproepen → Bellijst**.

De oproep weigeren

Wanneer de oproep wordt ontvangen, drukt u op de **verbreektoets**  of de programmeerbare toets **Weigeren** om de oproep te weigeren.

2. Deze functie is systeemafhankelijk.

5 Contacten

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het menu **Contacten** op de Ascom d83-handset kunt gebruiken. En dan vooral hoe u contacten in uw lokale telefoonboek zoekt, toevoegt, bewerkt en verwijdt en hoe u het centrale telefoonboek gebruikt.

Een contactpersoon zoeken in het lokale telefoonboek

1. Druk in de standby-stand op de navigatietoets omlaag³ of ga naar **Contacten → Contact bellen** om het lokale telefoonboek te openen.
2. Selecteer een contact uit de lijst of zoek op naam/nummer met behulp van het veld **Zoeken**.
3. Selecteer de naam en druk op de **Hoorn van de haak**toets  of de programmeerbare toets **Bellen** om te bellen.

Een nieuw contact aan het lokale telefoonboek toevoegen

1. Selecteer in het menu **Contacten Contact toevoegen → Nieuw**.
2. Selecteer de **naam** en druk op de programmeerbare toets **Toevoegen**.
3. Voer de naam van het contact in en druk op de programmeerbare toets **OK** als u klaar bent.
4. Selecteer het **Werknummer**, **Mobiel nummer** of **ander nummer** en druk op de programmeerbare toets **Toevoegen**.
5. Voer het telefoonnummer van het contact in en druk op de programmeerbare toets **OK** als u klaar bent.
6. Druk op de programmeerbare toets **Opslaan**.

Een nieuw contact toevoegen vanuit de Bellijst

1. Selecteer in het menu **Contacten Contact toevoegen → Uit Bellijst**.
2. Selecteer het nummer uit de lijst en druk op de programmeerbare toets **Toevoegen**.
3. Selecteer het **Werknummer**, **Mobiel nummer** of **Ander nummer** en druk op de programmeerbare toets **Selecteren**.
4. Om de naam van het contact te wijzigen, selecteert u de **Naam** en drukt u op de programmeerbare toets **Bewerken**. Als u de naam aan het contact wilt toevoegen, selecteert u **Naam** en drukt u op de programmeerbare toets **Toevoegen**.
5. Voer de naam van het contact in en druk op de programmeerbare toets **OK** als u klaar bent.
6. Druk op de programmeerbare toets **Opslaan**.

Een contactpersoon in het lokale telefoonboek bewerken

1. Selecteer in het menu **Contacten** de optie **Contact bewerken**.
2. Selecteer het contact en druk op de programmeerbare toets **Bewerken**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de programmeerbare toets **Opslaan**.

Een contact in het telefoonboek is gemarkeerd met het symbool , wat betekent dat bewerken niet mogelijk is.

Een contactpersoon uit het lokale telefoonboek verwijderen

1. Selecteer in het menu **Contacten** de optie **Contact verwijderen**.
2. Selecteer het contact en druk op de programmeerbare toets **Verwijderen**.

3. als de navigatietoets omlaag niet is geconfigureerd voor een andere functie.

3. Druk op **Ja** om te bevestigen.

Het centrale telefoonboek gebruiken

In het centrale telefoonboek worden contacten weergegeven die in de centrale telefoonboekdatabase staan.

1. Selecteer in het menu **Contacten Centraal telefoonboek**.
2. Selecteer **Zoeken op naam** of **Zoeken op nummer** of **Laatste resultaat**⁴.
3. Begin met het invoeren van de eerste letter(s) van de voornaam, achternaam of beide, of het nummer.
4. Druk op de programmeerbare toets **Zoeken**. Het centrale telefoonboek toont de overeenkomende namen op het display. Met de navigatietoetsen kunt u in alfabetische volgorde naar het volgende item gaan.
5. Druk op de programmeerbare toets **Meer** om de contactpersoon te bekijken, toe te voegen aan de lijst met contacten of een bericht naar de geselecteerde contactpersoon te verzenden.
Druk op de **Hoorn van de haak**toets  of de programmeerbare toets **Bellen** om te bellen.

4. De optie **Laatste resultaat** in het **centrale telefoonboek** geeft de contacten weer waarnaar het laatst is gezocht.

6 Berichten

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het menu **Berichten** op de Ascom d83-handset kunt gebruiken. En dan specifiek hoe u nieuwe berichten schrijft en verzendt, de opgeslagen berichten leest en verwijderd en hoe u de voicemailfunctie gebruikt.



Alle functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn alleen van toepassing op Messenger en Protector.

Inkomende berichten

Wanneer een nieuw tekstbericht binnenkomt, worden het pictogram **Nieuw bericht** en de inhoud van het bericht automatisch op het display weergegeven. Het pictogram **Nieuw bericht** blijft op het display staan totdat alle nieuwe berichten zijn gelezen.

Het binnenkomende bericht gaat normaal gesproken vergezeld van het waarschuwingssignaal voor berichten en/of de trilfunctie en een knipperende LED.

Als u het ontvangen bericht later wilt openen en lezen, drukt u op **Sluiten**. Het bericht wordt automatisch opgeslagen in **Berichten → Inbox**.

Het ontvangen bericht lezen

1. Selecteer in het menu **Berichten** de **Inbox** of druk op de navigatietoets omhoog⁵ in de stand-bystand.
2. Selecteer het bericht in de lijst.
3. Druk op de programmeerbare toets **Bekijken** om het bericht te lezen.

Een bericht schrijven en verzenden

1. Open het menu **Berichten** en selecteer **Nieuw bericht schrijven**.
2. Voer de tekst in en druk op de programmeerbare toets **Verzenden**.
3. Voer het nummer in of gebruik de optie **Telefoonboek**  om het contact uit de lijst te selecteren.
4. Als u klaar bent, drukt u op de programmeerbare toets **Verzenden** om het bericht te verzenden. Het dialoogvenster **Bericht verzonden** verschijnt om aan te geven dat het bericht is verzonden.

Een bericht verwijderen

U kunt alle ontvangen, niet-verzonden en verzonden berichten verwijderen.

1. Selecteer in het menu **Berichten** de **Inbox** of **Niet verzonden** of **Verzonden**.
2. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen.
3. Druk op de programmeerbare toets **Meer**.
4. Selecteer in het pop-upmenu **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.
5. Druk op **Ja** om te bevestigen. Het/de bericht(en) is/zijn verwijderd.

Controleer de voicemail

Een nieuwe voicemail wordt aangegeven door het pictogram **Voicemailbericht**  dat in de statusbalk verschijnt.

5. . Als de navigatietoets omhoog niet is geconfigureerd voor een andere functie.

Als het pictogram **Voicemailbericht** in de statusbalk verschijnt, houdt u de cijfertoets **1** ingedrukt in de standby-stand om het ontvangen voicemailbericht te beluisteren. Als het toestelnummer niet beschikbaar is, wordt het dialoogvenster *Voicemailnummer niet gedefinieerd* weergegeven.

7 Alarmfuncties



Alleen van toepassing op Protector. De beschikbaarheid van alarmfuncties is afhankelijk van de installatieomgeving. Raadpleeg de *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* voor meer informatie.

Alarmdrukknop

Er kunnen twee verschillende alarmtypes worden ingesteld voor de alarmknop van de handset. Een alarm kan een **drukknopalarm** zijn met een persoonsalarmfunctie of een **testalarm** dat wordt gebruikt om het persoonsalarm te testen. Elk van de alarmtypes wordt op een van de volgende manieren ingeschakeld: lang indrukken of meerdere keren indrukken. Standaard wordt lang indrukken gedefinieerd als een testalarm en meervoudig indrukken (dubbel indrukken) als persoonsalarm.

Wanneer het alarm wordt verzonden, verschijnt een dialoogvenster *Persoonsalarm* (standaardtekst voor meerdere keren drukken) of *Testalarm* (standaardtekst voor lang indrukken) op het display. Het alarm wordt verzonden naar de alarmcentrale die het verder verspreidt.

Het is mogelijk om het alarm af te laten gaan tijdens andere activiteiten, zoals spreken, instellingen wijzigen of terwijl de handset is vergrendeld.



Het drukknopalarm kan stil zijn indien geconfigureerd door een beheerder. Stille alarmen zijn bedoeld voor potentieel gevaarlijke omgevingen en gaan niet gepaard met signalen of andere indicaties.

Trekkoord-alarm

de handset is aan de zijkant voorzien van een aansluiting voor een trekkoord. Er moet een trekkoord aan de aansluiting worden bevestigd om het alarm te gebruiken. Een trekkoord heeft een clip om aan een kledingstuk te bevestigen. Als iemand probeert de handset van de gebruiker af te pakken, komt de magneetaansluiting los en wordt het alarm geactiveerd. Het pictogram **trekkoord**  geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.

Het trekkoordalarm activeren

1. Selecteer in het **menu Instellingen → Alarm → Alarm activeren**.
2. Selecteer het trekkoordalarm. Het pictogram  verschijnt onderaan het scherm.

Het trekkoordalarm de-activeren

1. Selecteer in het **menu Instellingen → Alarm → Alarm activeren**.
2. Selecteer dat u het trekkoordalarm wilt deactiveren.

Het trekkoordalarm resetten

Bevestig het trekkoord aan de aansluiting aan de zijkant van de telefoon.

Man-down en Geen beweging-alarm

De handset kan ook worden geprogrammeerd om de alarmen **Man-down** en **Geen-beweging** te verzenden om persoonlijke veiligheidsbewaking te bieden. Deze alarmen zijn geschikt voor werkplekken waar maximale veiligheid en toegankelijkheid vereist is. Bij een ongeval zijn collega's en management binnen enkele seconden op de hoogte en kan de hulpbehoevende direct worden gelokaliseerd.

Het Man-down-alarm wordt geactiveerd als de handset gedurende een vooraf gedefinieerde tijd (standaard 7 seconden) vanuit de verticale positie wordt gekanteld (standaard 45°). Het pictogram **Man-down**  geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.

Het alarm Geen-beweging wordt geactiveerd als er gedurende een vooraf gedefinieerde tijd (standaard 30 seconden) geen beweging wordt gedetecteerd. Het pictogram **Geen-beweging**  geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.

Tijdens de waarschuwingsfase geeft de handset gedurende een vooraf bepaalde tijd (standaard 7 seconden) een LED-waarschuwing en een geluids- en een trilsignaal (afhankelijk van de instellingen). Tegelijkertijd verschijnt op het display van de handset de waarschuwing **Man-down**. **Annuleren?** of **Geen-bewegingswaarschuwing**. **Annuleren?** bericht. De handset verzendt vervolgens het alarm, tenzij deze functie is geannuleerd.

De handset bevestigt dat het alarm is verzonden door een pieptoon, een LED-indicatie en een trilalarm te geven. Tegelijkertijd geeft de handset het bericht **Man-down alarm verzonden** of **Geen-bewegingsalarm verzonden** weer.

De alarmfuncties Man-down en No-movement zijn inactief in de volgende situaties:

- Als de handset in de oplader wordt geplaatst.
- Tijdens oproepen (afhankelijk van de instellingen), om vals alarm te voorkomen als de gebruiker tijdens een gesprek de handset schuin houdt of zich niet beweegt.
- Voor een vooraf gedefinieerde periode (standaard 10 minuten) als de **Mute**-knop of de programmeerbare toets **OK** in het waarschuwingsvenster wordt ingedrukt tijdens de waarschuwingsfase.

Man-down- en/of geen-bewegingsalarm in-/uitschakelen

1. Selecteer in het menu **Instellingen Alarm → Alarm activeren**.
2. Selecteer **Man-down** of/en **Geen-beweging**. Het/de bijbehorende pictogram(men) verschijnt(en) in het Actieve gebied.

Volg dezelfde stappen om het alarm uit te schakelen.

Man-down en Geen-bewegingsalarm annuleren

Wanneer de handset in de waarschuwingsfase komt en de **Man-down-waarschuwing**. **Annuleren?** of **Geen-bewegingswaarschuwing**. **Annuleren?** bericht verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit om het alarm te annuleren:

- Druk op de programmeerbare toets **OK**.
- Druk op een willekeurige toets, inclusief de bedrade headsetknop⁶.
- Zet de handset rechtop (voor Man-down alarm)⁷.

Man-down en Geen-beweging-alarm tijdelijk uitstellen

Druk tijdens de waarschuwingsfase op de **Mute**-knop en druk dan op **Ja** om het bericht **MD/NM detectie uitstellen?** te bevestigen. Het bijbehorende displaypictogram knippert totdat het alarm weer actief is (standaard 10 min).

6. behalve de bluetooth-headsetknop.

7. Geconfigureerd door de systeembeheerder.

Man-down- en Geen-beweging-alarm resetten

Voer een van de volgende handelingen uit om de alarmfunctie te resetten:

- Zet de handset rechtop (na Man-down alarm).
- Beweeg de handset (na Geen beweging alarm).
- Druk op een willekeurige knop⁸ inclusief de bedrade headsetknop.
- Druk op de **Mute**-knop indien het signaal (ALS) afgaat.

Akoestisch Locatie Signaal

Een alarm kan worden gevolgd door een Akoestisch Locatie Signaal (ALS). Het ALS is een signaal van de handset dat gedurende een voorgedefinieerde periode waarschuwt. Het signaal kan worden gedempt door op de **Mute**-knop te drukken.

Alarm met gegevens

Gegevens kunnen bij verzending aan alle soorten alarmen worden toegevoegd. De gebruiker moet de gegevens handmatig definiëren en opslaan.

Het alarm kan worden geconfigureerd onder **Instellingen → Alarm → Alarmgegevens bewerken**.

Automatisch bellen na alarm

De handset kan worden geconfigureerd om een voorgedefinieerd nummer te bellen, nadat een alarm is verzonden.

8. behalve de alarmknop.

8 Onderhoud

Dit hoofdstuk beschrijft het onderhoud van handsets, met de nadruk op het vervangen en opladen van batterijen.

De handset heeft een oplaadbare batterij die apart van de handset kan worden opgeladen. Gebruik de acculader om het op te laden. Als u de handset samen met de batterij wilt opladen, doe dat dan met een bureaulader, een oplaadrek of met de 3,5 mm laadadapter.



Houd rekening met het volgende:

- Gebruik de oplader alleen binnen het temperatuurbereik van +5°C – +40°C.
- De 3,5 mm laadadapter is alleen verkrijgbaar met een EU-stekker.
- In een bureaulader of oplaadrek werkt de handset met uitzonderingen. De handset trilt bijvoorbeeld niet wanneer hij in de oplader wordt geplaatst.

De handset opladen

Ga als volgt te werk om de handset samen met de batterij op te laden in een bureaulader of een oplaadrek:

1. Plaats de handset in de bureaulader of het oplaadrek en duw de handset voorzichtig naar beneden zodat deze goed past (zie A in de afbeelding hieronder).
2. Als de handset correct is geplaatst, verschijnt het bericht `In lader` op het display, de LED wordt oranje en er verschijnt een geanimeerde batterijpictogram op het scherm om aan te geven dat het opladen is gestart.

Wanneer de LED groen wordt is het opladen voltooid en verschijnt er een pictogram voor een volledig geladen accu. Ga als volgt te werk om de handset uit de bureaulader of het oplaadrek te halen:

1. Kantel de handset naar u toe (zie B in onderstaande afbeelding).
2. Til de handset omhoog (zie C in onderstaande afbeelding).



We raden niet aan om de handset omhoog te tillen voordat u hem naar u toe gekanteld heeft.

Figuur 3. Voorbeeld van het plaatsen en verwijderen van de handset uit de bureaulader



Accu opladen

1. Schakel de handset uit.
2. Schuif de batterijklepvergrendeling naar rechts om de batterij eruit te halen.
3. Terwijl u het bovenste deel van de clip ingedrukt houdt, haalt u de batterij uit de handset.
4. Plaats de batterij in de laadsleuf. Schuif de accugrendel naar links. Als de batterij correct is geplaatst, wordt de LED-indicator op de batterijlader oranje om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
5. De batterij is volledig opgeladen wanneer de LED-indicator groen wordt.

De batterij vervangen

Als de capaciteit en prestaties van de batterij afnemen, vervangt u deze door een nieuwe. Neem voor nieuwe batterijen contact op met de systeembeheerder of de leverancier van de handset.

Volg de onderstaande stappen om de batterij te vervangen:

1. Volg de stappen 1-3 beschreven in [Accu opladen, pagina 21](#).
2. Plaats een volledig opgeladen/nieuwe batterij terwijl u het bovenste deel van de clip ingedrukt houdt.
3. Schuif de batterijklepvergrendeling naar links om het te vergrendelen. De handset start automatisch nadat de batterij is geplaatst.

9 Chemische weerstand

De (alfa)numerieke tekens die op de handset zijn afgedrukt, zijn getest en bestand tegen afbrokkelen, vervagen en slijtage als de handset wordt behandeld met normale reinigings-/ontsmettingsmiddelen of in contact komt met zweet. Aceton kan de plastic behuizing van de handset beschadigen en mag niet worden gebruikt.

Het is aangetoond dat de volgende chemicaliën geen schadelijke effecten hebben:

- 3% zoutzuur
- M-alcohol (70% methylethanol)
- 60% chloorhexidine 0,5 mg/ml

10 Gerelateerde documenten

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Zweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Zweden

Telefoon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom