

Pikaopas



Ascom Myco 4

ascom



Esittely

Ascom Myco™ 4 tukee virtaviivaistettuja työnkulkuja, nopeaa reagointia ja tosiasioihin perustuvia päätöksiä. Ammattitason Ascom Myco 4 -älypuhelin tarjoaa runsaasti käytännöllistä tietoa terveydenhuollon, tuotannon ja muiden vaativien ympäristöjen liikkuvassa työssä oleville työntekijöille. Laitteen perustana on Android™, ja se sisältää useita Ascomin ratkaisuja, jotka täydentävät Androidin vakiotarjontaa.

Tämä pikaopas sisältää Ascom Myco 4 -laitteesi yleisimpien ominaisuuksien lyhyen yhteenvedon.

Pikaoppaan kuvissa on laite, jossa on englanninkielinen käyttöliittymä. Jotkin tässä pikaoppaassa esitellyistä toiminnoista ja näyttökuvista voivat olla erilaisia kuin omassa laitteessasi riippuen järjestelmän määrittämisestä ja laitteen versiosta.

Muista lukea tuotteen toimitukseen sisältyvät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Ascom Myco on Ascom (Sweden) AB:n tavaramerkki.

Android, Google, Google Play ja muut niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Laite	1
Laitemallit	2
Painikkeet	2

Navigointi

Laitteella navigointi	3
-----------------------	-------------------

Yhteydenpito

Puhelut ja viestit	4
--------------------	-------------------

Ilmoitukset

Ilmoitusten yhteenveto	5
Ilmoitusten hallinta	5
Ilmoitusalue	6

Asetukset

Pika-asetuspaneeli	7
--------------------	-------------------

Suojaus

Laitteen suojaus	8
------------------	-------------------

Akku

True Hot Swap	9
Akun matala varaustaso	9
Akun vaihtaminen	10

SIM-kortti

SIM-kortti	11
------------	--------------------

Lataaminen

Laitteen lataaminen	12
Akun lataaminen	14

Laite



- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 Ylin monitoiminäppäin | 10 Liiketunnistin | 19 Rannehinnan kiinnitys*** |
| 2 Ammattimainen viivakoodinlukija* | 11 Kuuloke | 20 Pääkaiutin |
| 3 Ascom IR -paikannus* | 12 Päänäyttö | 21 Vaihdevarra |
| 4 Ylämikrofoni | 13 Riistonaarun portti* | 22 Monitoiminäppäin 2 |
| 5 Monivärinen LED-merkkivalo | 14 Takakamera** | 23 Virtapainike biometrisellä lukijalla |
| 6 Monitoiminäppäin 3 | 15 Taskulamppu | 24 Latausliitäntä |
| 7 Monitoiminäppäin 4 | 16 Pidike | 25 USB-C-portti ja suojus |
| 8 Äänenvoimakkuuspainikkeet | 17 Akku | 26 Alamikrofoni |
| 9 Etukamera | 18 Akun suojakansi | |

* Ei saatavana Slim-malliin.

** Käytetään viivakoodien skannaamiseen Slim-mallissa.

*** Ei saatavana Slim Cellular-malliin.

Laitemallit

Ascom Myco 4:stä on viisi versiota:

	Ascom IR-paikannus	Ammattimainen viivakoodinlukija	Riistonaarun portti	SIM-korttipaikka*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Ei	Ei	Ei	Ei
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	Ei	Ei	Ei	Kyllä
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei

* SIM-korttipaikka sijaitsee akkulokeroissa, ks. [sivu 11](#).

Painikkeet

Laitteessa on virtapainike, äänenvoimakkuuspainikkeet ja neljä määritettävää monitoiminäppäintä.

Monitoiminäppäimet

Laitteen määrytyksistä riippuen monitoiminäppäimiä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten viivakoodin skannaamiseen, hälytyksen lähettämiseen, sovelluksen käynnistämiseen tai Push-to-Talk (PTT) -painikkeena.

Virtapainike (biometrisellä lukijalla)

Paina ja pidä painettuna käynnistäaksesi laitteen.

Tällä painikkeella voit myös lukita näytön ja asettaa sen lepotilaan.

Herätä näyttö lepotilasta, tai kun laitteeseen on lisätty vähintään yksi sormenjälki, avaa laitteen lukitus painamalla virtapainiketta.

Sammuttaaksesi laitteen, paina ja pidä virtapainiketta yhdessä äänenvoimakkuuden lisäspainikkeen kanssa, kunnes virranhallintavalikko tulee näkyviin.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Lisää soittoäänen voimakkuutta painamalla **+** ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **-**.

Laitteella navigointi


Aloitussnäyttö on laitteen päänäkömää, jossa on pikakuvakkeet eri sovelluksiin ja toimintoihin.

Pääset sovellusvalikkoon pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytön alareunasta. Sovellusvalikko sisältää kaikki laitteeseen asennetut sovellukset.

Pääset takaisin aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä alas sovellusvalikossa tai napsauttamalla **Takaisin** tai **Koti**.


Näet luettelon kaikista tällä hetkellä aktiivisista sovelluksista napsauttamalla **Viimeisimmät**.

Voit myös vaihtaa suoraan edelliseen sovellukseen kaksoisnapsauttamalla **Viimeisimmät**.

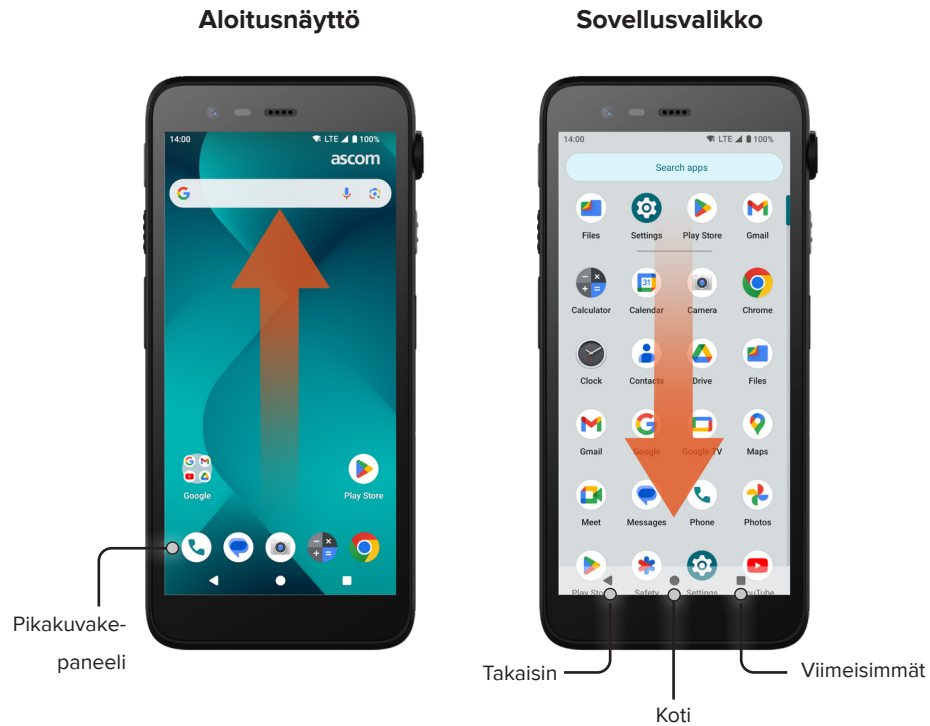


Puhelut ja viestit

- 1 Napsauta sovellusvalikossa **Puhelin** . Vaihtoehtoisesti voit avata sovelluksen aloitusnäytön Pikakuvake-paneelista.
- 2 Valitse puhelinnumeron valitseminen manuaalisesti tai yhteystiedon valitseminen kohdasta Pikavalinta ★, Soittohistoria ⌚ tai Yhteystiedot .

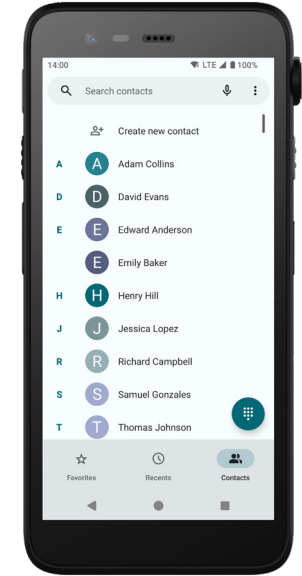

- 1 Napsauta sovellusvalikossa **Messages*** . Vaihtoehtoisesti voit avata sovelluksen aloitusnäytön Pikakuvake-paneelista.
- 2 Napsauta **Aloita chat** , jos haluat kirjoittaa uuden viestin. Napsauta olemassa olevaa keskustelua, jos haluat lukea sen tai vastata siihen.


* Vain Cellular-malleissa saatavilla.

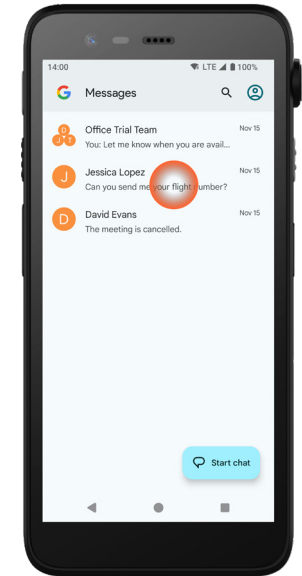

Ilmoitusten yhteenveto

Ilmoitukset näkyvät eri paikoissa ja muodoissa, kuten tilapalkin kuvakkeina tai yksityiskohtaisina teksteinä ilmoitusalueella.

- 1 Kuvake / Sovelluskuvake
- 2 Otsikko
- 3 Sovelluksen nimi
- 4 Aikaleima
- 5 Laajennusosoitin
- 6 Lisätteksti
- 7 Pikatoiminnot

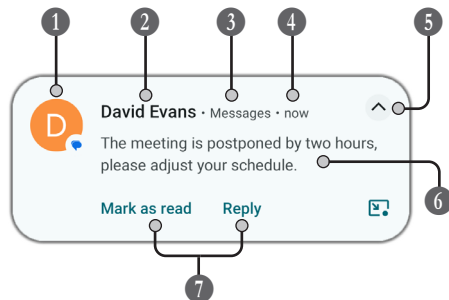




Ilmoitusten hallinta

Lukitusnäytössä ilmoituksia voidaan hallita kolmella tavalla:

Katso koko sisältö napsauttamalla laajennusosoitinta ▼ tai pyyhkäisemällä ilmoitusta alaspäin.

Avaa ilmoituksen lähettänyt sovellus napsauttamalla ilmoitusta.

Hylkää ilmoitus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle (jos sallittu).

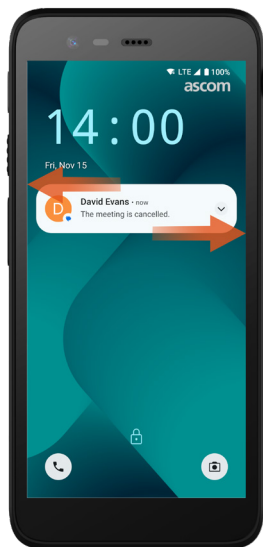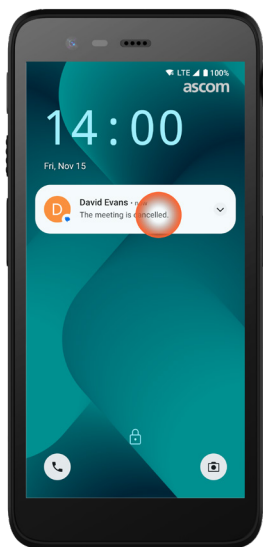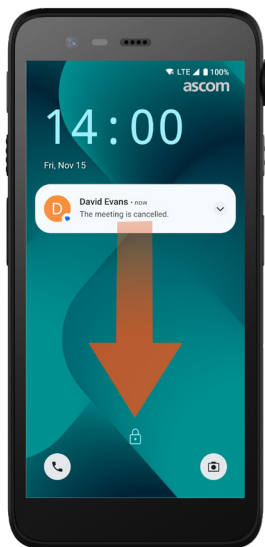

Ilmoitusalue

Saapuvat ilmoitukset näkyvät ensin kuvakkeina tilapalkissa näytön yläreunassa osoittamassa, että ilmoitusalueella on uusia tietoja.





Ilmoitusalueella on luettelo kaikista ilmoituksista, kuten vastaamattomista puheluista, keskusteluista sekä järjestelmä- ja sovellusviesteistä.

Voit avata ilmoitusalueen sekä lukitsemattomassa tilassa että lukitusnäytössä.

Avaa ilmoitusalue pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta.

Piilota ilmoitusalue pyyhkäisemällä ylöspäin tai napsauttamalla ilmoituksen ulkopuolella.

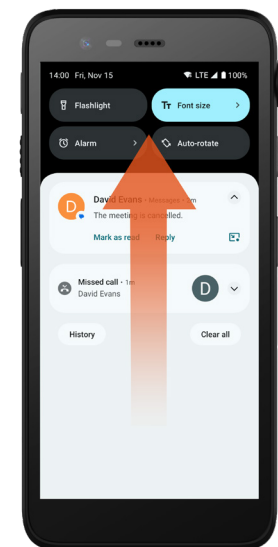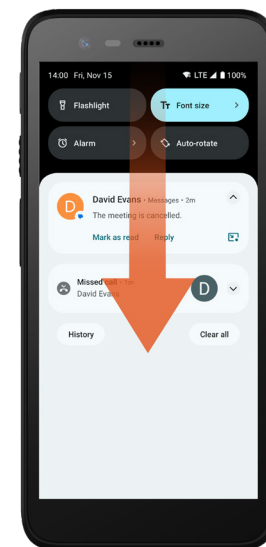

Pika-asetuspaneeli


Pika-asetuspaneelin avulla voit tehdä Ascom Myco 4 -laitteeseesi nopeita muutoksia, kuten muuttaa näytön kirkkautta tai asettaa laitteen akunsäästötilaan.

Voit avata pika-asetuspaneelin sekä lukitsemattomassa tilassa että lukitusnäytössä.

Jos haluat tarkastella asetuksia, pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta. Asetukset ovat ilmoitusalueen yläpuolella.

Voit avata koko pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä kahdesti alaspäin näytön yläreunasta.

Voit ottaa asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla kyseistä asetusruutua.

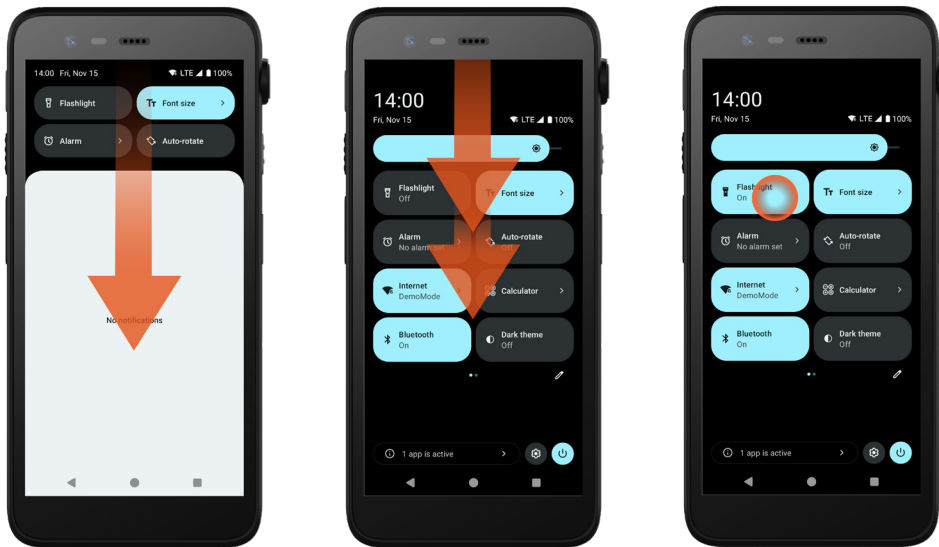

Laitteen suojaus

Noudata näitä suosituksia varmistaaksesi, että laite on vain tarkoitetun henkilön käytettävissä:

- Lukitse laite (sammuta näyttö), ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.
- Vältä asetusten muutoksia, jotka voivat heikentää suojausta, esimerkiksi näytön aikakatkaisun pidentämistä.
- Käytä jotakin seuraavista näytön lukitustavoista: kuvio, PIN-koodi tai salasana.

Näytön lukituksen muuttaminen

Muutaaksesi näytön lukitusmenetelmää, napauta sovellusvalikossa **Asetukset** .

Napsauta sitten **Turvallisuus ja yksityisyys** → **Laitteen lukituksen avaus** → **Näytön lukitus**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Kuvio:** avaa laitteen lukitus piirtämällä sormella kuvio.
- **PIN:** avaa laitteen lukitus syöttämällä PIN-koodi.
- **Salasana:** avaa laitteen lukitus syöttämällä salasana.

True Hot Swap

Ascom Myco 4:ssä on helposti vaihdettava akku, jonka voi vaihtaa sammuttamatta laitetta tai sulkematta käytössä olevia sovelluksia. Hot Swap-toiminnon ansiosta voit jatkaa työskentelyä ja sovellusten käyttöä myös akun vaihtamisen aikana.

- Kun poistat akun, laite on toiminnassa vielä 60 sekuntia.
- Jos akkua ei vaihdeta 60 sekunnin kuluessa, laite sammuu.

Akun matala varaustaso

Jos akun varaustaso on matala, lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun mahdollisimman pian.


20%	Matalasta akun varaustasosta ilmoitetaan varoitussignaaleilla ja ilmoituksella <i>Laitetaanko virransäästö päälle?</i>
10% – 2%	Erittäin matalasta akun varaustasosta ilmoitetaan varoitussignaaleilla, joka kuuluu akun jokaisen prosenttiosuuden muutoksen yhteydessä, ja ilmoituksella <i>Laitetaanko virransäästö päälle?</i> Hiljennä varoitussignaali napsauttamalla Äänetön .
1%	Tyhjästä akusta ilmoitetaan värinällä ja varoitussignaaleilla, joka kuuluu viiden sekunnin välein, ja ilmoituksella <i>Laitetaanko virransäästö päälle?</i> Hiljennä varoitussignaali napsauttamalla Äänetön . HUOMAUTUS: Värinä pysyy päällä, vaikka laitteessa olisi käytössä Älä häiritse -tila tai äänetön tila.

Akun vaihtaminen

- 1 Vapauta akku liu'uttamalla akun suojakansi oikealle.



- 2 Kun painat pidikkeen yläosaa 1 ja pidät siitä kiinni, nosta akkua 2 ja vedä se ulos 3 samalla.

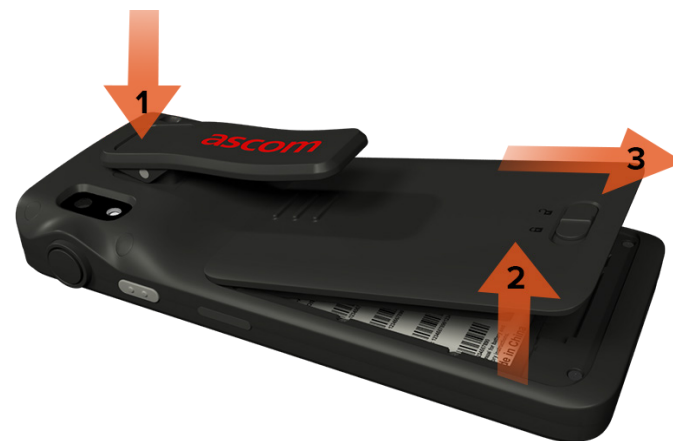

- 3 Paina pidikettä uudelleen ja pidä se painettuna. Aseta laitteeseen täyteen ladattu tai uusi akku ja paina se sisään.
- 4 Paina akkua kevyesti ja lukitse se liu'uttamalla akun suojakansi vasemmalle.

Akku on asetettu oikein, jos se on täysin linjassa laitteen rungon kanssa.

SIM-kortti*

SIM-kortin asettaminen

- 1 Sammuta laite, avaa sitten akun lukitus ja poista akku.
- 2 Aseta SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan, joka on merkitty SIM-kortin symbolilla akkulokeron tarrassa.



- 3 Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan, kunnes kuulet napsahduksen.
SIM-kortti on asetettu oikein, jos se on täysin linjassa akkulokeron sivun kanssa.
- 4 Aseta akku ja lukitse se paikalleen. Laitteeseen voi nyt kytkeä virran.

SIM-kortin poistaminen


- 1 Sammuta laite, avaa sitten akun lukitus ja poista akku.
- 2 Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan, kunnes kuulet napsahduksen, ja poista sitten SIM-kortti vetämällä se ulos.
- 3 Aseta akku ja lukitse se paikalleen. Laitteeseen voi nyt kytkeä virran.

* Vain Cellular-malleissa saatavilla.


Laitteen lataaminen

- 1 Aseta laite laturimoduuliin. Työnnä laite laturimoduuliin kokonaan paikalleen. Kun laite on asetettu oikein, se alkaa latautua latauksen merkkiäänellä.
- 2 Kun latausnäytymän akkukuvake vaihtuu vihreäksi ja LED-valo vihreäksi, laite on ladattu täyteen, mikä näyttää akun varaustason arvona 95–100%.
- 3 Poista laite laturimoduulista kallistamalla laitetta itseäsi kohti ja nostamalla sitten laitetta ylöspäin.

Yksittäinen laturimoduuli

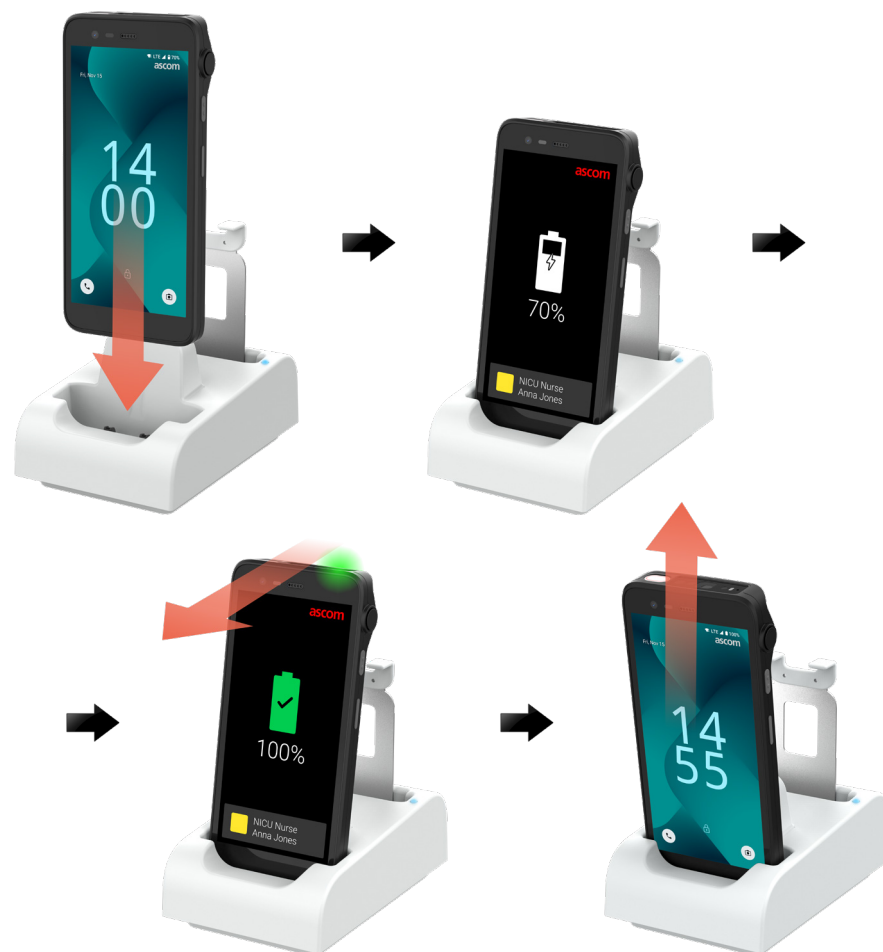

Laturimoduuli lataustelineessä

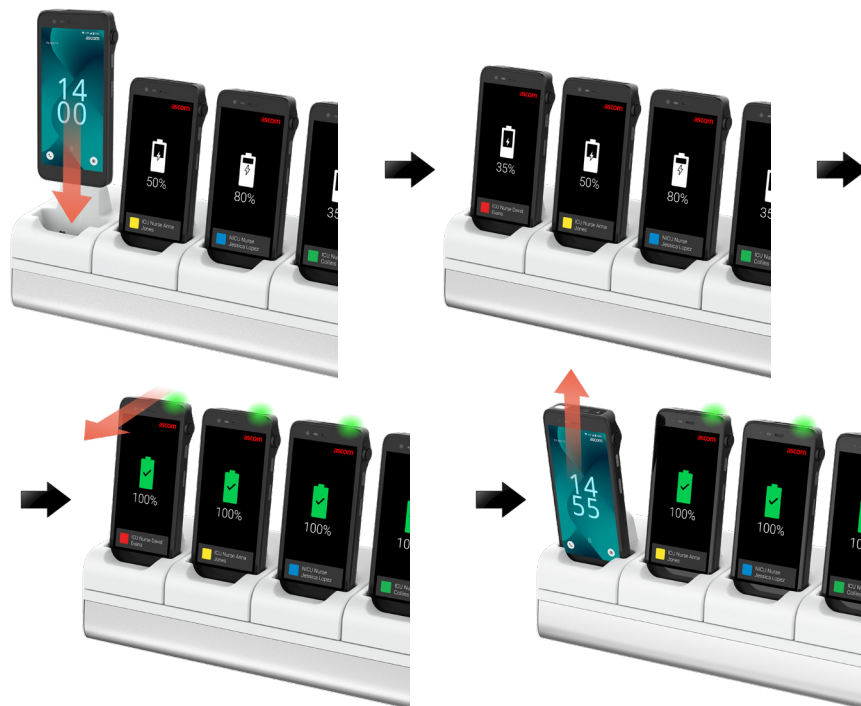

USB-C-kaapeli


- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva latausportin suojus.
- 2 Liitä USB-C-kaapeli latausporttiin ja kytke USB-virtalähde pistorasiaan.
- 3 Kun LED-merkkivalo vaihtuu vihreäksi, laite on ladattu täyteen.
- 4 Irrota USB-C-kaapeli ja sulje latausportti.




Akun lataaminen

- 1 Irrota akku laitteesta ja aseta se laturimoduuliin.
- 2 Työnnä akkua kevyesti ja lukitse se naksauttaen. Kun akku on asetettu oikein paikalleen, LED-merkkivalo vaihtuu oranssiksi ilmaisten sen, että akku latautuu.
- 3 Kun LED-merkkivalo vaihtuu vihreäksi, akku on ladattu täyteen.
- 4 Poista akku laturimoduulista kallistamalla akkua itseäsi kohti ja nostamalla sitä sitten ylöspäin.

Yksittäinen laturimoduuli

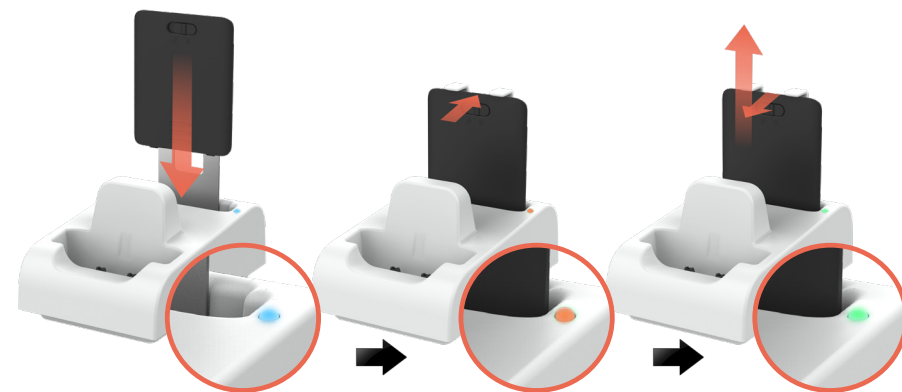

Laturimoduuli lataustelineessä

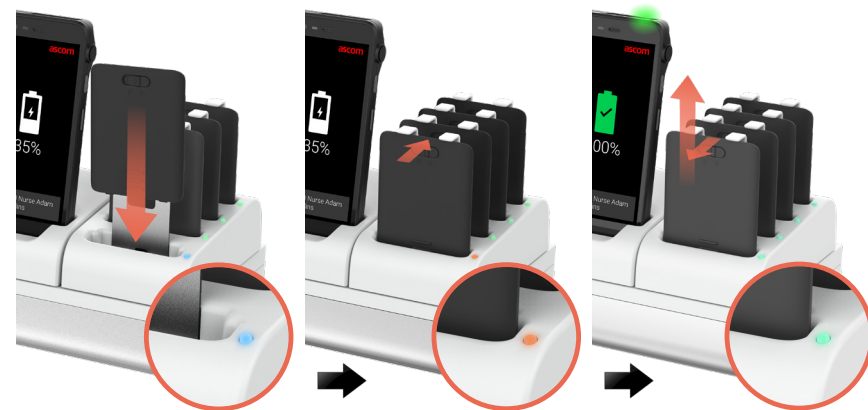

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Ruotsi

Puhelin: +46 31 55 93 00

www.ascom.com