

Skrócona instrukcja obsługi



Ascom Myco 4

ascom



Wprowadzenie

Ascom Myco™ 4 obsługuje usprawniony przepływ pracy, szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji oparte na faktach. Korporacyjny smartfon Ascom Myco 4 dostarcza praktycznych, kontekstowych informacji personelowi mobilnemu w służbie zdrowia, produkcji i innych wymagających środowiskach. Telefon oparty jest na systemie Android™ i zawiera kilka rozwiązań firmy Ascom uzupełniających standardową funkcjonalność systemu Android.

Ta Skrócona instrukcja obsługi (QRG) zawiera przegląd najczęstszych funkcji telefonu Ascom Myco 4.

Ilustracje w QRG przedstawiają telefon z angielskim interfejsem użytkownika. Niektóre funkcje i rzuty ekranu przedstawione w skróconej instrukcji obsługi (QRG) mogą się różnić od funkcji w telefonie w zależności od konfiguracji systemu i wersji telefonu.

Pamiętaj, aby przed użyciem telefonu zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do produktu.

Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ascom Myco jest znakiem towarowym firmy Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Spis treści

Przegląd

Telefon	1
Modele telefonu	2
Przyciski	2

Nawigacja

Nawigacja po telefonie	3
------------------------	-------------------

Komunikacja

Połączenia i wiadomości	4
-------------------------	-------------------

Powiadomienia

Przegląd powiadomień	5
Zarządzanie powiadomieniami	5
Obszar powiadomień	6

Ustawienia

Panel Szybkie ustawienia	7
--------------------------	-------------------

Zabezpieczenia

Bezpieczne korzystanie z telefonu	8
-----------------------------------	-------------------

Bateria

Pełna obsługa Hot Swap	9
Niski poziom baterii	9
Wymiana baterii	10

Karta SIM

Karta SIM	11
-----------	--------------------

Ładowanie

Ładowanie telefonu	12
Ładowanie baterii	14

Telefon



- 1 Górny przycisk wielofunkcyjny

2 Profesjonalny skaner kodów kreskowych*

3 Lokalizacja Ascom IR*

4 Mikrofon górny

5 Wielokolorowa dioda LED

6 Przycisk wielofunkcyjny 3

7 Przycisk wielofunkcyjny 4

8 Przyciski głośności

9 Przednia kamera
- 10 Czujnik zbliżeniowy

11 Głośnik telefonu

12 Główny wyświetlacz

13 Port sznurkowy*

14 Tylna kamera**

15 Latarka

16 Uchwyt

17 Bateria

18 Blokada pokrywy baterii
- 19 Mocowanie paska na nadgarstek***

20 Głośnik główny

21 Wymienna kolorowa naklejka

22 Przycisk wielofunkcyjny 2

23 Przycisk zasilania z czytnikiem biometrycznym

24 Złącze ładowania

25 Port USB-C z zatyczką

26 Dolny mikrofon

* Niedostępne w modelu Slim.
** Służy do skanowania kodów kreskowych w modelu Slim.
*** Niedostępne w modelu Slim Cellular.

Modele telefonu

Ascom Myco 4 występuje w pięciu wariantach:

	Lokalizacja Ascom IR	Profesjonalny skaner kodów kreskowych	Port sznurkowy	Gniazdo karty SIM*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Tak	Tak	Tak	Nie
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Tak	Tak	Tak	Tak
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nie	Nie	Nie	Nie
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	Nie	Nie	Nie	Tak
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Tak	Tak	Tak	Nie

* Gniazdo karty SIM znajduje się w komorze baterii, patrz [strona 11](#).

Przyciski

Telefon jest wyposażony w przycisk zasilania, przyciski głośności oraz cztery konfigurowalne przyciski wielofunkcyjne.

Przyciski wielofunkcyjne

W zależności od konfiguracji przyciski wielofunkcyjne mogą służyć do różnych celów. Na przykład skanowanie kodu kreskowego, wysyłanie alarmu, uruchamianie aplikacji lub używanie jako przycisku Naciśnij i mów (PTT).

Przycisk zasilania (z czytnikiem biometrycznym)

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć telefon.
Naciśnij, aby zablokować i przełączyć ekran w tryb uśpienia.
Naciśnij, aby wybudzić ekran z trybu uśpienia lub aby odblokować telefon, jeśli do telefonu zostanie dodany co najmniej jeden odcisk palca.
Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania razem z przyciskiem zwiększania głośności, aż pojawi się menu zasilania.

Przyciski głośności

Naciśnij w górę **+**, aby zwiększyć głośność. Naciśnij w dół **-**, aby zmniejszyć głośność.

Nawigacja po telefonie


Ekran główny to główny widok telefonu ze skrótami do różnych aplikacji i funkcji.

Aby uzyskać dostęp do panelu aplikacji, przesunąć palcem od dołu do góry na ekranie głównym. Panel aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane na telefonie.

Aby wrócić do ekranu głównego, przesunąć palcem w dół na ekranie panelu aplikacji albo naciśnij **Wróć** lub **Ekran główny**.


Naciśnij **Przegląd**, aby wyświetlić listę wszystkich aktualnie aktywnych aplikacji.

Można też dwukrotnie nacisnąć opcję **Przegląd**, aby bezpośrednio przełączyć się do poprzedniej aplikacji.

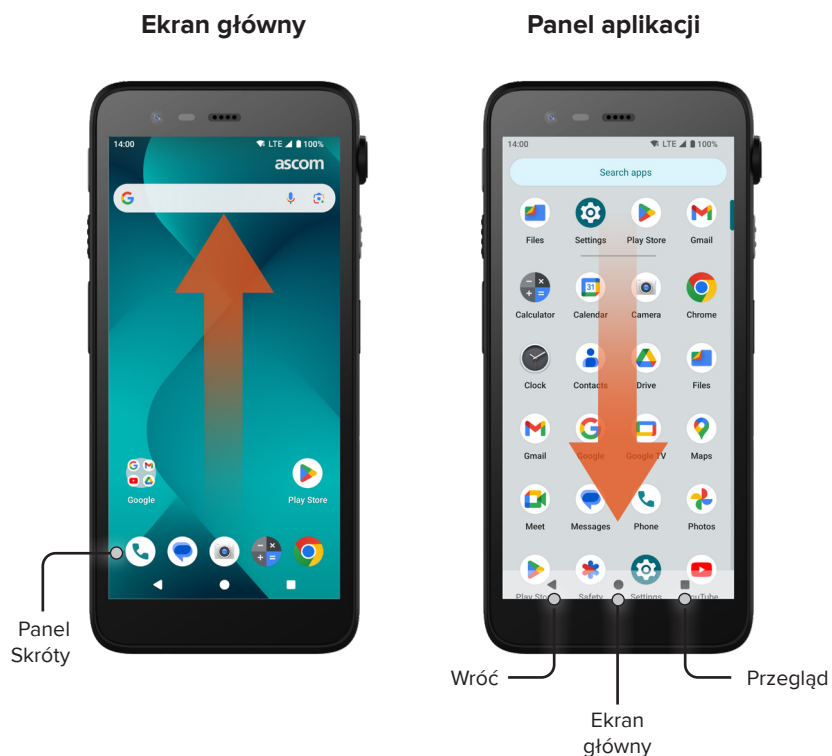


Połączenia i wiadomości

- 1 W panelu aplikacji naciśnij **Telefon** . Można też otworzyć aplikację z panelu Skrótów na ekranie głównym.
- 2 Wybierz między ręcznym wybieraniem numeru telefonu a wybieraniem kontaktu z Szybkiego wybierania , Historii połączeń lub Kontaktów .

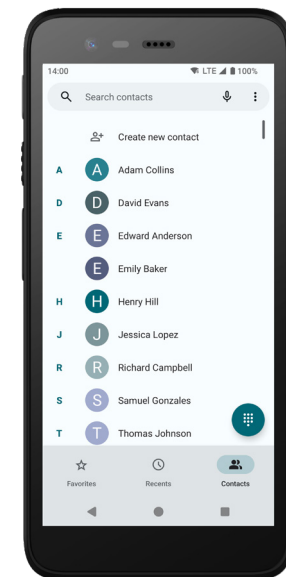

- 1 W panelu aplikacji naciśnij **Wiadomości*** . Można też otworzyć aplikację z panelu Skrótów na ekranie głównym.
- 2 Naciśnij ikonę **Rozpocznij czat** , aby napisać nową wiadomość; lub naciśnij istniejącą rozmowę, aby ją przeczytać i na nią odpowiedzieć.


* Tylko dostępne w modelach Cellular.

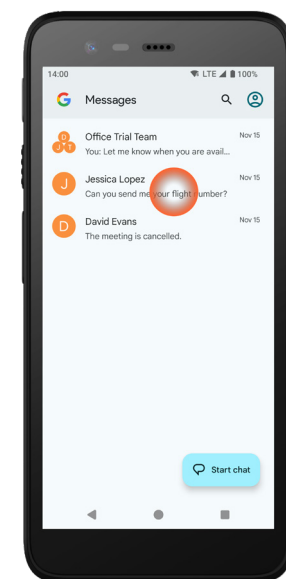

Przegląd powiadomień

Powiadomienia są wyświetlane w różnych miejscach i formatach, na przykład jako ikony na pasku stanu lub jako szczegółowe teksty w obszarze powiadomień.

- 1 Ikona / Ikona aplikacji
- 2 Tytuł / Nagłówek
- 3 Nazwa aplikacji
- 4 Znacznik czasu
- 5 Wskaźnik rozwijania
- 6 Tekst pomocniczy
- 7 Szybkie akcje

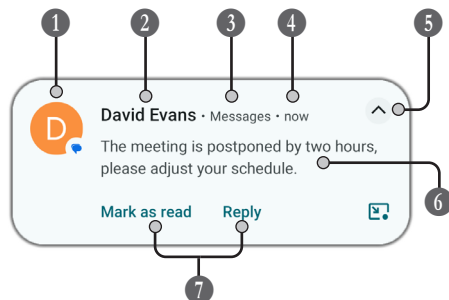




Zarządzanie powiadomieniami

Na ekranie blokady można odpowiedzieć na alert na trzy sposoby:

Naciśnij wskaźnik rozwijania ▼ lub przesunąć powiadomienie w dół, aby zobaczyć pełną zawartość.

Naciśnij powiadomienie, aby otworzyć aplikację, która je wysłała.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby odrzucić powiadomienie (jeśli jest to dozwolone).

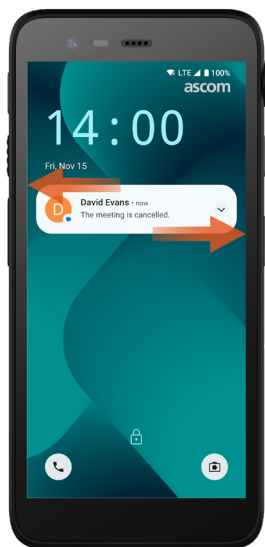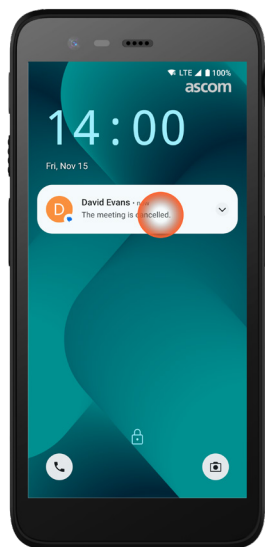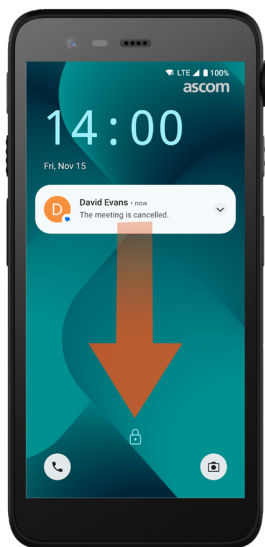

Obszar powiadomień

Powiadomienia przychodzące są najpierw wyświetlane jako ikony na pasku stanu u góry ekranu, aby pokazać, że w obszarze powiadomień znajdują się nowe informacje.





Obszar powiadomień zawiera listę wszystkich powiadomień, takich jak nieodebrane połączenia, rozmowy, komunikaty systemowe i z aplikacji.

Obszar powiadomień można otworzyć zarówno w trybie odblokowanym, jak i na ekranie blokady.

Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć obszar powiadomień.

Przesuń palcem do góry lub naciśnij palcem poza obszarem powiadomienia, aby ukryć obszar powiadomień.

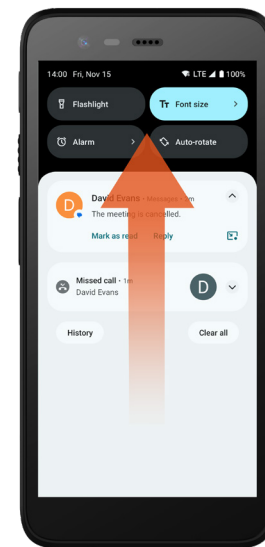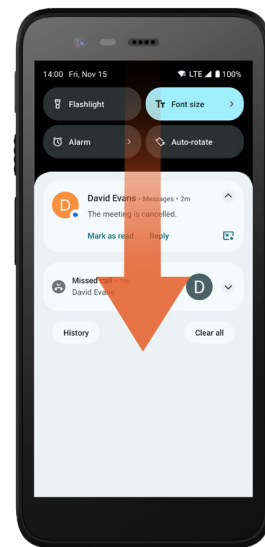

Panel Szybkie ustawienia


Panel Szybkie ustawienia może być używany do wprowadzania szybkich zmian w Ascom Myco 4, takich jak zmiana jasności ekranu lub przełączenie telefonu w tryb oszczędzania baterii.

Panel Szybkie ustawienia można otworzyć zarówno w trybie odblokowanym, jak i na ekranie blokady.

Aby zobaczyć wybrane ustawienia, przesunąć palcem w dół od góry ekranu. Ustawienia znajdują się nad obszarem powiadomień.

Aby otworzyć cały panel Szybkie ustawienia, przesunąć dwukrotnie palcem w dół od góry ekranu.

Aby włączyć/wyłączyć ustawienie, dotknij odpowiedniego kafelka ustawienia.

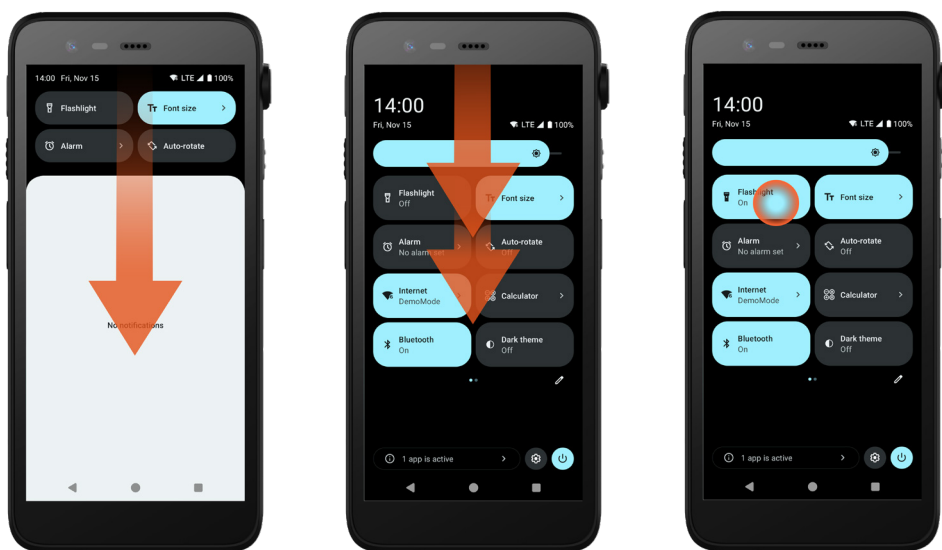

Bezpieczne korzystanie z telefonu

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby upewnić się, że telefon jest dostępny tylko dla przeznaczonego personelu:

- Zablokuj urządzenie (wyłącz ekran) przed pozostawieniem go bez nadzoru.
- Unikaj zmian ustawień, które mogą obniżyć poziom bezpieczeństwa, na przykład wydłużenie czasu wygaszenia ekranu.
- Użyj jednej z następujących metod blokady ekranu: wzoru, kodu PIN lub hasła.

Zmiana blokady ekranu

Aby zmienić metodę blokady ekranu, w panelu aplikacji stuknij **Ustawienia** .

Następnie naciśnij opcję **Bezpieczeństwo i prywatność** → **Odblokowywanie urządzenia** → **Blokada ekranu**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wzór**, aby narysować wzór w celu odblokowania telefonu.
- **Kod PIN**, aby wprowadzić kod PIN w celu odblokowania telefonu.
- **Hasło**, aby wprowadzić hasło w celu odblokowania telefonu.

Pełna obsługa Hot-Swap

Ascom Myco 4 ma łatwo wymienną baterię, którą można wymienić bez wyłączania telefonu lub wychodzenia z aktywnych aplikacji. Dzięki funkcji hot-swap można kontynuować pracę i korzystać z aplikacji nawet podczas wymiany baterii.

- Po wyjęciu baterii telefon działa przez kolejne 60 sekund.
- Jeśli bateria nie zostanie wymieniona w ciągu 60 sekund, telefon wyłączy się.

Niski poziom baterii

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, jak najszybciej naładuj baterię lub zmień ją na w pełni naładowaną.

- | | |
|----------|---|
| 20% | Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany sygnałem ostrzegawczym i komunikatem Włączyć Oszczędzanie baterii? |
| 10% – 2% | Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany sygnałem ostrzegawczym przy każdej zmianie wartości procentowej naładowania i komunikatem Włączyć Oszczędzanie baterii?

Naciśnij opcję Wyciszenie , aby wyciszyć sygnał ostrzegawczy. |
| 1% | Rozładowanie baterii jest sygnalizowane wibracjami i sygnałem ostrzegawczym, który rozlega się co pięć sekund, i komunikatem Włączyć Oszczędzanie baterii?

Naciśnij opcję Wyciszenie , aby wyciszyć sygnał ostrzegawczy.


UWAGA: Wibracja pozostanie włączona nawet wtedy, gdy w telefonie zostanie włączony tryb Nie przeszkadzać lub tryb cichy. |

Wymiana baterii

- 1 Przesuń blokadę osłony baterii, aby zwolnić baterię.



- 2 Naciskając i przytrzymując górną część zacisku 1, podnieś baterię 2 i wyciągnij ją 3.

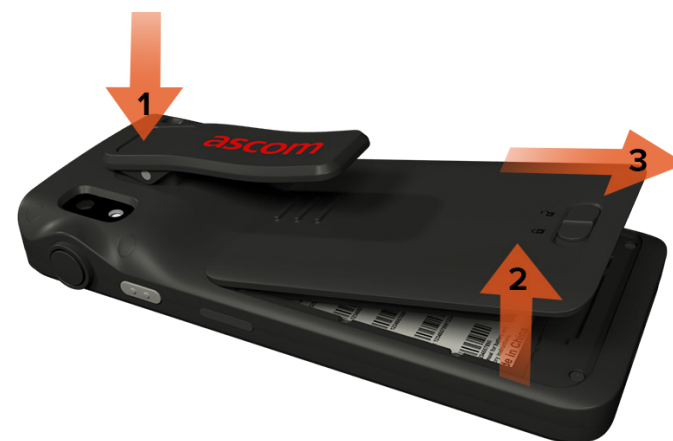

- 3 Ponownie naciśnij i przytrzymaj uchwyt. Włóż w pełni naładowaną lub nową baterię i wciśnij ją.
- 4 Lekko naciśnij baterię i przesuń blokadę pokrywy baterii w lewo, aby zablokować baterię.

Bateria jest prawidłowo włożona, jeśli jest całkowicie wyrównana z korpusem telefonu.

Karta SIM*

Wkładanie karty SIM

- 1 Wyłącz telefon, a następnie odblokuj i wyjmij baterię.
- 2 Ostrożnie włóż kartę SIM do gniazda oznaczonego symbolem karty SIM na etykiecie w komorze baterii.



- 3 Wciśnij kartę SIM do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Karta SIM jest prawidłowo włożona, jeśli jest całkowicie wyrównana z bokiem komory baterii.
- 4 Włóż baterię i zablokuj ją na miejscu. Telefon można teraz włączyć.

Wymowanie karty SIM

- 1 Wyłącz telefon, a następnie odblokuj i wyjmij baterię.
- 2 Wciśnij kartę SIM do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie pociągnij ją, aby wyjąć.
- 3 Włóż baterię i zablokuj ją na miejscu. Telefon można teraz włączyć.

* Tylko dostępne w modelach Cellular.


Ładowanie telefonu

- 1 Umieść telefon w module ładowarki. Wsuń telefon do końca do modułu ładowarki. Po prawidłowym włożeniu telefonu rozpoczyna się ładowanie sygnalizowane za pomocą sygnału dźwiękowego.
- 2 Gdy ikona baterii na ekranie ładowania zmieni kolor na zielony, a dioda LED zmieni kolor na zielony, telefon będzie w pełni naładowany, wskazując poziom naładowania baterii od 95% do 100%.
- 3 Aby odłączyć telefon, przechyl telefon do siebie, a następnie podnieś go do góry, aby wyjąć z modułu ładowarki.

Pojedynczy moduł ładowarki



Moduł ładowarki w listwie do ładowania

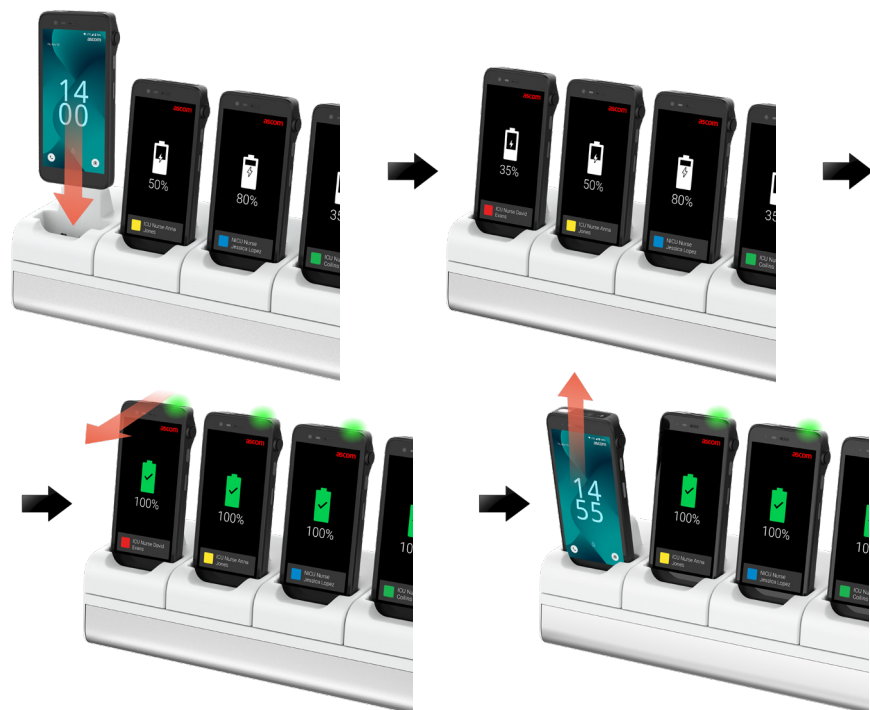

Przewód USB-C


- 1 Zdejmij osłonę złącza ładowania w dolnej części telefonu.
- 2 Podłącz kabel USB-C do portu ładowania i podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
- 3 Gdy dioda LED zmieni kolor na zielony, telefon jest w pełni naładowany.
- 4 Odłącz kabel USB-C i zamknij port ładowania.




Ładowanie baterii

- 1 Wyjmij baterię z telefonu i umieść ją w module ładowarki.
- 2 Lekko popchnij baterię i zablokuj ją, co będzie potwierdzone kliknięciem. Po prawidłowym włożeniu baterii wskaźnik LED zaświeci się na pomarańczowo, sygnalizując ładowanie baterii.
- 3 Gdy dioda LED zmieni kolor na zielony, bateria jest w pełni naładowana.
- 4 Aby odłączyć baterię, przechyl baterię do siebie, a następnie podnieś ją do góry, aby wyjąć z modułu ładowarki.

Pojedynczy moduł ładowarki

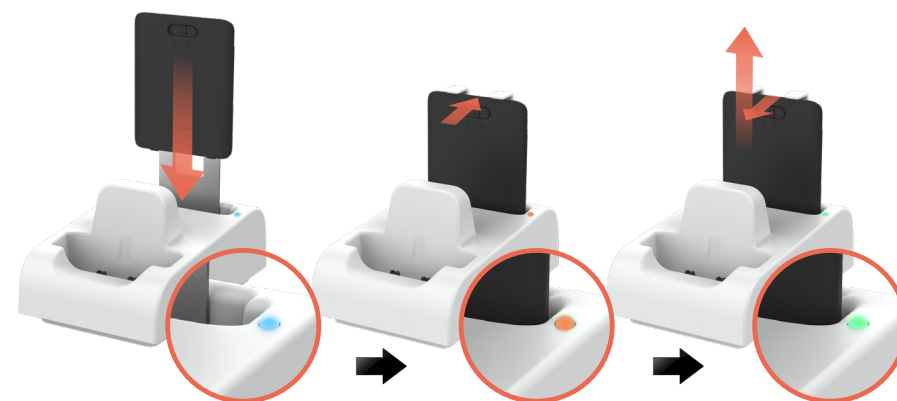

Moduł ładowarki w listwie do ładowania

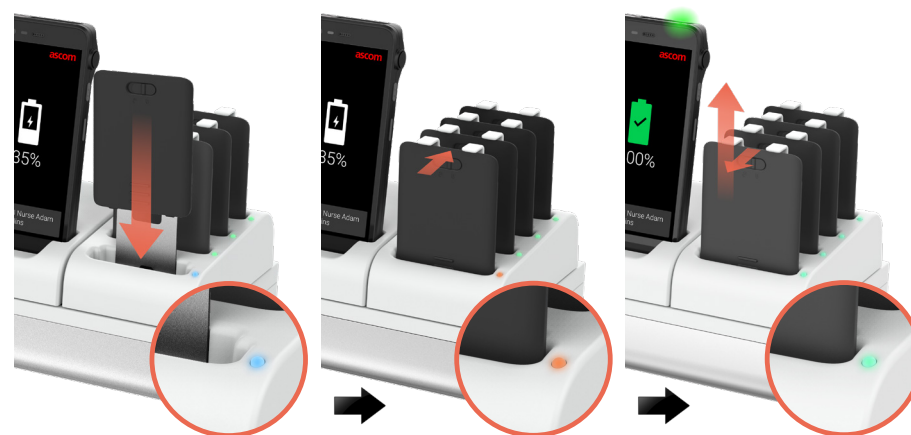

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Szwecja

Tel.: +46 31 55 93 00

www.ascom.com