

Guia de Referência Rápida



Ascom Myco 4

ascom



Introdução

O Ascom Myco™ 4 permite-lhe agilizar os fluxos de trabalho, obter respostas rápidas e tomar decisões informadas. O smartphone Ascom Myco 4 para empresas disponibiliza informações práticas e contextualizadas aos profissionais em mobilidade nos cuidados de saúde, indústria e outros setores complexos. O terminal é baseado no Android™ e inclui várias soluções Ascom que complementam a oferta padrão do Android.

Este Guia de Referência Rápida (QRG) contém uma breve visão geral dos recursos mais comuns do Ascom Myco 4.

As imagens do QRG mostram um terminal com uma interface de utilizador em inglês. Algumas funcionalidades e imagens de ecrã descritas neste QRG podem diferir do seu terminal, dependendo da configuração do sistema e da versão do terminal.

Certifique-se de que lê as instruções de segurança que acompanham o produto antes de utilizar o terminal.

A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio.

Ascom Myco é uma marca comercial da Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.

ascom

© 2023 Ascom. Todos os direitos reservados. TD 93546PT / Novembro de 2024 / Ver. E

Índice de conteúdos

Visão geral

Terminal	1
Modelos de terminal	2
Botões	2

Navegação

Navegação do terminal	3
-----------------------	-------------------

Comunicação

Chamadas e mensagens	4
----------------------	-------------------

Notificações

Visão geral das notificações	5
Gerir as notificações	5
Painel de notificações	6

Definições

Painel Definições rápidas	7
---------------------------	-------------------

Segurança

Segurança do terminal	8
-----------------------	-------------------

Bateria

Verdadeiro Hot-Swap	9
Bateria fraca	9
Substituição da bateria	10

Cartão SIM

Cartão SIM	11
------------	--------------------

A carregar

Carregamento do terminal	12
Carregamento da bateria	14

ascom

© 2023 Ascom. Todos os direitos reservados. TD 93546PT / Novembro de 2024 / Ver. E

Terminal



- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 Botão multifunções superior | 10 Sensor de proximidade | 19 Fixação da correia de pulso*** |
| 2 Leitor de códigos de barras profissional* | 11 Auscultador | 20 Altifalante principal |
| 3 Localização Ascom IR* | 12 Display principal | 21 Autocolante de cor substituível |
| 4 Microfone superior | 13 Porta de cordão de puxar* | 22 Botão multifunções 2 |
| 5 LED multicor | 14 Câmara traseira** | 23 Botão de ligar/desligar com leitor biométrico |
| 6 Botão multifunções 3 | 15 Lanterna | 24 Conector de carregamento |
| 7 Botão multifunções 4 | 16 Clipe | 25 Porta USB-C com tampa |
| 8 Botões de volume | 17 Bateria | 26 Microfone inferior |
| 9 Câmara frontal | 18 Fecho da tampa da bateria | |

* Não disponível no modelo Slim.

** Utilizado para a leitura de códigos de barras no modelo Slim.

*** Não disponível no modelo Slim Cellular.

Modelos de terminal

O Ascom Myco 4 está disponível em cinco variantes:

	Localização Ascom IR	Leitor de códigos de barras profissional	Porta de cordão de puxar	Ranhura para cartão SIM*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Sim	Sim	Sim	Não
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Sim	Sim	Sim	Sim
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Não	Não	Não	Não
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	Não	Não	Não	Sim
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Sim	Sim	Sim	Não

* A ranhura para cartão SIM está localizada no compartimento das baterias, consulte a [página 11](#).

Botões

O terminal está equipado com um botão de ligar/desligar, botões de volume e quatro botões multifunções configuráveis.

Botões multifunções

Dependendo da configuração, os botões multifunções podem ser usados para objetivos diferentes. Por exemplo, para digitalizar um código de barras, enviar um alarme, iniciar uma aplicação ou usar como botão push-to-talk (premir para falar).

Botão de ligar/desligar (com leitor biométrico)

Pressione e segure para ligar o terminal.

Pressione para bloquear e colocar o ecrã no modo de suspensão.

Pressione para ativar o ecrã a partir do modo de suspensão ou, quando pelo menos uma impressão digital é adicionada ao terminal, para desbloquear o terminal.

Para desligar o terminal, pressione e segure o botão de ligar/desligar junto com o botão de aumentar o volume até que o menu de energia apareça.

Botões de volume

Pressione para cima **+** para aumentar ou pressione para baixo **-** para diminuir o nível do volume.

Navegação do terminal

O ecrã principal é a vista principal do terminal, com atalhos para várias aplicações e funções.

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã principal para aceder à gaveta de apps. A gaveta de apps contém todas as aplicações instaladas no terminal.

Para voltar ao ecrã principal, deslize para baixo na gaveta de apps ou toque em **Anterior** ou **Página inicial**.

Toque em **Visão geral** para ver a lista de todas as aplicações ativas.


Em alternativa, toque duas vezes em **Visão geral** para mudar diretamente para a aplicação anterior.

Ecrã principal



Painel de atalhos

Gaveta de apps

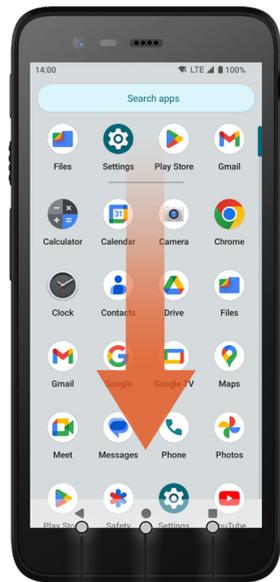


Anterior

Página inicial

Visão geral


Chamadas e mensagens

- 1 Na gaveta de apps, toque em **Telefone** . Em alternativa, abra a aplicação a partir do painel de atalhos no ecrã principal.
- 2 Escolha entre marcar manualmente o número de telefone ou seleccionar um contacto da Marcação , Chamadas ou Contactos .

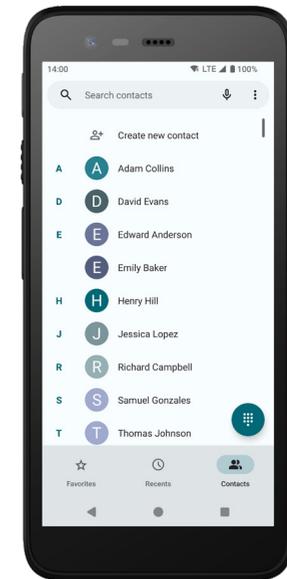

- 1 Na gaveta de apps, toque em **Mensagens*** . Em alternativa, abra a aplicação a partir do painel de atalhos no ecrã principal.
- 2 Toque no ícone de **Iniciar chat** para escrever uma nova mensagem ou toque numa conversa existente para ler e responder.


* Apenas disponível em modelos Celular.

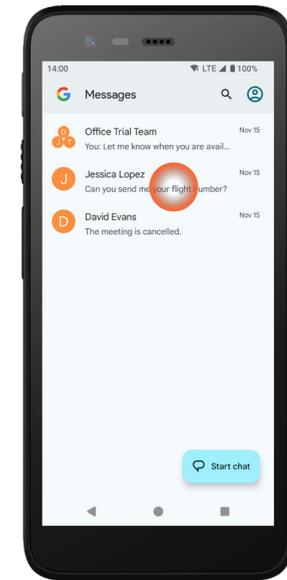

Visão geral das notificações

As notificações são apresentadas em diferentes locais e formatos, como ícones na barra de estado ou como textos detalhados no painel de notificações.

- 1 Ícone/ícone da aplicação
- 2 Título/cabeçalho
- 3 Nome da aplicação
- 4 Carimbo de data/hora
- 5 Indicador de expansão
- 6 Texto complementar
- 7 Ações rápidas

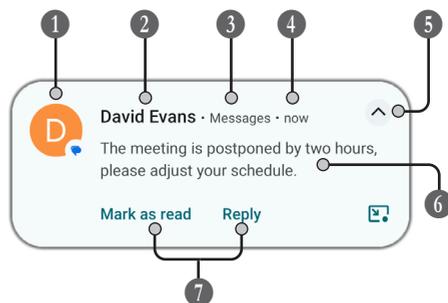

Gerir as notificações

Há três formas de gerir as notificações no ecrã de bloqueio:

Toque no indicador de expansão ▼ ou deslize a notificação para baixo para ver o conteúdo completo.

Toque na notificação para abrir a aplicação que a enviou.

Deslize para a esquerda ou para a direita para ignorar a notificação (se permitido).



Painel de notificações

As notificações recebidas aparecem primeiro como ícones na barra de estado na parte superior do ecrã, para mostrar que há novas informações no painel de notificações.





O painel de notificações apresenta uma lista de notificações, tais como chamadas não atendidas, conversas, mensagens do sistema e de aplicações.

Pode abrir o painel de notificações tanto no modo desbloqueado como no ecrã de bloqueio.

Para abrir o painel de notificações, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.

Para ocultar o painel de notificações, deslize o dedo para cima ou toque no exterior da notificação.

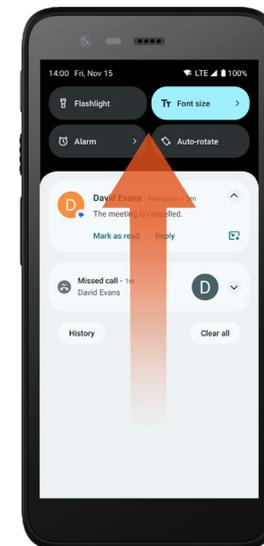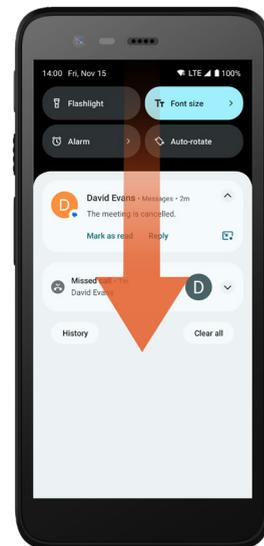

Painel Definições rápidas


O painel Definições rápidas pode ser utilizado para efetuar algumas alterações rápidas no Ascom Myco 4, tais como alterar a luminosidade do ecrã ou colocar o terminal no modo de poupança de bateria.

Pode abrir o painel Definições rápidas tanto no modo desbloqueado como no ecrã de bloqueio.

Para ver uma série de definições, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã. As definições estão acima do painel de notificações.

Para abrir o painel Definições rápidas na totalidade, deslize duas vezes para baixo a partir da parte superior do ecrã.

Para ativar/desativar uma configuração, toque no respetivo bloco de configuração.

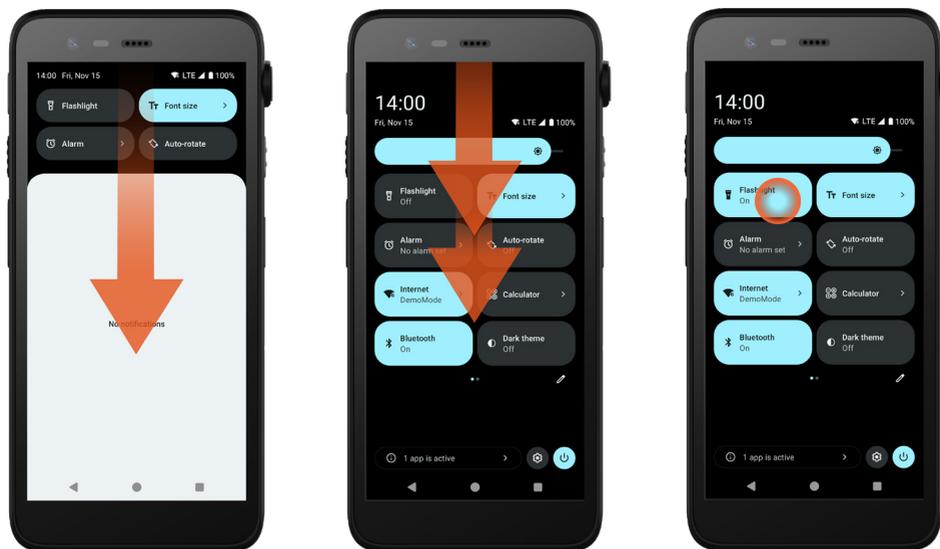

Segurança do terminal

Siga estas recomendações para garantir que o terminal só está acessível ao pessoal a que se destina:

- Bloqueie o dispositivo (desligue o ecrã) antes de o deixar sem supervisão.
- Evite alterar quaisquer definições que possam diminuir a segurança, por exemplo, aumentar o tempo limite do ecrã.
- Use um dos seguintes métodos de bloqueio de ecrã: padrão, PIN ou palavra-passe.

Alterar o bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio de tela, no panel aplikacjji toque em **Definições** .

Depois, toque em **Segurança e privacidade** → **Desbloqueio do dispositivo** → **Bloqueio de ecrã**.

Escolha uma das seguintes opções:

- **Padrão** para desenhar um padrão para desbloquear o terminal.
- **PIN** para inserir um código PIN para desbloquear o terminal.
- **Palavra-passe** para inserir uma palavra-passe para desbloquear o terminal.

Verdadeiro Hot Swap

O Ascom Myco 4 tem uma bateria facilmente substituível que pode ser trocada sem desligar o terminal ou sair das aplicações ativas. Com a funcionalidade hot swap pode continuar a trabalhar e a utilizar as aplicações mesmo quando a bateria está a ser trocada.

- Ao retirar a bateria, o terminal continua a funcionar durante mais 60 segundos.
- Se a bateria não for substituída dentro de 60 segundos, o terminal desliga.

Bateria fraca

Se o nível da bateria estiver baixo, carregue-a ou troque-a por uma totalmente carregada assim que possível.

- | | |
|----------|---|
| 20% | Um nível de bateria baixo é indicado através de um sinal de aviso e da notificação <i>Ativar a Poupança de bateria?</i> |
| 10% – 2% | Um nível de bateria muito baixo é indicado através de um sinal de aviso que soa sempre que a percentagem da bateria muda e da notificação <i>Ativar a Poupança de bateria?</i>

Toque em Ignorar para desligar o sinal de aviso. |
| 1% | Uma bateria descarregada é indicada através de uma vibração e de um sinal de aviso que soa de cinco em cinco segundos, bem como da notificação <i>Ativar a Poupança de bateria?</i>

Toque em Ignorar para desligar o sinal de aviso.

NOTA: A vibração mantém-se ligada mesmo que o modo Não incomodar ou o modo silencioso estejam ativados no terminal. |

Substituição da bateria

- 1 Deslize o fecho da tampa da bateria para a direita para libertar a bateria.



- 2 Enquanto pressiona e segura na parte superior do clipe 1, levante a bateria 2 e puxe-a para fora 3.



- 3 Pressione e mantenha pressionado o clipe mais uma vez. Insira uma bateria totalmente carregada ou nova e exerça pressão sobre ela.
- 4 Pressione ligeiramente a bateria e faça deslizar o fecho da tampa da bateria para a esquerda para fixar a bateria.

A bateria está bem inserida se estiver totalmente alinhada com o corpo do terminal.

Cartão SIM*

Inserir cartão SIM

- 1 Desligue o terminal e, em seguida, solte e retire a bateria.
- 2 Insira cuidadosamente o cartão SIM na ranhura do cartão SIM, indicada pelo símbolo de cartão SIM na etiqueta no compartimento da bateria.



- 3 Empurre o cartão SIM para dentro da ranhura até ouvir um clique.
O cartão SIM está corretamente inserido se estiver totalmente alinhado com a parte lateral do compartimento da bateria.
- 4 Insira a bateria e fixe-a no lugar. O terminal pode agora ser ligado.

Retirar o cartão SIM

- 1 Desligue o terminal e, em seguida, solte e retire a bateria.
- 2 Empurre o cartão SIM para dentro da ranhura até ouvir um clique e, em seguida, puxe-o para o retirar.
- 3 Insira a bateria e fixe-a no lugar. O terminal pode agora ser ligado.

* Apenas disponível em modelos Cellular.


Carregamento do terminal

- 1 Coloque o terminal no módulo do carregador. Empurre o terminal para dentro do módulo do carregador para o inserir totalmente. Após a inserção correta do terminal, este começa a carregar com um som de indicação de carregamento.
- 2 Quando o ícone da bateria no ecrã de carregamento fica verde e o LED fica verde, o terminal está totalmente carregado, mostrando 95% a 100% do nível da bateria.
- 3 Para desligar o terminal, incline-o na sua direção e, em seguida, levante-o para cima para retirá-lo do módulo do carregador.

Módulo do carregador simples



Módulo do carregador no carregador de rack

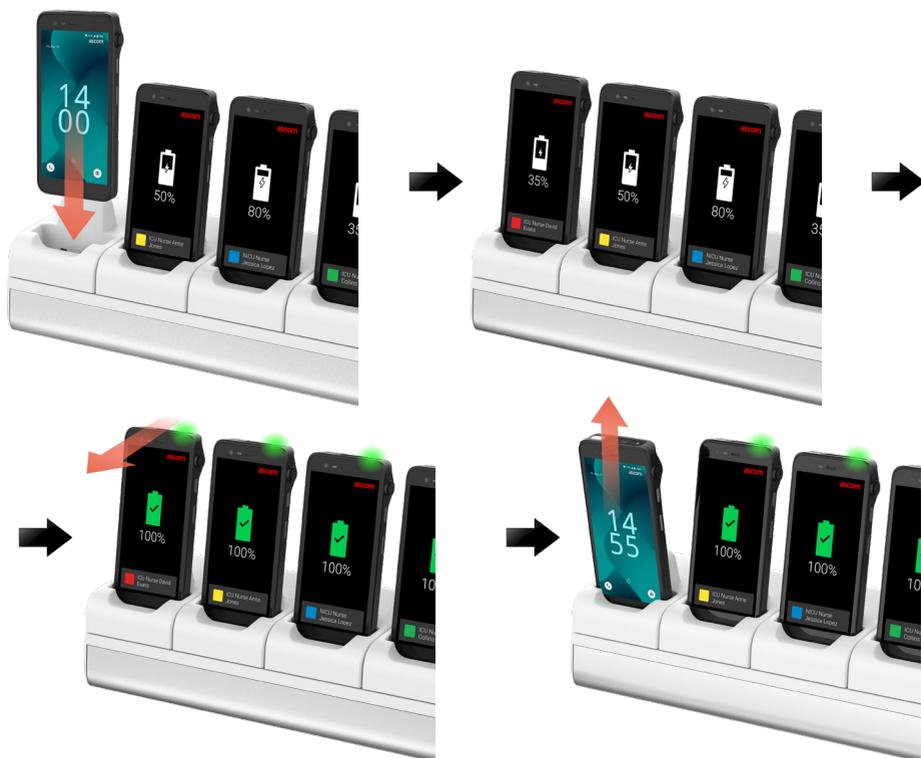

Cabo USB-C


- 1 Abra a tampa da porta de carregamento na parte inferior do terminal.
- 2 Ligue o cabo USB-C à porta de carregamento e ligue a fonte de alimentação USB a uma tomada elétrica.
- 3 Quando o indicador LED fica verde, o terminal está totalmente carregado.
- 4 Desligue o cabo USB-C e feche a porta de carregamento.



Carregamento da bateria

- 1 Retire a bateria do terminal e coloque-a no módulo do carregador.
- 2 Empurre ligeiramente a bateria e bloqueie-a com um clique. Quando a bateria estiver corretamente inserida, o indicador LED fica laranja para indicar que a bateria está a carregar.
- 3 Quando o indicador LED fica verde, a bateria está totalmente carregada.
- 4 Para desligar a bateria, incline-a na sua direção e, em seguida, levante-a para cima para retirá-la do módulo do carregador.

Módulo do carregador simples

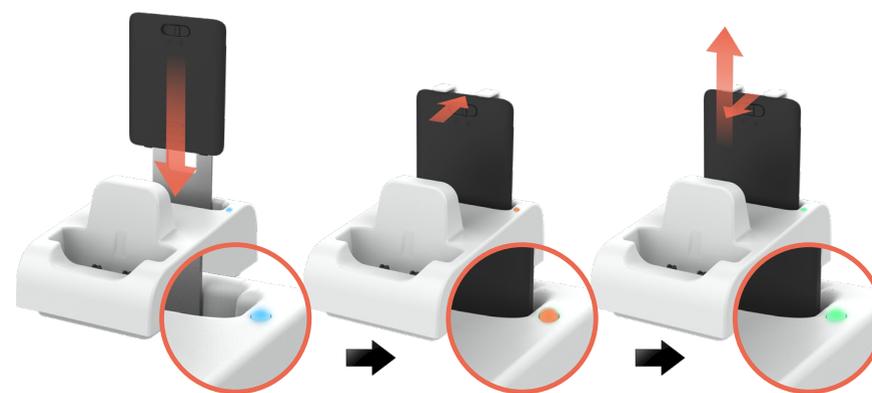

Módulo do carregador no carregador de rack



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Suécia

Telefone: +46 31 55 93 00

www.ascom.com