



Lynvejledning

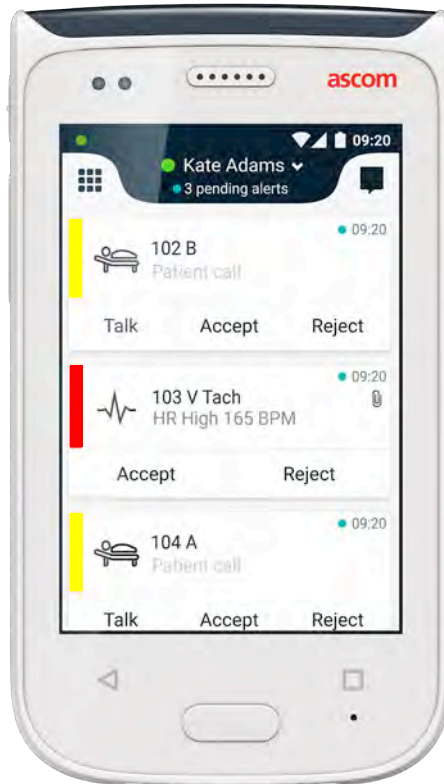

Ascom Myco 2

ascom

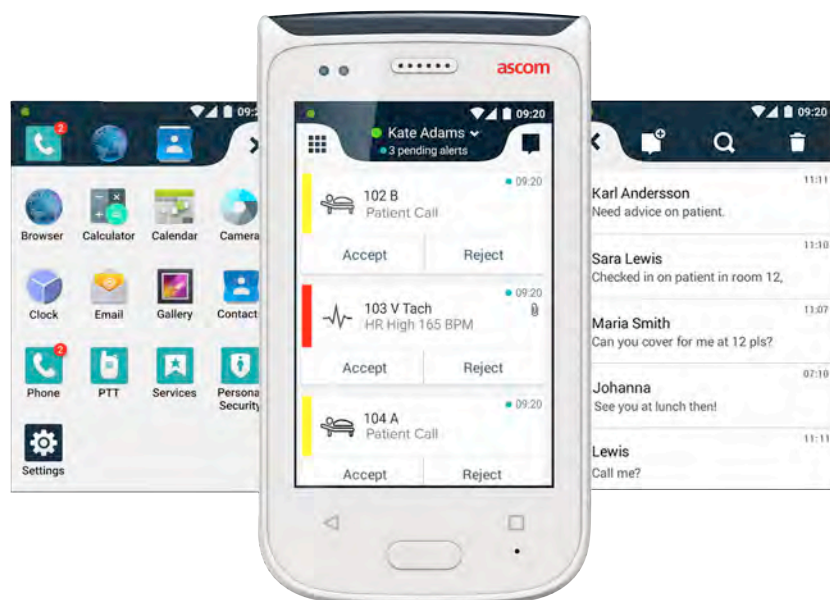

Introduktion

Denne lynvejledning giver et kort overblik over de mest almindelige funktioner og egenskaber på Ascom Myco 2 håndsættet.

Billederne i lynvejledningen er taget fra et håndsæt med engelsk brugergrænseflade. Nogle af funktionaliteterne i denne lynvejledning* adskille sig fra dem på dit håndsæt afhængigt af systemkonfigurationen. Billederne af skærmen kan derfor også se anderledes ud end på dit håndsæt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

For mere detaljerede oplysninger om Ascom Myco 2 henvises til brugervejledningen (kun engelsk udgave):

<https://www.ascom.com/MycoUserDoc>

Indholdsfortegnelse

Oversigt	
Håndsæt	1
Knapper	2
Visninger	
Frontdisplay	3
Naviger mellem visninger	4
Øverste display	4
Meddelelseskuffe	5
Genvejsskuffe	6
Log ind	
Log på håndsættet	7
Lud ud fra håndsættet	8
Alarmer	
Alarmoversigt	9
Alarmfarver	9
Alarmikoner	10
Indkommende alarmer	11
Reagere på alarm	12
Krisealarmer	12
Advarsler	
Advarsler	13
Advarsel om lavt batteri	14
Kommunikation	
Opkald	15
Beskeder	15
Oplader	
Oplad batteri	16
Oplad håndsæt	17

Håndsæt

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Strømknapp (tænd / sluk) | 10. Mikrofon |
| 2. Lydstyrke (op / ned) | 11. Oversigtsknapp |
| 3. Multifunktion / alarm-knappen | 12. Udskiftelig farvepude til klips |
| 4. Øverste display | 13. Kamera / stregkodelæser |
| 5. Ascom IR-positionering | 14. Clip |
| 6. LED-lys | 15. Battery pack |
| 7. Frontdisplay | 16. Lås på batteridæksel |
| 8. Tilbage-knapp | 17. Micro USB-opladningsstik |
| 9. Startknapp | |



Knapper

Håndsættet har seks knapper: Multifunktion / alarm-knappen, Strømknapp, Lydstyrke, Tilbage-knapp, Startknapp, Oversigtsknapp.

3 Multifunktion / Alarm-knappen

- Afhængigt af konfigurationen kan denne knap bruges til forskellige formål. Du kan for eksempel sende en personlig alarm eller foretage et telefonopkald i højtalertilstand.

1 Strømknapp (tænd / sluk)

- Langt tryk for at tænde / slukke for håndsættet.
- Tryk for at vække skærmen fra dvaletilstand.
- Tryk for at låse og sætte håndsættet til dvale.

2 Lydstyrke (op / ned)

- Tryk op for at øge og ned for at reducere højtaleren og højtalerlydstyrken.
- Tryk og hold for at sætte til lydløs tilstand.

8 Tilbage-knapp

- Tryk for at navigere tilbage til forrige skærbillede.

9 Startknapp

- Tryk for at vække skærmen fra dvaletilstand.
- Hvis i oplåst tilstand, tryk for at navigere til alarmvisningen fra ethvert skærbillede.

11 Oversigtsknapp

- Tryk for at se en liste over alle aktive apps.

Frontdisplay


Frontdisplayet er det primære display på håndsettet, hvor du kan bruge de installerede apps, håndtere alarmer og kommunikere med dine kollegaer.

Grænsefladen er opdelt i tre adskilte visninger:

Alarmvisningen **II** er håndsettets primære visning. Alle alarmer samt deres nuværende status vises her.

Appvisningen **I** viser alle apps installeret på håndsettet.

I Konversationsvisningen **III** kan du læse og sende beskeder til din kollegaer.

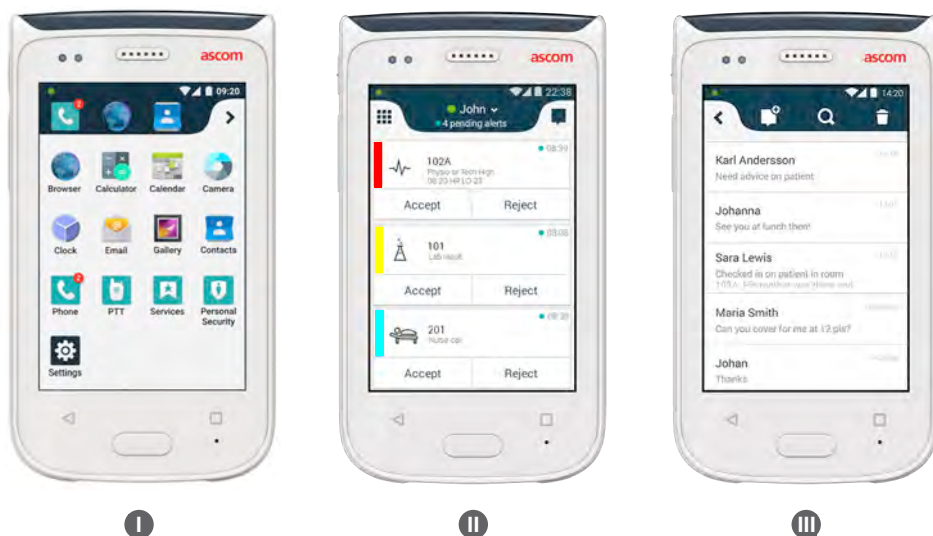

Naviger mellem visninger

Alarmvisningen **II** er håndsettets midterste visning.

For at åbne Appvisningen **I** skal du stryge til højre fra alarmvisningen eller trykke på **Gitterikonet** i øverste venstre hjørne.

For at åbne Konversationsvisningen **III** skal du stryge til venstre eller trykke på **Samtaleikonet** i øverste højre hjørne af skærmen.

For at åbne alarmvisningen igen skal du stryge i den modsatte retning af den nuværende visning eller trykke på startknappen.



Øverste display

Når du har håndsettet i lommen eller det er klipset fast på dit tøj, kan topdisplayet bruges til at få et hurtigt kig på indkommende alarmer, meddelelser og telefonopkald.

Hvis du har adskillige ikke håndterede alarmer, viser topdisplayet et hurtigt overblik over indkommende alarmer sorteret efter deres prioritet. Når alle alarmer er blevet vist en gang, vil den ældste alarm med den højeste prioritet blive vist igen.



Meddelelsesskuffe

Meddelelsesskuffen viser en liste med alle meddelelser såsom alarmer, konversationsmeddelelser og advarsler. Meddelelser vises både i meddelelsesskuffen og på låseskærmen.

For at få åbne meddelelsesskuffen skal du stryge ned fra toppen af frontdisplayet. Du kan åbne meddelelsesskuffen fra ethvert skærbillede.

For at skjule meddelelsesskuffen skal du stryge opad eller trykke på ydersiden af skuffen eller trykke på tilbage-knappen **A** eller startknappen **B**.




Genvejsskuffe

Genvejsskuffen kan konfigureres til at indeholde op til fire genveje og give hurtig adgang til apps og funktioner.

For at få åbne genvejsskuffen skal du stryge op fra bunden af frontdisplayet. Du kan åbne genvejsskuffen fra ethvert skærbillede.

Stryg nedad for at lukke genvejsskuffen eller trykke på ydersiden af skuffen eller trykke på tilbage-knappen **A** eller startknappen **B**.


Genvejene i genvejsskuffen afhænger af systemkonfigurationen. Hvis BEMÆRK: du ikke kan finde genvejsskuffen eller vil ændre genvejene, så kontakt din systemadministrator.

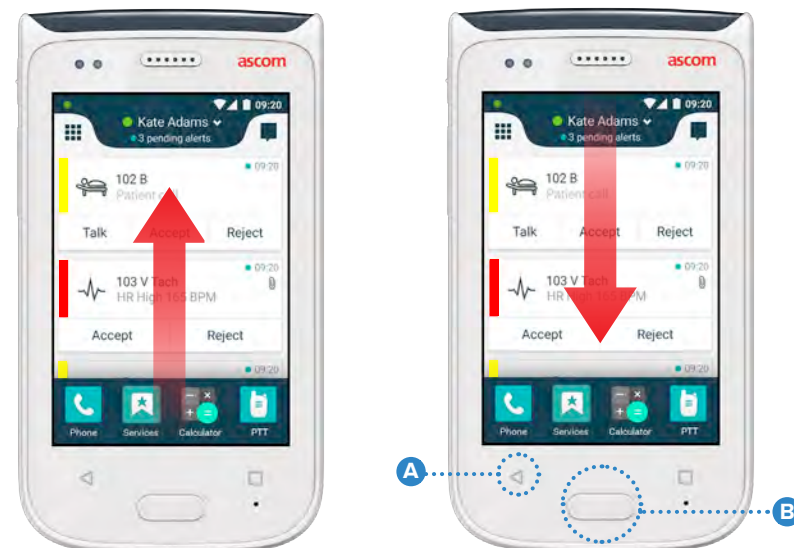

Log på håndsettet

Afhængigt af systemkonfigurationen kan det være nødvendigt at logge ind for at få adgang til funktioner såsom afsendelse af meddelelser og alarmhåndtering.

- 1 På låseskærmen, stryg op fra bunden af skærmen eller dobbelttryk på log ind-meddelelsen. Indtast om nødvendigt PIN eller adgangskode.

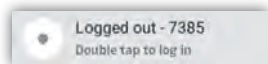

BEMÆRK: I oplåst tilstand, tryk på startknappen **A** for at gå til alarmvisningen.

- 2 I den åbnede alarmvisning, tryk på **Log ind**.
- 3 Indtast brugernavn og adgangskode i de tilsvarende felter og tryk på **Log ind**.



Lud ud fra håndsettet


Log ud fra alarmvisningen:

- 1 Tryk på brugernavnet i den øverste bjælke.
- 2 Tryk på Log ud i menuen Indstil din status.
- 3 Tryk på **Log ud** for at bekræfte.



Log ud fra meddelelsesskuffen:


- 1 Stryg ned fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsesskuffen.
- 2 Dobbelttryk på skift status eller log ud.
- 3 Tryk på **Log ud** for at bekræfte.

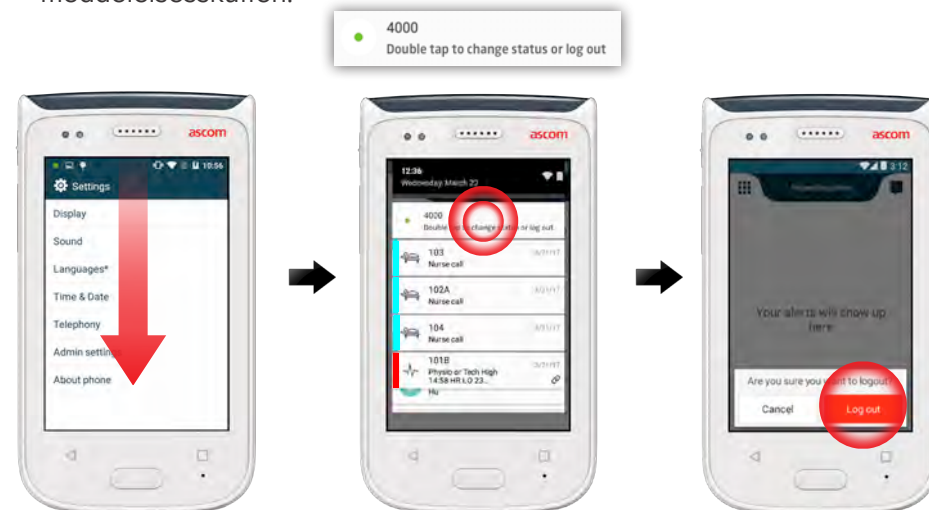

Alarmoversigt

Alarmer kan have forskellige prioriteter, kategorier og typer. Farvebjælken viser alarmens prioritet eller kategori, mens alarmikonet viser alarmtypen.

1. Kategori- / prioritetsfarve
2. Emne, fx placering
3. Hændelsesinformation
4. Ikke håndteret alarm
5. Tidsstempel
6. Muligheder
7. Alarmikon

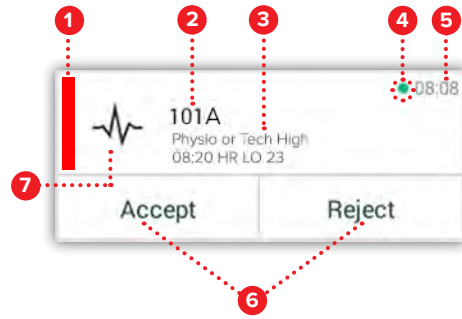

Alarmfarver

Farver kan bruges til at vise kategorier eller prioriteter for alarmer. Alarmens farve vises med farvebjælken til venstre for hver alarm. For indkommende alarmer vises farven også på den farvekodede LED oven på håndsettet.

BEMÆRK: Brugen af farverne afhænger af konfigurationen og kan variere mellem systemopsætninger.


Kategori- / prioritetsfarve Rød ■
Prioritet Høj



Kategori- / prioritetsfarve Gul ■
Prioritet Medium



Kategori- / prioritetsfarve Cyan ■
Prioritet Lav

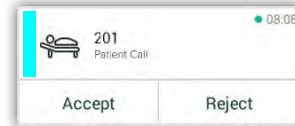

Alarmikoner

Alarmikoner bruges til at vise alarmtypen.

BEMÆRK: Ikonerne afhænger af konfigurationen og kan variere mellem systemopsætninger.

	Anæstesiindgivelsesenhed		Hjertelungemaskine
	Hjælp-opkald		Kuvøse
	Blodfilter		Infusionspumpe
	Blodgasanalyse		Laboratorieresultat
	Kategori A		Toilet-opkald
	Kategori B		Medicinsk opkald
	Kategori C		Monitorering
	Kategori D		Patientopkald
	Kategori E		Serviceopkald
CODE A	Kode A		Opgave
CODE B	Kode B		Teknikeralarm
	Akutkald		Ventilation
	Fejl		Røntgenresultat
	Brand		Generisk standard

Indkommende alarmer

På et låst håndsæt **I** vises en indkommende alarm både på topdisplayet og på frontdisplayet som en farvekodet alarmmeddelelse. Der gøres også opmærksom på alarmen ved at LED-lyset **A** blinker og ved lyd og vibration fra håndsættet.



I Alarmvisningen **II** sorteres indkommende alarmer efter tidspunkt med den nyeste alarm øverst.



I oplåst tilstand vises alarmmeddelelser øverst på skærmen. Hvis der kommer flere alarmer inden for kort tid, vil den nyeste alarm blive vist oven over de andre.

Stryg op eller til en af siderne på meddelelsen eller tryk på ikonet **x** for at skjule det.

Tryk på meddelelsen for at åbne den.

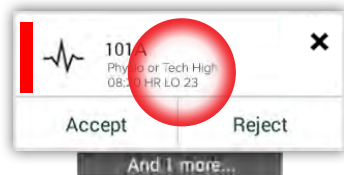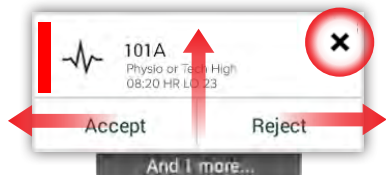


Reagere på alarm

Der er tre måder at reagere på alarmer fra den låste skærm:

Stryg ned på alarmmeddelelsen for at åbne mulighedsknapperne.

Dobbelttryk på alarmmeddelelsen.

Lås håndsættet op og gå til alarmvisning.

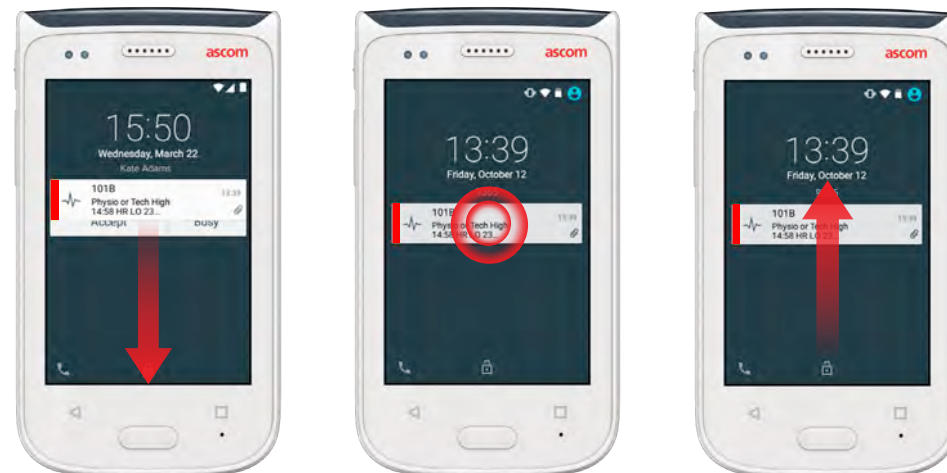

Krisealarmer

Krisealarmer har den højeste prioritet og signalerer en umiddelbar fare eller nødsituation.

"Blå kode" er et eksempel på en krisealarm annonceret af:

- En høj sirene
- Blinkende blåt og rødt lys fra LED-lyset
- Et CODE B-ikon
- En rød ramme rundt om alarmen
- Vibration




Advarsler


Advarselsmeddelelser vises på frontdisplayet som farvede meddelelser. Advarsler vises også når skærmen er låst.

BEMÆRK: Advarselsmeddelelsen forbliver på håndsettet indtil problemet er løst.

For at se hele advarselsmeddelelsen på en oplåst skærm skal du trykke på advarselsmeddelelsen.



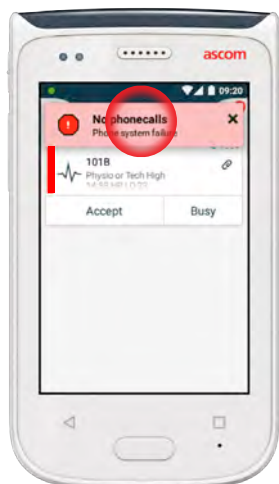


For at åbne meddelelsen igen, tryk på ikonet Advarsel **A** i alarmvisningen.

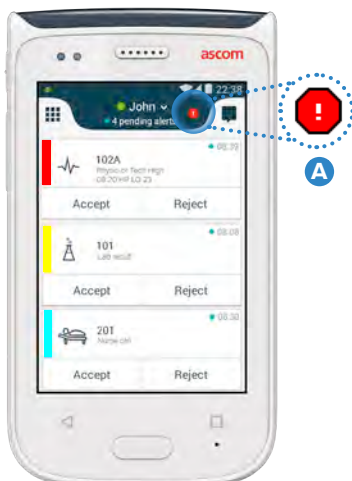

Eksempler på advarselsmeddelelser

Nedenfor er eksempler på advarselsmeddelelser, der kan vises på håndsettet og normalt kræver hjælp fra systemadministratoren for at blive løst.

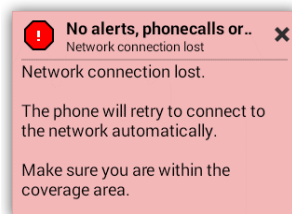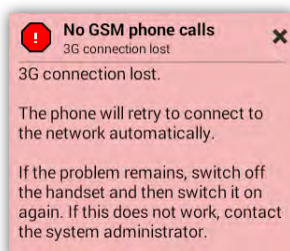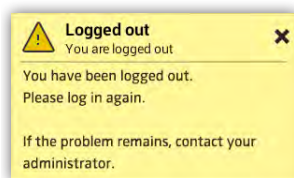

Advarsel om lavt batteri

Hvis batteriniveauet er **15 % eller mindre**, skal batteriet oplades snarest muligt.

Et batteriniveau på 15 % eller mindre vises ved at:

- Håndsettet bipper en gang
- LED'en blinker orange
- Ikon for lavt batteri
- "Batteri er lavt" meddelelse
- Håndsettet vibrerer en gang



Hvis batteriniveauet er **5 % eller mindre**, skal batteriet oplades med det samme.

Et batteriniveau på 5 % eller mindre vises ved at:

- Håndsettet bipper en gang hver andet minut
- LED'en blinker orange
- Ikon for lavt batteri
- "Batteri er lavt" meddelelse
- Håndsettet vibrerer en gang hver andet minut



Opkald

- 1 På den låste skærm, stryg **Telefonikonet** **A** til højre i nederste venstre hjørne.


BEMÆRK: I oplåst tilstand, tryk på **Telefonappikonet**  i appvisningen.

- 2 Vælg mellem at indtaste telefonnummeret manuelt, vælge kontakten fra listen med nylige opkald **B** eller at søge i telefonbogen **C**.



Beskeder

I Konversationsvisningen, tryk på ikonet **Ny meddelelse** **D** for at skrive en ny meddelelse eller tryk på meddelelsen for at læse og svare på den.

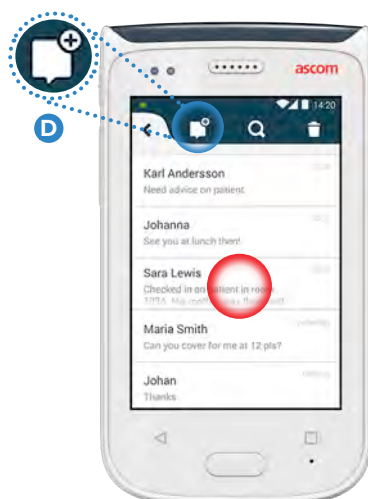

Oplad batteri

Håndsettet har et genopladeligt batteri. Brug batteriopladeren til at oplade det.

Batteriopladeren

- 1 Skyd låsen på batteridækslet **A** til højre for at frigøre batteridækslet.
- 2 Tag batteriet ud af håndsettet.
- 3 Sæt batteriet i opladningsrillen. Skyd batterilåsen til venstre. Hvis batteriet er blevet korrekt indsat, bliver LED-indikatoren rød for at vise, at batteriet oplader **B**.
- 4 Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren bliver grøn.




Oplad håndsat

Der er to måder at oplade håndsettet på, enten med en håndsetoplader eller med et Micro USB-kabel.


Håndsetoplader

- 1 Sæt håndsettet i opladningsrillen **A** . Hvis håndsettet er indsat korrekt, vises opladningsskærmen og viser batteriopladningsniveauet og ejerens id / navn **B** .
- 2 Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren bliver grøn.

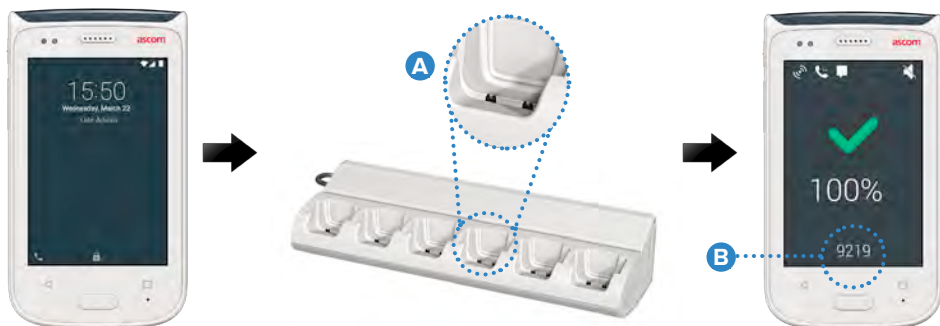

Micro USB-kabel

- 1 Åbn dækslet til opladningsstikket **C** nederst på håndsettet.
- 2 Sæt Micro USB-kablet **D** i opladningsstikket på håndsettet.
- 3 Sæt USB-strømforsyningen i en stikkontakt.
- 4 Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren bliver grøn.

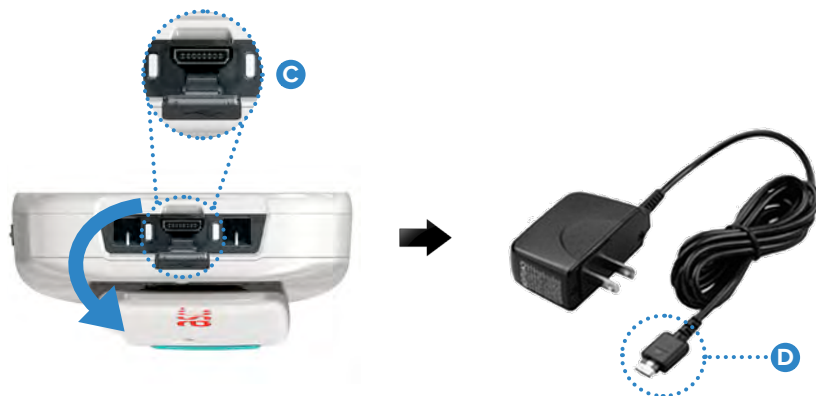



Manufacturer

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

40276 Gothenburg

Sweden

Phone: +46 31 55 93 00

ascom.com

ascom