



Skrócona instrukcja obsługi

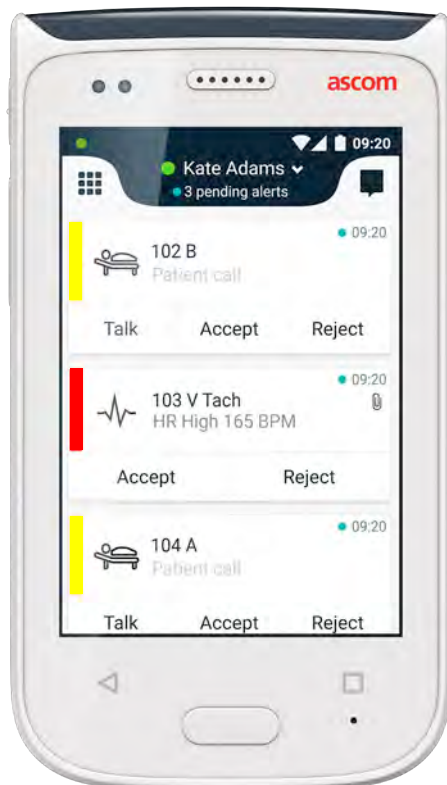

Ascom Myco 2

ascom

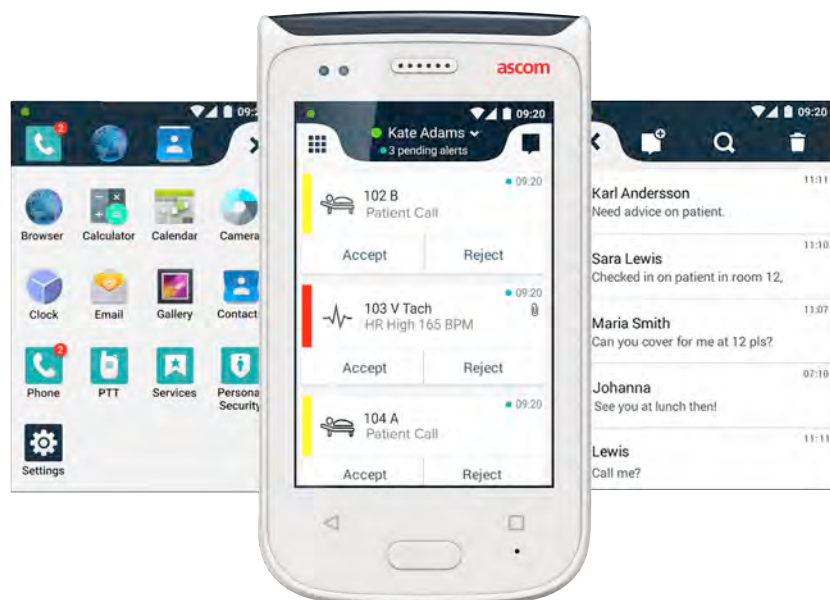

Wprowadzenie

Ta Skrócona instrukcja obsługi (QRG) zawiera skrócony przegląd najważniejszych funkcji i opcji telefonu Ascom Myco 2.

Ilustracje w QRG wzięto z telefonu z interfejsem użytkownika w języku angielskim. Niektóre funkcje przedstawione w skróconej instrukcji obsługi (QRG) mogą się różnić od funkcji w telefonie w zależności od konfiguracji systemu. Z tego powodu ilustracje ekranu także mogą różnić się od wyglądu ekranu danego telefonu.

Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Szczegółowe informacje na temat Ascom Myco 2 zawiera podręcznik użytkownika (wersja tylko w jęz. angielskim):

<https://www.ascom.com/MycoUserDoc>

Spis treści

Przegląd

Telefon	1
Przyciski	2

Widoki

Przedni wyświetlacz	3
Przechodzenie między widokami	4
Górny wyświetlacz	4
Zasobnik powiadomień	5
Zasobnik skrótów	6

Logowanie

Logowanie do telefonu	7
Wylogowanie z telefonu	8

Alerty

Przegląd alertów	9
Kolory alertów	9
Ikony alertów	10
Alerty przychodzące	11
Reakcja na alert	12
Alerty krytyczne	12

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia	13
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	14

Komunikacja

Dzwonienie	15
Wysyłanie wiadomości	15

Ładowanie

Ładowanie baterii	16
Ładowanie telefonu	17

Telefon

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Przycisk zasilania (wł. / wyt.) | 10. Mikrofon |
| 2. Głośność (w górę / w dół) | 11. Przycisk Przegląd |
| 3. Przycisk alarmu / wielofunkcyjny | 12. Wymienna kolorowa płytką na uchwyt |
| 4. Górny wyświetlacz | 13. Aparat / czytnik kodów kreskowych |
| 5. Ascom IR Location | 14. Uchwyt |
| 6. Sygnalizator LED | 15. Bateria |
| 7. Przedni wyświetlacz | 16. Blokada osłony baterii |
| 8. Przycisk Wstecz | 17. Złącze ładowania Micro USB |
| 9. Przycisk Strona główna | |



Przyciski

W telefonie znajduje się sześć przycisków: przycisk zasilania, głośność, przycisk alarmu / wielofunkcyjny, przycisk Wstecz, przycisk Strona główna, przycisk przegląd.

3 Przycisk alarmu / wielofunkcyjny

- W zależności od konfiguracji przycisk ten może służyć do różnych celów. Może służyć np. do wysyłania alarmu osobistego lub nawiązywania połączeń w trybie głośnomówiącym.

1 Przycisk zasilania (wł. / wyt.)

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć telefon.
- Naciśnij, aby wybudzić wyświetlacz z trybu uśpienia.
- Naciśnij, aby zablokować telefon i wprowadzić w tryb uśpienia.

2 Głośność (w górę / w dół)

- Naciśnij w górę, aby zwiększyć, lub w dół, aby zmniejszyć głośność słuchawki i głośnika.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu cichego.

8 Przycisk Wstecz

- Naciśnij, aby przejść wstecz, do poprzedniego ekranu.

9 Przycisk Strona główna

- Naciśnij, aby wybudzić wyświetlacz z trybu uśpienia.
- Po odblokowaniu naciśnij, aby przejść do widoku Alerty z dowolnego ekranu.

11 Przycisk Przegląd

- Naciśnij, aby wyświetlić listę aktywnych aplikacji.

Przedni wyświetlacz

Przedni wyświetlacz to główny wyświetlacz telefonu, na którym można korzystać z zainstalowanych aplikacji, obsługiwać alerty i komunikować się ze współpracownikami.

Interfejs jest podzielony na trzy osobne widoki:

Widok Alertów **II** jest głównym widokiem telefonu. Tutaj wyświetlone są wszystkie alerty oraz ich aktualny stan.

Widok Aplikacje **I** zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane w telefonie.

W widoku Rozmowa **III** można odczytywać wiadomości i wysyłać je do współpracowników.



Przechodzenie między

Widok Alertów **II** jest środkowym widokiem w telefonie.

Aby przejść do widoku Aplikacji **I**, przesunąć palcem z widoku alertów w prawo lub dotknij symbol **siatki** w lewym górnym rogu.

Aby przejść do widoku Rozmowy **III**, przesunąć w lewo lub dotknij symbol **rozmowy** w prawym górnym rogu ekranu.

Aby wrócić do widoku Alertów, przesunąć palcem w stronę przeciwną do bieżącego widoku lub naciśnij przycisk Strona główna.



Górny wyświetlacz

Gdy trzymasz telefon w kieszeni lub przypięty do ubrania, górny wyświetlacz daje szybki podgląd alertów przychodzących, wiadomości i rozmów.

Jeśli masz kilka niepodjętych alertów, górny wyświetlacz zawiera szybki podgląd przychodzących alertów posortowanych według priorytetu. Gdy wszystkie alerty zostaną raz wyświetlone, najwcześniejszy alert o najwyższym priorytecie zostanie pokazany ponownie.



Zasobnik powiadomień

Zasobnik powiadomień zawiera listę wszystkich powiadomień, takich jak alerty, rozmowy i ostrzeżenia. Powiadomienia pokazane są zarówno w zasobniku powiadomień, jak i na ekranie blokady.

Aby otworzyć zasobnik powiadomień, przesunąć palcem w dół od góry ekranu na przednim wyświetlaczu. Zasobnik powiadomień można otworzyć na dowolnym ekranie.

Aby ukryć zasobnik powiadomień, przesunąć palcem w górę, dotknij ekran poza obszarem zasobnika lub dotknij przycisku Wstecz **A** albo Strona główna **B**.




Zasobnik skrótów

Zasobnik powiadomień można skonfigurować, aby zawierał do czterech skrótów umożliwiających szybki dostęp do aplikacji i funkcji.

Aby otworzyć zasobnik skrótów, przesunąć palcem w górę od dołu ekranu na przednim wyświetlaczu. Zasobnik skrótów można otworzyć na dowolnym ekranie.

Aby ukryć zasobnik skrótów, przesunąć palcem w dół, dotknij ekran poza obszarem zasobnika lub dotknij przycisku Wstecz **A** albo Strona główna **B**.


UWAGA: Skróty w zasobniku skrótów zależą od konfiguracji systemu. Jeśli nie możesz znaleźć zasobnika skrótów lub chcesz je zmienić, skontaktuj się z administratorem systemu.

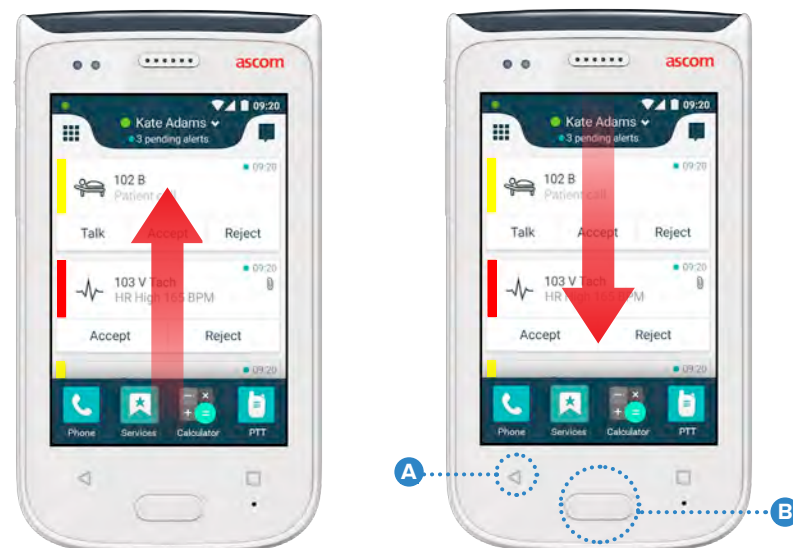

Logowanie do telefonu

W zależności od konfiguracji systemu dostęp do funkcji, takich jak wiadomości lub obsługa alertów, może wymagać zalogowania.

- 1 Na ekranie blokady przesunąć palcem w górę od dołu ekranu lub dotknąć dwukrotnie powiadomienia Zaloguj się. Wpisz kod PIN lub hasło, jeśli wymagane.

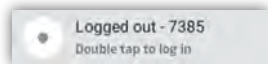

UWAGA: Po odblokowaniu naciśnij przycisk Strona główna **A**, aby przejść do widoku Alertów.

- 2 W otwartym widoku Alertów dotknij przycisku **Zaloguj się**.
- 3 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w odpowiednie pola, a następnie dotknij przycisku **Zaloguj się**.



Wylogowanie z telefonu


Wylogowanie z widoku Alertów:

- 1 Dotknij nazwy użytkownika na górnym pasku.
- 2 W menu Ustaw stan dotknij **Wyloguj**.
- 3 Dotknij **Wyloguj**, aby potwierdzić.



Wylogowanie z zasobnika powiadomień:


- 1 Przesunąć palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć zasobnik powiadomień.
- 2 Dotknij dwukrotnie **Zmień stan lub wyloguj**.
- 3 Dotknij **Wyloguj**, aby potwierdzić.

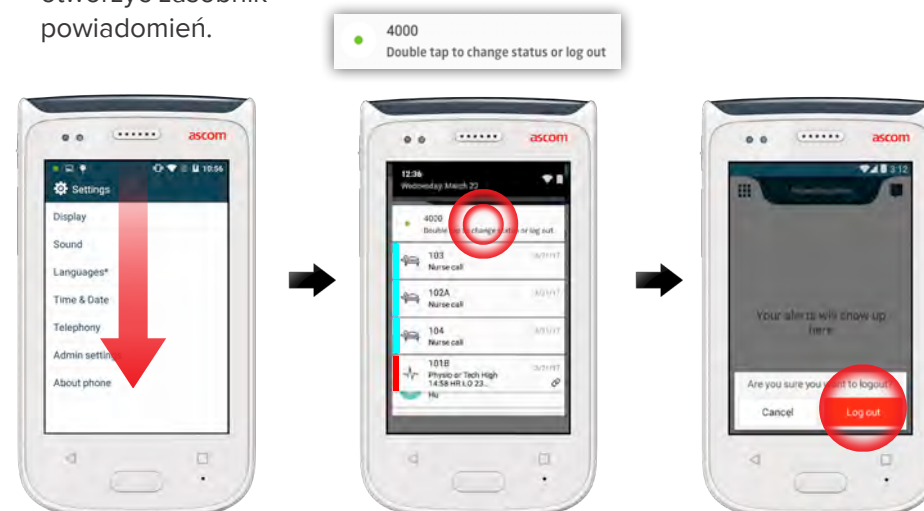

Przegląd alertów

Alerty mogą mieć różne priorytety, kategorie i rodzaje. Kolorowy pasek pokazuje priorytet lub kategorię alertu, natomiast ikona alertu jego typ.

1. Kolor kategorii / priorytetu
2. Temat, np. lokalizacja
3. Informacje o zdarzeniu
4. Niepodjęty alert
5. Znacznik czasu
6. Opcje
7. Symbol alertu

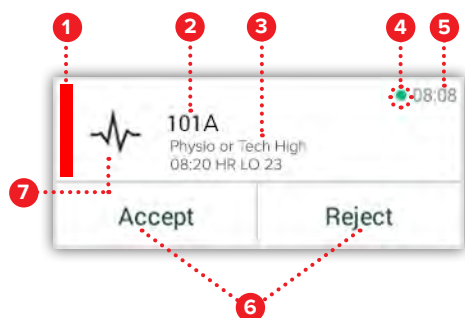

Kolory alertów

Kolory służą do przedstawienia kategorii lub priorytetu alertów. Kolor alertu odpowiada kolorowi paska po lewej stronie każdego alertu. W przypadku alertów przychodzących kolor pokazany jest także na kolorowym sygnalizatorze LED, w górnej części telefonu.

UWAGA: Użycie kolorów zależy od konfiguracji i może różnić się w zależności od ustawień systemowych.

Kolor kategorii / priorytetu Czerwony ■
Priorytetu Wysoki



Kolor kategorii / priorytetu Żółty ■
Priorytetu Średni



Kolor kategorii / priorytetu Niebieski ■
Priorytetu Niska



Ikony alertów

Ikony alertów służą do przedstawienia typu alertu.

UWAGA: Ikony zależą od konfiguracji i mogą różnić się w zależności od ustawień systemowych.

	Jednostka podawania środków znieczulających		Wezwanie pomocy medycznej
	Wezwanie pomocy		Płuco-serce
	Filtr krwi		Inkubator
	Analizator gazometryczny		Pompa infuzyjna
	Kategoria A		Wynik laboratoryjny
	Kategoria B		Wezwanie do łazienki
	Kategoria C		Monitorowanie
	Kategoria D		Wezwanie pacjenta
	Kategoria E		Wezwanie obsługi
	Kod A		Zadanie
	Kod B		Alert techniczny
	Telefon alarmowy		Wentylacja
	Awaria		Wynik rtg
	Pożar		Ogólny

Alerty przychodzące

W zablokowanym telefonie **I** alert przychodzący pokazany jest zarówno na górnym, jak i na przednim wyświetlaczu, jako powiadomienie o alercie z kodem kolorowym. Alert wskazywany jest także przez sygnalizator LED **A**, oraz dźwiękiem i wibracją telefonu.



W widoku Alertów **II** alerty przychodzące są sortowane według czasu, najnowszy alert znajduje się na górze.



Po odblokowaniu powiadomienia o alertach znajdują się w górnej części ekranu. Jeśli w krótkim czasie nadejdzie kilka powiadomień o alertach, najnowszy alert będzie wyświetlany nad pozostałymi.

Przesuń palcem w górę lub w dowolną stronę powiadomienia, albo dotknij ikony **x**, aby je ukryć.

Dotknij powiadomienia, aby je otworzyć.

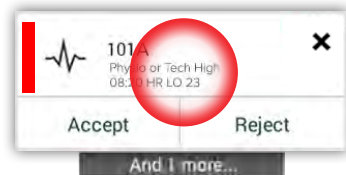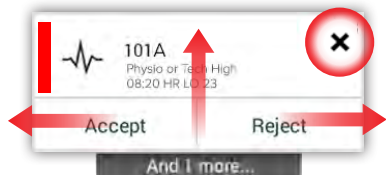


Reakcja na alert

Na ekranie blokady można odpowiedzieć na alert na trzy sposoby:

Przesuń palcem powiadomienie o alercie w dół, aby wyświetlić przyciski opcji.

Dotknij dwukrotnie powiadomienie o alercie.

Odblokuj telefon i przejdź do widoku Alert.

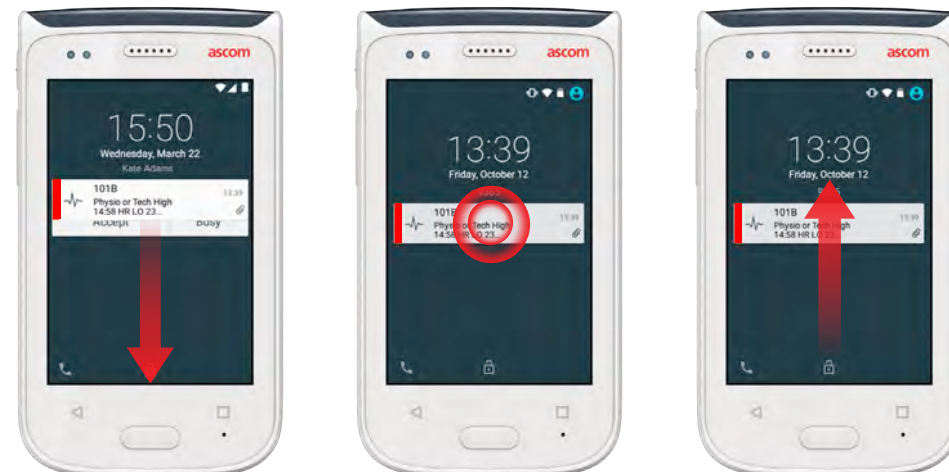

Alerty krytyczne

Alerty krytyczne mają najwyższy priorytet i oznaczają bezpośrednie zagrożenie lub sytuację alarmową.

"Kod niebieski" to przykład alertu kryzysowego, który sygnalizują:

- Głośną syreną
- Migającym czerwonym i niebieskim światłem sygnalizatora LED
- Symbolem CODE B
- Czerwoną ramką wokół alertu
- Wibracją




Ostrzeżenia

Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane są na przednim wyświetlaczu jako kolorowe powiadomienia. Ostrzeżenia wyświetlane są także, gdy ekran jest zablokowany.

UWAGA: Komunikat ostrzegawczy pozostaje na telefonie do momentu rozwiązania problemu.




Aby wyświetlić całą treść komunikatu, dotknij powiadomienia na odblokowanym ekranie.

Aby ponownie wyświetlić powiadomienie, dotknij ikony **Ostrzeżenie**  w widoku alertów.

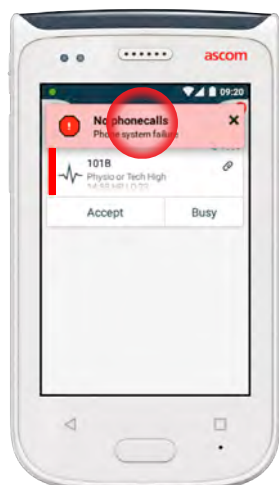

Przykłady komunikatów

Poniżej przedstawiono przykłady komunikatów, które mogą pojawić się na telefonie i zwykle wymagają działania administratora systemu w celu ich rozwiązania.

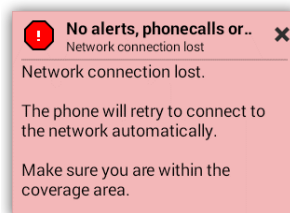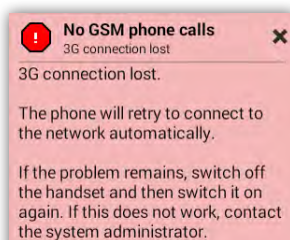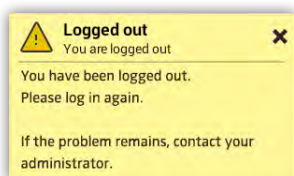

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, należy wkrótce ją naładować.

Poziom naładowania poniżej 15% jest sygnalizowany następująco:


- Telefon wibruje jeden raz
- Dioda LED miga na pomarańczowo
- Symbol niskiego poziomu baterii
- "Niski poziom baterii" ostrzegawcze
- Telefon ojedynczy dźwięk jeden raz



Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, należy niezwłocznie ją naładować.

Poziom naładowania poniżej 5% jest sygnalizowany następująco:

- Telefon wibruje co dwie minuty
- Dioda LED miga na czerwono
- Symbol rozładowanej baterii
- "Niski poziom baterii" ostrzegawcze
- Telefon ojedynczy dźwięk co dwie minuty

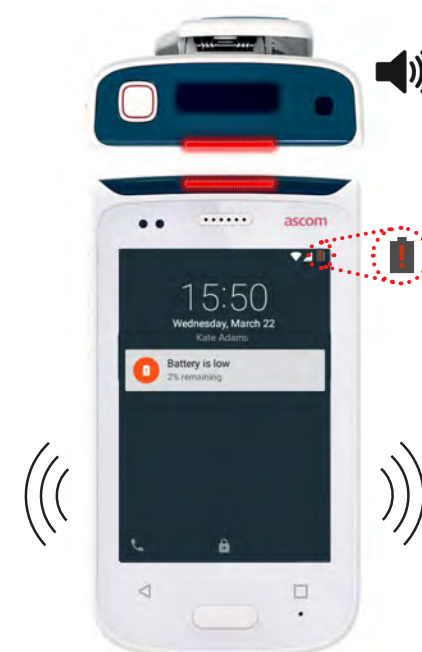

Dzwonienie

- 1 Na ekranie blokady przesunąć palcem ikonę **Telefon** **A** w lewym dolnym rogu w prawo.


UWAGA: Po odblokowaniu dotknij ikony aplikacji **Telefon**  w widoku Aplikacje.

- 2 Możliwe jest ręczne wybranie numeru, wybranie kontaktu z listy ostatnich rozmów **B** lub wyszukiwanie w książce telefonicznej **C**.



Wysyłanie

W widoku Rozmowa dotknij ikony **Nowa wiadomość** **D**, aby napisać nową wiadomość, lub dotknij wiadomości, aby ją odczytać i odpowiedzieć.

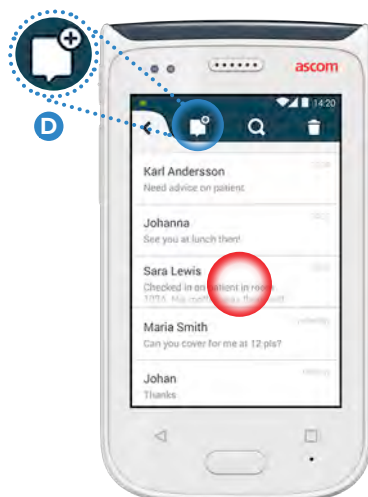

Ładowanie baterii

Telefon wyposażony jest w baterię wielokrotnego ładowania. Aby ją naładować, należy użyć listwy do ładowania baterii.

Listwy do ładowania baterii

- 1 Przesunąć blokadę osłony baterii **A**, aby zdjąć osłonę.
- 2 Wyjąć baterię z telefonu. Umieścić baterię w złączu ładowarki.
- 3 Przesunąć blokadę baterii w lewo. Po prawidłowym włożeniu baterii wskaźnik LED zaświeci na czerwono **B**, sygnalizując ładowanie baterii.
- 4 Pełne naładowanie baterii jest sygnalizowane zieloną diodą LED.




Ładowanie telefonu

Telefon można naładować na dwa sposoby, używając listwy do ładowania telefonów lub przewodu Micro USB.


Listwy do ładowania telefonów

- 1 Umieść telefon w złączu ładowarki **A**. Po prawidłowym włożeniu telefonu pojawi się ekran ładowania zawierający poziom naładowania baterii i nazwę / identyfikator właściciela **B**.
- 2 Pełne naładowanie baterii jest sygnalizowane zieloną diodą LED.

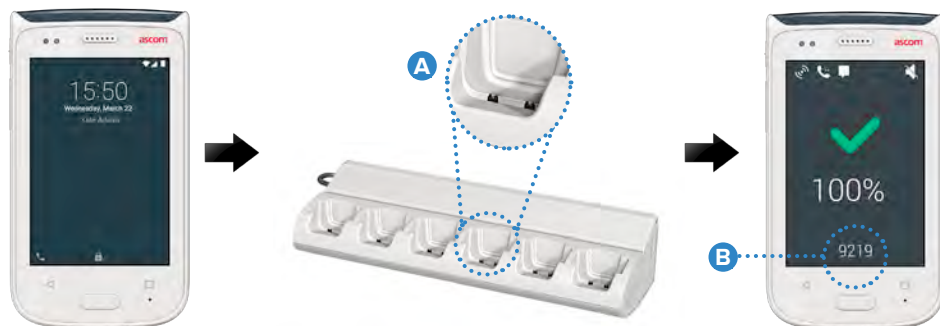

Przewodu Micro USB

- 1 Otwórz osłonę złącza **C** w dolnej części telefonu.
- 2 Podłącz przewód Micro USB **D** do złącza ładowania w telefonie.
- 3 Podłącz zasilacz USB do źródła prądu.
- 4 Pełne naładowanie baterii jest sygnalizowane zieloną diodą LED.

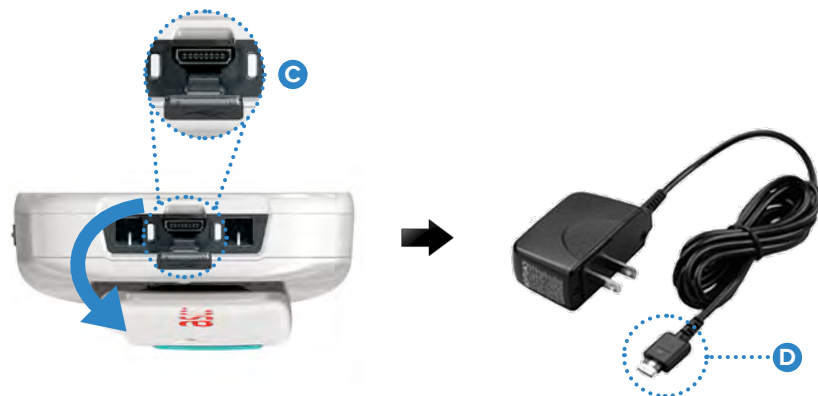



Manufacturer

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

40276 Gothenburg

Sweden

Phone: +46 31 55 93 00

ascom.com

ascom