

BRUGERVEJLEDNING

Ascom Unite Axess for Smart Devices

ascom

Om dette dokument

Dette dokument beskriver Ascom Unite Axess for Smart Devices-programmet. Dokumentet er beregnet til brugere af Unite Axess for Smart Devices-programmet.



Fabrikant

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 94 00

www.ascom.com

Indhold

1 Introduktion	1
1.1 Indskærpelse og bemærkninger.....	1
1.2 Agtpågivenhed og rapportering af episoder	3
1.3 Tilsigtet anvendelse/formål	3
1.3.1 Forventelige kliniske fordele	4
2 Layout af Unite Axess til Smart Devices	5
2.1 Layout på Android-enheder	5
2.2 Layout på iOS-enheder	6
2.3 Ikoner	6
2.4 Unite Axess hjælp	7
3 Opret forbindelse til Unite-systemet	8
3.1 Log ind / log ud via Ascom Login	8
3.1.1 Imprivata Mobile Device Access™ til godkendelse	9
3.2 iOS-enheder: Log ind/Log ud	10
4 Håndtere notifikationer	12
4.1 Alarmikoner	13
4.2 Modtag notifikationer	16
4.2.1 Patientoplysninger i notifikationer.....	16
4.2.2 Håndtering af notifikationer på Android-enheder	17
4.2.3 Håndtering af notifikationer på iOS-enheder.....	18
4.3 Sortér notifikationer.....	19
4.4 Filtrér notifikationer	19
4.5 Videresend notifikationer.....	19
4.6 Slet notifikationer	20
5 Tilgængelighedsstatus.....	21
5.1 Tilgængelighedsstatus på Android-enheder	21
5.2 Tilgængelighedsstatus på iOS-enheder	21
6 Advarsler	23
6.1 Håndter advarselsmeddelelser.....	25
7 Indstillinger	27
7.1 Indstillinger på Android-enheder	27
7.2 Indstillinger på iOS-enheder.....	28
8 Om Apps.....	29
8.1 Unite Axess for Smart Devices.....	29
8.2 Ascom Login (kun Android)	29
Appendiks A Relaterede dokumenter	31
Appendiks B Dokumenthistorik.....	32

1 Introduktion

Unite Axxess for Smart Devices appen præsenterer notifikationer til brugere på deres Smart Devices. Appen muliggør fuldstændig integration med Unite-systemet, så brugere på sikker vis kan modtage interaktive beskeder om hændelser på et hvilket som helst tidspunkt og fra et hvilket som helst sted.



Billederne er taget fra en enhed med engelsk brugergrænseflade, og derfor kan sproget afvige fra, hvad du ser på skærmen.

1.1 Indskærpelse og bemærkninger

Du skal læse og overholde samtlige sikkerhedsregler i denne vejledning.

Ordet ADVARSEL anvendes til at gøre opmærksom på elementer, der direkte eller indirekte kan forårsage eller medvirke til, at der opstår en farlig situation, som kan forårsage alvorlige personskader eller skade personers helbred, eller beskadige ejendom eller miljøet.

Ordet FORSIGTIG gør brugeren opmærksom på, at der skal udvises særlig opmærksomhed for at sikre sikker og effektiv brug af enheden.

Ordet BEMÆRK bruges til at gøre opmærksom på almindelige oplysninger.



Advarsel

Afhængigt af det tilsluttede medicinske udstyrs egenskaber kan produktet bruges til primær (DAS/CDAS) eller sekundær (DIS) notifikation af alarmer. Når der er mindst én DIS-enhed til stede, vil brugerne få vist en advarsel om, at nogle af de tilsluttede enheder ikke understøtter primær indberetning af alarmer.




Advarsel

En notifikationsmeddelelse kan erstattes med en ny indgående notifikationsmeddelelse, hvis der modtages flere notifikationer inden for et kort tidsinterval. Sørg for at reagere på den tilsigtede notifikation.



Advarsel

En notifikation, der åbnes i fuldskræmsvisning, kan delvist dækkes af en indgående eller gentagen notifikation. Begge notifikationer vil have alternativknapper, der er synlige for at muliggøre direkte interaktion. Bemærk, at knapperne er placeret nederst i hver notifikation.

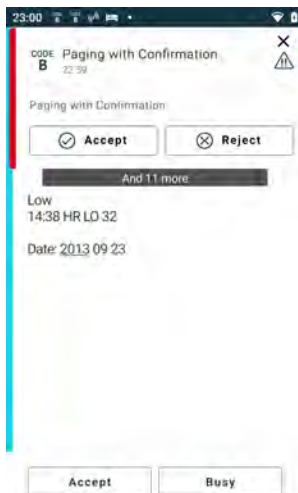

Advarsel

Brug ikke fokusprofiler på iOS-enheder

Hvis der bruges fokusprofiler, er der risiko for, at meddelelser om indgående notifikationer undertrykkes.



Advarsel

Inaktiver ikke notifikationer fra Axess til Smart Devices på iOS-enheder

Inaktiver ikke notifikationer fra Axess for Smart Devices på iOS-enheder. Hvis indberetninger fra applikationen er slået fra, kan nye notifikationer blive overset.



Advarsel

Brug ikke "Face ID-beskyttelse" til Axess for Smart Devices-applikationen på iOS-enheder

Hvis der bruges Face ID-beskyttelse, er der risiko for, at vigtige oplysninger i notifikationer overses.



Advarsel

Betjen ikke Axess for Smart Devices ved hjælp af Eye Tracking-funktionen på iOS-enheder

Hvis Eye Tracking-funktionen bruges, er der risiko for, at man utilsigtet kommer til at vælge en indstilling i den modtagne notifikation.



Advarsel

Genkendelse af notifikationer og advarsler kan hindres, hvis lydstyrken på anvisningerne er lavere end de omgivende lydniveauer.

Information om notifikationslyde

Lydniveauerne for notifikationer kan justeres ved hjælp af lydindstillingerne på din enhed. Standardlydene for notifikationer er designet, så de er passende til alarmmeddelelsesformål.

1.2 Agtpågivenhed og rapportering af episoder

Slutbrugere, eller forhandlere/distributører skal informere Ascom skriftligt, inden for fem (5) hverdage fra de får kendskab til en hændelse, om alle hændelser i forbindelse med produkterne. En klage kan i dette tilfælde være en mundtlig eller skriftlig erklæring eller påstand om, at produktet ikke opfylder kravene med hensyn til en enheds identitet, kvalitet, holdbarhed, pålidelighed, sikkerhed, effektivitet eller ydeevne.



Enhver alvorlig episode, det vil sige enhver episode, der direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kunne føre til en patients, brugers eller anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse af en patients, brugers eller anden persons sundhedstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden, der er indtruffet i forbindelse med produktet, skal indberettes til fabrikanten via e-mail til vigilance@ascom.com og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

For enhver alvorlig hændelse, eller hvis der er en afdækket produktfejl, der kan medføre død eller personskade, eller hvis en kunde udtrykker bekymring for patientsikkerheden, vil slutbrugere eller forhandlere / distributører underrette Ascom så hurtigt som muligt ved hjælp af at gøre sit yderste for at give en sådan meddelelse mundtligt (Ascom Technical Assistance Center) inden for fireogtyve (24) timer efter at have fået viden, eller fra modtagelsen af en sådan klage eller fra at blive opmærksom på et sådant produktproblem. Mundtlig indberetning skal følges op med skriftlig (e-mail) bekræftelse inden for 24 timer til vigilance@ascom.com

Slutbrugere eller forhandlere/distributører skal give tilstrækkelige oplysninger til, at Ascom kan opfylde sine lovgivningsmæssige rapporteringsforpligtelser om ulykker og hændelser, der skal rapporteres og registreres i henhold til nationale regler gældende på området. Hvis en hændelse anses for at være et uheld, der skal indberettes til de nationale ansvarlige myndigheder, skal Ascom udarbejde og indsende rapporten.

Hvis et tilsynsorgan eller ansvarlig myndighed sender skriftlig meddelelse til en slutbruger, eller forhandler/distributør med forespørgsler om, eller undersøger et produkt, eller undersøger eller reviderer faciliteter, der anvendes til opbevaring af produkter, eller anmoder om oplysninger vedrørende et produkt, skal slutbrugeren eller forhandleren/distributøren straks underrette Ascom.

1.3 Tilsigtet anvendelse/formål

I dette kapitel beskrives den tilsigtede anvendelse/det tilsigtede formål med Unite Axess for Smart Devices.

Tilsigtet anvendelse (generelt)

Axess til Smart Devices er beregnet til elektronisk visning af alarmmeddelelser (notifikationer) og andre data, der stammer fra tilsluttet medicinsk udstyr, via medicinsk udstyr fra Ascom, til sundhedspersonale som hjælp til at overvåge patienter.

Produktet Axess til Smart Devices er beregnet til at blive brugt som et sekundært middel til visning af notifikationer, dvs. alarmmeddelelser og andre data om medicinsk udstyr, og er ikke beregnet til at blive brugt som en erstatning eller et alternativ til direkte visning af data på tilsluttede enheder.

Axess til Smart Devices er ikke beregnet til at blive brugt til beslutninger om øjeblikkelig klinisk handling eller til diagnostiske formål i forbindelse med aktiv patientovervågning. Produktet Axess til Smart Devices er desuden ikke beregnet til at styre eller ændre funktioner eller parametre på tilsluttet medicinsk udstyr.

Axess til Smart Devices skal betjenes af professionelle brugere og er afhængig af korrekt anvendelse og drift af både kommunikationsinfrastruktur og de anvendte displayenheder.

Komponenter til Axess til Smart Devices skal installeres på specificeret hardware og operativsystem og er afhængige af, at der stilles et specificeret medicinsk it-netværk og kommunikationsinfrastruktur til rådighed.

Tilsigtet formål (EU/EFTA/UK/AUS/MYS)

Den tilsigtede anvendelse af Ascom Unite Connect for Clinical Systems er at udgøre en grænseflade til kliniske systemer for at videresende information, herunder afgørende fysiologiske parametre, knyttet til særlige hændelser, til udpegede displayenheder for at understøtte patientovervågning. Displayenhederne har en visuel og/eller lyd- og/eller en vibreringsmekanisme, der aktiveres ved modtagelse af notifikationer.

Connect for Clinical Systems anvender konfigurerbar behandling og filtrering på hændelsesmeddelelser, hvilket reducerer deres hyppighed og antal for at præsentere kliniske oplysninger, som sundhedspersonalet kan handle ud fra.

Til medicinske alarmer i nær-realtid er Connect for Clinical Systems beregnet til brug som en sekundær alarm, dvs. en parallel, redundant, videresendingsmekanisme til at informere sundhedspersonale om bestemte medicinsk relevante hændelser.

For udvalgte kildeenheder og -systemer fungerer Connect for Clinical Systems som integrator og kommunikator af et distribueret alarmsystem (DAS/CDAS) for pålideligt at fremsende og levere fysiologiske og tekniske alarmer til sundhedspersonale på udpegede displayenheder og til specificerede systemer.

Connect for Clinical Systems er beregnet til brug med medicinsk udstyr, specificeret af sundhedspersonale, når der er behov for at overvåge patienters fysiologiske parametre. Patientpopulationen og patientforholdene fastlægges af det tilsluttede medicinske udstyr.

Connect for Clinical Systems er installeret på specificerede IT-systemer og er afhængig af korrekt brug og drift af tilsluttet medicinsk udstyr, systemer, displayenheder og det medicinske IT-netværk.

Connect for Clinical Systems bruges i sundhedsfaciliteter, på intensivafdelinger, semi-intensive afdelinger, generelle afdelinger og andre afdelinger og, afhængigt af den specifikke konfiguration, når de er uden for sundhedsfaciliteten.

1.3.1 Forventelige kliniske fordele

- Reducerer risikoen for manglende kritiske patientnotifikationer.¹
- Hjælper med at reducere notifikationstræthed ved at reducere antallet af patientnotifikationer, der modtages af plejepersonale.¹
- Hjælper med at forbedre responstiden på kritiske patienthændelser.¹
- Bidrager til arbejdsgangens effektivitet ved at undgå unødvendige arbejdsafbrydelser.¹
- Giv nær realtidsindikation af systemstatus til brugerne.²
- Med et enkelt program kan mobile plejeudbydere nu modtage 2-vejs, interaktive beskeder om kritiske og ikke-kritiske patienthændelser, herunder patientkurv billeder.
- Patientoplysninger og notifikationer leveres til en smartphone ved hjælp af robust, standardbaseret sikkerhed, meddelelseskryptering og brugergodkendelse. Så selvom en enhed går tabt, forbliver dine data sikre.

1. BEMÆRK! Denne påstand må KUN fremsættes, når Unite Axess for Smart Devices bruges i forbindelse med Ascom Unite Software til distribution af PM/NC-notifikationer/hændelser (f.eks. Unite Connect for Clinical Systems).

2. BEMÆRK! Denne påstand må KUN fremsættes for klasse IIb-systemet (Unite Connect for Clinical Systems med Unite View og/eller Unite Axess for Smart Devices)

2 Layout af Unite Axess til Smart Devices


Standardversionen af Unite Axess for Smart Devices-appen består af følgende:

- **Notifikationssiden:** Dette er standardsiden, når du logger ind.
- **Menuen:** Tryk på ikonet **Menu** for at få adgang til menuen (☰ for Android og ≡ for iOS).


2.1 Layout på Android-enheder

Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret (med/uden tilgængelighedsstatus), kan indikationerne på den øverste linje være forskellige.

Figur 1. Layout med tilgængelighedsstatus aktiveret

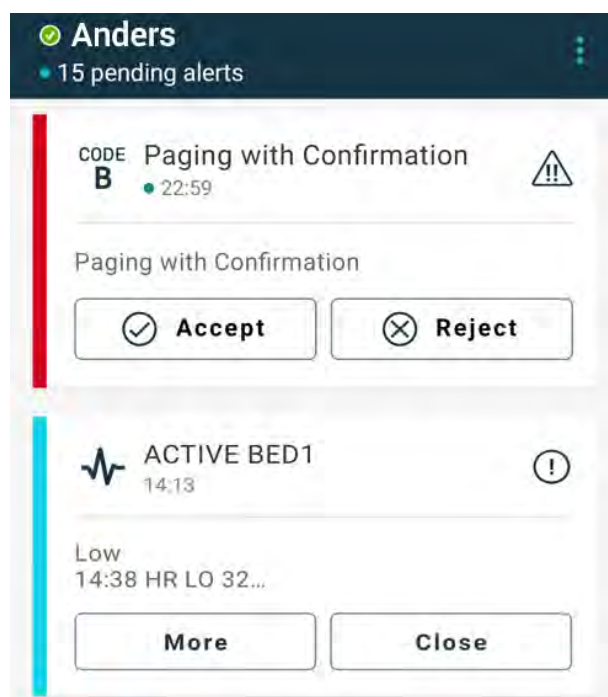

Figur 2. Layout med tilgængelighedsstatus inaktiveret

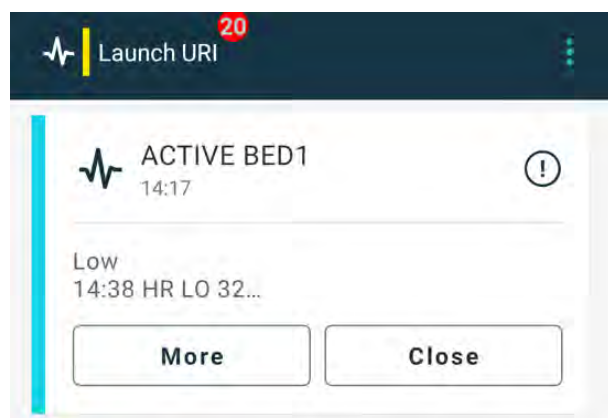

Når du har adgang til mindst én app ud over Unite Axess for Smart Devices og Ascom Login, aktiveres en **navigationlinje** nederst på skærmen for hurtig navigation.

Figur 3. Nederste navigationslinje




2.2 Layout på iOS-enheder




Hvis du bruger widgetten Axess for Smart Devices, skal du ikke erstatte app-ikonet  med widgetten, da widgetten ikke indeholder ikke-håndterede notifikationer.

Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret (med/uden tilgængelighedsstatus), kan indikationerne på den øverste linje være forskellige.

Figur 4. Layout med tilgængelighedsstatus aktiveret


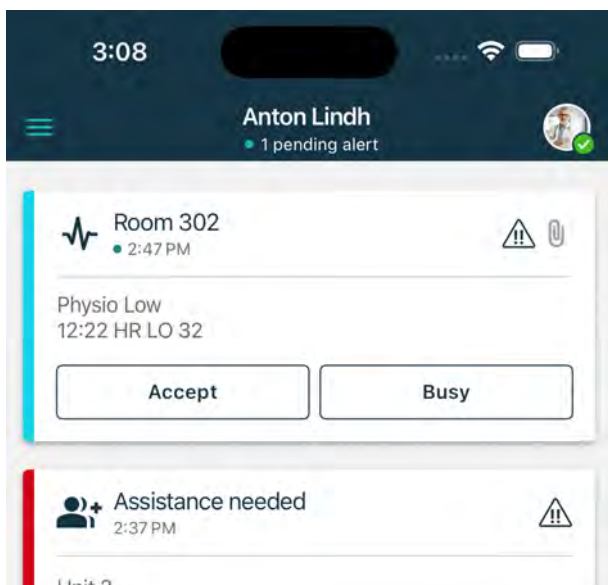


Figur 5. Layout med tilgængelighedsstatus inaktiveret

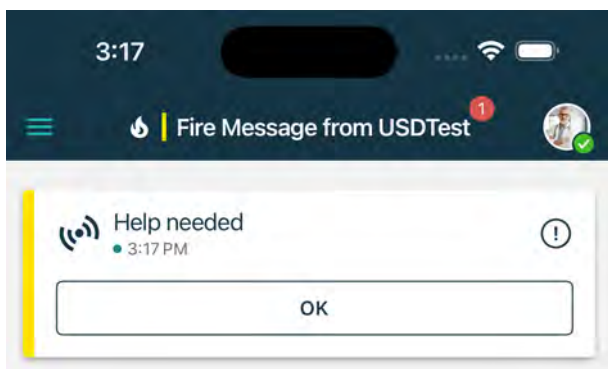

2.3 Ikoner

Her kan du se betydningen af hvert ikon i Unite Axess for Smart Devices appen:

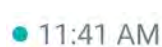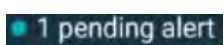	Menu-ikon (Android)
	Menu-ikon (iOS)
	Tidspunkt hvor notifikationen blev modtaget. En blå prik foran tiden angiver, at notifikationen ikke er håndteret.
	Yderligere indhold vedhæftet
	Notifikationsikon på den nederste navigationslinje (kun Android)
	Notifikationsikon på den nederste navigationslinje med antallet af ikke-håndterede notifikationer (kun Android).
	Profil-ikon (tilgængeligt på den nederste navigationslinje på Android og i øverste højre hjørne på iOS), der bruges til at få adgang til Min profil .
	Det samlede antal ikke-håndterede notifikationer, der vises på den øverste linje, når tilgængelighedsstatus er aktiveret i systemet.
	Det samlede antal ikke-håndterede notifikationer, der vises på den øverste linje, når tilgængelighedsstatus ikke er aktiveret i systemet.
	Accepter notifikationsikonet.
	Afvis notifikationsikonet. Bruges også til indstillingen Fortryd , det vil sige, når du har mulighed for at trække dit Accepter -svar tilbage.
	Lav prioritet
	Middel prioritet
	Høj prioritet

2.4 Unite Axess hjælp

Unite Axess for Smart Devices-appen har en hjælpeside med instruktioner om, hvordan man bruger funktionerne i appen.

1. Tryk på ikonet **Menu** for at åbne hjælpeteksten.
2. Tryk derefter på knappen **Hjælp**.
3. Tryk på knappen **Tilbage** for at vende tilbage til siden **Menu**.

3 Opret forbindelse til Unite-systemet

For Android-enheder opretter du forbindelse til Unite System i **Ascom Login**-appen.

For iOS-enheder skal du bruge URL-adressen til Unite Axess Server (i Android er dette link konfigureret i Ascom Login) for at oprette forbindelse til Unite System. URL-adressen kan leveres som et link, indtastes manuelt eller leveres via en lokal DNS.

Hvis den leveres som et link, skal brugeren bare trykke på linket på smart-enheden. Hvis brugeren allerede er logget ind på en andet site end det, der er angivet i linket, logges kontoen først ud, og derefter forsøger appen at oprette forbindelse til den adresse, der er angivet i linket. Hvis webstedet findes, vises login-vinduet; Hvis den ikke findes, modtager brugeren en fejlmeddelelse og får mulighed for at indtaste URL'en til webstedet manuelt.

Hvis du skal indtaste URL'en manuelt, inkluderer URL'en følgende:

- Den offentlige FQDN- eller IP-adresse for at få adgang til det offentliggjorte websted, der er vært for applikationen Unite Axess for Smart Devices (f.eks. `uniteaxess.company.com`)
- Stien til den virtuelle mappe, der er defineret under installationen (for eksempel, "Axess")

For eksempel er serverens URL-adresse i følgende format: `https://uniteaxess.<firmanavn>.com/akser`.

Hvis den leveres via en lokal DNS, og hvis Unite Axess for Smart Devices-appen ikke har en tidligere anvendt server, når den starter, forsøger den automatisk at finde værtsnavnet på DNS'en, og når den har modtaget svaret, bruges den korrekte URL.

3.1 Log ind / log ud via Ascom Login

Log ind og ud fra en Android-enhed sker via Ascom Login-appen, som er en fælles login-grænseflade til Ascom Android-baserede apps. Dette betyder, at du kun behøver at indtaste dine legitimationsoplysninger én gang for at få adgang til disse apps på din enhed. Når du logger ud, forlader du alle de apps, der understøttes af Ascom Login, og notifikationslisten slettes automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.



Når du starter applikationen for første gang, for at drage nytte af alle de funktioner, der leveres af denne applikation, bliver du bedt om at give visse tilladelser til Unite Axess for Smart Devices. Unite Axess for Smart Devices kører en check hver gang du bruger appen, så det er obligatorisk at give disse tilladelser og aldrig deaktivere dem, når du bruger Unite Axess for Smart Devices:

- Tillad Unite Axess for Smart Devices at få adgang til dine kontakter
- Tillad Unite Axess for Smart Devices at foretage og administrere telefonopkald
- Tillad Unite Axess for Smart Devices at få adgang til fotos og medier på din enhed
- Indstillinger for overlejring > Tillad visning over andre apps
- Indstillinger for notifikationer > Tillad
- Optimer batteriforbruget > Alle apps > Unite Axess > Optimer ikke

Hvis du opgraderer fra version 6.0.1 til 6.2, skal du desuden logge ind igen.

Log ind

1. På din enhed skal du trykke på ikonet for **Ascom Login**-appen , eller ikonet **Ascom Axess** , som omdirigerer dig til Ascom Login-appen.
2. Indtast dit **Brugernavn** og din **Adgangskode**.



- Tryk på **Log ind**-knappen.

Log ind med andre godkendelsestjenester

Din organisation kan også bruge andre godkendelsestjenester, f.eks. PingFederate eller OpenID. Når du logger ind kan du i dette tilfælde blive omdirigeret til denne godkendelsestjeneste, hvor skal bruge din organisationskonto.

Sørg for, at tidspunktet på din enhed er det samme som serverens tidspunkt, ellers kan du muligvis ikke logge ind.

Log ud

- Tryk på ikonet **Profil**  på den nederste navigationslinje eller på ikonet for **Ascom Login-appen** .
- Tryk på **Log ud**-knappen.

Når du er logget ud, slettes alle notifikationer og meddelelser automatisk fra smart-enheden af sikkerhedsmæssige årsager.

3.1.1 Imprivata Mobile Device Access™ til godkendelse

Imprivata Mobile Device Access er en mobil godkendelsesløsning til sundhedsvæsenet, der giver hurtig og sikker adgang til kliniske mobile enheder og applikationer. Brugere kan få adgang til delte kliniske mobilenheder og kan derefter logge ind med enkeltlogon (SSO, single sign on).

Hvis din organisation bruger Imprivata Mobile Device Access til godkendelse, kan du logge på alle Ascom-apps og andre kliniske tredjepartsapps med single sign-on, enten manuelt (ved hjælp af dine loginoplysninger) eller med et enkelt tryk på en nærhedsbadge, der leveres af din organisation.



Du skal have Ascom Login-appen installeret på enheden (Ascom Myco 3, Ascom Myco 4 eller en anden understøttet smart-enhed) for at sikre integration med Imprivata Single Sign-On. Imprivata-integration udelukker på ingen måde brugen af Ascom Login, som er obligatorisk for at andre Ascom apps kan fungere.

Log ind med badge

- Hvis du vil se **Imprivata**-låseskærmen skal du tænde for skærmen på din smartenhed.
- Tryk din badge til NFC-registreringsområdet på bagsiden af din enhed.
- Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste din pinkode og derefter trykke på **Bekræft**.

Enhver tidligere bruger, der stadig er logget ind på enheden, logges automatisk ud, og derefter logges du ind.

Når du er logget ind, og hvis du vil låse din smartenhed, skal du blot trykke på din badge til NFC-registreringsområdet igen. **Imprivata**-låseskærmen vises derefter.

Log ind med brugeroplysninger

1. Hvis du vil se **Imprivata**-låseskærmen skal du tænde for skærmen på din smartenhed.
2. På **Imprivata**-låseskærmen skal du trykke på ikonet **Manuelt log ind** , indtast dit **Brugernavn** og din **Adgangskode** og tryk derefter på knappen **Log ind**.

Enhver tidligere bruger, der stadig er logget på enheden, logges automatisk ud, og derefter logges du ind.

Hvis indlogging er vellykket, låses din smartenhed op, og du bliver logget ind på alle dine kliniske apps. Hvis du ikke kan logge ind eller bliver bedt om at indtaste Unite Axess Server-linket, skal du kontakte din systemadministrator.

Log ud

1. På **Imprivata**-låseskærmen skal du trykke på ikonet **Log ud** .
2. Klik på **OK** i bekræftelsesmeddelelsen.

3.2 iOS-enheder: Log ind/Log ud

Hvis din implementering leveres med andre understøttede Ascom-apps, giver Unite Axess for Smart Devices Single Sign-on til alle andre Unite-apps som f.eks. Unite Collaborate.




Når du har valgt den gyldige Unite Axess for Smart Devices-server, og når du åbner appen første gang, skal du give følgende tilladelser for at kunne logge ind:

- Tillad notifikationer
- Tillad kritiske notifikationer
- Tillad tidsfølsomme notifikationer
- Fokus

Unite Axess for Smart Devices kører en kontrol, hver gang du bruger appen, så det er obligatorisk at tillade disse rettigheder og aldrig inaktivere dem, når du bruger Unite Axess for Smart Devices.

Log ind

1. Tryk på ikonet **Unite Axess**-app på enheden . Login-vinduet åbnes.
2. Indtast dit **Brugernavn** og din **Adgangskode**.

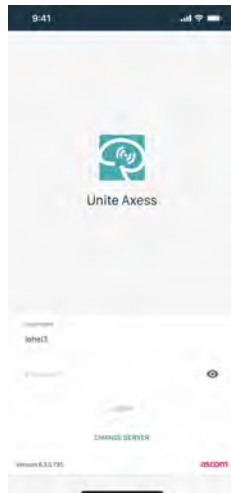

- Tryk på **Log ind**-knappen.

Log ind med andre godkendelsestjenester

Når du logger på ved hjælp af en OpenID Connect-godkendelse, vises der en pop op-meddelelse om tilladelser, der advarer dig om, at du er ved at åbne et websted, der deler oplysninger om dig. Du skal vælge **Fortsæt** for at fortsætte med login.

Log ud

- Tryk på ikonet **Menu** .
- Tryk på **Log ud**-knappen.

Når du logger på ved hjælp af en OpenID Connect-godkendelse, vises der en pop op-meddelelse om tilladelser, der advarer dig om, at du er ved at åbne et websted, der deler oplysninger om dig. Du skal vælge **Fortsæt** for at fortsætte med login.


Når du er logget ud, slettes alle notifikationer og meddelelser automatisk fra smart-enheden af sikkerhedsmæssige årsager.

4 Håndtere notifikationer

I dette afsnit beskrives, hvordan du håndterer notifikationer i Unite Axess for Smart Devices.

Oversigt over notifikationer

Notifikationer kan have forskellige prioriteter, kategorier og typer. Farvelinjen viser alarmens prioritet eller kategori, mens notifikationsikonet viser notifikationstypen.

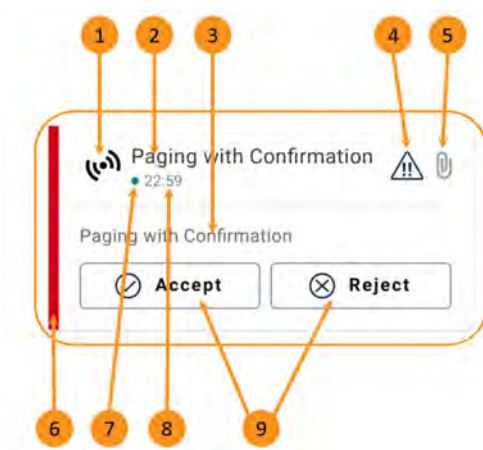

1. Notifikationsikon
2. Emne, for eksempel placering
3. Hændelsesinformation
4. Ikonet Prioritet
5. Ikonet for vedhæftede filer (en vedhæftet fil er knyttet til denne advarsel)
6. Kategori-/prioritetsfarve
7. Uhåndteret notifikation
8. Tidsstempel
9. Svarmuligheder (ikonerne Acceptér ✓ / Afvis ✗ kan være valgfrie)

Notifikationsfarver

Farver kan bruges til at vise kategorier eller prioriteter for notifikationer. Notifikationsfarve vises med farvelinjen til venstre for hver alarm.



Brugen af farverne afhænger af konfigurationen og kan variere mellem systemopsætninger.


Kategori-/prioritetsfarve: Rød

Prioritet: Høj




Kategori-/prioritetsfarve: Gul

Prioritet: Middel

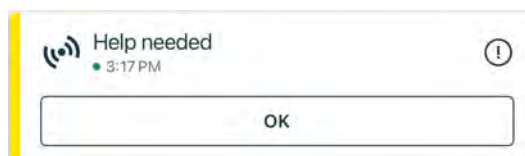

Kategori-/prioritetsfarve: Turkis

Prioritet: Lav

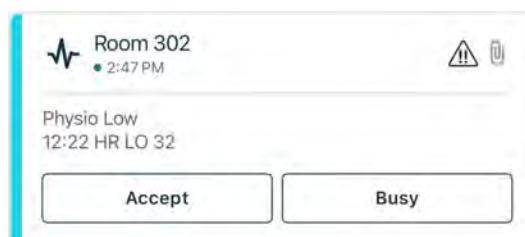

4.1 Alarmikoner

Ikoner, der bruges til notifikationer, viser kategorien, f.eks. et patientkald eller et laboratorieresultat.

Følgende ikoner er tilgængelige i Ascom Myco:

Ikone	Beskrivelse
	Generel notifikation
	Sengealarm
	Vægt
	Infusionspumpe
	Ernæringspumpe
	Ballonpumpe
	Termoreguleringsenhed
	Clinical Decision Support System (CDSS)
	Infusionspumpe
	Blodfiltrering Dialyse
	Patientmonitor
	Ventilator
	Blodgasapparat
	Hjerte-lunge-maskine
	Kuvøse

	Anæstesi
	Prøvesvar
	Toiletkald
	Assistancekald En medarbejder, der har brug for assistance fra en anden medarbejder
CODE A	Kode A
CODE B	Kode B
	Medicinsk kald
	Kald En patient, der har brug for assistance fra en medarbejder.
	Servicekald
	Opgave
	Teknisk notifikation
	Fejl
	Personalarm
	Brand
	Røntgen
	Kategori A
	Kategori B

	Kategori C
	Kategori D
	Kategori E
	Akut
	Opkaldsopsætning
	Trykknop 1
	Trykknop 2
	RTLS
	Zone
	Temperatur
	Arbejdsgang
	Arbejdsgang 1
	Arbejdsgang 2
	Arbejdsgang 3
	Arbejdsgang 4
	Arbejdsgang 5

	Sikkerhed
	Nærvær

4.2 Modtag notifikationer

Du vil blive underrettet om en indkommende notifikation med en foruddefineret advarselslyd. Smart-enheden viser notifikationen på siden **Notifikationer**.



Bemærk, at afhængigt af systemkonfigurationen modtager du muligvis ikke notifikationer, hvis din tilgængelighedsstatus er indstillet til **Optaget** eller **Forstyr ikke**.

Hvis du modtager en notifikation med svarmuligheder, skal du vælge en svarmulighed (for eksempel **Accepter** eller **Afvis**). Når du har svaret, opdateres notifikationen med svarmeddelelsen. Listen med notifikationer sorteres som standard i kronologisk rækkefølge, hvor de nyeste notifikationer vises øverst. Alle notifikationer, der modtages og ikke slettes, vises i listen med notifikationer. Hvis dit svar på en notifikation ikke sendes tilbage til serveren på grund af en kommunikations-/systemfejl, vil du blive underrettet herom.

På en ulåst enhed vises notifikationer øverst på skærmen. Hvis der kommer flere notifikationer inden for kort tid, vises den seneste notifikation ovenpå de andre.

På en låst Android-enhed er notifikationen angivet med lyd og vibrationer og en visuel meddelelse på displayet.

På en låst iOS-enhed vises en ny notifikation, men uden kategori-/prioritetsfarve.

Når du modtager en notifikation, skal du stryge opad eller til begge sider af notifikationen eller trykke på ikonet for at skjule den.

Tryk på meddelelsen for at åbne notifikationen. Afhængigt af din implementering og indstillingerne for den notifikation, du modtager, kan du også køre forskellige andre funktioner fra notifikationen, f.eks. start af en browser, start af et opkald eller start af tredjepartsapps.

4.2.1 Patientoplysninger i notifikationer


De advarsler, du modtager, kan indeholde patientoplysninger, som f.eks. navn eller alder. Disse oplysninger vises ikke i indikationen; de vises kun, når du åbner selve notifikationen.

Afhængigt af systemkonfigurationen kan patientoplysninger også vises på listen over notifikationer.



4.2.2 Håndtering af notifikationer på Android-enheder

En spinner angiver, at notifikationer opdateres. Opdatering via DECT-kanalen (kun Ascom Myco 3-enheder) kan tage adskillige sekunder.

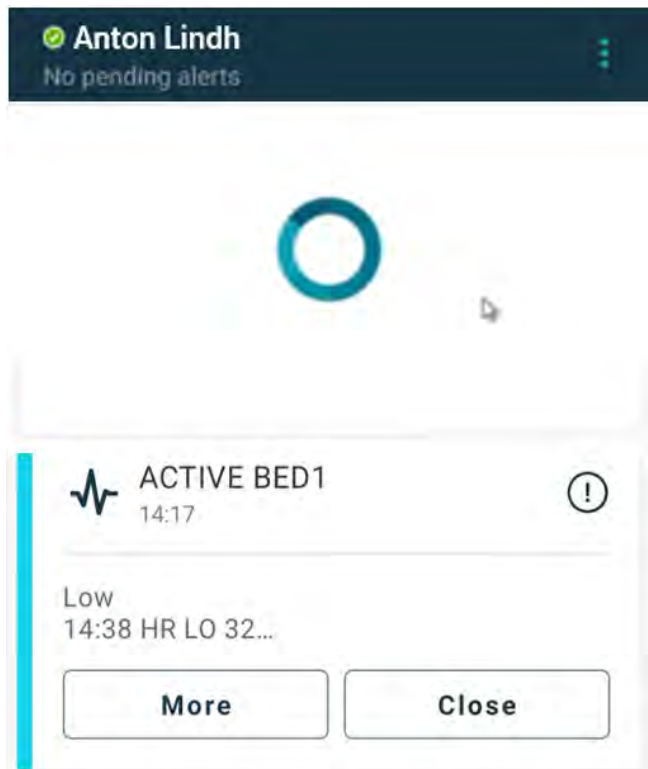

Antallet af ikke-håndterede notifikationer vises på den nederste navigationslinje samt på den øverste linje.

Hvis du vil læse en notifikation i fuld skærm, skal du trykke på dens beskedtekst.

4.2.2.1 Notifikationer om opkaldsopsætning (kun Ascom Myco)

Notifikationen med opkaldsopsætning starter et opkald, enten automatisk, eller når du trykker på en indstilling i notifikationen. Dette kan enten være et almindeligt opkald eller et Push-to-Talk (PTT)-opkald.

Når et opkald er blevet afbrudt, kan du oprette forbindelse til opkaldet igen fra notifikationen.

PTT-opkaldet er et gruppeopkald, der kræver, at du trykker og holder en knap nede på skærmen eller trykker på en konfigureret multifunktionsknap, når du taler. Mens en bruger taler, lytter de andre.

Hvis du allerede er i et opkald og modtager en notifikation med opkaldsopsætning, afbrydes det opkald, og det modtagne opkald tilsluttes automatisk efter en kort forsinkelse (straks for prioritet 1-notifikationer), hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Notifikationen er konfigureret til at blive accepteret automatisk.
- Notifikationen har højere prioritet end prioriteten for det igangværende opkald.

Hvis prioriteten for en notifikation med opkaldsopsætning er lavere end det igangværende opkald, eller hvis notifikationen ikke er konfigureret til at blive accepteret automatisk, skal du starte opkaldet manuelt. Start af et opkald fra en notifikation vil afbryde ethvert igangværende opkald.

4.2.3 Håndtering af notifikationer på iOS-enheder

Antallet af ikke-håndterede notifikationer vises i den øverste linje.

Hvis du vil læse en notifikation i fuld skærm, skal du trykke på dens beskedtekst.

4.3 Sortér notifikationer

Listen med notifikationer sorteres som standard i kronologisk rækkefølge, hvor de nyeste notifikationer vises øverst. Det lille ikon over teksten **Sortér** nederst på siden **Notifikationer** viser, hvordan notifikationerne er sorteret i øjeblikket.

1. Tryk på ikonet **Sortér** på siden **Notifikationer** .
2. Vælg hvordan du vil sortere notifikationerne. Notifikationerne vises tilsvarende.



Notifikationer sorteres efter tid med den nyeste notifikation øverst.



Notifikationer sorteres efter prioritet med den notifikation med højest prioritet øverst. Notifikationer med samme prioritet sorteres efter tid med den nyeste notifikation øverst.



Notifikationer grupperes efter kategori.

4.4 Filtrér notifikationer

1. Tryk på ikonet **Filtrér**  på siden **Notifikationer**.
2. Vælg, hvordan du vil filtrere notifikationerne, ved at vælge en indstilling på en af listerne.



I **Prioritetslisten** kan du filtrere efter **Notifikation**, **Høj**, **Normal** og **Lav**.



I listen **Svarstatus** kan du filtrere efter **Venter på svar** og **Besvaret**.



I **Kategorilisten** kan du filtrere efter alle kategorier, der er tilgængelige på din notifikationsliste, f.eks. **Akutkald**, **Laboratorie** og **Overvågning**.


Når en indstilling er blevet valgt, dæmpes baggrunden på siden **Notifikationer**, og kun filtrerede notifikationer vises.

3. Tryk på ikonet **Annuller** for at fjerne filteret .

4.5 Videresend notifikationer

Hvis du vil videresende en notifikation, skal du have appen Unite Collaborate installeret på din enhed.

1. Tryk på en notifikation for at åbne siden med notifikationsoplysninger.
2. Tryk på knappen **Del**. Der genereres et skærm billede af siden med notifikationsoplysninger. Du kan sende billedet som en vedhæftet fil via -appen.

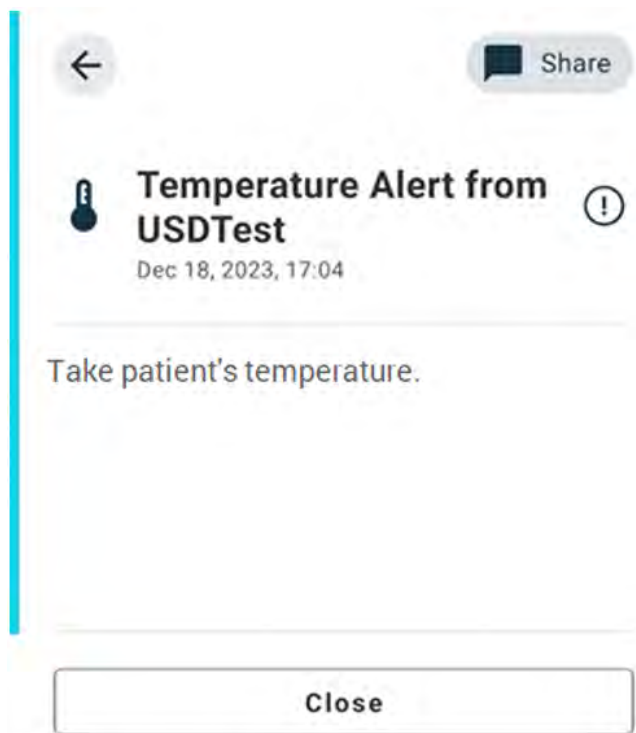

4.6 Slet notifikationer

1. Tryk og hold på den notifikation, du vil slette. Der vises en menu.
2. Tryk på **Slet notifikation** for at fjerne den respektive notifikation eller **Slet alle notifikationer** for at fjerne alle notifikationer.
3. Tryk på **Slet** i advarsel for at bekræfte.

5 Tilgængelighedsstatus

Hvis systemet er konfigureret til det, kan brugere vælge deres tilgængelighedsstatus fra enheden. Denne tilgængelighedsstatus kan bruges af systemet, for eksempel når det fastlægges, hvilke enheder en notifikation skal sendes til.

5.1 Tilgængelighedsstatus på Android-enheder

Din tilgængelighedsstatus er angivet i programmets øverste linje. Du kan ændre din tilgængelighedsstatus manuelt til **Optaget**, **Forstyr ikke** eller **Tilgængelig** i **Min profil**. Du kan få adgang til **Min Profil** enten fra den nederste navigationslinje eller fra Ascom Login-appen.

Indikation af tilgængelighedsstatus

Følgende ikoner bruges til at indikere tilgængelighedsstatus:



Tilgængelig




Optaget



Forstyr ikke

Skift status

I **Min profil**, skal du trykke på , og vælge **Tilgængelig**, **Optaget** eller **Forstyr ikke**.

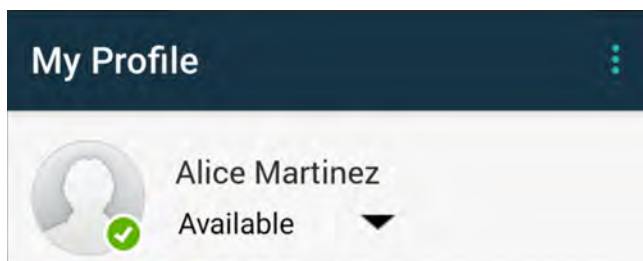

Bemærk, at afhængigt af systemkonfigurationen modtager du muligvis ikke notifikationer, hvis din tilgængelighedsstatus er indstillet til **Optaget** eller **Forstyr ikke**.

5.2 Tilgængelighedsstatus på iOS-enheder

Din tilgængelighedsstatus er angivet i programmets øverste linje.

Indikation af tilgængelighedsstatus



Tilgængelig



Optaget



Forstyr ikke




Logget ud/Offline

Skift status

Du kan kun ændre din tilgængelighedsstatus, hvis du har appen Unite Collaborate installeret på den samme enhed, ellers er denne procedure ikke tilgængelig for dig.

1. Tryk på enten dit navn eller dit profilbillede på den øverste linje.

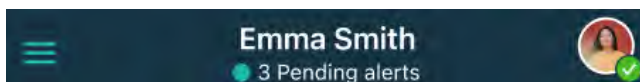

Du kan nu se tilgængelighedsmulighederne.

2. Sådan ændrer du din tilgængelighedsstatus:
 - Vælg enten **Tilgængelig**, **Optaget** eller **Må ikke forstyrres**.
 - Afhængigt af dine indstillinger kan du blive omdirigeret til Unite Collaborate, hvor du kan tilføje yderligere oplysninger om de avancerede tilgængelighedsprofiler (hvis du f.eks. vælger **Må ikke forstyrres**, kan du også vælge et tidspunkt, hvor du vil være **Tilgængelig** igen). **Gem** dine indstillinger.
 - Når du er færdig, dirigeres du tilbage til appen Unite Axess for Smart Devices.

Hvis du vil logge ud, skal du trykke på **Log ud**.




Bemærk, at afhængigt af systemkonfigurationen modtager du muligvis ikke notifikationer, hvis din tilgængelighedsstatus er indstillet til **Optaget** eller **Forstyr ikke**.

6 Advarsler

Her er anført eksempler på advarselsmeddelelser, som kan blive vist på enheden. For at se hele advarslen på en oplåst enhed skal du trykke på advarselsmeddelelsen. Bortset fra mistet netværksforbindelse kræver alle advarsler typisk hjælp fra en administrator for at løse dem.


Meddelelsessystemets advarsel angiver, at forbindelsen til meddelelsessystemet er begrænset, og at der er begrænset adgang til nye notifikationer/beskeder.

Figur 6. Advarsel om meddelelsessystem på iOS-enheder

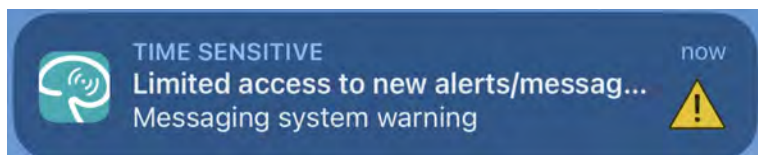

Meddelelsessystemets advarsel om fejl angiver, at forbindelsen til meddelelsessystemet ikke er tilgængelig, og at der ikke er adgang til nye notifikationer/meddelelser.


Figur 7. Advarsel om fejl i meddelelsessystem på iOS-enheder

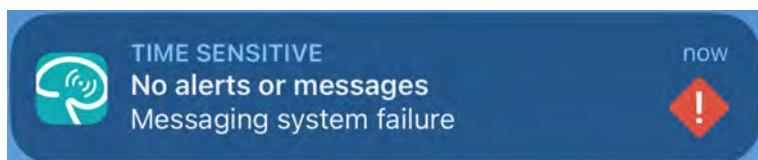


Afhængigt af den tilsluttede kildeenhed, især for et CDAS/DAS-system, kan der blive vist en overlejringsnotifikation, der angiver, at forbindelsen til en eller flere alarmkilder er mistet på din enhed.


Tryk på **Flere oplysninger** for at læse flere oplysninger om advarslen.

Figur 8. Forbindelse til alarmkilde mistet på Android-enheder

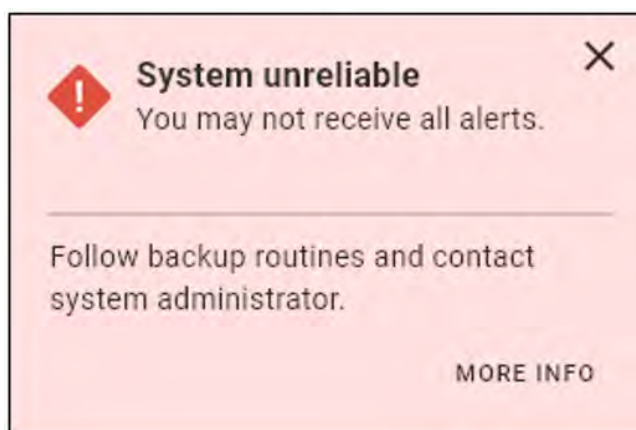


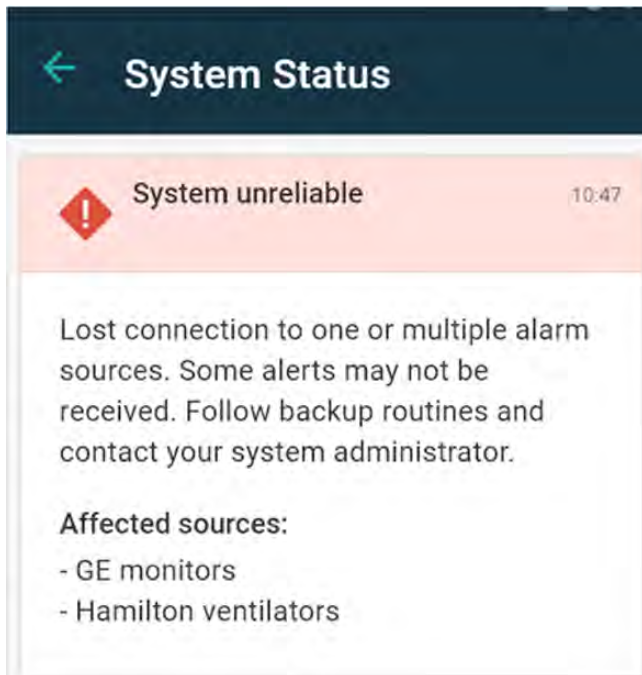

Figur 9. Forbindelse til alarmkilde mistet på iOS-enheder

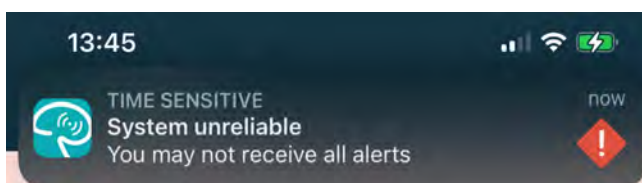


Figur 10. Fejlmeddelelse om notifikationer på Android-enheder

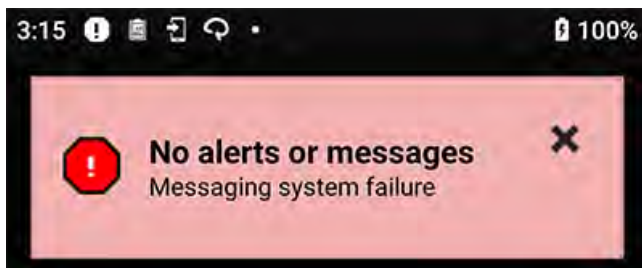


Denne advarsel angiver, at du ikke kan bruge appen til primær notifikation af alarmer.

Figur 11. DIS/DAS-advarsel

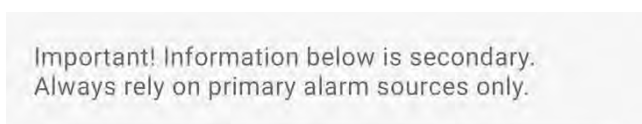

Hvis Unite Axess for Smart Devices appen er installeret i et testmiljø, vises der en advarsel på din enhed.

Figur 12. Banner for testmiljø

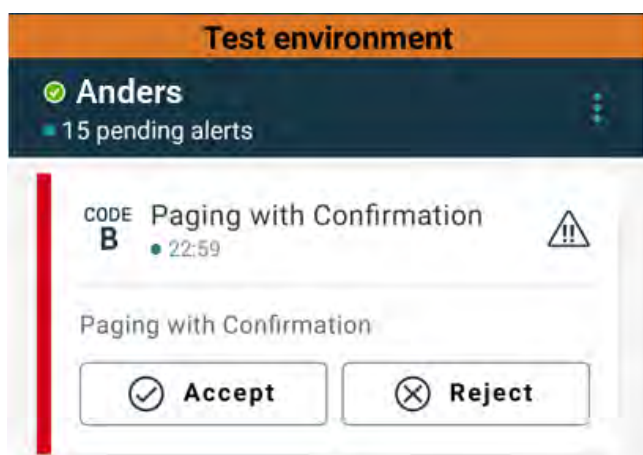

6.1 Håndter advarselsmeddelelser

I følgende tabel beskrives de handlinger, der er tilgængelige til håndtering af advarselsmeddelelser, der vises på din enhed.

Advarsler	Beskrivelse	Handling
System upålideligt Du modtager muligvis ikke alle notifikationer	Forbindelsen til medicinsk udstyr er ikke fuldt funktionel. Afhængigt af årsagen kan nogle advarsler stadig distribueres som forventet.	Følg gældende nødprocedurer og kontakt din administrator.
Notifikationer kunne ikke leveres Ingen tildelinger	Der er ikke oprettet opgaver.	Tildel medarbejdere til alle roller i Unite Assign. Hvis problemet vedvarer, følg gældende nødprocedurer og kontakt din administrator.
Manglende systemstatus indikatorer En eller flere enheder er utilgængelige	Enkeltfejlsikkerhed til systemstatusindikation kan ikke opnås.	- Kontroller, at Digistat Smart Central kører på dedikerede arbejdsstationer - Kontroller, at lystårnet er tilsluttet - Kontroller, at statusmodtagere, der er konfigureret i Unite Assign, stadig er loggeret ind på deres enheder.

Uhåndteret notifikation Kunne ikke leveres til tildelt personale	En notifikation blev ikke distribueret til nogen.	• Tildel medarbejdere til alle roller i Unite Assign. • Kontroller, at alle modtagere stadig er logget ind på deres enheder. Hvis problemet vedvarer, følg gældende nødprocedurer og kontakt din administrator.
Uhåndteret notifikation Afvist af alle modtagere	Notifikationen blev distribueret til mindst én modtager, men notifikationen blev ikke accepteret af nogen.	• Tildel medarbejdere til alle roller i Unite Assign. • Kontroller, at alle modtagere stadig er logget ind på deres enheder.
System upålideligt Systemet fungerer måske ikke som forventet	En konfigurationsfejl i systemet forhindrer, at advarsler fra tilsluttet medicinsk udstyr distribueres som forventet. Notifikationer fra andre systemer, for eksempel patientkald, kan stadig distribueres.	Følg gældende nødprocedurer og kontakt din administrator.

7 Indstillinger

7.1 Indstillinger på Android-enheder

Visse indstillinger konfigureres i appen Unite Axess for Smart Devices og andre indstillinger i Ascom Login-appen.

Indstillinger i Unite Axess for Smart Devices


1. I Unite Axess for Smart Devices skal du trykke på ikonet **Menu**  og derefter på **Indstillinger**.



2. Konfigurer indstillingerne.
 - Indstillingen **Tilstand for låseskærm** bestemmer, hvordan appen Unite Axess for Smart Devices opfører sig, når skærmen er låst. I tilstanden **Normal** vil appen Unite Axess for Smart Devices opføre sig som enhver anden app. I **App**-tilstand kan appen Unite Axess for Smart Devices køre ovenpå den låste skærm.
Tryk på **Låst skærmtilstand**, og vælg **Normal** eller **App** for at ændre mønster for låst skærmtilstand.
 Når du bruger Imprivata Mobile Device Access (MDA) til godkendelse, skal **Låseskærmtilstand** indstilles til **Normal**. Kun én app kan køre på låseskærmen, og i dette tilfælde skal det være appen Imprivata MDA.
 - Med **Opkaldshensigt** opkaldshensigt bestemmes, hvordan enheden forbinder opkaldet, når du har valgt denne type svar i en indgående notifikation. Enheden kan enten ringe med det samme når indstillingen er valgt, eller den kan vise nummeret, hvorefter du skal starte opkaldet manuelt. Vi anbefaler brug af indstillingen **Udfør opkald**, men skift til **Ring selv nummer op**, hvis din app-version ikke understøtter direkte opkald.
Tryk på **Hensigt med opkaldshandling**, og vælg **Udfør opkald** eller **Ring selv nummer op** for at ændre kaldemønstre.

Indstillinger i Ascom Login


1. Tryk på ikonet **Ascom Login**-ikonet  på din enhed.
2. Tryk på ikonet **Menu**  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk på **Indstillinger**. Afhængigt af serverkonfigurationen kan følgende indstillinger enten konfigureres på enheden eller låses:

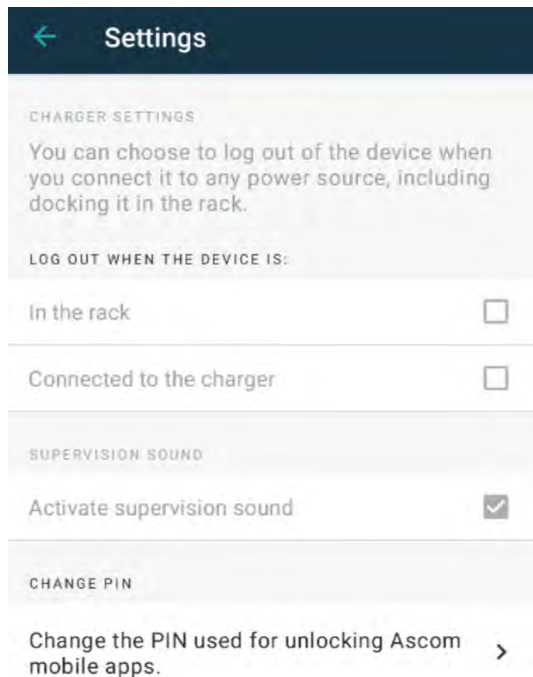

- I **Opladerindstillinger**, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Rack** eller **Tilsluttet opladeren** for at aktivere, at enheden automatisk logger ud, når den oplader.
- Hvis **Overvågningslyden** aktiveres, bipper enheden hvert minut, hvis forbindelsen til systemet går tabt.
- I **Skift PIN** kan du ændre den PIN-kode, der kræves for at låse dine Ascom-mobilapps op.

7.2 Indstillinger på iOS-enheder

I Unite Axxess for Smart Devices skal du trykke på ikonet **Menu**  og vælge **Indstillinger**. Afhængigt af serverkonfigurationen kan indstillingen **Aktivér overvågningslyd** konfigureres eller låses på enheden.

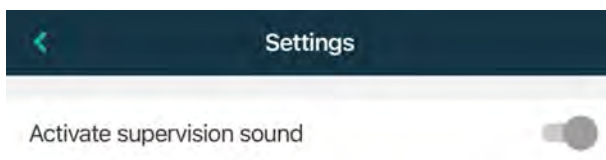

Hvis den overvågede enhed mister kontakt med systemet, vil du blive underrettet med en besked og en lyd, der gentages.

Anvend **Aktivér overvågningslyd** til at slå overvågningslyden til og fra.

8 Om Apps

Du kan finde oplysninger om dine installerede apps på skærbilledet **Om** for hver app.

8.1 Unite Axess for Smart Devices

På skærbilledet **Om** kan du se versionen af Unite Axess for Smart Devices-appen, serverens navn og version, softwareversionen og modellen på din smart-enhed, dit brugernavn og meddelelsesnummer, information om fabrikanten og en ansvarsfraskrivelse.

(Kun Android) Ved at trykke på linket **Persondatapolitik** åbnes der et tillæg til privatlivserklæringen for Ascom Unite-produkter. Dette persondatatillæg vedrører udrulning og brug af Ascoms Unite Axess for Smart Devices til Smart Devices på organisationens mobilenheder.

Du kan også finde et link til mere dokumentation om appen Unite Axess for Smart Devices.

I software-filen Om	Symbolets titel	Beskrivelse
	CE-mærke	Angiver udstyrets overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/745 om medicinsk udstyr således, at det har fri bevægelighed inden for medlemsstaterne og tages i brug i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
	Fabrikant	Angiver fabrikanten af det medicinsk udstyr, inklusive adresse og telefonnummer.
	Produktionsdato	Angiver den dato, hvor det medicinske udstyr blev produceret.
	Se brugsanvisningen	Angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen.
	Katalognummer	Angiver fabrikantens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
	Advarsel	Angiver behovet for, at brugeren konsulterer brugsanvisningen for at læse vigtige advarseloplysninger såsom advarsler og forsigtighedsregler, der af forskellige årsager ikke kan præsenteres på selve det medicinske udstyr.
	Medicinsk udstyr	Angiver, at produktet er medicinsk udstyr.
	Unik enhedsidentifikation	Angiver en unik enhedsidentifikator, der på passende vis identificerer en enhed gennem dens distribution og brug.

1. Tryk på ikonet **Menu**.
2. Tryk på knappen **Om**.

8.2 Ascom Login (kun Android)

Hvis du vil finde oplysninger om Ascom Login-appen, skal du trykke på ikonet Ascom Login  på din enhed. Tryk på ikonet **Menu** i øverste højre hjørne på din skærm, og tryk derefter på **Om**.

I visningen **Om** kan du se appens version, software-id og oplysninger om producenten.

Ved at trykke på linket **Licens** åbnes en visning med oplysninger om licensen.

Tryk på knappen **Tilbage** for at vende tilbage til startside.

Appendiks A **Relaterede dokumenter**

Onlinehjælp i Unite Axess for Smart Devices-appen

Appendiks B Dokumenthistorik

Version	Dato	Beskrivelse
L	6. september 2024	Tilføjelse af advarsler relateret til brug af Face ID-beskyttelse og Eye Tracking-funktioner på iOS-enheder til 1.1 Indskærpelse og bemærkninger, Side 1. Tilføjelse af en bemærkning om widgetten Axess For Smart Devices til 2.2 Layout på iOS-enheder, Side 6. Opdatering af forklaring af blodfiltrering og sygeplejerske/assistance-kald 4.1 Alarmikoner, Side 13. Tilføjelse af oplysninger om iOS-meddelelsessystemets advarsler til 6 Advarsler, Side 23. Mindre redigeringer.
K	28. februar 2024	Opdatering af afsnit Forsigtighed og bemærkninger — opdatering af advarsel om DIS-enheder. Formål — Malaysia tilføjet til specifik erklæring om Tilsigtet formål Opdatering af liste over ikoner i Ikoner. Opdatering af app-skærme for at afspejle den nyeste software.
J	21. september 2023	Opdatering af 1.2.1 Kliniske fordele, der kan forventes, side 4 med yderligere krav. Tilføjelse af 4.2.1 Patientoplysninger i notifikationer, side 15. Tilføjelse 4.2.2.1 Notifikationer med opkaldsopsætning (kun Ascom Myco), side 16. Opdatering af UI-billeder for at afspejle de seneste opdateringer, herunder flytning af Apps-funktionen til Ascom Login.
I2	24. marts 2023	Tilføjelse af Australien til 1.3 Tilsigtet Anvendelse/Formål, side 3 .
I	19. september 2022	Tilføjede oplysninger om prioritetsikoner og detaljerede advarsels-meddelelser. Tilføjelse af 4.5 Videre send notifikationer, side 17, 1.3.1 Kliniske fordele, der kan forventes, side 4 og 6.1 Håndter advarsels-meddelelser, side 21.
H2	23. marts 2022	Tilføjelse af oplysninger om, hvordan det at logge på Unite Axess for Smart Devices iOS betyder, at du også kan logge på andre understøttede Unite iOS-apps (4.2 iOS-enheder: Log ind/Log ud, side 10)
H	28. februar 2022	Dokumentation af det føderale login og de tilladelser, der kræves på Android. Tilføjelse af notifikationsikonerne Accepter/Afvis. brugertilstedeværelsesfunktionen Må ikke forstyrres tilføjet til Tilgængelighedsstatus på Android og iOS. Tilføjelse af yderligere advarsler og oplysninger om testmiljøbanneret.

G	24. september 2021	Tilføjelse af oplysninger om Agtpågivenhed og rapportering af hændelser. Fjernelse af kapitlerne Videresend notifikation og håndtering af beskeder (kun iOS), da chatfunktionen kun understøttes i appen Unite Collaborate. Opdatering af den tilsigtede brug. Tilføjelse af flere oplysninger om tilladelser. Tilføjelse af flere oplysninger om håndtering af notifikationer. Tilføjelse af nyt MD-ikon (medicinsk udstyr) og beskrivelse.
F2	16. november 2021	Tilføjelse af nye advarsler om notifikationsmuligheder i iOS 15. Tilføjelse af information om Årvågenhed og rapportering af hændelser. Tilføjelse af flere oplysninger om Android-tilladelser. Tilføjelse af flere oplysninger om håndtering af notifikationer.
F	17. december 2020	Imprivata-integration dokumenteret.
E	07. oktober 2020	3.1 Layout på Android-enheder, side 3: Nyt. 3.2 Layout på iOS-enheder, side 4: Nyt 3.3 Ikoner, side 4: Tilføjelse af ikoner. 4.1 Log ind/Log ud på Android-enheder, side 6: Nyt. 4.2 Log ind/Log ud på iOS-enheder, side 7: Nyt: 5.1.1 Håndtering af notifikationer på Android-enheder, side 8: Nyt. 5.1.2 Håndtering af notifikationer på iOS-enheder, side 8: Nyt. 5.4 Videresend notifikation (kun iOS), side 11: Kun tilføjelse af iOS. 6 Håndtering af meddelelser (kun iOS), side 12: Tilføjelse af note "gælder kun for iOS-enheder". 7 Tilgængelighedsstatus på Android-enheder, side 13: Nyt 8 Tilgængelighedsstatus på iOS-enheder, side 14: Nyt. 9 Advarselsmeddelelser, side 15: Erstattede billeder.
D	10. juni 2019	Tilføjelse af "Tilsigtet anvendelse med Connect til kliniske systemer klasse IIb i EU/EFTA" til kapitel 2 Tilsigtet anvendelse, side 2 og kapitel 9.1 Log ind/Log ud via Ascom Login, side 15.
C	01. november 2018	Tilføjet CE-mærke med NB-nummer.
B	21. september 2018	Tilføjet 3.1.1 ikoner, side 6
A	23. marts 2018	Første version

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom