

KÄYTTÖOHJE

Ascom Unite Axess for Smart Devices

ascom

Tietoja tästä asiakirjasta

Tässä asiakirjassa kuvataan AscomUnite Axess for Smart Devices -sovellus. Tämä asiakirja on tarkoitettu Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen käyttäjille.



Valmistaja

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Puhelin +46 31 55 94 00

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1 Esittely	1
1.1 Huomio ja huomautukset	1
1.2 Vaaratilannejärjestelmä ja tapausten raportointi	3
1.3 Käyttötarkoitus/tarkoitus	3
1.3.1 Odotettavissa olevat kliiniset hyödyt	4
2 Unite Axxess for Smart Devices -sovelluksen asettelu	5
2.1 Asettelu Android-laitteissa	5
2.2 Asettelu iOS-laitteissa	6
2.3 Kuvakkeet	6
2.4 Unite Axxess -ohje	7
3 Yhdistä Unite-järjestelmään	8
3.1 Kirjaudu sisään / Kirjaudu ulos Ascom Loginin kautta	8
3.1.1 Todentaminen Imprivata Mobile Device Accessilla	9
3.2 iOS-laitteet: Sisään- ja uloskirjautuminen	10
4 Hälytysten käsittely	12
4.1 Hälytyskuvakkeet	13
4.2 Hälytysten vastaanottaminen	16
4.2.1 Potilastiedot Alertsissa	16
4.2.2 Hälytysten käsittely Android-laitteissa	17
4.2.3 Hälytysten käsittely iOS-laitteissa	18
4.3 Hälytysten lajitteleminen	19
4.4 Hälytysten suodattaminen	19
4.5 Hälytysten välittäminen eteenpäin	19
4.6 Hälytysten poistaminen	20
5 Tavoitettavuuden tila	21
5.1 Varallaolotila Android-laitteissa	21
5.2 Varallaolotila iOS-laitteissa	21
6 Varoitusviestit	23
6.1 Varoitusviestien käsittely	25
7 Asetukset	27
7.1 Asetukset Android-laitteissa	27
7.2 Asetukset iOS-laitteissa	28
8 Tietoja sovelluksista	29
8.1 Unite Axxess for Smart Devices	29
8.2 Ascom Login (vain Android)	30
Liite A Aiheeseen liittyvät asiakirjat	31
Liite B Asiakirjahistoria	32

1 Esittely

Unite Axess for Smart Devices sovellus näyttää hälytyksiä älylaitteiden käyttäjille. Sovellus voidaan integroida täydellisesti Unite-järjestelmään, joten potilastyötä tekevät saavat interaktiiviset viestit potilastapahtumista varmasti milloin ja missä tahansa.



Kuvat on otettu älylaitteesta, jossa on englanninkielinen käyttöliittymä, joten kieli voi poiketa näytössäsi näkyvästä kielestä.

1.1 Huomio ja huomautukset

Lue kaikki tässä oppaassa luetellut varoitukset ja huomautukset, ja noudata niitä.

VAROITUS koskee seikkoja, jotka voivat suoraan tai välillisesti aiheuttaa vaarallisen tilanteen tai myötävai-
kuttaa sen syntymiseen ja josta voi olla seurauksena huomattavia fyysisiä vammoja tai vahinkoa ihmisten
terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

HUOMIO tarkoittaa, että käyttäjän tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta laitteen turvallisen ja tehokkaan
käytön varmistamiseksi.

HUOMAUTUS tarkoittaa, että asiasta on saatavilla täydentäviä yleistietoja.



Varoitus

Liitetyistä lääkinnällisistä laitteista riippuen tuotetta voidaan käyttää hälytysten ensisijaiseen (DAS/
CDAS) tai toissijaiseen (DIS) hälytysilmoitukseen. Kun vähintään yksi DIS-laite on käytössä,
käyttäjät näkevät varoituksen siitä, että jotkin liitetty laitteet eivät tue ensisijaista hälytysilmoitusta.




Varoitus

Hälytysilmoituksen voi korvata uudella tulevilla hälytysilmoituksella, jos lyhyessä ajassa saadaan
useita hälytyksiä. Varmista, että vastaat tarkoitettuun hälytykseen.



Varoitus

Tuleva tai toistuva hälytys voi peittää osittain koko näytön näkymässä avatun ilmoituksen.
Molemmissa hälytyksissä on näkyvissä valintapainikkeet suoran vuorovaikutuksen mahdollistami-
seksi. Huomaa, että painikkeet on sijoitettu kunkin hälytyksen alaosaan.

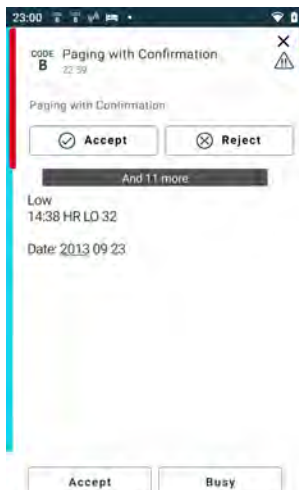

Varoitus

Älä käytä tarkennusprofiileja iOS-laitteissa

Jos käytetään tarkennusprofiileja, on olemassa vaara, että tulevien hälytysten ilmoitukset estetään.



Varoitus

Älä poista käytöstä ilmoituksia Axxess for Smart Devices -sovelluksesta iOS-laitteissa

Älä poista käytöstä ilmoituksia Axxess for Smart Devices -sovelluksesta iOS-laitteissa. Jos sovelluksen ilmoitukset on poistettu käytöstä, uudet hälytykset voivat jäädä huomaamatta.



Varoitus

Älä käytä Axxess for Smart Devices -sovelluksen Face ID -suojausta iOS-laitteissa.

Jos Face ID -suojausta käytetään, on olemassa riski, että ilmoituksissa olevat tärkeät tiedot jäävät huomaamatta.



Varoitus

Älä käytä Axxess for Smart Devices -sovellusta Eye Tracking -ominaisuuden avulla iOS-laitteissa.

Jos Eye Tracking -ominaisuutta käytetään, on olemassa riski, että vastaanotetusta hälytyksestä valitaan vahingossa jokin vaihtoehto.



Huomio

Hälytysten ja varoitusten tunnistaminen voidaan estää, jos ilmaisujen äänenvoimakkuus on pienempi kuin ympäristön äänitasot.

Tietoja hälytysäänistä

Voit säätää ilmoituksen äänitasoja laitteen asetuksissa. Hälytysääniin käytettävät oletusäänitiedostot on suunniteltu sopiviksi hälytysilmoitustarkoituksiin.

1.2 Vaaratilannejärjestelmä ja tapausten raportoiminen

Loppukäyttäjien tai jälleenmyyjien/jakelijoiden on kerrottava Ascomille kirjallisesti viiden (5) työpäivän kuluessa kaikista tietoonsa tulleista tuotteisiin liittyvistä tapauksista. Tällainen ilmoitus voi olla suullinen tai kirjallinen lausunto tai vinkki siitä, että tuote ei täytä laitteen tunnistetietoja, laatua, kestävyyttä, luotettavuutta, turvallisuutta, tehokkuutta tai suorituskykyä koskevia vaatimuksia.



Kaikista vakavista tapauksista, jotka ovat suoraan tai välillisesti johtaneet, saattaneet johtaa tai saattavat johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan väliaikaiseen tai pysyvään vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan kansanterveydelliseen uhkaan, joka on tapahtunut suhteessa tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle sähköpostitse osoitteeseen vigilance@ascom.com ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Vakavissa tapauksissa tai jos havaitaan tuotteen toimintahäiriö, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vamman, tai jos asiakas ilmaisee huolensa potilasturvallisuudesta, loppukäyttäjät tai jälleenmyyjät / jakelijat ilmoittavat Ascomille mahdollisimman pian ja pyrkivät parhaansa mukaan antamaan tällaisen ilmoituksen suullisesti (Ascomin teknisen avun keskus) kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa tiedon saamisesta tai tällaisen valituksen vastaanottamisesta tai siitä, kun ne ovat tulleet tietoisiksi tällaisesta tuoteongelmasta. Suullisen ilmoituksen jälkeen tulee antaa kirjallinen vahvistus (sähköpostitse) 24 tunnin kuluessa osoitteeseen vigilance@ascom.com.

Loppukäyttäjät tai jälleenmyyjät/jakelijat antavat riittävät tiedot, jotta Ascom voi täyttää lakisääteiset raportointivelvollisuutensa vaaratilanteista ja tapahtumista, jotka on ilmoitettava ja rekisteröitävä alueen kansallisten säännösten mukaisesti. Jos tapahtuma katsotaan vaaratilanteeksi, josta on ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, Ascomin on laadittava ja toimitettava siitä raportti.

Jos jokin sääntelyelin tai toimivaltainen viranomainen antaa loppukäyttäjälle tai jälleenmyyjälle/jakelijalle kirjallisen ilmoituksen johonkin tuotteeseen liittyvistä tiedusteluista tai tutkimuksista tai tuotteiden varastointiin käytettävien tilojen tarkastuksesta tai pyytää joitakin tuotteeseen liittyviä tietoja, loppukäyttäjän tai jälleenmyyjän/jakelijan on viipymättä ilmoitettava asiasta Ascomille.

1.3 Käyttötarkoitus/tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan Unite Axxess for Smart Devices -sovelluksen käyttötarkoitus/tarkoitus.

Käyttötarkoitus (Yleinen)

Axxess for Smart Devices -sovelluksen tarkoitus on näyttää elektronisesti Ascomin lääkinnällisten laitteiden kautta terveydenhuollon ammattilaisille hälytysviestit (hälytykset) ja muu tieto, joka on peräisin yhdistetyistä lääkinnällisistä laitteista potilaiden valvomisen helpottamiseksi.

Axxess for Smart Devices -tuote on tarkoitettu käytettäväksi toissijaisena keinona näyttää hälytykset, ts. hälytysviestit ja muu lääkinnällisen laitteen tieto. Sen ei ole tarkoitus korvata yhdistettyjen laitteiden tietojen suoraa tarkastelua.

Axxess for Smart Devices -tuotetta ei ole tarkoitettu diagnosointiin eikä käytettäväksi aktiivisessa potilasvalvonnassa päätettäessä välittömistä kliinisistä toimista. Axxess for Smart Devices -tuotetta ei myöskään ole tarkoitettu valvomaan tai muuttamaan liitettyjen lääkinnällisten laitteiden toimintoja tai parametreja.

Axxess for Smart Devices on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön, ja sen toiminta perustuu sekä terveydenhoitolaitoksen viestintäinfrastruktuurin että käytettävien näyttölaitteiden asianmukaiseen käyttöön ja toimintaan.

Axess for Smart Devices -tuotteen komponentit on asennettava määritettyyn laitteistoon ja käyttöjärjestelmään, ja sen toiminta perustuu siihen, että terveydenhoitolaitos tarjoaa määritetyn lääkinnällisen tietotekniikkaverkon ja viestintäinfrastruktuurin.

Käyttötarkoitus (EU/EFTA/UK/AUS/MYS)

Ascom Unite Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi kliinisten järjestelmien käyttöliittymänä tiettyihin tapahtumiin liittyvien tietojen välittämiseksi, mukaan lukien elintärkeitä fysiologiset parametrit, määritettyihin näyttölaitteisiin potilasvalvonnan tueksi. Näyttölaitte ilmaisee hälytyksen vastaanottamisen näkyvällä ja/tai kuuluvalla merkillä ja/tai tärisevällä.

Connect for Clinical Systemsin ansiosta tapahtumailmoituksia voidaan käsitellä ja suodattaa niin, että niiden esiintymistiheys ja määrä vähenevät. Näin terveydenhuoltohenkilöstö saa selkeämmin tietoja, jotka vaativat kliinisiä toimenpiteitä.

Lähes reaaliaikaisten lääkintälaittehälytysten osalta Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi toissijaisena hälytyksenä, ts. rinnakkaisena, ylimääräisenä, redundanttina välitysmekanismina ilmoittamaan terveydenhuoltohenkilöstölle tietyistä hoitoon liittyvistä tapahtumista.

Valikoiduissa lähdelaitteissa ja -järjestelmissä Connect for Clinical Systems toimii jaetun hälytysjärjestelmän (DAS/CDAS) yhdistäjänä ja tiedonvälittäjänä, joka välittää fysiologiset ja tekniset hälytykset luotettavasti terveydenhuollon ammattilaisille määrättyissä näyttölaitteissa ja tiettyihin järjestelmiin.

Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten lääkinnällisten laitteiden kanssa, kun potilaiden fysiologisia parametreja tarvitsee valvoa. Potilasjoukko ja potilaiden tila määritetään yhdistetyillä lääkinnällisillä laitteilla.

Connect for Clinical Systems on asennettu tiettyihin IT-järjestelmiin, ja se perustuu liitettyjen lääkinnällisten laitteiden, järjestelmien, näyttölaitteiden ja lääketieteellisen IT-verkon asianmukaiseen käyttöön ja toimintaan.

Connect for Clinical Systems -sovellusta käytetään terveydenhuollon laitoksissa, tehohoidon yksiköissä, valvontayksiköissä, yleisosastoilla ja muilla osastoilla sekä erityiskokoonpanosta riippuen terveydenhuollon ulkopuolella.

1.3.1 Odotettavissa olevat kliiniset hyödyt

- Vähentää kriittisten potilashälytysten huomaamatta jäämisen riskiä. ¹
- Auttaa vähentämään hälytystursumusta vähentämällä hoitajien vastaanottamien potilashälytysviestien määrää.ⁿ¹
- Auttaa lyhentämään vastausaikaa kriittisiin potilastapahtumiin. ¹
- Tehostaa työnkulkua välttämällä tarpeettomia työn keskeytyksiä.¹
- Tarjoaa käyttäjille lähes reaaliaikaisen ilmoituksen järjestelmän tilasta. ²
- Liikkuvassa työssä olevat terveydenhuollon työntekijät voivat nyt vastaanottaa yhden sovelluksen avulla kaksisuuntaisia interaktiivisia viestejä kriittisistä ja ei-kriittisistä potilastapahtumista, mukaan lukien potilaan käyränäyttekuvat.
- Potilastietojen ja -hälytysten toimittamisessa älylaitteeseen käytetään vahvaa, standardeihin perustuvaa tietoturvaa, viestien salausta ja käyttäjien todennusta. Näin ollen tiedot pysyvät turvassa, vaikka laite katoaisi.

1. HUOMAUTUS! Tämä väittämä pätee VAIN tilanteeseen, jossa Unite Axess for Smart Devices -sovellusta käytetään yhdessä Ascom Unite -ohjelmiston kanssa PM/NC-hälytysten/-tapahtumien jakeluun (esimerkiksi Unite Connect for Clinical Systems).

2. HUOMAUTUS! Tämä väittämä pätee VAIN luokan IIb järjestelmään (Unite Connect for Clinical Systems yhdessä Unite View -sovelluksen ja/tai Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen kanssa)

2 Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen asettelu


Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen oletusversio koostuu seuraavista:

- **Hälytys**-sivu: Tämä on oletussivu, kun kirjaudut sisään.
- **Valikko**: Pääset valikkoon napsauttamalla **Valikko**-kuvaketta (☰ Android- ja iOS-☰ käyttöjärjestelmissä).


2.1 Asettelu Android-laitteissa

Yläpalkin tiedot voivat vaihdella sen mukaan, miten järjestelmä on konfiguroitu (tavoitettavuuden tilan kanssa tai ilman sitä).

Kuva 1. Asettelu, jossa on tavoitettavuuden tila, on käytössä

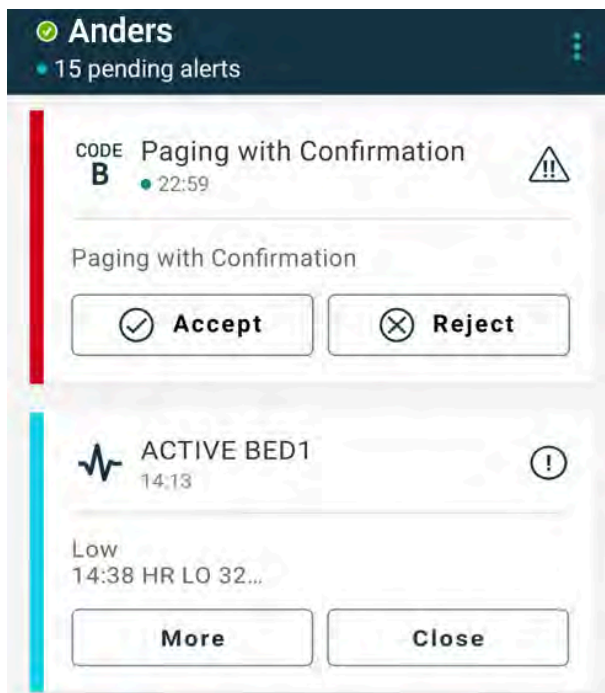

Kuva 2. Asettelu, jossa on tavoitettavuuden tila, on poissa käytöstä

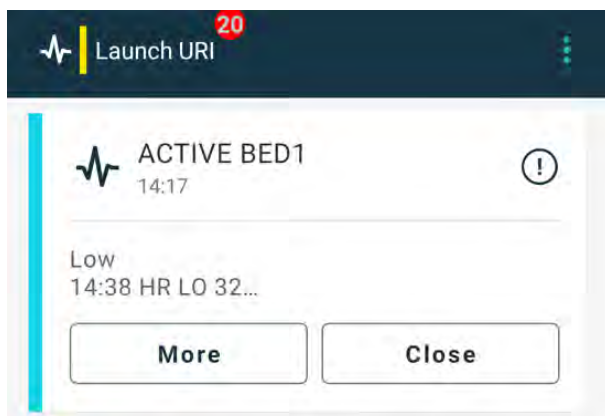

Kun sinulla on käytössäsi vähintään yksi sovellus Unite Axess for Smart Devices- ja Ascom Login -sovelluksen lisäksi, näytön alareunassa on **Navigointipalkki** nopeaa navigointia varten.

Kuva 3. Alanavigointipalkki




2.2 Asettelu iOS-laitteissa


 Jos käytät Axxess for Smart Devices -pienisohjelmaa, älä korvaa sovelluskuvaketta  pienisohjelmalla, sillä ohjelma ei sisällä käsittelemättömiä ilmoituksia.

Yläpalkin tiedot voivat vaihdella sen mukaan, miten järjestelmä on konfiguroitu (tavoitettavuuden tilan kanssa tai ilman sitä).

Kuva 4. Asettelu, jossa on tavoitettavuuden tila, on käytössä

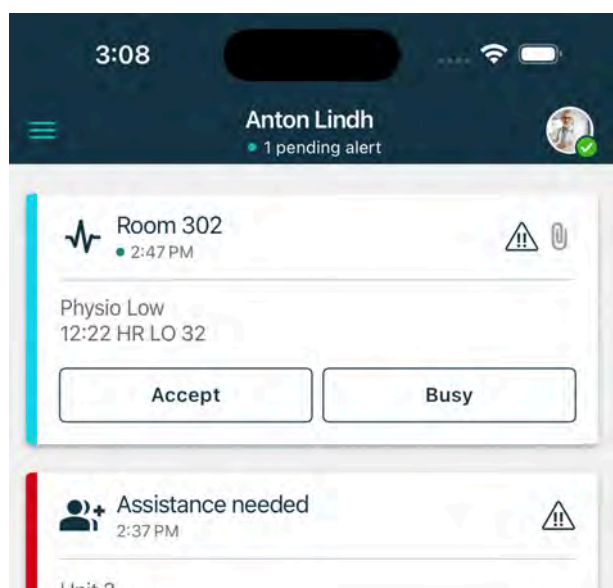

Kuva 5. Asettelu, jossa on tavoitettavuuden tila, on poissa käytöstä

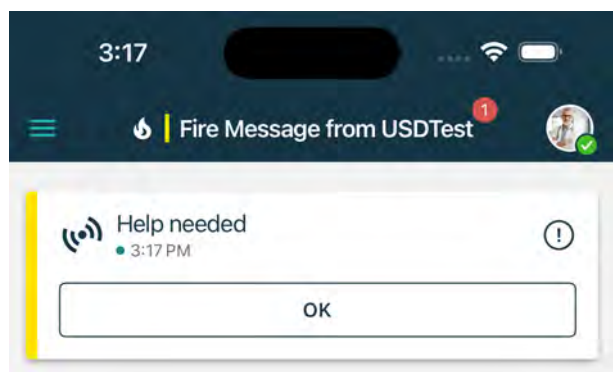

2.3 Kuvakkeet

Tässä näet sovelluksen Unite Axxess for Smart Devices jokaisen kuvakkeen merkityksen:

	Valikkokuvake (Android)
	Valikkokuvake (iOS)
	Hälytyksen vastaanottamisaika. Sininen piste ajan edessä osoittaa, että hälytystä ei ole käsitelty.
	Liitetty lisäsisältö
	Hälytyskuvake alanavigointipalkissa (vain Android)
	Alanavigointipalkin hälytyskuvake, jossa on käsittelemättömien hälytysten määrä (vain Android).
	Profiilikuvake (Androidissa alanavigointipalkissa ja iOS:ssä oikeassa yläkulmassa), jota käytetään Oman profiilin käyttämiseen.
	Käsittelemättömien hälytysten kokonaismäärä, joka näkyy yläpalkissa, kun tavoitetavuuden tila on käytössä järjestelmässä.
	Käsittelemättömien hälytysten kokonaismäärä, joka näkyy yläpalkissa, kun tavoitetavuuden tila ei ole käytössä järjestelmässä.
	Hyväksy hälytys -kuvake.
	Hylkää hälytys -kuvake. Käytetään myös Kumoa -vaihtoehdolle, eli kun sinulla on mahdollisuus perua vastauksen Hyväksyminen .
	Alhainen prioriteetti
	Keskitasen prioriteetti
	Korkea prioriteetti

2.4 Unite Axess -ohje

Unite Axess for Smart Devices -sovelluksessa on ohjeikkuna, jossa on sovelluksen toimintojen käyttöä koskevia ohjeita.

1. Avaa ohjeteksti napsauttamalla **Valikko**-kuvaketta.
2. Napsauta sitten **Ohje**-painiketta.
3. Palaa **Valikko**-sivulle napsauttamalla **Takaisin**-painiketta.

3 Yhdistä Unite-järjestelmään

Android-laitteissa muodostat yhteyden Unite-järjestelmään **Ascom Login** sovelluksessa.

Jos haluat muodostaa yhteyden Unite-järjestelmään iOS-laitteissa, tarvitset Unite Axess -palvelimen URL-osoitteen (Androidissa tämä linkki on määritetty Ascom Login -sovelluksessa). URL voi olla linkkinä tai se voidaan syöttää manuaalisesti tai tarjota paikallisen verkkotunnusjärjestelmän kautta.

Jos osoite on linkkinä, käyttäjän tarvitsee vain napsauttaa älylaitteessa olevaa linkkiä. Jos käyttäjä on jo kirjautunut sisään eri sivustolle kuin linkissä mainittuun sivustoon, tili kirjataan ensin ulos ja sitten sovellus yrittää muodostaa yhteyden linkissä annettuun URL-osoitteeseen. Jos sivusto löytyy, näkyviin tulee sisäänkirjautumisikkuna. Jos sivustoa ei löydy, käyttäjä saa virheviestin ja hän voi syöttää URL-osoitteen manuaalisesti.

Jos sinun on syötettävä URL manuaalisesti, URL sisältää seuraavat:

- Julkinen FQDN- tai IP-osoite sen julkaistun verkkosivuston käyttämiseksi, joka toimii isäntänä Unite Axess for Smart Devices-sovellukselle (esimerkiksi `uniteaxess.company.com`)
- Asennuksen aikana määritetty virtuaalinen hakemistopolku (esimerkiksi "Axess")

Palvelimen URL-osoite on esimerkiksi seuraavassa muodossa: `https://uniteaxess.<yritysnimi>.com/Axess`.

Jos URL-osoite tarjotaan paikallisen verkkotunnusjärjestelmän kautta ja jos Unite Axess for Smart Devices-sovelluksella ei ole aiemmin käytettyä sivustoa aloitettaessa, sovellus yrittää automaattisesti löytää kyseisen isäntänimen verkkotunnusjärjestelmästä. Kun vastaus saadaan, käytetään oikeaa URL-osoitetta.

3.1 Kirjaudu sisään / Kirjaudu ulos Ascom Loginin kautta

Kirjautuminen sisään ja ulos Android-laitteesta tapahtuu Ascom Login -sovelluksen kautta, joka on yleinen kirjautumisrajapinta Ascom Android -pohjaisille sovelluksille. Tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee syöttää pääsytietosi vain yhden kerran voidaksesi käyttää sovelluksia laitteellasi. Kun kirjaudut ulos, poistut kaikista Ascom Loginin tukemista sovelluksista ja hälytysluettelo poistetaan automaattisesti turvallisuussyistä.



Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään myöntämään tietyt käyttöoikeudet kohteelle Unite Axess for Smart Devices, jotta voit hyötyä kaikista tämän sovelluksen tarjoamista ominaisuuksista. Unite Axess for Smart Devices suorittaa tarkistuksen joka kerta, kun käytät sovellusta, joten näiden käyttöoikeuksien salliminen on pakollista. Älä koskaan poista niitä käytöstä, kun käytät Unite Axess for Smart Devices:

- Salli Unite Axess for Smart Devices yhteystietojesi käyttö
- Salli Unite Axess for Smart Devices puheluiden soittaminen ja hallinta
- Salli Unite Axess for Smart Devices valokuvien ja median käyttö laitteellasi
- Tason asetukset > Salli näyttö muiden sovellusten päällä
- Ilmoitusasetukset > Salli
- Optimoi akun käyttö > Kaikki sovellukset > Unite Axess > Älä optimoi

Jos päivität versiosta 6.0.1 versioon 6.2, sinun on myös kirjauduttava uudelleen sisään.

Kirjaudu sisään

1. Napsauta laitteen **Ascom Login** -sovelluskuvaketta  tai **Ascom Axess** -kuvaketta , joka ohjaa sinut Ascom Login -sovellukseen.
2. Syötä **Username** (käyttäjänimesi) ja **Password** (salasanasi).



3. Napsauta **Log in** (Kirjaudu sisään) -painiketta.

Kirjaudu sisään muilla todennuspalveluilla

Organisaatiosi voi käyttää myös muita todennuspalveluita, kuten PingFederatea tai OpenID:tä. Tässä tapauksessa kirjautuessasi sisään sinut saatetaan ohjata uudelleen tähän todennuspalveluun, jossa sinun on käytettävä organisaatiotiliäsi.

Varmista, että laitteesi aika on sama kuin palvelimen aika. Muuten et ehkä pysty kirjautumaan sisään.

Kirjaudu ulos

1. Napsauta alanavigointipalkin **Profiili**-kuvaketta  tai **Ascom Login** sovelluskuvaketta .
2. Napsauta **Kirjaudu ulos**-painiketta.

Uloskirjautumisen jälkeen kaikki hälytykset ja viestit poistetaan automaattisesti älylaitteesta turvallisuussyistä.

3.1.1 Todentaminen Imprivata Mobile Device Accessilla

Imprivata Mobile Device Access on terveydenhuollon mobiilitodennusratkaisu, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen pääsyn klinisiin mobiililaitteisiin ja sovelluksiin. Käyttäjät voivat käyttää jaettuja klinisiä mobiililaitteita ja kertakirjautua sovelluksiinsa.

Jos organisaatiosi käyttää todennukseen Imprivata Mobile Device Accessia, voit kirjautua kaikkiin Ascom-sovelluksiin ja muihin kolmannen osapuolen klinisiin sovelluksiin kertakirjautumisella joko manuaalisesti (pääsytietojesi avulla) tai koskettamalla kerran organisaatiosi tarjoamaa pääsyavainta.



Ascom Login -sovellus on oltava asennettuna laitteeseen (Ascom Myco 3, Ascom Myco 4 tai muu tuettu älylaite), jotta voit varmistaa integroinnin Imprivata-kertakirjautumisratkaisun kanssa. Imprivata-integrointi ei millään tavoin sulje pois Ascom Loginin käyttöä, joka on pakollinen muille Ascom-sovelluksille.

Kirjaudu sisään pääsyavaimella

1. Voit tarkastella **Imprivatan** lukitusnäyttöä kytkemällä älylaitteen näytön päälle.
2. Napsauta laitteesi taustapuolella olevaa NFC-tunnistusalueen pääsyavainta.
3. Kirjoita pyydettyäessä PIN-koodi ja napsauta sitten **Vahvista**.

Kaikki aiemmat käyttäjät, jotka ovat edelleen kirjautuneena laitteeseen, kirjautuvat automaattisesti ulos, minkä jälkeen sinut kirjataan sisään.

Kun olet kirjautunut sisään ja jos haluat lukita älylaitteesi, napsauta uudelleen NFC-tunnistusalueen pääsyavainta. Sen jälkeen näkyviin tulee **Imprivatan** lukitusnäyttö.

Kirjaudu sisään käyttäjän pääsyiedoilla

1. Voit tarkastella **Imprivatan** lukitusnäyttöä kytkemällä älylaitteen näytön päälle.
2. Napsauta **Imprivatan** lukitusnäytössä **Manuaalinen sisäänkirjautuminen** -kuvaketta , syötä **Käyttäjänimesi** ja **Salasanasi**, ja napsauta sitten **Kirjaudu sisään** -painiketta.

Kaikki aiemmat käyttäjät, jotka ovat edelleen kirjautuneena laitteeseen, kirjautuvat automaattisesti ulos, minkä jälkeen sinut kirjataan sisään.

Jos kirjautuminen onnistuu, älylaitteesi lukitus avautuu ja sinut kirjataan kaikkiin klinisiin sovelluksiisi. Jos kirjautuminen ei onnistu tai sinua pyydetään antamaan Unite Axess -palvelimen linkki, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Uloskirjautuminen

1. Napsauta **Imprivatan** lukitusnäytössä **Kirjaudu ulos** -kuvaketta .
2. Napsauta vahvistusviestissä **OK**.

3.2 iOS-laitteet: Sisään- ja uloskirjautuminen

Jos toteutuksesi sisältää muita tuettuja Ascom-sovelluksia, Unite Axess for Smart Devices tarjoaa kertakirjautumisen mihin tahansa muuhun Unite-sovellukseen, kuten Unite Collaborate.




Kun olet valinnut kelvollisen Unite Axess for Smart Devices -palvelimen ja avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun on myönnettävä seuraavat luvat, jotta voit kirjautua sisään:

- Salli ilmoitukset
- Salli kriittiset hälytykset
- Salli aikasidonnaiset ilmoitukset
- Tarkennus

Unite Axess for Smart Devices -sovellus suorittaa tarkistuksen joka kerta, kun käytät sitä, joten näiden lupien salliminen on pakollista, eikä niitä saa koskaan poistaa käytöstä käytettäessä Unite Axess for Smart Devices -sovellusta.

Kirjaudu sisään

1. Napsauta laitteessa **Unite Axess** -sovelluskuvaketta . Kirjautumisikkuna avautuu.
2. Syötä **Username** (käyttäjänimesi) ja **Password** (salasanasi).

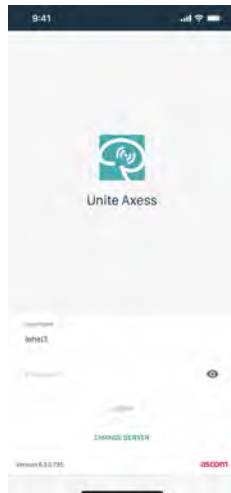

3. Napsauta **Log in** (Kirjaudu sisään) -painiketta.

Kirjaudu sisään muilla todennuspalveluilla

Kun kirjaudut sisään OpenID Connect -todennuksella, näyttöön tulee lupaa koskeva ponnahdusikkuna, jossa varoitetaan, että olet avaamassa verkkosivustoa, joka jakaa tietoja sinusta. Sinun on valittava **Jatka**, jotta voit jatkaa sisäänkirjautumista.

Kirjaudu ulos

1. Napsauta **Valikko**-kuvaketta .
2. Napsauta **Kirjaudu ulos**-painiketta.

Kun kirjaudut ulos OpenID Connect -todennuksella, näyttöön tulee lupaa koskeva ponnahdusikkuna, jossa varoitetaan, että olet avaamassa verkkosivustoa, joka jakaa tietoja sinusta. Sinun on valittava **Jatka**, jotta voit jatkaa uloskirjautumista.


Uloskirjautumisen jälkeen kaikki hälytykset ja viestit poistetaan automaattisesti älylaitteesta turvallisuussyistä.

4 Hälytysten käsittely

Tässä osassa kuvataan, miten hälytyksiä käsitellään Unite Axess for Smart Devices:ssa.

Hälytysten yhteenveto

Hälytyksillä voi olla eri prioriteetteja, luokkia ja tyyppejä. Väripalkki ilmaisee hälytyksen prioriteetin tai luokan, ja hälytyskuvake ilmaisee hälytyksen tyypin.

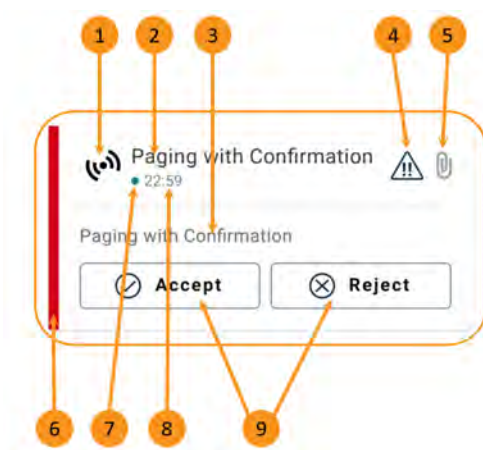

1. Hälytyskuvake
2. Aihe, esimerkiksi sijainti
3. Tapahtuman tiedot
4. Prioriteettikuvake
5. Liitekuvake (liite on linkitetty tähän hälytykseen)
6. Luokan/prioriteetin väri
7. Käsittelemätön hälytys
8. Aikaleima
9. Vastausvaihtoehdot (kuvakkeet Hyväksy ☑ / Hylkää ☒ voivat olla valinnaisia)

Hälytysten värit

Värejä voidaan käyttää ilmaisemaan hälytysten luokkia tai prioriteetteja. Hälytyksen värin ilmaisee kunkin hälytyksen vasemmalla puolella näkyvä väripalkki.



Värien käyttö riippuu määrytyksistä, ja se voi olla erilaista eri järjestelmäasetuksissa.


Luokan/prioriteetin väri: Punainen

Prioriteetti: Korkea



Luokan/prioriteetin väri: Keltainen

Prioriteetti: Keskitaso

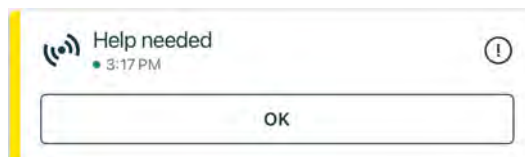

Luokan/prioriteetin väri: Syaani

Prioriteetti: Alhainen



4.1 Hälytyskuvakkeet

Hälytysten kuvakkeet ilmaisevat hälytysluokan, esimerkiksi hoitajakutsu tai laboratoriotulos.

Ascom Mycossa ovat käytettävissä seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Yleinen hälytys
	Sänkyvaroitus
	Mittakaava
	Volumetrinen pumppu
	Enteraalipumppu
	Pallopumppu
	Lämmönsäätely-yksikkö
	Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä (CDSS)
	Infuusiopumppu
	Veren suodatus Dialyysi
	Potilasvalvonta
	Hengityslaite
	Verikaasuanalyyysilaite
	Sydän-keuhkokone
	Lämpökaappi

	Anestesiajärjestelmäyksikkö
	Laboratoriotulokset
	WC-kutsu
	Apukutsu Henkilöstön jäsen tarvitsee toisen henkilöstön jäsenen apua
CODE A	Koodi A
CODE B	Koodi B
	Lääkintälaittekutsu
	Hoitajakutsu Potilas tarvitsee henkilöstön jäsenen apua
	Huoltokutsu
	Tehtävä
	Tekninen hälytys
	Virhe
	Henkilökohtainen hälytys
	Tulipalo
	Röntgen
	Luokka A
	Luokka B

	Luokka C
	Luokka D
	Luokka E
	Kiireellisyys
	Puhelun asetukset
	Painike 1
	Painike 2
	Reaaliaikainen paikannusjärjestelmä
	Alue
	Lämpötila
	Työnkulku
	Työnkulku 1
	Työnkulku 2
	Työnkulku 3
	Työnkulku 4
	Työnkulku 5

	Suojaus
	Läsnäolo

4.2 Hälytysten vastaanottaminen

Saat ilmoituksen tulevasta hälytyksestä ennalta määritellyllä hälytysäänellä. Älylaite näyttää hälytyksen **Hälytykset**-sivulla.



Järjestelmän kokoonpanosta riippuen et välttämättä saa hälytyksiä, jos tavoitettavuutesi tilaksi on määritetty **Varattu** tai **Älä häiritse**.

Jos saat hälytyksen, jossa on vastausvaihtoehdot, napsauta vastausvaihtoehtoa (esimerkiksi **Hyväksy** tai **Hylkää**). Kun olet vastannut, hälytys päivitetään vastausviestin kanssa. Hälytysluettelo lajitellaan oletusarvoisesti aikajärjestyksessä, ja uusimmat hälytykset näkyvät ylimpänä. Kaikki vastaanotetut ja poistamattomat hälytykset näkyvät hälytysluettelossa. Jos vastautasi hälytykseen ei lähetetä takaisin palvelimelle viestintä- tai järjestelmävirheen vuoksi, sinulle ilmoitetaan siitä.

Lukitsemattomassa laitteessa hälytysilmoitukset näkyvät näytön yläosassa. Jos lyhyen ajan kuluessa tulee useita hälytyksiä, viimeisin hälytys näkyy muiden yläpuolella.

Lukitussa Android-laitteessa hälytys ilmaistaan äänellä ja värinäällä sekä näytössä näkyvällä ilmoituksella.

Lukitussa iOS-laitteessa uusi hälytys näytetään mutta ilman luokan/prioriteetin väriä.


Kun saat hälytysilmoituksen, pyyhkäise ylös tai ilmoituksen jommallekummallekin puolelle, tai piilota ilmoitus napsauttamalla kuvaketta.

Avaa hälytys napsauttamalla ilmoitusta. Toteutuksesta ja saamasi hälytyksen asetuksista riippuen voit suorittaa hälytysilmoituksesta myös useita muita toimintoja, kuten selaimen käynnistämisen, puhelun aloittamisen tai kolmannen osapuolen sovellusten käynnistämisen.

4.2.1 Potilastiedot Alertsissa


Saamiisi ilmoituksiin voi sisältyä potilastietoja, kuten nimi tai ikä. Näitä tietoja ei näytetä hälytysilmoituksessa. Ne näkyvät vain, kun avaat hälytyksen.

Järjestelmän kokoonpanosta riippuen potilastiedot voidaan näyttää myös hälytysluettelossa.

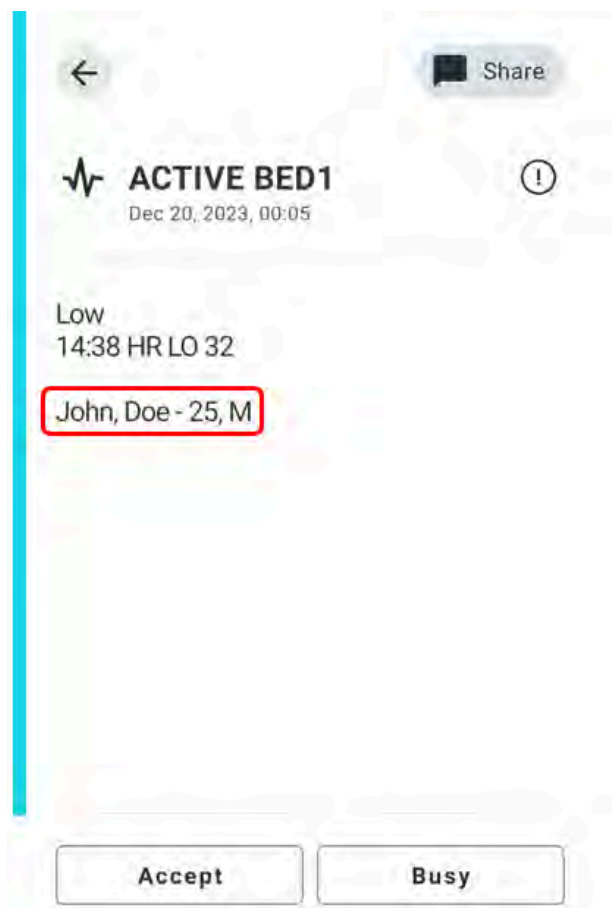

4.2.2 Hälytysten käsittely Android-laitteissa

Hyrräkuvake ilmaisee, että hälytyksiä päivitetään. Päivitys DECT-kanavan kautta (vain Ascom Myco 3 -laitteet) voi kestää useita sekunteja.

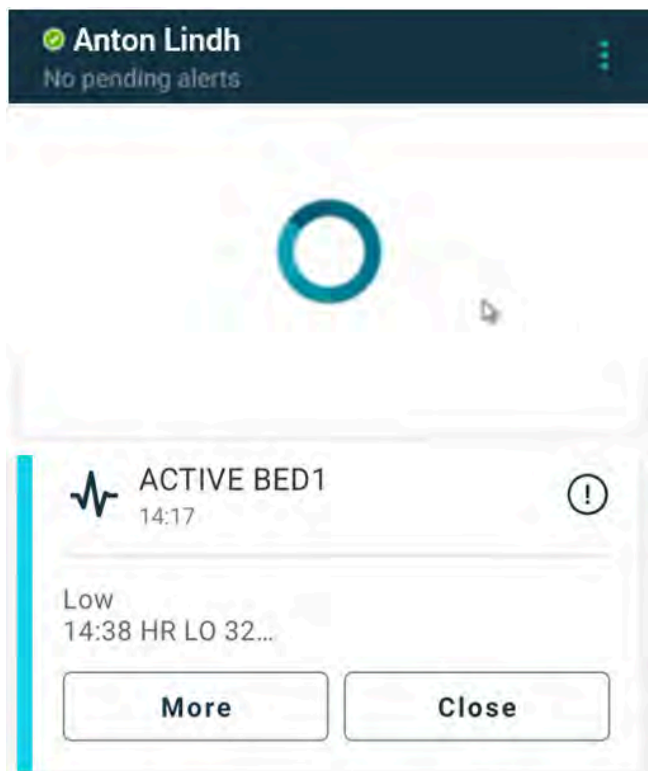

Käsitlemättömien hälytysten määrä näkyy sekä alanavigointipalkissa että yläpalkissa.

Jos haluat lukea hälytyksen koko näytössä, napsauta viestin tekstiä.

4.2.2.1 Puhelun asetukset -hälytykset (vain Ascom Myco)

Puhelun asetukset -hälytys aloittaa puhelun joko automaattisesti tai napsauttaessasi hälytyksessä olevaa vaihtoehtoa. Tämä voi olla joko tavallinen puhelu tai pikapuhelu (PTT).

Kun puhelu on katkaistu, voit muodostaa yhteyden puheluun uudelleen hälytyksestä.

PTT-puhelu on ryhmäpuhelu, joka edellyttää, että napsautat ja pidät painettuna painiketta näytössä tai painat konfiguroitua monitoimipainiketta puhuessasi. Kun yksi käyttäjä puhuu, muut kuuntelevat.

Jos olet jo puhelussa ja saat Puhelun asetukset -hälytyksen, kyseinen puhelu katkaistaan ja vastaanotettu puhelu yhdistetään automaattisesti hetken kuluttua (välittömästi prioriteetin 1 hälytyksille), jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Hälytys on määritetty hyväksyttäväksi automaattisesti.
- Hälytyksen prioriteetti on korkeampi kuin meneillään olevan puhelun prioriteetti.

Jos Puhelun asetukset -hälytyksen prioriteetti on matalampi kuin meneillään olevan puhelun prioriteetti tai jos hälytystä ei ole määritetty hyväksyttäväksi automaattisesti, puhelu on aloitettava manuaalisesti. Puhelun aloittaminen Puhelun asetukset -hälytyksestä katkaisee meneillään olevan puhelun.

4.2.3 Hälytysten käsittely iOS-laitteissa

Käsitlemättömien hälytysten määrä näkyy yläpalkissa.

Jos haluat lukea hälytyksen koko näytössä, napsauta viestin tekstiä.

4.3 Hälytysten lajitteleminen

Hälytysluettelo lajitellaan oletusarvoisesti aikajärjestyksessä, ja uusimmat hälytykset näkyvät ylimpänä. Pieni kuvake **Lajittele**-tekstin yläpuolella **Hälytykset**-sivun lopussa ilmaisee, miten hälytykset tällä hetkellä lajitellaan.

1. Napsauta **Hälytykset**-sivulla **Lajittele**-kuvaketta .
2. Valitse miten haluat lajitella hälytykset. Hälytykset näytetään sen mukaisesti.



Hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.



Hälytykset lajitellaan prioriteetin mukaan tärkein hälytys ylimpänä. Saman prioriteetin hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.



Hälytykset ryhmitellään luokittain.

4.4 Hälytysten suodattaminen

1. Napsauta **Suodata**-kuvaketta  **Hälytykset**-sivulla.
2. Valitse miten haluat suodattaa hälytykset valitsemalla vaihtoehto jostakin luettelosta.



Prioriteetti-luettelossa on suodatusvaihtoehdot **Hälytys**, **Korkea**, **Normaali** ja **Matala**.



Vastauksen tila -luettelossa on suodatusvaihtoehdot **Odottaa vastausta** ja **Vastattu**.



Luokka-luettelossa voit suodattaa kaikki hälytysluettelossa olevat luokat, kuten **Koodikutsu**, **Laboratorio** ja **Valvonta**.


Kun olet valinnut vaihtoehdon, **Hälytykset**-sivun tausta himmenee ja vain suodatetut hälytykset tulevat näkyviin.

3. Poista suodatin napsauttamalla **Peruuta**-kuvaketta .

4.5 Hälytysten välittäminen eteenpäin

Jotta voit lähettää hälytyksen eteenpäin, sinun on asennettava laitteellesi Unite Collaborate -sovellus.

1. Avaa hälytyksen tietosivu napauttamalla hälytystä.
2. Napsauta **Jaa**-painiketta. Ilmoituksen tietosivusta luodaan näyttökuva. Voit lähettää kuvan liitteenä -sovelluksen kautta.

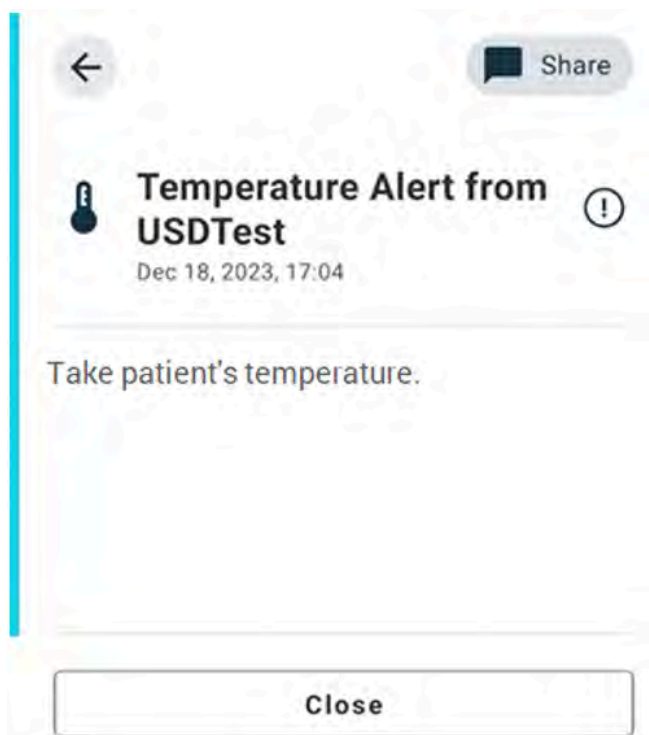

4.6 Hälytysten poistaminen

1. Napsauta ja pidä painettuna hälytystä, jonka haluat poistaa. Näkyviin tulee valikko.
2. Poista vastaava hälytys napsauttamalla **Poista valittu hälytys**, tai poista kaikki hälytykset napsauttamalla **Poista kaikki hälytykset**.
3. Vahvasta napsauttamalla varoitusviestissä **Poista**.

5 Tavoitettavuuden tila

Jos se on konfiguroitu järjestelmään, käyttäjät voivat valita tavoitettavuuden tilansa laitteesta. Järjestelmä voi käyttää tätä tavoitettavuuden tilaa esimerkiksi kun päätetään, mille laitteille hälytys lähetetään.

5.1 Varallaolotila Android-laitteissa

Tavoitettavuutesi tila näkyy sovelluksen yläpalkissa. Voit muuttaa tavoitettavuuden tilaksi **Omassa profiilissa** manuaalisesti **Varattu**, **Älä häiritse** tai **Käytettävissä**. Pääset **Omaan profiiliin** joko alanavigointipalkista tai Ascom Login -sovelluksesta.

Tavoitettavuuden tilan ilmaisu

Tavoitettavuuden tilan ilmaisemiseen käytetään seuraavia kuvakkeita:



Käytettävissä




Varattu



Älä häiritse

Tilan muuttaminen

Napsauta **Omassa profiilissa**  kuvaketta ja valitse **Käytettävissä**, **Varattu** tai **Älä häiritse**.

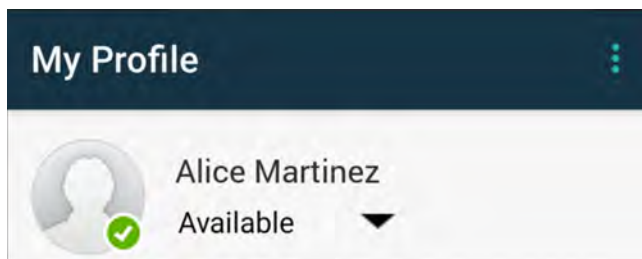

Järjestelmän kokoonpanosta riippuen et välttämättä saa hälytyksiä, jos tavoitettavuutesi tilaksi on määritetty **Varattu** tai **Älä häiritse**.

5.2 Varallaolotila iOS-laitteissa

Tavoitettavuutesi tila näkyy sovelluksen yläpalkissa.

Tavoitettavuuden tilan ilmaisu



Käytettävissä



Varattu



Älä häiritse




Kirjautunut ulos tai ei yhteydessä

Tilan muuttaminen

Voit muuttaa tavoitettavuutesi tilaa vain, jos Unite Collaborate -sovellus on asennettu samaan laitteeseen. Muuten tämä toimenpide ei ole käytettävissäsi.

1. Napsauta yläpalkissa joko nimeäsi tai profiilikuvaasi.

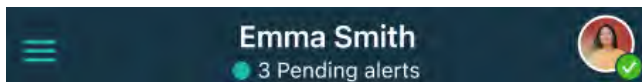

Näet nyt tavoitettavuusvaihtoehdot.

2. Tavoitettavuustilan muuttaminen:
 - Valitse joko **Tavoitettavissa** , **Varattu** tai **Älä häiritse** .
 - Asetuksistasi riippuen sinut voidaan ohjata Unite Collaborate -sovellukseen, jossa voit lisätä lisätietoja edistyneisiin tavoitettavuusprofileihin (jos esimerkiksi valitset **Älä häiritse** , voit myös valita ajan, jolloin olet taas **Tavoitettavissa**). **Tallenna** asetukset.
 - Kun olet valmis, sinut ohjataan takaisin Unite Axess for Smart Devices -sovellukseen.

Kirjaudu ulos napsauttamalla **Kirjaudu ulos** .




Järjestelmän kokoonpanosta riippuen et välttämättä saa hälytyksiä, jos tavoitettavuutesi tilaksi on määritetty **Varattu** tai **Älä häiritse**.

6 Varoitusviestit

Tässä on esimerkkejä varoitusviesteistä, joita laitteessa voi esiintyä. Napsauta varoitusilmoitusta nähdäksesi koko varoitusviestin laitteessa, jonka lukitus on avattu. Verkkoyhteyden katoamista lukuun ottamatta kaikkien varoitusten selvittäminen vaatii yleensä ylläpitäjän apua.


Viestijärjestelmän varoitus ilmaisee, että yhteys viestijärjestelmään on rajoitettu ja pääsy uusiin hälytyksiin/viesteihin on rajoitettu.

Kuva 6. Viestijärjestelmän varoitus iOS-laitteissa

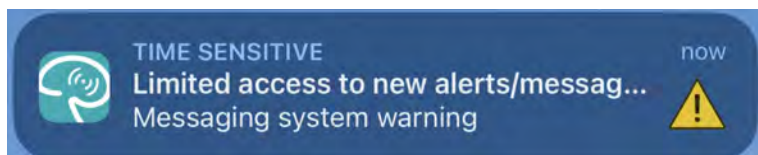

Viestijärjestelmän toimintahäiriövaroitus tarkoittaa, että yhteys viestijärjestelmään ei ole käytettävissä eikä hälytyksiin/viesteihin ole pääsyä.


Kuva 7. Viestijärjestelmän toimintahäiriövaroitus iOS-laitteissa

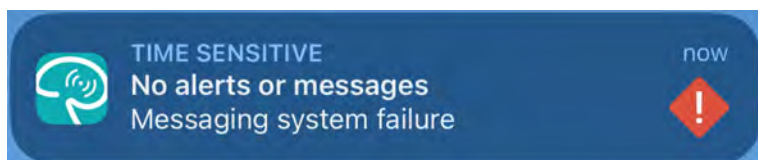

Liitetystä lähdelaitteesta riippuen, erityisesti CDAS/DAS-järjestelmässä, laitteellasi saattaa näkyä ilmoitus, joka kertoo, että yhteys yhteen tai useampaan hälytyslähteeseen on katkennut.


Voit lukea lisää varoituksesta napsauttamalla **Lisätietoja**.

Kuva 8. Yhteys hälytyslähteeseen katkesi Android-laitteissa

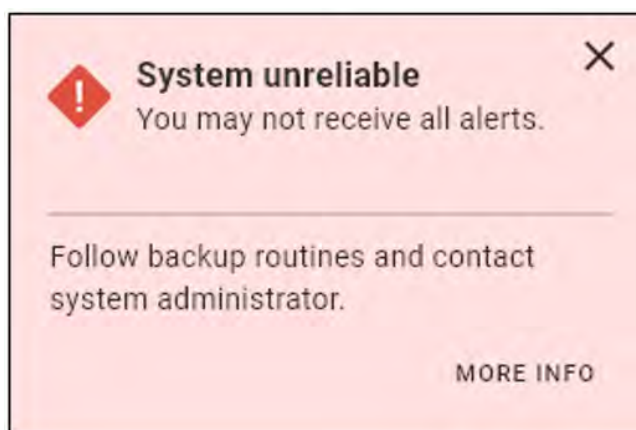




Kuva 9. Yhteys hälytyslähteeseen katkesi iOS-laitteissa

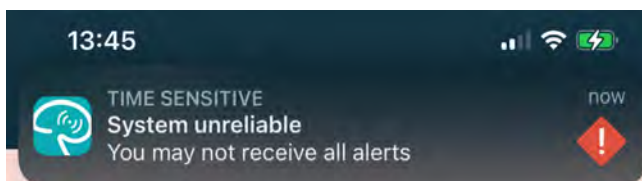


Kuva 10. Viestinvälityksen virheilmoitus Android-laitteissa

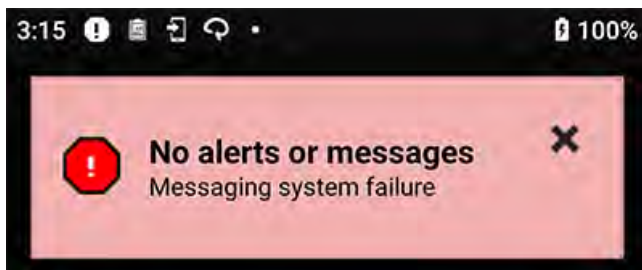


Tämä varoitus tarkoittaa, että et voi käyttää sovellusta hälytysten ensisijaiseen ilmoitukseen.

Kuva 11. DIS/DAS-varoitus

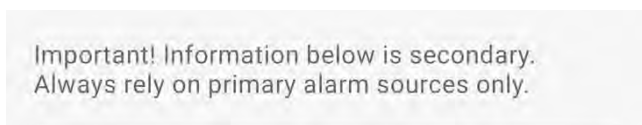

Jos Unite Axess for Smart Devices -sovellus otetaan käyttöön testiympäristössä, laitteellasi näkyy varoitus.

Kuva 12. Testiympäristön banneri

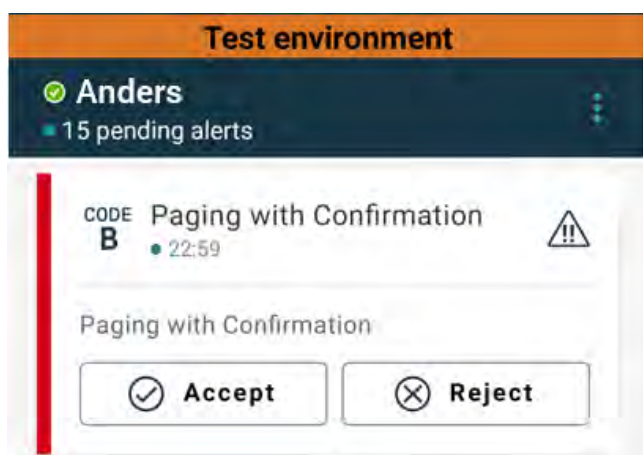

6.1 Varoitusviestien käsittely

Seuraavassa taulukossa kuvataan toiminnot, jotka ovat käytettävissä laitteessa näkyvien varoitusviestien käsittelyyn.

Varoitusviestit	Kuvaus	Toimenpide
Järjestelmä epäluotettava Et ehkä saa kaikkia hälytyksiä	Yhteys lääkinällisiin laitteisiin ei ole täysin toimiva. Juurisyystä riippuen jotkin hälytykset voidaan silti jakaa odotetulla tavalla.	Noudata varmuuskopiointirutiineja ja ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Hälytyksiä ei voitu toimittaa Ei vastuutettuja	Vastuutuksia ei ole määritetty.	Vastuuta henkilöstö kaikkiin rooleihin Unite Assignissa. Jos ongelma jatkuu, noudata varmuuskopiointirutiineja ja ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Järjestelmän tilan ilmaisimet puuttuvat Yksi tai useampi laite ei ole tavoitettavissa	Yhden vian turvallisuutta järjestelmän tilan ilmaisulle ei voida saavuttaa.	- Tarkista, että Digistat Smart Central toimii erillisillä työasemilla - Tarkista, että valotorni on yhdistetty - Tarkista, että Unite Assignissa määritetyt tila vastaanottajat ovat edelleen kirjautuneena laitteilleen.

Käsitlemätön hälytys Ei voitu toimittaa vastuutetulle henkilöstölle	Hälytystä ei jaettu kenellekään.	• Vastuuta henkilöstö kaikkiin rooleihin Unite Assignissa. • Tarkista, että kaikki vastuutetut ovat edelleen kirjautuneina laitteilleen. Jos ongelma jatkuu, noudata varmuuskopiointirutiineja ja ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Käsitlemätön hälytys Kaikki vastuutetut hylkäsivät	Hälytys jaettiin vähintään yhdelle vastuutetulle, mutta kukaan ei hyväksynyt hälytystä.	• Vastuuta henkilöstö kaikkiin rooleihin Unite Assignissa. • Tarkista, että kaikki vastuutetut ovat edelleen kirjautuneina laitteilleen.
Järjestelmä epäluotettava Järjestelmä ei ehkä toimi odotetulla tavalla	Järjestelmän määrittämisvirhe estää liitettyjen lääkinnällisten laitteiden hälytysten jakamisen odotetulla tavalla. Hälytyksiä muista järjestelmistä, esimerkiksi hoitajakutsu, voidaan edelleen jakaa.	Noudata varmuuskopiointirutiineja ja ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.


7 Asetukset

7.1 Asetukset Android-laitteissa

Jotkin asetukset määritetään Unite Axess for Smart Devices -sovelluksessa ja toiset asetukset Ascom Login -sovelluksessa.

Asetukset Unite Axess for Smart Devices:ssa


1. Napsauta Unite Axess for Smart Devices -sovelluksessa **Valikko**-kuvaketta  ja napsauta sitten **Asetukset**.

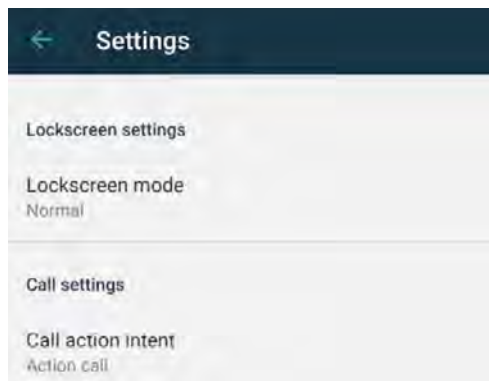

2. Määritä asetukset.
 - **Lukitusnäytön tila** -asetus määrittää, miten Unite Axess for Smart Devices -sovellus käyttäytyy, kun näyttö lukitaan. **Normaali**-tilassa Unite Axess for Smart Devices -sovellus käyttäytyy kuten muutkin sovellukset. **Sovellus**-tilassa Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen sallitaan toimia lukitusnäytön päällä.
Jos haluat muuttaa lukitusnäytön toimintaa, napsauta **Lukitusnäytön tila** ja valitse **Normaali** tai **Sovellus**.
 Kun käytät Imprivata Mobile Device Accessia (MDA) todennukseen, **Lukitusnäytön tilaksi** on asetettava **Normaali**. Vain yksi sovellus voidaan suorittaa lukitusnäytössä, ja tässä tapauksessa sen on oltava Imprivata MDA -sovellus.
 - **Kutsutoiminnon tarkoitus** -asetus määrittää, miten laite yhdistää kutsun sen jälkeen, kun olet valinnut tämällytyypisen vastauksen tulevassa hälytyksessä. Laite voi joko kutsua välittömästi, kun vaihtoehto valitaan, tai näyttää numeron, minkä jälkeen sinun on käynnistettävä kutsu manuaalisesti. **Toimintokutsu**-vaihtoehto on suositeltavampi, mutta vaihda **Toiminnon valintaan**, jos sovelluksesi versio ei tue välittömiä kutsuja.
Muuta kutsun toimintaa napsauttamalla **Kutsutoiminnon tarkoitus** ja valitsemalla **Toimintokutsu** tai **Toiminnon valinta**.

Ascom Login -sovelluksen asetukset


1. Napsauta laitteen **Ascom Login** -kuvaketta .
2. Napsauta **Valikko**-kuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa ja sitten **Asetukset**. palvelimen konfiguroinnista riippuen seuraavat asetukset ovat joko konfiguroitavissa laitteella tai lukittu:

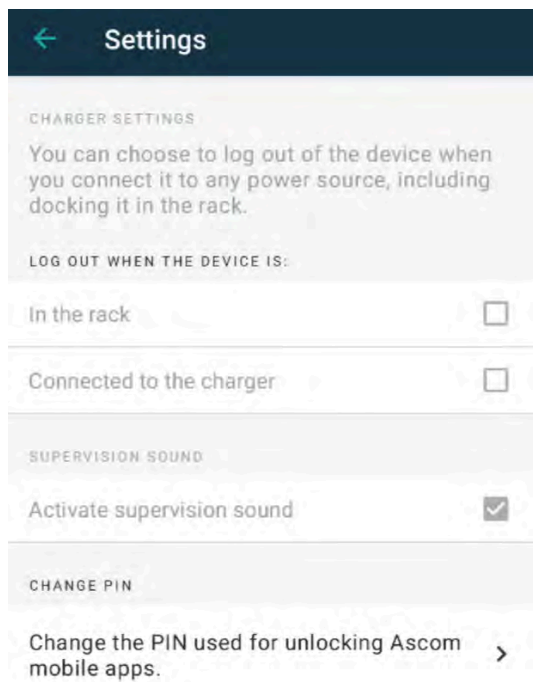

- Napsauta **Laturin asetukset** -kohdassa **Telineessä-** tai **Yhdistetty laturiin** -valintaruutua, jos haluat aktivoida sen, että laite kirjautuu automaattisesti ulos latauksen aikana.
- Jos **Valvontäääni** on aktivoitu, laitteesta kuuluu äänimerkki kerran minuutissa, jos yhteys järjestelmään katkeaa.
- Kohdassa **Muuta PIN** voit muuttaa PIN-koodia, joka tarvitaan Ascom-mobiilisovellusten lukituksen avaamiseen.

7.2 Asetukset iOS-laitteissa

Napsauta Unite Axess for Smart Devices -sovelluksessa **Valikko**-kuvaketta , ja valitse **Asetukset**.
Palvelimen konfiguroinnista riippuen **Aktivoi valvontäääni** -asetus voi olla konfiguroitavissa tai lukittu laitteessa.

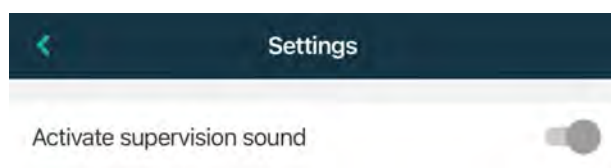

Jos valvottu laite menettää yhteyden järjestelmään, saat siitä ilmoituksen viestillä ja äänimerkillä.

Kytke valvontäääni päälle ja pois päältä **Aktivoi valvontäääni** -kytkimellä.

8 Tietoja sovelluksista

Tietoja asennetuista sovelluksista on kunkin sovelluksen **Tietoja**-näkyssä.

8.1 Unite Axess for Smart Devices

Tietoja-näkyssä näet Unite Axess for Smart Devices-sovelluksen version, palvelimen nimen ja version, ohjelmistoversion ja älylaitteesi mallin, käyttäjänimesi ja viestinumerosi, tiedot valmistajasta sekä vastuuvapauslausekkeen.

(Vain Android) Kun napsautat **Privacy Policy** (Yksityisyyden suojaa koskeva politiikka) -linkkiä, avautuu Ascom Unite -tuotteita koskevien tietosuojaperiaatteiden lisäys. Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa lisäyksessä käsitellään Ascomin Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen käyttöönottoa ja käyttöä yrityksesi mobiililaitteissa.

Löydät myös linkin lisäasiakirjoihin Unite Axess for Smart Devices -sovelluksesta.

Ohjelmiston Tietoja- tiedostossa	Symbolin nimi	Kuvaus
	CE-merkintä	Osoittaa, että laite on yhteensopiva Euroopan neuvoston 14. kesäkuuta 1993 antaman lääkinällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY säännösten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/745 kanssa, jolloin laitetta voidaan siirrellä vapaasti Euroopan yhteisön alueella ja se voidaan ottaa käyttöön käyttötarkoituksensa mukaisesti.
	Valmistaja	Ilmaisee lääkinällisen laitteen valmistajan sekä tämän osoitteen ja puhelinnumeron.
	Valmistuspäivämäärä	Ilmaisee lääkinällisen laitteen valmistuspäivämäärän.
	Katso käyttöohjeita	Ilmaisee, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita.
	Luettelonumero	Ilmaisee valmistajan luettelonumeron lääkinällisen laitteen tunnistamiseksi.
	Huomio	Ilmaisee, että käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeissa oleviin tärkeisiin varoittaviin tietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimiin, joita ei eri syistä voida esittää itse lääkinällisessä laitteessa.
	Lääkinällinen laite	Ilmaisee, että tuote on lääkinällinen laite.
	Laitteen yksilöllinen tunnistus (Unique Device Identifier)	Ilmaisee laitteen yksilöllisen tunnisteen, josta laite voidaan asianmukaisesti tunnistaa sen jakelun ja käytön kautta.

1. Napsauta **Valikko**-kuvaketta.
2. Napsauta **Tietoja**-painiketta.

8.2 Ascom Login (vain Android)

Saat lisätietoja Ascom Login -sovelluksesta napsauttamalla laitteesi Ascom Login -kuvaketta . Napsauta **Valikko**-kuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa ja sitten **Tietoja**.

Tietoja-näköymästä löydät sovellusversion, ohjelmistotunnisteen ja tietoja valmistajasta.

Kun napsautat **License** (Lisenssi) -linkkiä, avautuu lisenssitietoja sisältävä näköymä.

Palaa aloitussivulle napsauttamalla **Takaisin**-painiketta.

Liite A

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Online-ohje Unite Axess for Smart Devices-sovelluksessa

Liite B Asiakirjahistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
L	6. syyskuuta 2024	Lisätty varoitukset, jotka liittyvät Face ID -suojauksen ja Eye Tracking -ominaisuuksien käyttöön iOS-laitteissa, kohtaan 1.1 Huomio ja huomautukset, sivulla 1. Lisätty huomautus Axess for Smart Devices -pienoisohjelmasta kohtaan 2.2 Asettelu iOS-laitteissa, sivulla 6. Päivitetty veren suodatuksen ja hoitaja/apukutsun selitys kohdassa 4.1 Hälytyskuvakkeet, sivulla 13. Lisätty tietoja iOS-viestijärjestelmän varoituksista kohtaan 6 Varoitusviestit, sivulla 23. Vähäisiä muokkauksia.
K	28. helmikuuta 2024	Päivitetty kohta Huomio ja huomautukset – päivitetty DIS-laitteita koskeva varoitus. Käyttötarkoitus/tarkoitus – Malesia lisätty erityiseen käyttötarkoitukselausuntoon Päivitetty kuvakeluettelo kohdassa Kuvakkeet. Päivitetty sovellusnäytöt vastaamaan uusinta ohjelmistoa.
J	21. syyskuuta 2023	Päivitetty 1.2.1 Odotettavissa olevat kliiniset hyödyt, sivu 4 lisävaatimuksilla. Lisätty 4.2.1 Potilastiedot Alertsissa, sivu 15. Lisätty 4.2.2.1 Puhelun asetukset -hälytykset (vain Ascom Myco), sivu 16. Päivitetty UI-kuvat vastaamaan uusimpia päivityksiä, mukaan lukien Apps-ominaisuuden siirtäminen Ascom Login -sovellukseen.
I2	24. maaliskuuta 2023	Lisätty Australia kohtaan 1.3 Käyttötarkoitus/tarkoitus, sivu 3.
I	19. syyskuuta 2022	Lisätty tietoja prioriteettikuvakkeista ja yksityiskohtaisista varoitusviesteistä. Lisätty 4.5 Hälytysten välittäminen, sivu 17, 1.3.1 Odotettavissa olevat kliiniset hyödyt, sivu 4 ja 6.1 Varoitusviestien käsittely, sivu 21.
H2	23. maaliskuuta 2022	Lisätty tiedot siitä, miten kirjautuminen Unite Axess for Smart Devices iOS:ään voi kirjata sinut sisään myös muihin tuettuihin Unite iOS -sovelluksiin (4.2 iOS-laitteet: Sisään- ja uloskirjautuminen, sivu 10).
H	28. helmikuuta 2022	Dokumentoitu Androidissa vaadittavat federoidut kirjautumistiedot ja luvat. Lisätty Hyväksy / Hylkää hälytys -kuvakkeet. Lisätty Älä häiritse -läsnäolotoiminto tavoitettavuuden tilaan Androidissa ja iOS:ssä. Lisätty muita varoituksia ja tietoja testiympäristön bannerista.

G	24. syyskuuta 2021	Lisätty tietoja Vigilancesta ja tapahtumien raportoinnista. Poistettu luvut Hälytyksen välittäminen ja Viestien käsittely (vain iOS), koska chat-toimintoa tuetaan vain Unite Collaborate -sovelluksessa. Päivitetty käyttötarkoitus. Lisätty tietoja luvista. Lisätty tietoja hälytysten käsittelystä. Lisätty uusi Lääkinnällinen laite -kuvake ja -kuvaus.
F2	16. marraskuuta 2021	Lisätty uusia varoituksia ilmoitusmahdollisuuksista iOS 15:ssä. Lisätty tietoja Vigilancesta ja tapahtumien raportoinnista. Lisätty tietoja Androidin luvista. Lisätty lisätietoja hälytysten käsittelystä.
F	17. joulukuuta 2020	Imprivata-integrointi dokumentoitu.
E	7. lokakuuta 2020	3.1 Asettelu Android-laitteissa, sivu 3: Uusi. 3.2 Asettelu iOS-laitteissa, sivu 4: Uusi. 3.3 Kuvakkeet, sivu 4: Lisätty kuvakkeita. 4.1 Sisään- ja uloskirjautuminen Android-laitteissa, sivu 6: Uusi. 4.2 Sisään- ja uloskirjautuminen iOS-laitteissa, sivu 7: Uusi. 5.1.1 Hälytysten käsittely Android-laitteissa, sivu 8: Uusi. 5.1.2 Hälytysten käsittely iOS-laitteissa, sivu 8: Uusi. 5.4 Hälytysten välittäminen (vain iOS), sivu 11: Lisätty vain iOS. 6 Viestien käsittely (vain iOS), sivu 12: Lisätty huomautus ”koskee vain iOS-laitteita”. 7 Tavoitettavuuden tila Android-laitteissa, sivu 13: Uusi. 8 Tavoitettavuuden tila iOS-laitteissa, sivu 14: Uusi. 9 Varoitusviestit, sivu 15: Vaihdettu kuvat.
D	10. kesäkuuta 2019	Lisätty ”Käyttötarkoitus Connect for Clinical System -järjestelmän luokan IIb kanssa EU/EFTA:ssa” lukuun 2 Käyttötarkoitus, sivu 2 ja luku 9.1 Sisään- ja uloskirjautuminen Ascom Loginin kautta, sivu 15.
C	1. marraskuuta 2018	Lisätty CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
B	21. syyskuuta 2018	Lisätty 3.1.1 Kuvakkeet, sivu 6
A	23. maaliskuuta 2018	Ensimmäinen julkaistu versio

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Puhelin +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom