

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Ascom Unite Axess for Smart Devices

**ascom**

### Informacje o tym dokumencie

W tym dokumencie opisano aplikację Ascom Unite Axess for Smart Devices. Dokument jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Unite Axess for Smart Devices.



### Producent

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 94 00

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

## Spis treści

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Wprowadzenie</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1.1 Uwagi i komentarze                                    | 1         |
| 1.2 Wykrywanie i zgłaszanie incydentów                    | 3         |
| 1.3 Zamierzone zastosowanie/przeznaczenie                 | 3         |
| 1.3.1 Oczekiwane korzyści kliniczne                       | 4         |
| <b>2 Unite Axxess for Smart Devices – Układ graficzny</b> | <b>6</b>  |
| 2.1 Układ graficzny w urządzeniach Android                | 6         |
| 2.2 Układ graficzny na urządzeniach iOS                   | 7         |
| 2.3 Ikony                                                 | 7         |
| 2.4 Pomoc Unite Axxess                                    | 8         |
| <b>3 Łączenie z systemem Unite</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1 Logowanie / Wylogowanie przez Ascom Login             | 9         |
| 3.1.1 Uwierzytelnianie przez Impriva Mobile Device Access | 10        |
| 3.2 Urządzenia iOS: Logowanie/wylogowanie                 | 11        |
| <b>4 Obsługa alertów</b>                                  | <b>13</b> |
| 4.1 Ikony alertów                                         | 14        |
| 4.2 Odbieranie alertów                                    | 17        |
| 4.2.1 Informacje o pacjencie w alertach                   | 17        |
| 4.2.2 Obsługa alertów na urządzeniach Android             | 18        |
| 4.2.3 Obsługa alertów na urządzeniach iOS                 | 19        |
| 4.3 Sortowanie alertów                                    | 20        |
| 4.4 Filtrowanie alertów                                   | 20        |
| 4.5 Przekazywanie alertów                                 | 20        |
| 4.6 Usuwanie alertów                                      | 21        |
| <b>5 Stan dostępności</b>                                 | <b>22</b> |
| 5.1 Stan dostępności na urządzeniach Android              | 22        |
| 5.2 Stan dostępności na urządzeniach iOS                  | 22        |
| <b>6 Komunikaty ostrzegawcze</b>                          | <b>24</b> |
| 6.1 Obsługa komunikatów ostrzegawczych                    | 26        |
| <b>7 Ustawienia</b>                                       | <b>28</b> |
| 7.1 Ustawienia w urządzeniach Android                     | 28        |
| 7.2 Ustawienia w urządzeniach iOS                         | 29        |
| <b>8 Informacje o aplikacjach</b>                         | <b>30</b> |
| 8.1 Unite Axxess for Smart Devices                        | 30        |
| 8.2 Ascom Login (tylko Android)                           | 31        |
| <b>Dodatek A Powiązane dokumenty</b>                      | <b>32</b> |
| <b>Dodatek B Historia dokumentu</b>                       | <b>33</b> |

## 1 Wprowadzenie

Aplikacja Unite Axxess for Smart Devices wyświetla użytkownikom alerty na urządzeniach mobilnych. Aplikacja umożliwia pełną integrację z systemem Unite, dzięki czemu personel medyczny może w dowolnym czasie i miejscu niezawodnie otrzymywać interaktywne komunikaty o zdarzeniach dotyczących pacjentów.



Ilustracje pochodzą z urządzenia z angielskim interfejsem użytkownika, dlatego język może różnić się od tego, co widzisz na ekranie.

### 1.1 Uwagi i komentarze

Prosimy zapoznać się i stosować do wszelkich ostrzeżeń zawartych w niniejszym podręczniku.

**OSTRZEŻENIE** dotyczy kwestii, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wystąpienie niebezpiecznej sytuacji, w wyniku której dojść może do urazu lub zagrożenia zdrowia osób, zniszczenia mienia lub środowiska naturalnego.

**UWAGA** oznacza, że użytkownik powinien dołożyć szczególnej staranności, żeby bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać dane urządzenie.

**KOMENTARZ** oznacza, że dostępne są dodatkowe informacje ogólne.



#### Ostrzeżenie

W zależności od charakterystyki podłączonych urządzeń medycznych, produkt może być używany do podstawowego (DAS/CDAS) lub dodatkowego (DIS) powiadamiania o alarmach. Gdy obecne jest co najmniej jedno urządzenie DIS, użytkownicy zobaczą ostrzeżenie, że niektóre podłączone urządzenia nie obsługują podstawowego powiadamiania o alarmach.




#### Ostrzeżenie

Powiadomienie o alercie może zostać zastąpione nowym przychodzącym powiadomieniem, jeśli w krótkim odstępie czasu nadejdzie kilka alertów. Należy upewnić się, że reakcja dotyczy zamierzonego alertu.



#### Ostrzeżenie

Alert otwarty w widoku pełnoekranowym może zostać częściowo zasłonięty alertem przychodzącym lub powtarzającym się. W obu alertach będą widoczne przyciski opcji, aby umożliwić bezpośrednią interakcję. Należy pamiętać, że przyciski są umieszczone u dołu każdego alertu.

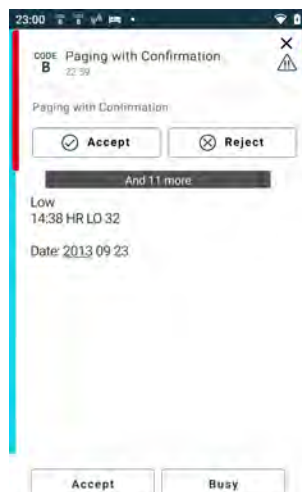

#### Ostrzeżenie

##### **Nie należy używać trybu skupienia na urządzeniach iOS**

W przypadku użycia trybu skupienia istnieje ryzyko, że powiadomienia o przychodzących alertach zostaną pominięte.



#### Ostrzeżenie

##### **Nie należy wyłączać powiadomień z Axxess for Smart Devices na urządzeniach iOS**

Nie należy wyłączać powiadomień z Axxess for Smart Devices na urządzeniach iOS. Jeśli powiadomienia z aplikacji są wyłączone, nowe powiadomienia mogą zostać pominięte.



#### Ostrzeżenie

##### **Nie używaj funkcji ochrony „Face ID” dla aplikacji Axxess for Smart Devices na urządzeniach z systemem iOS**

W przypadku stosowania ochrony Face ID istnieje ryzyko, że ważne informacje w powiadomieniach zostaną pominięte.



#### Ostrzeżenie

##### **Nie używaj Axxess for Smart Devices z funkcją śledzenia oczu na urządzeniach z systemem iOS**

Jeśli używana jest funkcja śledzenia oczu, istnieje ryzyko przypadkowego wybrania opcji w otrzymanym alertcie.



#### Uwaga

Rozpoznawanie alertów i ostrzeżeń może być utrudnione, jeśli głośność powiadomień jest niższa niż poziom hałasu otoczenia.

#### Informacje o dźwiękach alertów

Głośność dźwięku powiadomień można dostosować w ustawieniach urządzenia. Domyślne pliki dźwiękowe alertów zaprojektowano tak, aby były właściwe do celów ostrzegawczych.

## 1.2 Wykrywanie i zgłaszanie incydentów

Użytkownicy końcowi lub sprzedawcy / dystrybutorzy muszą poinformować firmę Ascom na piśmie, w ciągu pięciu (5) dni roboczych od uzyskania informacji o zdarzeniu, o wszystkich incydentach związanych z Produktami. Zgłoszenie w tym przypadku może być ustnym lub pisemnym oświadczeniem lub sugestią, że Produkt nie spełnia wymagań w odniesieniu do tożsamości, jakości, trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, skuteczności lub wydajności urządzenia.



Każdy poważny incydent, to znaczy każdy incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do śmierci pacjenta, użytkownika lub innej osoby, czasowego lub trwałego poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub poważnego zagrożenia zdrowia publicznego, który wystąpił w związku z użytkowaniem Produktu, powinien być zgłoszony producentowi pocztą elektroniczną na adres [vigilance@ascom.com](mailto:vigilance@ascom.com) oraz do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma siedzibę.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu lub zauważenia nieprawidłowego działania Produktu, które mogą przyczynić się do śmierci lub obrażeń ciała, lub wyrażenia przez klienta obawy dotyczącej bezpieczeństwa pacjentów, użytkownicy końcowi lub sprzedawcy / dystrybutorzy niezwłocznie powiadomią firmę Ascom, dokładając wszelkich starań, aby przekazać takie powiadomienie ustnie (Centrum Pomocy Technicznej Ascom) w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu uzyskania wiedzy o takim problemie z Produktem lub od otrzymania zgłoszenia. Po powiadomieniu ustnym następuje potwierdzenie pisemne (przez e-mail) w ciągu 24 godzin na adres [vigilance@ascom.com](mailto:vigilance@ascom.com).

Użytkownicy końcowi lub sprzedawcy / dystrybutorzy dostarczają wystarczających informacji, aby umożliwić firmie Ascom wypełnienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do incydentów i zdarzeń, które muszą być zgłaszane i rejestrowane zgodnie z przepisami na terytorium danego kraju. Jeżeli zdarzenie zostanie uznane za incydent, który musi zostać zgłoszony właściwym organom krajowym, firma Ascom przygotowuje i przedłoży zgłoszenie.

Jeśli jakikolwiek właściwy organ regulacyjny przekaze pisemne powiadomienie użytkownikowi końcowemu lub sprzedawcy / dystrybutorowi w związku z zapytaniami lub dochodzeniami dotyczącymi jakiegokolwiek Produktu, lub w celu przeprowadzenia inspekcji albo audytu obiektów używanych do przechowywania Produktów, lub zażąda informacji związanych z jakimkolwiek Produktem, wówczas użytkownik końcowy lub sprzedawca / dystrybutor niezwłocznie powiadomi firmę Ascom.

## 1.3 Zamierzone zastosowanie/przeznaczenie

W tym rozdziale opisano zamierzone zastosowanie/przeznaczenie programu Unite Axxess for Smart Devices.

### Przeznaczenie (ogólne)

Program Axxess for Smart Devices jest przeznaczony do elektronicznej prezentacji personelowi medycznemu informacji alarmowych (alertów) oraz innych danych pochodzących z aparatury medycznej podłączonej za pomocą urządzeń medycznych Ascom w celu wsparcia monitorowania pacjentów

Założeniem programu Axxess for Smart Devices jest działanie jako dodatkowe narzędzie do wyświetlania alertów, tj. informacji alarmowych i innych danych z aparatury medycznej, i nie może zastąpić bezpośredniego wglądu w dane z podłączonej aparatury

Produkt Axxess for Smart Devices nie jest przeznaczony do zastosowania w aktywnym monitorowaniu pacjentów, nie można go używać jako narzędzia podczas podejmowania nagłych decyzji o postępowaniu medycznym ani w celach diagnostycznych. Ponadto produkt Axxess for Smart Devices nie jest przeznaczony do kontrolowania ani zmieniania funkcji ani parametrów podłączonej aparatury medycznej.

Produkt Axxess for Smart Devices jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników i zakłada prawidłowe działanie oraz użytkowanie zarówno infrastruktury komunikacyjnej dostępnej w placówce medycznej, jak i stosowanej aparatury do monitorowania.

Komponenty aplikacji Axxess for Smart Devices należy zainstalować na określonym sprzęcie i systemie operacyjnym, a po stronie placówki medycznej leży zapewnienie odpowiedniej medycznej sieci informatycznej oraz infrastruktury komunikacyjnej.

### **Przeznaczenie (UE/EFTA/UK/AUS/MYS)**

Aplikacja Ascom Unite Connect for Clinical Systems służy jako interfejs systemów klinicznych, który umożliwia przekazywanie informacji, w tym ważnych parametrów fizjologicznych, powiązanych z poszczególnymi zdarzeniami, do wyznaczonych urządzeń wyświetlających, aby ułatwić monitorowanie pacjentów. Po odebraniu alertu(-ów) urządzenie(-a) wyświetlające wysyła sygnały wzrokowe oraz/lub akustyczne, a także wibruje.

W aplikacji Connect for Clinical Systems zastosowano konfigurowalne przetwarzanie i filtrowanie powiadomień o zdarzeniach, umożliwiając zmniejszenie ich częstości i liczby. Aplikacja ma za zadanie przedstawianie członkom personelu medycznego informacji pozwalających na podjęcie odpowiednich działań klinicznych.

W przypadku alarmów medycznych niemal w czasie rzeczywistym aplikacja Connect for Clinical Systems ma służyć jako dodatkowy alarm, tj. stanowić równoległy, rezerwowy mechanizm przekazywania personelowi medycznemu informacji o określonych, istotnych z medycznego punktu widzenia zdarzeniach.

W przypadku wybranych urządzeń i systemów źródłowych Connect for Clinical Systems działa jako integrator i komunikator rozproszonego systemu alarmowego (DAS/CDAS), aby niezawodnie przekazywać i dostarczać alarmy fizjologiczne i techniczne personelowi medycznemu na wyznaczonych urządzeniach wyświetlających i do określonych systemów.

Zaleca się, aby członkowie personelu medycznego używali aplikacji Connect for Clinical Systems wraz z podanymi urządzeniami medycznymi zawsze, gdy zachodzi potrzeba monitorowania parametrów fizjologicznych pacjentów. Populacja pacjentów i stan pacjenta są określane przez podłączone urządzenia medyczne.

Program Connect for Clinical Systems jest instalowany na określonych systemach informatycznych i polega na prawidłowym użytkowaniu i działaniu podłączonych urządzeń medycznych, systemów, urządzeń wyświetlających i medycznej sieci IT.

Connect for Clinical Systems jest stosowany w placówkach opieki zdrowotnej, na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach ogólnych i innych oddziałach oraz, w zależności od konkretnej konfiguracji, poza obiektem służby zdrowia.

#### **1.3.1 Oczekiwane korzyści kliniczne**

- Mniejsze ryzyko pominięcia krytycznych alertów dotyczących pacjentów.<sup>1</sup>
- Ograniczenie nadmiernej liczby alarmów dzięki zmniejszeniu liczby komunikatów ostrzegawczych otrzymywanych przez opiekunów.<sup>1</sup>
- Krótszy czas reakcji na krytyczne zdarzenia dotyczące pacjentów.<sup>1</sup>
- Poprawa efektywności przepływu pracy przez uniknięcie niepotrzebnych przerw w pracy.<sup>1</sup>

---

1. UWAGA! Stwierdzenie to dotyczy TYLKO sytuacji, gdy Unite Axxess for Smart Devices jest używane w połączeniu z oprogramowaniem Ascom Unite do dystrybucji alertów/zdarzeń PM/NC (na przykład Unite Connect for Clinical Systems).

- Prezentacja stanu systemu dla użytkowników niemal w czasie rzeczywistym.<sup>2</sup>
- Dzięki jednej aplikacji mobilni opiekunowie mogą teraz otrzymywać dwukierunkowe, interaktywne komunikaty dotyczące krytycznych i niekrytycznych zdarzeń u pacjentów, w tym elektrogramów.
- Informacje o pacjencie i alerty są dostarczane do inteligentnego urządzenia z wykorzystaniem solidnych zabezpieczeń opartych na standardach, szyfrowania wiadomości i uwierzytelniania użytkownika. Tak więc nawet w przypadku utraty urządzenia dane pozostaną bezpieczne.

---

2. UWAGA! To stwierdzenie dotyczy TYLKO systemów klasy IIb (Unite Connect for Clinical Systems z aplikacjami Unite View i/lub Unite Axess for Smart Devices)



## 2 Unite Axess for Smart Devices – Układ graficzny


Standardowa wersja aplikacji Unite Axess for Smart Devices zawiera:

- Strona **Alert**: Jest to strona domyślna podczas logowania.
- **Menu**: Aby uzyskać dostęp do menu, dotknij ikony **Menu** (☰ w systemie Android i ≡ w iOS).


### 2.1 Układ graficzny w urządzeniach Android

W zależności od konfiguracji systemu (ze stanem dostępności lub bez) wskazania górnego paska mogą się różnić.

Rysunek 1. Układ z włączonym stanem dostępności

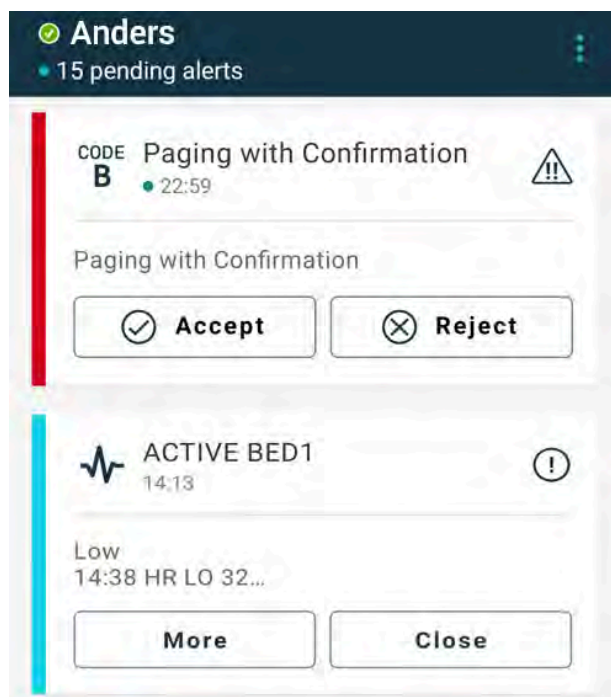

Rysunek 2. Układ z wyłączonym stanem dostępności

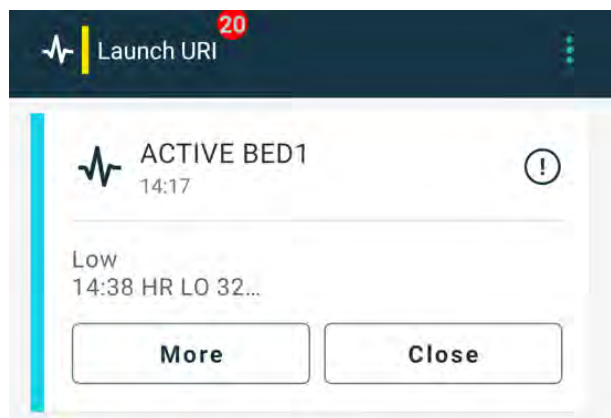

Gdy masz dostęp do co najmniej jednej aplikacji oprócz Unite Axess for Smart Devices, w dolnej części ekranu włączony jest **Pasek nawigacyjny** szybkiego dostępu.

Rysunek 3. Dolny pasek nawigacyjny




## 2.2 Układ graficzny na urządzeniach iOS




Jeśli używasz widżetu Axess for Smart Devices, nie zastępuj ikony aplikacji  widżetem, ponieważ widżet nie zawiera nieobsługiwanych powiadomień.

W zależności od konfiguracji systemu (ze stanem dostępności lub bez) wskazania górnego paska mogą się różnić.

Rysunek 4. Układ z włączonym stanem dostępności


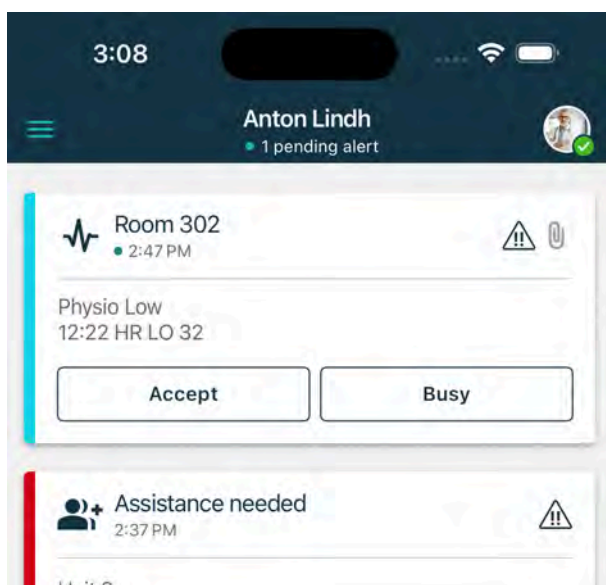


Rysunek 5. Układ z wyłączonym stanem dostępności

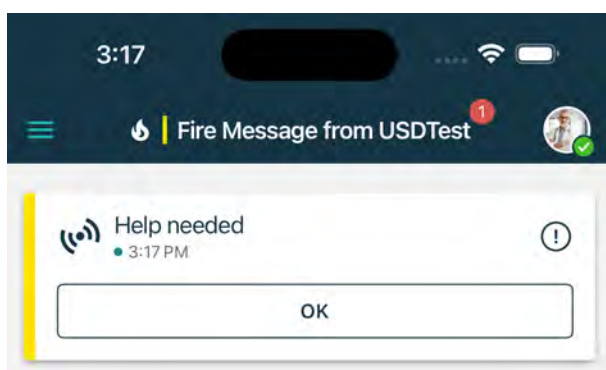

## 2.3 Ikony

Tutaj możesz zobaczyć znaczenie każdej ikony w aplikacji Unite Axess for Smart Devices:
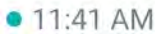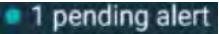
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ikona menu (Android)                                                                                                                                                |
|    | Ikona menu (iOS)                                                                                                                                                    |
|    | Czas otrzymania alertu. Niebieska kropka przed godziną wskazuje, że alert nie został podjęty.                                                                       |
|    | Dodatkowa treść w załączniku                                                                                                                                        |
|    | Ikona alertów na dolnym pasku nawigacyjnym (tylko Android)                                                                                                          |
|    | Ikona alertów na dolnym pasku nawigacyjnym z liczbą niepodjętych alertów (tylko Android).                                                                           |
|    | Ikona profilu (dostępna w dolnym pasku nawigacyjnym w systemie Android i w prawym górnym rogu w systemie iOS) używana do uzyskiwania dostępu do <b>My Profile</b> . |
|    | Całkowita liczba niepodjętych alertów wyświetlana na górnym pasku, gdy stan dostępności jest włączony w systemie.                                                   |
|    | Całkowita liczba niepodjętych alertów wyświetlana na górnym pasku, gdy stan dostępności nie jest włączony w systemie.                                               |
|  | Ikona Akceptuj alert.                                                                                                                                               |
|  | Ikona Odrzuć alert. Używana również dla opcji <b>Cofnij</b> , gdy masz możliwość cofnięcia odpowiedzi <b>Akceptuj</b> .                                             |
|  | Niski priorytet                                                                                                                                                     |
|  | Średni priorytet                                                                                                                                                    |
|  | Wysoki priorytet                                                                                                                                                    |

## 2.4 Pomoc Unite Axxess

Aplikacja Unite Axxess for Smart Devices zawiera stronę pomocy z instrukcjami, jak korzystać z funkcji aplikacji.

1. Aby wyświetlić tekst pomocy, dotknij ikony **Menu**.
2. Następnie dotknij przycisku **Pomoc**.
3. Aby wrócić do strony **Menu**, dotknij przycisku **Wstecz**.

### 3 Łączenie z systemem Unite

W przypadku urządzeń Android połączenie odbywa się z systemem Unite w aplikacji **Ascom Login**.

W urządzeniach iOS do połączenia z systemem Unite wymagany jest adres URL serwera Unite Axess (w systemie Android to łącze jest skonfigurowane w Ascom Login). Adres URL może być podany jako łącze, wpisany ręcznie lub dostarczony przez lokalny serwer DNS.

W przypadku łącza wystarczy, aby użytkownik je kliknął na urządzeniu. Jeśli użytkownik jest już zalogowany na innej stronie niż ta podana w łączu, nastąpi najpierw wylogowanie z konta, a następnie aplikacja spróbuje połączyć się z adresem URL podanym w łączu. Po znalezieniu strony wyświetli się okno logowania. Jeśli strona nie zostanie odnaleziona, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie oraz będzie mógł ręcznie wprowadzić adres URL strony.

Jeśli konieczne jest ręczne wprowadzenie adresu URL, może on zawierać:

- Publiczną nazwę FQDN lub adres IP umożliwiające dostęp do opublikowanej strony www obsługującej aplikację Unite Axess for Smart Devices (na przykład `uniteaxess.company.com`)
- Ścieżkę wirtualnego katalogu zdefiniowanego podczas instalacji (na przykład „Axess”)

Adres URL serwera może mieć następujący format: `https://uniteaxess.<nazwafirmy>.com/Axess`.

Jeśli udostępniony jest przez lokalny DNS i jeśli aplikacja Unite Axess for Smart Devices nie ma poprzednio używanej strony podczas uruchamiania, aplikacja spróbuje automatycznie wyszukać nazwę hosta w DNS, a po otrzymaniu odpowiedzi użyty zostanie prawidłowy adres URL.

#### 3.1 Logowanie / Wylogowanie przez Ascom Login

Logowanie i wylogowywanie się z urządzenia z systemem Android odbywa się za pośrednictwem aplikacji Ascom Login, która jest wspólnym interfejsem logowania dla aplikacji Ascom w systemie Android. Oznacza to, że musisz tylko jeden raz wprowadzić swoje dane logowania, aby uzyskać dostęp do aplikacji w swoim urządzeniu. Po wylogowaniu wyjdiesz ze wszystkich aplikacji obsługiwanych przez Ascom Login, a lista alertów zostanie automatycznie usunięta ze względów bezpieczeństwa.



Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, aby skorzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez tę aplikację, zostanie wyświetlony monit o udzielenie określonych uprawnień dla Unite Axess for Smart Devices. Unite Axess for Smart Devices uruchamia sprawdzanie za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji, więc obowiązkowe jest udzielenie tych uprawnień i nie dezaktywowanie ich podczas używania Unite Axess for Smart Devices:

- Zezwól Unite Axess for Smart Devices na dostęp do kontaktów
- Zezwól Unite Axess for Smart Devices na wykonywanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi
- Zezwól Unite Axess for Smart Devices na dostęp do zdjęć i multimediów na urządzeniu
- Ustawienia nakładki > Zezwalaj na wyświetlanie nad innymi aplikacjami
- Ustawienia powiadomień > Zezwalaj
- Optymalizacja zużycia baterii > Wszystkie aplikacje > Unite Axess > Nie optymalizuj

Ponadto podczas aktualizacji z wersji 6.0.1 do 6.2 konieczne jest ponowne zalogowanie się.

#### Zaloguj się

1. Dotknij w urządzeniu ikony **Ascom Login**  lub ikony **Ascom Axess** , co spowoduje przekierowanie do aplikacji Ascom Login.

2. Wprowadź swoją **Nazwę użytkownika** i **Hasło**.



3. Dotknij przycisku **Logowanie**.

#### Logowanie za pomocą innych usług uwierzytelniania

Organizacja może również korzystać z innych usług uwierzytelniania, takich jak PingFederate lub OpenID. W takim przypadku podczas logowania może nastąpić przekierowanie do tej usługi uwierzytelniania, w której musisz użyć konta organizacji.

Upewnij się, że czas urządzenia jest taki sam jak czas serwera, w przeciwnym razie możesz nie być w stanie zalogować się.

#### Wyloguj

1. Dotknij ikony **Profil**  na dolnym pasku nawigacyjnym lub ikony aplikacji **Ascom Login** .
2. Dotknij przycisku **Wylogowanie**.

Po wylogowaniu wszystkie alerty i wiadomości są automatycznie usuwane z urządzenia ze względów bezpieczeństwa.

#### 3.1.1 Uwierzytelnianie przez Imprivata Mobile Device Access

Imprivata Mobile Device Access to narzędzie do uwierzytelniania mobilnego w służbie zdrowia, które umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do medycznych urządzeń mobilnych i aplikacji. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do udostępnionych medycznych urządzeń mobilnych, a następnie logować się jednokrotnie (SSO) do aplikacji.

Jeśli organizacja stosuje uwierzytelnianie przez Imprivata Mobile Device Access, możesz zalogować się do wszystkich aplikacji Ascom i innych aplikacji medycznych innych firm za pomocą pojedynczego logowania (przy użyciu danych logowania) lub za pomocą dotknięcia identyfikatorem zbliżeniowym dostarczonemu przez organizację.



Aby zapewnić integrację z Imprivata Single Sign-On, konieczne jest zainstalowanie aplikacji Ascom Login na urządzeniu (Ascom Myco 3, Ascom Myco 4 lub innym obsługiwanym urządzeniu inteligentnym). Integracja z Imprivata w żaden sposób nie wyklucza korzystania z Ascom Login, który jest wymagany dla innych aplikacji Ascom.

### Logowanie za pomocą identyfikatora

1. Aby wyświetlić ekran blokady **Imprivata**, włącz ekran na urządzeniu.
2. Przyłóż identyfikator w obszarze wykrywania NFC z tyłu urządzenia.
3. Jeśli pojawi się monit, wpisz kod PIN, a następnie naciśnij **Potwierdź**.

Przed zalogowaniem, każdy poprzedni użytkownik nadal zalogowany na urządzeniu zostanie automatycznie wylogowany.

Jeśli chcesz zablokować urządzenie po zalogowaniu, po prostu ponownie przyłóż identyfikator w obszarze wykrywania NFC. Wyświetli się ekran blokady **Imprivata**.

### Logowanie za pomocą danych logowania użytkownika

1. Aby wyświetlić ekran blokady **Imprivata**, włącz ekran na urządzeniu.
2. Na ekranie blokady **Imprivata** naciśnij ikonę **Logowanie ręczne** , wpisz **nazwę użytkownika** oraz **hasło** i dotknij przycisku **Zaloguj**.

Przed zalogowaniem każdy poprzedni użytkownik nadal zalogowany na urządzeniu zostanie automatycznie wylogowany.

Jeśli logowanie się powiedzie, urządzenie odblokuje się i nastąpi zalogowanie do wszystkich aplikacji medycznych. Jeśli nie możesz się zalogować lub wyświetli się monit o wprowadzenie łącza Unite Axess Server, skontaktuj się z administratorem systemu.

### Wylogowanie

1. Na ekranie blokady **Imprivata** naciśnij ikonę **Wyloguj** .
2. W oknie potwierdzenia naciśnij przycisk **OK**.

## 3.2 Urządzenia iOS: Logowanie/wylogowanie

Jeśli dana implementacja jest dostarczana z innymi obsługiwanymi aplikacjami Ascom, Unite Axess for Smart Devices umożliwia jednokrotne logowanie do innych aplikacji Unite, takich jak Unite Collaborate.



Po wybraniu prawidłowego serwera Unite Axess for Smart Devices i przy pierwszym uruchomieniu aplikacji konieczne jest przyznanie następujących uprawnień, aby móc się zalogować:

- Zezwalaj na powiadomienia
- Zezwalaj na alerty krytyczne
- Zezwalaj na powiadomienia wrażliwe na czas
- Tryb skupienia

Unite Axess for Smart Devices dokonuje sprawdzenia za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji, dlatego konieczne jest przyznanie tych uprawnień i nie wyłączanie ich podczas korzystania z Unite Axess for Smart Devices.

### Zaloguj się

1. Dotknij ikony aplikacji **Unite Axess** . Otworzy się okno logowania.
2. Wprowadź swoją **Nazwę użytkownika** i **Hasło**.



3. Dotknij przycisku **Logowanie**.

#### Logowanie za pomocą innych usług uwierzytelniania

Podczas logowania za pomocą uwierzytelniania OpenID Connect pojawia się wyskakujące okienko uprawnień z ostrzeżeniem, że otwierasz witrynę, która udostępni informacje o Tobie. Wybierz **Kontynuuj**, aby się zalogować.

#### Wyloguj

1. Dotknij ikony **Menu** .
2. Dotknij przycisku **Wylogowanie**.

Podczas wylogowania za pomocą uwierzytelniania OpenID Connect pojawia się wyskakujące okienko uprawnień z ostrzeżeniem, że otwierasz witrynę, która udostępni informacje o Tobie. Wybierz **Kontynuuj**, aby się wylogować.


Po wylogowaniu wszystkie alerty i wiadomości są automatycznie usuwane z urządzenia ze względów bezpieczeństwa.

## 4 Obsługa alertów

W tej sekcji opisano sposób obsługi alertów w Unite Axess for Smart Devices.

### Przegląd alertów

Alerty mogą mieć różne priorytety, kategorie i typy. Kolorowy pasek pokazuje priorytet lub kategorię alertu, natomiast ikona alertu jego typ.

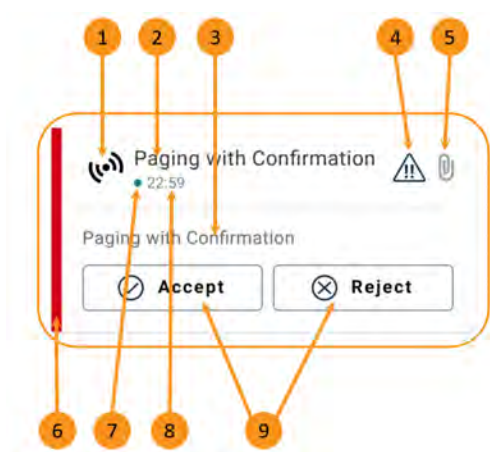

1. Symbol alertu
2. Temat, na przykład lokalizacja
3. Informacje o zdarzeniu
4. Ikona priorytetu
5. Ikona załącznika (załącznik jest połączony z tym alertem)
6. Kolor kategorii/priorytetu
7. Nieobsłużony alarm
8. Znacznik czasu
9. Opcje odpowiedzi (ikony Akceptuj ✓ / Odrzuć ✗ mogą być opcjonalne)

### Kolory alertów

Kolory służą do przedstawienia kategorii lub priorytetu alertów. Kolor alertu odpowiada kolorowi paska po lewej stronie każdego alertu.



Użycie kolorów zależy od konfiguracji i może różnić się w zależności od ustawień systemowych.

#### Kolor kategorii/priorytetu:


Czerwony

**Priorytet:** Wysoki



#### Kolor kategorii/priorytetu: Żółty

**Priorytet:** Średni

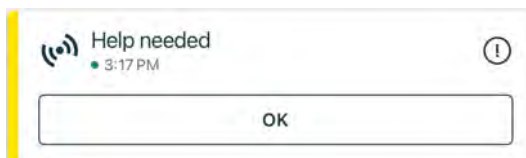

#### Kolor kategorii/priorytetu:

Błękitny

**Priorytet:** Niski





## 4.1 Ikony alertów

Ikony alertów przedstawiają kategorię alertu, na przykład wezwanie pielęgniarki lub wynik laboratoryjny.

W Ascom Myco dostępne są następujące ikony:

| Ikona                                                                               | Opis                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Alert ogólny                                  |
|    | Alert z łóżka                                 |
|    | Skala                                         |
|    | Pompa objętościowa                            |
|    | Pompa dojelitowa                              |
|   | Pompa balonowa                                |
|  | Jednostka termoregulacyjna                    |
|  | System wspomagania decyzji klinicznych (CDSS) |
|  | Pompa infuzyjna                               |
|  | Filtrowanie krwi<br>Dializa                   |
|  | Monitorowanie pacjenta                        |
|  | Respirator                                    |
|  | Analizator gazometryczny krwi                 |
|  | Urządzenie płuco-serce                        |
|  | Inkubator                                     |

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jednostka podawania środków znieczulających                                       |
|    | Wynik laboratoryjny                                                               |
|    | Wezwanie do łazienki                                                              |
|    | Wezwanie pomocy<br>Członek personelu wymagający wsparcia innego członka personelu |
| CODE<br>A                                                                           | Kod A                                                                             |
| CODE<br>B                                                                           | Kod B                                                                             |
|    | Wezwanie pomocy medycznej                                                         |
|   | Wezwanie pielęgniarki<br>Pacjent wymagający pomocy członka personelu.             |
|  | Wezwanie obsługi                                                                  |
|  | Zadanie                                                                           |
|  | Alert techniczny                                                                  |
|  | Awaria                                                                            |
|  | Alarm osobisty                                                                    |
|  | Pożar                                                                             |
|  | Rentgen                                                                           |
|  | Kategoria A                                                                       |
|  | Kategoria B                                                                       |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Kategoria C         |
|    | Kategoria D         |
|    | Kategoria E         |
|    | Zagrożenie          |
|    | Ustawienie wezwania |
|    | Przycisk 1          |
|    | Przycisk 2          |
|   | RTLS                |
|  | Strefa              |
|  | Temperatura         |
|  | Schemat             |
|  | Schemat 1           |
|  | Schemat 2           |
|  | Schemat 3           |
|  | Schemat 4           |
|  | Schemat 5           |

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Bezpieczeństwo |
|  | Obecność       |

## 4.2 Odbieranie alertów

Zostaniesz powiadomiony o przychodzącym alercie wstępnie zdefiniowanym sygnałem dźwiękowym alertu. Urządzenie przenośne wyświetla alert na stronie **Alerty**.



W zależności od konfiguracji systemu możesz nie otrzymywać alertów, jeśli stan dostępności jest ustawiony na **Zajęty** lub **Nie przeszkadzać**.

Jeśli otrzymasz alert z opcjami odpowiedzi, dotknij opcji odpowiedzi (na przykład **Zaakceptuj** lub **Odrzuć**). Po udzieleniu odpowiedzi alert jest aktualizowany o komunikat odpowiedzi. Lista alertów jest domyślnie posortowana chronologicznie, a najnowsze alerty są wyświetlane na górze. Na liście alertów wyświetlane są wszystkie alerty otrzymane i nieusunięte. W przypadku, gdy odpowiedź na alert nie zostanie odesłana z powrotem na serwer z powodu błędu komunikacji/systemu, dostaniesz powiadomienie.

**Na odblokowanym urządzeniu** powiadomienia o alertach są wyświetlane u góry ekranu. Jeśli w krótkim czasie nadejdzie kilka powiadomień o alertach, najnowszy alert będzie wyświetlany nad pozostałymi.

**Na zablokowanym urządzeniu z systemem Android** alert jest sygnalizowany dźwiękiem i wibracjami oraz powiadomieniem wizualnym na wyświetlaczu.

**Na zablokowanym urządzeniu z systemem iOS** nowy alert jest wyświetlany, ale bez koloru kategorii/priorytetu.


Po otrzymaniu powiadomienia o alercie przesunij palcem w górę lub w dowolną stronę powiadomienia albo dotknij ikony, aby je ukryć.

Dotknij powiadomienia, aby otworzyć alert. W zależności od implementacji systemu i ustawień otrzymanego alertu można również uruchamiać inne funkcje z poziomu powiadomienia o alercie, takie jak uruchomienie przeglądarki, nawiązanie połączenia lub uruchomienie innych aplikacji.

### 4.2.1 Informacje o pacjencie w alertach


Otrzymane powiadomienia mogą zawierać informacje o pacjencie, takie jak imię i nazwisko lub wiek. Informacje te nie będą wyświetlane w powiadomieniu; będą one wyświetlane tylko po otwarciu alertu.

W zależności od konfiguracji systemu na liście alertów mogą być również wyświetlane informacje o pacjencie.

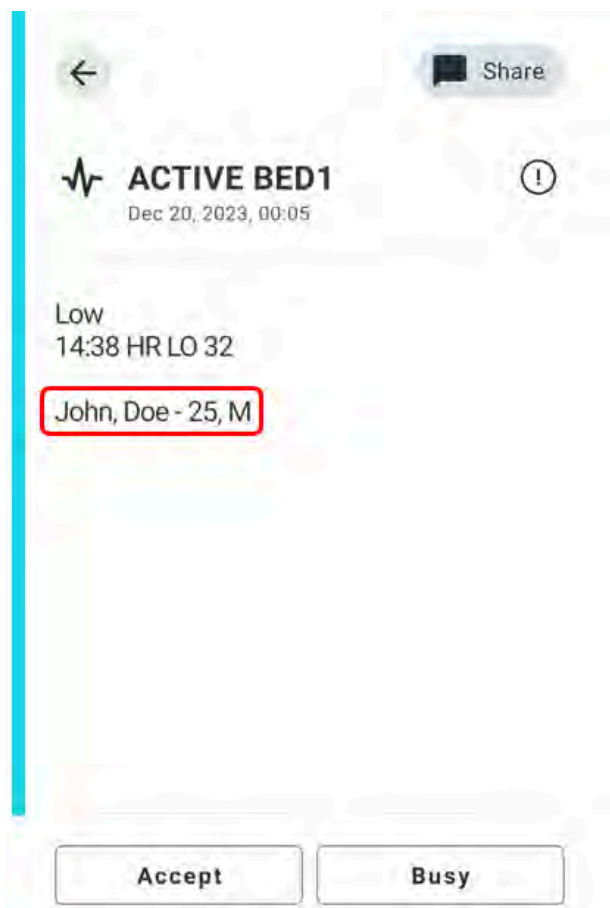

#### 4.2.2 Obsługa alertów na urządzeniach Android

Okrągły wskaźnik sygnalizuje, że alerty są aktualizowane. Aktualizacja za pośrednictwem kanału DECT (tylko urządzenia Ascom Myco 3) może potrwać kilka sekund.

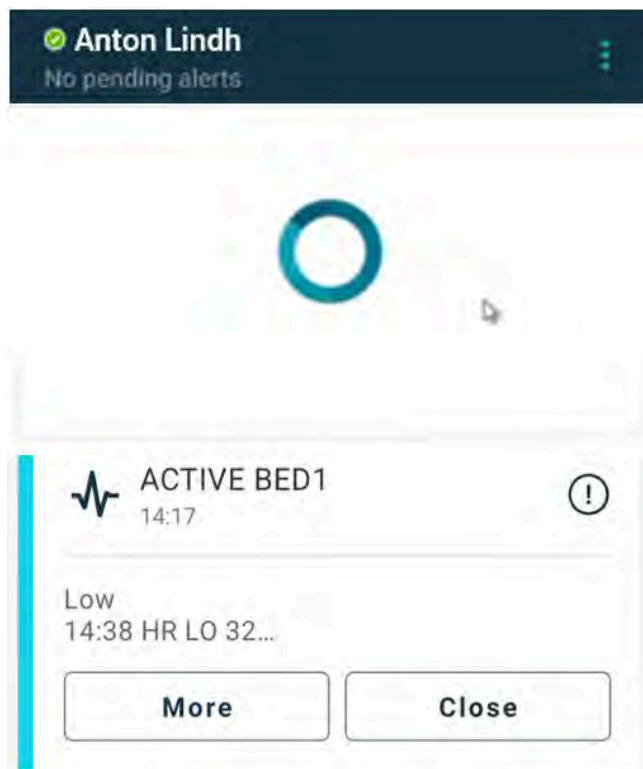

Liczba niepodjętych alertów jest wyświetlana na dolnym pasku nawigacyjnym oraz na górnym pasku.

Aby przeczytać alert na pełnym ekranie, dotknij treści wiadomości.

#### 4.2.2.1 Alerty ustawienia wezwania (tylko Ascom Myco)

Alert ustawienia wezwania inicjuje połączenie automatycznie lub po dotknięciu opcji w alercie. Może to być zwykłe połączenie lub rozmowa Push-to-Talk (PTT).

Po zakończeniu połączenia możesz połączyć się z nim ponownie z poziomu alertu.

Połączenie PTT to połączenie grupowe, które wymaga dotknięcia i przytrzymania przycisku na ekranie lub przyciśnięcia skonfigurowanego przycisku wielofunkcyjnego podczas rozmowy. Gdy jeden użytkownik mówi, inni słuchają.

Jeśli już trwa połączenie i otrzymujesz alert ustawienia wezwania, połączenie zostanie przerwane, a odebrane połączenie zostanie automatycznie połączone po krótkim czasie (natychmiast w przypadku alertów priorytetu 1), jeśli spełnione są następujące warunki:

- Alert jest skonfigurowany tak, aby był automatycznie akceptowany.
- Alert ma wyższy priorytet niż priorytet trwającej rozmowy.

Jeśli priorytet alertu ustawienia wezwania jest niższy niż bieżące połączenie lub jeśli alert nie został skonfigurowany do automatycznego akceptowania, należy zainicjować połączenie ręcznie. Rozpoczęcie połączenia z alertu ustawienia wezwania spowoduje odłączenie trwającego połączenia.

#### 4.2.3 Obsługa alertów na urządzeniach iOS

Liczba niepodjętych alertów jest wyświetlana na górnym pasku.

Aby przeczytać alert na pełnym ekranie, dotknij treści wiadomości.

### 4.3 Sortowanie alertów

Lista alertów jest domyślnie posortowana chronologicznie, a najnowsze alerty są wyświetlane na górze. Mała ikona nad tekstem **Sortuj** na dole strony **Alerty** przedstawia aktualny sposób sortowania alertów.

1. Na stronie **Alerty** dotknij ikony **Sortuj** .
2. Wybierz sposób sortowania alertów. Alerty są wyświetlane według wybranego sposobu.



Alerty są sortowane według czasu, najnowszy alert znajduje się na górze.



Alerty są sortowane według priorytetu, alert o najwyższym priorytecie znajduje się na górze. Alerty o tym samym priorytecie są sortowane według czasu, najnowsze znajdują się na górze.



Alerty są pogrupowane według kategorii.

### 4.4 Filtrowanie alertów

1. Dotknij ikony **Filtr**  na stronie **Alerty**.
2. Zaznacz sposób, w jaki chcesz filtrować alerty, wybierając opcję na jednej z list.



Na liście **Priorytet** można filtrować wg opcji **Alarm**, **Wysoki**, **Normalny** i **Niski**.



Na liście **Stan odpowiedzi** można filtrować wg opcji **Oczekiwanie na odpowiedź** i **Odpowiedziano**.



Na liście **Kategoria** można filtrować wszystkie kategorie dostępne na liście alertów, takie jak **Wezwanie wg kodu**, **Laboratorium** lub **Monitoring**.


Po wybraniu opcji tło na stronie **Alerty** przyciemnia się i wyświetlane są tylko filtrowane alerty.

3. Aby usunąć filtr, dotknij ikony **Anuluj** .

### 4.5 Przekazywanie alertów

Aby przesłać alert, musisz zainstalować aplikację Unite Collaborate na swoim urządzeniu.

1. Naciśnij alert, aby otworzyć stronę szczegółów alertu.
2. Dotknij przycisku **Udostępnij**. Zostanie wygenerowany zrzut ekranu strony szczegółów alertu. Możesz wysłać ten obraz jako załącznik za pośrednictwem aplikacji.

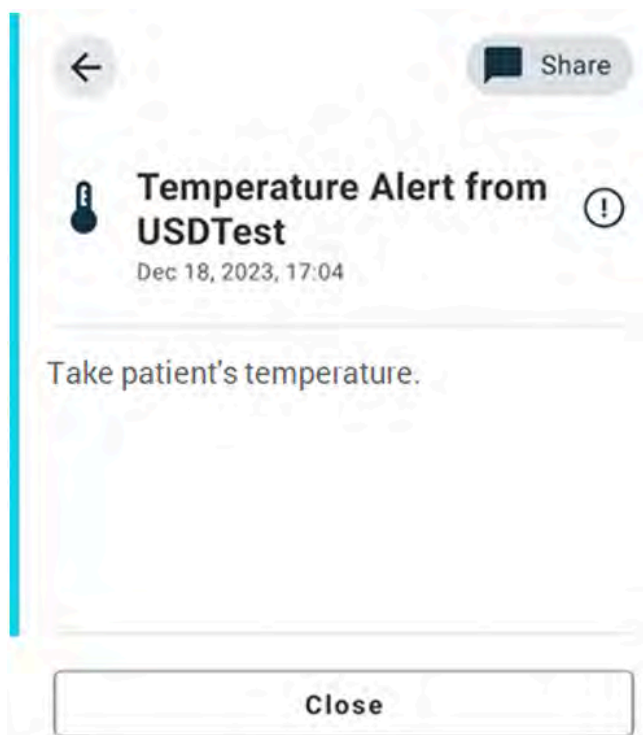

#### 4.6 Usuwanie alertów

1. Dotknij i przytrzymaj alert, który chcesz usunąć. Pojawi się menu.
2. Dotknij opcji **Usuń wybrany alert**, aby usunąć odpowiedni alert, lub **Usuń wszystkie alerty**, aby usunąć wszystkie alerty.
3. W komunikacie ostrzegawczym dotknij opcji **Usuń**, aby potwierdzić.



## 5 Stan dostępności

Jeśli system jest odpowiednio skonfigurowany, użytkownicy mogą wybierać swój stan dostępności na urządzeniu. Stan dostępności może być używany przez system np. podczas decyzji, do kogo wysłać alert.

### 5.1 Stan dostępności na urządzeniach Android

Stan dostępności jest wskazany na górnym pasku aplikacji. Stan dostępności można zmienić ręcznie na **Zajęty Nie przeszkadzać** lub **Dostępny** na ekranie **Mój profil**. Do ekranu **Mój profil** można przejść z dolnego paska nawigacyjnego lub z aplikacji Ascom Login.

#### Prezentacja stanu dostępności

Do prezentacji stanu dostępności używane są następujące ikony:



Dostępny




Zajęty



Nie przeszkadzać

#### Zmiana stanu

Na ekranie **Mój profil** dotknij ikony ▼ i wybierz **Dostępny**, **Zajęty** lub **Nie przeszkadzać**.

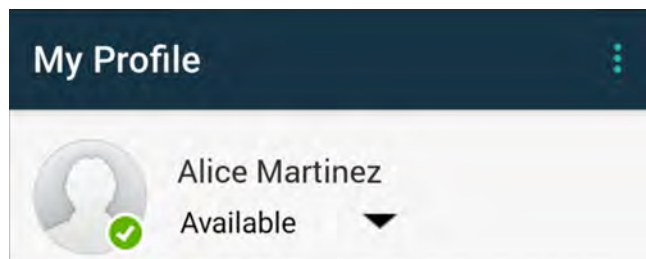

W zależności od konfiguracji systemu możesz nie otrzymywać alertów, jeśli stan dostępności jest ustawiony na **Zajęty** lub **Nie przeszkadzać**.

### 5.2 Stan dostępności na urządzeniach iOS

Stan dostępności jest wskazany na górnym pasku aplikacji.

#### Prezentacja stanu dostępności



Dostępny



Zajęty



Nie przeszkadzać




Wylogowany/Poza siecią

### Zmiana stanu

Stan dostępności można zmienić tylko wtedy, gdy na tym samym urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Unite Collaborate, w przeciwnym razie ta procedura nie jest dostępna.

1. Dotknij swojego imienia i nazwiska lub zdjęcia profilowego w górnym pasku.

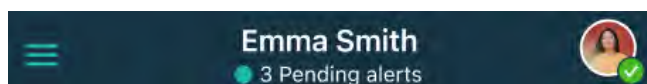

Teraz możesz zobaczyć opcje dostępności.

2. Aby zmienić status dostępności:
  - Wybierz **Dostępny**, **Zajęty** lub **Nie przeszkadzać**.
  - W zależności od ustawień użytkownik może zostać przekierowany do Unite Collaborate, gdzie można dodać dodatkowe szczegóły dla zaawansowanych profili dostępności (na przykład, jeśli wybierzesz opcję **Nie przeszkadzać**, możesz również wybrać godzinę, kiedy status ponownie będzie **Dostępny**). **Zapisz** ustawienia.
  - Po zakończeniu nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Unite Axess for Smart Devices.

Aby się wylogować, dotknij **Wyloguj**.




W zależności od konfiguracji systemu możesz nie otrzymywać alertów, jeśli stan dostępności jest ustawiony na **Zajęty** lub **Nie przeszkadzać**.

## 6 Komunikaty ostrzegawcze

Tutaj podano przykłady komunikatów ostrzegawczych, które mogą pojawić się w urządzeniu. Aby wyświetlić całą treść komunikatu w odblokowanym urządzeniu, dotknij powiadomienia. Z wyjątkiem sytuacji utraty połączenia z siecią, wszystkie ostrzeżenia zwykle wymagają wsparcia ze strony administratora.


Ostrzeżenie systemu wiadomości wskazuje, że połączenie z systemem wiadomości jest ograniczone i dostęp do nowych alertów/wiadomości jest ograniczony.

Rysunek 6. Ostrzeżenie systemu wiadomości na urządzeniach z systemem iOS

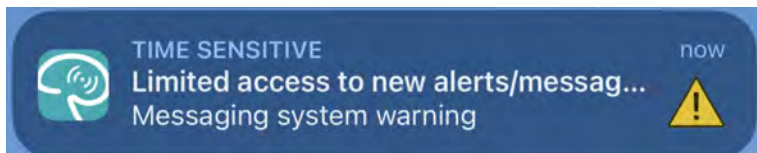

Ostrzeżenie o awarii systemu wiadomości wskazuje, że połączenie z systemem wiadomości nie jest dostępne i nie ma dostępu do alertów/wiadomości.


Rysunek 7. Ostrzeżenie o awarii systemu wiadomości na urządzeniach z systemem iOS

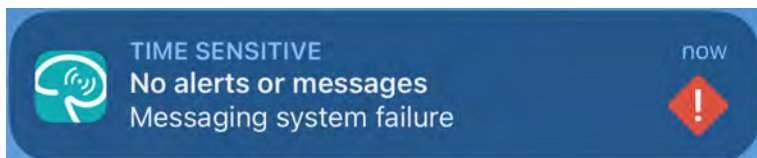

W zależności od podłączonego urządzenia źródłowego, szczególnie w przypadku systemu CDAS/DAS, na urządzeniu może zostać wyświetlone powiadomienie o utracie połączenia z jednym lub większą liczbą źródeł alarmów.


Naciśnij **Więcej informacji**, aby poznać więcej szczegółów dotyczących ostrzeżenia.

Rysunek 8. Utracono połączenie ze źródłem alarmów na urządzeniach Android

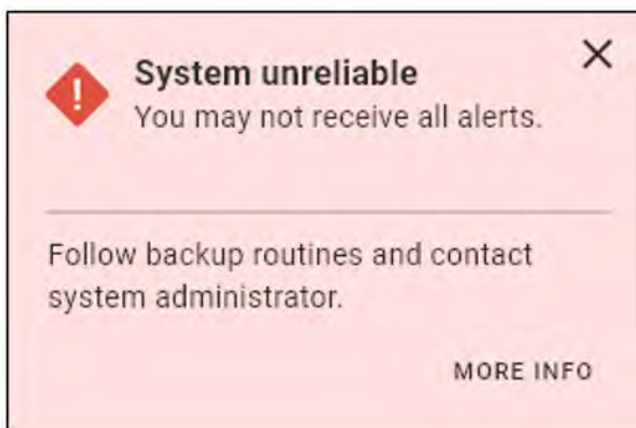




Rysunek 9. Utracono połączenie ze źródłem alarmów na urządzeniach iOS

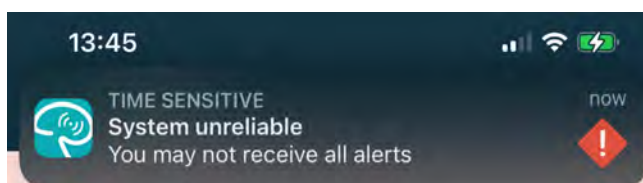


Rysunek 10. Wiadomości z powiadomieniami o błędach w urządzeniach z systemem Android

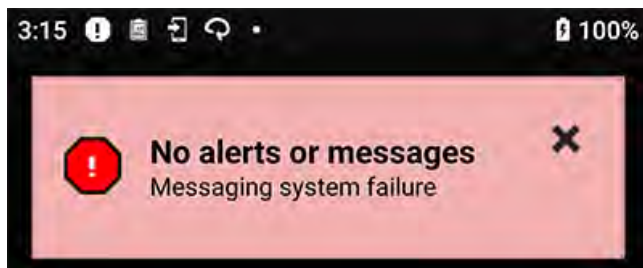


To ostrzeżenie wskazuje, że nie można używać aplikacji do podstawowego powiadamiania o alarmach.

Rysunek 11. Ostrzeżenie DIS/DAS

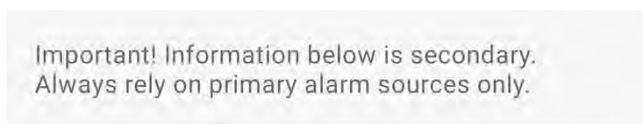

Jeśli aplikacja Unite Axxess for Smart Devices jest wdrożona w środowisku testowym, na urządzeniu zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Rysunek 12. Baner środowiska testowego

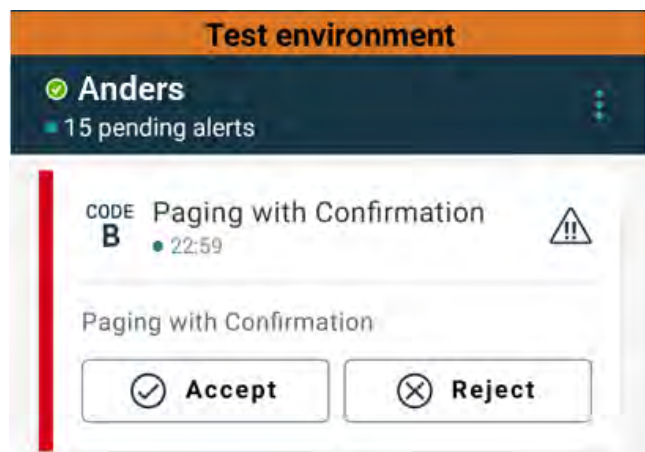

## 6.1 Obsługa komunikatów ostrzegawczych

W poniższej tabeli opisano dostępne akcje obsługi komunikatów ostrzegawczych wyświetlanych na urządzeniu.

| Komunikat ostrzegawczy                                                                 | Opis                                                                                                                                                       | Czynność                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System niestabilny</b><br>Możesz nie otrzymywać wszystkich alertów                  | Połączenie z urządzeniami medycznymi nie jest w pełni funkcjonalne. W zależności od głównej przyczyny niektóre alerty mogą być nadal prawidłowo rozsyłane. | Postępuj zgodnie z procedurami tworzenia kopii zapasowych i skontaktuj się z administratorem.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dostarczenie alertu nie powiodło się</b><br>Brak przypisań                          | Nie dokonano przypisania.                                                                                                                                  | Przypisz personel do wszystkich ról w Unite Assign.<br>Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z procedurami tworzenia kopii zapasowych i skontaktuj się z administratorem.                                                                                                                          |
| <b>Brak wskaźników stanu systemu</b><br>Jedno bądź więcej urządzeń jest nieosiągalnych | Nie można zapewnić poziomu, na którym pojedyncza awaria nie uniemożliwia wskazania stanu systemu.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy Digistat Smart Central działa na dedykowanych stacjach roboczych</li> <li>Sprawdź, czy kolumna sygnalizacyjna jest podłączona</li> <li>Sprawdź, czy odbiorcy stanu skonfigurowani w Unite Assign są nadal zalogowani do swoich urządzeń.</li> </ul> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nieobsłużony alarm</b><br>Nie można było dostarczyć do przydzielonego personelu | Alert nie został przekazany do nikogo.                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przypisz personel do wszystkich ról w Unite Assign.</li> <li>Sprawdź, czy wszystkie przypisane osoby są nadal zalogowane na swoich urządzeniach.</li> </ul> Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z procedurami tworzenia kopii zapasowych i skontaktuj się z administratorem. |
| <b>Nieobsłużony alarm</b><br>Odrzucone przez wszystkie przypisane osoby            | Alert został wysłany do co najmniej jednej przypisanej osoby, ale nie został zaakceptowany przez nikogo.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przypisz personel do wszystkich ról w Unite Assign.</li> <li>Sprawdź, czy wszystkie przypisane osoby są nadal zalogowane na swoich urządzeniach.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>System niestabilny</b><br>System może nie działać zgodnie z oczekiwaniami       | Błąd konfiguracji w systemie uniemożliwia prawidłowe wysyłanie alertów z podłączonych urządzeń medycznych. Alerty z innych systemów, na przykład wezwanie pielęgniarki, mogą być nadal wysyłane. | Postępuj zgodnie z procedurami tworzenia kopii zapasowych i skontaktuj się z administratorem.                                                                                                                                                                                                                              |


## 7 Ustawienia

### 7.1 Ustawienia w urządzeniach Android

Niektóre ustawienia są konfigurowane w aplikacji Unite Axess for Smart Devices, a inne w aplikacji Ascom Login.

#### Ustawienia w Unite Axess for Smart Devices

1. W Unite Axess for Smart Devices dotknij ikony **Menu** , a następnie naciśnij **Ustawienia**.

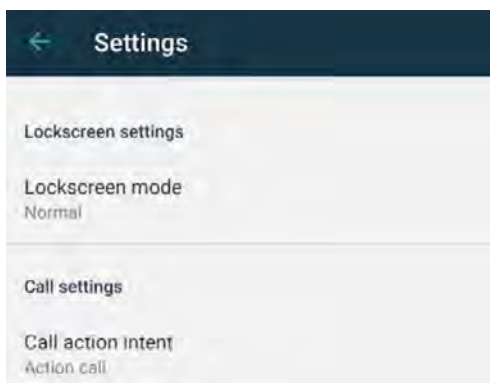

2. Skonfiguruj ustawienia.
  - Ustawienie **Tryb blokady ekranu** określa zachowanie aplikacji Unite Axess for Smart Devices, gdy ekran jest zablokowany. W **Trybie blokady ekranu** aplikacja Unite Axess for Smart Devices będzie działać jak każda inna aplikacja. W trybie **Aplikacja** aplikacja Unite Axess for Smart Devices może działać na ekranie blokady.  
Aby zmienić zachowanie blokady ekranu, dotknij opcji **Tryb blokady ekranu** i wybierz **Normalny** lub **Aplikacja**.




W przypadku korzystania z Imprivata Mobile Device Access (MDA) do uwierzytelniania **Tryb blokady ekranu** powinien być ustawiony na **Normalny**. Tylko jedna aplikacja może działać na ekranie blokady i w tym przypadku musi to być aplikacja Imprivata MDA.

- Ustawienie **Reakcja na wezwanie** określa sposób, w jaki urządzenie nawiązuje połączenie po wybraniu tego typu odpowiedzi w alercie przychodzącym. Urządzenie może nawiązać połączenie natychmiast, gdy włączona jest ta opcja, lub może wyświetlić numer, wówczas użytkownik sam musi nawiązać połączenie ręcznie. Zalecamy opcję **Zadzwoń**, ale można ją zmienić na **Wybierz numer**, jeśli wersja aplikacji nie obsługuje natychmiastowych połączeń.  
Dotknij **Tryb połączenia** i wybierz **Zadzwoń** lub **Wybierz numer**, aby zmienić zachowanie podczas połączeń.

#### Ustawienia w aplikacji Ascom Login


1. Dotknij ikony **Ascom Login**  w urządzeniu.
2. Dotknij ikony **Menu**  w prawym górnym rogu ekranu i naciśnij **Ustawienia**. W zależności od konfiguracji serwera następujące ustawienia mogą być zmieniane w urządzeniu lub pozostają zablokowane:

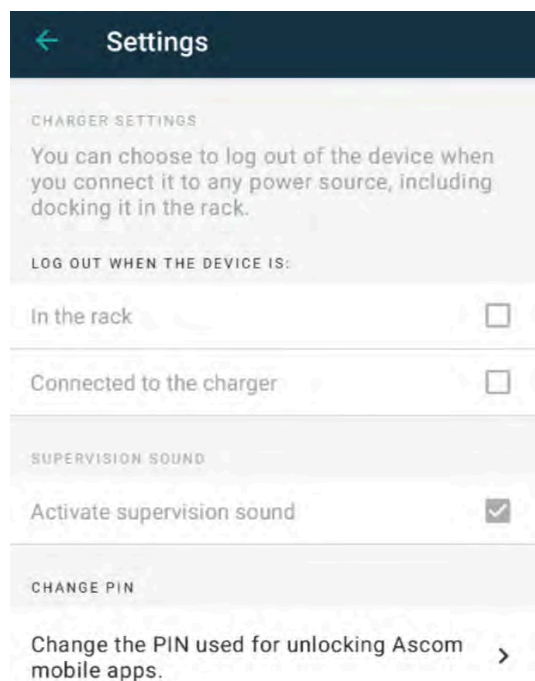

- W sekcji **Ustawienia ładowarki** dotknij pola wyboru **W listwie** lub **Podłączone do ładowarki**, aby włączyć automatyczne wylogowanie urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli **Dźwięk nadzoru** jest włączony, urządzenie będzie emitowało sygnał dźwiękowy co minutę, jeśli połączenie z systemem zostanie utracone.
- **Zmień PIN** pozwala na zmianę kodu PIN wymaganego do odblokowania aplikacji mobilnych Ascom.

## 7.2 Ustawienia w urządzeniach iOS

W aplikacji Unite Axess for Smart Devices naciśnij ikonę **Menu**  i wybierz **Ustawienia**. W zależności od konfiguracji serwera, ustawienie **Włącz dźwięk nadzoru** można konfigurować lub blokować w urządzeniu.

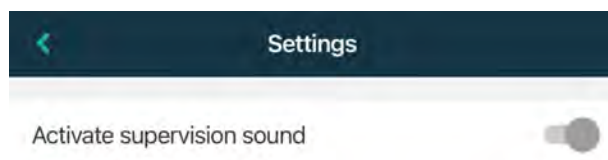

Jeśli nadzorowane urządzenie utraci połączenie z systemem, użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu oraz powtarzanego dźwięku.

Za pomocą przełącznika **Włącz dźwięk nadzoru** włącz lub wyłącz dźwięk nadzoru.



## 8 Informacje o aplikacjach

Informacje o zainstalowanych aplikacjach można znaleźć w widoku **Informacje** dla każdej aplikacji.

### 8.1 Unite Axess for Smart Devices

W widoku **Informacje** znajdują się: wersja aplikacji Unite Axess for Smart Devices, nazwa i wersja serwera, wersja oprogramowania i model urządzenia przenośnego, nazwa użytkownika i numer obsługi wiadomości, informacje o producencie oraz zastrzeżenia prawne.

(Tylko Android) Dotknięcie łącza **Polityka ochrony prywatności** powoduje otwarcie dodatku do Oświadczenia o ochronie prywatności w odniesieniu do produktów Ascom Unite. Dodatek dotyczący ochrony prywatności porusza kwestie instalacji i użytkowania aplikacji Unite Axess for Smart Devices firmy Ascom w urządzeniach firmowych.

Znajduje się tam również łącze do pozostałej dokumentacji dotyczącej aplikacji Unite Axess for Smart Devices.

| Zawartość pliku „Informacje”                                                        | Nazwa znaku                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Znak CE                            | Oznacza zgodność urządzenia z postanowieniami dyrektywy Rady 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 oraz rozporządzenia 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wyrobów medycznych w zakresie swobodnego przenoszenia i korzystania z nich w miejscach publicznych zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | Producent                          | Oznacza producenta urządzenia medycznego, zawiera także informacje o adresie i numerze telefonu.                                                                                                                                                                                              |
|  | Data produkcji                     | Oznacza datę wyprodukowania urządzenia medycznego.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Przeczytaj instrukcję obsługi      | Oznacza potrzebę zapoznania się z instrukcją obsługi.                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Numer katalogowy                   | Oznacza numer katalogowy producenta służący do identyfikacji urządzenia medycznego.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Uwaga                              | Oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi i ważnymi informacjami, takimi jak ostrzeżenia i środki ostrożności, które, z różnych powodów, nie znalazły się na samym urządzeniu medycznym.                                                                                        |
|  | Wyrób medyczny                     | Wskazuje, że element jest wyrobem medycznym.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Unikatowy identyfikator urządzenia | Oznacza unikatowy identyfikator urządzenia, który jednoznacznie identyfikuje urządzenie podczas dystrybucji i użytkowania.                                                                                                                                                                    |

1. Dotknij ikony **Menu**.
2. Dotknij przycisku **Informacje**.

## 8.2 Ascom Login (tylko Android)

Aby znaleźć informacje o aplikacji Ascom Login, dotknij ikony Ascom Login  na urządzeniu. Dotknij ikony **Menu**  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij **Informacje**.

W widoku **Informacje** podano wersję aplikacji, identyfikator oprogramowania oraz informacje o producencie.

Dotknięcie łącza **Licencja** spowoduje wyświetlenie widoku, w którym są informacje o licencji.

Aby wrócić do strony startowej, dotknij przycisku **Wstecz**.

## **Dodatek A**                      **Powiązane dokumenty**

*Pomoc on-line w aplikacji Unite Axxess for Smart Devices*

**Dodatek B                      Historia dokumentu**

| <b>Wersja</b> | <b>Data</b>      | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L             | 6 września 2024  | <p>Dodano ostrzeżenia dotyczące korzystania z funkcji ochrony Face ID i śledzenia oczu na urządzeniach z systemem iOS do <a href="#">1.1 Uwagi i komentarze, strona 1</a>.</p> <p>Dodano uwagę dotyczącą Axxess for Smart Devices do <a href="#">2.2 Układ graficzny na urządzeniach iOS, strona 7</a>.</p> <p>Zaktualizowano wyjaśnienie dotyczące filtrowania krwi i rozmowy telefonicznej z pielęgniarką/pomocą w <a href="#">4.1 Ikony alertów, strona 14</a>.</p> <p>Dodano informacje o ostrzeżeniach systemu wiadomości iOS do <a href="#">6 Komunikaty ostrzegawcze, strona 24</a>.</p> <p>Mniejsze poprawki.</p> |
| K             | 28 lutego 2024   | <p>Zaktualizowana sekcja <b>Przestroga i uwagi</b> — zaktualizowane ostrzeżenie dotyczące urządzeń DIS.</p> <p><b>Użycie zamierzone/Przeznaczenie</b> — Dodano Maleję do szczegółowego oświadczenia o przeznaczeniu</p> <p>Zaktualizowana lista ikon w sekcji <b>Ikony</b>.</p> <p>Zaktualizowano ekrany aplikacji, aby odpowiadały najnowszemu oprogramowaniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J             | 21 września 2023 | <p>Zaktualizowano punkt <b>1.2.1 Oczekiwane korzyści kliniczne, strona 4</b> z dodatkowymi wyłączeniami.</p> <p>Dodano punkt <b>4.2.1 Informacje o pacjencie w alertach, strona 15</b>.</p> <p>Dodano punkt <b>4.2.2.1 Alerty ustawienia wezwania (tylko Ascom Myco), strona 16</b>.</p> <p>Zaktualizowano obrazy interfejsu użytkownika w celu odzwierciedlenia najnowszych aktualizacji, w tym przeniesienia funkcji Aplikacje do Ascom Login.</p>                                                                                                                                                                      |
| I2            | 24 marca 2023    | Dodano Australię do punktu <b>1.3 Użycie zamierzone/Przeznaczenie, strona 3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I             | 19 września 2022 | Dodano informacje o ikonach priorytetów i szczegółowych komunikatach ostrzegawczych. Dodano <b>4.5 Przekazywanie alertów, strona 17</b> , <b>1.3.1 Oczekiwane korzyści kliniczne, strona 4</b> i <b>6.1 Obsługa komunikatów ostrzegawczych, strona 21</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H2            | 23 marca 2022    | Dodano informacje o tym, jak logowanie do Unite Axxess for Smart Devices iOS umożliwia również logowanie do innych obsługiwanych aplikacji Unite iOS ( <b>4.2 Urządzenia iOS: Logowanie/wylogowanie, strona 10</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H             | 28 lutego 2022   | <p>Udokumentowano logowanie federacyjne i uprawnienia wymagane w systemie Android.</p> <p>Dodano ikony alertu Akceptuj/Odrzuć.</p> <p>Dodano funkcję Nie przeszkadzać do statusu dostępności w systemie Android i iOS.</p> <p>Dodano dodatkowe ostrzeżenia i informacje o banerze środowiska testowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G  | 24 września 2021     | <p>Dodano informacje o czujności i zgłaszaniu incydentów.</p> <p>Usunięto rozdziały Przekazywanie alertu i Obsługa wiadomości (tylko iOS), ponieważ funkcja czatu jest obsługiwana tylko w aplikacji Unite Collaborate.</p> <p>Zaktualizowano sekcję Użycie zamierzone.</p> <p>Dodano więcej informacji o uprawnieniach.</p> <p>Dodano więcej informacji o Zarządzaniu alertami.</p> <p>Dodano nową ikonę i opis MD (Urządzenie medyczne).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F2 | 16 listopada 2021    | <p>Dodano nowe ostrzeżenia dotyczące możliwości powiadamiania w systemie iOS 15.</p> <p>Dodano informacje na temat czujności i zgłaszania incydentów.</p> <p>Dodano więcej informacji na temat uprawnień dla systemu Android.</p> <p>Dodano więcej informacji o Zarządzaniu alertami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F  | 17 grudnia 2020      | Udokumentowana integracja z Imprivata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E  | 07 października 2020 | <p><b>3.1 Układ graficzny w urządzeniach Android, strona 3:</b> Nowe.</p> <p><b>3.2 Układ graficzny w urządzeniach iOS, strona 4:</b> Nowe</p> <p><b>3.3 Ikony, strona 4:</b> Dodano ikony.</p> <p><b>4.1 Logowanie/wylogowanie w urządzeniach Android, strona 6:</b> Nowe.</p> <p><b>4.2 Logowanie/wylogowanie w urządzeniach iOS, strona 7:</b> Nowe:</p> <p><b>5.1.1 Obsługa alertów na urządzeniach Android, strona 8:</b> Nowe.</p> <p><b>5.1.2 Obsługa alertów na urządzeniach iOS, strona 8:</b> Nowe.</p> <p><b>5.4 Przekazywanie alertów (tylko iOS), strona 11:</b> Dodano tylko w iOS.</p> <p><b>6 Obsługa wiadomości (tylko iOS), strona 12:</b> Dodano uwagę „dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS”.</p> <p><b>7 Stan dostępności na urządzeniach Android, strona 13:</b> Nowe</p> <p><b>8 Stan dostępności na urządzeniach iOS, strona 14:</b> Nowe.</p> <p><b>9 Komunikaty ostrzegawcze, strona 15:</b> Zastąpiono ilustrację.</p> |
| D  | 10 czerwca 2019      | <p>Dodano „Użycie zamierzone z Connect for Clinical System Class IIb w UE/EFTA” do rozdziału <b>2</b> Użycie zamierzone, strona 2 i rozdział <b>9.1 Logowanie / Wylogowanie przez Ascom Login, strona 15.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C  | 1 listopada 2018     | Dodano znak CE z numerem NB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B  | 21 września 2018     | Dodano <b>3.1.1 Ikony, strona 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A  | 23 marca 2018        | Pierwsza dopuszczona wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Ascom (Sweden) AB**

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 93 00

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

**ascom**