

NÁVOD NA POUŽITIE

Ascom Unite Axess for Smart Devices

O tomto dokumente

V tomto dokumente sa popisuje Ascom Unite Axess for Smart Devices aplikácia. Tento dokument je určený pre používateľov aplikácie Unite Axess for Smart Devices.



Ascom (Solution) AG, Gewerbepark Hintermättlistrasse, 5506 MÄGENWIL, Švajčiarsko



Výrobca

Ascom (Švédsko) AB

Grimbodalén 2

SE-417 49 Göteborg

Švédsko

Telefón +46 31 55 94 00

www.ascom.com

Obsah

1	Úvod.....	1
1.1	Upozornenie a poznámky	1
1.2	Ostražitosť a hlásenie incidentov	2
1.3	Zamýšľané použitie/Účel.....	3
1.3.1	Očakávané klinické prínosy	4
2	Nastavenia Unite Axess for Smart Devices.....	5
2.1	Nastavenia v zariadeniach Android	5
2.2	Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS	6
2.3	Ikony.....	6
2.4	Pomoc Unite Axess	7
3	Pripojenie k systému Unite	8
3.1	Zariadenia s Androidom: Prihlásenie/Odhlásenie	8
3.1.1	Imprivata Mobile Device Access pre autentifikáciu	9
3.2	Zariadenia so systémom iOS: Prihlásenie/Odhlásenie.....	10
4	Spracovanie upozornení.....	12
4.1	Ikony upozornení	13
4.2	Prijatie upozornení	15
4.2.1	Spracovanie upozornení na zariadeniach Android	16
4.2.2	Spracovanie upozornení na zariadeniach s iOS	16
4.3	Triedenie upozornení	16
4.4	Filtrovanie upozornení.....	17
4.5	Preposlanie upozornenia	17
4.6	Vymazať upozornenia.....	17
5	Stav prístupnosti.....	18
5.1	Stav dostupnosti na zariadeniach s Androidom	18
5.2	Stav dostupnosti na zariadeniach s iOS	18
6	Varovné správy.....	20
6.1	Spracovanie varovných hlásení	21
7	Nastavenia	23
7.1	Nastavenia v zariadeniach so systémom Android	23
7.2	Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS	24
8	O aplikáciách.....	25
8.1	Unite Axess for Smart Devices.....	25
8.2	Prihlásenie Ascom (len Android)	26
Príloha A	Súvisiace dokumenty.....	27
Príloha B	História dokumentov	28

1 Úvod

Aplikácia Unite Axess for Smart Devices poskytuje upozornenia pre používateľov na ich inteligentných zariadeniach. Aplikácia umožňuje úplnú integráciu so systémom Unite, takže lekári môžu bezpečne, kedykoľvek a kdekoľvek prijímať interaktívne správy o stave pacientov.



Obrázky sú prevzaté zo zariadenia s anglickým užívateľským rozhraním, preto sa jazyk môže líšiť od toho, čo vidíte na obrazovke.

1.1 Upozornenie a poznámky

Prečítajte si, prosím a dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v tomto návode.

VAROVANIE je uvedené na označenie položiek, ktoré môžu priamo alebo nepriamo spôsobiť alebo prispieť k nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok vážne fyzické zranenia alebo poškodenie zdravia ľudí, respektíve poškodenie majetku alebo životného prostredia.

UPOZORNENIE je uvedené na účely odkázania používateľa na potrebu venovať špeciálnu pozornosť bezpečnému a efektívnemu používaniu zariadenia.

POZNÁMKA je uvedená, ak sú k dispozícii dodatočné všeobecné informácie.



Varovanie

V závislosti od pripojených zdravotníckych zariadení môže byť výrobok použitý na primárne (DAS / CDAS) alebo sekundárne (DIS) oznamovanie alarmov. Prítomnosť jedného zdravotníckeho zariadenia, ktoré nie je schopné podporovať DAS/CDAS, robí celý systém sekundárnym. V tomto prípade zdravotnícka organizácia zaobchádza s celým systémom ako s sekundárnym a používateľom sa nariaďuje, aby sa nespoliehali len na riešenie oznamovania alarmov.




Varovanie

Oznámenie o upozornení možno nahradiť novým prichádzajúcim oznámením o upozornení, ak sa v krátkom časovom intervale prijme niekoľko upozornení. Uistite sa, že reagujete na zamýšľané upozornenie.



Varovanie

Upozornenie otvorené v zobrazení na celú obrazovku môže byť čiastočne pokryté prichádzajúcim alebo opakovaným upozornením. Obe upozornenia budú mať viditeľné tlačidlá možností, ktoré umožnia priamu interakciu. Upozorňujeme, že tlačidlá sú umiestnené v dolnej časti každého upozornenia.

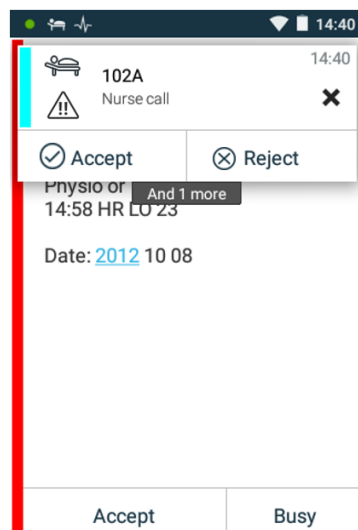

Varovanie

Nepoužívajte profily zaostrenia na zariadeniach so systémom iOS

Ak sa používajú profily zaostrenia, existuje riziko, že oznámenia o prichádzajúcich upozorneniach budú potlačené.



Varovanie

Nevypínajte oznámenia z aplikácie Axxess for Smart Devices na zariadeniach so systémom iOS

Nevypínajte oznámenia z aplikácie Axxess for Smart Devices na zariadeniach so systémom iOS. Ak sú oznámenia z aplikácie vypnuté, nové upozornenia môžu chýbať.



Upozornenie

Rozpoznaniu upozornení a výstrah je možné zabrániť, ak je hlasitosť indikácií nižšia ako hladiny okolitého zvuku.

Informácie o výstražných zvukoch

Úrovně zvuku oznámení můžete upraviť v nastavení vašeho zariadenia. Predvolené zvukové súbory zvukových upozornení boli navrhnuté tak, aby boli vhodné na účely oznamovania výstrah.

1.2 Ostražitosť a hlásenie incidentov

Koncoví používatelia alebo predajcovia/distribútori musia písomne informovať spoločnosť Ascom do piatich (5) pracovných dní od zistenia udalosti o všetkých incidentoch súvisiacich s produktmi. Sťažnosťou v tomto prípade môže byť ústne alebo písomné vyhlásenie alebo naznačenie, že výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa identity, kvality, životnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, účinnosti alebo výkonu zariadenia.

POZNÁMKA: Akýkoľvek závažný incident, t. j. akýkoľvek incident, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo mohol viesť k smrti pacienta, používateľa alebo inej osoby, dočasnému alebo trvalému vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby alebo vážnemu ohrozeniu verejného zdravia, ku ktorému došlo v súvislosti s produktom, by sa malo oznámiť výrobcovi, prostredníctvom e-mailu vigilance@ascom.com, adresovanej príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ a/alebo pacient usadený.

V prípade akéhokoľvek závažného incidentu, alebo ak dôjde k vnímanej poruche produktu, ktorá by mohla prispieť k smrti alebo zraneniu, alebo ak zákazník vyjadrí obavy o bezpečnosť pacientov, koncoví používatelia alebo predajcovia / distribútori to oznámia spoločnosti Ascom čo najskôr s použitím maximálneho úsilia na ústne poskytnutie takéhoto oznámenia (Centrum technickej pomoci Ascom) do dvadsiatich štyroch (24) hodín od získania vedomostí, alebo od prijatia takejto sťažnosti alebo od oboznámenia sa s takýmto problémom s produktom. Po ústnom oznámení nasleduje písomné (e-mailové) potvrdenie do 24 hodín vigilance@ascom.com.

Koncoví používatelia alebo predajcovia/distribútori poskytnú dostatočné informácie, ktoré spoločnosti Ascom umožnia splniť si svoje regulačné oznamovacie povinnosti týkajúce sa incidentov a udalostí, ktoré musia byť nahlásené a zaregistrované podľa vnútroštátnych predpisov v rámci územia. Ak sa udalosť považuje za incident, ktorý sa musí nahlásiť príslušným vnútroštátnym orgánom, Ascom pripraví a predloží zostavu.

Ak akýkoľvek regulačný orgán alebo príslušný orgán poskytne písomné oznámenie koncovému používateľovi alebo predajcovi / distribútorovi v súvislosti s otázkami alebo vyšetrovaniami akéhokoľvek produktu alebo vykonaním inšpekcie alebo auditu zariadení používaných na ukladanie produktov alebo požiadaním o akékoľvek informácie týkajúce sa akéhokoľvek produktu, potom koncový používateľ alebo predajca / distribútor to bezodkladne oznámi spoločnosti Ascom.

1.3 Zamýšľané použitie/Účel

Táto kapitola popisuje zamýšľané použitie/účel Unite Axxess for Smart Devices.

Účel používania (všeobecne)

Axxess for Smart Devices je určený na elektronické signalizačné oznámenia (upozornenia) a iných údajov pochádzajúcich z pripojených zdravotníckych prístrojov cez zdravotníckych pomôcok Ascomu do zdravotníckych pracovníkov s cieľom pomôcť pri monitorovaní pacientov.

Produkt Axxess for Smart Devices je určený na použitie ako sekundárny prostriedok na zobrazovanie upozornení, t. j. signalizačných oznámení a iných údajov o zdravotníckych pomôckach, a nie je určený na použitie ako náhrada priameho prezerania údajov na pripojených zariadeniach.

Produkt Axxess for Smart Device nie je určený na použitie v súvislosti s aktívnym monitorovaním pacientov, na ktoré sa treba spoliehať pri rozhodovaní o okamžitom klinickom zákroku alebo na diagnostické účely. Okrem toho produkt Axxess for Smart Devices nie je určený na ovládanie alebo zmenu funkcií alebo parametrov pripojených zdravotníckych zariadení.

Produkt Axxess for Smart Devices je určený na použitie pre profesionálnych používateľov a spolieha sa na správne používanie a prevádzku komunikačnej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení, a používaných zobrazovacích zariadení.

Komponenty Axxess for Smart Devices sa inštalujú na špecifikovanom hardvéri a operačnom systéme a spoliehajú sa na zdravotnícke zariadenia, aby poskytovali stanovenú IT sieťovú a komunikačnú infraštruktúru.

Zamýšľaný účel (EÚ/EFTA/SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

Zamýšľané použitie Ascom Unite Connect for Clinical Systems je poskytnúť rozhranie s klinickými systémami pre preposielanie informácií, vrátane životných fyziologických parametrov, spojených s príslušnými udalosťami na určené zobrazovacie zariadenie(a) pre podporu monitorovania pacientov. Zobrazovacie zariadenie(a) poskytuje(ú) vizuálny a/alebo zvukový a/alebo vibračný mechanizmus po prijatí upozornenia(i).

Connect for Clinical Systems aplikuje konfigurovateľné spracovanie a filtráciu upozornení na udalosti, znižuje ich frekvenciu a počet, aby prezentoval klinicky vykonateľné informácie pracovníkom v zdravotníctve.

Pre medicínske alarmy takmer v reálnom čase je Connect for Clinical Systems určený na použitie ako sekundárny alarm, čo je paralelný, redundantný mechanizmus preposielania na informovanie zdravotníckych pracovníkov o konkrétnych udalostiach súvisiacich s medicínou.

Pre vybrané zdrojové zariadenia a systémy funguje Connect for Clinical Systems ako integrátor a komunikátor distribuovaného poplachového systému (DAS/CDAS), aby spoľahlivo posielal a doručoval fyziologické a technické poplachy zdravotníckym pracovníkom na určených zobrazovacích zariadeniach a do špecifikovaných systémov.

Connect for Clinical Systems je určený pre použitie so špecifikovanými zdravotníckymi zariadeniami zdravotníckymi pracovníkmi všade, kde je potreba monitorovania fyziologických parametrov pacientov. Počet a stav pacientov je určený pripojenými zdravotníckymi zariadeniami.

Connect for Clinical Systems je nainštalovaný na špecifikovaných IT systémoch a spolieha sa na správne používanie a prevádzku pripojených medicínskych zariadení, systémov, zobrazovacích zariadení a medicínskej IT siete.

Connect for Clinical Systems sa používa v zdravotníckych zariadeniach, v jednotkách kritickej starostlivosti, subintenzívnych jednotkách, všeobecných oddeleniach a iných oddeleniach a v závislosti od konkrétnej konfigurácie aj mimo zdravotníckeho zariadenia.



1.3.1 Očakávané klinické prínosy

- Znižuje riziko chýbajúcich kritických upozornení pacienta.
- Pomáha znižovať únavu z alarmov znížením počtu výstražných správ pacienta, ktoré prijímajú opatrovatelia.
- Pomáha zlepšovať čas odozvy na kritické udalosti pacientov
- Prispieva k efektívnosti pracovných postupov tým, že zabraňuje zbytočným prerušeniam práce.
- Poskytuje používateľom informácie o stave systému takmer v reálnom čase ¹

1. POZNÁMKA! Tento nárok možno uplatniť LEN pre systém triedy IIb (Unite Connect pre klinické systémy s Unite View a/alebo Unite Axess pre inteligentné zariadenia)


2 Nastavenia Unite Axess for Smart Devices

Štandardná verzia aplikácie Unite Axess for Smart Devices obsahuje nasledovné:

- Stránka **Upozornenie**: Toto je predvolená stránka pri prihlásení.
- **Menu**: Ak chcete získať prístup k menu, kliknite na ikonu **Menu** ☰.


2.1 Nastavenia v zariadeniach Android

Obrázok 1. Štandardné rozloženie

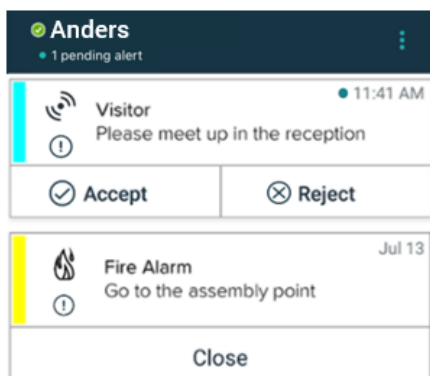

Ak máte okrem aplikácie prístup aspoň k jednej aplikácii Unite Axess for Smart Devices, v spodnej časti obrazovky sa aktivuje **navigačný panel** pre rýchlu navigáciu.

Obrázok 2. Spodná navigačná lišta

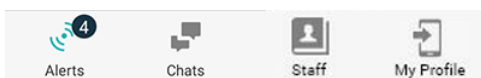


Súčasťou môže byť aj strana **Aplikácie**. Aby ste sa dostali na stránku **Aplikácie**, kliknite na ikonu **Aplikácie** ☐. Do **Menu** sa potom dostane zo stránky **Aplikácie**.

Obrázok 3. Verzia aplikácií




2.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS

Obrázok 4. Usporiadanie so zapnutým stavom dostupnosti

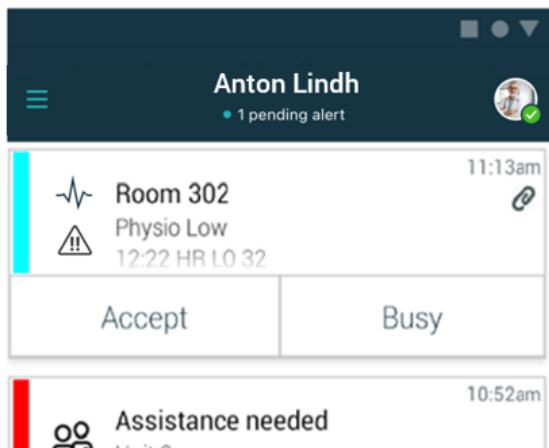

Ak je systém nakonfigurovaný bez stavu dostupnosti, indikácie hornej lišty sa zmenia.

Obrázok 5. Usporiadanie s vypnutým stavom dostupnosti

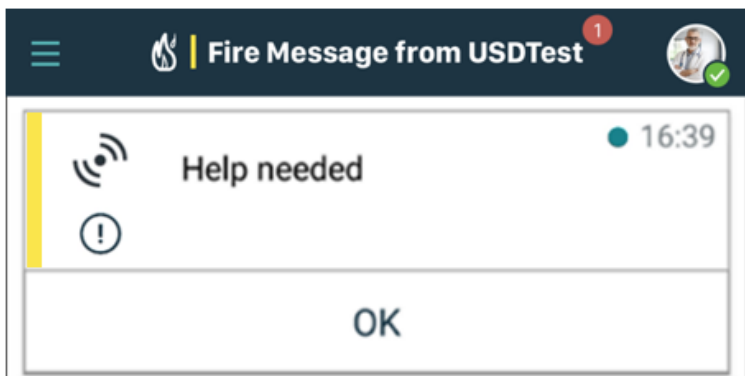

Súčasťou môže byť aj strana **Aplikácie**. Aby ste sa dostali na stránku **Aplikácie**, kliknite na ikonu **Aplikácie** . V závislosti od vašej implementácie sa potom dostanete na stránku **Menu** alebo na stránku **Služby** zo stránky **Aplikácie**.

Obrázok 6. Verzia aplikácií



2.3 Ikony

Tu môžete vidieť význam každej ikony v aplikácii Unite Axxess for Smart Devices:



Ikona menu



Čas, kedy bolo upozornenie prijaté. Modrá bodka pred časom označuje, že upozornenie je nespracované.



Pripojený prídavný obsah



Ikona aplikácie (voliteľná)



Ikona Upozornenia s počtom nespracovaných upozornení. Len Android.



Ikona Môj profil (prístupný po kliknutí na **Viac**, ak je v navigačnej lište k dispozícii viac ako štyri vstupy). Len Android. Prístup k **Môj profil** môžete takisto získať aj kliknutím na svoje používateľské meno.



Celkový počet nespracovaných upozornení zobrazených v hornej lište, keď je stav dostupnosti v systéme povolený.



Celkový počet nespracovaných upozornení zobrazených v hornej lište, keď stav dostupnosti nie je v systéme povolený.



Prijmite ikonu upozornenia.



Odmietnite ikonu upozornenia. Používa sa aj pre možnosť **Vrátiť späť**, to znamená, keď máte možnosť vziať späť vašu odpoveď **Prijat'**.



Nízka priorita



Stredná priorita



Vysoká priorita

2.4 Pomoc Unite Axess

Aplikácia Unite Axess for Smart Devices obsahuje stránku s návodom na používanie funkcií v aplikácii.

1. Ak chcete otvoriť text pomocníka, kliknite na ikonu **Menu**
2. Potom kliknite na tlačidlo **Pomoc**.
3. Ak sa chcete vrátiť na stránku **Menu**, kliknite na tlačidlo **Späť** alebo ikonu **Zavrieť**

3 Pripojenie k systému Unite

Pre zariadenia s Androidom sa pripojíte k systému Unite v aplikácii **Ascom Login**.

U zariadení iOS, ak sa chcete pripojiť k systému Unite, potrebujete URL adresu na server Unite Axess (v systéme Android je tento odkaz nakonfigurovaný v Ascom Login). Adresa URL môže byť poskytnutá ako odkaz, zadaná ručne alebo poskytnutá prostredníctvom lokálneho DNS.

Ak je poskytnutá ako odkaz, používateľ jednoducho klikne na odkaz na inteligentnom zariadení. Ak je používateľ už prihlásený na inom mieste, než je uvedené v odkaze, účet sa najskôr odhlási a potom sa aplikácia pokúsi pripojiť na adresu URL uvedenú v odkaze. Ak sa nájde stránka, zobrazí sa prihlasovacie okno, ak sa nenájde, používateľ dostane chybové hlásenie a má možnosť zadať adresu URL na stránku manuálne.

Ak potrebujete adresu URL zadať ručne, adresa URL obsahuje nasledovné:

- Verejná adresa FQDN alebo adresa IP na prístup k publikovanej webovej stránke, ktorá je hostiteľom aplikácie Unite Axess for Smart Devices (napríklad `uniteaxess.company.com`)
- Virtuálna cesta adresára definovaná počas inštalácie (napríklad „Axess“)

Adresa URL servera je napríklad v nasledujúcom formáte: `https://uniteaxess.<companyname>.com/Axess`.

Ak je poskytované prostredníctvom miestneho DNS a ak aplikácia Unite Axess for Smart Devices pri spustení nemá predtým použitú stránku, aplikácia sa automaticky pokúsi vyhľadať tento názov hostiteľa v DNS a po prijatí odpovede sa použije správna adresa URL.

3.1 Zariadenia s Androidom: Prihlásenie/Odhlásenie

Prihlasovanie a odhlasovanie zo zariadenia so systémom Android sa vykonáva prostredníctvom aplikácie Ascom Login, ktorá je bežným prihlasovacím rozhraním pre aplikácie Ascom pre Android. To znamená, že potrebujete zadať vaše prihlasovacie údaje pre prístup k aplikáciám na vašom zariadení. Pri odhlásení ukončíte všetky aplikácie podporované Ascom Login a zoznam upozornení sa z bezpečnostných dôvodov automaticky odstráni.




Pri prvom spustení aplikácie, aby ste mohli využívať všetky funkcie poskytované touto aplikáciou, budete vyzvaní na udelenie určitých povolení Unite Axess for Smart Devices. Unite Axess for Smart Devices spustí kontrolu pri každom použití aplikácie, takže je povinné povoliť tieto povolenia a nikdy ich nedeaktivovať pri používaní Unite Axess for Smart Devices:

- Povolenie Unite Axess for Smart Devices prístupu ku kontaktom
- Povolenie Unite Axess for Smart Devices uskutočňovať a spravovať telefonické hovory
- Povolenie Unite Axess for Smart Devices prístupu k fotografiám a médiám v zariadení
- Nastavenia prekrytia > Povolit' zobrazenie v iných aplikáciách
- Nastavenia oznámení > Povolit'
- Optimalizácia využitia batérie > Všetky aplikácie > Unite Axess > Neoptimalizovať

Okrem toho, ak inovujete z verzie 6.0.1 na 6.2, musíte sa znova prihlásiť.

Prihlásenie

1. Na vašom zariadení kliknite na ikonu aplikácie **Ascom Login**  alebo ikonu **Ascom Axess**  ktorá vás presmeruje na aplikáciu Ascom Login.
2. Zadajte vaše **meno používateľa** a **heslo**.

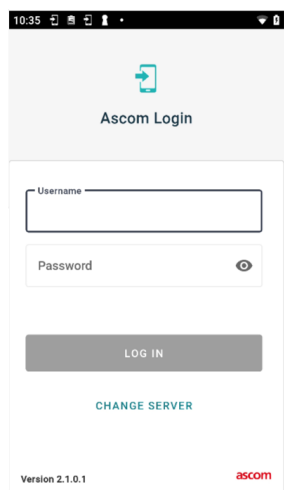

3. Kliknite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Prihlásenie pomocou iných autentifikačných služieb

Vaša organizácia môže používať aj iné autentifikačné služby, napríklad PingFederate alebo OpenID. V tomto prípade môžete byť pri prihlásení presmerovaní na túto overovaciu službu, kde musíte použiť svoj účet organizácie.

Uistite sa, že čas vášho zariadenia je rovnaký ako čas servera, inak sa možno nebudete môcť prihlásiť.

Odhlásenie

1. Klepnite na ikonu **Môj profil**  na spodnej navigačnej lište alebo na ikonu aplikácie **Ascom Login** .
2. Kliknite na tlačidlo **Odhlásenie**.

Po odhlásení sa všetky upozornenia a správy automaticky odstránia z inteligentného zariadenia z bezpečnostných dôvodov.

3.1.1 Imprivata Mobile Device Access pre autentifikáciu

Imprivata Mobile Device Access je riešenie mobilnej autentifikácie zdravotnej starostlivosti, ktoré umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku klinickým mobilným zariadeniam a aplikáciám. Používatelia môžu pristupovať k zdieľaným klinickým mobilným zariadeniam a potom sa môžu do svojich aplikácií prihlásiť jediným prihlásením (SSO).

Ak vaša organizácia používa na autentifikáciu Imprivata Mobile Device Access, môžete sa prihlásiť do všetkých aplikácií Ascom a iných klinických aplikácií tretích strán pomocou jediného prihlásenia, a to buď manuálne (pomocou vašich prihlasovacích údajov), alebo jednoduchým klepnutím na dodaný odznak blízkosti vašou organizáciou.



Na zabezpečenie integrácie s Imprivata Single Sign-On musíte mať na zariadení nainštalovanú aplikáciu Ascom Login (Ascom Myco 3 alebo iné podporované inteligentné zariadenie). Integrácia Imprivata žiadnym spôsobom nevylučuje použitie prihlásenia Ascom, ktoré je povinné pre fungovanie iných aplikácií Ascom.

Prihlásiť sa pomocou odznaku

1. Ak chcete zobraziť uzamknutú obrazovku **Imprivata** zapnite obrazovku na inteligentnom zariadení.
2. Kliknite na svoj odznak do oblasti detekcie NFC na zadnej strane zariadenia.

3. Ak je to potrebné, zadajte kód PIN a potom kliknite na položku **Potvrdiť**.

Každý predchádzajúci používateľ, ktorý je stále prihlásený do zariadenia, sa automaticky odhlási a potom sa prihlásite vy.

Keď ste prihlásení a ak chcete zamknúť svoje inteligentné zariadenie, jednoducho znova kliknite na odznak do oblasti detekcie NFC. Potom sa zobrazí obrazovka uzamknutia **Imprivata**.

Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov používateľa

1. Ak chcete zobraziť uzamknutú obrazovku **Imprivata** zapnite obrazovku na inteligentnom zariadení.
2. Na obrazovke uzamknutia **Imprivata** kliknite na ikonu **Ručné prihlásenie**,  zadajte svoje **Meno používateľa** a **Heslo** a potom klepnite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Každý predchádzajúci používateľ, ktorý je stále prihlásený do zariadenia, sa automaticky odhlási a potom sa prihlásite vy.

Ak je prihlásenie úspešné, vaše inteligentné zariadenie sa odomkne a budete prihlásení do všetkých klinických aplikácií. Ak sa nemôžete prihlásiť alebo sa zobrazí výzva na zadanie prepojenia Unite Axess Server, obráťte sa na správcu systému.

Odhlásenie

1. Na obrazovke uzamknutia **Imprivata** kliknite na ikonu **Odhlásenie** .
2. V potvrdzovacej správe kliknite na tlačidlo **OK**.

3.2 Zariadenia so systémom iOS: Prihlásenie/Odhlásenie

Ak vaša implementácia prichádza s ďalšími podporovanými aplikáciami Ascom, Unite Axess for Smart Devices poskytuje jednotné prihlásenie do akýchkoľvek iných aplikácií Unite, ako je napríklad Unite Collaborate — Pacienti a chaty.




Po výbere platnej funkcie Unite Axess pre server inteligentných zariadení a pri prvom otvorení aplikácie musíte udeliť nasledujúce povolenia, aby ste sa mohli prihlásiť:

- Povolíť oznámenia
- Povolíť kritické upozornenia
- Povolíť časovo citlivé upozornenia
- Zamerajte sa

Unite Axess for Smart Devices spustí kontrolu pri každom používaní aplikácie, takže je povinné povoliť tieto povolenia a nikdy ich nedeaktivovať pri používaní Unite Axess for Smart Devices:

Prihlásenie

1. Na zariadení kliknite na ikonu aplikácie **Unite Axess** . Otvorí sa prihlasovacie okno.
2. Zadajte vaše **meno používateľa** a **heslo**.

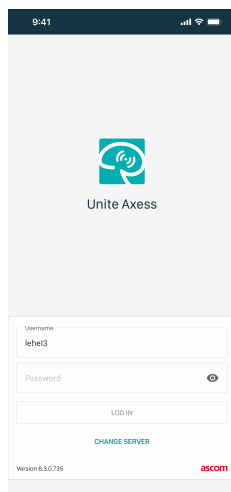

3. Kliknite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Prihlásenie pomocou iných autentifikačných služieb

Keď sa prihlásite pomocou autentifikácie OpenID Connect, zobrazí sa kontextové okno s povolením, ktoré vás upozorní, že sa chystáte otvoriť webovú stránku, ktorá bude zdieľať informácie o vás. Ak chcete pokračovať s prihlásením, musíte vybrať položku **Pokračovať**.

Odhlásenie

1. Kliknite na ikonu **Menu** . Ak máte voliteľnú stránku **Aplikácie**, musíte najprv kliknúť na ikonu **Aplikácie** .
2. Kliknite na tlačidlo **Odhlásenie**.

Keď sa odhlásite pomocou autentifikácie OpenID Connect, zobrazí sa kontextové okno s povolením, ktoré vás upozorní, že sa chystáte otvoriť webovú stránku, ktorá bude zdieľať informácie o vás. Ak chcete pokračovať s odhlásením, musíte vybrať položku **Pokračovať**.


Po odhlásení sa všetky upozornenia a správy automaticky odstránia z inteligentného zariadenia z bezpečnostných dôvodov.

4 Spracovanie upozornení

Táto časť popisuje, ako spracovať upozornenia v Unite Axess for Smart Devices.

Prehľad upozornenia

Upozornenia môžu byť rôznych priorít, kategórií a typov. Farebná lišta zobrazuje prioritu alebo kategóriu upozornenia, pričom ikona upozornenia zobrazuje typ upozornenia.



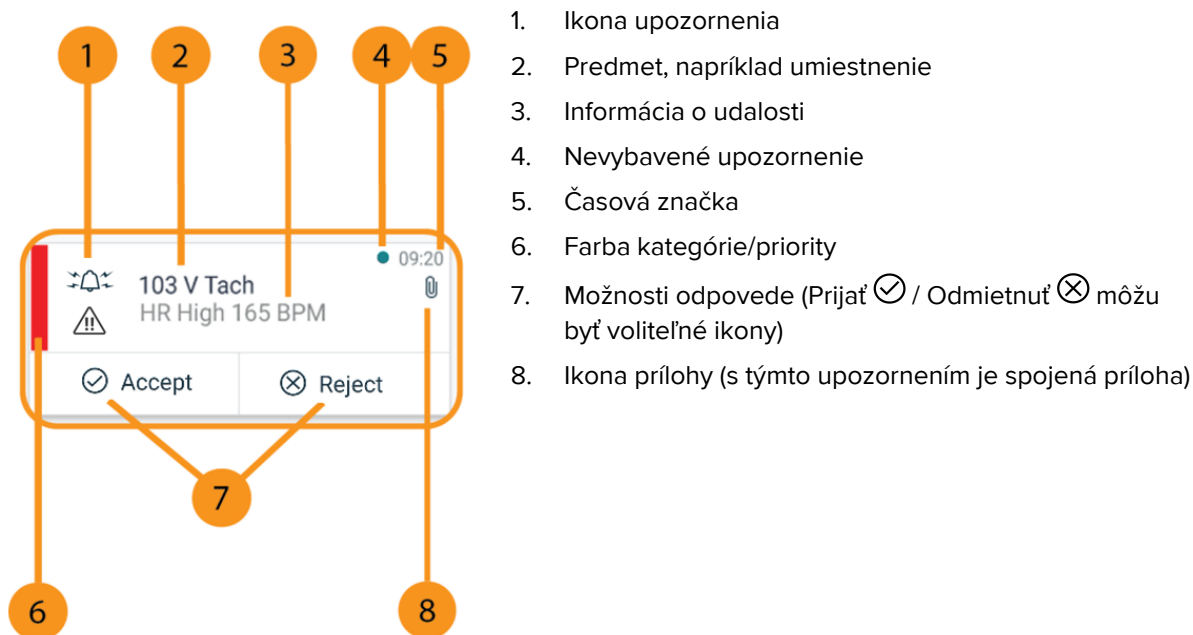


Farby upozornení

Farby je možné použiť na zobrazenie kategórií alebo priorít upozornení. Farba upozornenia je zobrazená farebnou lištou naľavo do každého upozornenia.



Použitie farieb závisí od konfigurácie a môže sa líšiť podľa nastavení systému.

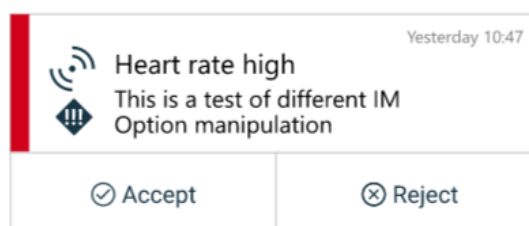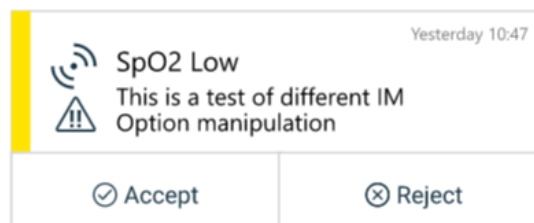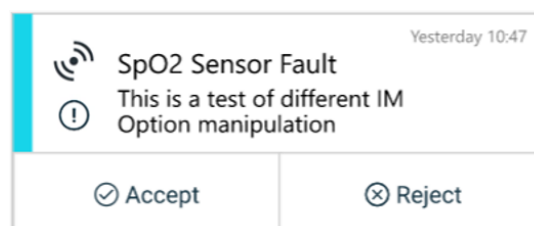Farba kategórie/priority: Červená**Priorita:** Vysoká**Farba kategórie/priority:** Žltá**Priorita:** Stredná**Farba kategórie/priority:** Azúrová**Priorita:** Nízka

4.1 Ikony upozornení

Ikony vo výstrahách označujú kategóriu výstrahy, napríklad privolanie sestry alebo laboratórny výsledok.

Nasledujúce ikony sú k dispozícii v Ascom Myco:

Ikona	Popis
	Anesteziologická dodacia jednotka
	Asistenčný hovor
	Filtrácia krvi
	Plynový analyzátor krvi
	Kategória A
	Kategória B

	Kategória C
	Kategória D
	Kategória E
CODE A	Kód A
CODE B	Kód B
	Núdzový hovor
	Porucha
	Požiar
	Srdcovo-pľúcny stroj
	Inkubátor
	Infúzna pumpa
	Výsledok z laboratória
	Hovor z toalety
	Lekársky hovor
	Monitorovanie

	Volanie sestry
	Servisný hovor
	Úloha
	Technické upozornenie
	Ventilátor
	Výsledok z röntgenu

4.2 Prijatie upozornení

Preddefinovaným zvukom upozornenia budete upozornený na prichádzajúce upozornenie. Inteligentné zariadenie zobrazí upozornenie na stránke **Upozornenia**.



V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušit!**

Ak prijmete upozornenie s možnosťami odpovede, kliknite na voľbu odpovede (napríklad **Prijat'** alebo **Odmietnuť**). Po odpovedaní sa upozornenie aktualizuje správou s odpoveďou. Zoznam upozornení je predvolene zoradený v chronologickom poradí s najnovšími upozorneniami zobrazenými v hornej časti. Všetky prijaté a neodstránené upozornenia sa zobrazia v zozname upozornení. V prípade, že vaša odpoveď na upozornenie nebude odoslaná späť na server z dôvodu komunikačnej/systémovej chyby, budete o tom informovaní.

Na uzamknutom zariadení so systémom Android je upozornenie označené zvukom a vibráciami a vizuálnym oznámením na displeji. **Na uzamknutom zariadení so systémom iOS** sa zobrazí nové upozornenie, ale bez farby kategórie/priority.


Na odomknutom zariadení (Android a iOS), sa v hornej časti obrazovky zobrazia oznámenia o upozornení. Ak v krátkom čase príde niekoľko upozornení, najnovšie sa zobrazí nad ostatnými.

Pri prijatí upozornenia potiahnite prstom nahor alebo na ktorúkoľvek stranu upozornenia, prípadne ho skryte klepnutím na ikonu.

Kliknutím na oznámenie otvoríte upozornenie. V závislosti od vašej implementácie a nastavení upozornenia, ktoré dostávate, môžete z upozornenia spustiť aj rôzne ďalšie funkcie, ako je spustenie prehliadača, spustenie hovoru alebo spustenie aplikácií tretích strán.

4.2.1 Spracovanie upozornení na zariadeniach Android

Otáčanie označuje, že upozornenia sa aktualizujú. Pri aktualizácii prostredníctvom kanála DECT (len zariadenia Ascom Myco 3) to môže trvať niekoľko sekúnd.

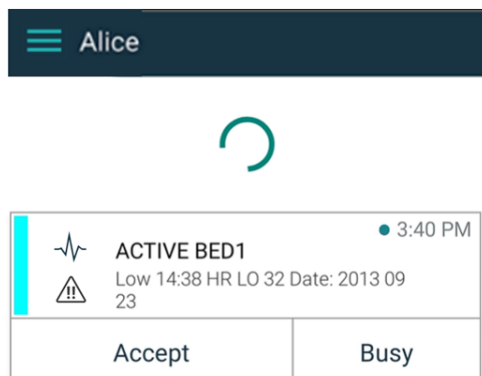

Počet nespracovaných upozornení sa zobrazí na spodnej navigačnej lište.

Ak chcete prečítať upozornenie na celej obrazovke, kliknite na text správy. To return to the normal screen, tap the **Close** icon  alebo voľbu **Zatvoriť** zobrazenú pod textom správy pri možnostiach výstrah bez odpovede a pri výstrahách, na ktoré ste odpovedali.

V predvolenom nastavení sú upozornenia zoradené podľa času s najnovším upozornením v hornej časti.

4.2.2 Spracovanie upozornení na zariadeniach s iOS

Na hornej lište sa zobrazí počet nespracovaných upozornení.

Ak chcete prečítať upozornenie na celej obrazovke, kliknite na text správy. To return to the normal screen, tap the **Close** icon  alebo voľbu **Zatvoriť** zobrazenú pod textom správy pri možnostiach výstrah bez odpovede a pri výstrahách, na ktoré ste odpovedali.

V predvolenom nastavení sú upozornenia zoradené podľa času s najnovším upozornením v hornej časti.

4.3 Triedenie upozornení

Zoznam upozornení je predvolene zoradený v chronologickom poradí s najnovšími upozorneniami zobrazenými v hornej časti. Malá ikona nad položkou **Triedenie** na spodku stránky **Upozornenia** zobrazuje, ako sú upozornenia momentálne zoradené.

1. Na stránke **Upozornenia** kliknite na ikonu **Triedenie** .
2. Zvoľte ako chcete triediť upozornenia. Upozornenia sa zobrazia zodpovedajúcim spôsobom.



Upozornenia sú zoradené podľa času s najnovším na vrchu.



Upozornenia sú zoradené podľa priority, pričom na vrchu sa zobrazuje upozornenie s najvyššou prioritou. Upozornenia s rovnakou prioritou sú zoradené podľa času, pričom najnovšie sú na vrchu.



Upozornenia sú zoskupené podľa kategórie.

4.4 Filtrovanie upozornení

1. Kliknite na ikonu **Filter**  na stránke **Upozornenia**.
2. Vyberte spôsob, akým chcete filtrovať výstrahy výberom možnosti v jednom zo zoznamov.



V zozname **Priorita** môžete filtrovať pomocou **Alarm**, **Vysoký**, **Normálny** a **Nízky**.



V zozname **Stav odpovede** môžete filtrovať podľa **Čakanie na odpoveď** a **Zodpovedané**.




V zozname **Kategória** môžete filtrovať všetky kategórie prístupné vo vašom zozname upozornení, napr. **Kódové volanie**, **Laboratórium** a **Monitorovanie**.

Po výbere voľby vybledne pozadie stránky **Upozornenia** a zobrazia sa iba vyfiltrované upozornenia.

3. Ak chcete odstrániť filter, kliknite na ikonu **Zrušenie** .

4.5 Preposlanie upozornenia

Klepnutím na upozornenie otvoríte stránku s podrobnosťami upozornenia.

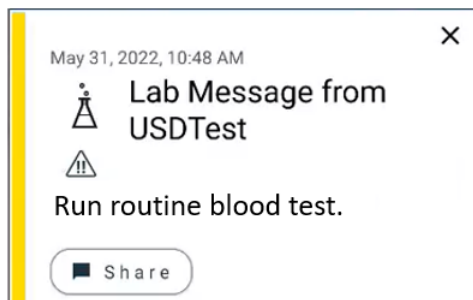

Kliknite na tlačidlo **Zdieľať**. Vygeneruje sa snímka obrazovky so stránkou s podrobnosťami o upozornení. Tento obrázok môžete odoslať ako prílohu prostredníctvom aplikácie *Unite Collaborate Chat*.

4.6 Vymazať upozornenia

1. Dotknite sa a držte upozornenie, ktoré chcete vymazať. Zobrazí sa podriadené menu.
2. Kliknutím na položku **Odstrániť upozornenie** odstránite príslušné upozornenie alebo **Odstrániť všetky upozornenia** a odstránite všetky upozornenia.
3. Vo varovnom hlásení kliknite na **Odstrániť** a tým to potvrdíte.

5 Stav prístupnosti

Ak je na to systém konfigurovaný, používatelia môžu zvoliť svoj stav prístupnosti zo zariadenia. Tento stav prístupnosti môže systém použiť napríklad, ak sa rozhoduje, na ktoré zariadenia sa odošlú upozornenia.

5.1 Stav dostupnosti na zariadeniach s Androidom

Stav dostupnosti je uvedený na hornej lište aplikácie. Váš stav dostupnosti môžete zmeniť manuálne na **Zaneprázdnený**, **Nerušiť** alebo **Dostupný** v časti **Môj Profil**. Do časti **Môj Profil** sa môžete dostať buď z spodnej navigačnej lišty alebo z aplikácie Ascom Login.

Zobrazenie stavu prístupnosti

Na zobrazenie stavu prístupnosti sa používajú nasledovné ikony:



Prístupný



Obsadené



Nerušiť

Zmena stavu

V časti **Môj profil** kliknite  na ikonu a vyberte **Dostupný**, **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.



Alice Martinez

@mobile3

Available 



V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.

5.2 Stav dostupnosti na zariadeniach s iOS

Stav dostupnosti je uvedený na hornej lište aplikácie.

Zobrazenie stavu prístupnosti



Prístupný



Obsadené



Nerušit



Odhlásený/Offline

Zmena stavu

Stav dostupnosti môžete zmeniť iba v prípade, že máte na rovnakom zariadení nainštalovaný systém Unite Collaborate iOS, inak tento postup nemáte k dispozícii.

1. V zobrazení **Upozornenie** kliknite na hornú lištu. Ste presmerovaní na výber stavu Unite Collaborate iOS.



2. V menu **Nastaviť svoj stav** v aplikácii Unite Collaborate iOS kliknite a vyberte možnosť **Dostupný**, **Zaneprázdnený** alebo **Nerušit**, alebo kliknite na položku **Odhlásiť sa**.
3. Po dokončení budete presmerovaní späť do aplikácie Unite Axess for Smart Devices.




V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušit**.


6 Varovné správy

Tu sú uvedené príklady varovných správ, ktoré sa môžu zobraziť na zariadení. Ak chcete zobraziť celú varovnú správu na odomknutom zariadení, kliknite na varovné oznámenie. S možnou výnimkou strateného sieťového spojenia riešenie všetkých varovaní obvykle vyžaduje pomoc správcu.

Obrázok 7. Oznámenie o chybe odosielania správ v zariadeniach s Androidom

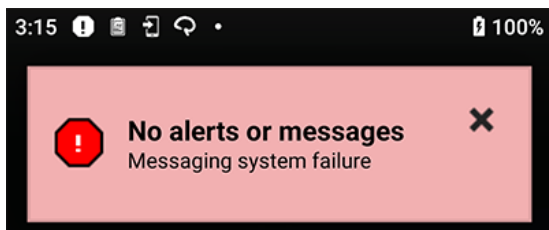


Obrázok 8. Oznámenie o chybe odosielania správ v zariadeniach s iOS

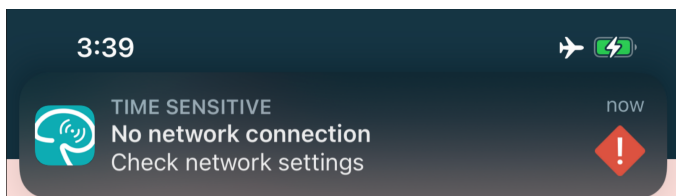


Ak je aplikácia Unite Axxess for Smart Devicespoužitá v testovacom prostredí, v zariadení sa zobrazí varovanie.

Obrázok 9.

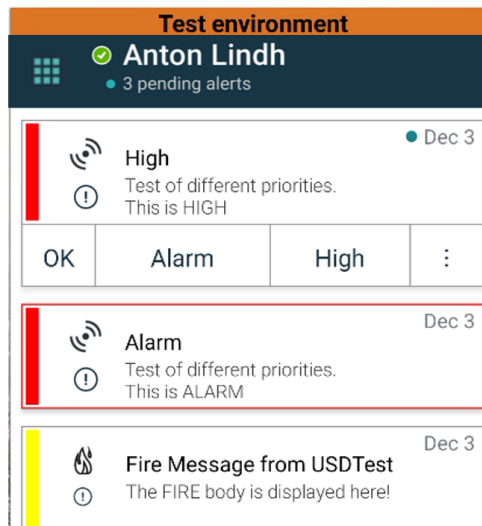


V závislosti od pripojeného zdrojového zariadenia, najmä v prípade systému CDAS/DAS, sa vo vašom zariadení môže zobraziť upozornenie na prekrytie označujúce stratu pripojenia k jednému alebo viacerým zdrojom alarmu. Kliknutím na *Ďalšie informácie* si prečítajte ďalšie podrobnosti o varovaní.

Obrázok 10. Stratené pripojenie k zdroju alarmu (Android)

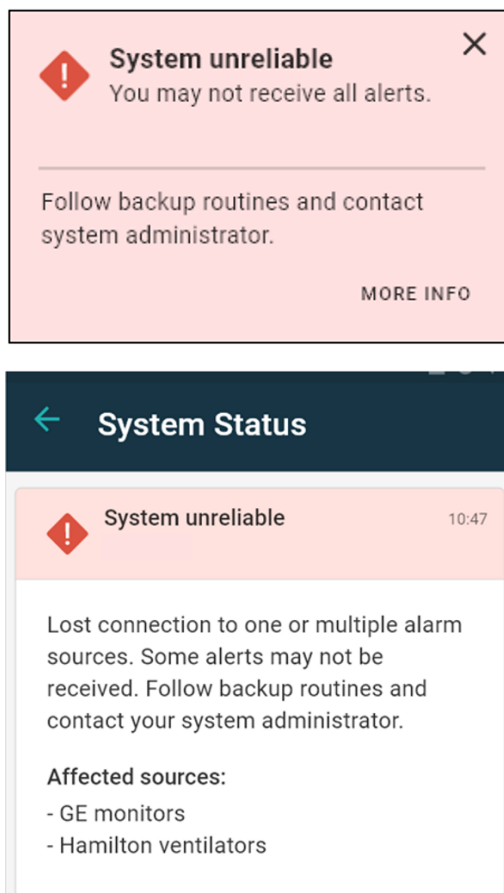

Obrázok 11. Stratené pripojenie k zdroju alarmu (iOS)

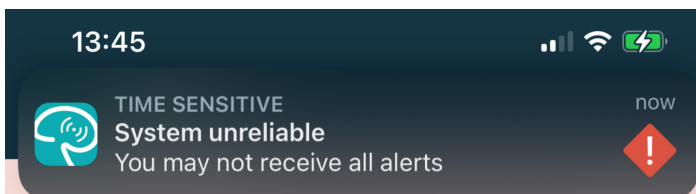

6.1 Spracovanie varovných hlásení

V nasledujúcej tabuľke sú popísané činnosti, ktoré sú k dispozícii na spracovanie varovných hlásení zobrazených vo vašom zariadení.

Varovné hlásenie	Popis	Akcia
Systém nespoľahlivý. Možno nebudete dostávať všetky upozornenia	Pripojenie k zdravotníckym zariadeniam nie je plne funkčné. V závislosti od hlavnej príčiny môžu byť niektoré upozornenia stále distribuované podľa očakávania.	Postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.

Upozornenia nie je možné doručiť Žiadni pridelení	Priradenia neboli nastavené.	Priradte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. Ak problém pretrváva, postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.
Chýbajúce indikátory stavu systému Jedno alebo viac zariadení nie je dostupných	Nie je možné dosiahnuť jediná chybnú bezpečnosť pri indikácii stavu systému.	• Skontrolujte, či Digistat Smart Central beží na vyhradených pracovných staniciach • Skontrolujte, či je svetelná veža pripojená • Skontrolujte, či prijímače stavu nakonfigurované v Unite Assign sú stále prihlásené do svojich zariadení.
Nevybavené upozornenie Nepodarilo sa doručiť prideleným zamestnancom	Upozornenie nebolo nikomu distribuované.	• Priradte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. • Skontrolujte, či všetky priradené osoby sú stále prihlásené do svojich zariadení. Ak problém pretrváva, postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.
Nevybavené upozornenie Odmietnuté všetkými pridelenými	Upozornenie bolo distribuované aspoň jednému príjemcovi, ale nikto ho neprijal.	• Priradte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. • Skontrolujte, či všetky priradené osoby sú stále prihlásené do svojich zariadení.
Systém nespoľahlivý Systém nemusí fungovať podľa očakávania	Chyba konfigurácie v systéme zabraňuje distribúcii upozornení z pripojených zdravotníckych zariadení podľa očakávania. Upozornenia z iných systémov, napríklad volanie sestry, sa môžu stále distribuovať.	Postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.


7 Nastavenia

7.1 Nastavenia v zariadeniach so systémom Android

V zariadeniach so systémom Android sa niektoré nastavenia vykonávajú v aplikácii Unite Axxess for Smart Devices a iné nastavenia v aplikácii Ascom Login.

Nastavenia v Unite Axxess for Smart Devices

1. V Unite Axxess for Smart Devices kliknite na ikonu **Menu**  a potom kliknite na položku **Nastavenia**.

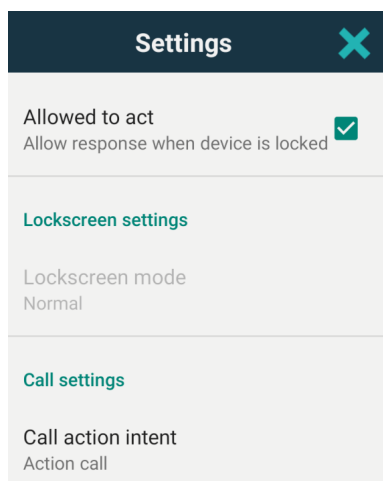

- S aktivovaným **Povolená činnosť** budete schopný odpovedať na upozornenia na uzamknutom zariadení. Kliknutím na zaškrŕavacie políčko aktivujete alebo deaktivujete toto nastavenie.
- V nastaveniach **Uzamknutá obrazovka** “**Normálny**” režim Unite Axxess for Smart Devices sa správa ako akákoľvek iná aplikácie. V režime **Aplikácia** môže aplikácia Unite Axxess for Smart Devices bežať aj, keď je obrazovka uzamknutá. Kliknite na režim **Uzamknutá obrazovka** a vyberte **Normálny** alebo **Aplikácia** pre zmenu správania sa uzamknutej obrazovky.




Keď na autentifikáciu používate Imprivata Mobile Device Access (MDA), režim **Uzamknutá obrazovka** má byť nastavený na **Normálny**. Na uzamknutej obrazovke môže bežať iba jedna aplikácia a v tomto prípade to musí byť aplikácia Imprivata MDA.

- Nastavenie **Zámer činnosti Hovor** určuje spôsob ako zariadenie pripojí hovor po výbere tohto typu odpovede v prichádzajúcom upozornení. Zariadenie môže volať okamžite, ak je táto voľba zvolená alebo môže zobrazíť číslo a potom musíte vyvolať hovor ručne. Odporúčame voľbu Hovor, ale zmeňte na vytáčanie, ak vaša verzia aplikácie nepodporuje okamžité volanie. Ak chcete zmeniť správanie sa pri hovore., kliknite na **Zámer činnosti Hovor** a vyberte **Činnosť hovor** alebo **Činnosť vytáčanie**.

2. Ak sa chcete vrátiť na stránku **Menu**, kliknite na tlačidlo **Späť** alebo ikonu **Zavrieť**

Nastavenia v Ascom Login

1. Kliknite na ikonu **Ascom Login**  na vašom zariadení.
2. Potom kliknite na ikonu **Viac informácií**  v hornom pravom rohu vašej obrazovky a kliknite na **Nastavenia**. V závislosti od konfigurácie servera sú nasledujúce nastavenia konfigurovateľné na zariadení alebo uzamknuté:

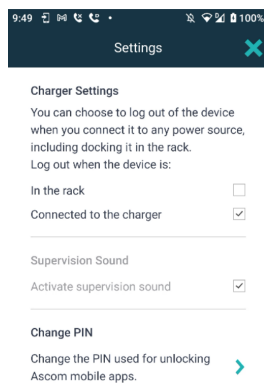

- V časti **Nastavenia nabíjačky** kliknutím na **V stojane** alebo **Pripojené k nabíjačke** aktivujete, že zariadenie sa pri nabíjaní automaticky odhlási.
 - Ak je aktivovaný **Zvuk dozoru**, zariadenie bude pípať každú minútu, ak sa spojenie so systémom stratí.
 - S **Zmeňte PIN**, môžete zmeniť kód PIN potrebný na odomknutie mobilných aplikácií Ascom.
3. Ak sa chcete vrátiť na počiatočnú stránku, kliknite na tlačidlo **Späť** alebo ikonu **Zavrieť** .

7.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS

Ak kontrolované zariadenie stratí kontakt so systémom, budete upozornený správou a zvukom.

Zvuk je predvolene **zapnutý** a uzamknutý na úpravy, ale môžete ho **vypnúť**, ak je nastavenie odomknuté.

Aby sa zapol a vypol kontrolný zvuk, prepnite vypínač.

8 O aplikáciách

Informácie o nainštalovaných aplikáciách nájdete v zobrazení O aplikácii pre každú aplikáciu.

8.1 Unite Axxess for Smart Devices

V zobrazení **O aplikácii** nájdete verziu aplikácie Unite Axxess for Smart Devices, názov a verziu servera, verziu softvéru a model vášho inteligentného zariadenia, vaše používateľské meno a číslo správy, informácie o výrobcovi a vylúčenie zodpovednosti.

(Iba Android) Kliknutím na odkaz **Pravidlá dodržiavania súkromia** sa otvorí doplnok k Vyhláseniu o dodržiavaní súkromia pre výrobky Ascom Unite. Tento doplnok ochrany osobných údajov sa zaoberá nasadením a používaním produktov Ascom Unite Axxess for Smart Devices na mobilných zariadeniach vášho podniku.

Nájdete tiež pokyny ako nájsť dokumentáciu pre zistenie viac informácií o aplikácii Unite Axxess for Smart Devices.

V súbore SW „O“	Názov symbolu	Popis
	Značka CE	Označuje zhodu pomôcky s ustanoveniami smernice Rady 93/42 / EHS zo 14. júna 1993 a predpisu 2017/745 Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, aby sa umožnila jej voľný pohyb v rámci Spoločenstva a jej umiestnenie do prevádzky v súlade s určeným účelom.
	Výrobca	Označuje výrobcu zdravotníckeho zariadenia vrátane adresy a telefónneho čísla.
	Dátum výroby	Označuje dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená.
	Pozrite si pokyny na používanie	Označuje nutnosť, aby si používateľ prečítal si pokyny na používanie.
	Katalógové číslo	Označuje katalógové číslo výrobcu tak, aby bolo možné identifikovať zdravotnícku pomôcku.
	Upozornenie	Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal pokyny na používanie z dôvodu dôležitých varovných informácií, ako sú upozornenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu uvádzať na samotnom zdravotníckom zariadení.
	Zdravotnícke zariadenie	Označuje, že ide o zdravotnícke zariadenie.
	Jedinečný identifikátor zariadenia	Označuje jedinečný identifikátor zariadenia, ktorý adekvátne identifikuje zariadenie prostredníctvom jeho distribúcie a použitia.

1. Kliknite na ikonu **Menu** .
2. Kliknite na tlačidlo **O aplikácii**.
3. Ak sa chcete vrátiť na stránku **Menu**, kliknite na tlačidlo Späť alebo ikonu **Zavrieť** .

8.2 Prihlásenie Ascom (len Android)

Ak chcete nájsť informácie o aplikácii Ascom Login, kliknite na ikonu Ascom Login  na vašom zariadení.

Kliknite na ikonu Viac informácií  v hornom pravom rohu vašej obrazovky a potom kliknite na **O**.

V zobrazení **O aplikácii** môžete nájsť verziu aplikácie, identifikátor softvéru a informácie o výrobcovi.

Kliknutím na odkaz **Licencia** sa otvorí zobrazenie s informáciami o licencií.

Ak sa chcete vrátiť na počiatočnú stránku, kliknite na tlačidlo Späť alebo ikonu **Zavrieť** .

Príloha A **Súvisiace dokumenty**

On-line pomocník v aplikácii Unite Axess for Smart Devices

Príloha B História dokumentov

Verzia	Dátum	Popis
I	19. september 2022	Pridané informácie o prioritných ikonách a podrobné varovné hlásenia. Pridané 4.5 Preposlanie upozornenia, strana 17 , 1.3.1 Očakávané klinické prínosy, strana 4 a 6.1 Spracovanie varovných hlásení, strana 21 .
H2	23. marca 2022	Pridané informácie o tom, ako vás môže prihlásenie do Unite Axess for Smart Devices iOS prihlásiť aj do iných podporovaných aplikácií Unite iOS (zariadenia so systémom iOS 4.2: Prihlásenie/Odhlásenie, stránka 10).
H	28. februára 2022	Zdokumentované združené prihlasovacie údaje a povolenia požadované v systémoch Android. Pridali sa ikony upozornenia Prijat'/Odmietnuť. Funkcia prítomnosti používateľa Nerušiť pridaná do stavu dostupnosti v systémoch Android a iOS. Pridané ďalšie varovania a informácie o banneri testovacieho prostredia.
G	24. septembra 2021	Pridané informácie o ostražitosti a hlásení incidentov. Odstránené kapitoly Upozornenie na preposielanie a spracovanie správ (iba pre systém iOS), pretože funkcia chatu je podporovaná iba v aplikácii Unite Collaborate. Aktualizované zamýšľané použitie. Pridané ďalšie informácie o povoleniach. Pridané ďalšie informácie o spracovávaní upozornení. Pridaná nová ikona a popis MD (Medical Device).
F2	16. novembra 2021	Pridané nové varovania pre možnosti oznamovania v systéme iOS 15. Pridané informácie o ostražitosti a hlásení incidentov. Pridané ďalšie informácie o povoleniach pre Android. Pridané ďalšie informácie o spracovávaní upozornení.
F	17. decembra 2020	Integrácia Imprivata zdokumentovaná.

E	7. októbra 2020	3.1 Usporiadanie na zariadeniach Android, strana 3: Nové. 3.2 Usporiadanie na zariadeniach iOS, strana 4: Nové. 3.3 Ikony, strana 4: Pridané ikony. 4.1 Prihlásenie / Odhlásenie na zariadeniach Android, strana 6: Nové. 4.2 Prihlásenie / Odhlásenie na zariadeniach iOS, strana 7: Nové: 5.1.1 Spracovanie upozornení na zariadeniach s Androidom, strana 8: Nové. 5.1.2 Spracovanie upozornení na zariadeniach s iOS, strana 8: Nové. 5.4 Presmerované upozornenie (len pre iOS), strana 11: Pridané len iOS. 6 Spracovanie správ (len pre iOS), strana 12: Pridaná poznámka "Platí len pre zariadenia so systémom iOS". 7 Stav dostupnosti v zariadeniach s Androidom, strana 13: Nové 8 Stav dostupnosti na zariadeniach iOS, strana 14: Nové. 9 Varovné správy, strana 15: Nahradené obrázky.
D	piatok, 10. júna 2019	Pridané „Určené použitie s Connect pre klinický systém triedy IIb v EÚ / EZVO“ do kapitoly 2 Zamýšľané použitie, strana 2 a kapitola 9.1 Prihlásenie / Odhlásenie cez Ascom Login, strana 15.
C	1. novembra 2018	Pridaná značka CE s číslom NB.
B	21. septembra 2018	Pridané ikony 3.1.1, stránka 6
A	23. marca 2018	Prvá schválená verzia

Ascom (Švédsko) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Švédsko

Telefón +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom