

NÁVOD NA POUŽITIE

Ascom Unite Axess for Smart Devices

O tomto dokumente

Tento dokument popisuje aplikáciu Ascom Unite Axxess for Smart Devices. Tento dokument je určený pre používateľov aplikácie Unite Axxess for Smart Devices.



Výrobca

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefón +46 31 55 94 00

www.ascom.com

Obsah

1 Úvod	1
1.1 Upozornenie a poznámky	1
1.2 Ostražitosť a hlásenie incidentov	3
1.3 Zamýšľané použitie/Účel	3
1.3.1 Očakávané klinické prínosy	4
2 Nastavenia Unite Axess for Smart Devices	6
2.1 Nastavenia v zariadeniach Android	6
2.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS	7
2.3 Ikony	7
2.4 Pomoc Unite Axess	8
3 Pripojenie k systému Unite	9
3.1 Prihlásenie/odhlásenie cez Ascom Login	9
3.1.1 Imprivata Mobile Device Access pre autentifikáciu	10
3.2 Zariadenia so systémom iOS: Prihlásenie/Odhlásenie	11
4 Spracovanie upozornení	13
4.1 Ikony upozornení	14
4.2 Prijatie upozornení	17
4.2.1 Informácie o pacientovi v upozorneniach	17
4.2.2 Spracovanie upozornení na zariadeniach Android	18
4.2.3 Spracovanie upozornení na zariadeniach s iOS	19
4.3 Triedenie upozornení	20
4.4 Filtrovanie upozornení	20
4.5 Preposlanie upozornenia	20
4.6 Vymazať upozornenia	21
5 Stav prístupnosti	22
5.1 Stav dostupnosti na zariadeniach s Androidom	22
5.2 Stav dostupnosti na zariadeniach s iOS	22
6 Varovné správy	24
6.1 Spracovanie varovných hlásení	26
7 Nastavenia	28
7.1 Nastavenia v zariadeniach so systémom Android	28
7.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS	29
8 O aplikáciách	30
8.1 Unite Axess for Smart Devices	30
8.2 Prihlásenie Ascom (len Android)	31
Príloha A Súvisiace dokumenty	32
Príloha B História dokumentov	33

1 Úvod

Aplikácia Unite Axess for Smart Devices poskytuje upozornenia pre používateľov na ich inteligentných zariadeniach. Aplikácia umožňuje úplnú integráciu so systémom Unite, takže lekári môžu bezpečne, kedykoľvek a kdekoľvek prijímať interaktívne správy o stave pacientov.



Obrázky sú prevzaté zo zariadenia s anglickým užívateľským rozhraním, preto sa jazyk môže líšiť od toho, čo vidíte na obrazovke.

1.1 Upozornenie a poznámky

Prečítajte si, prosím a dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v tomto návode.

VAROVANIE je uvedené na označenie položiek, ktoré môžu priamo alebo nepriamo spôsobiť alebo prispieť k nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok vážne fyzické zranenia alebo poškodenie zdravia ľudí, respektíve poškodenie majetku alebo životného prostredia.

UPOZORNENIE je uvedené na účely odkázania používateľa na potrebu venovať špeciálnu pozornosť bezpečnému a efektívnemu používaniu zariadenia.

POZNÁMKA je uvedená, ak sú k dispozícii dodatočné všeobecné informácie.



Varovanie

V závislosti od charakteristík pripojených zdravotníckych zariadení je možné produkt použiť na primárne (DAS/CDAS) alebo sekundárne (DIS) upozornenie na alarmy. Ak je prítomné aspoň jedno zariadenie DIS, používateliavidia varovanie, že niektoré z pripojených zariadení nepodporujú primárne upozornenia na alarmy.




Varovanie

Oznámenie o upozornení možno nahradiť novým prichádzajúcim oznámením o upozornení, ak sa v krátkom časovom intervale prijme niekoľko upozornení. Uistite sa, že reagujete na zamýšľané upozornenie.



Varovanie

Upozornenie otvorené v zobrazení na celú obrazovku môže byť čiastočne pokryté prichádzajúcim alebo opakovaným upozornením. Obe upozornenia budú mať viditeľné tlačidlá možností, ktoré umožnia priamu interakciu. Upozorňujeme, že tlačidlá sú umiestnené v dolnej časti každého upozornenia.

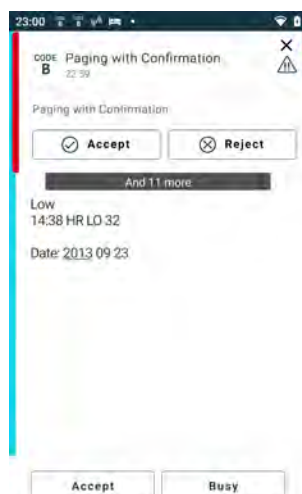

Varovanie

Nepoužívajte profily zaostrenia na zariadeniach so systémom iOS

Ak sa používajú profily zaostrenia, existuje riziko, že oznámenia o prichádzajúcich upozorneniach budú potlačené.



Varovanie

Nevypínajte oznámenia z aplikácie Axess for Smart Devices na zariadeniach so systémom iOS

Nevypínajte upozornenia z Axess zo Smart Devices na iOS zariadeniach. Ak sú oznámenia z aplikácie vypnuté, môže dôjsť k zmeškaniu nových upozornení.



Varovanie

Nepoužívajte „ochranu Face ID“ pre aplikáciu Axess for Smart Devices v zariadeniach so systémom iOS

Ak sa použije ochrana Face ID, existuje riziko, že sa premeškajú dôležité informácie v upozorneniach.



Varovanie

Nepoužívajte aplikáciu Axess for Smart Devices pomocou funkcie sledovania očí na zariadeniach so systémom iOS

Ak sa používa funkcia sledovania očí, existuje riziko náhodného výberu možnosti v prijatom upozornení.



Upozornenie

Rozpoznaniu upozornení a výstrah je možné zabrániť, ak je hlasitosť indikácií nižšia ako hladiny okolitého zvuku.

Informácie o výstražných zvukoch

Úrovně zvuku oznámení môžete upraviť v nastaveniach vášho zariadenia. Predvolené zvukové súbory zvukových upozornení boli navrhnuté tak, aby boli vhodné na účely oznamovania výstrah.

1.2 Ostražitosť a hlásenie incidentov

Koncoví používatelia alebo predajcovia/distribútori musia písomne informovať spoločnosť Ascom do piatich (5) pracovných dní od zistenia udalosti o všetkých incidentoch súvisiacich s produktmi. Sťažnosťou v tomto prípade môže byť ústne alebo písomné vyhlásenie alebo naznačenie, že výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa identity, kvality, životnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, účinnosti alebo výkonu zariadenia.



Akýkoľvek závažný incident, t. j. akýkoľvek incident, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo mohol viesť k smrti pacienta, používateľa alebo inej osoby, dočasnému alebo trvalému vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby alebo vážnemu ohrozeniu verejného zdravia, ku ktorému došlo v súvislosti s produktom, by sa malo oznámiť výrobcovi, prostredníctvom e-mailu vigilance@ascom.com, adresovanej príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

V prípade akéhokoľvek závažného incidentu, alebo ak dôjde k vnímanej poruche produktu, ktorá by mohla prispieť k smrti alebo zraneniu, alebo ak zákazník vyjadrí obavy o bezpečnosť pacientov, koncoví používatelia alebo predajcovia / distribútori to oznámia spoločnosti Ascom čo najskôr s použitím maximálneho úsilia na ústne poskytnutie takéhoto oznámenia (Centrum technickej pomoci Ascom) do dvadsiatich štyroch (24) hodín od získania vedomostí, alebo od prijatia takejto sťažnosti alebo od oboznámenia sa s takýmto problémom s produktom. Po ústnom oznámení nasleduje písomné (e-mailové) potvrdenie do 24 hodín na vigilance@ascom.com.

Koncoví používatelia alebo predajcovia/distribútori poskytnú dostatočné informácie, ktoré spoločnosti Ascom umožnia splniť si svoje regulačné oznamovacie povinnosti týkajúce sa incidentov a udalostí, ktoré musia byť nahlásené a zaregistrované podľa vnútroštátnych predpisov v rámci územia. Ak sa udalosť považuje za incident, ktorý sa musí nahlásiť príslušným vnútroštátnym orgánom, Ascom pripraví a predloží zostavu.

Ak akýkoľvek regulačný orgán alebo príslušný orgán poskytne písomné oznámenie koncovému používateľovi alebo predajcovi / distribútorovi v súvislosti s otázkami alebo vyšetrovaniami akéhokoľvek produktu alebo vykonaním inšpekcie alebo auditu zariadení používaných na ukladanie produktov alebo požiadaní o akékoľvek informácie týkajúce sa akéhokoľvek produktu, potom koncový používateľ alebo predajca / distribútor to bezodkladne oznámi spoločnosti Ascom.

1.3 Zamýšľané použitie/Účel

Táto kapitola popisuje zamýšľané použitie/účel Unite Axxess for Smart Devices.

Účel používania (všeobecne)

Axxess for Smart Devices je určený na elektronické signalizačné oznámenia (upozornenia) a iných údajov pochádzajúcich z pripojených zdravotníckych prístrojov cez zdravotníckych pomôcok Ascomu do zdravotníckych pracovníkov s cieľom pomôcť pri monitorovaní pacientov.

Produkt Axxess for Smart Devices je určený na použitie ako sekundárny prostriedok na zobrazovanie upozornení, t. j. signalizačných oznámení a iných údajov o zdravotníckych pomôckach, a nie je určený na použitie ako náhrada priameho prezerania údajov na pripojených zariadeniach.

Produkt Axxess for Smart Device nie je určený na použitie v súvislosti s aktívnym monitorovaním pacientov, na ktoré sa treba spoliehať pri rozhodovaní o okamžitom klinickom zákroku alebo na diagnostické účely. Okrem toho produkt Axxess for Smart Devices nie je určený na ovládanie alebo zmenu funkcií alebo parametrov pripojených zdravotníckych zariadení.

Produkt Axess for Smart Devices je určený na použitie pre profesionálnych používateľov a spolieha sa na správne používanie a prevádzku komunikačnej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení, a používaných zobrazovacích zariadení.

Komponenty Axess for Smart Devices sa inštalujú na špecifikovanom hardvéri a operačnom systéme a spoliehajú sa na zdravotnícke zariadenia, aby poskytovali stanovenú IT sieťovú a komunikačnú infraštruktúru.

Zamýšľané použitie (EU/EFTA/UK/AUS/MYS)

Zamýšľané použitie Ascom Unite Connect for Clinical Systems je poskytnúť rozhranie s klinickými systémami pre preposielanie informácií, vrátane životných fyziologických parametrov, spojených s príslušnými udalosťami na určené zobrazovacie zariadenie(a) pre podporu monitorovania pacientov. Zobrazovacie zariadenie(a) poskytuje(ú) vizuálny a/alebo zvukový a/alebo vibračný mechanizmus po prijatí upozornenia(i).

Connect for Clinical Systems aplikuje konfigurovateľné spracovanie a filtráciu upozornení na udalosti, znižuje ich frekvenciu a počet, aby prezentoval klinicky vykonateľné informácie pracovníkom v zdravotníctve.

Pre medicínske alarmy takmer v reálnom čase je Connect for Clinical Systems určený na použitie ako sekundárny alarm, čo je paralelný, redundantný mechanizmus preposielania na informovanie zdravotníckych pracovníkov o konkrétnych udalostiach súvisiacich s medicínou.

Pre vybrané zdrojové zariadenia a systémy funguje Connect for Clinical Systems ako integrátor a komunikátor distribuovaného poplachového systému (DAS/CDAS), aby spoľahlivo posielal a doručoval fyziologické a technické poplachy zdravotníckym pracovníkom na určených zobrazovacích zariadeniach a do špecifikovaných systémov.

Connect for Clinical Systems je určený pre použitie so špecifikovanými zdravotníckymi zariadeniami zdravotníckymi pracovníkmi všade, kde je potreba monitorovania fyziologických parametrov pacientov. Počet a stav pacientov je určený pripojenými zdravotníckymi zariadeniami.

Connect for Clinical Systems je nainštalovaný na špecifikovaných IT systémoch a spolieha sa na správne používanie a prevádzku pripojených medicínskych zariadení, systémov, zobrazovacích zariadení a medicínskej IT siete.

Connect for Clinical Systems sa používa v zdravotníckych zariadeniach, v jednotkách kritickej starostlivosti, subintenzívnych jednotkách, všeobecných oddeleniach a iných oddeleniach a v závislosti od konkrétnej konfigurácie aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

1.3.1 Očakávané klinické prínosy

- Znižuje riziko chýbajúcich kritických upozornení pacienta.¹
- Pomáha znižovať únavu z upozornení znížením počtu výstražných hlásení pacienta, ktoré prijímajú opatrovatelia.²
- Pomáha skrátiť čas odozvy na kritické udalosti pacientov.³
- Prispieva k efektívnosti pracovných postupov tým, že zabraňuje zbytočným prerušeniam práce.¹

1. POZNÁMKA! Tento nárok sa môže uplatniť LEN vtedy, keď Unite Axess for Smart Devices používa v kombinácii so softvérom Ascom Unite na distribúciu upozornení/udalostí PM/NC (napríklad Unite Connect for Clinical Systems).

2. POZNÁMKA! Tento nárok sa môže uplatniť LEN vtedy, keď Unite Axess for Smart Devices používa v kombinácii so softvérom Ascom Unite na distribúciu výstrah/udalostí PM/NC (napríklad Unite Connect for Clinical Systems).

3. POZNÁMKA! Táto tvrdenie sa môže uplatniť LEN vtedy, keď Unite Axess for Smart Devices používa v kombinácii so softvérom Ascom Unite na distribúciu upozornení/udalostí PM/NC (napríklad Unite Connect for Clinical Systems).

- Poskytujte používateľom informácie o stave systému takmer v reálnom čase.⁴
- Pomocou jednej aplikácie môžu mobilní poskytovatelia starostlivosti teraz prijímať obojsmerné interaktívne hlásenia pre kritické a nekritické udalosti pacienta vrátane snímok z monitorovania pacienta.
- Informácie a upozornenia o pacientovi sa doručujú do inteligentného zariadenia, ktoré využíva na štandardoch založené, robustné zabezpečenie, šifrovanie správ a overovanie používateľov. Takže aj keď sa zariadenie stratí, vaše údaje zostanú v bezpečí.

4. POZNÁMKA! Tento nárok možno uplatniť LEN pre systém triedy IIb (Unite Connect pre klinické systémy s Unite View a/alebo Unite Axxess pre inteligentné zariadenia)

2 Nastavenia Unite Axess for Smart Devices


Štandardná verzia aplikácie Unite Axess for Smart Devices obsahuje nasledovné:

- Stránka **Upozornenie**: Toto je predvolená stránka pri prihlásení.
- **Menu**: Ak chcete získať prístup k menu, kliknite na ikonu **Menu** (☰ pre Android a ≡ pre iOS).


2.1 Nastavenia v zariadeniach Android

V závislosti od konfigurácie systému (so stavom dostupnosti/bez neho) sa indikácie na hornej lište môžu líšiť.

Obrázok 1. Usporiadanie so zapnutým stavom dostupnosti

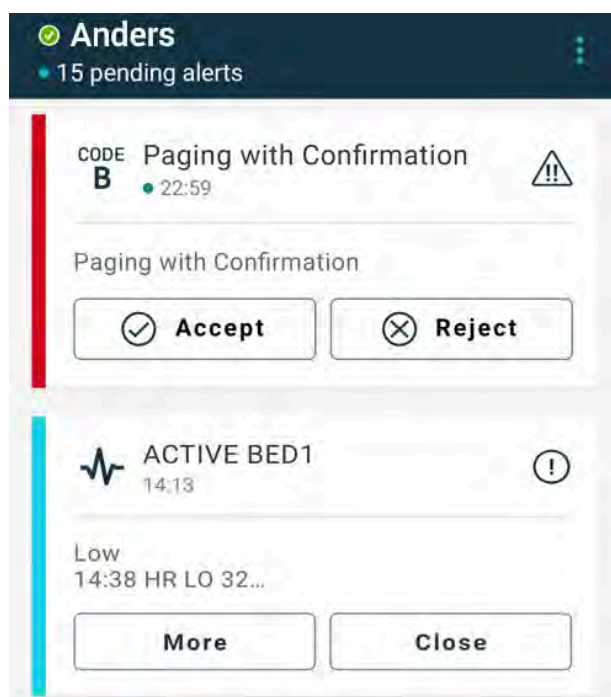

Obrázok 2. Usporiadanie s vypnutým stavom dostupnosti

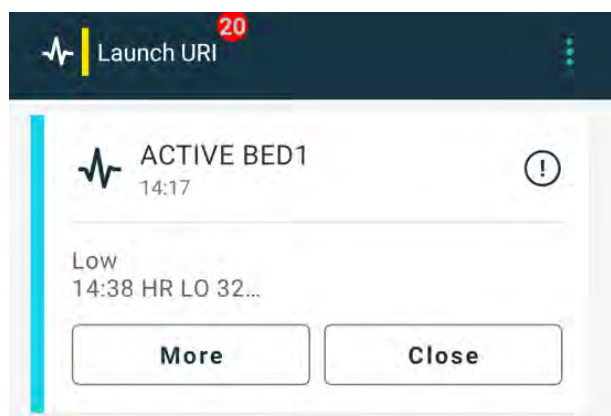

Ak máte prístup aspoň k jednej aplikácii okrem Unite Axess for Smart Devices Ascom Login, v spodnej časti obrazovky sa aktivuje **navigačný panel** na rýchlu navigáciu.

Obrázok 3. Spodná navigačná lišta




2.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS




Ak používate miniaplikáciu Axxess for Smart Devices, nenahrádzajte ikonu aplikácie  miniaplikáciou, pretože miniaplikácia neobsahuje nespracované upozornenia.

V závislosti od konfigurácie systému (so stavom dostupnosti/bez neho) sa indikácie na hornej lište môžu líšiť.

Obrázok 4. Usporiadanie so zapnutým stavom dostupnosti


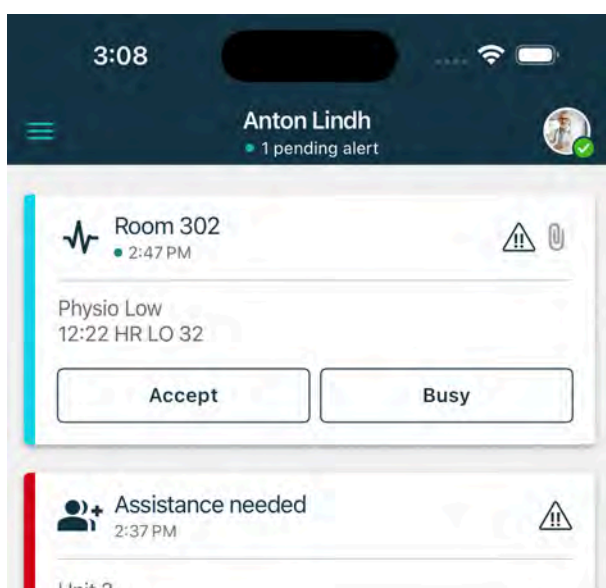


Obrázok 5. Usporiadanie s vypnutým stavom dostupnosti

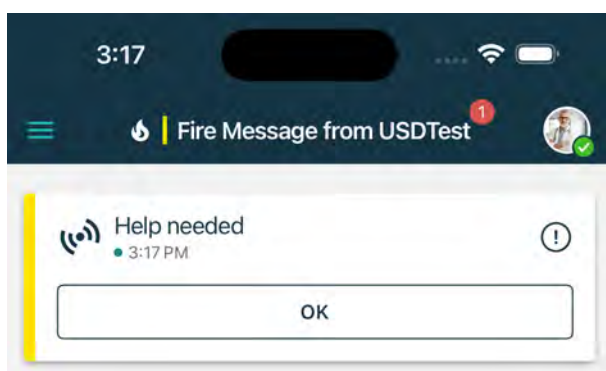

2.3 Ikony

Tu môžete vidieť význam každej ikony v aplikácii Unite Axxess for Smart Devices:

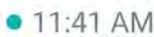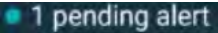	Ikona menu (Android)
	Ikona menu (iOS)
	Čas, kedy bolo upozornenie prijaté. Modrá bodka pred časom označuje, že upozornenie je nespracované.
	Pripojený prídavný obsah
	Ikona upozornení v dolnej navigačnej lište (iba Android)
	Ikona upozornení v dolnej navigačnej lište s počtom nespracovaných upozornení (len Android).
	Ikona profilu (k dispozícii v dolnej navigačnej lište v systéme Android a v pravom hornom rohu v systéme iOS), ktorá sa používa na prístup k službe Môj profil .
	Celkový počet nespracovaných upozornení zobrazených v hornej lište, keď je stav dostupnosti v systéme povolený.
	Celkový počet nespracovaných upozornení zobrazených v hornej lište, keď stav dostupnosti nie je v systéme povolený.
	Prijmite ikonu upozornenia.
	Odmietnite ikonu upozornenia. Používa sa aj pre možnosť Vrátiť späť , to znamená, keď máte možnosť vziať späť vašu odpoveď Prijat' .
	Nízka priorita
	Stredná priorita
	Vysoká priorita

2.4 Pomoc Unite Axxess

Aplikácia Unite Axxess for Smart Devices obsahuje stránku s návodom na používanie funkcií v aplikácii.

1. Ak chcete otvoriť nápovedu, kliknite na ikonu **Menu**
2. Potom kliknite na tlačidlo **Pomoc**.
3. Ak sa chcete vrátiť na stránku **Menu**, kliknite na tlačidlo **Späť**

3 Pripojenie k systému Unite

Pre zariadenia s Androidom sa pripojíte k systému Unite v aplikácii **Ascom Login**.

U zariadení iOS, ak sa chcete pripojiť k systému Unite, potrebujete URL adresu na server Unite Axess (v systéme Android je tento odkaz nakonfigurovaný v Ascom Login). Adresa URL môže byť poskytnutá ako odkaz, zadaná ručne alebo poskytnutá prostredníctvom lokálneho DNS.

Ak je poskytnutá ako odkaz, používateľ jednoducho klikne na odkaz na inteligentnom zariadení. Ak je používateľ už prihlásený na inom mieste, než je uvedené v odkaze, účet sa najskôr odhlási a potom sa aplikácia pokúsi pripojiť na adresu URL uvedenú v odkaze. Ak sa nájde stránka, zobrazí sa prihlasovacie okno, ak sa nenájde, používateľ dostane chybové hlásenie a má možnosť zadať adresu URL na stránku manuálne.

Ak potrebujete adresu URL zadať ručne, adresa URL obsahuje nasledovné:

- Verejná adresa FQDN alebo adresa IP na prístup k publikovanej webovej stránke, ktorá je hostiteľom aplikácie Unite Axess for Smart Devices (napríklad `uniteaxess.company.com`)
- Virtuálna cesta adresára definovaná počas inštalácie (napríklad „Axess“)

Adresa URL servera je napríklad v nasledujúcom formáte: `https://uniteaxess.<companyname>.com/Axess`.

Ak je poskytované prostredníctvom miestneho DNS a ak aplikácia Unite Axess for Smart Devices pri spustení nemá predtým použitú stránku, aplikácia sa automaticky pokúsi vyhľadať tento názov hostiteľa v DNS a po prijatí odpovede sa použije správna adresa URL.

3.1 Prihlásenie/odhlásenie cez Ascom Login

Prihlasovanie a odhlasovanie zo zariadenia so systémom Android sa vykonáva prostredníctvom aplikácie Ascom Login, ktorá je bežným prihlasovacím rozhraním pre aplikácie Ascom pre Android. To znamená, že potrebujete zadať vaše prihlasovacie údaje pre prístup k aplikáciám na vašom zariadení. Pri odhlásení ukončíte všetky aplikácie podporované Ascom Login a zoznam upozornení sa z bezpečnostných dôvodov automaticky odstráni.



Pri prvom spustení aplikácie, aby ste mohli využívať všetky funkcie poskytované touto aplikáciou, budete vyzvaní na udelenie určitých povolení Unite Axess for Smart Devices. Unite Axess for Smart Devices spustí kontrolu pri každom použití aplikácie, takže je povinné povoliť tieto povolenia a nikdy ich nedeaktivovať pri používaní Unite Axess for Smart Devices:

- Povolenie Unite Axess for Smart Devices prístupu ku kontaktom
- Povolenie Unite Axess for Smart Devices uskutočňovať a spravovať telefonické hovory
- Povolenie Unite Axess for Smart Devices prístupu k fotografiám a médiám v zariadení
- Nastavenia prekrytia > Povoľiť zobrazenie v iných aplikáciách
- Nastavenia oznámení > Povoľiť
- Optimalizácia využitia batérie > Všetky aplikácie > Unite Axess > Neoptimalizovať

Okrem toho, ak inovujete z verzie 6.0.1 na 6.2, musíte sa znova prihlásiť.

Prihlásenie

1. Na vašom zariadení kliknite na ikonu aplikácie **Ascom Login**  alebo ikonu **Ascom Axess**  ktorá vás presmeruje na aplikáciu Ascom Login.
2. Zadať vaše **meno používateľa** a **heslo**.



3. Kliknite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Prihlásenie pomocou iných autentifikačných služieb

Vaša organizácia môže používať aj iné autentifikačné služby, napríklad PingFederate alebo OpenID. V tomto prípade môžete byť pri prihlásení presmerovaní na túto overovaciu službu, kde musíte použiť svoj účet organizácie.

Uistite sa, že čas vášho zariadenia je rovnaký ako čas servera, inak sa možno nebudete môcť prihlásiť.

Odhlásenie

1. Kliknite na ikonu **Profil**  na dolnej navigačnej lište alebo na ikonu aplikácie **Ascom Login** .
2. Kliknite na tlačidlo **Odhlásenie**.

Po odhlásení sa všetky upozornenia a správy automaticky odstránia z inteligentného zariadenia z bezpečnostných dôvodov.

3.1.1 Imprivata Mobile Device Access pre autentifikáciu

Imprivata Mobile Device Access je riešenie mobilnej autentifikácie zdravotnej starostlivosti, ktoré umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku klinickým mobilným zariadeniam a aplikáciám. Používatelia môžu pristupovať k zdieľaným klinickým mobilným zariadeniam a potom sa môžu do svojich aplikácií prihlásiť jediným prihlásením (SSO).

Ak vaša organizácia používa na autentifikáciu Imprivata Mobile Device Access, môžete sa prihlásiť do všetkých aplikácií Ascom a iných klinických aplikácií tretích strán pomocou jediného prihlásenia, a to buď manuálne (pomocou vašich prihlasovacích údajov), alebo jednoduchým klepnutím na dodaný odznak blízkosti vašou organizáciou.



Na zabezpečenie integrácie s aplikáciou Imprivata Single Sign-On je potrebné mať v zariadení nainštalovanú aplikáciu Ascom Login (Ascom Myco 3, Ascom Myco 4 alebo iné podporované inteligentné zariadenie). Integrácia Imprivata žiadnym spôsobom nevyklučuje použitie prihlásenia Ascom, ktoré je povinné pre fungovanie iných aplikácií Ascom.

Prihlásiť sa pomocou odznaku

1. Ak chcete zobraziť uzamknutú obrazovku **Imprivata** zapnite obrazovku na inteligentnom zariadení.
2. Kliknite na svoj odznak do oblasti detekcie NFC na zadnej strane zariadenia.

3. Ak je to potrebné, zadajte kód PIN a potom kliknite na položku **Potvrdiť**.

Každý predchádzajúci používateľ, ktorý je stále prihlásený do zariadenia, sa automaticky odhlási a potom sa prihlásite vy.

Keď ste prihlásení a ak chcete zamknúť svoje inteligentné zariadenie, jednoducho znova kliknite na odznak do oblasti detekcie NFC. Potom sa zobrazí obrazovka uzamknutia **Imprivata**.

Prihlásite sa pomocou prihlasovacích údajov používateľa

1. Ak chcete zobraziť uzamknutú obrazovku **Imprivata** zapnite obrazovku na inteligentnom zariadení.

2. Na obrazovke uzamknutia **Imprivata** kliknite na ikonu **Ručné prihlásenie**,  zadajte svoje **Meno používateľa** a **Heslo** a potom klepnite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Každý predchádzajúci používateľ, ktorý je stále prihlásený do zariadenia, sa automaticky odhlási a potom sa prihlásite vy.

Ak je prihlásenie úspešné, vaše inteligentné zariadenie sa odomkne a budete prihlásení do všetkých klinických aplikácií. Ak sa nemôžete prihlásiť alebo sa zobrazí výzva na zadanie prepojenia Unite Axess Server, obráťte sa na správcu systému.

Odhlásenie

1. Na obrazovke uzamknutia **Imprivata** kliknite na ikonu **Odhlásenie** .
2. V potvrdzovacej správe kliknite na tlačidlo **OK**.

3.2 Zariadenia so systémom iOS: Prihlásenie/Odhlásenie

Ak vaša implementácia prichádza s ďalšími podporovanými aplikáciami Ascom, Unite Axess for Smart Devices poskytuje jednotné prihlásenie do akýchkoľvek iných aplikácií Unite, ako je napríklad Unite Collaborate.



Po výbere platnej funkcie Unite Axess pre server inteligentných zariadení a pri prvom otvorení aplikácie musíte udeliť nasledujúce povolenia, aby ste sa mohli prihlásiť:

- Povolit' oznámenia
- Povolit' kritické upozornenia
- Povolit' časovo citlivé upozornenia
- Zamerajte sa

Unite Axess for Smart Devices spustí kontrolu pri každom používaní aplikácie, takže je povinné povoliť tieto povolenia a nikdy ich nedeaktivovať pri používaní Unite Axess for Smart Devices:

Prihlásenie

1. Na zariadení kliknite na ikonu aplikácie **Unite Axess** . Otvorí sa prihlasovacie okno.
2. Zadajte vaše **meno používateľa** a **heslo**.



3. Kliknite na tlačidlo **Prihlásenie**.

Prihlásenie pomocou iných autentifikačných služieb

Keď sa prihlásite pomocou autentifikácie OpenID Connect, zobrazí sa kontextové okno s povolením, ktoré vás upozorní, že sa chystáte otvoriť webovú stránku, ktorá bude zdieľať informácie o vás. Ak chcete pokračovať s prihlásením, musíte vybrať položku **Pokračovať**.

Odhlásenie

1. Kliknite na ikonu **Menu** .
2. Kliknite na tlačidlo **Odhlásenie**.

Keď sa odhlásite pomocou autentifikácie OpenID Connect, zobrazí sa kontextové okno s povolením, ktoré vás upozorní, že sa chystáte otvoriť webovú stránku, ktorá bude zdieľať informácie o vás. Ak chcete pokračovať s odhlásením, musíte vybrať položku **Pokračovať**.

Po odhlásení sa všetky upozornenia a správy automaticky odstránia z inteligentného zariadenia z bezpečnostných dôvodov.

4 Spracovanie upozornení

Táto časť popisuje, ako spracovať upozornenia v Unite Axess for Smart Devices.

Prehľad upozornenia

Upozornenia môžu byť rôznych priorít, kategórií a typov. Farebná lišta zobrazuje prioritu alebo kategóriu upozornenia, pričom ikona upozornenia zobrazuje typ upozornenia.

	1. Ikona upozornenia 2. Predmet, napríklad umiestnenie 3. Informácia o udalosti 4. Ikona priority 5. Ikona prílohy (s týmto upozornením je spojená príloha) 6. Farba kategórie/priority 7. Nevybavené upozornenie 8. Časová značka 9. Možnosti odozvy (ikony prijať ✓ / odmietnuť ✗ môžu byť voliteľné)
--	---

Farby upozornení

Farby je možné použiť na zobrazenie kategórií alebo priorít upozornení. Farba upozornenia je zobrazená farebnou lištou naľavo do každého upozornenia.



Použitie farieb závisí od konfigurácie a môže sa líšiť podľa nastavení systému.

Farba kategórie/priority: Červená Priorita: Vysoká	
Farba kategórie/priority: Žltá Priorita: Stredná	
Farba kategórie/priority: Azúrová Priorita: Nízka	

4.1 Ikony upozornení

Ikony vo výstrahách označujú kategóriu výstrahy, napríklad privolanie sestry alebo laboratórny výsledok.

Nasledujúce ikony sú k dispozícii v Ascom Myco:

Ikona	Popis
	Všeobecné upozornenie
	Upozornenie lôžka
	Stupnica
	Objemové čerpadlo
	Enterálna pumpa
	Balónové čerpadlo
	Termoregulačná jednotka
	Systém na podporu klinického rozhodovania (CDSS)
	Infúzna pumpa
	Filtrácia krvi Dialýza
	Monitor pacienta
	Ventilátor
	Analyzátor krvného plynu
	Srdcovo-pľúcny stroj
	Inkubátor

	Anesteziologická dodacia jednotka
	Výsledky z laboratória
	Hovor z toalety
	Asistenčný hovor Člen personálu vyžadujúci pomoc iného člena personálu
CODE A	Kód A
CODE B	Kód B
	Lekársky hovor
	Volanie sestry Pacient, ktorý potrebuje pomoc člena personálu.
	Servisný hovor
	Úloha
	Technické upozornenie
	Porucha
	Osobný alarm
	Požiar
	Röntgen
	Kategória A
	Kategória B

	Kategória C
	Kategória D
	Kategória E
	Núdzový
	Nastavenie volania
	Tlačidlo 1
	Tlačidlo 2
	RTLS
	Zóna
	Teplota
	Workflow
	Workflow 1
	Workflow 2
	Workflow 3
	Workflow 4
	Workflow 5

	Bezpečnosť
	Prítomnosť

4.2 Prijatie upozornení

Preddefinovaným zvukom upozornenia budete upozornený na prichádzajúce upozornenie. Inteligentné zariadenie zobrazí upozornenie na stránke **Upozornenia**.



V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.

Ak prijmete upozornenie s možnosťami odpovede, kliknite na voľbu odpovede (napríklad **Prijat'** alebo **Odmietnuť**). Po odpovedaní sa upozornenie aktualizuje správou s odpoveďou. Zoznam upozornení je predvolene zoradený v chronologickom poradí s najnovšími upozoreniami zobrazenými v hornej časti. Všetky prijaté a neodstránené upozornenia sa zobrazia v zozname upozornení. V prípade, že vaša odpoveď na upozornenie nebude odoslaná späť na server z dôvodu komunikačnej/systémovej chyby, budete o tom informovaní.

Na odomknutom zariadení sa v hornej časti obrazovky zobrazia oznámenia o upozornení. Ak v krátkom čase príde niekoľko upozornení, najnovšie sa zobrazí nad ostatnými.

Na uzamknutom zariadení so systémom Android je upozornenie označené zvukom a vibráciami a vizuálnym oznámením na displeji.

Na uzamknutom zariadení so systémom iOS sa zobrazí nové upozornenie, ale bez farby kategórie/priority.


Pri prijatí upozornenia potiahnite prstom nahor alebo na ktorúkoľvek stranu upozornenia, prípadne ho skryte klepnutím na ikonu.

Kliknutím na oznámenie otvoríte upozornenie. V závislosti od vašej implementácie a nastavení upozornenia, ktoré dostávate, môžete z upozornenia spustiť aj rôzne ďalšie funkcie, ako je spustenie prehliadača, spustenie hovoru alebo spustenie aplikácií tretích strán.

4.2.1 Informácie o pacientovi v upozorneniach


Upozornenia, ktoré dostanete, môžu obsahovať informácie o pacientovi, ako je meno alebo vek. Tieto informácie sa v upozornení nezobrazia. Zobrazia sa len po otvorení upozornenia.

V závislosti od konfigurácie systému sa v zozname upozornení môžu zobraziť aj informácie o pacientovi.

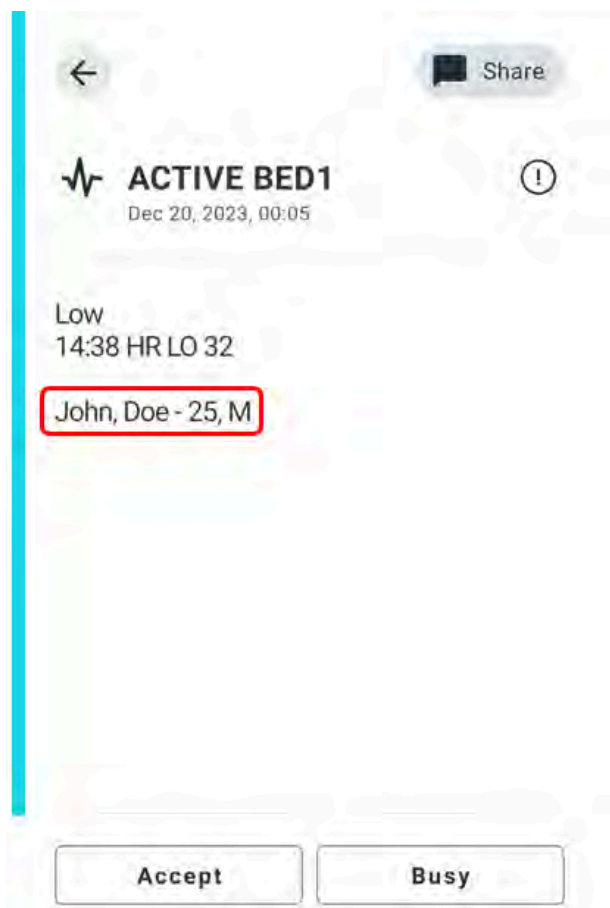

4.2.2 Spracovanie upozornení na zariadeniach Android

Otáčanie označuje, že upozornenia sa aktualizujú. Aktualizácia cez kanál DECT (iba zariadenia Ascom Myco 3) môže trvať niekoľko sekúnd.

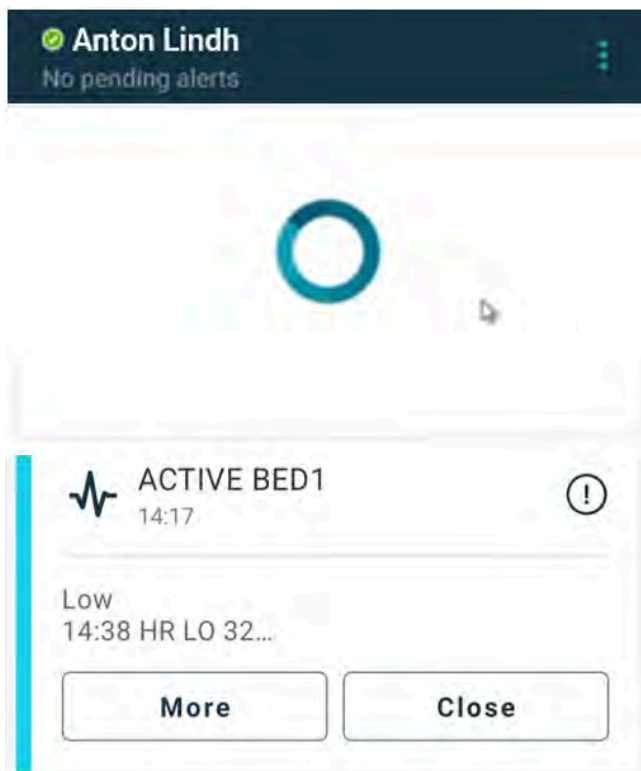

Počet nespracovaných upozornení sa zobrazuje v dolnej navigačnej lište, ako aj v hornej lište.

Ak si chcete prečítať upozornenie na celej obrazovke, kliknite na jej text.

4.2.2.1 Upozornenia na nastavenie hovoru (len Ascom Myco)

Upozornenie na nastavenie hovoru vyvolá hovor buď automaticky, alebo po kliknutí na možnosť v upozornení. Môže ísť o bežný hovor alebo hovor PTT (Push-to-Talk).

Po odpojení hovoru sa môžete znova pripojiť k hovoru z upozornenia.

Hovor PTT je skupinový hovor, ktorý si vyžaduje ťuknutie a podržanie tlačidla na obrazovke alebo stlačenie nakonfigurovaného multifunkčného tlačidla počas hovoru. Zatiaľ čo jeden používateľ rozpráva, ostatní počúvajú.

Ak už telefonujete a dostanete upozornenie na nastavenie hovoru, tento hovor sa odpojí a prijatý hovor sa po krátkom oneskorení automaticky spojí (ihneď v prípade upozornení s prioritou 1), ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Upozornenie je nakonfigurované tak, aby sa prijímalo automaticky.
- Upozornenie má vyššiu prioritu ako priorita prebiehajúceho hovoru.

Ak je priorita upozornenia na nastavenie hovoru nižšia ako priorita prebiehajúceho hovoru alebo ak upozornenie nie je nakonfigurované na automatické prijatie, musíte hovor spustiť manuálne. Začatie hovoru z upozornenia nastavenia hovoru odpojí akýkoľvek prebiehajúci hovor.

4.2.3 Spracovanie upozornení na zariadeniach s iOS

Na hornej lište sa zobrazí počet nespracovaných upozornení.

Ak si chcete prečítať upozornenie na celej obrazovke, kliknite na jej text.

4.3 Triedenie upozornení

Zoznam upozornení je predvolene zoradený v chronologickom poradí s najnovšími upozorneniami zobrazenými v hornej časti. Malá ikona nad položkou **Triedenie** na spodku stránky **Upozornenia** zobrazuje, ako sú upozornenia momentálne zoradené.

1. Na stránke **Upozornenia** kliknite na ikonu **Triedenie** .
2. Zvoľte ako chcete triediť upozornenia. Upozornenia sa zobrazia zodpovedajúcim spôsobom.



Upozornenia sú zoradené podľa času s najnovším na vrchu.



Upozornenia sú zoradené podľa priority, pričom na vrchu sa zobrazuje upozornenie s najvyššou prioritou. Upozornenia s rovnakou prioritou sú zoradené podľa času, pričom najnovšie sú na vrchu.



Upozornenia sú zoskupené podľa kategórie.

4.4 Filtrovanie upozornení

1. Kliknite na ikonu **Filter**  na stránke **Upozornenia**.
2. Vyberte spôsob, akým chcete filtrovať výstrahy výberom možnosti v jednom zo zoznamov.



V zozname **Priorita** môžete filtrovať pomocou **Alarm**, **Vysoký**, **Normálny** a **Nízky**.



V zozname **Stav odpovede** môžete filtrovať podľa **Čakanie na odpoveď** a **Zodpovedané**.



V zozname **Kategória** môžete filtrovať všetky kategórie prístupné vo vašom zozname upozornení, napr. **Kódové volanie**, **Laboratórium** a **Monitorovanie**.


Po výbere voľby vybledne pozadie stránky **Upozornenia** a zobrazia sa iba vyfiltrované upozornenia.

3. Ak chcete odstrániť filter, kliknite na ikonu **Zrušenie** .

4.5 Preposlanie upozornenia

Ak chcete preposlať upozornenie, musíte mať na svojom zariadení nainštalovanú aplikáciu Unite Collaborate .

1. Klepnutím na upozornenie otvoríte stránku s podrobnosťami upozornenia.
2. Kliknite na tlačidlo **Zdieľať** . Vygeneruje sa snímka obrazovky so stránkou s podrobnosťami o upozornení. Tento obrázok môžete odoslať ako prílohu prostredníctvom aplikácie .

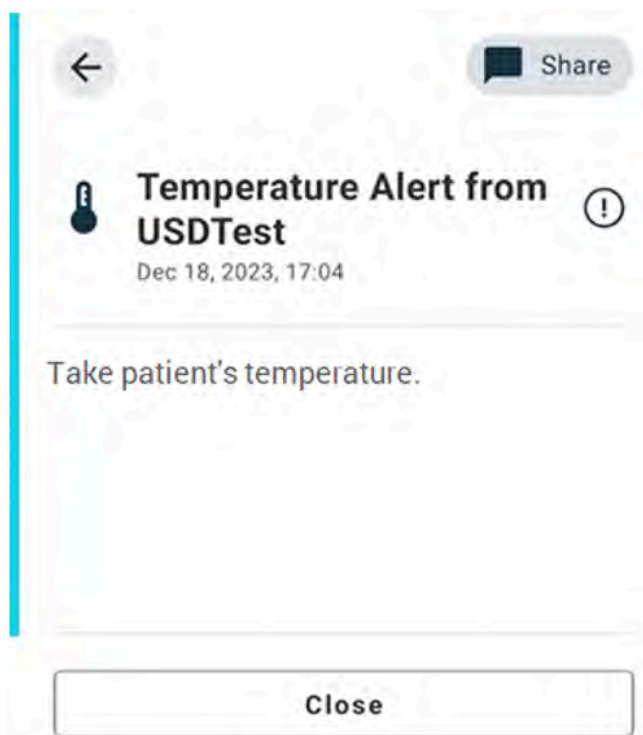

4.6 Vymazať upozornenia

1. Kliknite a podržte upozornenie, ktoré chcete odstrániť. Zobrazí sa menu.
2. Kliknutím na položku **Odstrániť vybrané upozornenie** odstránite príslušné upozornenie alebo **Odstrániť všetky upozornenia** odstránite všetky upozornenia.
3. Vo varovnom hlásení kliknite na **Odstrániť** a tým to potvrdíte.

5 Stav prístupnosti

Ak je na to systém konfigurovaný, používatelia môžu zvoliť svoj stav prístupnosti zo zariadenia. Tento stav dostupnosti môže systém použiť napríklad pri rozhodovaní, ktorým zariadeniam poslať upozornenie.

5.1 Stav dostupnosti na zariadeniach s Androidom

Stav dostupnosti je uvedený na hornej lište aplikácie. Váš stav dostupnosti môžete zmeniť manuálne na **Zaneprázdnený**, **Nerušiť** alebo **Dostupný** v časti **Môj Profil**. Do časti **Môj Profil** sa môžete dostať buď z spodnej navigačnej lišty alebo z aplikácie Ascom Login.


Zobrazenie stavu prístupnosti

Na zobrazenie stavu prístupnosti sa používajú nasledovné ikony:

	Prístupný
	Obsadené
	Nerušiť

Zmena stavu

V časti **Môj profil** kliknite  na ikonu a vyberte **Dostupný**, **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.

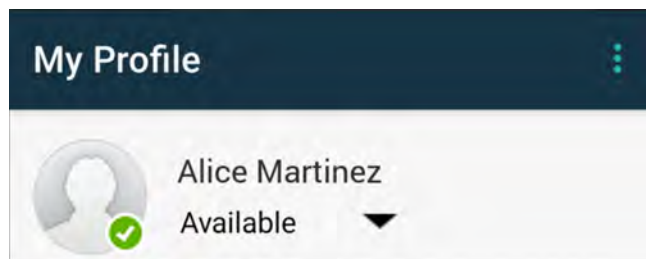

V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.

5.2 Stav dostupnosti na zariadeniach s iOS

Stav dostupnosti je uvedený na hornej lište aplikácie.

Zobrazenie stavu prístupnosti


	Prístupný
	Obsadené

	Nerušiť
	Odhlásený/Offline

Zmena stavu

Stav dostupnosti môžete zmeniť len vtedy, ak máte v tom istom zariadení nainštalovanú aplikáciu Unite Collaborate, inak tento postup nie je k dispozícii.

1. Kliknite na svoje meno alebo profilový obrázok v hornej lište.

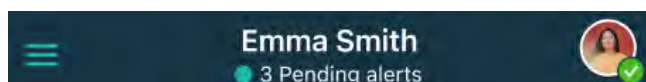

Teraz môžete vidieť možnosti dostupnosti.

2. Ak chcete zmeniť stav dostupnosti:
 - Vyberte možnosť **Dostupný**, **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.
 - V závislosti od nastavení môžete byť presmerovaní do aplikácie Unite Collaborate, kde môžete pridať ďalšie podrobnosti pre rozšírené profily dostupnosti (napríklad ak si vyberiete možnosť **Nerušiť**, môžete tiež vybrať čas, kedy budete znova **Dostupný**). **Uložte** svoje nastavenia.
 - Po dokončení budete presmerovaní späť do aplikácie Unite Axxess for Smart Devices.

Ak sa chcete odhlásiť, kliknite na položku **Odhlásiť sa**.




V závislosti od konfigurácie systému nemusíte dostávať upozornenia, ak je stav dostupnosti nastavený na hodnotu **Zaneprázdnený** alebo **Nerušiť**.

6 Varovné správy

Tu sú uvedené príklady varovných správ, ktoré sa môžu zobraziť na zariadení. Ak chcete zobraziť celú varovnú správu na odomknutom zariadení, kliknite na varovné oznámenie. S možnou výnimkou strateného sieťového spojenia riešenie všetkých varovaní obvykle vyžaduje pomoc správcu.


Výstraha systému správ signalizuje, že pripojenie k systému správ je obmedzené a prístup k novým upozorneniam/správam je obmedzený.

Obrázok 6. Výstraha systému správ na zariadeniach so systémom iOS

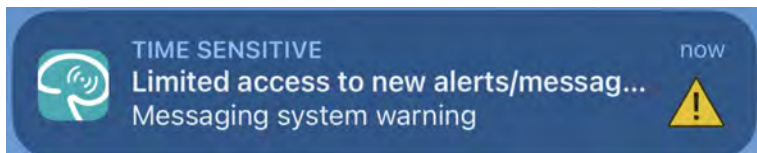

Výstraha o zlyhaní systému správ znamená, že pripojenie k systému správ nie je dostupné a nie je možný prístup k upozorneniam/správam.


Obrázok 7. Výstraha o zlyhaní systému správ v zariadeniach so systémom iOS

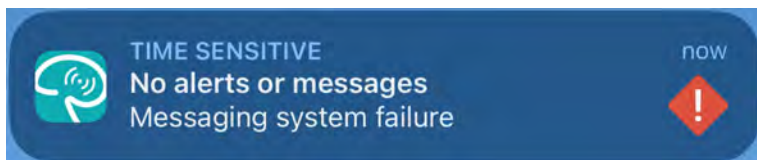


V závislosti od pripojeného zdrojového zariadenia, najmä v prípade systému CDAS/DAS, sa vo vašom zariadení môže zobraziť upozornenie na prekrytie označujúce stratu pripojenia k jednému alebo viacerým zdrojom alarmu.


Kliknutím na **Ďalšie informácie** si prečítajte ďalšie podrobnosti o varovaní.

Obrázok 8. Strata pripojenia k zdroju alarmu na zariadeniach so systémom Android

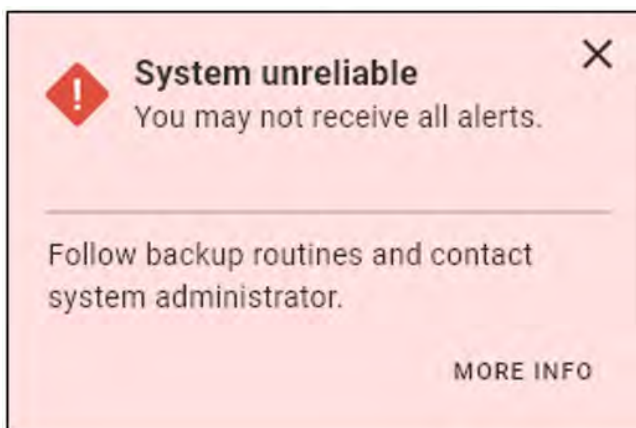


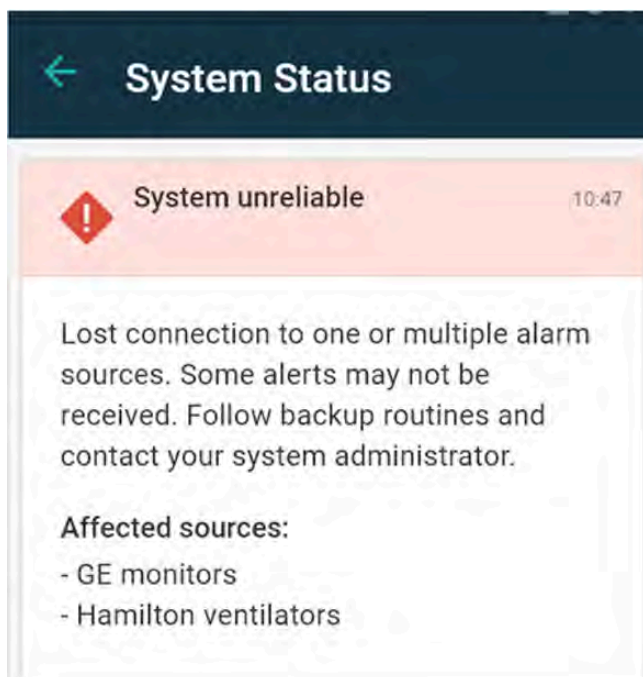

Obrázok 9. Strata pripojenia k zdroju alarmu v zariadeniach so systémom iOS

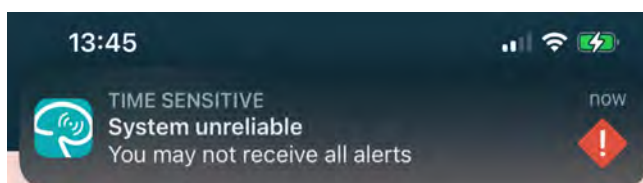


Obrázok 10. Oznámenie o chybe odosielania správ v zariadeniach s Androidom

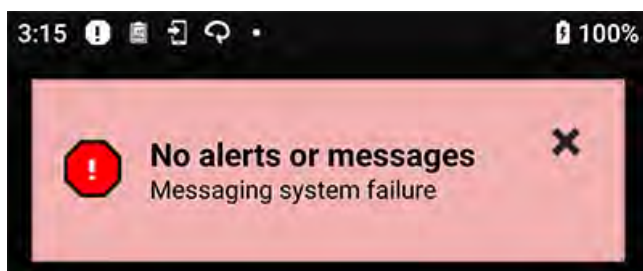


Táto výstraha znamená, že aplikáciu nemôžete používať na primárne upozorňovanie na alarmy.

Obrázok 11. Výstraha DIS/DAS

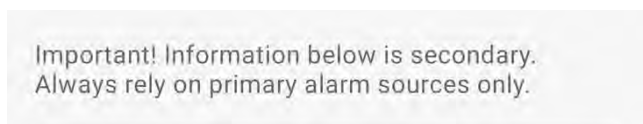

Ak je aplikácia Unite Axess for Smart Devices použitá v testovacom prostredí, v zariadení sa zobrazí varovanie.

Obrázok 12. Banner testovacieho prostredia

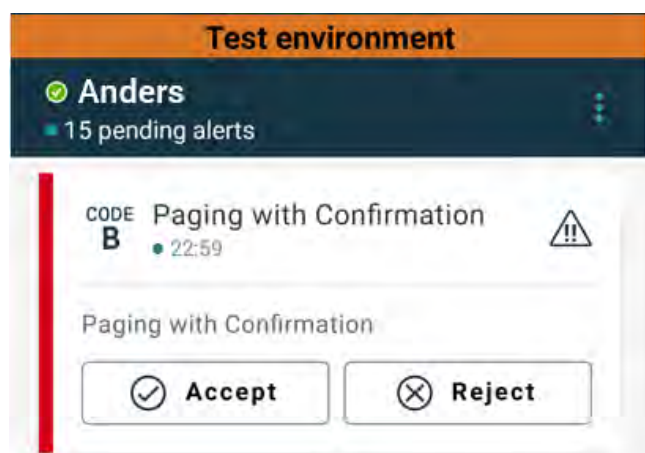

6.1 Spracovanie varovných hlásení

V nasledujúcej tabuľke sú popísané činnosti, ktoré sú k dispozícii na spracovanie varovných hlásení zobrazených vo vašom zariadení.

Varovné hlásenie	Popis	Činnosť
Systém nespoľahlivý Možno nebudete dostávať všetky upozornenia	Pripojenie k zdravotníckym zariadeniam nie je plne funkčné. V závislosti od hlavnej príčiny môžu byť niektoré upozornenia stále distribuované podľa očakávania.	Postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.
Upozornenia nie je možné doručiť Žiadni pridelení	Priradenia neboli nastavené.	Priradte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. Ak problém pretrváva, postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.
Chýbajúce indikátory stavu systému Jedno alebo viac zariadení nie je dostupných	Nie je možné dosiahnuť jedinu chybnú bezpečnosť pri indikácii stavu systému.	• Skontrolujte, či Digistat Smart Central beží na vyhradených pracovných staniciach • Skontrolujte, či je svetelná veža pripojená • Skontrolujte, či prijímače stavu nakonfigurované v Unite Assign sú stále prihlásené do svojich zariadení.

Nevybavené upozornenie Nepodarilo sa doručiť prideleným zamestnancom	Upozornenie nebolo nikomu distribuované.	• Priradíte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. • Skontrolujte, či všetky priradené osoby sú stále prihlásené do svojich zariadení. Ak problém pretrváva, postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.
Nevybavené upozornenie Odmietnuté všetkými pridelenými	Upozornenie bolo distribuované aspoň jednému príjemcovi, ale nikto ho neprijal.	• Priradíte zamestnancov ku všetkým roliam v Unite Assign. • Skontrolujte, či všetky priradené osoby sú stále prihlásené do svojich zariadení.
Systém nespoľahlivý Systém nemusí fungovať podľa očakávania	Chyba konfigurácie v systéme zabraňuje distribúcii upozornení z pripojených zdravotníckych zariadení podľa očakávania. Upozornenia z iných systémov, napríklad volanie sestry, sa môžu stále distribuovať.	Postupujte podľa postupov zálohovania a kontaktujte svojho správcu.


7 Nastavenia

7.1 Nastavenia v zariadeniach so systémom Android

Niektoré nastavenia sa konfigurujú v aplikácii Unite Axess for Smart Devices a iné nastavenia v aplikácii Ascom Login.

Nastavenia v Unite Axess for Smart Devices

1. V Unite Axess for Smart Devices kliknite na ikonu **Menu** a potom kliknite na **Nastavenia**.

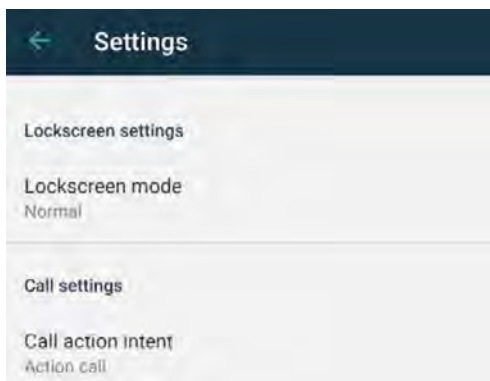

2. Nakonfigurujte nastavenia.

- Nastavenie režimu **Uzamknutá obrazovka** určuje, ako sa Unite Axess for Smart Devices aplikácia správa, keď je obrazovka uzamknutá. V režime **Normálny** Normálny sa aplikácia Unite Axess for Smart Devices správa ako akákoľvek iná aplikácia. V režime **Aplikácia** môže aplikácia Unite Axess for Smart Devices bežať aj, keď je obrazovka uzamknutá.

Kliknite na režim **Uzamknutá obrazovka** a vyberte **Normálny** alebo **Aplikácia** pre zmenu správania sa režimu uzamknutej obrazovky.




Keď na autentifikáciu používate Imprivata Mobile Device Access (MDA), režim **Uzamknutá obrazovka** má byť nastavený na **Normálny**. Na uzamknutej obrazovke môže byť spustená len jedna aplikácia a v tomto prípade to musí byť aplikácia Imprivata MDA.

- Nastavenie **Zámer činnosti Hovor** určuje spôsob ako zariadenie pripojí hovor po výbere tohto typu odpovede v prichádzajúcom upozornení. Zariadenie môže volať okamžite, ak je táto voľba zvolená alebo môže zobrazíť číslo a potom musíte vyvolať hovor ručne. Odporúčame možnosť **Akčné volanie**, ale ak vaša verzia aplikácie nepodporuje okamžité volania, zmeňte ju na **Akčné vytáčanie**. Kliknite na položku **Zámer akčného volania** a výberom možnosti **Akčné volanie** alebo **Akčné vytáčanie** zmeníte správanie volania.

Nastavenia v Ascom Login


1. Kliknite na ikonu **Ascom Login** na vašom zariadení.
2. Kliknite na ikonu **Menu** v pravom hornom rohu obrazovky a kliknite na položku **Nastavenia**. V závislosti od konfigurácie servera sú nasledujúce nastavenia konfigurovateľné na zariadení alebo uzamknuté:

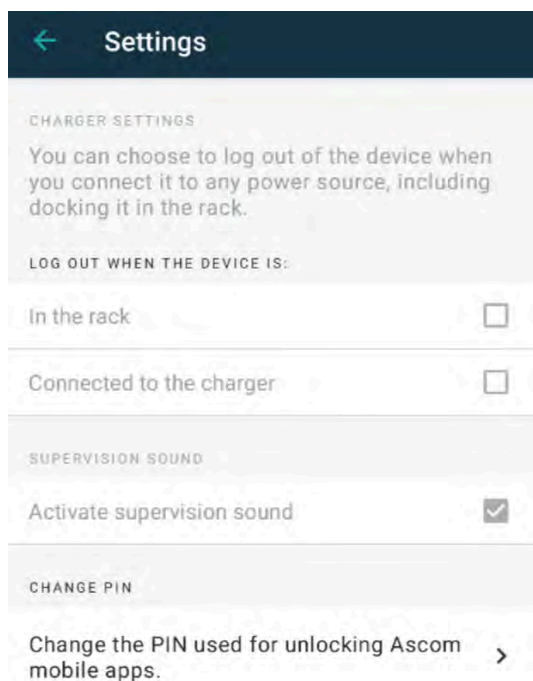

- V časti **Nastavenia nabíjačky** kliknutím na **V stojane** alebo **Pripojené k nabíjačke** aktivujete, že zariadenie sa pri nabíjaní automaticky odhlási.
- Ak je aktivovaný **Zvuk dozoru**, zariadenie bude pípať každú minútu, ak sa spojenie so systémom stratí.
- V časti **Zmena kódu PIN** môžete zmeniť kód PIN potrebný na odomknutie mobilných aplikácií Ascom.

7.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS

V Unite Axess for Smart Devices kliknite na ikonu **Menu**  a potom vyberte **Nastavenia**. V závislosti od konfigurácie servera je možné v zariadení konfigurovať alebo uzamknúť nastavenie **Aktivovať zvuk dohľadu**.

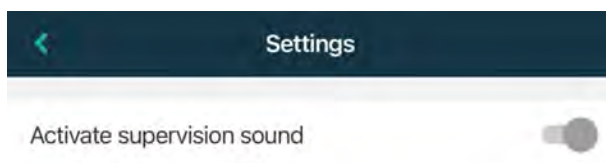

Ak kontrolované zariadenie stratí kontakt so systémom, budete upozornení správou a opakovaným zvukom. Zvuk dohľadu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou prepínača **Aktivovať zvuk dohľadu**.

8 O aplikáciách

Informácie o nainštalovaných aplikáciách nájdete pre každú aplikáciu v zobrazení **O aplikácii**.

8.1 Unite Axess for Smart Devices

V zobrazení **O aplikácii** nájdete verziu aplikácie Unite Axess for Smart Devices, názov a verziu servera, verziu softvéru a model vášho inteligentného zariadenia, vaše používateľské meno a číslo správy, informácie o výrobcovi a vylúčenie zodpovednosti.

(len pre Android) Kliknutím na odkaz **Zásady ochrany osobných údajov** sa otvorí dodatok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov pre produkty Ascom Unite. Tento doplnok ochrany osobných údajov sa zaoberá nasadením a používaním produktov Ascom Unite Axess for Smart Devices na mobilných zariadeniach vášho podniku.

Nájdete tu aj odkaz na ďalšiu dokumentáciu o aplikácii Unite Axess for Smart Devices.

V súbore SW „O“	Názov symbolu	Popis
	Značka CE	Označuje zhodu pomôcky s ustanoveniami smernice Rady 93/42 / EHS zo 14. júna 1993 a predpisu 2017/745 Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, aby sa umožnila jej voľný pohyb v rámci Spoločenstva a jej umiestnenie do prevádzky v súlade s určeným účelom.
	Výrobca	Označuje výrobcu zdravotníckeho zariadenia vrátane adresy a telefónneho čísla.
	Dátum výroby	Označuje dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená.
	Pozrite si pokyny na používanie	Označuje nutnosť, aby si používateľ prečítal si pokyny na používanie.
	Katalógové číslo	Označuje katalógové číslo výrobcu tak, aby bolo možné identifikovať zdravotnícku pomôcku.
	Upozornenie	Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal pokyny na používanie z dôvodu dôležitých varovných informácií, ako sú upozornenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu uvádzať na samotnom zdravotníckom zariadení.
	Zdravotnícke zariadenie	Označuje, že ide o zdravotnícke zariadenie.
	Jedinečný identifikátor zariadenia	Označuje jedinečný identifikátor zariadenia, ktorý adekvátne identifikuje zariadenie prostredníctvom jeho distribúcie a použitia.

1. Kliknite na ikonu **Menu**.
2. Kliknite na tlačidlo **O aplikácii**.

8.2 Prihlásenie Ascom (len Android)

Ak chcete nájsť informácie o aplikácii Ascom Login, kliknite na ikonu  na vašom zariadení. Kliknite na ikonu **Menu**  v hornom pravom rohu vašej obrazovky a potom kliknite na položku **O aplikácii**.

V zobrazení **O aplikácii** môžete nájsť verziu aplikácie, identifikátor softvéru a informácie o výrobcovi.

Kliknutím na odkaz **Licencia** sa otvorí zobrazenie s informáciami o licencií.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku, kliknite na tlačidlo **Späť**.

Príloha A **Súvisiace dokumenty**

On-line pomocník v aplikácii Unite Axess for Smart Devices

Príloha B **História dokumentov**

Verzia	Dátum	Popis
L	6. september 2024	Pridané varovania týkajúce sa používania funkcií ochrany Face ID a sledovania očí v zariadeniach so systémom iOS do 1.1 Upozornenie a poznámky, strana 1. Pridaná poznámka o miniaplikácii Axxess for Smart Devices do 2.2 Nastavenia v zariadeniach so systémom iOS, strana 7. Aktualizované vysvetlenie filtrovania krvi a privolania zdravotnej sestry/asistenčnej služby v 4.1 Ikony upozornení, strana 14. Pridané informácie systému správ iOS o výstrahách do 6 Varovné správy, strana 24. Menšie úpravy.
K	28. februára 2024	Aktualizovaná časť Upozornenia a poznámky – aktualizovaná výstraha týkajúca sa zariadení DIS. Zamýšľané použitie/účel – Malajzia pridaná k vyhláseniu o konkrétnom zamýšľanom účele použitia Aktualizovaný zoznam ikon v časti Ikony. Aktualizované obrazovky aplikácií tak, aby odrážali najnovší softvér.
J	21. septembra 2023	Aktualizované 1.2.1 Očakávané klinické prínosy, strana 4 s ďalšími nárokmi. Pridané 4.2.1 Informácie o pacientovi v upozorneniach, strana 15. Pridané 4.2.2.1 Upozornenia na nastavenie volania (len pre Ascom Myco), strana 16. Aktualizované obrázky používateľského rozhrania, ktoré odrážajú najnovšie aktualizácie vrátane presunu funkcie Aplikácie do Ascom Login.
I2	24. marca 2023	Pridaná Austrália do časti 1.3 Zamýšľané použitie/účel, strana 3 .
I	19. september 2022	Pridané informácie o prioritných ikonách a podrobné varovné hlásenia. Pridané 4.5 Preposielanie upozornení, strana 17, 1.3.1 Očakávané klinické prínosy, strana 4 a 6.1 Spracovanie výstražných správ, strana 21.
H2	23. marca 2022	Pridané informácie o tom, ako vás prihlásenie do aplikácie Unite Axxess for Smart Devices iOS môže prihlásiť aj do iných podporovaných aplikácií Unite iOS (4.2 Zariadenia iOS: Prihlásenie/odhlásenie, strana 10).
H	28. februára 2022	Zdokumentované združené prihlasovanie a oprávnenia potrebné v systéme Android. Pridané ikony upozornenia na prijatie/odmietnutie. Do stavu dostupnosti v systémoch Android a iOS pridaná funkcia prítomnosti používateľa Nerušiť. Pridané ďalšie výstrahy a informácie o banneri testovacieho prostredia.

G	24. septembra 2021	Pridané informácie o obozretnosti a nahlasovaní incidentov. Odstránené kapitoly Preposlanie upozornenia a spracovanie správy (iba iOS), pretože funkcia chatu je podporovaná iba v aplikácii Unite Collaborate. Aktualizované Zamýšľané použitie. Pridali sa ďalšie informácie o opráveniach. Pridané ďalšie informácie o spracovaní upozornení. Pridaná nová ikona a popis ZZ (zdravotníckeho zariadenia).
F2	16. novembra 2021	Pridané nové upozornenia pre možnosti oznámení v systéme iOS 15. Pridané informácie o obozretnosti a nahlasovaní incidentov. Pridané ďalšie informácie o oprávneniach systému Android. Pridané ďalšie informácie o spracovaní upozornení.
F	17. decembra 2020	Integrácia Imprivata zdokumentovaná.
E	7. októbra 2020	3.1 Usporiadanie na zariadeniach Android, strana 3: Nové. 3.2 Usporiadanie na zariadeniach iOS, strana 4: Nové 3.3 Ikony, strana 4: Pridané ikony. 4.1 Prihlásenie / Odhlásenie na zariadeniach Android, strana 6: Nové. 4.2 Prihlásenie / Odhlásenie na zariadeniach iOS, strana 7: Nové: 5.1.1 Spracovanie upozornení na zariadeniach so systémom Android, strana 8: Nové. 5.1.2 Spracovanie upozornení na zariadeniach so systémom iOS, strana 8: Nové. 5.4 Presmerovanie upozornenia (len pre iOS), strana 11: Pridané len pre iOS. 6 Spracovanie správ (len pre iOS), strana 12: Pridaná poznámka "Platí len pre zariadenia so systémom iOS". 7 Stav dostupnosti v zariadeniach so systémom Android, strana 13: Nové 8 Stav dostupnosti na zariadeniach so systémom iOS, strana 14: Nové. 9 Výstražné správy, strana 15: Nahradené obrázky.
D	piatok, 10. júna 2019	Pridané „Zamýšľané použitie s Connect for Clinical System triedy IIb v EÚ/EZVO“ do kapitoly 2 Zamýšľané použitie, strana 2 a kapitola 9.1 Prihlásenie / Odhlásenie cez Ascom Login, strana 15.
C	1. novembra 2018	Pridaná značka CE s číslom NB.
B	21. septembra 2018	Pridané ikony 3.1.1, stránka 6
A	23. marca 2018	Prvá schválená verzia

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefón +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom