

HURTIGVEILEDNING



Ascom i63 VoWiFi Handset

ascom

Om dette dokumentet

Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene til Ascom i63 VoWiFi Handset.


Innhold

1	Oversikt	1
2	Komme i gang	4
3	Menyer og taster.....	5
4	Grunnleggende funksjoner	6
5	Alarmfunksjoner	9
6	Kjemikaliebestandighet.....	11
7	Relaterte dokumenter.....	12

1 Oversikt

Ascom i63 VoWiFi Handset har et bredt spekter av funksjoner, inkludert telefoni, meldings- og alarmfunksjoner. Det er utformet for bruk i middels krevende miljøer.

Mer informasjon om flere håndsettegenskaper og -funksjoner som er tilgjengelige for hver håndsettvariant finnes i brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN.

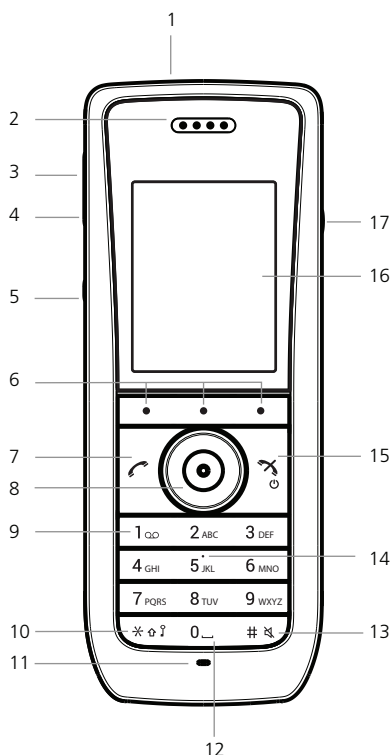

1. Multifunksjons-/PTT- /alarmknapp – Når det gjelder Messenger eller Talker, kan den konfigureres for forskjellige funksjoner. Når det gjelder Protector, brukes den som alarmknapp. Når tasten brukes som Push-to-Talk (PTT), kreves et Messenger-håndsett.
2. Høytaler
3. Volumtast (opp) – Brukes til å øke høyttalervolumet.
4. Volumtast (ned) – Brukes til å redusere høyttalervolumet.
5. Dempe-/PTT-knapp
 - Dempeknappen brukes til å slå på/av lydsignaler i inaktiv modus, dempe ringesignalet for innkommende anrop og slå på/av mikrofonen under anrop.
 - PTT-tasten brukes til å slå på mikrofonen under et PTT-gruppeanrop.¹ Mikrofonen er slått på så lenge tasten er trykket inn.
6. Skjermtester – De tre skjermtestene kan forhåndsconfigureres og brukes sammen med brukergrensesnittet.
7. Ringetast – Brukes til å besvare et anrop, forhåndsvelge et nummer og som snarvei til samtalelisten.
8. Femveis navigeringstast – Navigeringstast med venstre, høyre, opp, ned og bekreftelse (i midten). Disse tastene, med unntak av den midtre tasten, kan konfigureres som snarveier.
9. Tilgang til talemeldinger – Rask tilgang til håndsettets talemeldinger.²

1. Krever et Messenger eller Protector-håndsett.

2. Dette er en systemavhengig egenskap.

10. Tastelås og store/små bokstaver – Kombinert tastelås og veksling mellom store og små bokstaver.
11. Mikrofon
12. Mellomrom – Brukes til å sette inn mellomrom mellom ord.
13. Tast for lyd av – Brukes til å slå på/av lydsignaler i inaktiv modus, dempe ringesignalet for innkommende anrop og slå på/av mikrofonen under anrop.
14. Taktil indikator – Indikerer midten av tastaturet.
15. Avslutt- og av/på-tast – Brukes til å avslutte et anrop, gå tilbake til inaktiv modus, og håndsett av/på ved langt trykk.
16. Fargedisplay – 2-tommers TFT-fargedisplay med bakgrunnsbelysning.
17. Kontakt til hodesett –3,5 mm kontakt for tilkobling av hodesett.³ Den beskyttes mot støv ved å bruke hodesettkontakt-dekselet.

Ikone	Navn	Beskrivelse
	Signalstyrke	Synlig i øvre venstre hjørne. Ikonet viser signalstyrken.
	Fulladet batteri	Ikonet for batterikapasitet er synlig i øvre venstre hjørne. Vises når batteriet har 75 til 100 % gjenværende kapasitet.
	Høyt batterinivå	Vises når batteriet har 50 til 75 % gjenværende kapasitet.
	Middels batterinivå	Vises når batteriet har 25 til 50 % gjenværende kapasitet.
	Lavt batterinivå	Vises når batteriet har 10 til 25 % gjenværende kapasitet.
	Veldig lavt batterinivå	Vises når batteriet har 7 til 10 % gjenværende kapasitet.
	Advarsel om tomt batteri	Blinker når batteriet har 7 % eller mindre gjenværende kapasitet.
	Innkommende anrop	Indikerer innkommende anrop og besvarte anrop i samtalelisten.
	Tapt anrop	Indikerer alle tapte anrop i samtalelisten.
	Tapt anrop	Indikerer alle tapte anrop på statuslinjen.
	Utgående anrop	Indikerer utgående anrop i samtalelisten når du foretar et anrop.
	Ny melding sendt av et annet håndsett	Indikerer at en ny tekstmelding (eller -meldinger) er ankommet. Ikonet forblir på statuslinjen til alle nye meldinger i innboksen er lest.
	Ny melding sendt av systemet	Indikerer at en ny melding (eller -meldinger) som er sendt av systemet, er ankommet. Ikonet forblir i statuslinjen til alle nye meldinger i innboksen er lest.
	Sendt melding	Indikerer at en tekstmelding er sendt.

3. Kompatibel med kablede hodesett for Android.

	Lest melding sendt av et annet håndsett	Indikerer at denne tekstmeldingen er lest.
	Melding er ikke sendt	Indikerer at en tekstmelding (eller -meldinger) som ikke er sendt, ligger i utboksen.
	Talemelding	Ikonet forblir på statuslinjen til du har lyttet til talemeldingen.
	Mikrofon av	Indikerer at mikrofonen er avslått. Den blir aktiv når du trykker lenge på tasten Lyd av eller dempeknappen under et anrop. Under et PTT-anrop er mikrofonen inaktiv når du slipper tasten PTT .
	Høyttaler (aktivert)	Vises på skjermtastlinjen under et anrop.
	Høyttaler (deaktivert)	Vises på skjermtastlinjen under et anrop.
	Lyd av	Vises når du trykker på tasten Lyd av eller dempeknappen .
	Lydløs	Vises når volumet står på Lydløs .
	Bluetooth	Indikerer når Bluetooth er aktivert.
	Bluetooth-hodesett	Indikerer at et Bluetooth-hodesett er tilkoblet håndsettet.
	Hodesett	Indikerer at et hodesett med ledning er tilkoblet håndsettet.
	Tastelås	Indikerer et låst tastatur.
	Telefonlås	Indikerer et låst håndsett.
	Profil aktiv	Indikerer at en profil er aktiv.
	Håndsettvariant Talker	Indikerer at håndsettet er en Talker.
	Håndsettvariant Messenger	Indikerer at håndsettet er en Messenger.
	Håndsettvariant Protector	Indikerer at håndsettet er en Protector.
	Fallalarm	Indikerer at funksjonen fallalarm er aktivert.
	Ingen-bevegelse- alarm	Indikerer at funksjonen Ingen-bevegelse-alarm er aktivert.

2 Komme i gang

Slå på håndsettet

1. Trykk og hold inne avslutningstasten  til håndsettet slår seg på.

Slå av håndsettet

1. Trykk og hold inne avslutningstasten  til Slå av? vises.
2. Trykk på **Ja**.

Lade batteriet

Håndsettet kan lades i en bordlader eller en ladehylle.

1. Plasser håndsettet i bordladeren eller ladehyllen, og trykk det forsiktig ned til meldingen I lader vises på displayet.
2. Når håndsettet er ferdig ladet, tar du det ut ved å vippe det forover.

Batteriet kan også lades i en egen batterilader.


Med noen unntak, kan håndsettet brukes mens det står i en bordlader. Håndsettet vibrerer ikke i laderen.



Lading i et miljø under 5 °C skader batteriet og forkorter levetiden.

3 Menyer og taster

Menyikoner

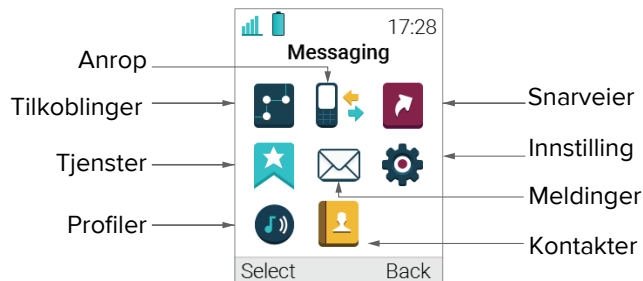

Skjermtester, hurtigtaster og multifunksjonstasten

De tre skjermtestene er plassert under displayet, og funksjonen for hver skjermtest indikeres av teksten i displayet like over tastene.

Hvilke som helst av tastene **0** og **2–9** kan konfigureres som en hurtigtast. En hurtigtast kan konfigureres for å gi tilgang til ofte brukte funksjoner som f.eks. å slå et bestemt nummer, en snarvei til menyen eller å sende en melding. Et langt trykk på ett av disse tallene i inaktiv modus er som standard en snarvei til listen **Ring kontakt**. Multifunksjonstasten kan også programmeres for forskjellige funksjoner ved hjelp av langt trykk og dobbelttrykk.

Mer informasjon om skjermtester, hurtigtaster og multifunksjonstasten finnes i brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN.

Navigere i menyen

Åpne menyen ved å trykke på skjermtasten **Meny** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.

Bruk navigeringstasten til å flytte rundt i menystrukturen.

Velg et alternativ ved å trykke på tilsvarende skjermtest eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.

4 Grunnleggende funksjoner



Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av håndsettvarianten og konfigurasjonen.

En detaljert beskrivelse av alle tilgjengelige funksjoner finnes i brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN.

Foreta et anrop

Hvis du vil foreta et anrop, gjør du ett av følgende:

- Slå nummeret i inaktiv modus, og trykk på ringetasten  eller skjermtasten **Ring**.
- Trykk på ringetasten,  og velg et nummer fra samtalelisten.
- Trykk på en forhåndsprogrammert hurtigtast (de alfanumeriske tastene kan programmeres med et telefonnummer) eller en skjermtast.
- Velg et nummer fra den lokale telefonboken i **Kontakter → Ring kontakt**. Velg et navn fra listen, og deretter trykker du på ringetasten  eller skjermtasten **Ring**.
- Velg et nummer fra **Kontakter → Sentral telefonbok**. Søk etter navn/nummer/siste resultat, og trykk på **Søk**. Trykk på ringetasten,  eller skjermtasten **Ring**.

Besvare og avslutte et anrop

1. Når håndsettet ringer, trykker du på ringetasten  eller skjermtasten **Godta**.
2. Hvis du vil avslutte anropet, trykker du på avslutningstasten .

Anropsinformasjonen lagres i **Samtaleliste**.

Avvise et anrop

1. Når håndsettet ringer, trykker du på avslutningstasten  eller skjermtasten **Avslå**.

Søke etter en kontakt i den lokale telefonboken

1. I **Meny** velger du **Kontakter → Ring kontakt** og trykker på **Velg** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.
2. Begynn med å legge inn de(t) første bokstaven/bokstavene i fornavnet eller etternavnet. Trykk på **Søk** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.
Telefonboken oppgir de samsvarende navnene på displayet. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten.
3. Velg navnet, og trykk på **Ring**.

Redigere en kontakt i den lokale telefonboken

1. I **Meny** går du til **Kontakter → Rediger kontakt**, velger et navn og trykker to ganger på **Rediger**.
2. Foreta ønskede endringer, og trykk på **OK → Lagre**.
En kontakt fra telefonboken er merket med symbolet , som betyr at redigering ikke er mulig.

Legge til en kontakt i den lokale telefonboken

1. I **Meny** går du til **Kontakter → Legg til kontakt**.
2. Velg ett av følgende:

- a. **Ny** – Trykk på **Legg til**, angi navnet, og trykk på **OK**. Legg til et **Jobbnummer**, **Mobilnummer** eller **Annet nummer**, og velg **OK → Lagre**.
- b. **Fra samtaleliste** – Velg et nummer, og velg om det er et **Jobbnummer**, **Mobilnummer** eller **Annet nummer**. Hvis du vil legge inn et navn, velger du **Rediger** og trykker på **OK**.

Slette en kontakt i den lokale telefonboken

1. I **Meny** går du til **Kontakter → Slett kontakt** og velger et navn.
2. Trykk på **Slett** og deretter skjermtasten **Ja**.

Bruke den sentrale telefonboken

Den sentrale telefonboken oppgir kontakter som er tilgjengelige i den sentrale bedriftstelefonbokdatabasen.

1. I **Meny** velger du **Kontakter → Sentral telefonbok**.
2. Velg **Søk etter navn** eller **Søk etter nummer**.
3. Begynn med å legge inn de(n) første bokstaven/bokstavene i fornavnet eller etternavnet, eller nummeret. Trykk på **Søk** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.
Den sentrale telefonboken oppgir de samsvarende navnene på displayet. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten.
4. Trykk på **Mer** for å vise kontakten, legge den til i kontaktlisten eller sende en melding til den valgte kontakten. Trykk på ringetasten,  eller skjermtasten **Ring** for å foreta et anrop.

Alternativet **Siste resultat** i **Sentral telefonbok** oppgir kontaktene det sist ble søkt etter.

Kontrollere talemeldingen

En ny talemelding indikeres av talemeldingsikonet .

1. Hvis du vil ringe talemeldingen i inaktiv modus, trykker du lenge på tasten **1**.

Hvis internummeret ikke er tilgjengelig vises dialogvinduet **Talemeldingsnummer ikke definert**.

Slå høyttaleren på/av

1. Trykk på den venstre skjermtasten under et anrop  for å slå høyttaleren på.
2. Trykk på skjermtasten  for å slå den av.

Slå lydsignaler på/av

1. I inaktiv modus trykker du lenge på tasten **Lyd av** eller dempeknappen for å slå lydsignalet på og av.
Ikonet **Lyd av**  på statuslinjen indikerer at håndsettet er lydløst.

Hvis du trykker kort på tasten **Lyd av** eller trykker på dempeknappen før du besvarer et anrop, blir ringesignalet lydløst.

Slå vibrerende varsling på/av

1. I **Meny** velger du **Innstillinger → Lyd og varslinger → Vibrerende varsling**.
2. Velg **På**, **På ved lydløs** (den vibrerende varslingen er på når håndsettet er dempet) eller **Av**.
3. Trykk på **Velg**.

Endre volumet under et anrop

1. Trykk på den øvre volumknappen for å øke volumet og den nedre for å redusere det, eller trykk på navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

Slå den automatiske tastelåsen på/av

1. I **Meny** velger du **Innstillinger** → **Låser**.
2. Velg **Automatisk tastelås** → **På/av**.

Et låst tastatur indikeres av tastelåsikonet .

Hvis du vil låse opp tastaturet, trykker du på stjernetasten * og deretter skjermtasten **Ja**.

Motta en melding

En meldingstone indikerer at en ny tekstmelding er mottatt. Meldingen vises umiddelbart, og ikonet for ny melding  vises på displayet.

Hvis meldingen mottas under et anrop, varsles brukeren av et pipesignal, og meldingen vises. Meldingen lagres i **Innboks**.



Meldingstilgjengelighet avhenger av håndsettvarianten. Mer informasjon finnes i brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN.

Lese en lagret melding

1. I **Meny** velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Bruk navigeringstasten for å gå til meldingen fra meldingslisten, og velg **Vis**.

Sende en melding

1. I **Meny** velger du **Meldinger** → **Skrive ny melding**.
2. Skriv inn tekst, og velg **Send** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.
3. Tast inn et nummer, eller trykk på den midtre skjermtasten for telefonbokoppslag.
4. Trykk på **Send** eller bekreftelsesknappen på navigeringstasten.

Slette en lagret melding

1. Velg en melding, og trykk på skjermtasten **Mer**.
2. Velg **Slett**, og trykk på skjermtasten **Ja**.

Bytte batteriet

Erstatt batteriet med et nytt dersom kapasiteten og ytelsen svekkes. Ta kontakt med systemadministratoren eller håndsettleverandøren for å få nye batterier.

5 Alarmfunksjoner



Alarmfunksjonstilgjengelighet avhenger av håndsettvarianten og installasjonsmiljøet. Mer informasjon finnes i brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN.

Alarmknapp

Alarmknappen kan konfigureres for å sende en alarm ved et langt trykk eller et dobbelttrykk. Det lange trykket er som standard definert som en testalarm, og dobbelttrykket er definert som en personlig alarm. Alarmen sendes til alarmsentralen, som distribuerer den videre, og så går håndsettet tilbake til inaktiv modus.

Det er mulig å utløse alarmen under andre aktiviteter, som f.eks. når du snakker, redigerer innstillingene eller mens håndsettet er låst.

Fall- og ingen-bevegelse alarm

Fallalarmen utløses hvis håndsettet skråstilles (standard er 45°) fra vertikal stilling i en forhåndsdefinert tidsperiode (standard er syv sekunder). Fallikonet  viser at alarmen er aktivert.

Ingen-bevegelse-alarmen utløses hvis ingen bevegelse påvises i en forhåndsdefinert tidsperiode (standard er 30 sekunder). Ingen-bevegelse-ikonet  viser at alarmen er aktivert.

I advarselsfasen avgir håndsettet et lyd- og vibrerende signal (avhengig av innstillingene) i en forhåndsdefinert tidsperiode (standard er syv sekunder). Håndsettet viser samtidig meldingen `Advarsel om fall` `Avbryte?` eller `Ingen-bevegelse-advarsel`. `Avbryte?`.

Håndsettet sender da alarmen, så sant alarmen ikke blir avbrutt. Håndsettet bekrefter at alarmen er sendt ved å avgi et pipesignal og vibrerende varsel. Håndsettet viser samtidig meldingen `Fallalarm sendt` eller `Ingen-bevegelse-alarm sendt`.

Fall- og ingen-bevegelse- alarmfunksjonene er inaktive under følgende forhold:

- Håndsettet er plassert i en lader.
- Under anrop (avhengig av innstillingene) for å unngå falske alarmer hvis brukeren skråstiller håndsettet eller er ubevegelig under et anrop.
- I en forhåndsdefinert tidsperiode (standard er ti minutter) hvis dempeknappen trykkes på under varselsignalet.

Aktivere fall- og ingen-bevegelse-alarmen

1. I **Meny** velger du **Innstillinger** → **Alarm** → **Aktiver alarm**.
2. Velg de(n) nødvendige alarmen(e). De(t) tilsvarende ikonet/ikonene vises på overskriftslinjen.

Deaktivere fall- og ingen-bevegelse-alarmen

1. I **Meny** velger du **Innstillinger** → **Alarm** → **Deaktiver alarm**.
2. Velg alarmen(e) som skal deaktiveres.

Avbryte fall- og ingen-bevegelse-alarm

1. Bekreft ved å trykke på hvilken som helst tast eller skjermtast **OK** `Advarsel om fall` `Avbryte?` eller `Ingen-bevegelse-advarsel`. `Avbryte?`, som vises på displayet i advarselsfasen.

Utsette fall- og ingen-bevegelse-alarm midlertidig

1. Trykk på dempeknappen under varselssignalet, og trykk deretter på **Ja** for å bekrefte meldingen
Utsette deteksjon av fall-/ingen bev.-alarm?
Det tilsvarende skjermikonet fortsetter å blinke vedvarende til alarmeren er aktiv igjen (standard er ti minutter).

Tilbakestille alarmfunksjonen etter at en alarm er sendt

Hvis du vil tilbakestille alarmfunksjonen, utfører du ett av følgende:

- Trykk på en hvilken som helst knapp på håndsettet.
- Flytt håndsettet til en loddrett stilling (etter fall)
- Flytt håndsettet (etter ingen-bevegelse).
- Trykk på dempeknappen for å slå av ALS.

Akustisk lokaliseringssignal

En alarm kan følges av et akustisk lokaliseringssignal (ALS). ALS er et signal fra håndsettet som varsler i en forhåndsdefinert tid. Signalet stanses ved å trykke på dempeknappen på håndsettet.

6 Kjemikaliebestandighet

Bokstavene og tallene trykket på håndsettet er testet og funnet motstandsdyktige mot avskalling, falming eller nedsliting når håndsettet behandles med vanlige rengjørings- og desinfiseringsmidler eller hvis det utsettes for svette. Aceton kan skade håndsettets plastdeksel og skal ikke brukes.

Følgende kjemikalier har ikke vist skadelige effekter:

- 3 % saltsyre
- M-alkohol (70 % metylert etanol)
- 60 % klorheksidin 0,5 mg/ml

7 Relaterte dokumenter

Brukerhåndboken for VoWiFi-håndsettet Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN

Ascom (Sverige) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom