



Ascom Telligence
Patienten-Handsets

Ascom Telligence Patienten-Handsets — Der Weg zur Patientenzufriedenheit

Ascom Telligence Patienten-Handsets gibt es in unterschiedlichen Ausführungen - von einfachen Modellen, die Patientenruf auslösen bis zu Modellen mit deren Hilfe Fernsehen, TV, Radio, Verdunkelungssysteme und Beleuchtung gesteuert werden kann.

Vorteile


- **Serviceruf.** Der Patient kann gezielte Anfragen (Durst, Schmerzen, Toilette, usw.) an die ihm zugeteilte Pflegekraft richten, wodurch Reaktionszeiten reduziert werden können. Die Pflegekräfte sind durch die konkreten Anfragen besser vorbereitet, was unnötige Laufwege vermeidet.
- **Leistungsfähige Audiofunktion.** Mit Ascom Telligence können Sie die Sprachfunktion selektiv hinzufügen, indem Sie einfach das Patienten-Handset wechseln. Die Mitarbeiter können mit dem Patienten reden, bevor sie ins Zimmer gehen.*
- **Gibt Ihren Patienten eine Stimme.** Klare Sprachkommunikation kann dazu beitragen, den Stress für die Patienten zu reduzieren. Die Familien haben die Gewissheit, dass die Serviceanforderungen ihrer Angehörigen gehört werden.
- **Hohe Hygienestandards.** Alle Ascom Telligence Patientengeräte sind für die wiederholte Reinigung ausgelegt.
- **Der neue Ascom SafeConnect™** ist eine überwachte magnetische Steckvorrichtung für alle Ascom Telligence Patienten-Handsets, die hilft, Geräteschäden zu vermeiden. Der Stecker löst sich zerstörungsfrei, bei zu hoher mechanischer Belastung. Im Falle eines Problems wird ein Abwurfruf ausgelöst.



*Erfordert die Verwendung einer Bedienkonsole oder eines Personal-Mobilgeräts und der entsprechenden Ascom Telligence-Softwarelizenz

ASCOM TELLIGENCE PATIENTEN-HANDSETS:

Patienten-Handsets, 1, 3, 7, 14 Tasten – NUHS1B-14B

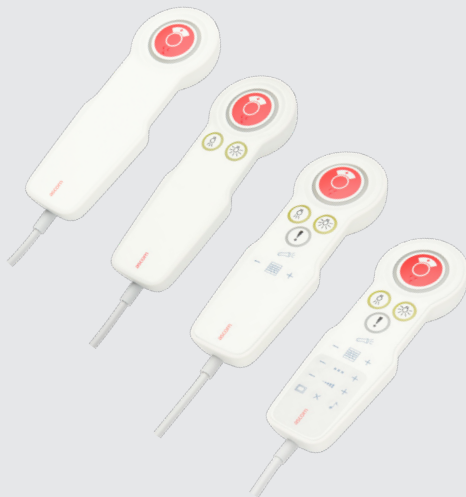

Besondere Leistungsmerkmale:

- Ergonomisch, robust und für die Reinigung mit den meisten Standard-Desinfektionsmethoden im Krankenhaus geeignet.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen, vom einfachen Patientenruf bis hin zu multifunktionalen Geräten, zur Steuerung von Verdunklungssystemen, Zimmerbeleuchtung oder Radio/TV.
- Optionale Modelle unterstützen Vollduplex-Audio mit einstellbaren Lautstärkeregelung.
- Ascom Telligence Patienten-Handsets sind als staubgeschützt, wasserdicht und IP65 zertifiziert.

Die Patienten-Handsets sind Teil des Ascom Telligence Patient-Response-System. Wenden Sie sich an Ascom und erfahren Sie, wie Ascom Telligence die Kommunikation mit Patienten und in Krankenhäusern verbessern kann.

Verfügbarkeit, Konfiguration und technische Spezifikationen von Ascom Produkten, Diensten und Lösungen können je nach Land variieren. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Ascom Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Ascom Deutschland GmbH
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt
T +49 69/580 057-0
www.ascom.de

Ascom Solutions AG
Gewerbepark
CH-5506 Mägenwil
T +41 62 889 50 00
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH
Niederlassung Österreich
Wienerbergstraße 11/12a
A - 1100 Wien
T +43 1 343 9550 0
www.ascom.at

ascom