
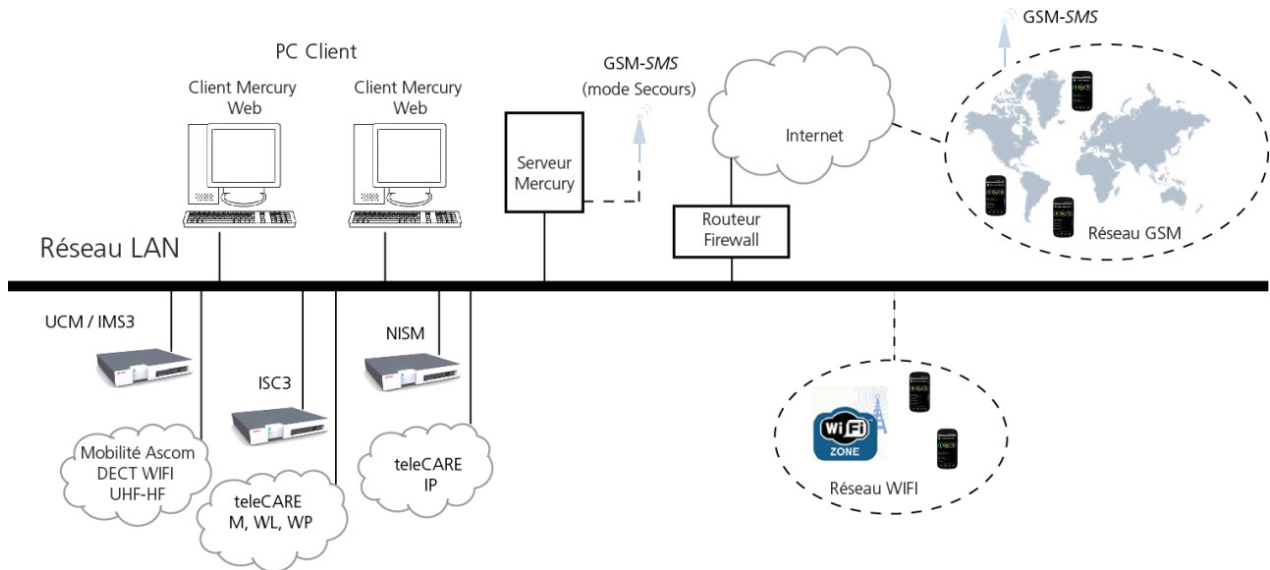


Présentation Mercury

Généralités Mercury

L'applicatif 'Mercury' offre des solutions complètes certifiées constructeur pour répondre à des besoins métiers comme par exemple, la gestion des alarmes PTI et techniques, la gestion de Missions, de disponibilité, la gestion d'appel infirmières et de transport patient, la messagerie évoluée et autres applicatifs métiers PTS (Productivité, Traçabilité, Sécurité).

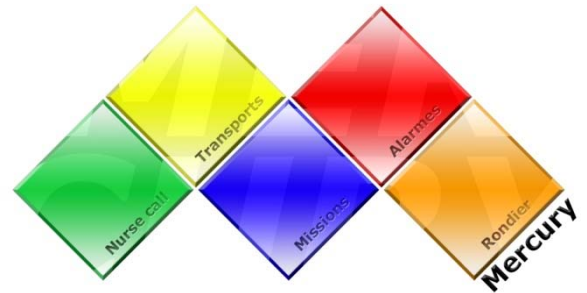

Mercury se présente sous forme de plusieurs packs soumis à licence.

Pack alarmes - Mercury_ALR: Sécurisez votre personnel et votre installation

Pack Missions - Mercury MIS: Optimisez la gestion et le suivi des interventions de votre personnel

Pack Rondiers - Mercury_RD : Suivez en temps réel les rondes de vos gardiens

Pack Transports Patients - Mercury_BR: Optimisez le temps et le déplacement de vos brancardiers

Pack Appels Infirmières – Mercury_NC: Gérez et archivez tous vos appels infirmières

Pré requis Mercury

Ordinateur Type : PC, Serveur

Processeur : Processeur type Pentium Dual Core 2Ghz minimum ou supérieur de type Quad Core

Mémoire : requis 4 Giga minimum, 8 Giga recommandé

Espace disque libre :

2 Giga de libre minimum pour l'installation,

20 Giga pour exploitation

Port Ethernet, Port USB (clé dongle), Port Série

Écran : Résolution 1024 x 768 minimum, 1280x1024 recommandé. Couleurs 32 bits

Système d'exploitation

(jusqu'à la version Mercury 2.5.3) OS: Windows 7 Pro 32/64 Bits, Windows 2008 Server R2 SP1, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 2012 Server R2, (composants Windows : Microsoft.net, Framework 4.5.3 & IIS installés et activés, Runtimes C++ 2015 x86).


(version Mercury 2.6) OS: Identique à, jusqu'à version 2.5.3- et Windows_10 (toutes versions acceptées)

Pour l'application Mercury Client: un système d'exploitation (voir liste ci-dessus), un navigateur web (Internet explorer, IE9 minimum), le Plugin Silverlight v5, sont nécessaires.

Généralités et fonctionnalités de l'appli SmartConnect

SmartConnect est une solution de mobilité ascom via le réseau GSM applicable sur un smartphone. Il Reçoit, analyse, affiche et traite les appels du système d'appel infirmière vers des bips et/ou vers les portables

Architecture Générale Système

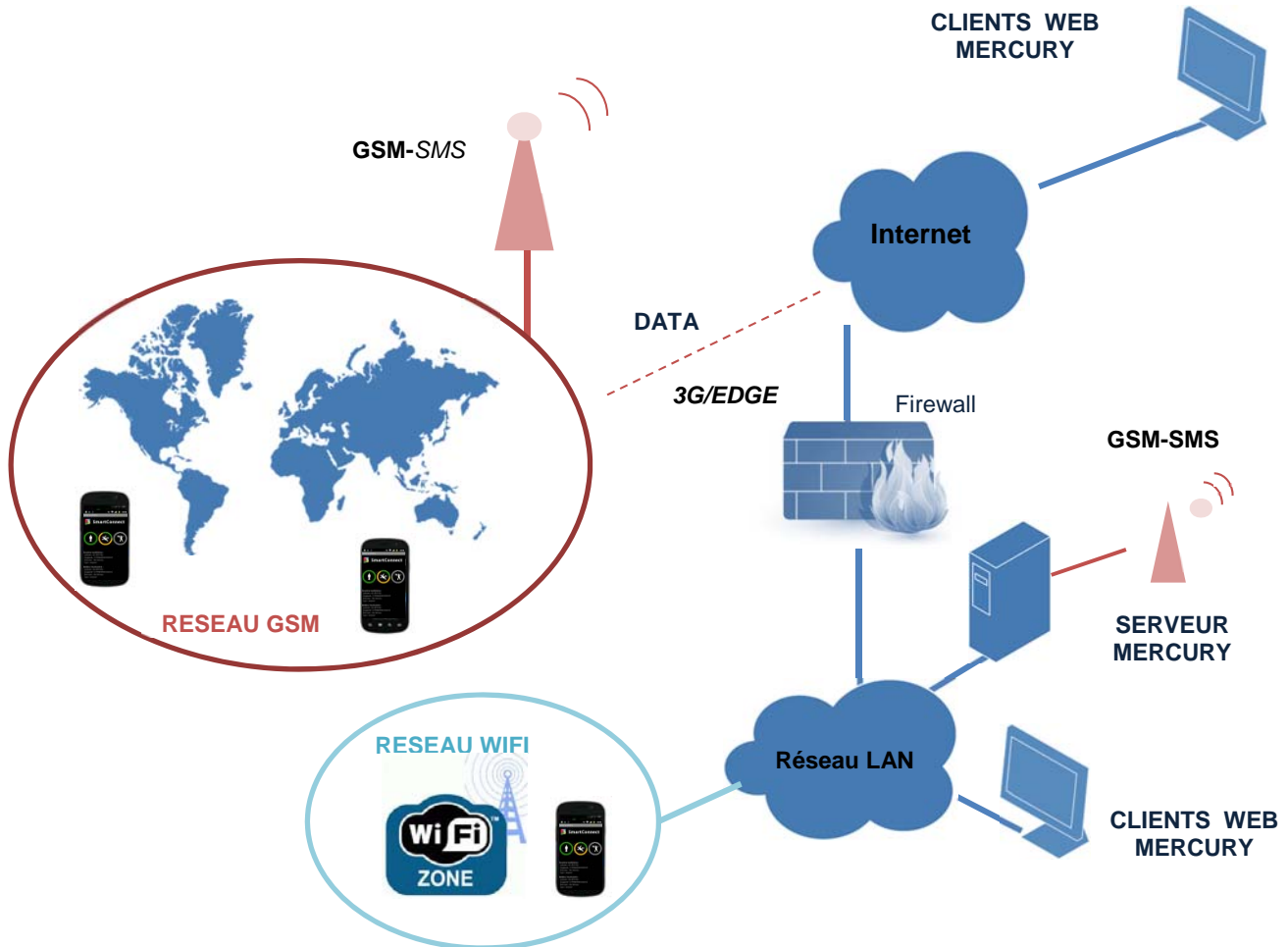

Mode DATA :
 Interactivité
 Messagerie
 Plan Google Maps
 Envoi de photo
 Disponibilité
 DATI et Localisation

Mode SMS Secours :
 Interactivité
 Messagerie
 DATI et Localisation
 Délais d'envoi et de réception plus importants
 Pas de Plan Google Maps
 Pas d'Envoi de photo
 Pas de Disponibilité

Mode Wifi :
 Prioritaire au mode GSM
 Interactivité
 Messagerie
 Plan Google MAPs
 Envoi de photo
 Disponibilité
 DATI et Localisation

Condition requise d'utilisation SmartConnect

Mobile GSM (Hors Fourniture Ascom) :

Smartphone avec OS Android
 OS Android version 4.2 minimum ou supérieure
 Accéléromètre
 GPS



Options

Lecteur NFC - pour les applications Rondier ou localisation badge
 Appareil photo (pour l'application INCIDENT)
 Bluetooth version 4.0 (BLE) : localisation Bluetooth

Abonnement :

Abonnement DATA illimité
 Abonnement SMS illimité