



Patient Explorer Brugermanual

Version 5.0

2023-05-25

Contents

1. Patient Explorer	3
1.1. Adgang til Patient Explorer-modulet	3
1.2. Indlagte patienter	4
1.2.1. Historisering af patientdata	5
1.3. Patientsøgning	5
1.3.1. Lokal søgning	6
1.3.2. Fjernsøgning	7
1.4. Patienter fra ADT	8
1.5. Patienter "Under overførsel"	10
1.6. Anonym patientindlæggelse	11
1.6.1. Afstemning (lokal og fjern)	12
1.7. Styrebjelke	13
1.7.1. Udvælgelse af patienter	13
1.7.2. Ny/indlæg patient	14
1.7.3. Redigér patient	14
1.7.4. Flyt	15
1.7.5. Indlæg	16
1.7.6. Udskriv	17
1.7.7. Slet	18
1.7.8. Redigér	19
1.7.9. Fravalg af patient	20
1.7.10. Luk	20

1. Patient Explorer



For oplysninger om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tilsigtet brug henvises der til USR DNK Digistat Care og/eller USR DNK Digistat Docs (afhængigt af de installerede moduler - for Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (for Digistat Suite NA). Kendskab til og forståelse af det relevante dokument er obligatorisk for korrekt og sikker brug af Patient Explorer, som er beskrevet i dette dokument.

Patient Explorer-modulet gør det muligt at administrere patientdatabasen på et eller flere hospitaler på en enkel og tilpasset måde.

Patientens hoveddata kan hurtigt åbnes, vises, redigeres og, når det er nødvendigt, automatisk indsættes i et valgt dokument/modul i henhold til en konfigureret arbejdsgang.



Patient Explorer har mange tilpasningsmuligheder. Arbejdsgange og procedurer ændres i henhold til den konfiguration, der er valgt af sundhedsorganisationen.

Derfor kan skærmene, der vises af det aktuelle system, der er i brug, være forskellige fra dem, der er beskrevet i denne håndbog.

Denne håndbog beskriver en standardkonfiguration som eksempel.

1.1. Adgang til Patient Explorer-modulet

Sådan får du adgang til Patient Explorer:

- Klik på **Patient** knappen på Control Bar



Fig 1

En skærm, der viser de patienter, der er indlagt på en bestemt afdeling, vises (analog med den, der er vist i Fig 2).

1.2. Indlagte patienter

Skærmen vist i Fig 2 viser alle de patienter, der er indlagt på en afdeling (for eksempel en intensivafdeling).

PATIENTER INDLAGT	1	Jack White	9	Frances Gardner
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
PATIENTER SØG	2	John Smith	10	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	3	John Brown	11	Patient 49
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	01/04/2020 13:41
	4	John Doe	12	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	5	Lenny Malmsteen	13	Jean Osburne
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	6	Bruce Satriani	14	Mary Black
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	7	Patti Zappa	15	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	8	Frank White	16	
	ICU	22/01/2020 09:15	ICU	
I SENG	I OVERFØRSEL			

Fig 2

De nummererede knapper repræsenterer senge (Fig 3).

4	John Doe
ICU	08/11/2016 17:05

Fig 3

På hver sengeknop vises følgende oplysninger (fra venstre):

- Sengens nummer og afdelingens navn.
- Navn på den patient, der holder til i sengen.
- Indlæggelsesdato og -tid (under patientnavnet).

Sådan vælger du en patient og viser deres data:

- Tryk på sengeknappen.

Patienten er valgt. Deres navn vises på **PATIENT**-knappen på "Control Bar" (Fig 4).

ROSE, PATIENT 4	♀	Age 30 years	Day 28
		Code 20000004	

Fig 4

1.2.1. Historisering af patientdata

For at spare diskplads kan patientdata konfigureres, så de bliver arkiveret efter et konfigureret antal dage. Datahentning for “arkiverede” patienter tager tid. Derfor vises der et popop-vindue, der advarer om, at der skal hentes patientdata fra arkivet, og at dette kan tage op til flere minutter, når der vælges en “arkiveret” patient.

- Tryk på **Ja** i popop-vinduet for at fortsætte.

Det er fortsat muligt at bruge Digistat til andre patienter, mens hentningsproceduren kører i baggrunden.

Når proceduren er gennemført, vises en dialogboks med en besked om, at det nu er muligt at vælge patienten.



Det er svært at forudsige, hvor længe gendannelse af patientdata tager, idet det afhænger af størrelsen af patientdata og tekniske behov.

1.3. Patientsøgning

Knapperne i øverste venstre hjørne af skærmen (angivet i Fig 5 **A**) gør det muligt at vælge enten listen over indlagte patienter eller patientsøgefunktionen.

Hvis der trykkes på knappen **INDLAGTE PATIENTER**, vises skærmen, som er beskrevet i det foregående afsnit.

Hvis der klikkes på knappen **PATIENTSØGNING**, aktiveres skærmen og funktioner, der er beskrevet i det følgende afsnit (funktionen **PATIENTSØGNING**). Skærmen vist i Fig 5, vises i dette tilfælde.

PATIENTER INDLAGT	Fornavn	Efternavn	SØG
PATIENTER SØG	Fødselsdato / /	Køn	Patientkode
	Lokation	Numeric	RYD



Fig 5

Der er to søgemuligheder, afhængigt af hvilken knap der er valgt på kommandolinjen (Fig 5 **B**):

1. **LOKAL SØGNING** gør det muligt at søge efter patienterne i det lokale domæne.
2. **FJERNSØGNING** gør det muligt at søge eksternt (for eksempel: alle patienter i hospitalets patientarkiver).

AFSTEMNING (LOKAL og FJERN – Fig 5 **C**) gør det muligt at afstemme data for ukendte/midlertidige patienter, der er oprettet i Identitets-mobilappen, med de faktiske patientdata, der er indsat i hospitalets patientarkiv. **LOKAL AFSTEMNING** søger i Digistat-databasen. **FJERN-AFSTEMNING** søger hospitalets ADT.

Knappen **ANONYMOUS** (Fig 5 **D**) indlægger en anonym patient (dvs. alle patientdata er ukendte) i en af sengene i domænet.



FJERNSØGNING og FJERN-AFSTEMNING er kun tilgængelig, hvis den passende forbindelse mellem Digistat Suite og fjernarkiverne er implementeret.

1.3.1. Lokal søgning

Søgefelterne i det øverste område gør det muligt at specificere de relevante patientoplysninger.

Fornavn	Efternavn	Køn	Fødselsdato	Patientkode	Dato for indlæggelse	Admission code
John	Doe	K	06/02/1978	TMP47		
Gardner	Frances	F	01/01/1959	099999	08/11/2016	A0999
White	Frank	I	12/01/1966	45634	22/01/2020	
White	Jack	M	01/01/1951	35246	08/11/2016	A0111
Osborne	Jean	F	01/01/1963	131313	08/11/2016	A1313
Brown	John	M	01/01/1953	35427	08/11/2016	A0333

Fig 6

Gør følgende for at søge en patient:

- Indtast oplysningerne for den patient, som skal søges, i et eller flere felter (Fig 6 **A**).
- Klik på **Søg** knappen (Fig 6 **B**).

Det centrale område viser en tabel med en liste over alle de patienter, hvis oplysninger passer sammen med de specificerede (Fig 6 **C**).

Hvis **placeringen** er valgt, og en faktisk placering er angivet, udføres søgningen blandt de patienter, der allerede er indlagt på den valgte placering.

- Dobbeltklik på den række, der svarer til en patient for at vælge den pågældende patient.
- Klik på **RYD** for at rydde søgefiltre.

1.3.2. Fjernsøgning

Hvis **FJERNSØGNING** er valgt, udføres søgningen inden for alle de patienter i arkiverne, der er fjerntilsluttede.

- Klik på **FJERNSØGNING**.

Skærbilledet "FJERNSØGNING" vises (Fig. 7).

The screenshot shows the 'Fjernsøgning' (Remote Search) interface. On the left, there is a sidebar with three buttons: 'PATIENTER INDLAGT', 'PATIENTER SØG', and 'PATIENTER SØG'. The 'PATIENTER SØG' button is highlighted in blue. The main area contains search filters: 'Fornavn', 'Efternavn', 'Fødselsdato', and 'Patientkode'. There are buttons for 'SØG' and 'RYD'. Red callout boxes A, B, and C point to the search filters, the 'SØG' button, and the patient list area respectively.

Fig. 7

Sådan søger du efter en patient:

- Indtast de kendte patientdata i søgefelterne (Fig. 7 A).
- Klik på **SØG** (Fig. 7 B).

Liste over resultater vises (Fig. 7 C).

- Dobbeltklik på den række, der svarer til den ønskede patient.

Vinduet "NY/INDLÆG PATIENT" vises (Fig 8).

Fig 8

- Bekræft/rediger patientdata (Fig 8 **A**), og klik på **OK**.

Patienten bliver indlagt på denne måde. Deres navn vises på den angivne sengeknap på skærmen "INDLAGTE PATIENTER" (Fig 2).

1.4. Patienter fra ADT



Knapperne på kommandolinjen udløser specifikke forespørgsler i de tilgængelige databaser, her beskrives to eksempler: "Patienter fra ADT" og "Patienter under overførsel".

I Hvis en specifik softwarekomponent er installeret i serveren, kan systemet indlæse patientdata fra Sundhedsinstitution ADT.

Hvis systemet er konfigureret således, og sengeinformation er tilgængelig, kan patienten direkte indlægges til sengen fra ADT. I dette tilfælde ser afdelingens personale automatisk nye patienter på listen over indlagte patienter.

I modsat fald anføres patienterne, som tildeles afdelingen fra ADT, på en specifik skærm. For at få adgang til denne skærm:

- Klik på ADT knappen på styrebjelken (hvis til stede).

Patienter, der er tildelt fra ADT, vises i det centrale område.

For hver patient vises følgende information:

- Fornavn
- Efternavn
- Køn
- Fødselsdato
- Patientkode

Valg af en patient

- Dobbeltklik på rækken, som svarer til patienten.

Herefter vises **Ny/indlæg patient** vinduet, som indeholder de tilgængelige patientdata (Fig 9).

NY/INDLÆG PATIENT

Efternavn: **John** Fornavn: **Doe** Initialer:

Patientkode: **456389** Fødselsdato: **27/03/1977** Kon:

Noter: 

Dato For Indlæggelse - kl.: **29/06/2020** **13:54:46** Udskrivningsdato - kl.:

Kode for indlæggelse: Højde [cm]: Vægt [kg]:

Lokation: **ICU** Seng: **6**

Fig 9

- Bekræft/rediger patientdata (Fig 8 **A**), og klik på **OK**.

Patienten bliver indlagt på denne måde. Deres navn vises på den angivne sengeknop på skærmen "INDLAGTE PATIENTER" (Fig 2).

1.5. Patienter "Under overførsel"

To knapper på kommandolinjen, som er vist i Fig 10 A, gør det muligt at få vist enten patienter "I senq" eller patienterne "Under overførsel".

Hvis der klikkes på knappen **SENG**, vises skærmen på Fig 2.

Hvis der klikkes på knappen **UNDER OVERFØRSEL**, vises skærmen på Fig 10.



Patienter "Under overførsel" vises kun, hvis forbindelserne mellem Digistat Suite og hospitalets patientarkiv er implementeret.

PATIENTS
ADMITTED

PATIENTS
SEARCH

First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code
Doe	John	M	23/01/1971	43563
Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

IN BED

IN TRANSFER


Fig 10

På dette skærmbillede vises alle patienter "Under overførsel". Patienter "Under overførsel" er patienter, som allerede er blevet overtaget af de hospitalsenheder, der er omfattet af den anvendte arbejdsstation (dvs. patienter med en åben indlæggelse), men som endnu ikke har fået tildelt en seng.

Hver række repræsenterer en patient og viser fornavn, efternavn, køn, fødselsdato og patientkode.

- Dobbeltklik på den række, der svarer til patienten, for at tildele vedkommende en seng.

Følgende vindue åbnes (Fig 11).

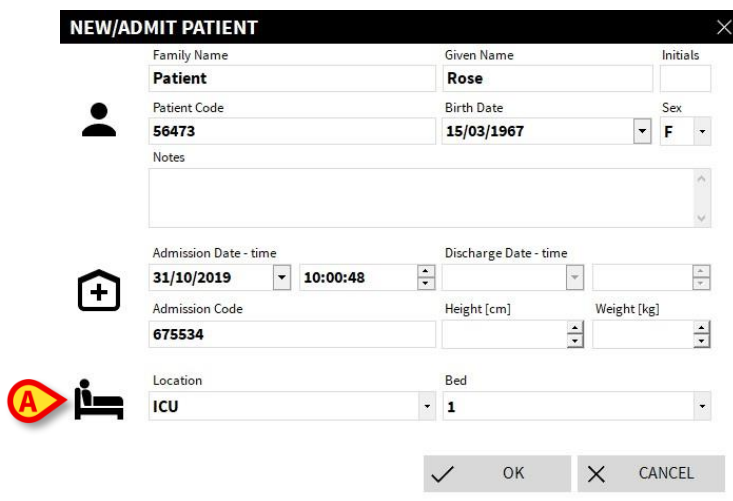

NEW/ADMIT PATIENT

Family Name: **Patient** Given Name: **Rose** Initials:

Patient Code: **56473** Birth Date: **15/03/1967** Sex: **F**

Notes:

Admission Date - time: **31/10/2019 10:00:48** Discharge Date - time:

Admission Code: **675534** Height [cm]: Weight [kg]:

Location: **ICU** Bed: **1**


✓ OK ✗ CANCEL

Fig 11

- Angiv det **Bestemmelsessted** (afdeling) og den **Seng**, som er angivet i Fig 11.
- Klik på **OK**.

Patienten er nu tildelt en placering og en bestemt seng, og patientens navn vises på den tilsvarende sengeknop (Fig 3).

1.6. Anonym patientindlæggelse

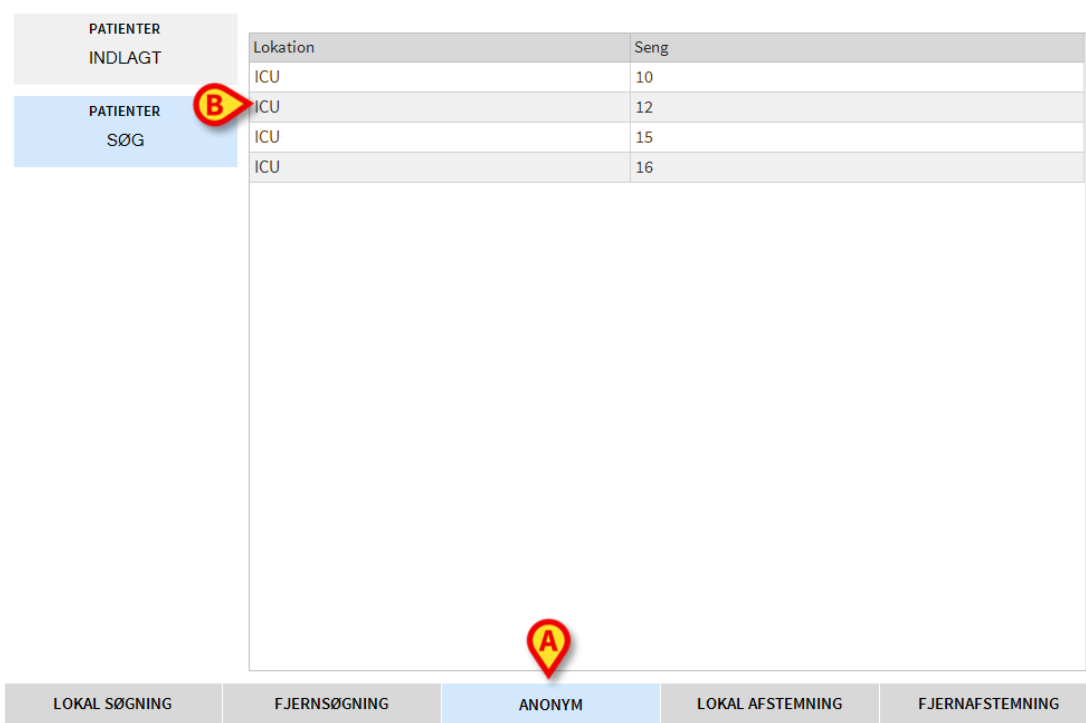

PATIENTER INDLAGT

PATIENTER SØG

Lokation	Seng
ICU	10
ICU	12
ICU	15
ICU	16

LOKAL SØGNING FJERN SØGNING **ANONYM** LOKAL AFSTEMNING FJERNAFSTEMNING

Fig 12

“Anonym patient” skærmen gør det muligt at indlægge en patient, hvis data endnu ikke er tilgængelige. For at få adgang til denne funktionalitet:

- Klik på knappen **Anonym** på kommandolinjen (Fig 12 A).

En skærm, der viser alle de tomme senge i afdelingen, vises (Fig 12 **B**).

For at indlægge en anonym patient i en seng:

- Dobbeltklik på rækken, som svarer til den valgte seng.

Brugerbekræftelse er påkrævet.

Klik på **Ja** for at indlægge patienten.

Et midlertidigt navn tildeles automatisk (for eksempel: Patient 10).

Patientdata kan senere opdateres ved hjælp af Rediger patientfunktionalitet (se afsnit 1.7.2).

1.6.1. Afstemning (lokal og fjern)



Denne procedure er kun relevant, hvis Identity Mobile-applikationen er i brug.

Denne procedure gør det muligt at afstemme dataene fra de ukendte/midlertidige patienter, der er oprettet i mobilapplikationen Identity med de faktiske patientdata indsat i hospitalets patientarkiver. **LOKAL AFSTEMNING** søger i databasen. **FJERNAFSTEMNING** søger på hospitalet ADT.

- Vælg den ukendte/midlertidige patient, der i øjeblikket er tildelt sengen (Fig 2).
- Klik på knappen **Afstemning** på kommandolinjen.

En søgeskærm åbnes.

- Søg efter den patient, hvis data er de faktiske for den ukendte/midlertidige patient. Brug søgefunktionen som beskrevet i det foregående afsnit.
- Dobbeltklik på rækken med de rigtige oplysninger til den midlertidige patient.

Der vises en meddelelse, der spørger, om de valgte patientdata skal overskrive de midlertidige patientdata.

- Klik på **Ja** for at overskrive dataene.

Patientdataene er nu afstemt. De ukendte/midlertidige patientdata er erstattet med de rigtige data, og sengeknappen opdateres for at vise de nye oplysninger.

1.7. Styrebjælke

Styrebjælken (Fig 13) indeholder knapper, som gør det muligt at udføre forskellige handlinger.

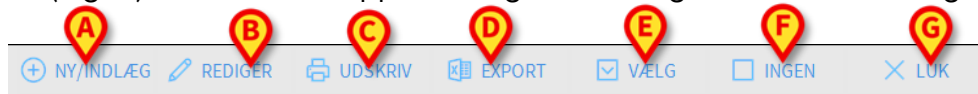


Fig 13

- 1) **Ny/indlæg patient** (Fig 13 **A**) – Denne knap gør det muligt at indtaste en ny patient i databasen og indlægge ham/hende i en seng (se afsnit 1.7.2 vedrørende den detaljerede fremgangsmåde).
- 2) **Redigér patient** (Fig 13 **B**) – Denne knap **gør** det muligt at redigere patientens oplysninger (se afsnit 1.7.3).
- 3) **Udskriv** (Fig 13 **C**) - Opret udskrevne rapporter (antallet og typen af rapporter afgøres i konfigurationen).
- 4) **Eksport** (Fig 13 **D**) Når **denne** knap er aktiveret, gør knappen det muligt at eksportere de aktuelle data til en XLS-fil.
- 5) **Vælg** (Fig 13 **E**) - Denne **knap** gør det muligt at vælge en patient.
- 6) **Ingen** (Fig 13 **F**) – Denne knap gør det muligt **at** fravælge en patient, når han/hun er blevet valgt. Efter klik på **Ingen** knappen forsvinder navnet på den patient, som var valgt forudgående, fra **Patient** knappen.
- 7) **Luk** (Fig 13 **G**) – Denne knap lukker Patient Explorer.

1.7.1. Udvælgelse af patienter

I Digistat Suite er den valgte patient den, hvis navn vises på **PATIENT**-knapen på kontrollinjen (Fig. 14).

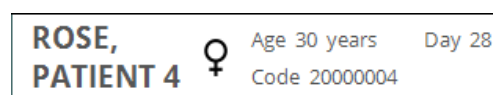


Fig. 14

En patient kan vælges på forskellige modulspecifikke måder, afhængigt af de arbejdsgange, der er i brug. De valgprocedurer, der er mulige i Patient Explorer-modulet, er:

- 1) Klik på en patients seng (Fig 3).
- 2) Dobbeltklik på rækken, der indeholder patientdataene (efter for eksempel en patientsøgning – Fig. 7 **C**).

- 3) Klik på rækken, der indeholder patientdataene, for at fremhæve dem, og klik derefter på **Vælg** på kommandolinjen (Fig 13 E).

1.7.2. Ny/indlæg patient

Ny/indlæg patient knappen (Fig. 15) gør det muligt at indtaste en ny patient i databasen og at indlægge ham/hende i en seng.



Fig. 15

Gør følgende for at indtaste en ny patient:

- Klik på **Ny/indlæg patient** knappen.

Det følgende vindue åbnes (Fig. 16).

A form titled 'NY/INDLÆG PATIENT' with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields and dropdown menus. On the left side, there are three icons: a person, a house with a plus sign, and a bed with a red 'A' in a yellow circle. The fields are: 'Efternavn' (text input), 'Fornavn' (text input), 'Initialer' (text input), 'Patientkode' (text input), 'Fødselsdato' (date dropdown), 'Køn' (gender dropdown), 'Noter' (text area), 'Dato For Indlæggelse - kl.' (date and time dropdown, showing '29/06/2020' and '13:54:46'), 'Udskrivningsdato - kl.' (date and time dropdown), 'Kode for indlæggelse' (text input), 'Højde [cm]' (text input), 'Vægt [kg]' (text input), 'Lokation' (dropdown, showing 'ICU'), and 'Seng' (dropdown, showing '6'). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' with a checkmark icon and 'SLET' with an 'X' icon.

Fig. 16

- Indtast oplysningerne for den nye patient. Felterne, som er markeret med pink, er obligatoriske.
- Klik på **Ok** for at bekræfte.

Herved registreres den nye patient i databasen og indlægges i den seng/på den afdeling, som er specificeret i "Lokation" og "Seng" felterne (Fig. 16).

1.7.3. Redigér patient

Redigér patient knappen (Fig. 17) gør det muligt at redigere oplysningerne for en valgt patient.

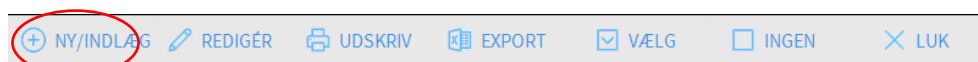


Fig. 17

Husk, at denne knap kun kan benyttes, hvis der er valgt en patient. Navnet skal vises på **Patient** knappen i Control Bar. De udførte "Redigér" handlinger refererer altid til den patient, hvis navn vises i **Patient** knappen.

Gør følgende for at redigere patientens oplysninger:

- Vælg den patient, hvis oplysninger skal redigeres.
- Klik på **Redigér patient** knappen.

Herefter åbnes en menu med forskellige funktioner (Fig.18).



Fig.18

Hver af disse funktioner gør det muligt at udføre et andet indgreb. Funktionerne i de forskellige knapper på menuen beskrives i de følgende afsnit.

1.7.4. Flyt

Flyt knappen (Fig.18 **A**) gør det muligt at registrere overflytningen af en valgt patient til en anden seng og/eller en anden lokation.

Gør følgende for at overflytte en patient:

- Vælg patienten.

Navnet på den valgte patient vises på **Patient** knappen.

- Klik på **Redigér patient** knappen.

Herefter åbnes en rullegardinmenu med forskellige funktioner (Fig.18).

- Klik på **Flyt** knappen (Fig.18 **A**).

Det følgende vindue åbnes (Fig.19).

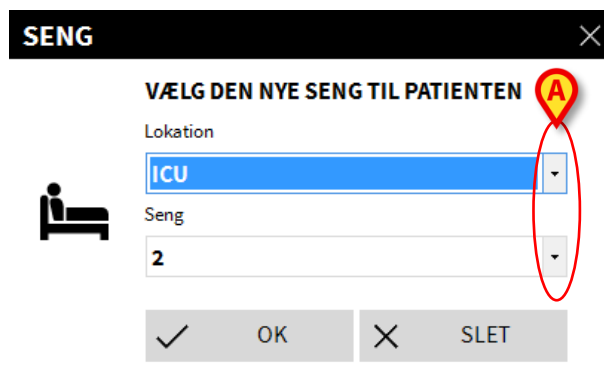


Fig.19

- Brug pileknapperne (Fig.19 **A**) for at vælge den seng, som patienten skal overflyttes til.

Den øverste knap åbner en liste over de tilgængelige lokationer.

Den nederste knap åbner en liste over de tilgængelige senge på den valgte lokation.

Hvis patientens navn vises ved siden af sengens nummer, er sengen allerede i brug.

- Klik på **Ok** for at bekræfte.

Hvis der vælges en seng, som allerede er i brug, og der klikkes på **Ok** knappen, vises en pop-op meddelelse, som spørger om de to patienter skal ombyttes mellem de to senge.

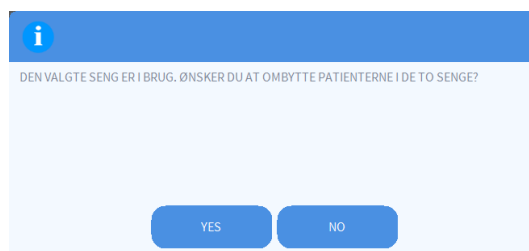


Fig.20

1.7.5. Indlæg

Knappen **Indlæg** giver mulighed for at indlægge en valgt patient til en bestemt placering/seng.

Sådan indlægges en patient:

- Vælg patienten.

Navnet på den valgte patient vises på **PATIENT**-knappen.

- Klik på knappen **Rediger**.

Menuen vist i Fig.18, åbnes.

- Klik på knappen **Tilføj** (Fig.18 **B**).

Vinduet vist i Fig.19, åbnes og viser kun de tilgængelige senge.

- Brug rullemenuerne (Fig.19 **A**) til at vælge destinationens placering/seng.
- Klik på **Ok** for at bekræfte.

1.7.6. Udskriv

Udskriv knappen gør det muligt at registrere udskrivningen af en patient.

Gør følgende for at overflytte en patient:

- Vælg patienten.

Navnet på den valgte patient vises på **Patient** knappen.

- Klik på **Redigér patient** knappen.

Herefter åbnes en menu med forskellige funktioner (Fig. 21).



Fig. 21

- Klik på **Udskriv** knappen (Fig. 21 **A**).

Der vises en pop-op meddelelse, som anmoder om bekræftelse af handlingen (Fig. 22).

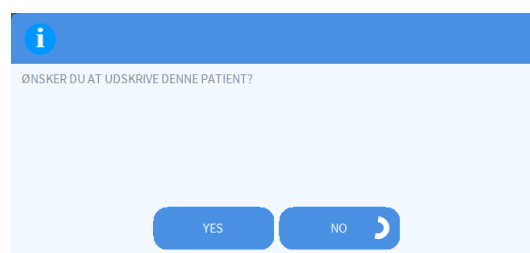


Fig. 22

- Klik på **Ja** for at fortsætte med udskrivningen af patienten.

Denne handling åbner vinduet med patientens oplysninger (Fig. 23 – i modsætning til vinduet, som er vist i Fig. 16, kan du her ændre dato og tidspunkt for udskrivningen).

Fig. 23

- Klik på **Ok** knappen for at afslutte udskrivningen (Fig. 23 **A**).

1.7.7. Slet

Slet knappen gør det muligt at slette alle oplysninger for en patient fra databasen.

Gør følgende for at slette oplysningerne for en patient:

- Vælg patienten.

Navnet på den valgte patient vises på **Patient** knappen.

- Klik på **Redigér patient** knappen.

Herefter åbnes en menu med forskellige funktioner (Fig. 24).



Fig. 24

- Klik på **Slet** knappen (Fig. 24 **A**).

Der vises en pop-op meddelelse, som anmoder om bekræftelse (Fig. 25).

Fig. 25

- Klik på **Ja** knappen for at fortsætte med sletningen.



Sletning af en patient fra databasen er et uigenkaldeligt indgreb. Efter sletning af patienten er det ikke længere muligt at tilgå nogen dokumenter vedrørende ham/hende, som er blevet indlæst ved hjælp af Produkt.

Det er derfor nødvendigt at være yderst varsom ved udførelse af denne handling.

1.7.8. Redigér

Redigér knappen gør det muligt at redigere oplysningerne for en valgt patient.

Gør følgende for at redigere oplysningerne for en patient:

- Vælg patienten.

Navnet på den valgte patient vises på **Patient** knappen.

- Klik på **Redigér patient** knappen.

Herefter åbnes en menu med forskellige funktioner (Fig. 26).



Fig. 26

- Klik på **Redigér** knappen (Fig. 26 **A**).

Herefter åbnes et vindue med patientens oplysninger (Fig. 27).

Fig. 27

- Redigér patientens oplysninger.
- Klik på **Ok** for at bekræfte (Fig. 27 **A**).

1.7.9. Fravalg af patient

Ingen knappen (Fig. 28) gør det muligt at fravælge den valgte patient (hvis navn er vist på PATIENT knappen).

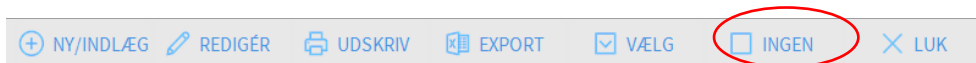


Fig. 28

Gør følgende for at fravælge en patient:

- Klik på **Ingen** knappen (Fig. 28).

Patientens navn forsvinder fra **Patient** knappen.

1.7.10. Luk

Luk knappen (Fig. 29) gør det muligt at lukke søgeskærmbilledet.

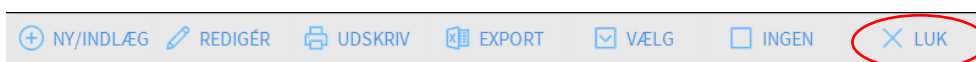


Fig. 29

Gør følgende for at lukke skærmbilledet til søgning af patienten:

- Klik på **Luk** knappen på siden (Fig. 29).