



Control Bar Web Käyttöopas

Versio 3.0

2024-10-31

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

Sisältö

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Webin käynnistäminen	3
1.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen.....	4
1.3 Työalue.....	6
1.3.1 Moduulin valitseminen	6
1.4 Control Bar.....	7
1.5 Päävalikko.....	8
1.5.1 Vaihda salasana	8
1.5.2 Käyttäjäongelmien raportointi	9
1.6 Ylimääräiset alimoduulit.....	10
1.6.1 CDSS Configurator	10
1.6.2 Identity	12

1. Control Bar Web



Lisätietoja tuoteympäristöstä, varotoimista, varoituksista ja käyttötarkoituksesta on osoitteessa *USR FIN Digistat Care ja/tai USR FIN Digistat Docs* (asennetuista moduuleista riippuen - *Digistat Suite EU*) tai *USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA)*. Asianmukaisen asiakirjan tuntemus ja ymmärtäminen ovat pakollisia tässä asiakirjassa kuvatun Control Bar Webin oikean ja turvallisen käytön kannalta.

1.1 Control Bar Webin käynnistäminen

Control Bar Webin käynnistäminen:

- Kirjoita tarkka osoite selaimen osoitepalkkiin.

Seuraava sivu avautuu:

Kuva 1

1.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen

Käyttäjän sisäänkirjautuminen on pakollista, jotta järjestelmän toiminnot voidaan ottaa käyttöön.

login

Username

Password

login

Kuva 2

Sisäänkirjautuminen:

- Kirjoita käyttäjänimesi "Käyttäjänimi" -kenttään (Kuva 2 **A**).
- Syötä salasanasi "Salasana" -kenttään (Kuva 2 **B**).
- Napsauta **Kirjaudu** -painiketta (Kuva 2 **C**).

Käyttäjä on tällä tavalla kirjautunut sisään.



Käyttäjätunnuksen ja salasanan antaa järjestelmänvalvoja. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta ja salasanaa, sinulla ei ole oikeutta käyttää tuotetta.

Kun järjestelmään on päästy, kirjautunutta käyttäjää vastaava lyhenne näkyy ohjauspalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on ADMIN Kuva 3 **A**-kohdassa).



Kuva 3




Käyttäjä, jonka kirjautumistiedot näkyvät Käyttäjä-painikkeessa, on vastuussa kaikista tuotteelle suoritetuista toimista. On erittäin suositeltavaa kirjautua ulos ennen tuotteen työasemalta poistumista järjestelmän virheellisen käytön välttämiseksi.



On mahdollista määrittää tuote sallimaan sisäänkirjautuminen ulkoisen järjestelmän kautta ("single sign on"). Näissä tapauksissa sisäänkirjautumisnäytöllä näkyy oma painike.


Kirjaudu ulos napsauttamalla **Käyttäjä** -painiketta työistunnon aikana. Seuraava valikko avautuu (Kuva 4).

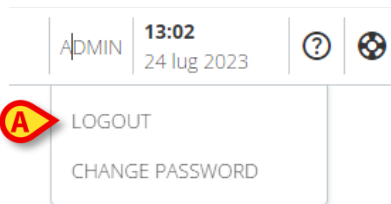

Kuva 4

➤ Napsauta **KIRJAUDU ULOS** (Kuva 4 **A**).

Käyttäjän vahvistus vaaditaan. Vahvistuksen jälkeen käyttäjä kirjataan ulos. Kirjaudu uudelleen sisään napsauttamalla **Käyttäjä**-painiketta uudelleen. Kuvassa näkyvä näyttö Kuva 2 tulee uudelleen näkyviin.

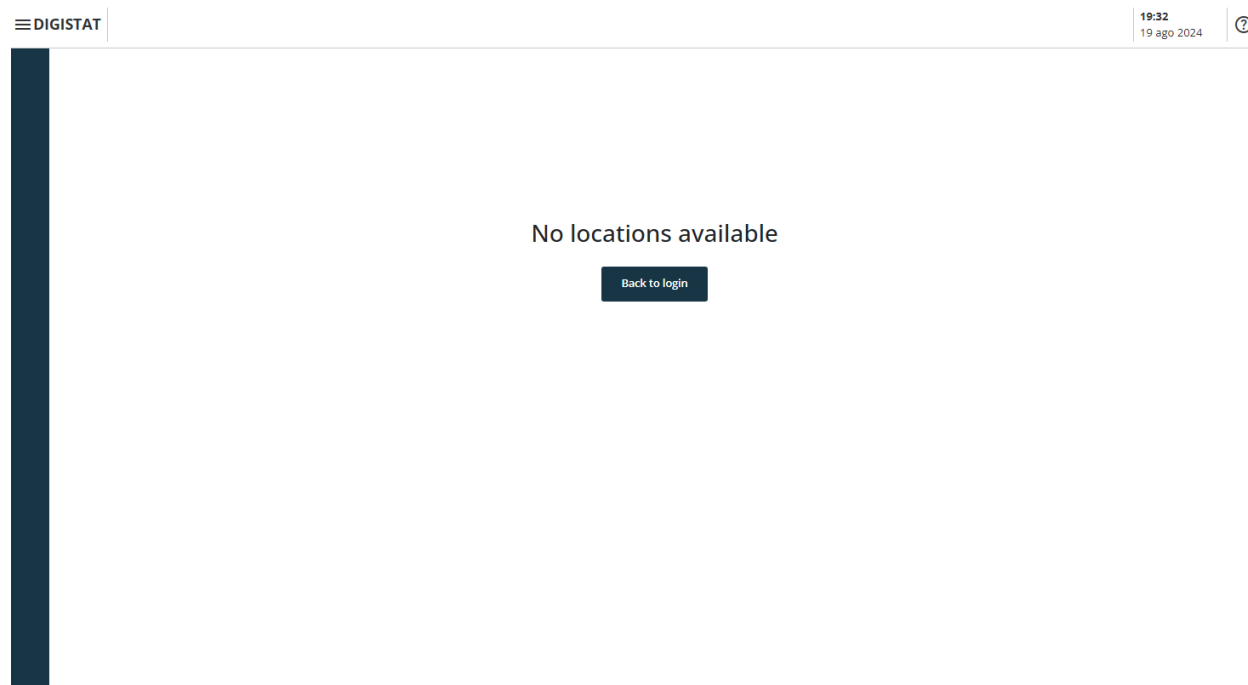

Kuva 5


Jos käyttäjällä ei ole aiemmin liitettyä sijaintia (katso *CGF ENG Digistat Suite MDR* -oppaasta käyttäjän sijainnin yhdistämisen konfigurointi), moduuliin ei ole mahdollista kirjautua. Tässä tapauksessa viesti "No location available" tulee näkyviin (Kuva 5). Lisäksi tarjotaan **Takaisin sisäänkirjautumiseen** -painike, jolla voit palata sisäänkirjautumissivulle ja yrittää kirjautua uudelleen sisään uudella käyttäjällä tai samalla käyttäjällä käyttäjän sijainnin yhdistämisen jälkeen.



"Location" on Digistatin konfigurointikokonaisuus, joka vastaa terveydenhuollon rakenteen tiettyä aluetta. Se voi olla esimerkiksi osasto, vuodeosasto, leikkausosasto jne. terveydenhuoltorakenteen vaatimusten mukaan. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.

1.3 Työalue

Käyttäjän sisäänkirjautumisen jälkeen käytettävissä olevia Digistat Web -moduuleja vastaavat kuvakkeet näkyvät sivupalkissa (Kuva 6 **A**). Työalue (Kuva 6 **B**) näyttää sivupalkista valitun moduulin näytöt ja toiminnot.

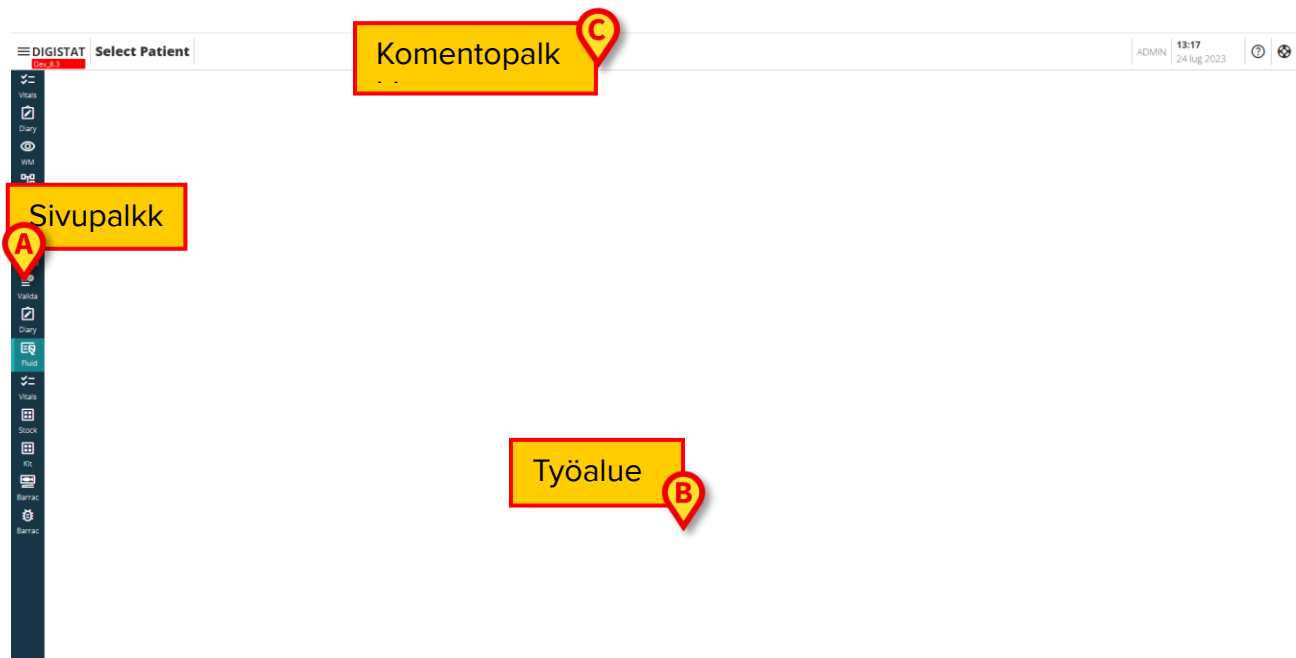

Kuva 6


Control Bar (Kuva 6 **C**) kuvataan osioissa 1.4 ja sitä seuraavissa. Tällä hetkellä valittu moduuli on korostettu.

1.3.1 Moduulin valitseminen

Moduulin valitseminen:

- Napsauta vastaavaa kuvaketta sivupalkissa.

Kuvake korostuu ja moduulin toiminnot näkyvät työalueella.

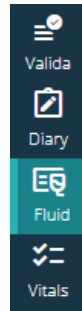

Kuva 7

1.4 Control Bar

Näytön yläosassa näkyvä Control Bar on yhteinen kaikille moduuleille. Sen pääominaisuudet on lueteltu alla.



Kuva 8

- **Valikkopainike** (Kuva 8 **A**) avaa Control Bar Web -päävalikon. Katso kohta 1.5.
- **Potilas-painike** (Kuva 8 **B**). Jos potilasta ei ole valittu, tätä painiketta voidaan napsauttaa potilaan valintamenettelyn käynnistämiseksi. Potilaan valinnan jälkeen näytetään potilaan nimi ja päätiedot. Hyväksytyille potilaille näytetään myös sängyn numero ja osaston nimi. Jos valitulle potilaalle on saatavilla erityisiä Control Bar Web -toimintoja, potilas-painiketta voidaan napsauttaa, jolloin avautuu pudotusvalikko, josta voit käyttää näitä toimintoja (katso lisätietoja osiosta 1.6). Jos potilaan nimen vieressä näkyy riippulukkokuvake -  -, se tarkoittaa, että jotkin potilastiedot/-toiminnot on lukittu kyseiselle potilaalle.




Potilaan valintamenettely suoritetaan yleensä Digistat Patient Explorer Web -moduulissa. Katso potilaan hallintatoimintoja koskevat ohjeet USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta (asiakirja USR FIN Patient Explorer Web). Potilaan valintaan voidaan määrittää muita moduuleja Patient Explorer Webin sijaan. Jos näin on, katso ohjeet erityisistä asiakirjoista.

- Kohdassa Kuva 8 **C** ilmoitettua aluetta voidaan käyttää ilmaisemaan, että käyttäjälle on tehty ilmoituksia.
- Käyttäjä-painike tarjoaa pääsyn sisään-/uloskirjautumis- ja salasananvaihtotoimintoihin (Kuva 8 **D**).
- Päivämäärä - kellonaika (Kuva 8 **E**).
- Käytä **Ohje**-painiketta (Kuva 8 **F**) päästäksesi online-ohjeeseen.
- Napsauta  (Kuva 8 **G**) -kuvaketta luodaksesi ongelmaraportin, joka lähetetään tekniselle tuelle tukea varten. Katso kohta 1.5.2.

1.5 Päävalikko

Valikkopainike (Kuva 8 **A**) avaa seuraavan valikon (Kuva 9).

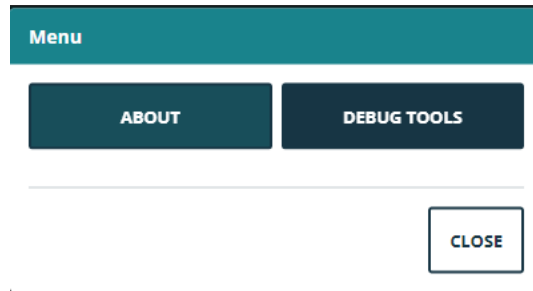

Kuva 9

Tietoja-painike näyttää ikkunan, joka sisältää tiedot asennetusta Digistat Suite -versiosta ja siihen liittyvistä lisensseistä (katso lisätietoja erityisestä dokumentaatiosta).


Tuotteen todellinen merkintä on asiakastyöasemilla, mobiililaitteissa ja verkkomoduuleissa näkyvä Tietoja-ruutu, johon Digistat Suite on asennettu.

Vianmäärittästyökalut -painike on varattu järjestelmänvalvojille.

1.5.1 Vaihda salasana


Käyttäjän salasanan vaihtaminen:

- Napsauta **Käyttäjä**-painiketta Control Barissa (Kuva 10 **A**).

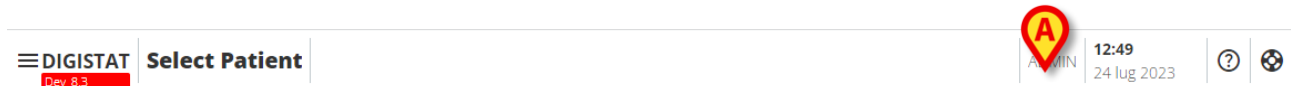

Kuva 10


- Seuraava valikko avautuu (Kuva 11).

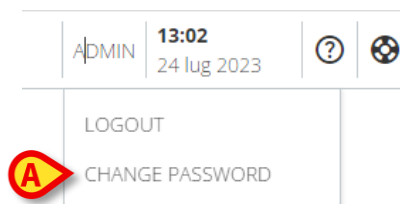

Kuva 11

- Napsauta **Vaihda salasana** (Kuva 11 **A**). Seuraava näyttö avautuu (Kuva 12).

CHANGE PASSWORD

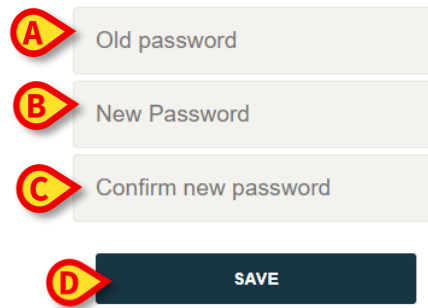


Kuva 12

- Kirjoita nykyinen salasana "VANHA salasana" -kenttään (Kuva 12 **A**)
- Kirjoita uusi salasana "Uusi salasana" -kenttään (Kuva 12 **B**).
- Kirjoita uusi salasana uudelleen kenttään "Vahvista uusi salasana" (Kuva 12 **C**).
- Napsauta **Tallenna** (Kuva 12 **D**).

1.5.2 Käyttäjäongelmien raportointi

Jos  kuvake on näkyvissä Control Barissa (Kuva 13 **A**), voit luoda ongelmaraportin ja saada tarvittaessa teknistä tukea.

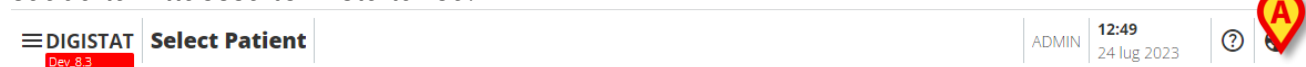


Kuva 13

	<i>Kuvakkeen läsnäolo riippuu järjestelmävaihtoehdosta EnableUserIssueReporting. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.</i>
---	---

Toimi näin:

- Napsauta  kuvaketta (Kuva 13 **A**). Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 14).

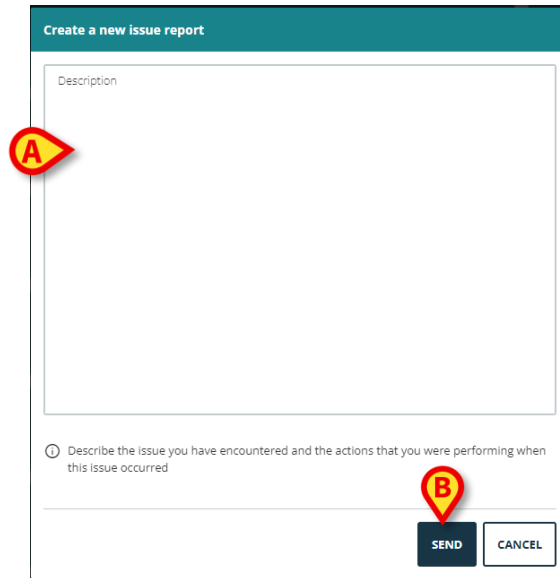

Create a new issue report

Description

Describe the issue you have encountered and the actions that you were performing when this issue occurred

SEND CANCEL

Kuva 14

- Kirjoita ongelman kuvaus "Kuvaus" -kenttään (Kuva 14 **A**).
- Napsauta **Lähetä** (Kuva 14 **B**).

Vahvistus annetaan, mukaan lukien myöntäjän tunnusnumero.

1.6 Ylimääräiset alimoduulit

Tässä jaksossa kuvatut alimoduulit voivat olla läsnä tai puuttua, riippuen tuotteen kokoonpanosta terveydenhuolto-organisaatiossa. Kukin alimoduuli voidaan avata napsauttamalla tiettyä valikkokohtaa avattavasta valikosta, joka näkyy potilaan painikkeen vieressä. Ne liittyvät potilaaseen, eli ne ovat käytettävissä vain, jos potilas on jo valittu.

1.6.1 CDSS Configurator

CDSS Configurator -alimoduuli voidaan ottaa käyttöön konfiguroinnin avulla Control Bar Web -lisäosana. CDSS Configurator -alimoduulin avaaminen:

- Valitse asianomainen potilas.



Katso USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta potilaan valintamenettely (dokumentoi USR FIN Patient Explorer Web).


Jos potilasvalinnan jälkeen käytettävissä on muita Control Barin alimoduuleja,  kuvake näkyy potilaspainikkeessa (Kuva 15 **A**).



Kuva 15

- Napsauta  kuvaketta.

Näyttöön tulee avattava ikkuna, jossa luetellaan käytettävissä olevat lisäalimoduulit (Kuva 16).

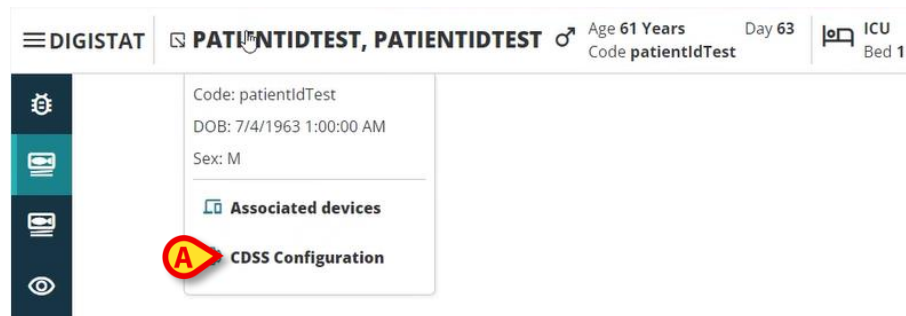

Kuva 16

- Napsauta "CDSS CONFIGURATION" (Kuva 16 A).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät säännöt (Kuva 17).

RULES		
	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Kuva 17

Katso täydellinen kuvaus ja tämän alimoduulin käyttöohjeet CDSS Configuratorin käyttöoppaasta (dokumentoi USR FIN CDSS Web).

1.6.2 Identity

Identityn alimoduuli voidaan ottaa käyttöön konfiguroinnilla Control Bar Webin lisäosana. Identity-alamoduulin avaaminen:

- Valitse asianomainen potilas.



Katso USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta potilaan valintamenettely (asiakirja: USR FIN Patient Explorer Web).

Jos potilasvalinnan jälkeen käytettävissä on muita Control Barin alimoduuleja, kuvake näkyy potilaspainikkeessa Kuva 18 (**A**).



Kuva 18

- Napsauta  kuvaketta.


Näyttöön tulee avattava ikkuna, jossa luetellaan käytettävissä olevat lisäosiot (Kuva 19).



Kuva 19

- Napsauta "Associated Devices" (Kuva 19 **A**).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät laitteet (Kuva 20).

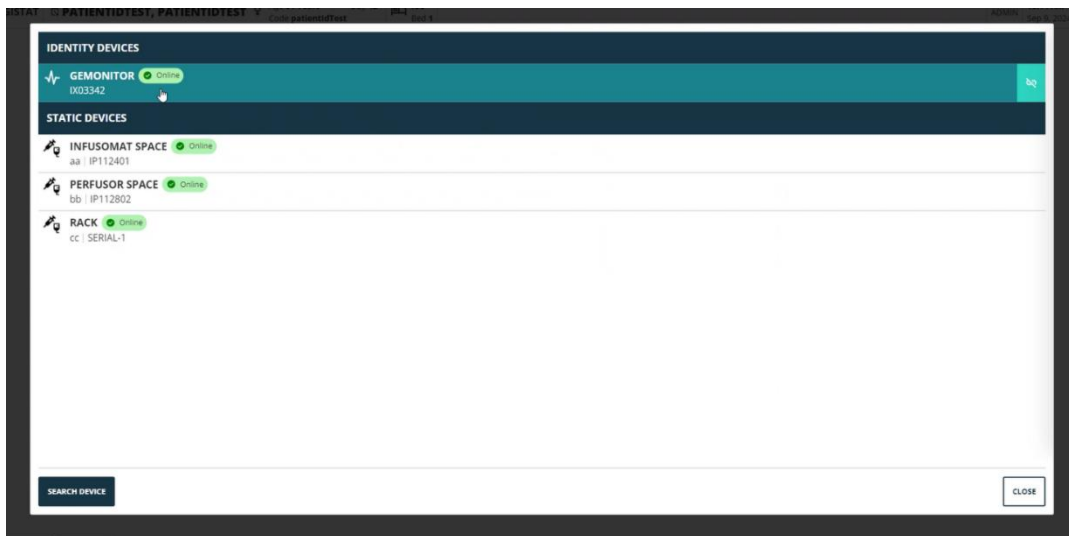

Kuva 20

Katso Identityn käyttöoppaasta täydellinen kuvaus ja tämän alimoduulin käyttöohjeet (asiakirja USR FIN Identity Web).