



# **Patient Explorer**

# **Käyttäjän ohjekirja**

**Tarkistus 2.0**

**2023-03-27**

# Sisällysluettelo

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Patient Explorer .....</b>                                      | <b>3</b> |
| 1.1. Patient Explorer -moduulin käyttäminen.....                      | 3        |
| 1.2. Osastolle otetut potilaat.....                                   | 4        |
| 1.2.1. Potilastietojen arkistointi.....                               | 5        |
| 1.3. Potilashaku .....                                                | 5        |
| 1.3.1. Paikallinen haku .....                                         | 6        |
| 1.3.2. Etähaku.....                                                   | 7        |
| 1.4. Potilaat ADT-järjestelmästä (Admission/Discharge/Transfer) ..... | 8        |
| 1.5. Potilaat, joiden tila on "Siirrossa" .....                       | 9        |
| 1.6. Anonyymi potilaan ottaminen osastolle .....                      | 11       |
| 1.6.1. Yhteensovittaminen (paikallinen ja etänä suoritettava).....    | 12       |
| 1.7. Komentopalkki.....                                               | 13       |
| 1.7.1. Potilasvalinta.....                                            | 13       |
| 1.7.2. Uusi/kirjaa osastolle potilas.....                             | 14       |
| 1.7.3. Muokkaa potilastietoja.....                                    | 14       |
| 1.7.4. Siirrä .....                                                   | 15       |
| 1.7.5. Kirjaa osastolle .....                                         | 16       |
| 1.7.6. Kotiuta .....                                                  | 17       |
| 1.7.7. Poista.....                                                    | 18       |
| 1.7.8. Muokkaa.....                                                   | 19       |
| 1.7.9. Poista potilaan valinta .....                                  | 20       |
| 1.7.10. Sulje .....                                                   | 20       |

# 1. Patient Explorer



Tuoteympäristöä koskevat yleiset ja yksityiskohtaiset tiedot ja Control Bar -ohjelmiston käyttöohjeet ovat tuotteen erityisasiakirjoissa. Näiden asiakirjojen tuntemus ja ymmärtäminen on pakollista tässä asiakirjassa kuvatun Patient Explorer -moduulin asianmukaiselle ja turvalliselle käytölle

Patient Explorer -moduulin avulla voidaan hallinnoida yhden tai useamman sairaalan potilastietokantaa yksinkertaisella ja räätälöidyllä tavalla.

Potilaan pää tietoihin pääsee nopeasti ja niitä voidaan näyttää ja muokata nopeasti ja tarvittaessa lisätä automaattisesti valittuun asiakirjaan/moduuliin konfiguroidun työnkulun mukaisesti.



*Patient Exploreria voidaan muokata kattavasti. Työnkulut ja menettelyt vaihtelevat terveydenhuolto-organisaation valitseman konfiguraation mukaan.*

*Siksi todellisessa järjestelmässä esitettävät näytöt voivat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista.*

*Tässä käyttöoppaassa kuvataan esimerkkinä vakiokonfiguraatio.*

## 1.1. Patient Explorer -moduulin käyttäminen

Käyttääksesi Patient Exploreria:

- Klikkaa tehtäväpalkin **Potilas**-painiketta



**Kuva 1**

Esille tulee näyttö, jossa luetellaan potilaat, jotka on otettu tietylle osastolle (kuten on esitetty kuvassa 2).

## 1.2. Osastolle otetut potilaat

Kuvassa 2 esitetyllä näytöllä näkyvät kaikki potilaat, jotka on otettu osastolle (esimerkiksi tehohoitoyksikköön).

|                         |                              |                 |                               |                 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| POTILAAT<br>VUODEPAIKAT | 1<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Jack White      | 9<br>ICU<br>08/11/2016 17:05  | Frances Gardner |
| POTILAAT<br>ETSI        | 2<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | John Smith      | 10<br>ICU                     |                 |
|                         | 3<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | John Brown      | 11<br>ICU<br>01/04/2020 13:41 | Patient 49      |
|                         | 4<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | John Doe        | 12<br>ICU                     |                 |
|                         | 5<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Lenny Malmsteen | 13<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Jean Osburne    |
|                         | 6<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Bruce Satriani  | 14<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Mary Black      |
|                         | 7<br>ICU<br>08/11/2016 17:05 | Patti Zappa     | 15<br>ICU                     |                 |
|                         | 8<br>ICU<br>22/01/2020 09:15 | Frank White     | 16<br>ICU                     |                 |
| SÄNGYSSÄ                | SIIRTY                       |                 |                               |                 |

2

Numeroidut painikkeet edustavat vuoteita (Kuva 3).

|     |                  |
|-----|------------------|
| 4   | John Doe         |
| ICU | 08/11/2016 17:05 |

Kuva 3

Jokaisessa vuodepainikkeessa näkyvät seuraavat tiedot (vasemmalta):

- Vuoteen numero ja osaston nimi.
- Kyseistä vuodetta käyttävän potilaan nimi.
- Osastolle ottamisen päivämäärä ja aika (potilaan nimen alapuolella).

Potilaan valitseminen ja hänen tietojensa näyttäminen:

- Napsauta vuodepainiketta.

Potilas valitaan. Hänen nimensä näkyy ohjauspalkin **PATIENT (POTILAS)** -painikkeessa (Kuva 4).

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| PATIENT 4, ROSE | ♀ | Ikä: 53 vuotta päivä: 4 |
|                 |   | Koodi: 45362            |

Kuva 4



Valittu potilas on aina se, jonka nimi näkyy PATIENT (POTILAS) -painikkeessa

### 1.2.1. Potilastietojen arkistointi

Potilastiedot voidaan määrittää tallentamiseen käytettävän levytilan säästämiseksi arkistoitaviksi määritettävissä olevan päivien määrän jälkeen. Arkistoitujen potilaiden tietojen palauttaminen vie aikaa. Kun valitset arkistoidun potilaan, näkyviin tulee siksi ponnahdusikkuna, jossa sinua varoitetaan, että potilastiedot on noudettava arkistosta ja että tämä saattaa viedä useampia minuutteja.

➤ Jatka napsauttamalla ponnahdusikkunassa **Kyllä**.

Digistat-sovellusta on mahdollista käyttää muiden potilaiden tietojen näyttämiseen sillä välin, kun noutoprosessi on käynnissä taustalla.

Kun prosessi on suoritettu loppuun, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että potilas on nyt mahdollista valita.



*Potilastietojen palauttamiseen tarvittava aika riippuu tietojen koosta ja teknisistä tarpeista, eikä sitä ole välttämättä mahdollista ennustaa tarkasti.*

### 1.3. Potilashaku

Näytön vasemmassa yläkulmassa olevilla painikkeilla (näkyvät paikassa Kuva 5 **A**) voidaan valita joko osastolle otettujen potilaiden luettelo tai potilashakutoiminto.

Jos **POTILAAT VUODEPAIKAT** -painiketta napsautetaan, edellisessä kohdassa kuvattu näyttö tulee näkyviin.

Jos **POTILAAT ETSI** -painiketta napsautetaan, seuraavassa kohdassa kuvatut toiminnot aktivoituvat **POTILAAT ETSI** -toiminto). Tässä tapauksessa esille tulee kuvassa Kuva 5 näkyvä näyttö.

**Kuva 5**

Hakumahdollisuuksia on kaksi, ja ne riippuvat siitä, mikä painike komentopalkista valitaan (Kuva 5 **B**):

1. **PAIKALLINEN HAKU** -haulla voidaan hakea potilaita paikalliselta toimialueelta.
2. **ETÄHAKU** -haulla voidaan suorittaa etähaku (esimerkiksi kaikki sairaalan potilasarkistoissa olevat potilaat).

**TÄSMÄYTYS** (PAIKALLINEN ja ETÄ – Kuva 5 **C**) mahdollistaa Identity-mobiilisovelluksella luotujen tuntemattomien/tilapäisten potilaiden tietojen täsmäyttämisen sairaalan potilasarkistoihin tallennettuihin todellisiin potilastietoihin. **PAIKALLINEN TÄSMÄYTYS** hakee tietoja Digistat-tietokannasta. **ETÄTÄSMÄYTYS** hakee tietoja sairaalan ADT-järjestelmästä.

**NIMETÖN**-painike (Kuva 5 **D**) ottaa nimettömän potilaan (tämä tarkoittaa potilasta, jonka kaikki tiedot ovat tuntemattomat) sisään johonkin toimialueen vuodepaikoista.



*REMOTE SEARCH (ETÄHAKU) ja ETÄTÄSMÄYTYS ovat on käytettävissä vain, jos Digistat Suiten ja etäarkistojen välille on muodostettu asianmukainen yhteys.*

### 1.3.1. Paikallinen haku

Yläosan hakukentissä voidaan määrittää asiaankuuluvat potilastiedot.

| Etunimi | Sukunimi | Sukupuoli | Syntymäpäivä | Henkilötunnus | Kirjauspäivämäärä | Kirjauskoodi |
|---------|----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| John    | Doe      | K         | 06/02/1978   | TMP47         |                   |              |
| Gardner | Frances  | F         | 01/01/1959   | 099999        | 08/11/2016        | A0999        |
| White   | Frank    | I         | 12/01/1966   | 45634         | 22/01/2020        |              |
| White   | Jack     | M         | 01/01/1951   | 35246         | 08/11/2016        | A0111        |
| Osburne | Jean     | F         | 01/01/1963   | 131313        | 08/11/2016        | A1313        |
| Brown   | John     | M         | 01/01/1953   | 35427         | 08/11/2016        | A0333        |

**Kuva 6**

Potilaan haku:

- Syötä etsimäsi potilaan tiedot yhteen tai useampaan kenttään (Kuva 6 **A**).
- Klikkaa Etsi-painiketta (Kuva 6 **B**).

Keskellä näytetään taulukko kaikista potilaista, joiden tiedot sopivat hakusanoihin (Kuva 6 **C**).

Jos **Location (Sijainti)** on valittu ja todellinen sijainti määritetään, haku suoritetaan potilaille, jotka jo on otettu osastolle valitussa sijainnissa.

- Valitse potilas kaksoisnapsauttamalla potilasta vastaavaa riviä.
- Poista hakusuodattimet napsauttamalla **TYHJENNÄ**.

### 1.3.2. Etähaku

Jos **ETÄHAKU** on valittu, haku suoritetaan kaikista potilaista, jotka ovat olemassa etäyhteydessä olevissa arkistoissa.

- Napsauta **ETÄHAKU**.

ETÄHAKU -näyttö tulee näkyviin (Kuva 7).

POTILAAT  
VUODEPAIKAT

POTILAAT  
ETSI

Etunimi  Sukunimi

Syntymäp... / / Sukupuoli  Henkilö...

ETSI

TYHJENNÄ

A B C

|                  |         |          |                                   |                       |
|------------------|---------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| PAIKALLINEN HAKU | ETÄHAKU | ANONYymi | PAIKALLINEN<br>YHTEENSOVITTAMINEN | ETÄYHTEENSOVITTAMINEN |
|------------------|---------|----------|-----------------------------------|-----------------------|

**Kuva 7**


Potilaan hakeminen:

- Kirjoita tunnetut potilastiedot hakukenttiin (Kuva 7 **A**).
- Napsauta **ETSI** (Kuva 7 **B**).

Tulosluettelo tulee näkyviin (Kuva 7 **C**).

- Kaksoisnapsauta haluttua potilasta vastaavaa riviä.

UUSI / SISÄÄNKIRJAA POTILAS -ikkuna tulee näkyviin (Kuva 8).

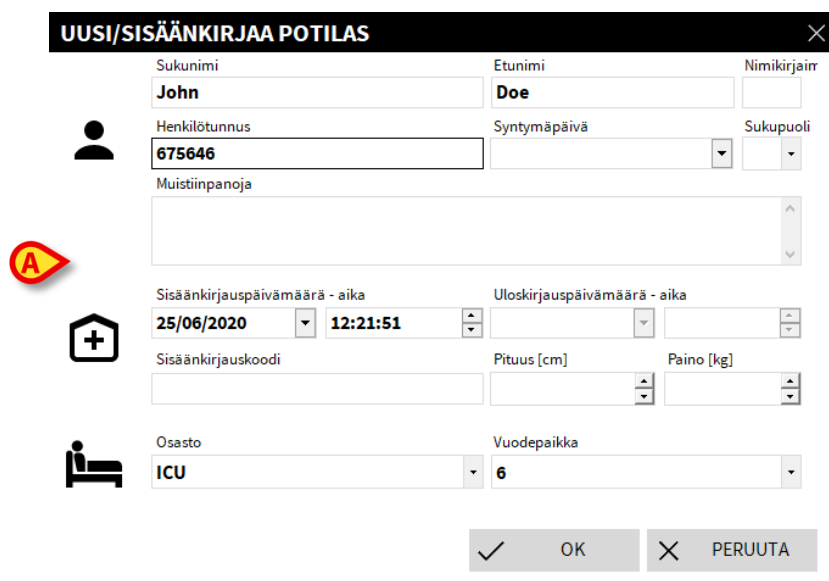

**Kuva 8**

- Tarkista/muokkaa potilastiedot (Kuva 8 **A**) ja napsauta **OK**.

Näin potilas otetaan osastolle. Hänen nimensä näkyy määritetyssä vuodepainikkeessa OSASTOLLE OTETUT POTILAAT -näytöllä (2).

## 1.4. Potilaat ADT-järjestelmästä (Admission/Discharge/Transfer)



*Komentopalkin painikkeet käynnistävät tietty kyselyt käytävissä olevissa tietokannoissa, tässä kuvataan kaksi esimerkkiä: "ADT-potilaat" ja "siirtopotilaat".*

Jos tietty ohjelmistokomponentti on asennettu palvelinpuolelle, järjestelmä voi vastaanottaa potilastiedot sairaalan ADT-järjestelmästä.

Potilas voidaan kirjata vuodepaikkaan suoraan ADT-järjestelmällä, jos järjestelmä on määritetty sitä varten ja jos vuodepaikan tiedot on annettu. Tässä tapauksessa osaston henkilökunta näkee uudet potilaat automaattisesti osastolle kirjattujen potilaiden listassa (2).

Muussa tapauksessa ADT-järjestelmällä osastolle kirjatut potilaat luetellaan erityisellä sivulla. Avaa tämä sivu seuraavasti:

- Klikkaa komentopalkin ADT-painiketta (jos läsnä).


ADT-järjestelmällä kirjatut potilaat luetellaan näytön keskeisellä alueella. Jokaiselle potilaalle annetaan seuraavat tiedot:

- Etunimi
- Sukunimi
- Sukupuoli
- Syntymäaika
- Henkilötunnus

Valitse potilas seuraavasti:

- Kaksoisklikkaa potilaan riviä.

Näytölle avautuu saatavilla olevat potilastiedot sisältävä UUSI / SISÄÄNKIRJAA POTILAS -ikkuna (Kuva 9).

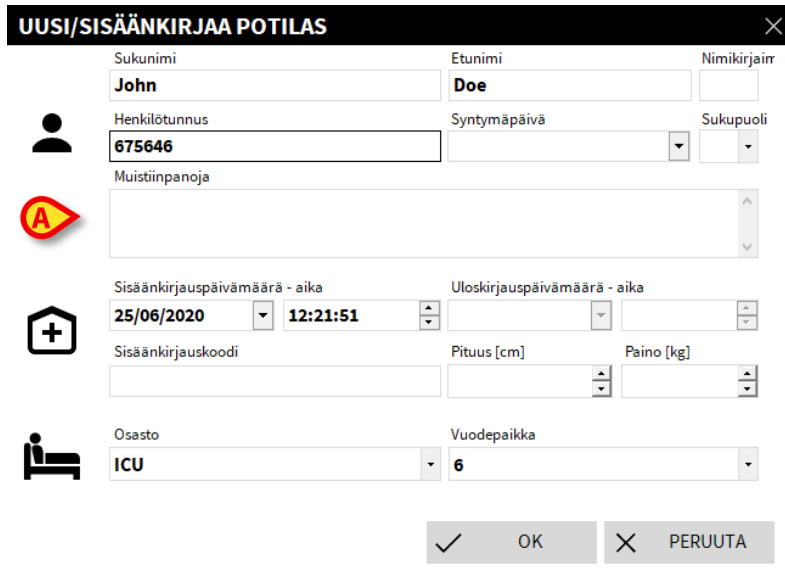

**UUSI/SISÄÄNKIRJAA POTILAS**

Sukunimi: John, Etunimi: Doe, Nimikirjain:

Henkilötunnus: 675646, Syntymäpäivä: , Sukupuoli:

Muistiinpanoja:

Sisääntuloaika: 25/06/2020, Uloskirjausaika: 12:21:51

Sisääntulokoodi: , Pituus [cm]: , Paino [kg]:

Osasto: ICU, Vuodepaikka: 6

✓ OK ✗ PERUUTA

Kuva 9

- Tarkista/muokkaa potilastiedot (Kuva 8 **A**) ja napsauta **OK**.

Näin potilas otetaan osastolle. Hänen nimensä näkyy määritetyssä vuodepainikkeessa OSASTOLLE OTETUT POTILAAT -näytöllä (2).

## 1.5. Potilaat, joiden tila on "Siirrossa"

Kuvaan 10 **A**-kirjaimella merkityt kaksi komentopalkin painiketta mahdollistavat joko "Vuodepaikassa"- tai "Siirrossa"-tilassa olevien potilaiden näyttämisen.

Jos **VUODEPAIKASSA**-painiketta napsautetaan, näkyviin tulee kuvassa 2 esitetty näyttö.

Jos **SIIRROSSA**-painiketta napsautetaan, näkyviin tulee kuvassa 10 esitetty näyttö.

**HUOMAUTUS:** Potilaat, joiden tila on "Siirrossa", näytetään vain, jos Digistat Suite -ohjelmistopaketti on yhdistetty sairaalan potilasarkistoihin.

|                   | First name  | Last name | Sex | Birth date | Patient code |
|-------------------|-------------|-----------|-----|------------|--------------|
| PATIENTS ADMITTED | Doe         | John      | M   | 23/01/1971 | 43563        |
| PATIENTS SEARCH   | Patient - 1 | Test - 1  | F   | 18/03/1955 | 5674563      |

IN BED

IN TRANSFER

10

Tämä näyttö näyttää luettelon kaikista potilaista, joiden tila on "Siirrossa". "Siirrossa" tarkoittaa, että jokin käytössä olevan työaseman kattama sairaalan yksikkö on ottanut jo potilaan vastuulleen, mutta hänelle ei ole määrätty vielä vuodepaikkaa (avoin sisäänotto). Kukin potilas näytetään omalla rivillään, ja jokainen rivi sisältää potilaan etunimen, sukunimen, sukupuolen, syntymäajan ja koodin.

- Määrää potilaalle vuodepaikka kaksoisnapsauttamalla kyseisen potilaan riviä.

Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 11).

NEW/ADMIT PATIENT
×

Family Name  
**Patient**

Given Name  
**Rose**

Initials

Patient Code  
**56473**

Birth Date  
**15/03/1967**

Sex  
**F**

Notes

Admission Date - time  
**31/10/2019**

Discharge Date - time

Admission Code  
**675534**

Height [cm]

Weight [kg]

Location  
**ICU**

Bed  
**1**

☒ OK
 ☐ CANCEL

11

- Määritä potilaan määränpää kuvaan 11 merkittyjä **Sijainti-** (osasto) ja **Vuodepaikka**-kohtia käyttämällä.
- Napsauta **OK**.

Potilas on nyt määrätty tiettyyn sijaintiin ja vuodepaikkaan, ja hänen nimensä näkyy vastaavassa punaisessa painikkeessa (Kuva 3).

## 1.6. Anonyymi potilaan ottaminen osastolle

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| POTILAAT<br>VUODEPAIKAT |                                                                                   |
| POTILAAT<br>ETSI        |  |

| Osasto | Vuodepaikka |
|--------|-------------|
| ICU    | 10          |
| ICU    | 12          |
| ICU    | 15          |
| ICU    | 16          |



|                  |         |         |                                   |                       |
|------------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| PAIKALLINEN HAKU | ETÄHAKU | ANONYMI | PAIKALLINEN<br>YHTEENSOVITTAMINEN | ETÄYHTEENSOVITTAMINEN |
|------------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------|

**Kuva 12**

Nimetön potilas -sivun kautta on mahdollista kirjata osastolle potilas, jonka tiedot eivät vielä ole saatavilla.

Tämän toiminnon käyttäminen

- Napsauta komentopalkin **ANONYMI** -painiketta (Kuva 12 **A**).

Esille tulee näyttö, jossa luetellaan kaikki osaston tyhjät vuoteet (Kuva 12 **B**).

Kirjaa nimetön potilas vuodepaikkaan seuraavasti:

- Kaksoisklikkaa haluamasi vuodepaikan riviä.

Käyttäjän vahvistus vaaditaan

- Klikkaa Kyllä kirjataksesi potilaan.

Potilaalle annetaan väliaikainen nimi automaattisesti (esimerkiksi: Potilas 10).

Potilastietoja voidaan päivittää myöhemmin Muokkaa potilastietoja -toiminnolla (katso kohta 1.7.3).

### 1.6.1. Yhteensovittaminen (paikallinen ja etänä suoritettava)

---



Tämä menettely on merkityksellinen vain, jos Identity Mobile -sovellus on käytössä.

---

Tällä menettelyllä Identity-mobiilisovelluksessa luodut tuntemattomien/väliaikaisten potilaiden tiedot voidaan yhteensovittaa sairaalan potilasarkistoihin lisättyjen todellisten potilastietojen kanssa. **PAIKALLINEN YHTEENSOVITTAMINEN** hakee tietokannasta. **ETÄYHTEENSOVITTAMINEN** hakee sairaalan ADT:stä.

- Valitse vuoteeseen tällä hetkellä määritetty tuntematon/väliaikainen potilas (2).
- Napsauta komentopalkin **Yhteensovittaminen** -painiketta.

Hakuruutu avautuu.

- Hae potilasta, jonka tiedot ovat tuntemattoman/väliaikaisen potilaan todelliset tiedot. Käytä hakutoimintoa edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- Kaksoisnapsauta riviä, jolla on väliaikaisen potilaan oikeat tiedot.

Näytölle tulee ilmoitus, jossa kysytään, korvataanko väliaikaisen potilaan tiedot valituilla potilastiedoilla.

- Korvaa tiedot napsauttamalla **Kyllä**.

Potilastiedot on nyt sovitettu yhteen. Tuntemattoman/väliaikaisen potilaan tiedot on korvattu oikeilla tiedoilla, ja vuodepainike päivitetään uusien tietojen näyttämiseksi.

## 1.7. Komentopalkki

Komentopalkissa (Kuva 13) on painikkeita, jotka mahdollistavat erilaisten toimintojen suorittamisen.



**Kuva 13**

- 1) **Uusi/Kirjaa osastolle potilas** (Kuva 13 **A**) Tämä painike mahdollistaa uuden potilaan kirjaamisen tietokantaan ja vuodepaikkaan (toimenpiteestä tarkemmin kappaleessa XYZ).
- 2) **Muokkaa potilastietoja** (Kuva 13 **B**) – Tämä painike mahdollistaa potilastietojen muokkaamisen (ks. Kappale 1.7.3).
- 3) **Tulosta** (Kuva 13 **C**) - Create print reports (the number and type of reports are decided in the configuration).
- 4) **Vie** (Kuva 13 **D**) - Jos tämä painike on käytössä, sillä voidaan viedä nykyiset tiedot XLS-tiedostoon.
- 5) **Valitse** (Kuva 13 **E**) - Potilas voidaan valita tällä painikkeella
- 6) **Ei mitään** (Kuva 13 **F**) – Tämä painike mahdollistaa potilaan valinnan poiston. **Ei mitään** -painikkeen klikkaamisen jälkeen aiemmin valitun potilaan nimi katoaa **POTILAS**-painikkeesta.
- 7) **Sulje** (Kuva 13 **G**) – Tämä painike sulkee Patient Explorer

### 1.7.1. Potilasvalinta

Digistat Suitessa valittu potilas on se, jonka nimi näkyy ohjauspalkin **PATIENT (POTILAS)**-painikkeessa (Kuva 14).




**Kuva 14**

Potilas voidaan valita erilaisilla moduulikohtaisilla tavoilla käytetyn työnkulun mukaan. Patient Explorer -moduulissa mahdolliset valintamenettelyt ovat:

- 1) Napsauta potilaan vuodepainiketta (Kuva 3).
- 2) Kaksoisnapsauta potilastiedot sisältävää riviä (esimerkiksi potilaan hakutoiminnon jälkeen – Kuva 7 **C**).
- 3) Korosta tietoja napsauttamalla potilastiedot sisältävää riviä ja napsauta sitten komentopalkista **SELECT (VALITSE)** (Kuva 13 **E**).

## 1.7.2. Uusi/kirjaa osastolle potilas

**Uusi/kirjaa osastolle potilas** -painike (Kuva 15) mahdollistaa uuden potilaan kirjaamisen tietokantaan ja vuodepaikkaan.

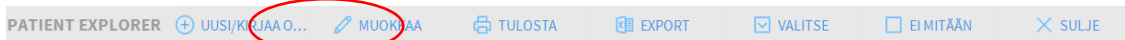


Kuva 15

Uuden potilaan kirjaaminen:

- Klikkaa **Uusi/kirjaa osastolle potilas** -painiketta

Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 16).

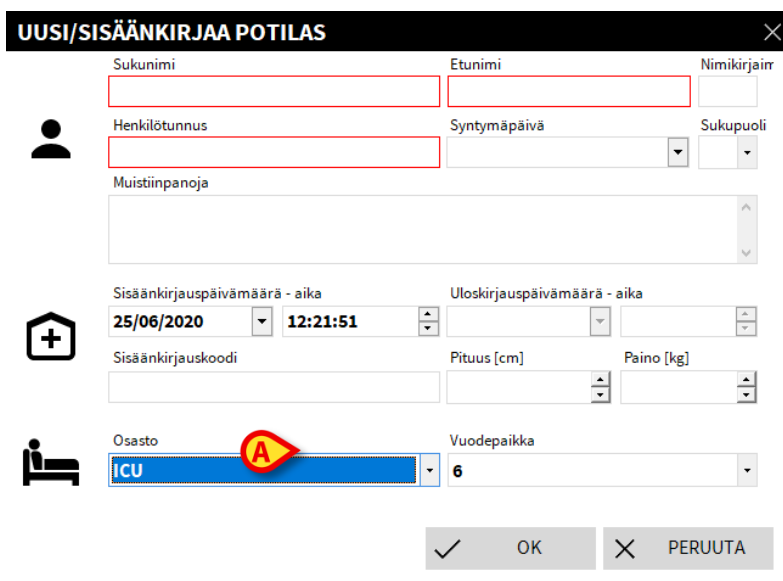The image shows a form titled 'UUSI/SISÄÄNKIRJAA POTILAS'. It contains several input fields and dropdown menus. The fields are: Suku-nimi, Etunimi, Nimikirjaimi, Henkilötunnus, Syntymäpäivä, Sukupuoli, Muistintapojat, Sisäänkirjauspäivämäärä - aika, Uloskirjauspäivämäärä - aika, Sisäänkirjauskoodi, Pituus [cm], Paino [kg], Osasto, and Vuodepaikka. The 'Osasto' dropdown is set to 'ICU' and has a red 'A' icon next to it. The 'Vuodepaikka' dropdown is set to '6'. At the bottom, there are 'OK' and 'PERUUTA' buttons.


Kuva 16

- Syötä uuden potilaan tiedot. Vaaleanpunaisella korostetut kentät ovat pakollisia
- Klikkaa **Ok** vahvistaaksesi

Näin uusi potilas kirjataan tietokantaan ja Osasto- ja Vuodepaikka-kentissä määriteltäisiin vuodepaikkaan/yksikköön (Kuva 16).

## 1.7.3. Muokkaa potilastietoja


**Muokkaa potilastietoja** -painike (Kuva 17) mahdollistaa valitun potilaan tietojen muokkaamisen.

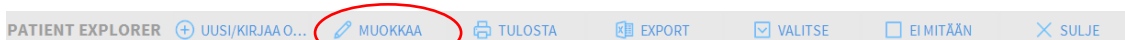

Kuva 17

Tätä painiketta voidaan käyttää vain silloin, kun potilas on valittuna. Nimen tulee näkyä **Potilas**-painikkeessa Control Bar -palkissa (Kuva 18).

Muokkaustoiminnot suoritetaan aina **Potilas**-painikkeessa mainitulle potilaalle (Kuva 18).

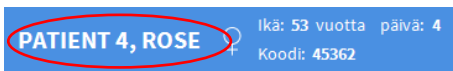

**Kuva 18**

Potilastietojen muokkaus:

- Valitse potilas, jonka tietoja haluat muokata
- Klikkaa **Muokkaa potilastietoja** -painiketta

Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 19).



**Kuva 19**

Jokainen näistä vaihtoehtoista mahdollistaa eri toiminnon suorittamisen. Valikon eri painikkeiden toiminnot kuvaillaan seuraavissa kappaleissa.

### 1.7.4. Siirrä

**Siirrä**-painike (Kuva 19 **A**) mahdollistaa valitun potilaan siirron kirjaamisen toiseen vuodepaikkaan ja/tai toiselle osastolle.

Potilaan siirto:

- Valitse potilas

Valitun potilaan nimi näytetään **Potilas**-painikkeessa.

- Klikkaa **Muokkaa potilastietoja** -painiketta

Useita vaihtoehtoja sisältävä pudotusvalikko avautuu (Kuva 19).

- Klikkaa **Siirrä**-painiketta (Kuva 19 **A**)

Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 20).

**Kuva 20**

- Käytä nuolipainikkeita (Kuva 20 **A**) valitaksesi vuodepaikan, johon potilas siirretään

Ylempi painike avaa listan kaikista mahdollisista osastoista.

Alempi painike avaa listan valitun osaston kaikista vuodepaikoista.

Jos vuodepaikan numeron vieressä on potilaan nimi, vuodepaikka on varattu.

- Klikkaa **Ok** vahvistaaksesi

Jos valittu vuodepaikka on varattu ja **Ok**-painiketta klikataan, näytölle avautuu ponnahdusikkuna, jossa kysytään, halutaanko valittujen potilaiden vuodepaikkoja vaihtaa keskenään.

## 1.7.5. Kirjaa osastolle

**KIRJAA OSASTOLLE** -painikkeella valittu potilas voidaan ottaa tiettyyn sijaintiin/vuoteeseen.

Potilaan ottaminen osastolle:

- Valitse potilas.

Valitun potilaan nimi näkyy **POTILAS** -painikkeessa.

- Napsauta **MUOKKAA**-painiketta.

Paikassa Kuva 19 näkyvä valikko avautuu.

- Napsauta **KIRJAA OSASTOLLE** -painiketta (Kuva 19 **B**).

Paikassa Kuva 20 näkyvä ikkuna avautuu, ja siinä luetellaan vain käytettävissä olevat vuoteet.

- Käytä pudotusvalikoita (Kuva 20 **A**) valitaksesi kohdesijainnin/vuoteen.
- Vahvista napsauttamalla **OK**.

## 1.7.6. Kotiuta

**Kotiuta**-painike mahdollistaa potilaan kotiuttamisen kirjaamisen.

Potilaan siirto:

- Valitse potilas

Valitun potilaan nimi näytetään **Potilas**-painikkeessa.

- Klikkaa **Muokkaa potilastietoja** -painiketta


Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 21).



**Kuva 21**

- Klikkaa **Kotiuta**-painiketta (Kuva 21 **A**)

Näytölle avautuu toiminnon vahvistamista pyytävä ponnahdusikkuna (Kuva 22).

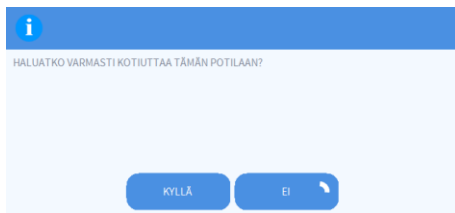

**Kuva 22**

- Klikkaa **Kyllä** jatkaaksesi potilaan kotiuttamista

Toiminto avaa potilaan tiedot sisältävän ikkunan (Kuva 23 – toisin kuin kuvan 16 ikkunassa, voit muuttaa kotiutuspäivämäärää ja -kellonaikaa).

**MUOKKAA POTILAS** ✕

|                          |                           |             |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Sukunimi                 | Etunimi                   | Nimikirjain |
| Patient d                | Rose                      |             |
| Henkilötunnus            | Syntymäpäivä              | Sukupuoli   |
| 20000004                 | 03/05/1992                | N           |
| Muistiinpanoja           |                           |             |
|                          |                           |             |
| Kirjauspäivämäärä - aika | Kotiutuspäivämäärä - aika |             |
| 27/12/2017 10:24:32      | 12/01/2018 16:08:26       |             |
| Kirjauuskoodi            | Pituus [cm]               | Paino [kg]  |
| 20000004#1               | 165                       | 55          |

✓ OK ✕ PERUUTA

**Kuva 23**

- Klikkaa **Ok** viimeistelläksesi kotiutusprosessin (Kuva 23 **A**)

### 1.7.7. Poista

**Poista**-painike mahdollistaa kaikkien potilastietojen poistamisen tietokannasta.

Potilaan tietojen poisto:

- Valitse potilas

Valitun potilaan nimi näytetään **Potilas**-painikkeessa.

- Klikkaa **Muokkaa potilastietoja** -painiketta


Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 24).



**Kuva 24**

- Klikkaa **Poista**-painiketta (Kuva 24 **A**)

Vahvistusta pyytävä ponnahdusikkuna avautuu (Kuva 25).

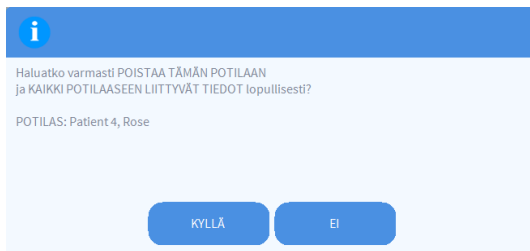

**Kuva 25**

- Klikkaa **Kyllä** jatkaaksesi poistoprosessia



Potilaan poisto tietokannasta on lopullinen operaatio. Kun potilas on poistettu, mitään häneen liittyvää Tuote -järjestelmällä tuotettua asiakirjaa ei voida enää hakea.

Siksi on tarpeen suorittaa tämä toiminto vain äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.

Vain oikeudet saaneet käyttäjät voivat poistaa potilaan

## 1.7.8. Muokkaa

**Muokkaa**-painike mahdollistaa valitun potilaan tietojen muokkaamisen.

Potilaan tietojen muokkaus:

- Valitse potilas

Valitun potilaan nimi näytetään **Potilas**-painikkeessa.

- Klikkaa **Muokkaa potilastietoja** -painiketta

Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 26).



**Kuva 26**

- Klikkaa **Muokkaa**-painiketta (Kuva 26 **A**)

Potilastiedot sisältävä ikkuna aukeaa (Kuva 27).

## Kuva 27

- ### 1.7.9. Poista potilaan valinta

**Kuva 28**

Potilaan nimi katoaa **Potilas**-painikkeesta.

### 1.7.10. Sulje

**Kuva 29**

➤ Klikkaa **Sulje**-painiketta sivulla (Kuva 29).