



Control Bar Web

Manuel de l'utilisateur

Version 3.0

2024-10-31

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy

Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Contenu

1. Control Bar Web	3
1.1 Lancement de <i>Control Bar Web</i>	3
1.2 Connexion de l'utilisateur	4
1.3 Espace de travail	6
1.3.1 Sélection d'un module	6
1.4 <i>Control Bar</i> (barre de contrôle/commande).....	7
1.5 Menu principal.....	8
1.5.1 Modifier le mot de passe (<i>Password</i>)	8
1.5.2 Rapport d'incident Utilisateur (<i>issue report</i>)	9
1.6 Sous-modules supplémentaires.....	10
1.6.1 CDSS Configurator	10
1.6.2 Identity	12

1. Control Bar Web



Pour des informations sur l'environnement du produit, les précautions, les avertissements et l'utilisation prévue, voir *USR FRA Digistat Care* et/ou *USR FRA Digistat Docs* (en fonction des modules installés – pour *Digistat Suite EU*) ou *USR ENG Digistat Suite NA* (pour *Digistat Suite NA*). La connaissance et la compréhension du document approprié sont obligatoires pour une utilisation correcte et sûre du *Control Bar Web*, décrit dans ce document.

1.1 Lancement de *Control Bar Web*

Pour lancer *Control Bar Web*:

- Tapez l'adresse spécifique dans la barre d'adresse du navigateur.


La page suivante s'ouvre:

Fig. 1

1.2 Connexion de l'utilisateur

La connexion de l'utilisateur est nécessaire pour activer les fonctionnalités du système.

login

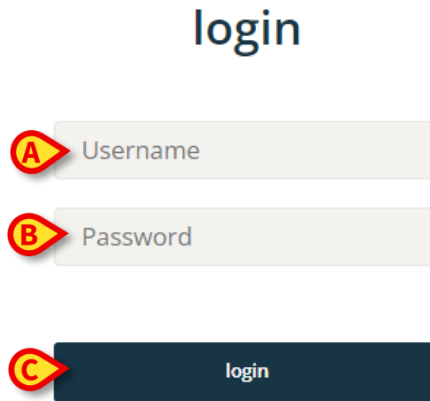

The login form consists of three elements: a text input field labeled 'Username' with a red circle 'A' pointing to it, a text input field labeled 'Password' with a red circle 'B' pointing to it, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' pointing to it.

Fig. 2

Pour se connecter :

- Saisissez votre nom d'utilisateur dans le champ "Nom d'utilisateur" (Username - Fig. 2 **A**).
- Saisissez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe" (Password - Fig. 2 **B**).
- Cliquez sur le bouton **Login** (Connexion) (Fig. 2 **C**).

L'utilisateur est connecté.



Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont délivrés par l'administrateur du système. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le produit.

Après avoir accédé au système, un acronyme correspondant à l'utilisateur connecté est affiché sur le bouton **User** (Utilisateur) de *Control Bar* (l'acronyme est ADMIN dans Fig. 3 **A**).



Fig. 3



L'utilisateur dont les informations d'identification sont affichées sur le bouton *User* est responsable de toutes les actions effectuées sur le produit. Il est fortement recommandé de se déconnecter avant de quitter le poste de travail du produit afin d'éviter toute utilisation inappropriée du système.



Il est possible de configurer le produit de manière à ce qu'il permette de se connecter par l'intermédiaire d'un système externe (authentification unique). Dans ce cas, un bouton dédié est affiché sur l'écran de connexion.

Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton **User** (Utilisateur) pendant la session de travail. Le menu suivant s'ouvre (Fig. 4).

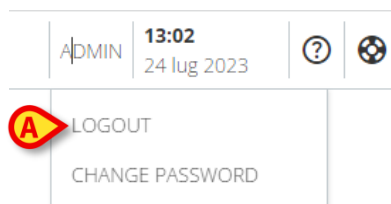


Fig. 4

- Cliquez sur **LOGOUT (DECONNEXION - Fig. 4 A)**.

La confirmation de l'utilisateur est requise. Après confirmation, l'utilisateur est déconnecté. Pour vous reconnecter, cliquez à nouveau sur le bouton **User** (Utilisateur). L'écran illustré dans Fig. 2 s'affiche à nouveau.

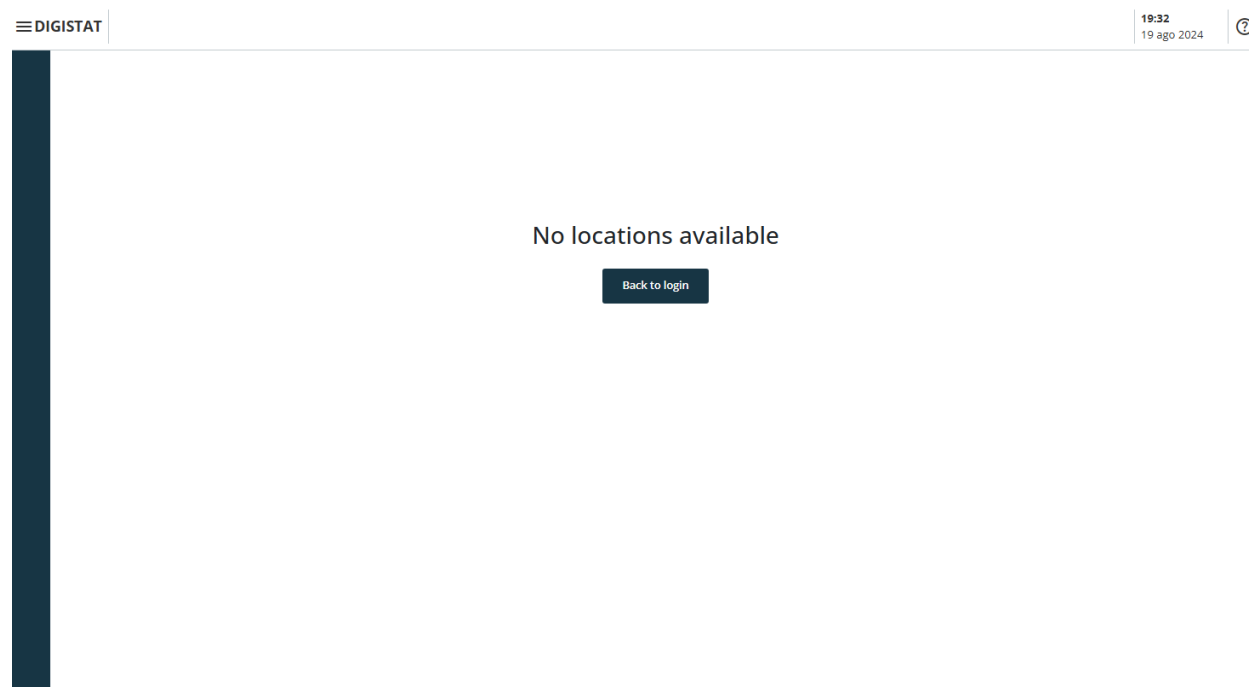


Fig 5

Si l'utilisateur n'a pas de lieu associé au préalable (voir le manuel *CFG ENG Digistat Suite MDR* pour la configuration de l'association utilisateur-lieu), il n'est pas possible de se connecter au module. Dans ce cas, le message « Aucun emplacement disponible » s'affiche (Fig 5). De plus, un bouton Revenir à la connexion est proposé pour revenir à la page de connexion et réessayer de se connecter avec un nouvel utilisateur ou avec le même utilisateur après l'association utilisateur-lieu.



Un « Emplacement » est une entité de configuration de Digistat correspondant à une zone spécifique de la structure de soins. Il peut s'agir, par exemple, d'un service, d'une unité de soins, d'un bloc opératoire, etc., en fonction des besoins de la structure de soins. Référez-vous aux administrateurs du système pour plus d'informations.

1.3 Espace de travail

Après la connexion de l'utilisateur, les icônes correspondant aux modules Digistat Web disponibles sont affichées sur la barre latérale (Fig. 6 **A**). La zone de travail (Fig. 6 **B**) affiche les écrans et les fonctionnalités du module sélectionné sur la barre latérale.



Fig. 6

La *Control Bar* (barre de commande - Fig. 6 **C**) est décrite dans les sections 1.4 et suivantes. Le module sélectionné est mis en surbrillance.

1.3.1 Sélection d'un module

Pour sélectionner un module :

- Cliquez sur l'icône correspondante dans la barre latérale.

L'icône est mise en évidence et les fonctionnalités du module sont affichées dans l'espace de travail.

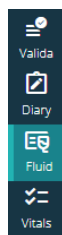


Fig. 7

1.4 Control Bar (barre de contrôle/commande)

La barre de contrôle/commande (*Control Bar*) qui apparaît dans la partie supérieure de l'écran est commune à tous les modules. Ses principales caractéristiques sont énumérées ci-dessous.



Fig. 8

- Le bouton **Menu** (Fig. 8 **A**) ouvre le menu principal de *Control Bar Web*. Voir la section 1.5.
- Le bouton **Patient** (Fig. 8 **B**). Si aucun patient n'est sélectionné, ce bouton peut être cliqué pour lancer la procédure de sélection des patients. Après la sélection d'un patient, le nom du patient et les données principales sont affichés. Pour les patients admis, le numéro du lit et le nom du service sont également affichés. Si des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à la Control Bar Web sont disponibles pour le patient sélectionné, le bouton Patient peut être cliqué pour afficher un menu déroulant permettant d'accéder à ces fonctionnalités (voir la section 1.6 pour plus d'informations). Si une icône de cadenas -  - est affichée à côté du nom du patient, cela signifie que certaines données ou fonctionnalités sont verrouillées pour ce patient.
- La zone indiquée dans Fig. 8 **C** peut être utilisée pour signaler que l'utilisateur reçoit des notifications.
- Le bouton utilisateur (*user*) permet d'accéder aux fonctionnalités de connexion/déconnexion et de changement de mot de passe (Fig. 8 **D**).
- Indication de la date et de l'heure (Fig. 8 **E**).
- Le bouton **Aide** (*Help*) (Fig. 8 **F**) permet d'accéder à l'aide en ligne.
- Cliquez sur l'icône  (Fig. 8 **G**) pour créer un rapport d'incident à envoyer à l'assistance technique. Voir la section 1.5.2.

1.5 Menu principal

Le bouton **Menu** (Fig. 8 A) ouvre le menu suivant (Fig. 9).

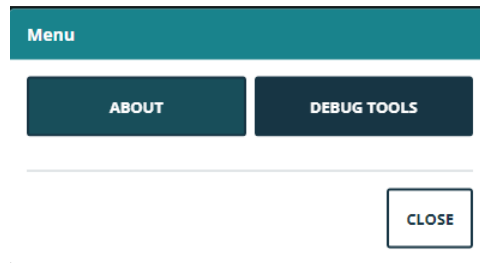


Fig. 9

Le bouton **About** (À propos) affiche une fenêtre contenant des informations sur la version installée de *Digistat Suite* et les licences associées (voir la documentation spécifique pour plus d'informations).

L'étiquetage réel du produit est la boîte **About** (À propos) affichée sur les postes de travail clients, les appareils mobiles et les modules web où la suite Digistat est installée.

Le bouton **Debug Tools** (Outils de débogage) est réservé aux administrateurs système.

1.5.1 Modifier le mot de passe (*Password*)

Pour modifier le mot de passe utilisateur :

- Cliquez sur le bouton **User** (Utilisateur) dans la *Control Bar* (Barre de contrôle/commande) (Fig. 10 A).



Fig. 10

- Le menu suivant s'ouvre (Fig. 11).


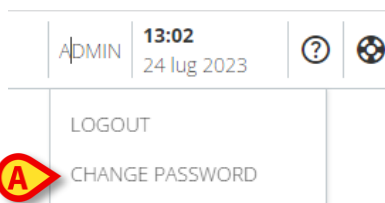


Fig. 11

- Cliquez sur **CHANGE PASSWORD** (Modifier le mot de passe - Fig. 11 A). L'écran suivant s'ouvre (Fig. 12).

CHANGE PASSWORD

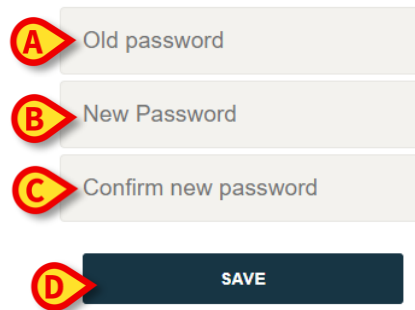

The form consists of three text input fields and a button. The first field is labeled 'Old password' and is marked with a red circle 'A'. The second field is labeled 'New Password' and is marked with a red circle 'B'. The third field is labeled 'Confirm new password' and is marked with a red circle 'C'. Below these fields is a dark blue button labeled 'SAVE', marked with a red circle 'D'.

Fig. 12

- Tapez le mot de passe actuel dans le champ "Old password" (Ancien mot de passe - Fig. 12 **A**)
- Tapez le nouveau mot de passe dans le champ "New password" (Nouveau mot de passe - Fig. 12 **B**).
- Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ "Confirm new password" (Confirmer le nouveau mot de passe - Fig. 12 **C**).
- Cliquez sur **Save** (Enregistrer - Fig. 12 **D**).

1.5.2 Rapport d'incident Utilisateur (*issue report*)

Si elle est présente, l'icône  dans la *Control Bar* (barre de commande) (Fig. 13 **A**), permet de créer un rapport d'incident et, le cas échéant, de recevoir une assistance technique.

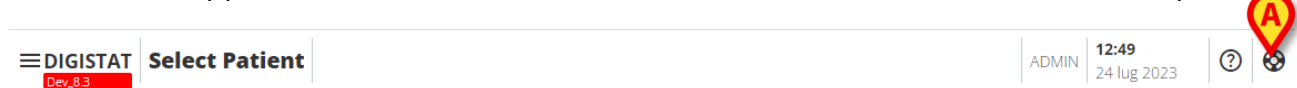


Fig. 13



La présence de l'icône dépend de l'option système `EnableUserIssueReporting`. Se référer aux administrateurs du système pour plus d'informations.

Pour ce faire :

- Cliquez sur l'icône  (Fig. 13 **A**). La fenêtre suivante s'ouvre (Fig. 14).

Fig. 14

- Saisissez une description du problème dans le champ "Description" (Fig. 14 **A**).
- Cliquez sur **Send** (Envoyer - Fig. 14 **B**).

Une confirmation est générée, incluant un numéro d'identification ID de l'incident.

1.6 Sous-modules supplémentaires

Les sous-modules décrits dans cette section peuvent être présents ou non, en fonction de la configuration du produit dans l'établissement de santé. Chaque sous-module peut être ouvert en cliquant sur un élément de menu spécifique dans un menu déroulant affiché à côté du bouton Patient. Ces sous-modules sont liés au patient, c'est-à-dire qu'ils ne sont disponibles que si un patient est déjà sélectionné.

1.6.1 CDSS Configurator

Le sous-module CDSS Configurator peut être activé par configuration en tant que section supplémentaire de la Control Bar Web. Pour ouvrir le sous-module CDSS Configurator :

- Sélectionnez le patient concerné.



Voir le manuel d'utilisation du Patient Explorer Web pour la procédure de sélection des patients (document USR FRA Patient Explorer Web).

Après la sélection du patient, si d'autres sous-modules de la Control Bar sont disponibles, l'icône  s'affiche sur le bouton Patient (Fig 15**A**).



Fig 15

- Cliquez sur l'icône

Une fenêtre déroulante s'affiche, répertoriant les sous-modules supplémentaires disponibles (Fig 16).



Fig 16

- Cliquez sur « CDSS Configurator » (Fig 16 **A**).

La fenêtre suivante s'affiche, répertoriant les règles associées au patient sélectionné (Fig 17).

RULES		
	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	
	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	
	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	

CLOSE

Fig 17

Consultez le manuel d'utilisation du CDSS Configurator pour une description complète et des instructions d'utilisation de ce sous-module (document USR FRA CDSS Web).

1.6.2 Identity

Le sous-module Identity peut être activé par configuration en tant que section supplémentaire de la Control Bar Web. Pour ouvrir le sous-module Identity :

- Sélectionnez le patient concerné.



Voir le manuel d'utilisation du Patient Explorer Web pour la procédure de sélection des patients (document USR FRA Patient Explorer Web).

Après la sélection du patient, si d'autres sous-modules de la Control Bar sont disponibles, l'icône  s'affiche sur le bouton Patient (Fig 18 **A**).



Fig 18

- Cliquez sur l'icône .

Une fenêtre déroulante s'affiche, répertoriant les sections supplémentaires disponibles (Fig 19).

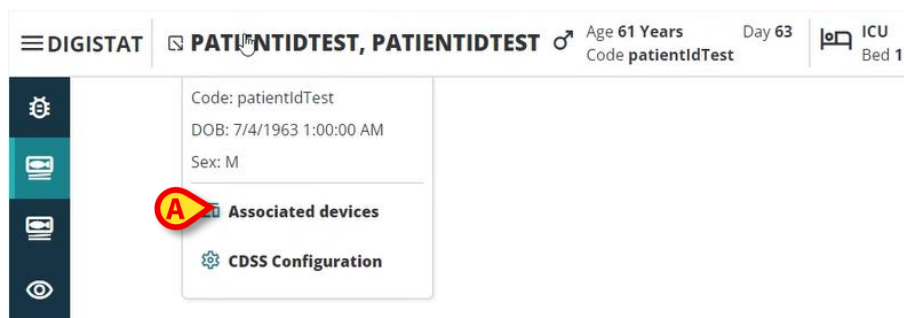


Fig 19

- Cliquez sur « Appareils associés » (Fig 19 **A**).

La fenêtre suivante s'affiche, répertoriant les appareils associés au patient actuellement sélectionné (Fig 20).

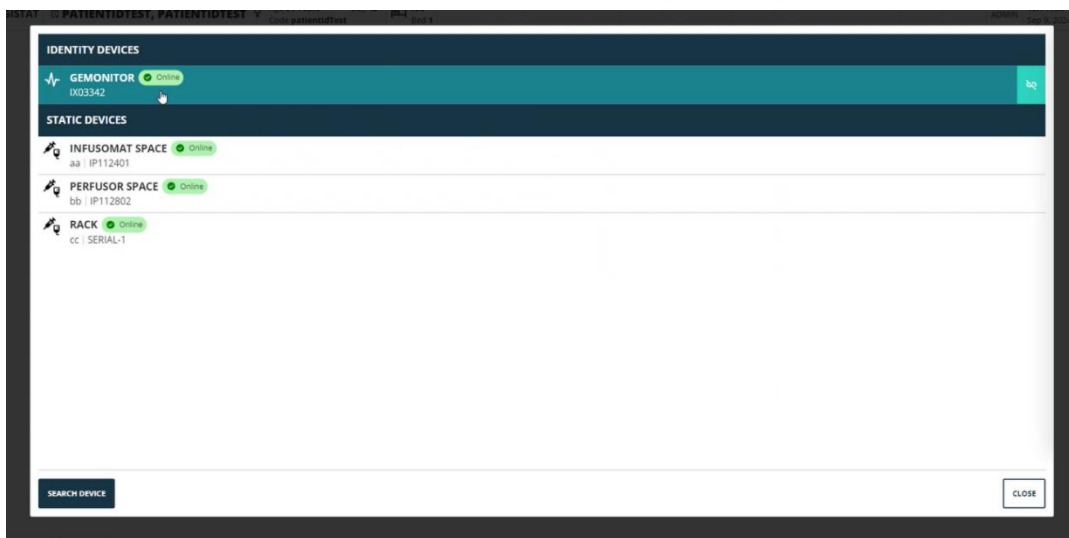


Fig 20

Consultez le manuel d'utilisation de Identity pour la description complète et le mode d'emploi de ce sous-module (document USR FRA Identity Web).