



Control Bar Web

Használati utasítás

2.0-s verzió

2024-01-04

Tartalom

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Web indítása	3
1.2 Felhasználói bejelentkezés	4
1.3 Munkaterület	5
1.3.1 Modul kiválasztása	5
1.4 Control Bar (vezérlősáv).....	6
1.5 Főmenü	6
1.5.1 Jelszó módosítása	7
1.5.2 Felhasználói problémabejelentés.....	8

1. Control Bar Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról további információkat talál: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs (a telepített moduloktól függően – Digistat Suite EU esetén) vagy USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA esetén)*. A jelen dokumentumban leírt Control Bar Web megfelelő és biztonságos használatához kötelező a vonatkozó dokumentumok ismerete és megértése.

1.1 Control Bar Web indítása

Control Bar Web elindítása:

- Írja be a kívánt címet a böngésző címsorába.

Megnyílik a következő oldal:

The screenshot shows the login interface of the USR HUN Digistat Control Bar Web. It features a dark blue vertical sidebar on the left. The main content area is white and centered, with the heading 'login'. Below the heading are two light gray input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom of the form is a dark blue button labeled 'login'. The top of the page has a light gray header bar. On the left of this bar is the 'DIGISTAT' logo with 'Dev 4.3' below it. On the right is the time '12:43' and date '24 Aug 2023', followed by a small circular help icon.

Ábra 1

1.2 Felhasználói bejelentkezés

A rendszer funkcióinak engedélyezéséhez szükség van a felhasználó bejelentkezésére.

login

A

B

C

Ábra 2

Bejelentkezéshez:


- Írja be felhasználónevét a Username vagyis a „Felhasználónév” mezőbe (Ábra 2 **A**)
- Írja be jelszavát a Password vagyis „Jelszó” mezőbe (Ábra 2 **B**)
- Kattintson a **Login** vagyis Bejelentkezés gombra (Ábra 2 **C**)

Ezáltal a felhasználó be lesz jelentkezve.



A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda állítja ki. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a program használatára.

A rendszer elérése után a Control Bar (vezérlősáv) **User** gombján megjelenik a bejelentkezett felhasználónak megfelelő mozaikszó (a mozaikszó: ADMINÁbra 3 **A**).

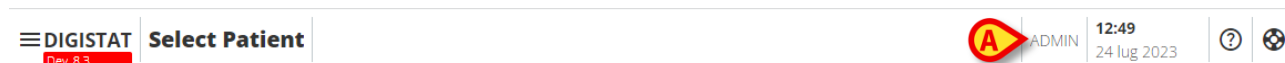


Ábra 3



A programon végrehajtott összes műveletért az a User (felhasználó) felelős, akinek a hitelesítő adatai a User (felhasználó) gombon megjelennek. A rendszer nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja a Product munkahálózatot.

A kijelentkezéshez kattintson a munkamenet közben a **User** (felhasználó) gombra. Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 4).

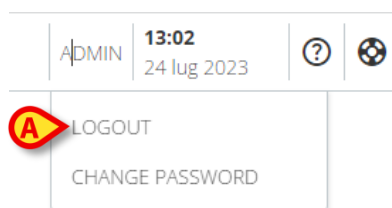


Ábra 4

- Kattintson a **LOGOUT** (Ábra 4 **A**).

Felhasználói megerősítés szükséges. A megerősítés után a felhasználó ki va jelentkezve. A bejelentkezéshez kattintson ismét a **User** (felhasználó) gombra. A Ábra 2 látható képernyő ismét megjelenik.

1.3 Munkaterület

A felhasználó bejelentkezése után az oldalsó sávban (A) megjelennek az elérhető Digistat Web moduloknak megfelelő ikonokDigistat (Ábra 5 A). A (Ábra 5 B) munkaterület az oldalsó sávban kiválasztott modul kijelzőit és funkcióit jeleníti meg.

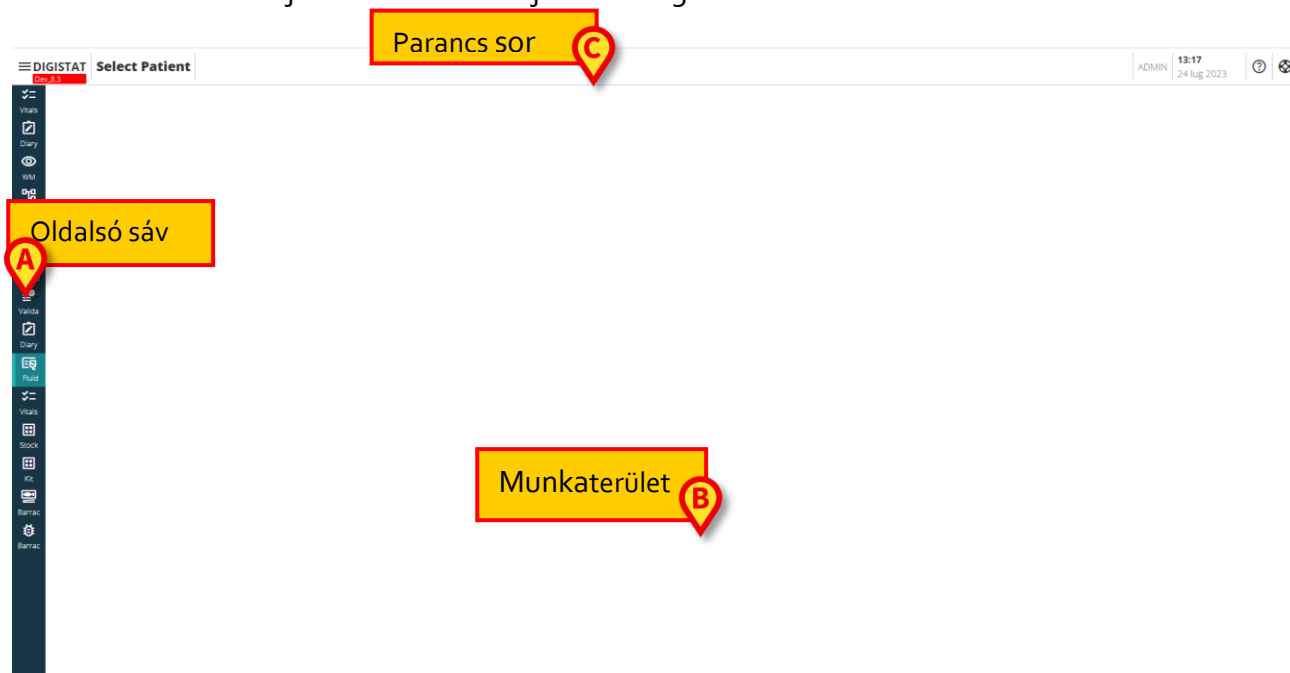

Ábra 5


A Control Bar-t (vezérlősávot) (Ábra 5 C) a következő 1.4 szakaszokban és pontokban ismertetjük. A kiválasztott modul ki van emelve.

1.3.1 Modul kiválasztása

Modul kiválasztásához:

- Kattintson a megfelelő ikonra az oldalsávon.

Az ikon ki lesz emelve, és a modul funkciói láthatóvá válnak a Work Area-n (munkaterületen) belül.

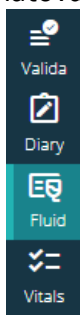

Ábra 6

1.4 Control Bar (vezérlősáv)

A képernyő felső részén megjelenő control bar (vezérlősáv) minden modulban azonos. Főbb jellemzőit az alábbiakban soroljuk fel:




Ábra 7

- A **Menu** (menü) gomb (Ábra 7 A) megnyitja a Control Bar Web főmenüt. Lásd a 1.5 részt.
- A **Patient** (páciens) gomb (Ábra 7 B) a páciens kiválasztása után megjeleníti a páciens nevét és a főbb adatait. Ha a páciens fel van véve, akkor megjelenik az ágy száma. A páciens adatok mellett található lehetséges ikonok személyre szabható gyorsbillentyűk, amelyek lehetővé teszik bizonyos konfigurált információk elérését. Ha egy lakat ikon -  - jelenik meg a páciens neve mellett, ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók nem érhetők el az adott páciens esetében.
- A Ábra 7 C-ben jelzett terület arra használható, hogy a felhasználó számára jelezze, hogy értesítések érkeztek.
- A felhasználói gomb biztosítja a be- és kijelentkezést, valamint a jelszóváltoztatás funkciót (Ábra 7 D).
- Dátum-idő jelzés (Ábra 7 E).
- Használja a **Help** (súgó) gombot (Ábra 7 F) az online súgó eléréséhez.
- A  (Ábra 7 G) ikonra kattintva létrehozhat egy problémajelentést, amelyet elküldhet a technikai ügyfélszolgálatnak támogatás céljából. Lásd a 0 részt.

1.5 Főmenü

A **Menu** (menü) gomb (Ábra 7 A) megnyitja a következő menüt (Ábra 8).

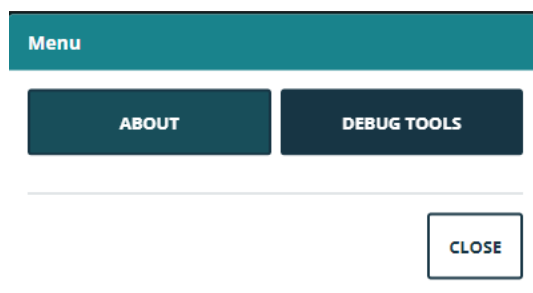

Ábra 8

Az **About** (tudnivalók) gomb megjeleníti a telepített Digistat Suite verzióra és a kapcsolódó licencekre vonatkozó információkat tartalmazó ablakot (további információkért lásd az adott dokumentációt).


A termék konkrét címkézése az About Box amely az ügyfelek munkaállomásain, mobil eszközein és webes moduljain jelenik meg, ahol a Digistat Suite telepítve van.

A **Debug Tools** (hibakereső eszközök) gomb a rendszergazdák számára van fenntartva.

1.5.1 Jelszó módosítása


Felhasználói jelszó módosítása

- Kattintson a **User** (felhasználó) gombra a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 9 **A**).

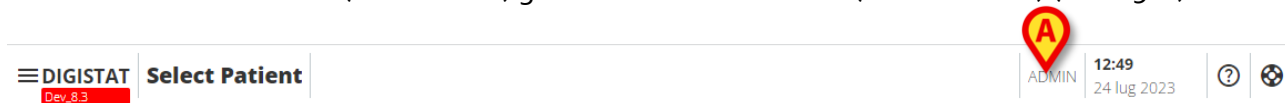

Ábra 9


- Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 10).

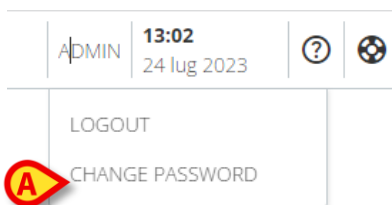

Ábra 10

- Kattintson a: **Change Password** (Jelszó módosítása) (Ábra 10 **A**). Megnyílik a következő képernyő (Ábra 11):

CHANGE PASSWORD

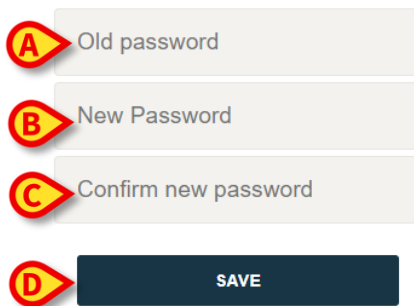


Ábra 11

- Írja be az aktuális jelszót az "OLD password" (régi jelszó) mezőbe (Ábra 11 **A**).
- Írja be az új jelszót a „New password” (új jelszó) mezőbe (Ábra 11 **B**).
- Írja be újra az új jelszót az „Confirm new password” (Új jelszó megerősítése) mezőbe (Ábra 11 **C**).
- Kattintson ide: **Save** (Mentés) (Ábra 11 **D**).

1.5.2 Felhasználói problémabejelentés

Ha jelen van, a  ikon a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 12 **A**) lehetővé teszi egy „probléma” jelentés létrehozását, és adott esetben technikai támogatás igénylését.

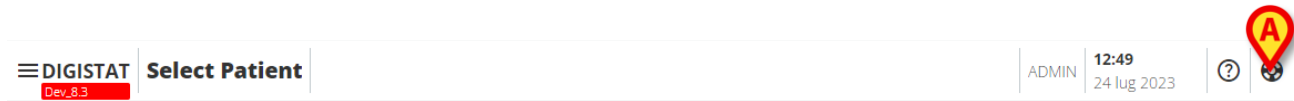


Ábra 12



Az ikon jelenléte az *EnableUserIssueReporting System Option-tól* (rendszerbeállítástól) függ. További információkért forduljon a rendszergazdákhhoz.

Ehhez:

- Kattintson a  ikonra (Ábra 12 **A**). Megnyílik a következő ablak (Ábra 13).

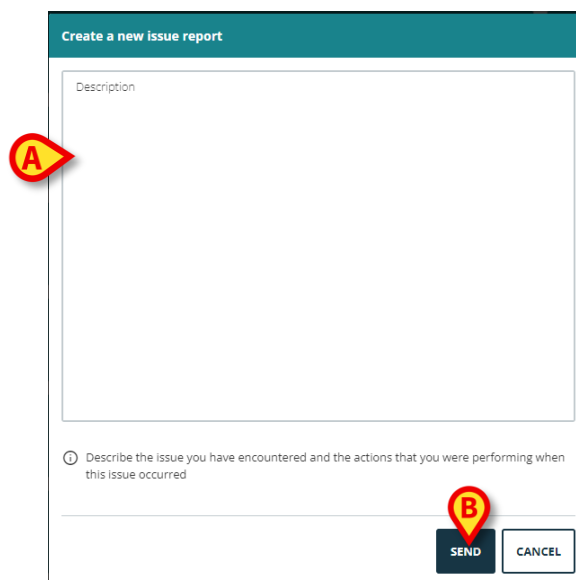

Ábra 13

- Írja be a probléma leírását a "Description" (leírás) mezőbe (Ábra 13 **A**).
- Kattintson a **Send** (küldés) gombra (Ábra 13 **B**).

A visszaigazolás tartalmazza a probléma azonosító számát.