



Control Bar Web Használati utasítás

4.0-s verzió

2024-10-31

Tartalom

1. Control Bar Web.....	3
1.1 Control Bar Web indítása	3
1.2 Felhasználói bejelentkezés	4
1.3 Munkaterület.....	6
1.3.1 Modul kiválasztása	6
1.4 Control Bar (vezérlősáv).....	7
1.5 Főmenü	8
1.5.1 Jelszó módosítása	8
1.5.2 Felhasználói problémabejelentés	9
1.6 További almodulok	10
1.6.1 CDSS konfigurátor	10
1.6.2 Identity	11

1. Control Bar Web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról további információkat talál: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén) . A jelen dokumentumban leírt *Control Bar Web* megfelelő és biztonságos használatához kötelező a vonatkozó dokumentumok ismerete és megértése.

1.1 Control Bar Web indítása

Control Bar Web elindítása:

- Írja be a kívánt címet a böngésző címsorába.


Megnyílik a következő oldal:

Ábra 1

1.2 Felhasználói bejelentkezés

A rendszer funkcióinak engedélyezéséhez szükség van a felhasználó bejelentkezésére.

login

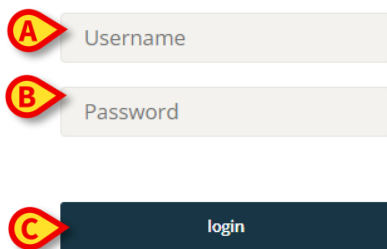

The login form consists of three elements: a text input field for 'Username' with a red circle 'A' icon to its left, a text input field for 'Password' with a red circle 'B' icon to its left, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' icon to its left.

Ábra 2

Bejelentkezéshez:

- Írja be felhasználónevét a Username vagyis a „Felhasználónév” mezőbe (Ábra 2 **A**)
- Írja be jelszavát a Password vagyis „Jelszó” mezőbe (Ábra 2 **B**)
- Kattintson a **Login** vagyis Bejelentkezés gombra (Ábra 2 **C**)

Ezáltal a felhasználó be lesz jelentkezve.



A felhasználónevet és a jelszót a rendszergazda állítja ki. Ha nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem jogosult a program használatára.



Lehetőség van a Digistat Suite konfigurálására, hogy lehetővé tegye a bejelentkezést egy külső rendszeren keresztül („Single Sign On”). Ezekben az esetekben a bejelentkezési képernyőn egy erre a célra szolgáló gomb jelenik meg.

A rendszer elérése után a Control Bar (vezérlősáv) **User** gombján megjelenik a bejelentkezett felhasználónak megfelelő mozaikszó (a mozaikszó: ADMINÁbra 3 **A**).




Ábra 3



A programon végrehajtott összes műveletért az a User (felhasználó) felelős, akinek a hitelesítő adatai a User (felhasználó) gombon megjelennek. A rendszer nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében erősen ajánlott kijelentkezni, mielőtt elhagyja a Product munkahálózatot.


A kijelentkezéshez kattintson a munkamenet közben a **User** (felhasználó) gombra. Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 4).

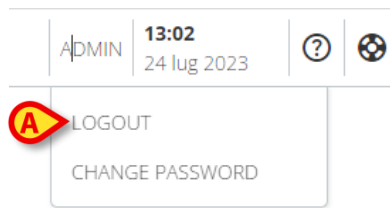

Ábra 4

- Kattintson a **LOGOUT** (Ábra 4 **A**).

Felhasználói megerősítés szükséges. A megerősítés után a felhasználó ki va jelentkezve. A bejelentkezéshez kattintson ismét a **User** (felhasználó) gombra. A Ábra 2 látható képernyő ismét megjelenik.

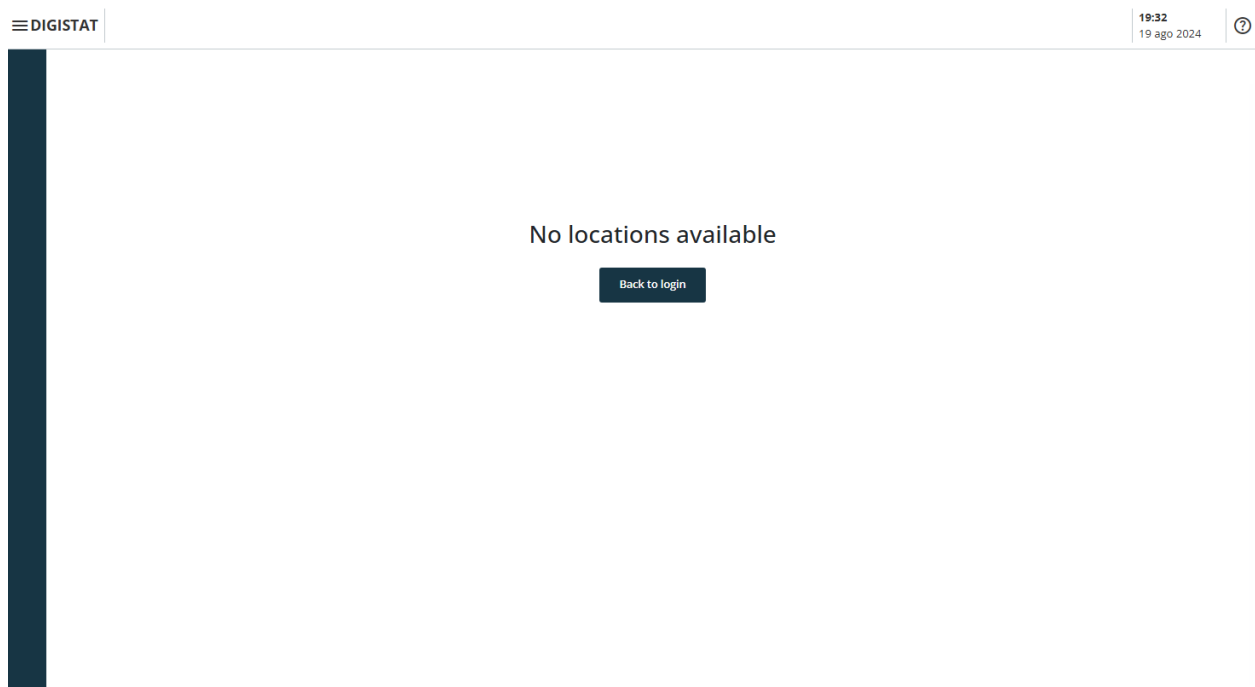

Ábra 5


Ha a felhasználónak nincs korábban hozzárendelt helye (a felhasználó és a hely közötti kapcsolat beállítását lásd a *CGF ENG Digistat Suite MDR* útmutatójában), akkor nem lehet bejelentkezni a modulba. Ebben az esetben a „Nincs elérhető hely” üzenet jelenik meg (Ábra 5). Ezenkívül egy **Vissza a bejelentkezéshez** gomb segítségével visszatérhet a bejelentkezési oldalra, és új felhasználóval vagy ugyanazzal a felhasználóval próbálhatja meg újra a bejelentkezést, miután a felhasználó és a helyszín összekapcsolása megtörtént.



A „Hely” egy Digistat beállítási egység, amely az egészségügyi struktúra egy adott területének felel meg. Ez lehet például egy osztály, egy kórterem, egy műtőblokk stb. az egészségügyi struktúra követelményeitől függően. További információért forduljon a rendszergazdákhoz.

1.3 Munkaterület

A felhasználó bejelentkezése után az oldalsó sávban (A) megjelennek az elérhető Digistat Web moduloknak megfelelő ikonok (Ábra 6 A). A (Ábra 6 B) munkaterület az oldalsó sávban kiválasztott modul kijelzőit és funkcióit jeleníti meg.

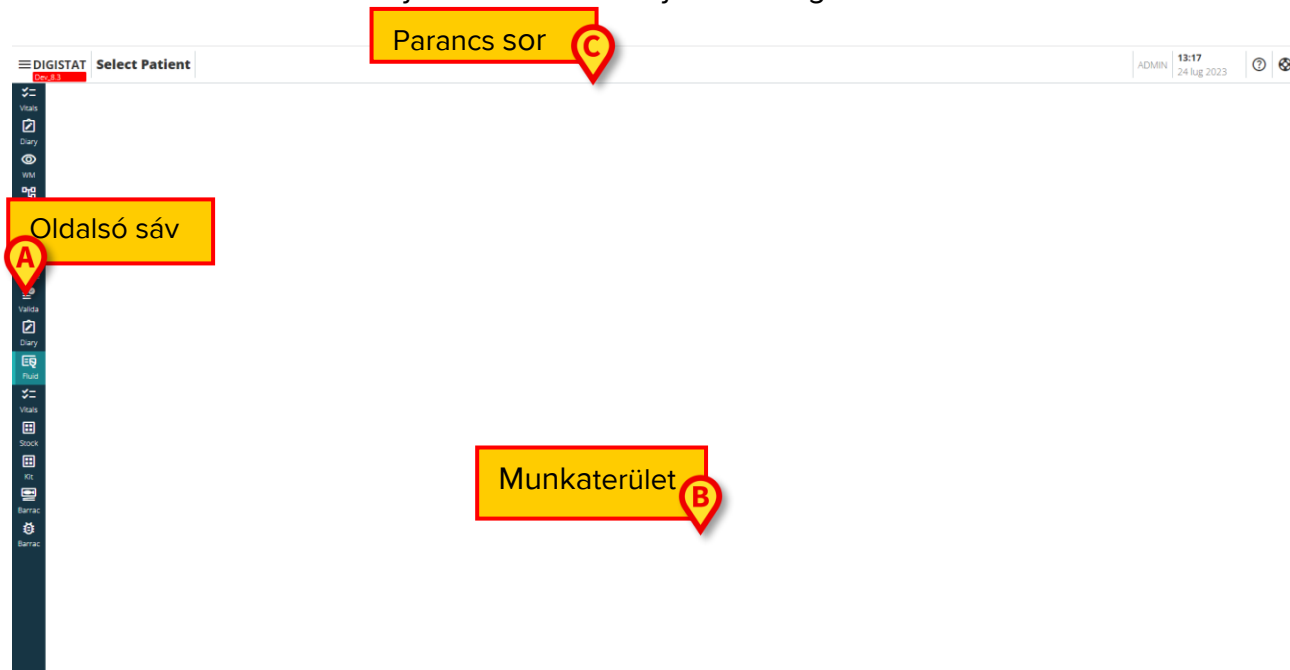

Ábra 6

A Control Bar-t (vezérlősávot) (Ábra 6 C) a következő 1.4 szakaszokban és pontokban ismertetjük.


A kiválasztott modul ki van emelve.

1.3.1 Modul kiválasztása

Modul kiválasztásához:

- Kattintson a megfelelő ikonra az oldalsávon.

Az ikon ki lesz emelve, és a modul funkciói láthatóvá válnak a Work Area-n (munkaterületen) belül.

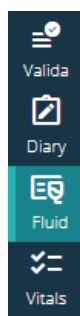

Ábra 7

1.4 Control Bar (vezérlősáv)

A képernyő felső részén megjelenő control bar (vezérlősáv) minden modulban azonos. Főbb jellemzőit az alábbiakban soroljuk fel:



Ábra 8

- A **Menu** (menü) gomb (Ábra 8 **A**) megnyitja a Control Bar Web főmenüt. Lásd a 1.5 részt.
- A **Patient** (páciens) gomb (Ábra 8 **B**). Ha nincs kiválasztott páciens, erre a gombra kattintva elindítható a páciensválasztási eljárás. A páciens kiválasztása után megjelenik a páciens neve és fő adatai. Felvett páciensek esetében az ágy száma és az osztály neve is megjelenik. Ha a kiválasztott páciens számára a Vezérlőpult webes funkciói rendelkezésre állnak, akkor a páciens gombra kattintva megjelenik egy legördülő menü, amely lehetővé teszi a funkciók elérését (további információkért lásd a 1.6 szakaszt). Ha egy lakat ikon -  - jelenik meg a páciens neve mellett, az azt jelenti, hogy bizonyos páciensadatok/funkciók zárolva vannak az adott páciens számára.




A páciens kiválasztása általában a Digistat Patient Explorer webmodulban történik. A pácienskezelési funkciókkal kapcsolatos utasításokat lásd a Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvében (USR HU Patient Explorer Web dokumentum). A Patient Explorer Web helyett más modulok is konfigurálhatók a páciens kiválasztásához. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

- A Ábra 8 **C**-ben jelzett terület arra használható, hogy a felhasználó számára jelezze, hogy értesítések érkeztek.
- A felhasználói gomb biztosítja a be- és kijelentkezést, valamint a jelszóváltoztatás funkciót (Ábra 8 **D**).
- Dátum-idő jelzés (Ábra 8 **E**).
- Használja a **Help** (súgó) gombot (Ábra 8 **F**) az online súgó eléréséhez.
- A  (Ábra 8 **G**) ikonra kattintva létrehozhat egy problémajelentést, amelyet elküldhet a technikai ügyfélszolgálatnak támogatás céljából. Lásd a 1.5.2 részt.

1.5 Főmenü

A **Menu** (menü) gomb (Ábra 8 **A**) megnyitja a következő menüt (Ábra 9).

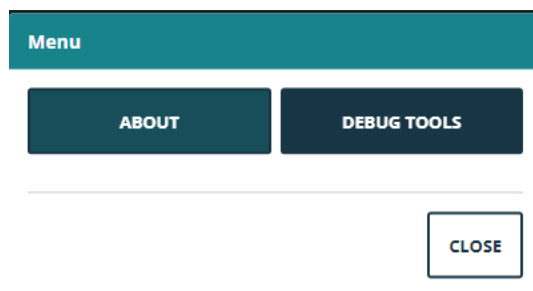

Ábra 9

Az **About** (tudnivalók) gomb megjeleníti a telepített Digistat Suite verzióra és a kapcsolódó licencekre vonatkozó információkat tartalmazó ablakot (további információért lásd az adott dokumentációt).

A termék konkrét címkézése az About Box amely az ügyfelek munkaállomásain, mobil eszközein és webes moduljain jelenik meg, ahol a Digistat Suite telepítve van.

A **Debug Tools** (hibakereső eszközök) gomb a rendszergazdák számára van fenntartva.

1.5.1 Jelszó módosítása


Felhasználói jelszó módosítása

- Kattintson a **User** (felhasználó) gombra a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 10 **A**).



Ábra 10


- Az alábbi menü fog megnyílni (Ábra 11).

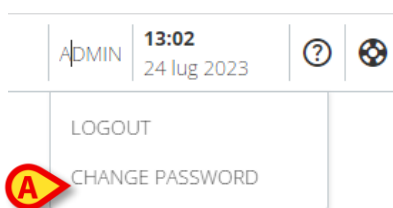

Ábra 11

- Kattintson a: **Change Password** (Jelszó módosítása) (Ábra 11 **A**). Megnyílik a következő képernyő (Ábra 12):

CHANGE PASSWORD

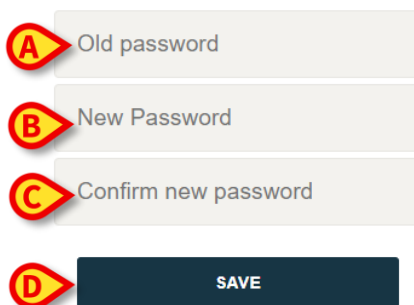

Ábra 12

- Írja be az aktuális jelszót az "OLD password" (régi jelszó) mezőbe (Ábra 12 **A**).
- Írja be az új jelszót a „New password” (új jelszó) mezőbe (Ábra 12 **B**).
- Írja be újra az új jelszót az „Confirm new password” (Új jelszó megerősítése) mezőbe (Ábra 12 **C**).
- Kattintson ide: **Save** (Mentés) (Ábra 12 **D**).

1.5.2 Felhasználói problémabejelentés

Ha jelen van, a  ikon a Control Bar-on (vezérlősávon) (Ábra 13 **A**) lehetővé teszi egy „probléma” jelentés létrehozását, és adott esetben technikai támogatás igénylését.



Ábra 13



Az ikon jelenléte az *EnableUserIssueReporting System Option*-tól (rendszerbeállítástól) függ. További információért forduljon a rendszergazdákhhoz.

Ehhez:

- Kattintson a  ikonra (Ábra 13 **A**). Megnyílik a következő ablak (Ábra 14).

Ábra 14

- Írja be a probléma leírását a "Description" (leírás) mezőbe (Ábra 14 **A**).
- Kattintson a **Send** (küldés) gombra (Ábra 14 **B**).

A visszaigazolás tartalmazza a probléma azonosító számát.

1.6 További almodulok

Az ebben a szakaszban leírt almodulok a Termék konfigurációjától függően jelen lehetnek vagy nem, az egészségügyi szervezetben. Az egyes almodulok a páciens gomb mellett megjelenő legördülő menü egy adott menüpontjára kattintva nyithatók meg. Ezek pácienshez kötöttek, azaz csak akkor állnak rendelkezésre, ha egy páciens már ki van választva.

1.6.1 CDSS konfigurátor

A CDSS Configurator almodul a Control Bar Web kiegészítő részeként történő konfigurálással engedélyezhető. A CDSS konfigurátor almodul megnyitása:

- Válassza ki a megfelelő páciens.



A páciens kiválasztásához lásd a USR HUN Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (USR HUN Patient Explorer Web dokumentum).


A páciens kiválasztása után, ha további Control Bar almodulok állnak rendelkezésre, az ikon megjelenik a páciensgombon (Ábra 15 **A**).



Ábra 15

- Kattintson az  ikonra.

Megjelenik egy legördülő ablak, amely felsorolja a rendelkezésre álló további almodulokat (Ábra 16).

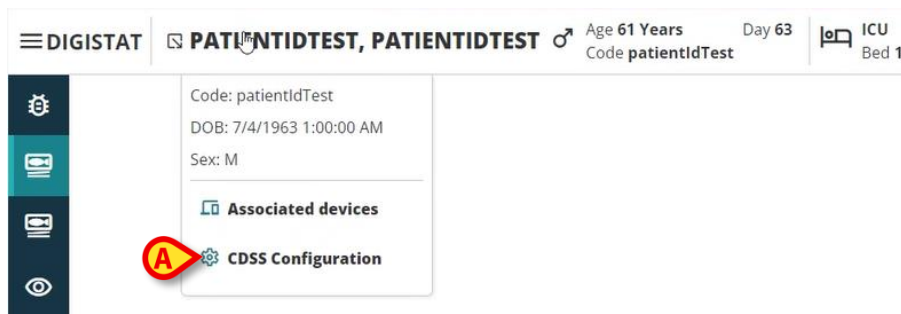

Ábra 16

- Kattintson a „CDSS konfiguráció” elemre (Ábra 16A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez Ábra 17 tartozó szabályokat ().

RULES		
	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Ábra 17

Lásd a CDSS Configurator felhasználói kézikönyvét az almodul teljes leírásáért és használati utasításáért (USR HU CDSS Web dokumentum).

1.6.2 Identity

Az Identity almodul a Control Bar Web kiegészítő részeként történő konfigurálással engedélyezhető. Az Identity almodul megnyitása:

- Válassza ki a megfelelő páciens.



Tekintse meg a USR HUN Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét a páciens kiválasztásához (USR HUN Patient Explorer Web dokumentum).




A páciens kiválasztása után, ha további Control Bar almodulok állnak rendelkezésre, az ikon megjelenik a páciensgombon (Ábra 18 A).



Ábra 18

- Kattintson az  ikonra.


Megjelenik egy legördülő ablak, amely felsorolja a rendelkezésre álló további szakaszokat (Ábra 19).

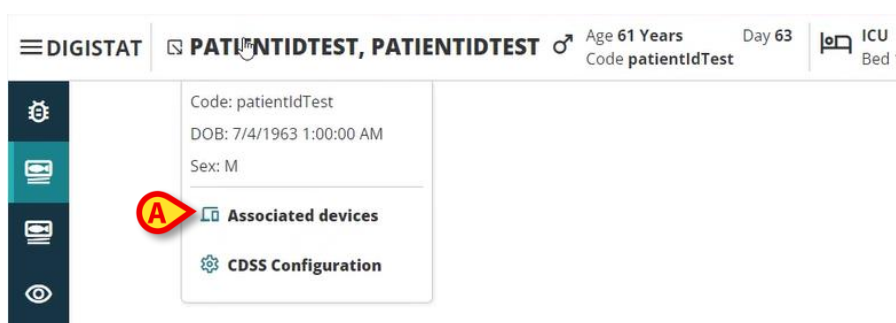

Ábra 19

- Kattintson a „Kapcsolódó eszközök” elemre (Ábra 19 A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez társított eszközöket (Ábra 20).

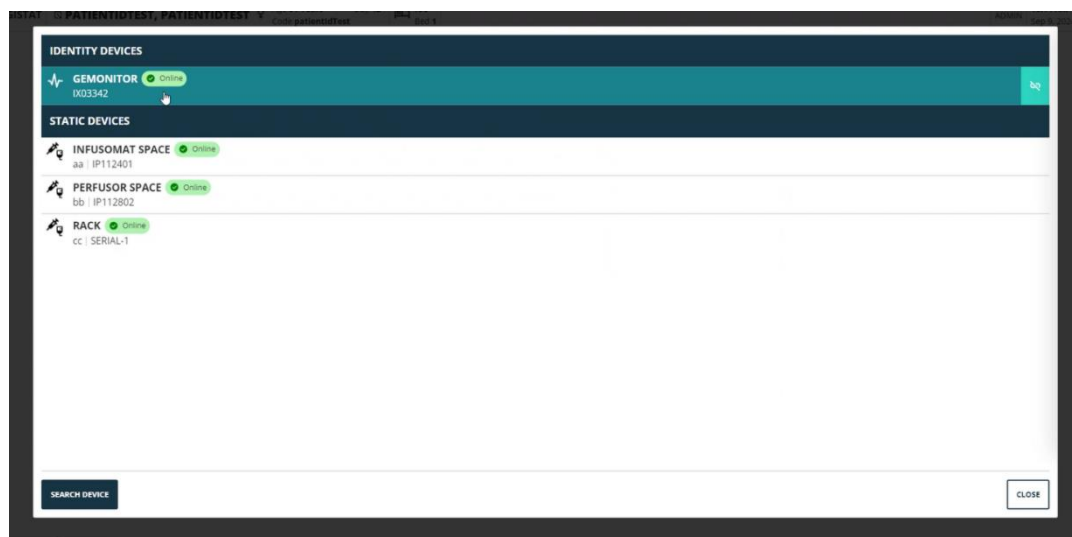

Ábra 20

Lásd az Identity felhasználói kézikönyvben az almodul teljes leírását és használati utasításait (USR HU Identity Web dokumentum).