



Neonatal Patient File

Használati utasítás

2.0 verzió

7/25/2025

Tartalom

1. Bevezetés.....	4
1.1. „Neonatal Patient File” betöltése.....	4
1.2. Beteg kiválasztása	4
2. Az “Neonatal Patient File” felépítése.....	5
2.1. Navigációs panel.....	5
2.2. Adatterület	7
2.3. Parancssor.....	8
3. Adatbevitel	9
3.1. Adatbeviteli példák.....	9
3.1.1. Legördülő listák.....	12
3.1.2. Többszörös választási lehetőség.....	12
3.1.3. Társkapcsolódó mezők.....	12
3.1.4. Szabadszöveges mezők.....	13
3.1.5. Kiválasztó ablak	13
3.1.6. Codefinder előhívása	15
3.1.7. Ápolói pontszámok.....	16
3.1.8. Letiltott mezők.....	18
3.2. Előzmények	18
3.3. Testvéroldalak.....	20
4. A munkafolyamatok magyarázata.....	23
4.1. Beteg	23
4.1.1. Személyes adatok	23
4.1.2. Hozzájárulások.....	27
4.1.3. Elkülönítések.....	29
4.2. Betegértékelés	29
4.2.1. NETS (újszülött és gyermek sürgősségi szállítási szolgálat).....	29
4.2.2. Születés.....	29
4.2.3. Felvétel.....	31
4.2.4. Fizikális vizsgálat	31
4.2.5. Ápolói fizikális vizsgálat	32
4.2.6. Újszülött családjának kórtörténete	32
4.2.7. Szülészeti kórtörténet.....	32
4.2.8. Szülés/Születés/3 szakasz	33
4.3. Napi tevékenységek.....	33
4.3.1. Ápolói átadás-átvétel.....	33

4.3.2. Napi vizit.....	33
4.3.3. Transzfúziók.....	36
4.3.4. Rendellenességek.....	38
4.3.5. Interjúk.....	38
4.3.6. Növekedési diagram.....	38
4.3.7. Személyes tárgyak	40
4.4. Elbocsátás	40
4.4.1. Klinikai elbocsátás	40
4.4.2. Ápolói elbocsátás	42
4.5. Hasznosság	43
4.5.1. Dokumentumok nyomtatása	43



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén). A megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező az ebben a dokumentumban leírt „Neonatal Patient File” helyes és biztonságos használatához.

1. Bevezetés

Az Neonatal Patient File t kifejezetten az újszülött intenzív osztályok számára tervezték. Teljes körű digitális betegdokumentációt biztosít egy könnyen navigálható webes környezetben. A beteginformációkat az osztály klinikai munkafolyamatai szerint általános és speciális részekre bontva rendszerezik.



Ez a modul a *Digistat Docs* része, amely a *Digistat Suite* nem orvosi eszköz terméke. A modulban végzett munka előtt feltétlenül olvassa el a *Digistat Docs* dokumentumot a rendeltetésszerű használatáról.

1.1. „Neonatal Patient File” betöltése

Az „Neonatal Patient File” betöltéséhez:

- Kattintson a(z)  ikonra az oldalsávon.

Megjelenik egy képernyő, amely az aktuálisan kiválasztott páciens adatait mutatja. Ha jelenleg nincs páciens kiválasztva, egy üres képernyő jelenik meg, amelyhez ki kell választani egy páciens. Lásd a(z) 1.2 részt.

1.2. Beteg kiválasztása

A páciens kiválasztásához

- Kattintson az Ábra 1 A jelzés szerinti **Páciens** gombra.



Ábra 1

Megnyílik a „Patient Explorer” webmodul. A betegkezelési funkciókkal kapcsolatos további utasítások a Digistat® „Patient Explorer Web” felhasználói kézikönyvében (*USR HUN Patient Explorer Web*) találhatók.

A páciens kiválasztásakor a modul megjeleníti a kiválasztott páciens adatait. Az alapértelmezés szerint megjelenített oldal a „Személyes adatok” űrlap.



A betegkiválasztáshoz az adott egészségügyi intézmény döntése alapján a „Patient Explorer Web” mellett más modulok is konfigurálhatók. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

2. Az “Neonatal Patient File” felépítése

Minden oldal három fő részből áll:


- Oldalsó navigációs panel, amely lehetővé teszi az egyes oldalak gyors elérését (Ábra 2 **A**).
- A kontextuális adatokat megjelenítő adatterület (Ábra 2 **B**).
- Egy parancssor, amely lehetővé teszi az oldal tartalmának kezelését (Ábra 2 **C**).

The screenshot displays the 'Personal Details' form for a patient. On the left is a vertical navigation panel with categories: 'Patient' (containing 'Personal Details', 'Consents', 'Isolations') and 'Patient Assessment' (containing 'Admission', 'Physical Exam', 'Nursing Physical Exam', 'Neonatal Family History', 'Obstetric Anamnesis', 'Labor/Birth/3rd Stage'). Below these are 'Daily Activities' (Nursing Handover, Daily Visit, Transfusions). A red callout 'A' points to the 'Admission' item. The main area is titled 'Registration Details' and contains various input fields: Patient ID, Patient Code (354223), Date of Birth (06/09/2023), Ethnicity, Family Name (Van Cleef), Given Name (Lee), Gender (Male), Address, City, Province, Country, Birth Date and Time (mm/dd/yyyy), Gestational Age, and Birth Weight (kg). A red callout 'B' points to the 'Given Name' field. At the top right of the form are 'ISOLATION' and 'CHANGE BED' buttons. At the bottom is a 'Parancssor' (action bar) with buttons: NEW, EDIT, SAVE, DELETE, CANCEL. A red callout 'C' points to the 'SAVE' button. The bottom left corner says 'PATIENT FILE NEO' and the bottom right corner has the 'ascom' logo.

Ábra 2

2.1. Navigációs panel

A bal oldalon egy navigációs panel található, amely felsorolja az összes elérhető oldalt (Ábra 2 **A**, Ábra 3).

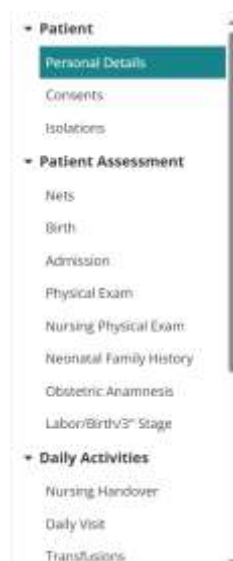

Ábra 3

A különböző felületek öt fő részre oszthatók: betegadatok, betegértékelés, napi tevékenységek, elbocsátás és segédeszközök.

Minden rész különböző űrlapokat tartalmaz, amelyek mindegyike egy adott témának szól.

Beteg → Személyes adatok, Hozzájárulások, Elkülönítés.

Betegvizsgálat → Hálók, Születés, Felvétel, Fizikális vizsgálat, Ápolói fizikális vizsgálat, Újszülöttkori családi anamnézis, Szülészeti anamnézis, Szülés/Születés/³. szakasz.

Napi tevékenységek → Ápolói átadás-átvétel, Napi vizit, Transzfúziók, Fejlődési rendellenességek, Interjúk, Növekedési diagramok, Tételek átadása.


Elbocsátás → Klinikai elbocsátás, Ápolói elbocsátás.

Segédeszközök → Dokumentumok nyomtatása.



A konfiguráció és/vagy a felhasználói engedélyek miatt nem mindig érhető el minden rész/oldal. Ez a kézikönyv egy teljes standard konfigurációt ír le az összes engedéllyel rendelkező felhasználó számára.

A részek nevére kattintva összezsukthatók/kibonthatók a kapcsolódó oldalak. Lásd pl. Ábra 4.

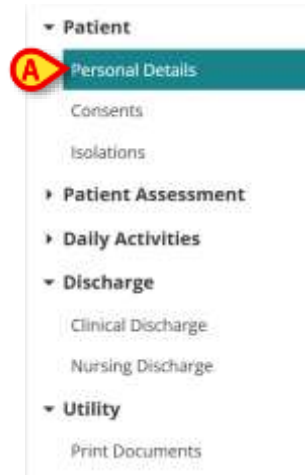

Ábra 4

Az aktuálisan kiválasztott oldal ki van jelölve (Ábra 4 **A**).

- Kattintson az oldal nevére a kiválasztásához, és közvetlenül egy adott tartalomhoz navigáljon.

A könnyebb navigáció érdekében az oldal fejlécében egy vissza gomb jelenik meg azoknál a rekordoknál, amelyek egy adott űrlaphoz kapcsolódó alrekordok. Példaként említhetők a „Hozzájárulások” (Ábra 5) konkrét rekordjai.



Ábra 5

Ha a fejlécben megjelenik az Ábra 5 **A** jelzéssel ellátott balra mutató nyíl,

- A magasabb szintű főlapra való visszatéréshez kattintson rá.

A „Hozzájárulások” oldal leírása a(z) 4.1.2 részben olvasható.

2.2. Adatterület

Minden oldal egy adott témához kapcsolódó adatokat tartalmaz. Különböző eszközök, adatbeviteli módok és adatmegjelenítési módok állnak rendelkezésre, attól függően, hogy milyen típusú adatokat adott meg a kontextusban. Például a „Személyes adatok” oldal (Ábra 6) tartalmazza a beteg személyes adatait, az anya kórházi hivatkozási számát (az anya nozológiai kódja) és a rendelkezésre álló kapcsolatokat.

A különböző adatbeviteli eszközöket és módokat a(z) 3.1 szakasz ismerteti.

Personal Details

A Registration Details

Patient ID

Patient Code: 554223

Date of Birth: 06/09/2025

Ethnicity

Family Name: Van Cleef

Given Name: Lee

Fiscal Code

Gender: Male

Address

City

Province

Country

Birth Date and Time: mm/dd/yyyy

Gestational Age

Birth Weight: kg

B ISOLATION CHANGE BED

Ábra 6

Minden oldalon az adatok témakörök szerint csoportosítva vannak. Minden „témaszekciót” egy címsor határoz meg (Ábra 6 **A**).

- Kattintson a fejlécre egy szakasz kibontásához/összecsukásához.

Itt Ábra 7 például a „Regisztrációs adatok” rész össze van csukva (Ábra 7 **A**).

Personal Details

Registration Details

Maternal Hospitalization Reference

Mother's Nosological Code

Contacts

ADD CONTACT +

No Contacts

Ábra 7

- Használja a Ábra 7 **B** részben jelzett gombokat minden rész bővítéséhez (📄) vagy összecsuksukásához (🔍).

Egy oldalon speciális gombok állhatnak rendelkezésre más oldalak vagy eljárások eléréséhez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az aktuálisan megjelenített oldalon lévőkhöz. Ez a jelű Ábra 6 **B ELKÜLÖNÍTÉS** és **ÁGYCSERE** gombok esetében van így (4.1.1.1 szakasz).

2.3. Parancssor

A parancssor (Ábra 8) tartalmazza azokat a gombokat, amelyek lehetővé teszik a képernyő tartalmának kezelését.

PATIENT FILE NEO

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

Ábra 8

A modul neve a bal oldalon látható. A gombok a következők:

Új – lehetővé teszi új űrlap létrehozását. Ez vagy akkor fordulhat elő, ha "testvéroldalak" elérhetőek (ez például az "Ápolói átadások" esete, ahol általában minden műszak végén új átadás jön létre), vagy az oldal első szerkesztései (például egy beteg felvételi adatainak első bevitelkor).

Szerkesztés – lehetővé teszi az adatbevitelt (az oldal „Szerkesztés módba” vált).

Mentés – lehetővé teszi a változtatások mentését a szerkesztés után.

Törlés – lehetővé teszi egy oldal törlését, ahol lehetséges.

Visszavonás – lehetővé teszi az oldalon végzett módosítások elvetését.


A parancssor gombjai a kontextustól függően engedélyezhetők/letilthatók (például: a **Mentés** gomb csak „Szerkesztés módban”) és/vagy a felhasználói engedélyektől függően (azaz: bizonyos műveleteket csak meghatározott felhasználók hajthatnak végre).

3. Adatbevétel

Amikor egy beteg rekordját első alkalommal nyitja meg, a parancssoron aktiválódik az **Új** gomb, amely lehetővé teszi, hogy új rekordot hozzon létre az adott beteghez. Az egymást követő hozzáféréseknél a csak egyszer kitöltött oldalak esetében az **Új** gomb nem aktív, de a **Szerkesztés** gomb elérhető, és lehetővé teszi a meglévő oldal adatainak módosítását. A több példányban létező rekordok (például a „Napi vizit” rekord) esetében az **Új** gomb az egymást követő időpontokban is aktív marad.

Az adatok megadásához:

- A kontextustól (Ábra 9) függően kattintson a **Szerkesztés** vagy az **Új** gombra.

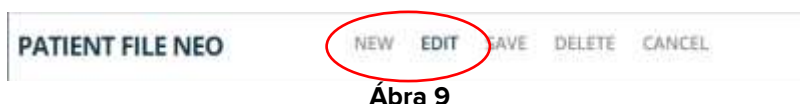

Az oldal „Adatbevétel módra” vált. A gomb, amelyre rákattintott, kijelölésre kerül (Ábra 10 **A**). A **Mentés** és **Visszavonás** gombok engedélyezve vannak (Ábra 10 **B - C**).



- Adja meg az adatokat.
- A módosítások mentéséhez kattintson a **Mentés**, a módosítások elvetéséhez pedig kattintson a **Mégse** gombra.

A bevitt adatok típusától függően többféle adatbeviteli mód létezik. Ezeket a következő részben ismertetjük.

3.1. Adatbeviteli példák

Ez a szakasz a leggyakoribb adatbeviteli módokat ismerteti. Az Neonatal Patient File ba történő adatbevétel nagy része az itt leírt eljárások szerint történik. Az egyes űrlapokhoz kapcsolódó további eljárásokat a szövegkörnyezet ismerteti.

Ábra 11

A(z) Ábra 11 részben példaként a „Felvétel” űrlap látható.

Az adatok megadására általában a következő módon kerül sor:

- Kattintson az **Új** gombra a parancssoron a beteg új rekordjának (Ábra 11 **A**) létrehozásához.

A képernyő „Adatbevitel módra” vált; az adatbevitel engedélyezve van. A parancssorban az **Új** gomb ki van jelölve, a **Mentés** és **Visszavonás** gomb engedélyezve van (Ábra 12).

Ábra 12

Bizonyos mezők csak olvashatók, mivel automatikusan kitöltésre kerülnek. Ezeket a következő bekezdésekben összefüggéseikben mutatjuk be. Például a(z) Ábra 12 **A**-val jelölt mezőjének adatai a kórházi ADT-rendszerből származnak, míg a „Születési dátum és időpont” a „Születés” űrlapról.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, például a „Guthrie elvégezve” és a „Szülői hozzájárulás” a „Transzfúziók” oldalon (Ábra 13 A).

Ábra 13

Az oldal nem menthető, ha nincs kitöltve minden kötelező mező. Ha a felhasználó megpróbál menteni egy bejegyzést hiányos adatokkal, egy előugró ablak jelenik meg, amely felsorolja az összes hiányzó szükséges információt (Ábra 14).

Ábra 14


A hiányzó kötelezően kitöltendő mezők is ki vannak jelölve (Ábra 15 A).

Ábra 15

3.1.1. Legördülő listák

- Kattintson egy névre a listában a legördülő listamező kitöltéséhez.

A „Belső származás” mező például egy legördülő menüből választható ki, amely a lehetséges - konfigurált - származásokat (Ábra 16) tartalmazza.

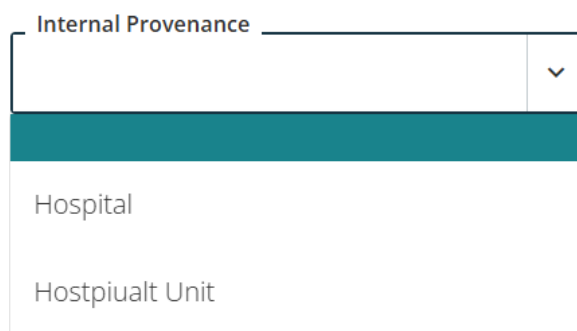

Ábra 16

3.1.2. Többszörös választási lehetőség

Többszörös választási lehetőséget biztosító mezők esetén, mint amilyen például a(z) Ábra 17,

- Kattintson egy lehetőségre a kiválasztásához.



Ábra 17

A kiválasztott opciót kiemelésre kerül (a kiválasztott opciók a kék színűek).

3.1.3. Társkapcsolódó mezők

Egyes opciók további specifikációt tesznek lehetővé. Ez vonatkozik például a „Születés” űrlapon található „Felületaktív anyag”, „Adrenalin”, „Bólus sóoldat” és „K-vitamin” jelölőnégyzetekre, melyek bejelölése lehetővé teszi a kapcsolódó mennyiségek és mértékegységek (Ábra 18) megadását.

Surfactant ☒ YES ☐ NO	Surfactant Quantity + -	Surfactant Measure Unit v
Adrenaline ☐ YES ☐ NO	Adrenaline Quantity	Adrenaline Measure Unit
Bolus Of Saline Solution ☒ YES ☐ NO	Bolus Of Saline Solution Quantity + -	Bolus Of Saline Solution Measure Unit v
Vitamin K ☐ YES ☐ NO	Vitamin K Quantity	Vitamin K Measure Unit

Ábra 18

3.1.4. Szabadszöveges mezők

Írja be a szükséges szöveget a mező kitöltéséhez. Lásd például: Ábra 19.

Ventilatory Support Notes

Notes. Notes. Notes. Notes...

Ábra 19

3.1.5. Kiválasztó ablak

Egyes mezők kiválasztási ablakot nyitnak meg, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a szükséges információk megadását. Ilyen például a problémák leírása a „Napi vizit” oldalon.

Problems

No Problems

Ábra 20

Probléma jelzése

- Kattintson a **Probléma hozzáadása** gombra Ábra 20 A).

Megnyílik egy dedikált kiválasztási ablak (Ábra 21).

Ábra 21

- Válassza ki a Kezdő dátumot és időpontot (Ábra 22 **A**).

Ábra 22

- Válassza ki a készüléket és a problémát a kontextusfüggő legördülő listából (Ábra 22 **B**).
- Jelölje meg a prioritást Ábra 22 **C**).
- Szükség esetén adjon részletesebb leírást (Ábra 22 **D**).
- Kattintson a **Mentés** (Ábra 22 **E**) gombra.

A kiválasztott elemek egy táblázatban vannak felsorolva (Ábra 23 **A**).

Problems				SHOW CLOSED			ADD PROBLEM +		
Start Date and Time	Apparatus	Problem	Priority						
A 6/9/25, 12:00 AM	Respiratory	Dyspnea (shortness of breath)	Low						

Ábra 23

- Kattintson a(z)  ikonra a részletek teljes megjelenítéséhez.

- Kattintson a(z)  ikonra a meglévő elem szerkesztéséhez.
- Kattintson a(z)  ikonra az elem törléséhez.

A „Problémák leírásra” funkcióval kapcsolatos további információk a(z) 4.3.2 bekezdésben található.

3.1.6. Codefinder előhívása

Az ICD9 diagnózisok és eljárások a Digistat „Codefinder Web” modulján keresztül választhatók ki. Ilyen esetekben egy speciális gomb nyitja meg a „Codefinder Web” modult (a „Codefinder Web” modul leírását az *USR HUN Codefinder Web* dokumentum tartalmazza). A következő példa a diagnózis kiválasztásának folyamatát mutatja be a „Felvétel” oldalon (Ábra 24).



Ábra 24


- Kattintson a **Diagnózis hozzáadása** gombra (Ábra 24 **A**).

Ekkor megnyílik a „Codefinder Web” modul (Ábra 25)



Ábra 25

- Keresse meg a szükséges diagnózist (Ábra 26)

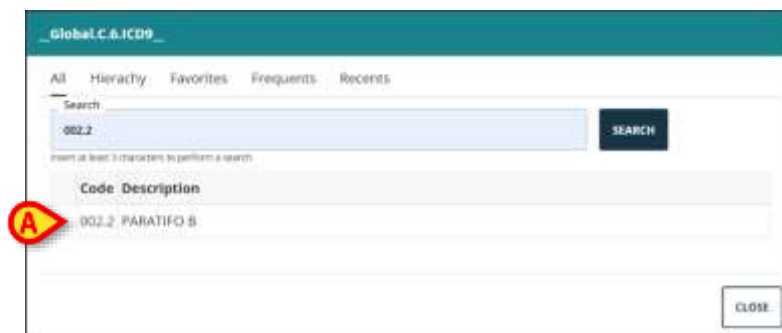

Ábra 26

- Kattintson a kívánt diagnózisra a kiválasztásához (Ábra 26 **A**).

A kiválasztott elem az „Neonatal Patient File ban” egy táblázatban jelenik meg, amely felsorolja az összes kiválasztott elemet (Ábra 27).

Diagnosis		ADD DIAGNOSIS +
Code	Description	
002.2	PARATIFO B	

Ábra 27

- Használja a(z)  ikont egy elem törléséhez az asztalon (Ábra 27 **A**).

3.1.7. Ápolói pontszámok



Alapértelmezés szerint az „Neonatal Patient File” előre beállított példákat jelenít meg az ápolói pontszámokra, amelyek a konfiguráció során módosíthatók. Ezeket az ápolói pontszámokat a Vitals Web konfigurációs alkalmazásban kell beállítani (tekintse meg a CFG ENG Digistat Suite dokumentumot). Ezek a pontszámok csak dokumentációs célokat szolgálnak.

Jelenleg a standard konfiguráció szerint csak egy ápolói pontszám szerepel az „Neonatal Patient Fileban”: az „Apgar-pontszám” a „Születés” űrlapon. (Ábra 28).

Apgar Score	NEW APGAR SCORE +
No Apgar Scores	

Ábra 28

Pontszám dokumentálása:

- Kattintson az **Új Apgar-pontszám** gombra (Ábra 28 **A**).

Ekkor megnyílik a következő ablak (Ábra 29).

Apgar Score

Heart Rate * Muscle Tone * Respiratory Movements *

Nasopharyngeal Reflex * Complexion * Minutes *

Result * **CALCULATE**

ADD **CLOSE**

Ábra 29

- Adja meg az összes szükséges értékelést (a legördülő menüből kell kiválasztani, ebben az esetben - Ábra 30 A).

Apgar Score

Heart Rate * Muscle Tone * Respiratory Movements *

Nasopharyngeal Reflex * Complexion * Minutes *

Result * **CALCULATE**

ADD **CLOSE**

Ábra 30

- Kattintson a **Számítás** gombra (Ábra 30 B).

Az összpontszám ezután megjelenik egy eredménymezőben (Ábra 30 C).

- Kattintson a **Hozzáadás** gombra (Ábra 30 D).

A kiszámított pontszám egy táblázatban jelenik meg a megfelelő űrlapon (ebben az esetben a „Születés” lapon - Ábra 31 A).

Apgar Score **NEW APGAR SCORE +**

Heart Rate	Respiratory Movements	Muscle Tone	Nasopharyngeal Reflex	Complexion	Minutes	Result			
Less than 100 bpm	Slow breathing	Some flexion of extremities	Grimace or weak cry with stimulation	Pink body, blue extremities	30	5			

Ábra 31

3.1.8. Letiltott mezők

Egyes mezők letilthatók vagy csak olvashatók. A mezők a felhasználói jogosultságok alapján letilthatók, ha például egy felhasználónak nincs engedélye az adott művelet végrehajtására.

Egyes adatok a kórházi ADT-ből származnak. A beteg személyes adatai (név, vezetéknév, születési dátum stb.) – például a „Személyes adatok képernyő” űrlapon – a kórházi ADT-rendszerből öröklődnek, és az „Neonatal Patient File” (Ábra 32 **A**) űrlapon csak olvashatók.

A csak olvasható mezők másik forrása lehet az „Neonatal Patient File” egy másik oldala vagy egy külső Digistat alkalmazás. Például a Ábra 32 **B** részben (a „Személyes adatok” oldalon) található, csak olvasható mezők adatai a „Születés” oldalról származnak, és eredetileg a Digistat „Online Web” moduljából kerültek be. A „Születés” űrlap leírását a(z) 4.2.2 szakaszban olvashatja.

Registration Details

Patient ID

Patient Code: 554223

Date of Birth: 06/09/2025

Ethnicity

Family Name: Van Cleef

Given Name: Lee

Fiscal Code

Gender: Male

Address

City

Province

Country

Birth Date and Time: 06/08/2025 10:00 PM

Gestational Age: 32 days and 4

Birth Weight (g): 1.9

ISOLATION CHANGE BED

Ábra 32

3.2. Előzmények

A rekord létrehozására és utolsó szerkesztésére vonatkozó adatok mindig az egyes rekordok bal alsó sarkában jelennek meg.

A megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók a rekordmódosítások előzményeihez is hozzáférhetnek. Ha ez a lehetőség engedélyezve van, akkor az oldalon a létrehozási és szerkesztési információk mellett megjelenik egy külön „Felvételi előzmények” hivatkozás is (Ábra 33 **A**).

Created by ADMIN on 6/11/25, 10:25 AM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 10:42 AM [Record history](#)

Ábra 33

- A linkre kattintva a következő ablak nyílik meg (Ábra 34)




Ábra 34

Az ablak a rekordon végzett összes szerkesztést felsorolja. Minden sor egy adott szerkesztésnek felel meg (Ábra 34 **A**). Felül az aktuális verzió látható. Az alábbiakra van lehetőség:

- Kattintson egy sorra a rekord korábbi verziójának megjelenítéséhez.

A megjelenített korábbi verziók csak olvashatók.

Az egyes sorok jobb oldalán található ikon (Ábra 34 **B**) megnyit egy ablakot, amely összehasonlítja a kiválasztott verziót az előző verzióval (Ábra 35). Az ikon csak a meghatározott jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára látható.

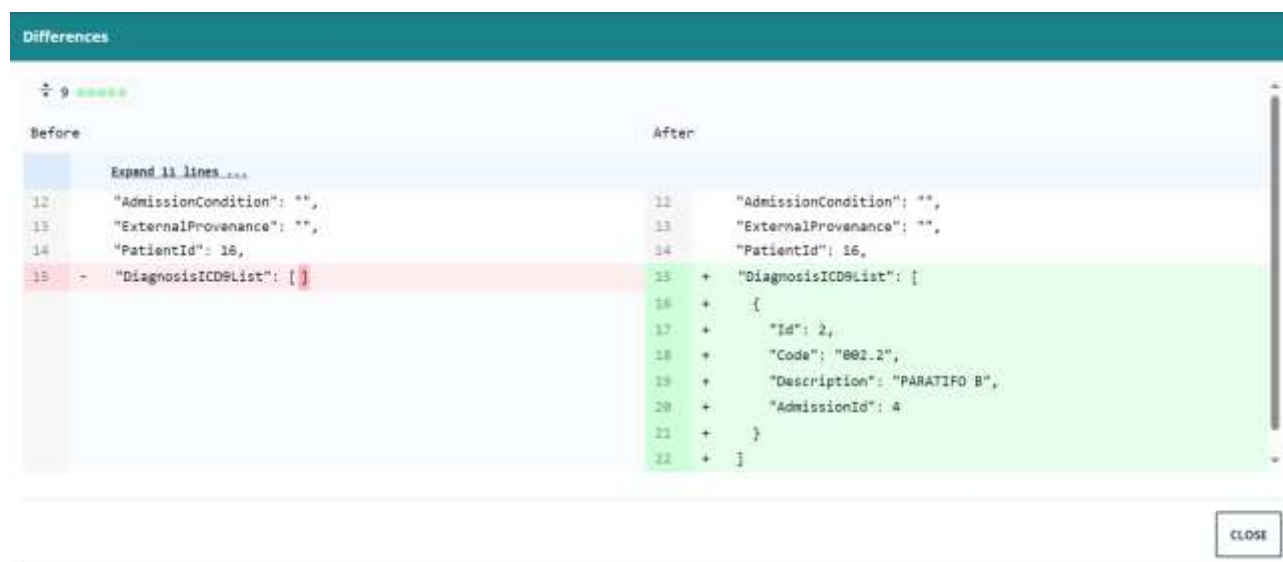

Ábra 35

3.3. Testvéroldalak

Egyes tevékenységeket többször is elvégeznek a beteg tartózkodása alatt. Ez ugyanazon páciensnél több azonos típusú bejegyzést eredményez. Ilyen például az „Ápolói átadás-átvételi” jegyzőkönyv, amelyet általában az ápolószemélyzet tölt ki és ment el minden műszak végén (Ábra 36).

The screenshot shows the 'Nursing Handover' form. On the left is a sidebar with a menu under 'Patient' (Personal Details, Consents, Isolations) and 'Patient Assessment' (Nets, Birth, Admission, Physical Exam, Nursing Physical Exam, Neonatal Family History, Obstetric Anamnesis, Labor/Birth/3rd Stage). Under 'Daily Activities', 'Nursing Handover' is selected. The main form has a title 'Nursing Handover' and a section 'Assessment' with a minus icon. Under 'Breath', there are buttons for 'NORMAL BREATHING', 'DYSPNEA (DIFFICULTY BREATHING)', 'GROAN', 'INTERCOSTAL RETRACTIONS', 'NASAL FLARING', 'EPIGASTRIC RETRACTIONS', 'JUGULAR RETRACTIONS', and 'SEE-SAW BREATHING'. Under 'Ventilatory Support', there are buttons for 'O2', 'CPAP', 'TET', 'LARYNGEAL MASK', and 'HFNC'. To the right of these are two large text input areas labeled 'Ventilatory Support Notes' and 'Reactivity Notes'. At the bottom left, under 'Reactivity', there are 'YES' and 'NO' buttons.

Ábra 36

Új „Ápolói átadás-átvétel” létrehozása:

- Kattintson az **Új** gombra a parancssorban (Ábra 36 **A**).

Az oldal „Szerkesztés módra” vált (Ábra 37).

This screenshot shows the same 'Nursing Handover' form as in the previous image, but in edit mode. The buttons for 'Breath' and 'Ventilatory Support' are now outlined with black borders, indicating they are active or selected. The text input areas for 'Ventilatory Support Notes' and 'Reactivity Notes' are also outlined with black borders. The overall layout and sidebar menu are identical to the previous image.

Ábra 37

- Töltse ki az összes kötelező mezőt (Ábra 38).

Nursing Handover

Assessment

Breath

NORMAL BREATHING DYSPNEA (DIFFICULTY BREATHING) GROAN INTERCOSTAL RETRACTIONS NASAL FLARING EPIGASTRIC RETRACTIONS

JUGULAR RETRACTIONS SEE-SAW BREATHING

Ventilatory Support

O2 CPAP TET LARYNGEAL MASK HFNC

Ventilatory Support Notes

Reactivity

YES NO

Reactivity Notes

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

ascom

Ábra 38

- Kattintson a **Mentés gombra**, ha kész (Ábra 38 **A**).

A bejegyzés mentésre kerül (Ábra 39).

Nursing Handover

Assessment

Breath

NORMAL BREATHING DYSPNEA (DIFFICULTY BREATHING) GROAN INTERCOSTAL RETRACTIONS NASAL FLARING EPIGASTRIC RETRACTIONS

JUGULAR RETRACTIONS SEE-SAW BREATHING

Ventilatory Support

O2 CPAP TET LARYNGEAL MASK HFNC

Ventilatory Support Notes

Reactivity

YES NO

Reactivity Notes

Created by ADMIN on 6/11/25, 10:53 AM [Record history](#)

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

ascom

Ábra 39

A parancssorban a következő gombok engedélyezve vannak (Ábra 39 **A**):

Új – lehetővé teszi új, azonos típusú bejegyzés létrehozását.

Szerkesztés – meglévő bejegyzés szerkesztésének engedélyezése.

Törlés – bejegyzés törlésének engedélyezése.

Ha több bejegyzés is elérhető, a pontban jelzett gombok segítségével lehet navigálni a különböző bejegyzésekhez Ábra 39 **B**.

Kattintson a(z)  gombra a következő bejegyzés megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az előző bejegyzés megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az utolsó bejegyzés (a legutóbbi) megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra az első bejegyzés (a legrégebbi) megjelenítéséhez.

Kattintson a(z)  gombra egy táblázat megjelenítéséhez, amely felsorolja az összes létező bejegyzést (Ábra 40).

DateCreatedUtc	Breath	VentilatorySupport
6/11/25, 10:53 AM	Dyspnea (difficulty breathing)	O2
6/11/25, 10:56 AM	Dyspnea (difficulty breathing)	O2
6/11/25, 10:57 AM	Dyspnea (difficulty breathing)	O2

Ábra 40

A sárga sor az éppen megjelenített bejegyzést jelzi. Kattintson egy sorra a megfelelő bejegyzés megjelenítéséhez.

4. A munkafolyamatok magyarázata

Ez a szakasz felsorolja és elmagyarázza az „Neonatal Patient File” egyes rekordjait. Ha az adatbevitel módja a(z) 3.1 fejezetben leírt lehetőségek valamelyike, akkor a részletes utasításokért a(z) 3.1 fejezetre kell hivatkozni. Egyes rekordok ehelyett speciális, dedikált munkafolyamatot igényelnek. Ezeket a megfelelő kontextusban ismertetjük.

4.1. Beteg

4.1.1. Személyes adatok

A „Személyes adatok” rekord a kiválasztott beteg valamennyi személyes adatát tartalmazza.

The screenshot shows the 'Personal Details' form for a neonatal patient. The form is organized into two main sections: 'Registration Details' and 'Birth Details'. The 'Registration Details' section includes fields for Patient ID, Patient Code, Date of Birth, Ethnicity, Family Name, Given Name, Fiscal Code, Gender, Address, City, Province, and Country. The 'Birth Details' section includes fields for Birth Date and Time, Gestational Age, and Birth Weight (kg). A red circle labeled 'A' highlights the 'Registration Details' section, and a red circle labeled 'B' highlights the 'Birth Details' section.

Registration Details			
Patient ID			
Patient Code	Date of Birth	Ethnicity	
554223	06/09/2025		
Family Name	Given Name	Fiscal Code	Gender
Van Cleef	Lee		Male
Address	City	Province	Country

Birth Details		
Birth Date and Time	Gestational Age	Birth Weight (kg)
06/08/2025 10:00 PM	32 days and 4	1.8

Ábra 41

Az Ábra 41 **A-ban** jelzett, csak olvasható mezőkben szereplő adatok a kórházi ADT-ből származnak.

A Ábra 41 **B-ben** jelzett, csak olvasható mezőkben szereplő adatok a „Születés” rekordból származnak. Lásd a(z) 4.2.2 részt.

- Kattintson az alul, a „Kapcsolatok” területen (Ábra 42 **A**) található **Kapcsolattartók hozzáadása** gombra a kapcsolattartók adatainak megadásához. Az utasításokat a(z) 3.1.5 rész tartalmazza.

Personal Details

Birth Date and Time 06/08/2025 10:00 PM	Gestational Age 32 days and 4	Birth Weight [g] 1.9
--	----------------------------------	-------------------------

⊖ Maternal Hospitalization Reference

Mother's Nosological Code

⊖ Contacts

No Contacts

A ADD CONTACT +

Ábra 42

4.1.1.1. „Ágycsere” és „Elkülönítés” parancsikonok

Ezen az oldalon két gomb szolgál parancsikonként a kapcsolódó eljárásokhoz. Ezek az **Ágycsere** és az **Elkülönítés** gombok (Ábra 43 A).

Personal Details

⊖ Registration Details

Patient ID

Patient Code
554223

Date of Birth
06/09/2025

Ethnicity

Family Name
Van Cleef

Given Name
Lee

Fiscal Code

Gender
Male

Address

City

Province

Country

Birth Date and Time
06/08/2025 10:00 PM

Gestational Age
32 days and 4

Birth Weight [g]
1.9

A ISOLATION CHANGE BED

Ábra 43

Ágycsere

Az Ágycsere gombbal gyorsan rögzíthető, hogy a páciens átkerült egy másik ágyra.

- Kattintson **az Ágy megváltoztatása** lehetőségre a „Páciens mozgatása” ablak megnyitásához




Ábra 44

- Válassza ki a rendeltetési osztályt és ágyat az ablakon, majd kattintson **az Áthelyezés gombra** (Ábra 44 **A**).

Elkülönítés

- Kattintson **az Elkülönítés** gombra, hogy közvetlenül elérje az „Elkülönítés” oldalt, amely lehetővé teszi a páciens elkülönítési időszakainak dokumentálását (Ábra 45).

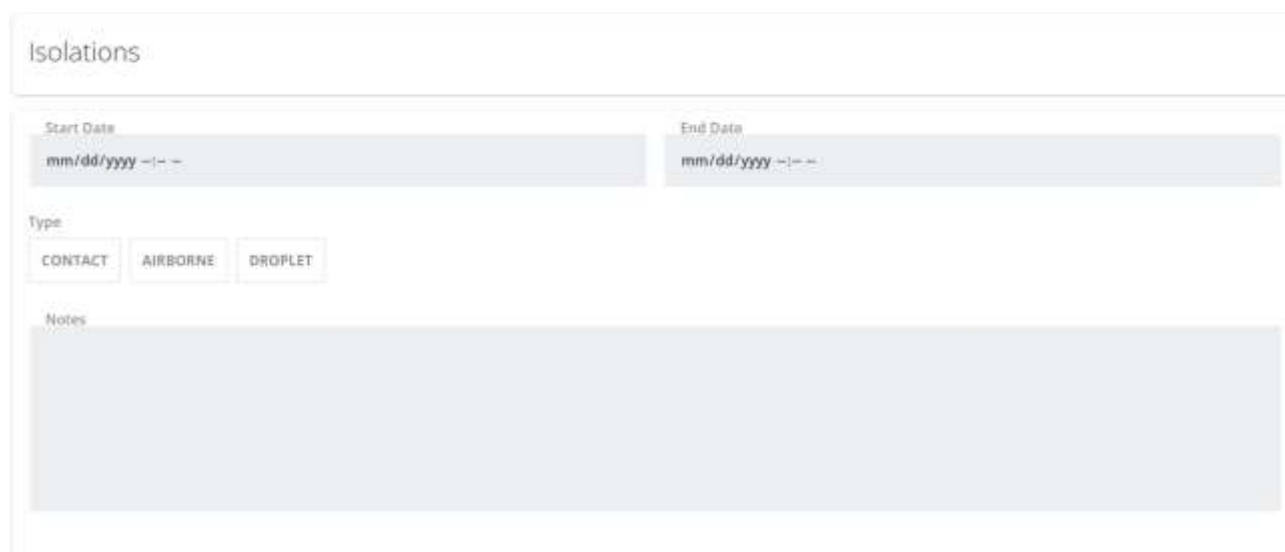

Ábra 45

Ha az elkülönítési időszak elkezdődött (a kezdési dátum meg van adva), de nem fejeződött be (a befejezési dátum nincs megadva), Ábra 46



Ábra 46

akkor az Elkülönítés gomb piros színnel jelenik meg a „Személyes adatok” oldalon (Ábra 47).

Ábra 47

- Kattintson ismét a gombra az oldal újbóli megnyitásához és a végdátum megadásához.

Több „Elkülönítés” rekord is létrehozható. Az új „Elkülönítés” rekord létrehozásának feltétele, hogy az előző rekord le legyen zárva, vagyis rendelkezzen végdátummal.

4.1.2. Hozzájárulások

A „Hozzájárulások” rekord lehetővé teszi a beteg vagy a család által adott szükséges hozzájárulások állapotának nyomon követését.

Egy konfigurációs opció számos alapértelmezett hozzájárulás előzetes feltöltését is lehetővé teszi. A(z) Ábra 48 részben van egy előre feltöltött hozzájárulás.

Consents					
Acquisition Datetime	Code	Description	Outcome	Notes	Doctor
	00.01	TERAPIA AD ULTRASUONI DEI VASI DI TESTA E COLLO	Not Proposed		

Ábra 48

- Kattintson az egyik sorra a megfelelő hozzájárulás megnyitásához (Ábra 49).

Ábra 49

- Kattintson a **Szerkesztés** gombra a parancssorban (Ábra 49 **A**).

Az űrlap „Adatbevitel módra” vált (Ábra 50).

Ábra 50

Az első megnyitáskor minden hozzájárulás „Nem javasolt” állapotban jelenik meg (Ábra 50 **A**).

- Kattintson egy másik válaszlehetőségre a hozzájárulás állapotának módosításához (Igen, Nem, Részleges).

Ha az alapértelmezés szerint felsorolt hozzájárulásoktól eltérő hozzájárulásra van szükség, más hozzájárulás feltöltésére és kiválasztására is van lehetőség. Ehhez:

- Kattintson a parancssoron található **Új** gombra (Ábra 49 **B**).

Ekkor a következő képernyő nyílik meg (Ábra 51).

Ábra 51

- Kattintson a **Keresés** gombra (Ábra 51 **A**).

Megnyílik a „Digistat Codefinder” ablak. A kiválasztásra vonatkozó utasításokat a(z) 3.1.6 szakasz tartalmazza. Az újonnan kiválasztott hozzájárulás hozzáadásra kerül a hozzájárulások listájához (amelyik a(z) Ábra 48 részben látható).

4.1.3. Elkülönítések

Lásd a(z) 4.1.1.1r észt.

4.2. Betegértékelés

4.2.1. NETS (újszülött és gyermek sürgősségi szállítási szolgálat)

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1 részt.

Egy konfigurációs lehetőség lehetővé teszi az Ábra 52 **A**-ban megjelölt mezők előzetes kitöltését. Ezek a mezők szöveges mezők. Az előre kitöltött alapértelmezett tartalom egy sablon, amely a kitöltési folyamat felgyorsítására szolgál, de törölhető, ha nem releváns.

Nets

Temperature [°C] Heart Rate Respiratory Rate SaO2

ASSISTANCE DURING TRANSPORT

In The Transferring Center

- Ventilazione meccanica;
- CPAP con nasocannule;
- FIO2/SaO2;
- Infusione CDC / Vena periferica;
- Farmaci;
- Altro:

During Transfer

- Utilizzo di ventilazione meccanica non invasiva
- Applicazione di CPAP attraverso nasocannule
- Monitoraggio livelli FIO2 e SaO2
- Infusione venosa periferica di soluzioni
- Farmaci in corso di somministrazione
- Procedure aggiuntive

Upon Arrival

Default text value for ArrivalAssistance field

Arrival Date and Time
mm/dd/yyyy

Ábra 52

4.2.2. Születés

A „Születés” adatok egy részét a Digistat „Online Web” moduljából importálják, ahol ezek bevitelére egy külön táblázat áll rendelkezésre.

Birth

Birth Date and Time mm/dd/yyyy Birth Register Code

Weight [g] Min Weight Percentile [%] Max Weight Percentile [%]

Height [cm] Min Height Percentile [%] Max Height Percentile [%]

Head Circumference [cm] Min Head Circumference Percentile [%] Max Head Circumference Percentile [%]

Gestational Age [weeks] Gestational Age [days]

Presentation

VERTEB RECTOR CASCULAR BIRTHDATE BIRTH REG BIRTH

Ábra 53

Az adatok importálása

- Írja be a születési dátumot és időpontot az Ábra 53 **A** pontban megjelölt mezőbe.

A születési dátumnak és időpontnak meg kell egyeznie az „Online Web” megfelelő oszlopában megadott értékekkel.

Ezután megjelennek az "Online Web" adatok (Ábra 54). A kapcsolódó percentilisek is automatikusan kiszámításra kerülnek a használt növekedési diagramnak megfelelően. A növekedési diagramot a „Fizikális vizsgálat” űrlapon kell kiválasztani (4.2.4 szakasz).

Birth

Birth Date and Time 06/09/2025 12:00 AM Birth Register Code

Weight [g] 1.9 Min Weight Percentile [%] P Max Weight Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 6/9/25, 12:00 AM

Height [cm] 45 Min Height Percentile [%] P01 Max Height Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 6/9/25, 12:00 AM

Head Circumference [cm] 31 Min Head Circumference Percentile [%] P01 Max Head Circumference Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 6/9/25, 12:00 AM

Gestational Age [weeks] 32 Gestational Age [days] 4

Presentation

VERTEB RECTOR CASCULAR BIRTHDATE BIRTH REG BIRTH

Created by ADMIN on 6/10/25, 2:53 PM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 10:19 AM [Record history](#)

Ábra 54

Ezek a kitöltött mezők az „Neonatal Patient Fileban” csak olvashatók.

Az ezen az oldalon található egyéb adatbeviteli eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg az általános adatbeviteli útmutatót. Lásd a(z) 3.1 részt.

4.2.3. Felvétel

Ha az információ rendelkezésre áll, a „Felvételi dátum”, a „Születési dátum és idő” valamint a „Felvételi kor” mezők automatikusan kitöltődnek a felvételi rekord létrehozásakor (kattintson az **Új** gombra a parancssoron). A születési dátum és időpont a „Születés” űrlapról származik; a „Felvételi dátum” a Digistat „Patient Explorer” moduljában a felvételtkor megadott dátum; a „Felvételi kor” pedig kiszámításra kerül, amennyiben a korábbi adatok rendelkezésre állnak.

Admission

Admission Date: 06/09/2025 12:00 AM

Admitting Doctor: ADMIN

Birth Date and Time: 06/09/2025 12:00 AM

Admission Age: 0 day/s and 0 hour/s

Blood Type: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-

Internal Provenance:

External Provenance:

Admission Reason:

TRANSIENT TACHYPNEA OF NEWBORN (TTN) NEONATAL RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (RDS) MECONIUM ASPIRATION SYNDROME

PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION OF THE NEWBORN (PPHN) NEONATAL SEPSIS NEONATAL PNEUMONIA CONGENITAL VIRAL INFECTIONS

NEONATAL JAUNDICE DUE TO HEMOLYSIS NEONATAL HYPERBILIRUBINEMIA PRETERM BIRTH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT

NEONATAL FEEDING DIFFICULTIES NECROTIZING ENTEROCOLITIS (NEC) INTRACRANIAL LACERATION AND HEMORRHAGE BRACHIAL PLEXUS INJURY

Created by ADMIN on 6/11/25, 10:25 AM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 10:42 AM [Record history](#)

Ábra 55

Az ezen az oldalon található egyéb adatbeviteli eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg az általános adatbeviteli útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.2.4. Fizikális vizsgálat

Az Ábra 56 **A**-ban lévő mező („Növekedési diagram szolgáltatója”) egy legördülő menü, amely lehetővé teszi a percentilisek kiszámításához használni kívánt konkrét növekedési diagram kiválasztását. Ezért az itt megadott választás a többi űrlapra is hatással van („Születés”, „Napi vizit” és „Növekedési diagramok”).



A növekedési diagram szolgáltatója nem módosítható, ha legalább egy „Napi vizit” már elmentésre került (4.3.2 bekezdés).

Physical Exam

Growth Chart Provider * spvd ▼ Compiling Doctor ADMIN ▼

Weight [g] 1.9 Min Weight Percentile [%] 0 Max Weight Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 5/9/25, 12:00 AM

Height [cm] 45 Min Height Percentile [%] P01 Max Height Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 5/9/25, 12:00 AM

Head Circumference [cm] 31 Min Head Circumference Percentile [%] P01 Max Head Circumference Percentile [%] P1

Online Clinical Date and Time: 5/9/25, 12:00 AM

Risk Factors ADD RISKFACTOR +

No RiskFactors

Ábra 56

A „Súly”, a „Magasság” és a „Fejkörfogat” mezők (Ábra 56 **B**) automatikusan kitöltésre kerülnek. Ezeket az adatokat a Digistat „Online Web” moduljából importálják, ahol a tényleges adatbevitel történik. A percentilisek automatikusan kiszámításra kerülnek a kiválasztott növekedési diagramnak megfelelően.

Az ezen az oldalon található egyéb adatbeviteli eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg az általános adatbeviteli útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.2.5. Ápolói fizikális vizsgálat

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.2.6. Újszülött családjának kórtörténete

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.2.7. Szülészeti kórtörténet

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.2.8. Szülés/Születés/3 szakasz

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.3. Napi tevékenységek

A napi tevékenységek a beteg tartózkodása alatt többször is elvégzésre kerülnek. Ezért minden tevékenységhez több rekord is létrehozható. Az ilyen típusú rekordokkal kapcsolatos funkciók általános leírását, valamint a különböző rekordok közötti navigációra vonatkozó utasításokat a(z) 3.3 szakasz tartalmazza.

4.3.1. Ápolói átadás-átvétel

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.3.2. Napi vizit

A „Napi vizit” oldal felső része a súly, a magasság és a fejkörfogat napi mérését tartalmazza (Ábra 57 **A**). Ez a rész minden alkalommal frissül, amikor új „Napi vizit” rekord jön létre.

Daily Visit

Visit Date: 06/11/2025 01:01 PM

Sampling Doctor: ADMIN

Weight [g]: 2.2

Min Weight Percentile [%]: 0

Max Weight Percentile [%]: P1

Online Clinical Date and Time: 6/11/25, 1:01 PM

Height [cm]: 46

Min Height Percentile [%]: 0

Max Height Percentile [%]: P01

Online Clinical Date and Time: 6/11/25, 1:01 PM

Head Circumference [cm]: 32

Min Head Circumference Percentile [%]: 0

Max Head Circumference Percentile [%]: P01

Online Clinical Date and Time: 6/11/25, 1:01 PM

Visit Notes

Created by ADMIN on 6/11/25, 12:59 PM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 1:03 PM [Record history](#)

Ábra 57

A „Súly”, a „Magasság” és a „Fejkörfogat” mezők (Ábra 57 **A**) automatikusan kitöltődnek, amikor a vizit dátumát/idepontját beillesztik a Ábra 57 **B** mezőbe. Ezek az adatok a Digistat „Online Web” moduljából származnak, ahol a tényleges adatbevitel történik. A percentilisek automatikusan kiszámításra kerülnek a Fizikális vizsgálat oldalon (4.2.4 szakasz) kiválasztott

növekedési diagram alapján. A Digistat „Online Web” modul leírását az USR HUN Online Web dokumentum tartalmazza.



Az „Online Web” felületén gyűjtött adatok a megfelelően konfigurált táblázatban, az itt megadott dátumot és időpontot megelőző, beállított időintervallumban található legfrissebb oszlopban szerepelnek. A konkrét időtartamot egy system option határozza meg.



Ha az adatokat az „Online Web” felületen módosítja, a változások megjelennek az Neonatal Patient Fileban, amikor az oldal „Adatbevitel” módba vált. Vagyis amikor a parancssoron a **Szerkesztés** gombra kattint.

A „Napi vizit” képernyő alsó része felsorolja a beteg problémáit (Ábra 58 **A**). A meglévő problémáknak minden új rekordon láthatónak kell lenniük, ezért a „Napi vizit” rekord minden egyes példányán megjelennek, kivéve abban az esetben, ha törlésre kerülnek vagy lezártnak jelölik őket.

Daily Visit

Problems

SHOW CLOSED ADD PROBLEM +

Start Date and Time	Apparatus	Problem	Priority		
6/9/25, 12:00 AM	Cardiovascular	Cyanosis	Medium		
6/9/25, 12:00 AM	Respiratory	Dyspnea (shortness of breath)	Low		

Assessments

SHOW DELETED ADD ASSESSMENT +

No Assessments

Created by ADMIN on 6/11/25, 12:59 PM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 1:03 PM [Record history](#)

Ábra 58

A problémákat tartalmazó táblázat az ezen az oldalon („Napi vizit” – a **Probléma hozzáadása** gombra kattintva, a(z) 3.1.5 szakaszban leírtak szerint) hozzáadott problémákat, valamint a „Fizikális vizsgálat” oldalon feltüntetett problémákat is felsorolja. A „Fizikális vizsgálat” oldalon hozzáadottak adatok itt nem szerkeszthetők vagy törölhetők (az ikonok gombjai le vannak tiltva; például a Ábra 58 **B**).

Minden egyes problémához számos értékelés dokumentálható.

Az értékelés dokumentálása:

- Kattintson az értékelendő problémának megfelelő sorra.

A sor kiemelésre kerül (Ábra 59 **A**). Az **Értékelés hozzáadása** gomb elérhető lesz (Ábra 59 **B**).

Daily Visit

Problems

SHOW CLOSED ADD PROBLEM +

Start Date and Time	Apparatus	Problem	Priority			
6/9/25, 12:00 AM	Cardiovascular	Cyanosis	Medium			
6/9/25, 12:00 AM	Respiratory	Dyspnea (shortness of breath)	Low			

Assessments

SHOW DELETED ADD ASSESSMENT +

No Assessments

Created by ADMIN on 6/11/25, 12:59 PM - Edited by ADMIN on 6/11/25, 1:03 PM [Record history](#)

Ábra 59

- Kattintson az **Értékelés hozzáadása** gombra (Ábra 59 **B**).

Megnyílik a következő ablak.

Assessment

Assessment Date *

☐ Problem Closed

Notes

Compiling Doctor

Ábra 60

- Töltse ki a szükséges mezőket (Dátum/idő, Összeállító orvos, Megjegyzések). Szükség van az értékelés időpontjának megadására.
- Kattintson a **Mentés** gombra (Ábra 60 **A**).

Az értékelés egy erre a célra szolgáló táblázatban jelenik meg (Ábra 61 **A**). Az adott probléma kiválasztásakor megjelennek a problémához kapcsolódó értékelések. Vagyis a problémának megfelelő sorra kell kattintani, hogy megjelenjenek az adott problémára vonatkozó meglévő értékelések.

Problems

Start Date and Time	Apparatus	Problem	Priority			
6/9/25, 12:00 AM	Cardiovascular	Cyanosis	Medium			
6/9/25, 12:00 AM	Respiratory	Dyspnea (shortness of breath)	Low			

Assessments

Assessment Date	Notes	Compiling Doctor			
6/12/25, 8:00 AM	Notes	ADMIN			

Ábra 61

A „Probléma lezárva” jelölőnégyzet az értékelési specifikáció ablakban (Ábra 60 **B**) lehetővé teszi egy probléma lezárásának dokumentálását.

A lezárt problémák nem jelennek meg a problémák táblázatában, kivéve, ha a **Lezártak megjelenítése** gomb ki van választva (Ábra 61 **B**).

A **Töröltek megjelenítése** gomb használatával megjeleníthetők a törölt értékelések (Ábra 61 **C**).



Ha a „Probléma lezárása” értékelés törlésre kerül, a probléma ismét megjelenik a nyitott problémák listáján.

Az ezen az oldalon található egyéb adatbeviteli eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg az általános adatbeviteli útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.3.3. Transzfúziók

A „Transzfúziók” oldal egy táblázatban sorolja fel az összes elvégzett transzfúziót (Ábra 62 **A**).

Transfusions

Type	Blood Type	Bag Id	Start Datetime	Reactions	Notes	End Datetime
Red Blood Cells	O+		6/11/25, 12:00 AM			
Platelets	O+		6/9/25, 12:00 AM			

NEW EDIT SAVE DELETE CANCEL

ascorn

Ábra 62

Új transfúzió dokumentálása:

- Kattintson a parancssoron található Új gombra (Ábra 62 B).

A következő űrlap nyílik meg (Ábra 63).

< Transfusions - New

Type: **RED BLOOD CELLS** PLASMA PLATELETS

Blood Type: A+ A- B+ B- AB+ AB- **O+** O-

Cross Test Carried Out: YES NO

Positive Checklist: YES NO

Parental Consent * ☒
 If the system option of the consent code of Parental Consent is set, this field is set to True

Bag Id: 3245

Guthrie Performed * ☒

Start Datetime: 06/12/2025 12:00 AM

Registering User Start: ADMIN

Reactions: No reaction

NEW EDIT **SAVE** DELETE CANCEL

ascorn

Ábra 63

Adja meg az összes szükséges információt. A „Szülői hozzájárulás” és a „Guthrie elvégezve” jelölőnégyzeteket kötelező bejelölni, ellenkező esetben az oldal nem menthető (Ábra 63 A - B).



Egy konfigurációs opció lehetővé teszi a „Szülői hozzájárulás” előzetes kiválasztását, ha az már meg van adva a „Hozzájárulások” oldalon (4.1.2 szakasz).

Az ezen az oldalon található egyéb adatbeviteli eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg az általános adatbeviteli útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

- Kattintson a parancssoron (Ábra 63 **C**) található **Mentés** gombra, ha új transzfúziót szeretne felvenni a listára (Ábra 64).

Transfusions						
Type	Blood Type	Bag Id	Start Datetime	Reactions	Notes	End Datetime
Red Blood Cells	O+		6/11/25, 12:00 AM			
Platelets	O+		6/9/25, 12:00 AM			
Red Blood Cells	O+	3245	6/12/25, 12:00 AM	No reaction		

Ábra 64

4.3.4. Rendellenességek

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.


4.3.5. Interjúk

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1.részt.

4.3.6. Növekedési diagram

Ez az oldal diagramokon ábrázolja a beteg növekedési trendjeit és percentiliseit a kiválasztott standard diagramokhoz viszonyítva.

Az itt alkalmazott konkrét diagramot a „Fizikális vizsgálat oldal” („Növekedési diagram szolgáltatója” mező -Ábra 56 **A**, 4.2.4 szakasz) választja ki.

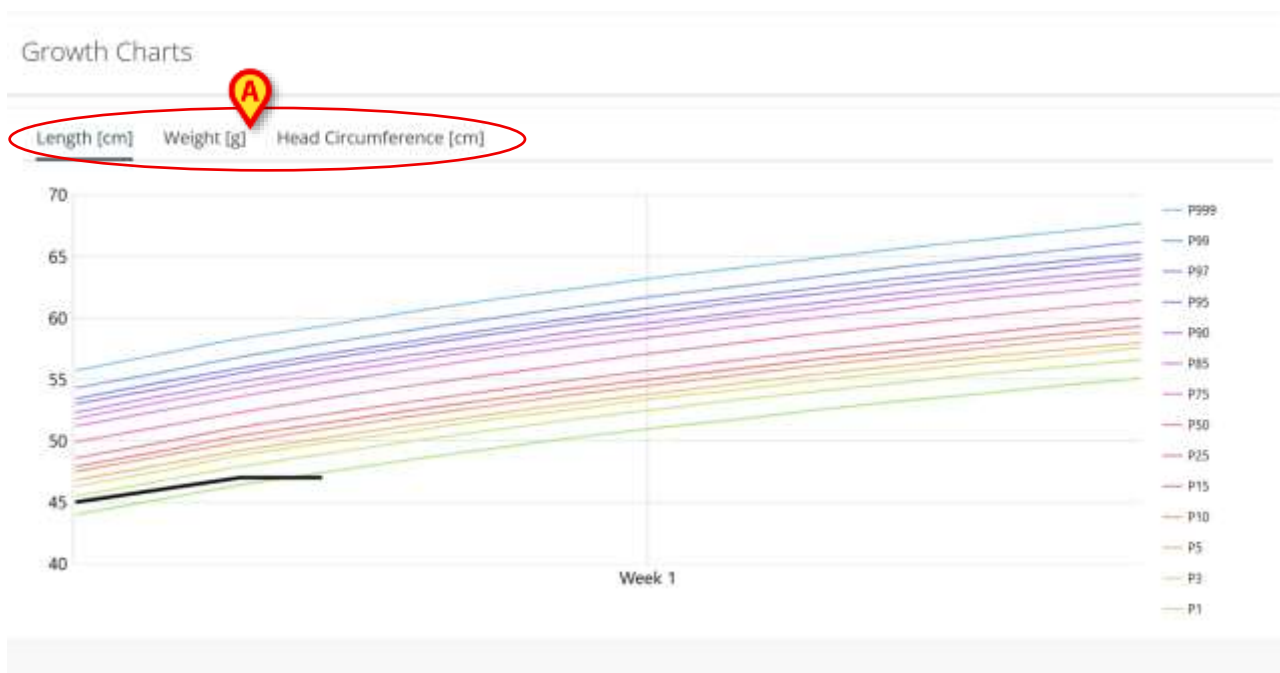


Ábra 65

A színes vonalak a kiválasztott növekedési diagramot jelölik. Minden görbe egy-egy percentilisre utal.

A fekete vonal a beteg tényleges adatait jelöli.

A másik diagramra való váltáshoz kattintson a(z) Ábra 65 részben látható lapok valamelyikére (magasság, súly, fejkörfogat).

Kattintson a diagramra a pontos értékeket egy adott időpontban jelző sáv megjelenítéséhez (Ábra 66 **A**).

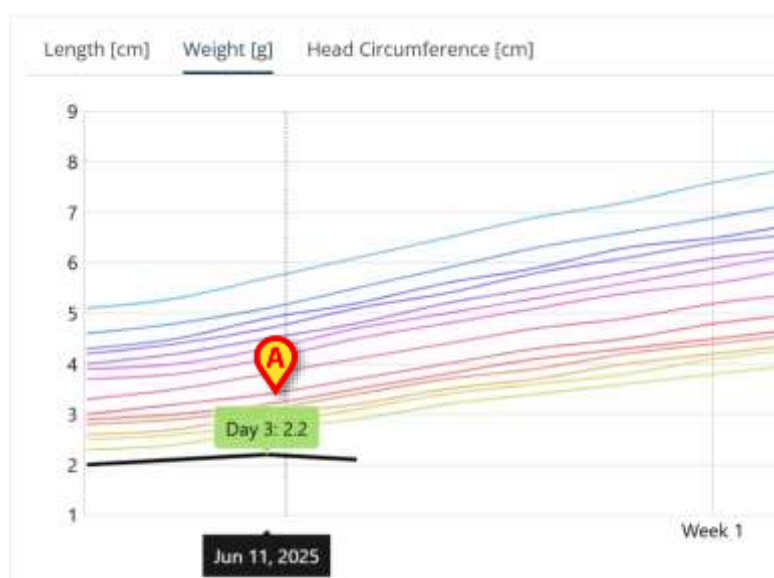

Ábra 66

4.3.7. Személyes tárgyak

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1 részt.


4.4. Elbocsátás

4.4.1. Klinikai elbocsátás

A „Klinikai elbocsátás” oldalra vonatkozó adatbeviteli eljárások a(z) 3.1 részben olvashatók.


Két kivétel van.

1 - Az „Elvégzett tesztekre” vonatkozó információk (Ábra 67 **A**) a Digistat „Diary Web” moduljából származnak, amelyet megfelelően kell konfigurálni. A Digistat „Diary Web” felületén speciális kategóriák konfigurálhatók, amelyek a beteg elbocsátásakor itt jelennek meg. További információkért olvassa el a Digistat „Diary Web” dokumentációját (dokumentum: USR HUN Diary Web).

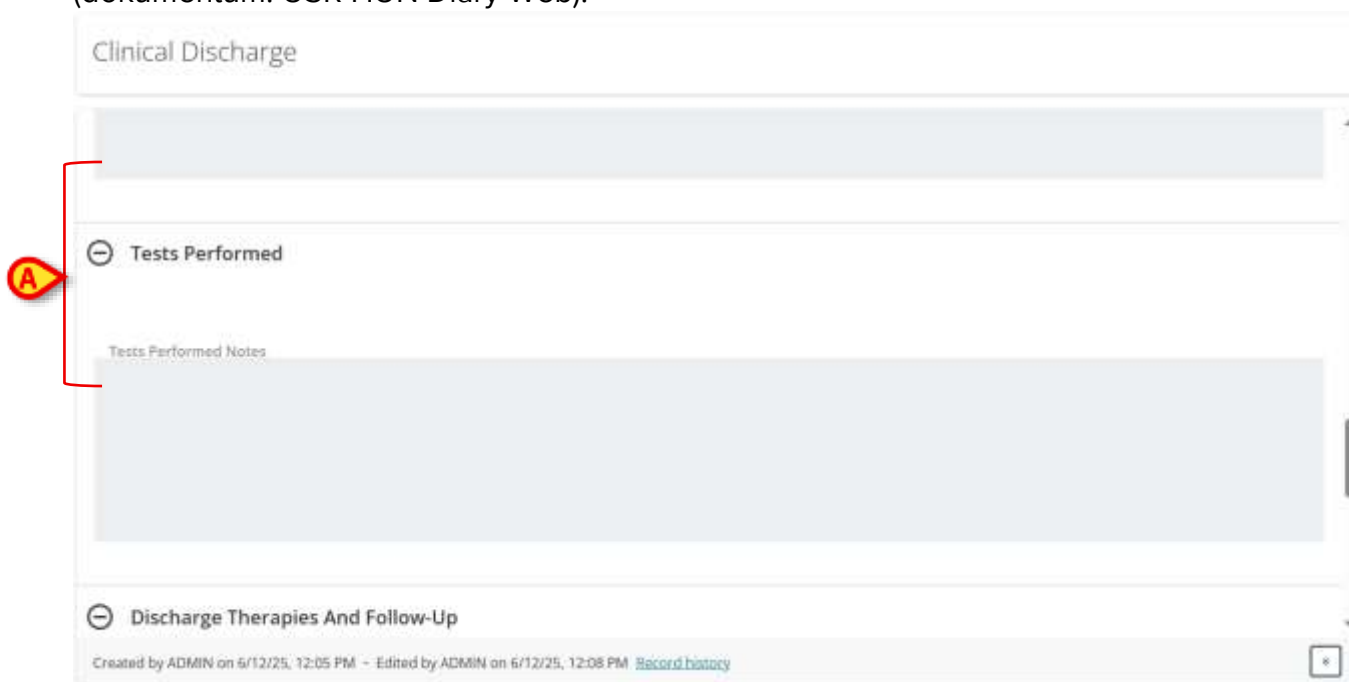

Ábra 67

2 - Végso érvényesítési intézkedések – a betegre vonatkozó elbocsátási folyamat specifikus. A „Végso érvényesítési intézkedések” oldalon négy gomb található (Ábra 68 **A**). Ezek a gombok az oldal szerkesztése közben nem aktívak. Ez a terület a beteg aktuális státuszát is jelzi („Beteg felvéve” ekkor: Ábra 68).

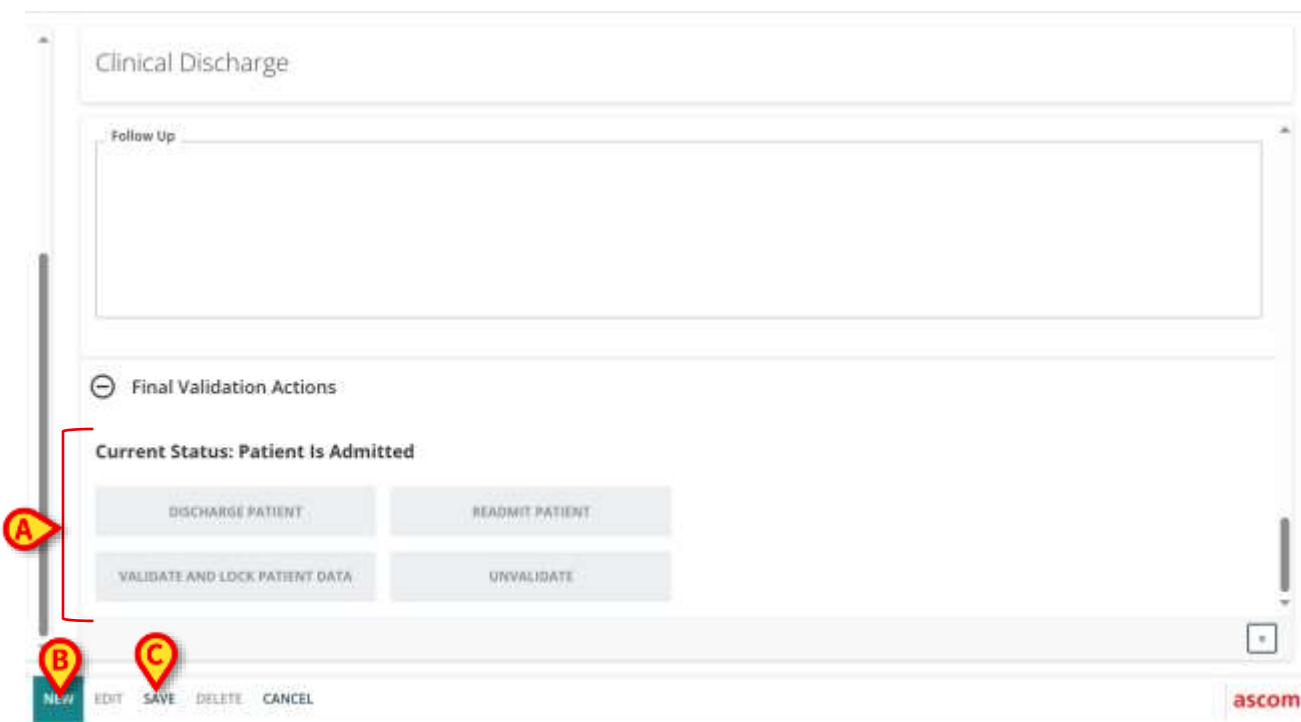

Ábra 68

A beteg elbocsátása:

- Kattintson az **Új** gombra a parancssoron (Ábra 68 **B**) egy új „Elbocsátás” rekord létrehozásához.
- Írja be a szükséges adatokat az oldalon található mezőkbe.
- Kattintson a parancssoron található **Mentés** gombra (Ábra 68 **C**).

A rekord mentése után a **Beteg elbocsátása** gomb elérhetővé válik (Ábra 69 **A**).



Ábra 69

- Kattintson a **Beteg elbocsátása** gombra (Ábra 69 **A**).

Felhasználói megerősítés szükséges. A megerősítést követően a beteg elbocsátásra kerül (Ábra 70 **A**).



Ábra 70

Most két művelet hajtható végre.

- Kattintson a **Beteg újrafelvétele** gombra a beteg újrafelvételéhez (Ábra 70 **B**).

Ekkor megjelenik egy felugró ablak, amelyben meg kell adni az újrafelvétel okát.

- Kattintson az **Érvényesítés és a betegadatok zárolása** gombra a rekord érvényesítéséhez és az adatok zárolásához (Ábra 70 **C**).

Ha a betegadatok zárolva vannak, nem leht módosítani azokat.

Érvényesítés után lehetőség van az **Érvényesítés visszavonására** és az előző állapotba való visszatérésre (Ábra 71 **A**).




Ábra 71

4.4.2. Ápolói elbocsátás

Tekintse meg az ezen az oldalon alkalmazott adatbeviteli eljárásokra vonatkozó általános útmutatót. Lásd a(z) 3.1 részt.

A „Helyszíni eszközökre” vonatkozó adatok a Digistat „Body Graph” moduljából származnak (Ábra 72 **A**). A Digistat „Body Graph” modullal kapcsolatos további információk az USR HUN Body Graph dokumentumban olvashatók.

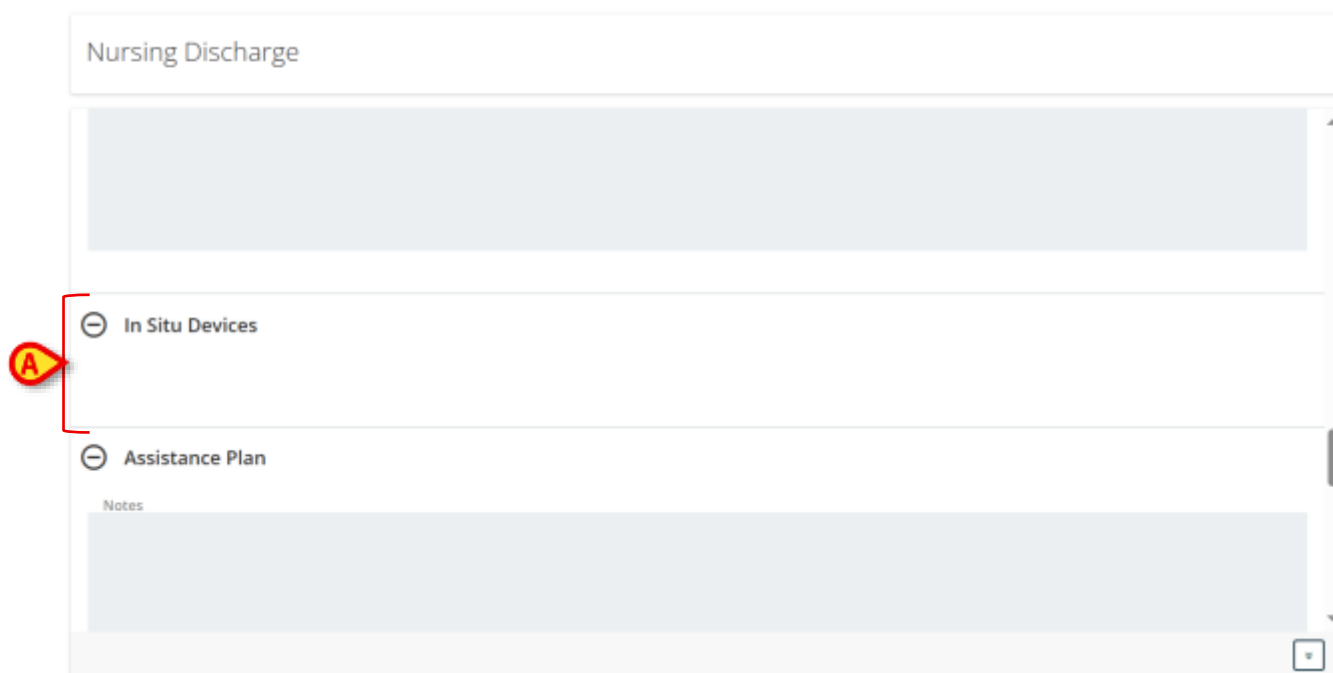


Ábra 72

4.5. Hasznosság

4.5.1. Dokumentumok nyomtatása

Ez az oldal a konfigurált és nyomtatható dokumentumokat tartalmazza (Ábra 73). Minden gomb egy dokumentumnak felel meg. Kattintson a gombra a megfelelő dokumentum nyomtatásának elindításához.

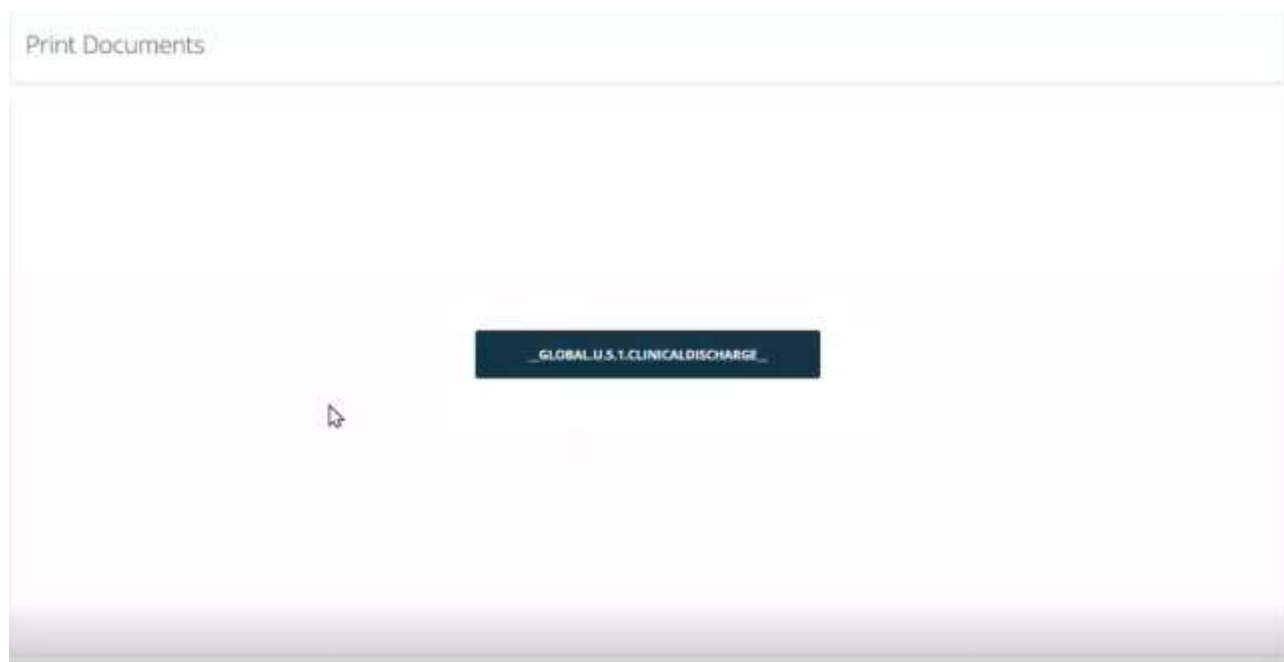

Ábra 73