



Terápiás web Használati utasítás

2.0 verzió

2024-03-21

Tartalom

Terápiás web	4
1. Bevezetés	4
2. Modul kiválasztása	4
2.1. Beteg kiválasztása	4
3. Alapfogalmak	5
3.1. Recept állapot	5
3.2. Megismételhető és nem megismételhető előírások.....	6
3.3. Pontos vs. Duratív adminisztráció	6
3.3.1. A terápiás ciklus – a kezelési terv újbóli megerősítése.....	7
3.3.2. Megrendelések generálása	7
3.3.3. A megrendelések érvényesek y	7
3.3.4. A rendelés érvényességének lejártá	8
4. A „Terápiafelírás” modul	9
4.1. Modul kiválasztása	9
4.2. Vényköteles főoldal.....	9
4.3. Történelem	11
4.4. Módosítsa az előírt kezelést	12
4.5. Az előírt kezelés felfüggesztése	13
4.6. Távolítsa el az előírt kezelést.....	14
4.7. Lejárt előírt rendelés kihagyása vagy végrehajtása	15
4.8. Mutatók a recepteken	15
4.9. Terápiás ciklus	15
4.10. Szűrők	17
4.10.1. Szűrők - Kategóriák.....	17
4.10.2. Szűrők – Útvonalak.....	18
4.10.3. Szűrők - Űrlapok	18
4.10.4. Szűrők – Állapot.....	19
4.11. Csoportosítás	20
4.12. Parancssor – Műveletgombok	21
4.13. Hozzon létre egy új receptet	21
4.13.1. Új recept – Aktív részecskék mennyiség/dózis lépés	22
4.13.2. Új recept – Active Moieties ütemezési lépés	27
4.13.3. Új recept – Active Moieties Review/Confirm lépés	37
4.14. Tekintse át a létrehozott előírásokat	39
4.14.1. Áttekintés – Időterv nézet	40
4.14.2. Áttekintés – Összefoglaló nézet	42

4.15. Nyomtatson ki egy elkészített receptlistát	43
4.16. Frissítse a terápiás ciklust.....	44
5. A „Therapy Execution” modul.....	46
5.1. „Therapy Execution” modul kiválasztása	46
5.2. Fő képernyő.....	46
5.3. Előírt megrendelések képviselte	46
5.3.1. Színek legenda	47
5.4. A rendelési táblázat.....	48
5.4.1. A megrendelések grafikus ábrázolása.....	48
5.5. Hogyan kell rögzíteni a kezelés beadását	51
5.5.1. Pontos kezelés beadása	51
5.5.2. Tartós kezelés beadása	52
5.5.3. A tartós beadás befejezése a tervezett időpont előtt vagy után	55
5.5.4. Az adminisztrációs értékek módosítása	56
5.5.5. Megrendelés adminisztrációja lejárt vagy még nem érvényesített.....	57
5.5.6. Adminisztráció kihagyása	59
5.6. Az adminisztrációs ablak.....	60
5.7. „Végrehajtás” modul felszólítja	62
5.8. „Végrehajtás” időtartomány kijelzése	63
5.9. Kezelés válogató gombok	65
5.10. Kompakt nézet	66

Terápiás web



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: *USR HUN Digistat Care és/vagy USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén). A jelen dokumentumban leírt *Therapy Web* helyes és biztonságos használatához a megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező.



A kézikönyv ábráin látható kezelések példák, amelyek a *Therapy Web* eljárásainak jobb magyarázatát szolgálják. Jellemzőik (például az adagok és a nevek) nem tekinthetők klinikailag relevánsnak.

1. Bevezetés

Digistat® „A Therapy Web egy webes alkalmazás, amely segítséget jelenthet a klinikai személyzet számára a kezelések felírásának és adminisztrációjának dokumentálásában.

2. Modul kiválasztása

A Digistat® „Therapy Web” két modulból áll: „Therapy Prescription” a kezelési receptek dokumentációjához, amelyet főként orvosok használnak; A kezelés adminisztrációs dokumentációjának „Terápia végrehajtása”, amelyet főként az ápolószemélyzet használ.

Az oldalsó sávon:

- Kattints a  ikonra a „Therapy Prescription” indításához.
- Kattints a  ikonra a „Therapy Execution” elindításához.

2.1. Beteg kiválasztása

Ha nincs kiválasztva beteg, nem jelennek meg adatok.

A páciens kiválasztásához

- kattintson a **páciens** gombra a vezérlősávon (Ábra1)



Ábra1 - Betegválasztó gomb

Megnyílik a „Patient Explorer Web” modul. A kezelési utasításokat lásd a „Patient Explorer Web” modul felhasználói kézikönyvében (*USR ENG Patient Explorer Web*).



A „Patient Explorer Web” helyett más modulok is konfigurálhatók a páciens kiválasztásához, a Digistat Suite konfigurációjától függően. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

A páciens kiválasztásakor a páciens neve jelenik meg a **PETEG** gombon a „ **Páciens kiválasztása** ” helyett.

A „Therapy Prescription” és „Therapy Execution” modulok a kiválasztott páciens adatait jelenítik meg.

3. Alapfogalmak

Ez a rész néhány alapvető fogalmat ismertet, amelyek előzetes megértése elengedhetetlen a „Digistat terápia” megfelelő használatához.

3.1. Recept állapot

A „Terápiafelírás” modul (leírása a fejezetben⁴) lehetővé teszi a kezelési terv elkészítését és annak időben történő aktív megőrzését az időszakos megerősítések után. A lehetséges eltérések gyorsan rögzíthetők, miközben az általános terv változatlan marad.

A páciens kezelési terve összefoglalásra kerül és táblázatban jelenik meg (Ábra 2). Minden sor egy kezelési előírásnak felel meg.

Paracetamol — Soluble tablet DOSE: 1000 mg — Oral — 11/28/2023 at 10:00 AM - 6:00 PM - 11:00 PM		ACTIVE today	▼
Water — Infusion DOSE: 500 mg in 1000 ml at 500 mg/h — Route of administration not applicable — 11/28/2023 at 3:00 PM		ACTIVE today	▼
Amoxicillin — Infusion DOSE: 1000 mg in 2000 ml at 500 mg/h — Intravenous — Tuesday at 11:00 AM — until 11/28/2023, 11:00 AM		ACTIVE today	▼

Ábra 2

Minden recept bizonyos számú rendelést generál. A rendelések a kezelés egyszeri beadásainak felelnek meg.

Az elévülés akkor szűnik meg, ha az általa generált összes megbízást végrehajtják, és a jövőben nem generál más megbízást.

A felírás állapota a jobb oldalon látható (Ábra 3).

Paracetamol — Soluble tablet DOSE: 1000 mg — Oral — 11/28/2023 at 10:00 AM - 6:00 PM - 11:00 PM		TERMINATED	▼
Water — Infusion DOSE: 500 mg in 1000 ml at 500 mg/h — Route of administration not applicable — 11/28/2023 at 3:00 PM		ACTIVE today	▼

Ábra 3

Négy lehetséges felírási állapot létezik:

1. „Aktív” – ha egy vény „Aktív” állapotban van, a vényértékek megjeleníthetők és szerkeszthetők. Kattintson a megfelelő sorra a kapcsolódó „vényre vonatkozó specifikáció” ablak megnyitásához.
2. „Felmondott” – az elévülés akkor szűnik meg, ha az általa generált összes megbízást végrehajtják, és a jövőben nem generál más megbízást. A felmondott receptek továbbra is aktívak. Ez azt jelenti, hogy az előírt értékek megjeleníthetők és szerkeszthetők. Kattintson duplán az előírásnak megfelelő sorra a sor kibontásához és a kapcsolódó „előírás-specifikáció” eszközök megjelenítéséhez.
3. „Felfüggesztve” - a vényköteles felfüggesztés, amelyet a **Felfüggesztés** gombbal hajtanak végre (lásd a részt4.5), törli a vényt a vénycsomagból, és törli az összes kapcsolódó ügyintézési megbízást. A felfüggesztett receptek ismét megjeleníthetők (áthúzott szöveggel) a rendelkezésre álló szűrő segítségével (lásd a részt4.10 a szűrők magyarázatához). A felfüggesztett receptek ezután folytathatók (szakasz4.5). A felfüggesztett vény nem generál adminisztrációs megbízást.
4. „Eltávolítva” – a receptet az **Eltávolítás** gombbal lehet eltávolítani (lásd a részt4.6). Az általa generált összes ügyintézési megbízás törlődik. Az eltávolított receptek ismét megjeleníthetők (áthúzott szöveggel) a rendelkezésre álló szűrő segítségével (lásd a részt4.10 a szűrők magyarázatához). Az eltávolított receptek nem generálnak adminisztrációs utasításokat, és nem folytathatók.

3.2. Megismételhető és nem megismételhető előírások

Ismételhető receptek

Egy recept „**Ismételhető**”, ha olyan rendeléseket generál, amelyeket meghatározott időközönként kell beadni. Például: a receptben szerepelhet, hogy egy gyógyszert minden nap egy bizonyos időpontban kell beadni. Ebben az esetben a recept megismételhető; a megfelelő rendeléseket a kívánt napokon, a kívánt időpontban/időpontokban adja le.


Nem megismételhető receptek

A nem megismételhető vények csak a receptben kifejezetten meghatározott ügyintézési utasításokat generálják. Amikor az összes megbízást teljesítették, az előírás „Felmondott” (lásd a részt3.1).

A vény megismételhetőségét egy adott jelölőnégyzet állítja be a vényspecifikációs ablakban (lásdÁbra 44 példaként).

A recept megismételhetőségét egy speciális ikon jelzi -  - a „Therapy Prescription” modul recepttábláján (lásd pl.Ábra 4 **A**).

Paracetamol — Soluble tablet
DOSE: 1000 mg — Oral — 2 times a day at 11:00 AM - 5:00 PM — until further notice

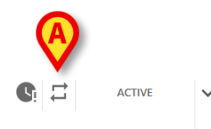

Ábra 4

3.3. Pontos vs. Duratív adminisztráció

A **pontos adminisztráció** egy pillanat alatt kezdődik és ér véget (például egy tabletta esetében).

A **tartós adminisztráció** egy bizonyos ideig tart (például csepegtetésről van szó).

A pontos és hosszadalmas adminisztrációt a Therapy Execution modul különböző grafikai jellemzői és különböző kezelési eljárások jellemzik. Lásd a részt 5.3 a Terápiavégrehajtás lehetséges beadási típusainak leírásához.

3.3.1. A terápiás ciklus – a kezelési terv újbóli megerősítése

A „Digistat Therapy”-n elkészített kezelési terv érvényessége időben korlátozott, és azt az egészségügyi személyzetnek újra meg kell erősítenie. A kezelési terv érvényességi idejét „terápiás ciklusnak” nevezik. A „terápiás ciklus” ismételt megerősítése egy biztonsági eljárás, amely arra kényszeríti, hogy meghatározott időközönként ellenőrizze és ellenőrizze a kezelési tervet. A „terápiás ciklus” időtartama konfigurálható. Lásd a részt 4.16 a terápiás ciklus frissítési eljárásához.

3.3.2. Megrendelések generálása

Ez a bekezdés elmagyarázza, hogyan állítja elő a rendszer a rendeléseket a kezelési tervben meghatározott recept alapján.

Az előírás idején, azaz amikor az „Összefoglaló” képernyőn a **Mentés** gombra kattint (Ábra 60 A, lásd a bekezdést 4.13.3), a rendszer előállítja a rendelési előírásoknak megfelelő rendeléseket.

Quantity/Dose _____ Schedule _____ Review/Confirm

Aminosalicilic acid — Gastro-resistant granules
DOSE: 500 mg — Oral — 12/1/2023 at 4:00 PM - 10:00 PM

DAILY

Starting from **A** 12/1/2023 12:00 PM 
today

Tolerance
00:15

B ☒ Once ☐ Repeat

12:00 PM	1:00 PM	2:00 PM	3:00 PM
4:00 PM	5:00 PM	6:00 PM	7:00 PM
8:00 PM	9:00 PM	10:00 PM	11:00 PM
12:00 AM ⁺¹	1:00 AM ⁺¹	2:00 AM ⁺¹	3:00 AM ⁺¹
4:00 AM ⁺¹	5:00 AM ⁺¹	6:00 AM ⁺¹	7:00 AM ⁺¹
8:00 AM ⁺¹	9:00 AM ⁺¹	10:00 AM ⁺¹	11:00 AM ⁺¹

BACK CHANGE CANCEL NEXT

Ábra5 - Napi kezelési előírás

Feltételes előírások (bekezdés 4.13.2.2) nem generál megrendeléseket. Ezeket az előírásokat csak bizonyos meghatározott feltételek fennállása esetén hajtják végre.


3.3.3. A megrendelések érvényesek y

A megbízás végrehajtási szabványos eljárás megköveteli a megbízás végrehajtás előtti érvényesítést.

Azok a rendelések, amelyek generálásukkor a „terápiás cikluson” belül vannak, automatikusan érvényesítésre kerülnek.

A többi rendelés minden alkalommal érvényesítésre kerül, amikor a „terápiás ciklust” frissítik, amikor ezen az időszakon belül vannak (bekezdés 4.16).

A nem érvényesített rendeléseket egy adott ikon jelzi -  - a Therapy Execution modulon (Ábra 6). Csak a bekezdésben leírt, meghatározott eljárás után hajthatók végre 5.5.5.

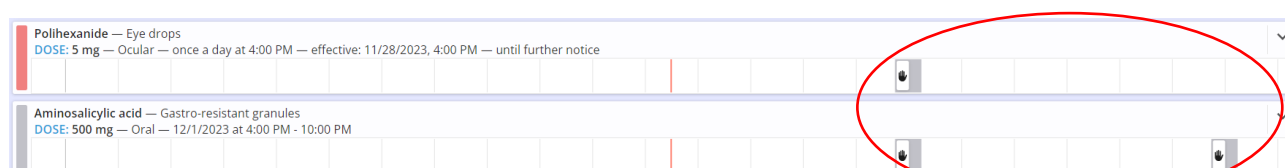

Medication	Dose	Frequency	Effective Date/Time	Status
Polihexanide — Eye drops	DOSE: 5 mg — Ocular	once a day at 4:00 PM	effective: 11/28/2023, 4:00 PM — until further notice	
Aminosalicic acid — Gastro-resistant granules	DOSE: 500 mg — Oral	12/1/2023 at 4:00 PM - 10:00 PM		

Ábra 6

Lásd a bekezdést 3.3.1 a „terápiás ciklus” (vagy „kezelési terv érvényességi ideje”) magyarázatához.

Lásd a bekezdést 4.16 a kezelési terv frissítési eljárásához.

3.3.4. A rendelés érvényességének lejárta

A megrendelés érvényessége a tervezett ügyintézési idő letelte után bizonyos idő elteltével lejár. Azaz: ha az érvényesített megbízást nem adminisztrálják az ütemezett időpontban, az egy bizonyos ideig érvényes marad. Ezen időszak letelte után a megbízás visszaáll nem érvényesített állapotba (a „lejár” elnevezést kapja, hogy megkülönböztesse a jövőbeni, még nem érvényesített megbízásoktól). A lejárt rendelések a „Terápiás ciklus” frissítési eljárással törölhetők a kezelési tervből. Lásd a bekezdést 4.16. A lejárt megbízások csak meghatározott eljárással teljesíthetők. Az eljárás leírása a bekezdésben található 5.5.5.



A megbízások érvényességi időtartamát egy adott konfigurációs paraméter határozza meg. További információért forduljon a rendszergazdához.



A feltételes recept érvényessége a „terápiás ciklus” lejártakor jár le. Így a feltételes receptek automatikusan érvényesítésre kerülnek minden alkalommal, amikor a „terápiás ciklust” frissítik. Lásd a bekezdést 4.13.2.2 a „Feltételes előírások” magyarázatához.

4. A „Terápiafelírás” modul

4.1. Modul kiválasztása


A „Therapy Prescription” modul kiválasztása:

- kattintson a  ikon a bal oldali sávon:

Modul kiválasztásakor a megfelelő ikon ki van jelölve.

A páciens kiválasztásakor elérhető a felírási oldal, és megnyílik a „Terápiás recept” modul főképernyője.


4.2. Vényköteles főoldal

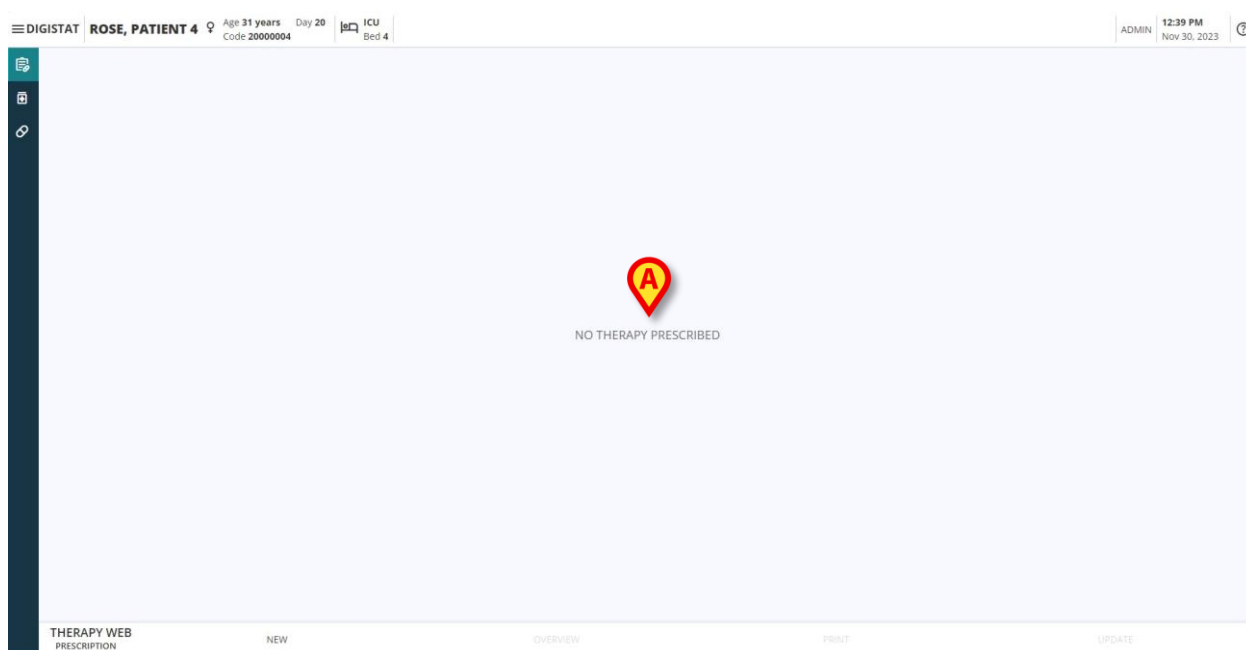

Ábra 7

Ha a betegnek nincs felírt terápiája, az oldal üres, és a „ **Nincs felírt terápia** ” üzenet (Ábra 7 **A**) jelenik meg az oldal középső részén.

Ha egyes terápiákat felírtak, akkor az oldal központi részében megjelenik a beteg terápiás terve és a kezelések listája (Ábra 8 **A**), valamint az adagolási módjukra, adagjaikra, ütemezésükre és állapotukra vonatkozó információkkal együtt.

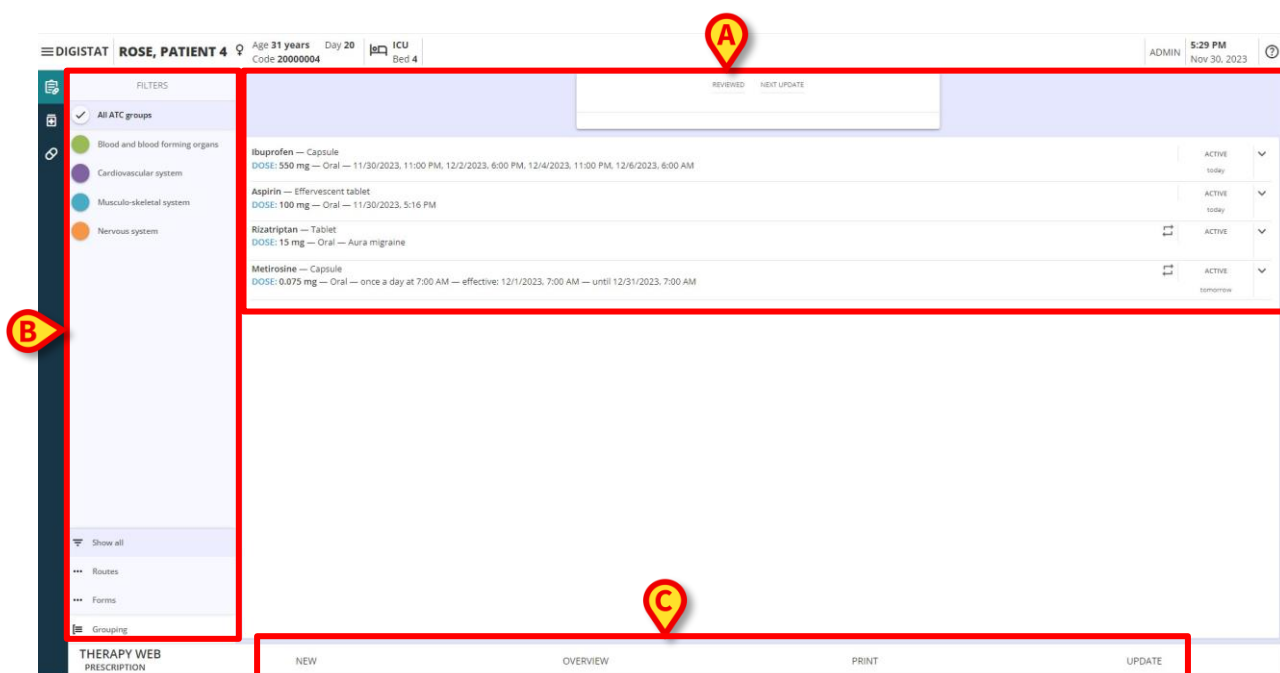

Ábra 8

A lista minden sora egy kezelési előírásnak felel meg, és a receptek kezelése és megjelenítése a felhasználói preferenciáknak megfelelően történik.

A beadott gyógyszer/termék **neve**, az **adagolás módjára** vonatkozó információkkal, **adagokkal** (az első elem a felírási sor második sorában) az **oldat sebességére/mennyiségére/térfogatára vonatkozó információkkal**, az **alkalmazási/infúziós módokkal** (ha van) és az előírt rendelés(ek) **ütemezése** (dátum és idő) minden vénsorban megjelenik.

Ibuprofen — Medicated plaster DOSE: 0.2002 g — Oral — 11/29/2023, 11:08 AM	TERMINATED	▼
Paroxetine — Oral-suspension DOSE: 200 mg — Oral — a condition	SUSPENDED	▼
Paracetamol — Soluble tablet DOSE: 200 mg — Oral — 2 times a day at 3:00 PM - 5:00 PM — until 11/29/2023, 5:00 PM	ACTIVE	▼
Ketoprofen — Capsule DOSE: 200 mg — Oral — Thursday, Friday at 4:00 PM - 6:00 PM — effective: 11/30/2023, 4:00 PM — until 12/1/2023, 6:00 PM	REMOVED	▼
Dopamine — Solution for injection DOSE: 20 ml at 2 ml/h — Intravenous — 5 times in 10 min — until 11/29/2023, 11:08 AM	ACTIVE	▼

Ábra 9

Az egyes receptek **állapota** a vénsor jobb oldalán jelenik meg (Ábra 9 A).

A következő állapotok kérhetők le és jeleníthetők meg:

- **Aktív** (alapértelmezés szerint engedélyezve);
- **Felfüggesztett**;
- **Eltávolítva**;
- **Megszűnt**.



Ábra 10

Egy lefelé mutató nyíl gomb (Ábra 9 B) elérhető egy **részletes szakasz** kibontásához, ahol egy összefoglaló (Ábra 10 A) a kezelés és annak felírt értékei (mennyiség, mennyiség, sebesség, időtartam, beteg súlya), valamint a folyamatban lévő terápiára és az előírt ütemezésre vonatkozó információk láthatók. (Ábra 10 B). A receptet létrehozó és elmentő **felhasználó** adatai, valamint a vény utolsó módosításának **dátuma és időpontja** is rendelkezésre áll (Ábra 10 C). Végül több gomb is elérhető a receptek aktuális állapotától függően (Ábra 10 D).

Alapértelmezés szerint egy aktív recept esetén a következő gombok állnak rendelkezésre:

- **Előzmények** : a felírási előzmények elérése;
- **Szerkesztés** : a recept szerkesztése;
- **Felfüggesztés** : a felírás ideiglenes leállítása;
- **Eltávolítás** : a vény végleges eltávolítása (nem folytatható).

4.3. Történelem



Ábra 11


Az **Előzmények** gombra kattintva megnyílik egy modális ablak (Ábra 11) és a háttérben lévő receptmodul elhalványul.

A **kezelés/gyógyszer neve** az ablak fejlécére kerül (Ábra 11 **A**), akkor megjelenik az előírási karakterlánc (vagy az előírási karakterláncok, ha az előírást módosították) (Ábra 11 **B**).

A vény felállításának **dátuma és időpontja** a vényt létrehozó felhasználó felhasználónevével együtt lekérhető (Ábra 11 **C**).

A **Bezárás** gomb (Ábra 11 **A D**) az ablak jobb alsó részén található az Előzmények nézet bezárásához.

Megjelennek a kiválasztott vényre alkalmazott módosítások szakaszai, és a vényen végrehajtott műveletek regisztrálva, listázva és végrehajtásuk dátuma szerint csoportosítva (Ábra 11 **E**).

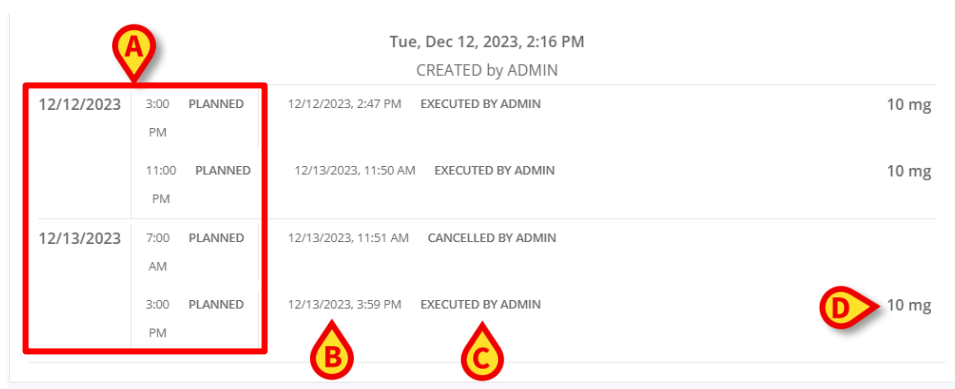


Tue, Dec 12, 2023, 2:16 PM CREATED by ADMIN				
12/12/2023	3:00 PM	PLANNED	12/12/2023, 2:47 PM	EXECUTED BY ADMIN 10 mg
	11:00 PM	PLANNED	12/13/2023, 11:50 AM	EXECUTED BY ADMIN 10 mg
12/13/2023	7:00 AM	PLANNED	12/13/2023, 11:51 AM	CANCELLED BY ADMIN
	3:00 PM	PLANNED	12/13/2023, 3:59 PM	EXECUTED BY ADMIN 10 mg

Ábra 12

Minden szakasz a következőket tartalmazza:

- Az eredetileg tervezett ügyintézés dátuma és időpontja (Ábra 12 **A**);
- A vényköteles rendeléseken végrehajtott műveletek dátuma és időpontja (Ábra 12 **B**);
- Az elvégzett művelet és az azt végrehajtó felhasználó neve (Ábra 12 **C**);
- A felírt vényköteles rendelés adagolása (Ábra 12 **D**).

4.4. Módosítsa az előírt kezelést

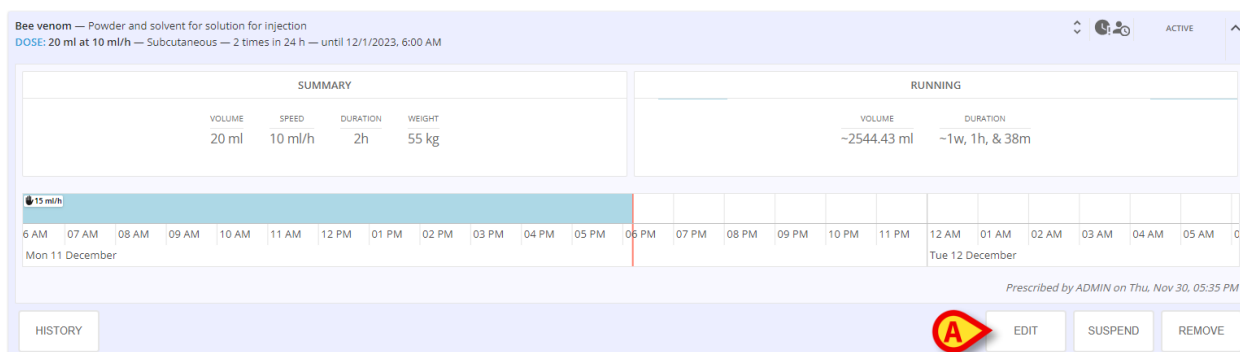

Bee venom — Powder and solvent for solution for injection
DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 2 times in 24 h — until 12/1/2023, 6:00 AM

SUMMARY		RUNNING	
VOLUME	SPEED	DURATION	WEIGHT
20 ml	10 ml/h	2h	55 kg

VOLUME	DURATION
~2544.43 ml	~1w, 1h, & 38m

15 ml/h

6 AM 07 AM 08 AM 09 AM 10 AM 11 AM 12 PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 PM 11 PM 12 AM 01 AM 02 AM 03 AM 04 AM 05 AM 06 AM

Mon 11 December Tue 12 December

Prescribed by ADMIN on Thu, Nov 30, 05:35 PM

HISTORY EDIT SUSPEND REMOVE

Ábra 13

A **Szerkesztés** gombra kattintva (Ábra 13 A), megjelenik a kiválasztott vény **szerkesztése** ablaka .

Ábra 14

A bal oldalon két rész található:

- Az **aktuális terápia** rész (Ábra 14 A), amely tartalmazza a kiválasztott pácienshez létrehozott és társított összes receptet (beleértve a szerkeszteni kívántat is), és
- az **előzmények** rész (Ábra 14 B), amely a kiválasztott vényen végrehajtott műveletek előzményeinek összefoglalását tartalmazza.

Mindkettő nem módosítható.

Megnyílik a Szerkesztés ablak a **Mennyiség/adag** lépésnél (Ábra 14 E), amelyet a bekezdésben később ismertetünk 4.13.1 .

Az eredetileg **előírt értékeket** , beadási **formát** és **beadási módot** a **rendszer** lekéri és megjeleníti. A forma és az adagolás módja nem módosítható, csak az előírt értékek (Ábra 14 C). Az eredetileg beállított mértékegységek megváltoztatása nem lehetséges. Az értékek szerkesztéséhez:

- Cserélje ki a módosítandó értékeket az új érték felülírásával vagy a fel és le nyilakkal az eredeti érték egy egységnyi növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- Kattintson a **NEXT** gombra (Ábra 14 D) az **Ütemezés** lépésre lépéshez (Ábra 14 F). Az ütemezési beállításokon bizonyos módosítások végrehajthatók, de nem lehet teljesen más ütemezést választani és megváltoztatni. A receptek ütemezésével kapcsolatos további információk a bekezdésben találhatók 4.13.2 .
- Kattintson a **KÖVETKEZŐ** gombra az utolsó lépéshez való **áttekintés/megerősítés** lépéshez (Ábra 14 G). Meg van adva az összefoglaló, és ez mutatja a szerkesztett értékeket. Megjelenik egy megjegyzésmező, amellyel megjegyzést írhat be a szerkesztési eljárásba. További információ a recept felülvizsgálatáról a bekezdésben található 4.13.3 .
- Kattintson a **Frissítés** gombra a szerkesztett recept elmentéséhez és ennek megfelelő frissítéséhez, vagy a **Mégse** gombra a szerkesztési eljárás megszakításához.


A **Vissza** gombra kattintva visszaléphet az **Ütemezés** és a **Mennyiség/Adagolás** lépéshez.

4.5. Az előírt kezelés felfüggesztése

A beadott kezelés felfüggesztése:

- Kattintson a **Felfüggesztés** gombra.


Megjelenik egy felugró ablak, amely arra kéri a felhasználót, hogy erősítse meg a műveletet.

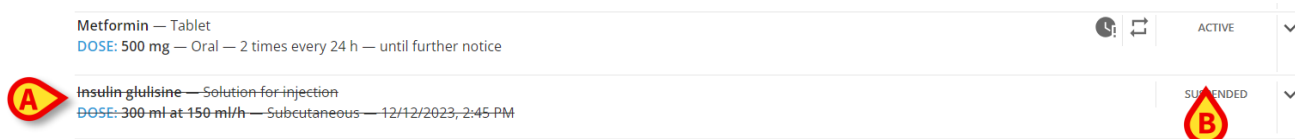

Metformin — Tablet DOSE: 500 mg — Oral — 2 times every 24 h — until further notice	ACTIVE
Insulin-glulisine — Solution for injection DOSE: 300 ml at 150 ml/h — Subcutaneous — 12/12/2023, 2:45 PM	SUSPENDED

Ábra 15

A kiválasztott kezelés felírásának leállítása után az eltűnik a főoldalon megjelenő listáról, vagy ha a felfüggesztett vény nem kerül kiszűrésre (lásd a bekezdést 4.10.4), a teljes előírt karakterlánc áthúzott betűtípussal jelenik meg (Ábra 15 A) és az állapot „**Felfüggesztve**” (Ábra 15 B).

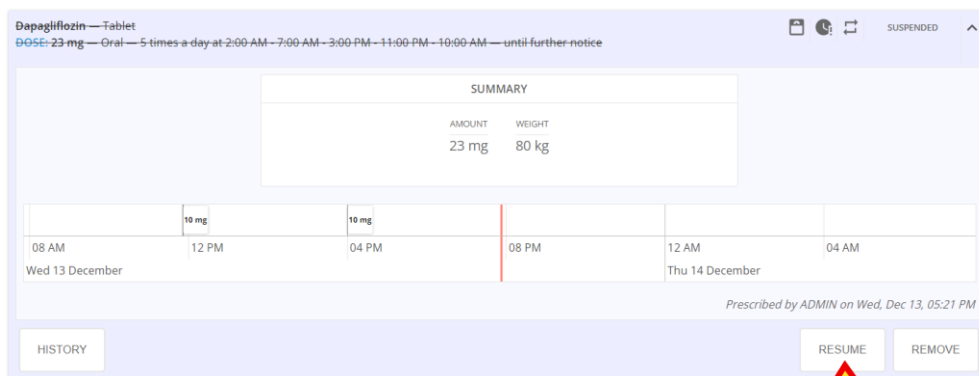

SUMMARY					
AMOUNT		WEIGHT			
23 mg		80 kg			

10 mg		10 mg	
08 AM	12 PM	04 PM	08 PM
Wed 13 December		Thu 14 December	

Prescribed by ADMIN on Wed, Dec 13, 05:21 PM

HISTORY RESUME REMOVE

Ábra 16

A felfüggesztett vény sor ismételt felrobbanása, a **Folytatás** gomb (Ábra 16 A) van jelen a **Szerkesztés** és **Felfüggesztés** helyett. Az előírt kezelés folytatásához:


- Kattintson a megjelenő **Folytatás** gombra.

4.6. Távolítsa el az előírt kezelést

Az alkalmazott kezelés eltávolítása:

- Kattintson az **Eltávolítás** gombra.

Megjelenik egy felugró ablak, amely arra kéri a felhasználót, hogy erősítse meg a műveletet.

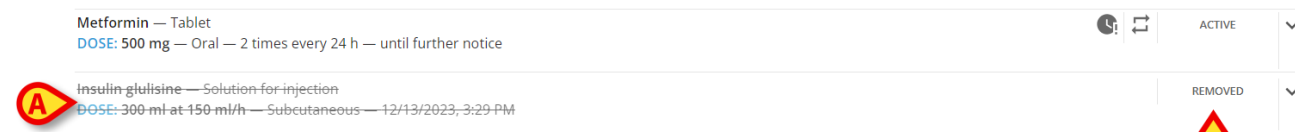

Metformin — Tablet DOSE: 500 mg — Oral — 2 times every 24 h — until further notice	ACTIVE
Insulin-glulisine — Solution for injection DOSE: 300 ml at 150 ml/h — Subcutaneous — 12/13/2023, 3:29 PM	REMOVED

Ábra 17

A kiválasztott kezelés felírásának eltávolítása után az eltűnik a főoldalon megjelenő listáról, vagy ha az eltávolított vény nem kerül kiszűrésre (lásd a bekezdést 4.10.4), a teljes felírási

karakterlánc áthúzva jelenik meg, és világosszürke karakterekkel van írva (Ábra 17 **A**), az állapot pedig „Eltávolítva” (Ábra 17 **B**).

4.7. Lejárt előírt rendelés kihagyása vagy végrehajtása



Ábra 18

Ha a vény lejárt rendelést tartalmaz, amelyet nem a megállapított kezelési terv szerint adtak fel, a receptet piros színű sáv jelzi (Ábra 18 **A**). A receptsort felbontva két gomb található:

- **Kihagyás** gomb (Ábra 18 **B**) a lejárt kezelés beadását kihagyni ill
- **Végrehajtás** gomb (Ábra 18 **C**) az ügyintézés haladéktalanul végrehajtani.

A sikeres ügyintézés érdekében elengedhetetlen a végrehajtás késedelmét igazoló megjegyzés megadása.

Metirosine — Capsule DOSE: 0.075 mg — Oral — once a day at 7:00 AM — until 12/31/2023, 7:00 AM			ACTIVE	▼
Glucose — Infusion DOSE: 100 mg in 1000 ml at 1 mg/h — Route of administration not applicable — Monday, Thursday, Saturday, Wednesday at 10:00 PM — until 12/6/2023, 10:00 PM			ACTIVE	▼
Bee venom — Powder and solvent for solution for injection DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 2 times in 24 h — until 12/1/2023, 6:00 AM			ACTIVE	▼


Ábra 19

4.8. Mutatók a recepteken

Végül az állapotcímke mellett különböző ikonok/jelzők jeleníthetők meg, amelyek jelezhetik:


- magához a felíráshoz kapcsolódó aktuális felírási **állapot** (mint például az **ismételt** adagolási rend ), a rendelések, az aktív infúzió (ha van);
- a **beteg súlyának** változásai  : ha a receptben beállított betegsúly nem egyezik a rendszerből leolvasottal, megjelenik a **mérleg ikon** ;
- különbségek a következők között:
 - a gyógyszer felírása és időben történő beadása (**a végrehajtás klinikai ideje megváltozott**   vagy **a beadási idő az előírt tartományon kívül esik** ) vagy
 - a **beadott dózisértékeket**  vagy a **beadott infúziós értékeket**  és az eredetileg előírt értékeket.

4.9. Terápiás ciklus

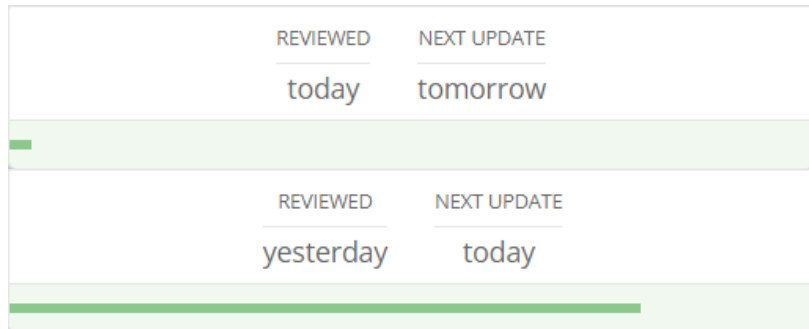

Ábra 20

Az oldal központi részén, a receptlista tetején található a **terápiás ciklus állapota mező**, frissített információkkal az utolsó terápia áttekintés időpontjáról és a következő esedékes frissítésről. Egy zöld vízszintes sáv áll rendelkezésre, amely jelzi az aktuális terápia előrehaladását. A rúd mérete az eltelt terápiás idővel arányosan növekszik.

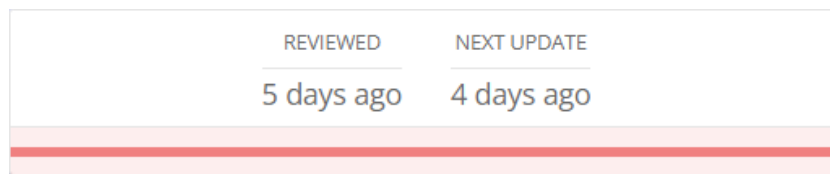


Ábra 21

Amint a terápia lejárt, a befejezést követő sáv pirosra vált.

4.10. Szűrők

A létrehozott előírásokat különböző rendelkezésre álló szűrőkkel és ezek kombinációival lehet szűrni. Az oldal bal oldalán található a szűrők rész (Ábra 8 A).

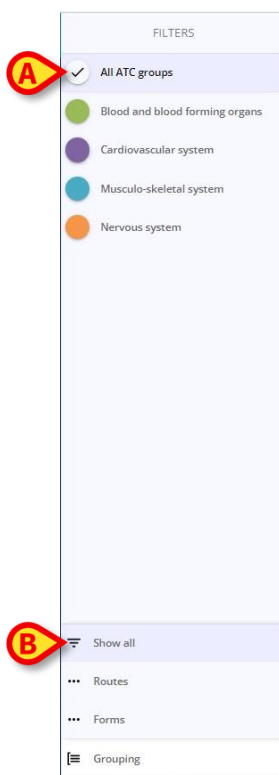


Ábra 22

Az „**Összes ATC csoport**” (Ábra 22 A) és az „**Összes megjelenítése**” (Ábra 22 A B) gombok alapértelmezés szerint ki vannak választva, és az összes alkalmazott szűrő eltávolítására is használhatók. Így az összes recept megjelenik a receptnézet központi részén. A megfelelő szűrők kiválasztásakor az "Összes megjelenítése" és az "Összes ATC csoport" gombok kijelölése automatikusan megszűnik.

4.10.1. Szűrők - Kategóriák

Minden kezelés társítható egyetlen osztályhoz (a terápiák testreszabható számú osztályba/kategóriába csoportosíthatók), valamint konfigurációnként egy vagy több beadási módhoz és formához. Így lehetőség van a kezelések **kategóriák**, **útvonalak** és **űrlapok** szerinti szűrésére.

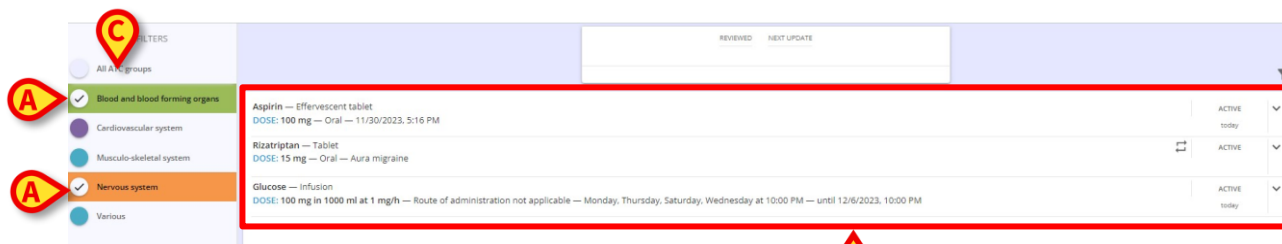

Ábra 23

Minden kategóriához/osztályhoz tartozik egy gomb. A kezelések kategória/osztály szerinti szűrése:


- Kattintson a kategóriának megfelelő színes gombra (Ábra 23 **A**) hogy a központi képernyőn csak az adott kategóriának megfelelő kezelések jelenjenek meg (Ábra 23 **B**).

Lehetőség van egy vagy több kategória kiválasztására: az ezekhez a kategóriákhoz/osztályokhoz tartozó kezelések mindegyike megjelenik. A kiválasztást követően a gombok kiemelésre kerülnek, és az egyes kategóriákhoz tartozó választógombokban megjelenik egy pipa szimbólum.

- Kattintson másodszor a kiválasztott kategória kijelölésének törléséhez.
- Kattintson az "Összes ATC csoport" gombra (Ábra 23 **C**) az összes elérhető kategóriához tartozó összes előírt kezelés megjelenítéséhez.

Csak azok a kategóriák jelennek meg a szűrő szekcióban, amelyekhez a ténylegesen előírt kezelések tartoznak, és nem az összes elérhető és konfigurált.

4.10.2. Szűrők – Útvonalak

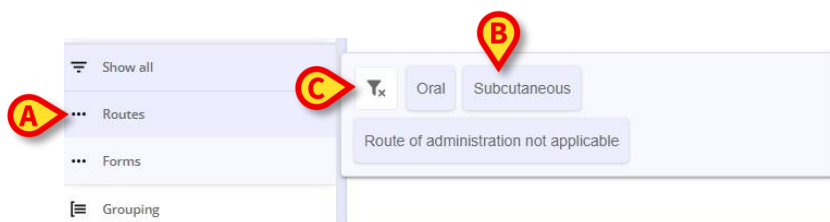

Ábra 24

Lehetőség van az előírt kezelések szűrésére is az alkalmazási **módok** szerint:

- Kattintson az **Útvonalak** szűrő gombra (Ábra 24 **A**) a menü megnyitásához, ahol a rendelkezésre álló útvonalak (csak az előírt terápiákhoz beállítottak) összegyűjtve és kiválaszthatók (Ábra 24 **B**).
- Válasszon ki egy vagy több útvonalat.

A felírt kezeléseket a kiválasztott útvonalak szerint szűrjük az oldalon.

- Kattintson a megadott **tölcser** gombra (Ábra 24 **C**) az alkalmazott szűrő(k) eltávolításához.

A kiválasztott beteghez tartozó összes receptben konfigurált és megtalálható útvonalak listája, és csak ezek az útvonalak (nem minden lehetséges útvonal) jelennek meg.

4.10.3. Szűrők - Űrlapok



Ábra 25

Lehetőség van az előírt kezelések **formái** szerint szűrni:

- Kattintson **az Űrlapok** szűrő gombra (Ábra 25 **A**) a menü megnyitásához, ahol a rendelkezésre álló (csak az előírt terápiákhoz konfigurált és kiválasztott) űrlapok összegyűjtve és kiválaszthatók (Ábra 25 **B**).
- Válasszon ki egy vagy több űrlapot. A felírt kezeléseket a kiválasztott űrlapok szerint szűrjük az oldalon.
- Kattintson a megadott **tölcsér** gombra (Ábra 25 **C**) az összes alkalmazott szűrő eltávolításához.

A kiválasztott beteghez tartozó összes vényben konfigurált és jelenlévő nyomtatványok listája, és csak azok a nyomtatványok (nem minden lehetséges forma) jelennek meg.

4.10.4. Szűrők – Állapot


Végül lehetőség van az előírt kezelések szűrésére a változó **állapotuk** szerint:

- Kattintson az **Állapotszűrőre** a menü megnyitásához, ahol kiválaszthatja az elérhető aktuális állapotokat. A következő felírási állapotok jeleníthetők meg:
 - **Active**, amely alapértelmezés szerint ki van választva;
 - **Felfüggesztve** (csak akkor, ha a kezelési listán/tervben felfüggesztett receptek szerepelnek);
 - **Eltávolítva** (csak akkor, ha a kezelési listán/tervben eltávolított receptek szerepelnek);
- Válasszon ki egy vagy több állapotot.

A felírt kezeléseket a kiválasztott állapotok szerint szűrjük az oldalon.

- Kattintson a rendelkezésre álló **tölcsér** gombra az összes alkalmazott szűrő eltávolításához.

4.11. Csoportosítás

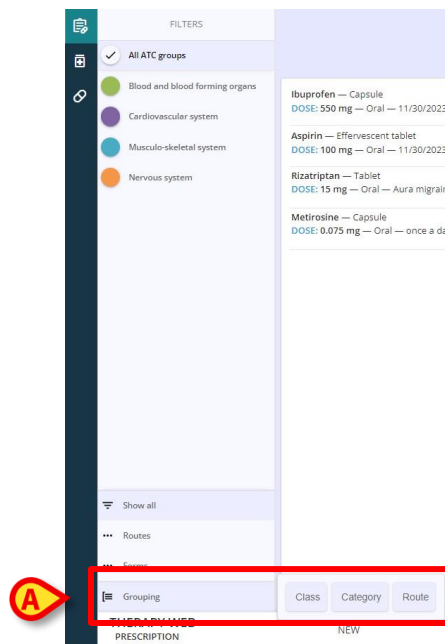


Ábra 26

A főképernyőn nem csak szűrni, hanem csoportosítani is lehet a kezeléseket.

- Kattintson a **Csoportosítás** gombra (Ábra 26 A), majd válasszon a három elérhető lehetőség közül:

- **Osztály** : a kezelések csoportosítása osztályok szerint;
- **Kategória** : a kezelések csoportosítása kategóriák szerint;
- **Útvonal** : a kezelések csoportosítása útvonaluk szerint.

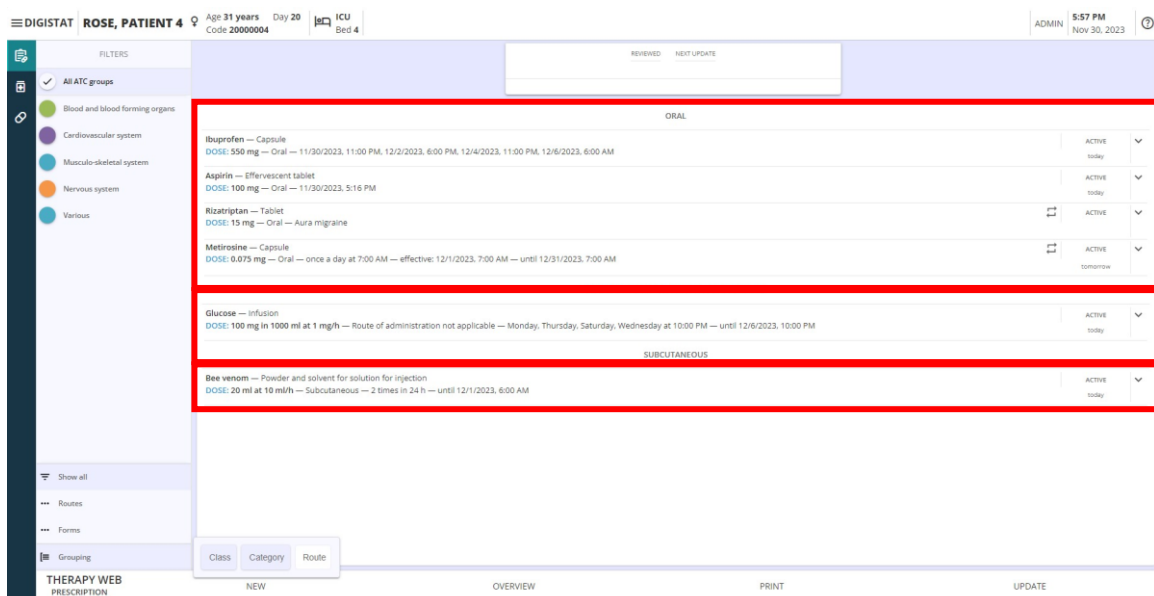

Ábra 27

A megadott példában Ábra 27 az "Útvonal" csoportosítási opció van kiválasztva. Ennek eredményeként az előírt kezelések beadási módjuk szerint három különböző listába vannak csoportosítva, amelyeket az egyesekhez beállított útvonal neve jelzi (hiányzó vagy nem meghatározott útvonalopciók is rendelkezésre állnak).

4.12. Parancssor – Műveletgombok




Ábra 28

Végül egy parancssor áll rendelkezésre az oldal alján (Ábra 8 C), és négy gombot tartalmaz:

- **ÚJ** (Ábra 28 A): új vény elkészítésének megkezdése a kiválasztott beteg számára;
- **ÁTTEKINTÉS** (Ábra 28 B): naptári időterv vagy összefoglaló nézet megnyitása;
- **NYOMTATÁS** (Ábra 28 C): a kezelési terv minden részletét tartalmazó nyomtatott jelentés elkészítése;
- **FRISSÍTÉS** (Ábra 28 D): terápia-áttekintő ablak megnyitása és a kezelési terv frissítése.

4.13. Hozzon létre egy új receptet

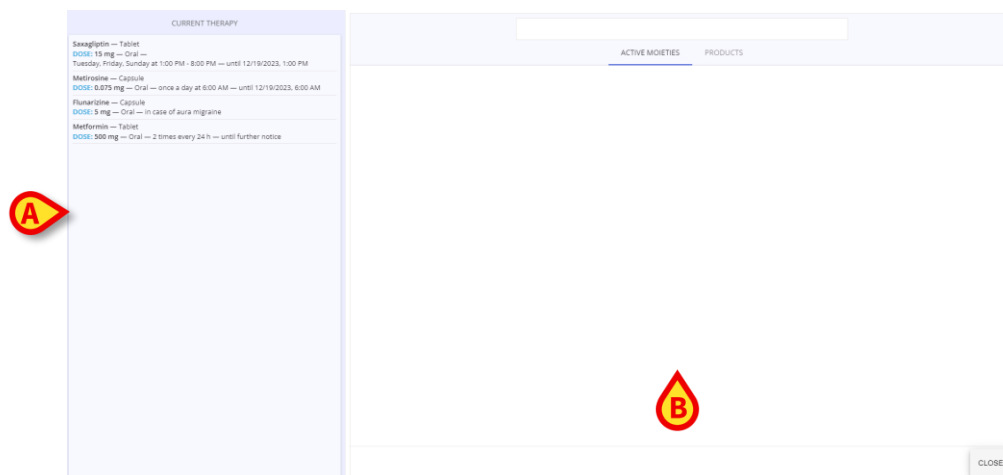

Ábra 29

Új recept készítése a kiválasztott beteg számára:

- Kattintson az **ÚJ** gombra (Ábra 28 A).

Megnyílik egy modális ablak (Ábra 29), és két részből áll:

- Bal oldalon (Ábra 29 A), megjelenik a páciens aktuális terápiája az előírt kezelések listájával, valamint az infúziók formáival és módjaival, adagjaival és ütemezésével kapcsolatos összes információval.




Ábra 30

Ha még nem írtak fel terápiát (Ábra 30), a szakasz üres lesz.

- Az ablak jobb oldalán (Ábra 29 B), egy keresősáv (Ábra 30 A) az oldal tetején a felírandó kezelések kereséséhez a **Bezárás** gombot (Ábra 30 B) az ablak bezárásához, és két fül áll rendelkezésre:
 - **Aktív csoportok** (Ábra 30 C) fül (alapértelmezés szerint kiválasztva);
 - **Termékek** lap (Ábra 30 D).

4.13.1. Új recept – Aktív részecskék mennyiség/dózis lépés

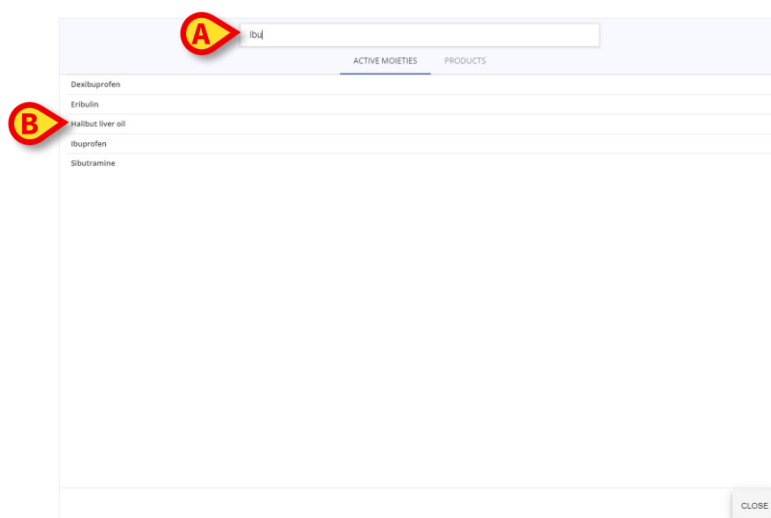

Ábra 31

Új recept létrehozása egyetlen **Active Moiety**- vel:

- Keressen egy aktív részt úgy, hogy beírja a nevét (részben vagy teljesen) a keresősávba (Ábra 31 A). Az eredményül kapott aktív rész(ek) a központi eredmények szekcióban jelennek meg (Ábra 31 B).
- Kattintson duplán a felírandó kezelésre.

Ábra 32

Megjelenik a vényköteles munkafolyamat **Mennyiség/Adagolás** lépése (Ábra 32), és a kiválasztott aktív rész neve megjelenik az oldal tetején (Ábra 32 **A**). A **DOSE** alapértelmezés szerint 0, a mértékegység megjelenik a címke mellett, és az alapértelmezett útvonal is megjelenik (Ábra 32 **B**).

Két legördülő menü közül választhat:

- Az aktív molekularész **forma** (Ábra 32 **C**);
- Az aktív rész Az adagolás **módja** (Ábra 32 **D**).

Változó számú kártya áll rendelkezésre a képernyő középső részén (Ábra 32 **E**) az egyes kezelési/gyógyszeres módokhoz beállított konfigurációs tulajdonságok és paraméterek szerint. Különböző tulajdonságok vannak társítva a különböző felírási módokhoz, amelyek a katalóguscikkekhez kapcsolódó speciális klinikai folyamatokat és konfigurációkat képviselik.

Ábra 33

Lehetnek olyan csoportok és termékek, amelyek egyetlen felírási móddal rendelkeznek (és ezután tulajdonságaik és konfigurációs készleteik közvetlenül megjelennek a kezelési specifikáció ablakában), vagy **több felírási móddal** . Utóbbi esetben a tulajdonságok konfigurálása előtt választani kell a kattintható gombként biztosított előírási módok közül (Ábra 33 **A**).



Bármely aktív rész vagy termék előírható kezelésként konfigurálható, és saját alapértelmezett paramétereit és értékeit tartalmaz. Ezért a kezelési specifikáció ablakának megjelenése és jellemzői az előírt kezeléstől függenek.



A kezelés úgy konfigurálható, hogy csak egy lehetséges recept módot engedélyezzen. Ebben az esetben a választógombok láthatók Ábra 33 nem jelennek meg, és a specifikációs ablak (Ábra 32) helyett közvetlenül megjelenik.

A **Mégse** gomb (Ábra 32 **F**) rendelkezésre áll és engedélyezve van, miközben a **Tovább** gomb (Ábra 32 **G**) le van tiltva, és a Mennyiség/Adag rész kitöltése és kitöltése után engedélyezve lesz.

Ábra 34

- Írja be a kívánt értékeket a megadott mezőkbe, akár manuálisan, akár a fel és le nyílak segítségével növelheti vagy csökkentheti az egység hozzáadott értékét.

Amikor nyomtatványokat vagy útvonalakat választ ki, vagy az első értékeket beírja a különböző kártyák elérhető mezőibe, egy piros **Változás** gomb (Ábra 34 **A**) jelenik meg. A **recept szkript** (Ábra 34 **B**) minden egyes választással és bejegyzéssel fokozatosan töltődik ki.

Néhány konfigurált mező egymástól függ (pl. Koncentráció, Mennyiség és mennyiség vagy Térfogat, Sebesség és Időtartam). Ennek eredményeként, ha egy értéket beírt két kapcsolódó mezőbe, a rendszer automatikusan kiszámítja a megfelelő értéket a függő mezőben.

A **Módosítás** gombra kattintva a részleges előírási karakterlánc visszaáll, és megjelenik a kiválasztott aktív részhez tartozó módok listája.

Ábra 35

- Válasszon **módot** , vagy ha csak egy mód áll rendelkezésre, válasszon egy **űrlapot** a rendelkezésre álló legördülő menüből (Ábra 35 **A**);

Ábra 36

- A megjelenő legördülő menüből válasszon beadási módot (Ábra 36 **A**);
- Töltse ki az összes rendelkezésre álló Mennyiség/Dózis recepttulajdonságkártyák mezőit;

Ábra 37

Egyes paramétereknél, például a fenti példákban **az Összegnél alacsonyabb** (Ábra 37 **A**) és **felső** (Ábra 37 **B**) **határértékek** vannak megadva, a pontos adagokkal és speciális szimbólumokkal jelölve. Ha a megadott mezőbe beírt érték nagyobb vagy kisebb, mint a beállított határértékek, a határérték túllépése sárga színnel kiemelve (Ábra 37 **C**). Ha a megadott érték helyesen a megadott határokon belül van, nem történik kiemelés. A javasolt határokon kívüli dózis megadása nem állítja le a vénykészítési folyamatot, de a

Felülvizsgálat/Megerősítés szakaszban egy megjegyzést kell bevinni, amely indokolja a beállított tartományon kívüli értékek felírását.

Ábra 38

Ha valamelyik mezőbe váratlan értéket írnak be, vagy a mértékegység megváltozik az eredetileg kiválasztott mértékegységről (vagy az alapértelmezetről), egy **Ellenőrzés** gomb (Ábra 38 **A**) jelenik meg a beillesztett érték megerősítéséhez. Ezen kívül egy sárga figyelmeztetés (Ábra 38 **B**) jelenik meg az ellenőrizendő értéket tartalmazó kártya jobb alsó sarkában. A kurzort az ikon fölé mozdítva egy eszköztipp (Ábra 38 **C**) jelenik meg, amely figyelmezteti a felhasználót a „váratlan bevitelre, az érték ellenőrzése szükséges”.

A beillesztett érték ellenőrzéséhez vagy érvényesítéséhez:

- Csak kattintson az **Ellenőrzés** gombra. A figyelmeztető ikon eltűnik.

Különösen, ha egy értéket egy meghatározott mértékegységgel adtak meg, és ha ez a mértékegység megváltozik, akkor az eredetileg beírt érték újraszámításra kerül, és az új mértékegységnek megfelelően módosul (pl. ha a megadott érték 1 és a mértékegysége g-ról mg-ra módosul, az új érték 1000 lesz).

Ábra 39

Lehetőség van a páciens súlyának megadására is (Ábra 39).

- Kattintson a **Tovább** gombra (Ábra 34 **C**), hogy továbblépjen az **Ütemezés** lépésre.

Ábra 40

Az imént leírt eljárás egy aktív részből történő recept létrehozására **a termékekre** is megismételhető.

- Kattintson a "Termékek" fülre, és keresse meg a terméket a név (részben vagy teljes) beírásával a keresősávba;
- Kattintson duplán a kívánt termékre;
- Folytassa a kezelés konfigurálását és testreszabását a korábban leírtak szerint;
- Kattintson a **Tovább** gombra az **ütemezés** lépéshez való továbblépéshez.

4.13.2. Új recept – Active Moieties ütemezési lépés



Ábra 41

Az oldal az **Ütemezés** oldalra és a kék **Vissza** gombra (Ábra 41 **A**) az előző lépéshez való visszatéréshez.


Megjelenik a hat ütemezési lehetőség listája, amelyek egyedi gombként jelennek meg (Ábra 41 **B**). A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Azonnali** : az előírt kezelés azonnali beadása;
- **Feltételes** : az előírt kezelést csak bizonyos feltételek fennállása esetén kell alkalmazni;
- **Naponta** : az előírt kezelés beadása egy napon belül, egy vagy több alkalommal, adott időpontokban;
- **Hetente** : az előírt kezelés beadása a hét különböző napjain, meghatározott időpontokban;
- **Séma** : rögzített, általános minta szerint történő kezelés beadása;
- **Egyedi** : a kezelés beadása teljesen személyre szabható ütemterv szerint.



Lehetőség van az automatikus tervtípus kiválasztására (feltételes, heti, napi, séma stb.) konfiguráción keresztül. A kezelés kiválasztása után automatikusan megjelenik a megfelelő ablak.

4.13.2.1. Menetrend - Azonnali

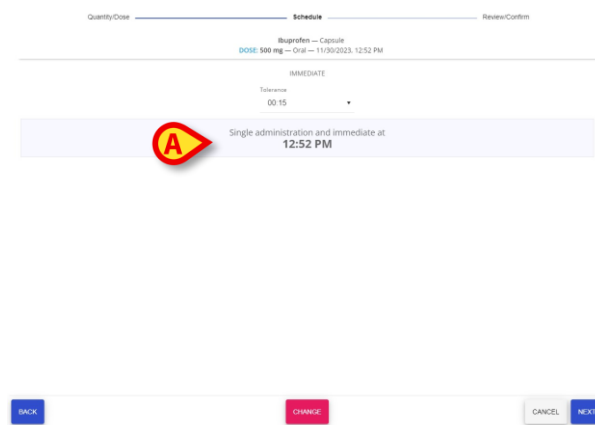

Ábra 42

Ha az **azonnali** ütemtervet választják, a kezelést azonnal megkezdik. Megjelenik az „Egyszeri adminisztráció és azonnali időpontban” üzenet, majd az adminisztráció időpontja (az a pillanatnyi idő, amikor az **azonnali** ütemezés opciót választották) (Ábra 42 **A**). Nincs szükség további konfigurációra.



Ábra 43

Csak a **tűrésidőt**, azaz a megadott beadási idő előtti és utáni időintervallumot lehet beállítani - azonnali ütemezésű receptek esetén -, amelyen belül a beadás „időben” minősül, a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikének kiválasztásával, a legördülő menüből (Ábra 43 **A**). Ha a délelőtti 11:00-ra írt beadásnál 15 perces tűréshatárt adnak meg, akkor az adagolás időben megtörténik, ha 10:45 és 11:15 között történik.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- 00:05
- 00:10
- 00:15 (az alapértelmezett tűrésérték 00:15 perc)
- 00:20
- 00:30
- 00:45
- 01:00
- 01:30
- 02:00

- Állítsa be a túrésidőt.

A piros gomb **Változás** (Ábra 43 **B**) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz. Ábra 41, hogy másik ütemezést válasszon.

A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 **C**) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.2.2. Menetrend – Feltételes

Quantity/Dose | Schedule | Review/Confirm

Ibuprofen — Capsule

DOSE: 500 mg — Oral — it the condition A happens, then prescribe X

CONDITIONAL

it the condition A happens, then prescribe X

Once ☒ Repeat ☐

Ábra 44

Feltételes beadás esetén az előírt kezelés csak bizonyos feltételek teljesülése esetén kerül beadásra, amelyeket a megadott szövegdobozban meg kell adni.

- Állítsa be a teljesítendő feltételt vagy feltételeket a rendelkezésre álló szövegmezőben (Ábra 44 **A**);
- Válasszon az **Egyszer** vagy az **Ismétlés** opciók közül (Ábra 44 **B**), válassza ki a megfelelő választógombot annak jelzésére, hogy a kezelést csak egyszer kell-e alkalmazni, vagy az első alkalom után meg kell őrizni a kezelési tervben, hogy a jövőben megismételhető legyen.

A piros gomb **Változás** (Ábra 43 **B**) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz. Ábra 41, hogy másik ütemezést válasszon.

A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 **C**) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.2.3. Menetrend – Naponta

Quantity/Dose ————— Schedule ————— Review/Confirm

Ibuprofen — Capsule
DOSE: 500 mg — Oral —

DAILY

Starting from
11/30/2023 1:00 PM

Tolerance
00:15

Once ☒ Repeat ☐

1:00 PM	2:00 PM	3:00 PM	4:00 PM
5:00 PM	6:00 PM	7:00 PM	8:00 PM
9:00 PM	10:00 PM	11:00 PM	12:00 AM* ¹
1:00 AM* ¹	2:00 AM* ¹	3:00 AM* ¹	4:00 AM* ¹
5:00 AM* ¹	6:00 AM* ¹	7:00 AM* ¹	8:00 AM* ¹
9:00 AM* ¹	10:00 AM* ¹	11:00 AM* ¹	12:00 PM* ¹

Ábra 45

Ha a napi adagolást választjuk, az előírt kezelés naponta egyszer vagy többször, meghatározott időpontokban adható. A kezelés beadási idejének ütemezéséhez több mezőt is megadunk:

- A **Kezdő mezőből** (Ábra 45 **A**) az előírt kezelés első beadásának dátumának és időpontjának beállítása;
- A **tűrésmező** (Ábra 45 **B**), a tűrésidő beállításához (az alapértelmezett érték 00:15 perc);
- **Egyszer** és **Ismétlés** rádiógombok (Ábra 45 **C**);
- Egy kártyarács **24 teljes órás gombbal** (Ábra 45 **D**). A 24 gomb a nap 24 órájának felel meg. Az első óra a **Kezdés** mezőből beállítás, vagy ha a beállított óra nem teljes óra, az első óra a legközelebbi teljes óra lesz. A „+1” jelzés azt jelenti, hogy ezek az órák a következő napra vonatkoznak.

A napi menetrend felírásához:

Ábra 46

- Kattintson magára a mezőre vagy a naptár gombra (Ábra 46 **A**) az **Indulás** mezőben megadva egy legördülő naptárnézet megnyitásához;
- Válassza ki a dátumot a **Dátum** lapon (Ábra 46 **B**) és az idő az **Idő** lapon (Ábra 46 **C**), majd kattintson a **Tovább** gombra (Ábra 46 **D**). A kezelés megkezdését egy jövőbeli napon és/vagy egy jövőbeni időpontban lehet megadni, de nem a múltban;

DAILY

Starting from
11/30/2023 1:00 PM  today

Tolerance
00:15 ▼

☐ End date



☐ Once ☒ Repeat

1:00 PM	2:00 PM	3:00 PM	4:00 PM
5:00 PM	6:00 PM	7:00 PM	8:00 PM
9:00 PM	10:00 PM	11:00 PM	12:00 AM *1
1:00 AM *1	2:00 AM *1	3:00 AM *1	4:00 AM *1
5:00 AM *1	6:00 AM *1	7:00 AM *1	8:00 AM *1
9:00 AM *1	10:00 AM *1	11:00 AM *1	12:00 PM *1

Ábra 47

- Állítsa be a **tűrésidőt**, és válassza ki a kívánt opciókat a rendelkezésre álló rádiógombok közül. Ha **ismételt** felírás van bejelölve, akkor a **Befejezés dátuma** jelölőnégyzet (Ábra 47 **A**) jelenik meg.

Quantity/Dose — Schedule — Review/Confirm

Dose: 500 mg — Oral — 5 times a day at 3:00 AM - 5:00 AM - 12:00 PM - 1:00 PM - 8:00 PM - 10:00 PM — effective: 11/30/2023 1:00 PM — until further notice

DAILY

Starting from
11/30/2023 1:00 PM  today

Tolerance
00:15 ▼

☒ End date

month/day/year hour:min

DATE TIME

November 2023 **TODAY**

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

December 2023

CANCEL SET



BACK CHANGE CANCEL NEXT

Ábra 48

- Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve beállítható a napi kezelés befejezési dátuma (ami azután több napon is adható a beállított fix időpontoknak megfelelően) egy naptárnézetben (Ábra 48 **A**);



1:00 PM	2:00 PM	3:00 PM	4:00 PM
5:00 PM	6:00 PM	7:00 PM	8:00 PM
9:00 PM	10:00 PM	11:00 PM	12:00 AM *1
1:00 AM *1	2:00 AM *1	3:00 AM *1	4:00 AM *1
5:00 AM *1	6:00 AM *1	7:00 AM *1	8:00 AM *1
9:00 AM *1	10:00 AM *1	11:00 AM *1	12:00 PM *1

Ábra 49

- Válassza ki az órákat az órákártya-rácson úgy, hogy egyszerűen rákattint (kattintson duplán a kiválasztott órákra a kijelölés megszüntetéséhez). A kiválasztott órák kék színűek (Ábra 49 **A**).

A piros gomb **Változás** (Ábra 43 **B**) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz. Ábra 41

, hogy másik ütemezést válasszon. A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 C) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.2.4. Menetrend – Hetente

Quantity/Dose | **Schedule** | Review/Confirm

Ibuprofen — Capsule
Dose: 550 mg — Oral —

WEEKLY

Starting from: 11/30/2023 5:00 PM ☐ End date

today

Tolerance: 00:15 ☐ Once ☒ Repeat

5:00 PM	6:00 PM	7:00 PM	8:00 PM	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
9:00 PM	10:00 PM	11:00 PM	12:00 AM ¹	Monday	Tuesday	Wednesday	
1:00 AM ¹	2:00 AM ¹	3:00 AM ¹	4:00 AM ¹				
5:00 AM ¹	6:00 AM ¹	7:00 AM ¹	8:00 AM ¹				
9:00 AM ¹	10:00 AM ¹	11:00 AM ¹	12:00 PM ¹				
1:00 PM ¹	2:00 PM ¹	3:00 PM ¹	4:00 PM ¹				

Ábra 50

Ha **heti** adagolást választunk, az előírt kezelés napi egyszer vagy többször is beadható meghatározott időpontokban egy héten keresztül. A kezelés beadási idejének ütemezéséhez több mezőt biztosítunk, amelyek többségét már leírtuk a **napi** felírási tervhez. A korábban leírt funkciók egy **gomb/kártyarácsba vannak integrálva a 7 hétköznapi** (Ábra 50 A) kell kiválasztani. A 7 gomb a hét 7 napjának felel meg. Az első nap a **Kezdés** mezőben beállított hét napja.

A heti menetrend felírásához:

- Kattintson magára a mezőre vagy az **Indulás** mezőben található naptár gombra a legördülő naptárnézet megnyitásához;
- Válassza ki a dátumot a **Dátum** fülön és az időt az **Idő** fülön, majd kattintson a **Tovább** gombra;
- Állítsa be a **tűrésidőt**, és válassza ki a kívánt opciókat a rendelkezésre álló rádiógombok közül. Ha ismételt felírás van bejelölve, akkor megjelenik a **Befejezés dátuma** jelölőnégyzet;
- Ezt a négyzetet bejelölve beállítható a heti kezelés befejezési dátuma (amely azután több héten is beadható a beállított fix napok és időpontok szerint) naptárnézetben;
- Válassza ki az órákat az órákártyák rácsán, egyszerűen kattintson rájuk;

Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Monday	Tuesday	Wednesday	


Ábra 51

- Válassza ki a napokat a napkártyák rácsán (Ábra 51) kattintson rájuk (kattintson duplán a kiválasztott napokra a kijelölésük megszüntetéséhez). A kiválasztott napok kék színűek.

A heti kezelési terv felírásakor mind a beadás időpontját, mind a beadás napjait meg kell adni. A piros gomb **Változás** (Ábra 43 B) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz. Ábra 41, hogy másik ütemezést válasszon.

A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 C) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.2.5. Ütemezés – Séma

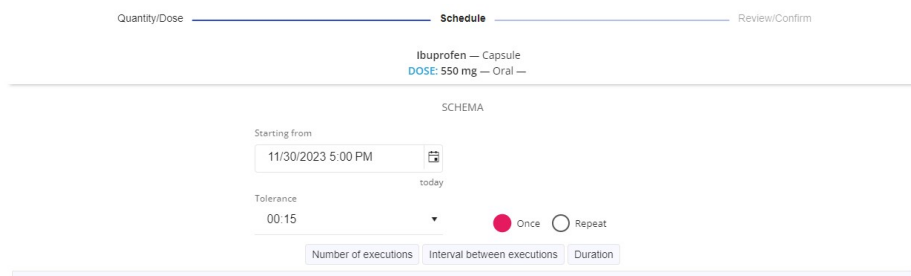


Ábra 52

Ha a séma adagolást választják, az előírt kezelés egy rögzített, általános minta szerint adható, például „N-szer hajtsa végre ezt a kezelést X napon belül”. A rendszer az **Indulás** mezőben jelzett időponttól számítja ki a megfelelő időintervallumokat és adja meg az ügyintézési megbízásokat. A kezelés beadási idejének ütemezéséhez több mezőt biztosítunk, amelyek többségét már leírtuk a **napi** felírási tervhez.

Sémaütemezés előírása:

- Kattintson magára a mezőre vagy az **Indulás** mezőben található naptár gombra a legördülő naptárnézet megnyitásához;
- Válassza ki a dátumot a **Dátum** fülön és az időt az **Idő** fülön, majd kattintson a **Tovább** gombra;
- Állítsa be a **tűrésidőt**, és válassza ki a kívánt opciókat a rendelkezésre álló rádiógombok közül. Ha ismételt felírás van bejelölve, akkor megjelenik a **Befejezés dátuma** jelölőnégyzet;
- Ezt a négyzetet bejelölve beállítható a sémakezelés befejezési dátuma naptárnézetben;

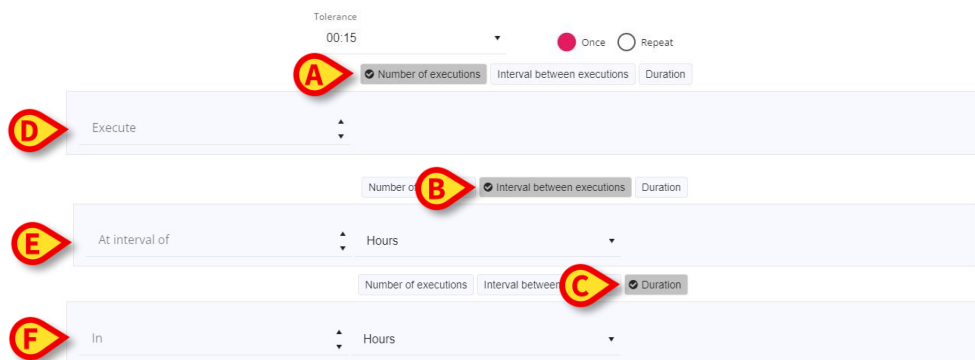

Ábra 53

Egy séma meghatározásához

- Használja a képen látható gombokat Ábra 53 (**A** , **B** vagy **C**) a megfelelő beállítás kiválasztásához a kívánt séma összeállításához. Három gomb áll rendelkezésre:
- **Végrehajtások száma** , az adminisztrációk számának megadásához. Ha ki van választva, a **Végrehajtás** mező (Ábra 53 **D**) az adminisztrációk kívánt számának megadására szolgál;
 - **A végrehajtások közötti intervallum** az egyik adminisztráció és a következő közötti időintervallum megadásához. Ha ki **van** választva, a (Ábra 53 **E**) a kívánt időintervallum megadásához. A mértékegység (perc, óra vagy nap) a rendelkezésre álló legördülő menüből választható ki;
 - **Időtartam** , annak az időtartamnak (mennyi ideig) megadása, amelyen belül a terápia beadását végre kell hajtani. Ha ki van választva, a **Be** mező (Ábra 53 **F**) a kívánt időtartam megadásához. A mértékegység (perc, óra vagy nap) a rendelkezésre álló legördülő menüből választható (Ábra 54 **A**);

Ábra 54

A minta létrehozásához egyszerre két gombot kell kiválasztani. Ha a **végrehajtások száma** és a **végrehajtások közötti intervallum** ki van választva, mint a példában látható Ábra 54 , értékek adhatók meg az **Execute** és **At intervall** mezőkben. A **Be** mező ennek megfelelően kerül kitöltésre, mivel a rendszer automatikusan kiszámítja a teljes időtartamot úgy, hogy a beállított számú adminisztrációt megszorozza a választott időintervallummal.

Ábra 55

Hasonlóképpen, ha a kiválasztott mezők a **Végrehajtások száma** és az **Időtartam** , akkor a felhasználó megadhatja a kívánt értékeket az **Execution** és **In** mezőkben, és a rendszer automatikusan kiszámítja az Értéket az **Időközönként** mezőben .

The screenshot shows a scheduling configuration window. At the top, there is a 'Tolerance' field set to '00:15' with a dropdown arrow. To its right are two radio buttons: 'Once' (selected, indicated by a red dot) and 'Repeat'. Below these are three tabs: 'Number of executions', 'Interval between executions' (selected), and 'Duration'. The main area contains three input fields with unit selectors:

- 'At interval of' with the value '8.25' and a unit dropdown set to 'Hours'.
- 'In' with the value '33' and a unit dropdown set to 'Hours'.
- 'Execute' with the value '4'.

Ábra 56


Végül, ha a kiválasztott mezők a **Végrehajtások közötti intervallum** és az **Időtartam** , akkor a felhasználó megadhatja a kívánt értékeket az **At intervallumban** és az **In** mezőkben, valamint az értéket és a beállított intervallumot.

- Válassza ki a sémát a kitöltendő mezők kiválasztásával;
- Írja be a kívánt értékeket a megadott mezőkbe, akár manuálisan, akár a fel és le nyilakkal az **Execute** mező értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez, a rendszer automatikusan kiszámítja az egység által hozzáadott teljes időszak felosztásából.

A piros gomb **Változás** (Ábra 43 **B**) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz.Ábra 41 , hogy másik ütemezést válasszon.

A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 **C**) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.2.6. Ütemezés – Egyedi

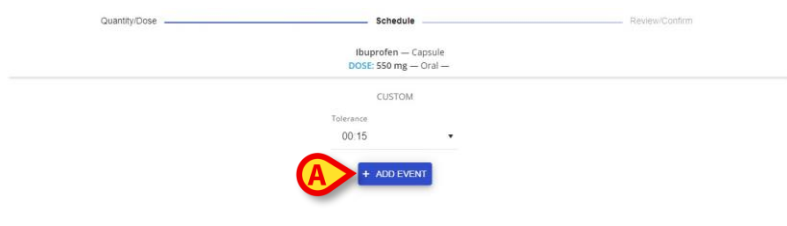


Ábra 57

Ha a séma adminisztrációt választjuk, az előírt kezelés egy teljesen személyre szabható ütemterv szerint adható. Ebben az esetben a generálandó megbízások mindegyike külön-külön meg van határozva.

Egyedi kezelés előírása:

- Állítsa be a **tűréshatárt** a rendelkezésre álló legördülő menüben található opciók kiválasztásával;

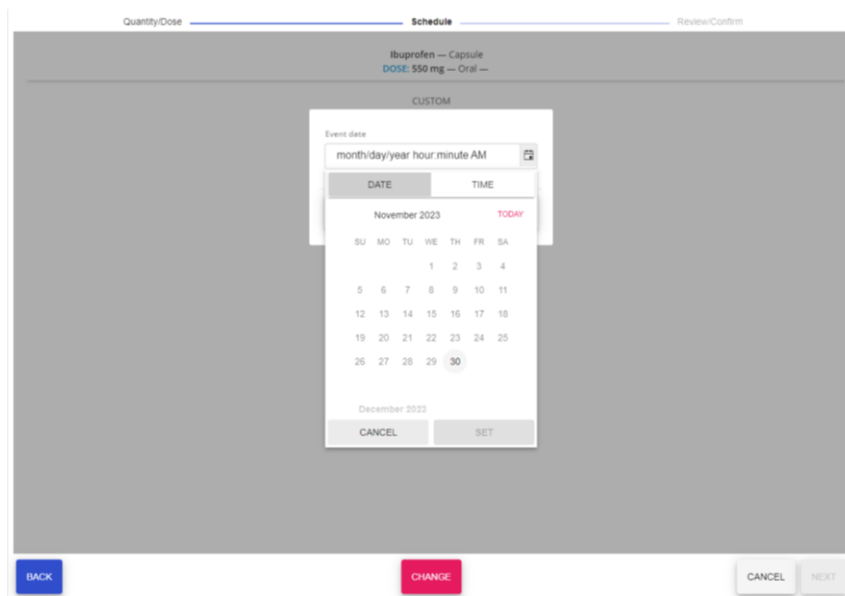

Ábra 58

- Kattintson az + **Esemény hozzáadása** kék gombra (Ábra 57 **A**) az első „esemény” ütemezésének beállítása a megadott naptárból;
- Állítsa be a dátumot a **Dátum** fülön és az időt az **Idő** fülön, majd kattintson a **Tovább** gombra;



Ábra 59

- Adja meg az összes kívánt eseményrendelést a gombra kattintva és az egyes adminisztrációkhoz tartozó ütemterv testreszabásával;

Minden rendelésnél megjelenik egy kártya a személyre szabott kezelés beadásának dátumával és időpontjával (Ábra 59 **A**). Az események időrendi sorrendben jelennek meg és listázódnak (még akkor is, ha nem időrendi sorrendben jöttek létre). A hibás vagy már nem szükséges rendelés törléséhez egy **kuka** gomb áll rendelkezésre (Ábra 59 **B**).

A megrendelés törléséhez

- Csak kattintson a **bin** gombra, és erősítse meg a törlést.

A piros gomb **Változás** (Ábra 43 **B**) engedélyezve van, és lehetőség van a kiválasztott ütemezés megváltoztatására, visszalépve a képernyőn látható kiválasztási ablakhoz. Ábra 41, hogy másik ütemezést válasszon.

A kék **Tovább** gomb (Ábra 43 **C**) engedélyezve van, és tovább lehet lépni az **Ellenőrzés/Megerősítés** szakaszba.

4.13.3. Új recept – Active Moieties Review/Confirm lépés

Quantity/Dose | Schedule | Review/Confirm

B **DOSE:** 550 mg — Oral — 11/30/2023, 11:00 PM, 12/2/2023, 6:00 PM, 12/4/2023, 11:00 PM, 12/6/2023, 6:00 AM

C

SUMMARY	
AMOUNT	WEIGHT
550 mg	55 kg

D

NOTE

Important note ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

BACK CANCEL SAVE

Ábra 60

A **Tovább** gombra kattintást követően a felhasználó az utoljára elérhető ablakban, a **Felülvizsgálat/Megerősítés** fül alatt tekintheti át és töltheti ki a vényt, ahol a vény összefoglalója olvasható.

Három szakasz áll rendelkezésre:

- A teljes recept karakterlánc (Ábra 60 Az oldal tetején megjelenik a **B**) a beállított adagokkal, mértékegységekkel, az alkalmazási formával és móddal, valamint a recept teljes ütemezési tervével. A recept mező nem szerkeszthető;

- Egy összefoglaló rész (Ábra 60 **C**) az előírt értékeket mutatja a mértékegységükkel. Az összefoglaló szintén nem szerkeszthető;
- Egy további mező (Ábra 60 **D**) is rendelkezésre áll **megjegyzés** beírásához a vényhez. Ezt a mezőt nem kell kitölteni, de ezt meg kell tenni:
 - Kézzel írja be a megjegyzést a megadott szövegmezőbe.

A recept mentéséhez:

- Kattintson a kék **Mentés** gombra (Ábra 60 **A**).

The screenshot shows the DIGISTAT patient interface for ROSE, PATIENT 4. The patient's age is 31 years, and they are in ICU Bed 4. The interface displays a list of medications with their dosages and routes. The medications listed are:

Medication	Dose	Route	Frequency	Status
Ibuprofen — Capsule	550 mg	Oral	11/30/2023, 11:00 PM; 12/2/2023, 6:00 PM; 12/4/2023, 11:00 PM; 12/6/2023, 8:00 AM	ACTIVE today
Aspirin — Effervescent tablet	100 mg	Oral	11/30/2023, 5:16 PM	ACTIVE today
Rizatriptan — Tablet	15 mg	Oral	Aura migraine	ACTIVE
Metformin — Capsule	6.075 mg	Oral	once a day at 7:00 AM — effective: 12/1/2023, 7:00 AM — until 12/31/2023, 7:00 AM	ACTIVE tomorrow

The bottom navigation bar includes buttons for NEW, OVERVIEW, PRINT, and UPDATE.

Ábra 61

A recept hozzáadódik a kiválasztott beteg aktuális terápiájához a Recept főoldalon (Ábra 61).


4.14. Tekintse át a létrehozott előírásokat



Ábra 62

A parancssor második gombja az **Áttekintés** gomb (Ábra 62 **A**).

Ha rákattint, megnyílik egy ablak, amely naptár nézetben tartalmazza az összes aktív felírt kezelés **összegzését** és a megfelelő rendelések **állapotát**.

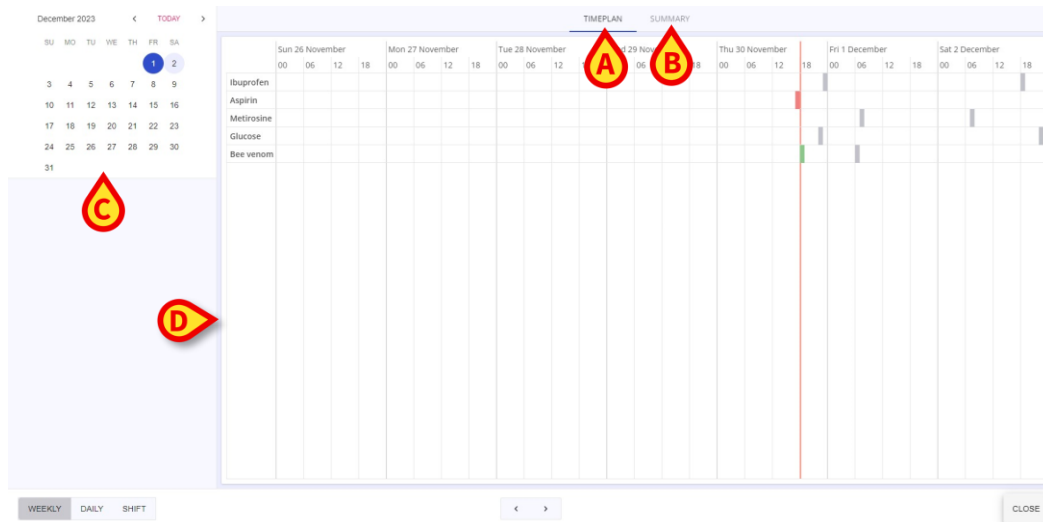

Ábra 63

Két lap áll rendelkezésre:

- **Időbeosztás**, (Ábra 63 **A**) az alapértelmezés szerint kiválasztott fül;
- **Összegzés** (Ábra 63 **B**).

Mindkét nézetben egy naptár (Ábra 63 **C**) az oldal bal oldalán található. Az aktuális dátum ki van emelve, de lehetőség van a naptárban görgetve a múltbeli és jövőbeli napok közvetlen kiválasztásához, ha rájuk kattint. Egy nap kiválasztásakor a megfelelő időterv (Ábra 63 **D**) az adott napra a képernyő középső részén jelenik meg.

4.14.1. Áttekintés – Időterv nézet




Ábra 64

Az **időterv** nézetben az egyes előírt kezelésekhez tartozó adminisztrálandó vagy adandó rendelések ütemezése egy rácsban jelenik meg. A kezelések külön sorokként jelennek meg a rácsban (Ábra 64 **A**). Egy **piros függőleges sáv** (Ábra 64 **B**) jelöli a "most" pillanatot, és az egyes kezelésekhez ütemezett rendelések **cellákként** jelennek meg (Ábra 64 **C**), amely különböző színeket képes megjeleníteni:

- **Gray**, ha a jövőben beadandó utasításról van szó;
- **Zöld**, ha "kész" megbízásról van szó, akkor az aktuális időpontban végrehajtandó megbízás, azaz a "tűrési intervallum"-ként konfigurált időkereten belül.
- **Piros**, nem teljesített és lejárt megbízás esetén;
- **Fekete**, helyesen teljesített megrendelés esetén.


Az áttekintés oldal bal alsó részén található három gomb segítségével módosíthatja az időterv megjelenítését. Ugyanezek a gombok akkor is rendelkezésre állnak, ha az **Összegzés** nézet van kiválasztva, és ezek:

- **Heti** gomb (Ábra 64 **D**), a teljes hét megjelenítéséhez vasárnaptól szombatig (azok a napok is megjelennek, amikor nincs előírva rendelés). Minden nap 4 időrésre van osztva (00-06, 06-12, 12-18, 18-00), amelyek külön cellákként vannak ábrázolva (Ábra 64 **G**) amelyen belül a megbízások a megfelelő időpontban elhelyezett cella színes részeiként jelennek meg;

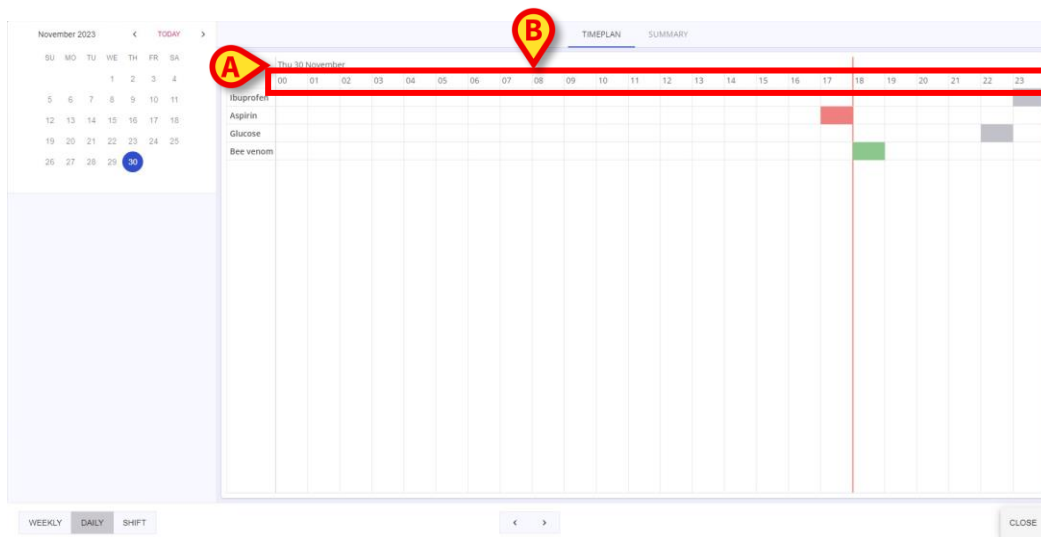

Ábra 65

- **Napi** gomb (Ábra 64 E), a teljes nap részletes megjelenítéséhez: a nap a rács bal felső sarkában látható (Ábra 65 A), míg 24 cella biztosított (Ábra 65 B), minden teljes órára egy;

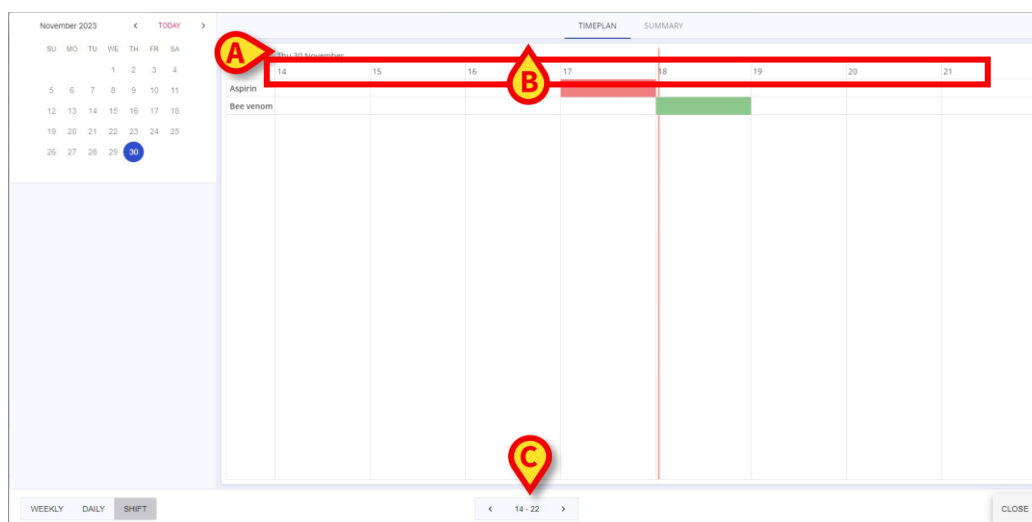


Ábra 66

- **Shift** gomb (Ábra 64 F), a beadott vagy adandó rendelések 8 órás műszakon belüli megjelenítésére. A nap a rács bal felső sarkában látható (Ábra 66 A), míg 8 cellát biztosítunk (Ábra 66 B), egyet a megjelenített műszak minden teljes órájára.

A parancssorban két nyíl (balra és jobbra) található az **időszakok** és a hét **napjai** , a nap **órái** és a **műszakok** (14-22, 22-06, 06-14) közötti mozgáshoz.

Végül egy **Bezárás** gomb (Ábra 64 H) az Áttekintés oldalról való kilépéshez.

4.14.2. Áttekintés – Összefoglaló nézet

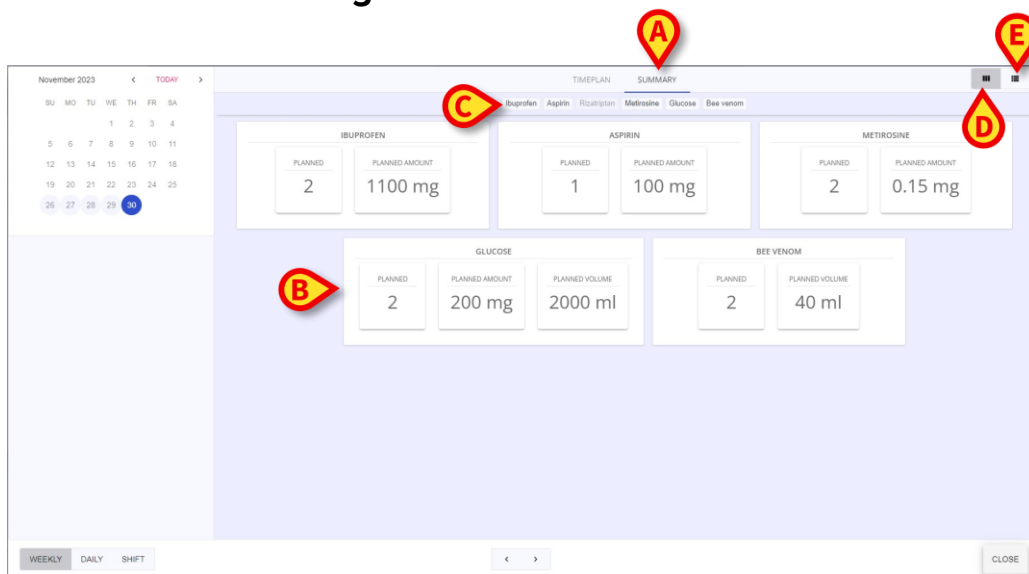

Ábra 67


Kattintson az **Összegzés** fülre (Ábra 67 **A**), az előírt terápiák külön **kártyákon** jeleníthetők meg (Ábra 67 **B**). Az előírt kezeléseknek megfelelő gombok (Ábra 67 **C**) az oldal tetején található. Lehetőség van rájuk kattintva az oldal középső részében lévő kártyák szűrésére és csak a kiválasztott kezelések megjelenítésére.

Végül az **Összefoglaló** oldalon két különböző konfigurációban van lehetőség a kezelések elrendezésére:



Ábra 68

- Külön és egymás mellé helyezett kártyákon (Ábra 67 **D**). A gyógyszer/kezelés neve a fejlécben látható (Ábra 68 **A**) minden lapon, míg az adminisztrációk száma a **Tervezett** cellában (Ábra 68 **B**) és az előírt terápia adagjai a **tervezett mennyiségben** (Ábra 68 **C**) vagy **tervezett mennyiség** (Ábra 68 **D**) sejtek;

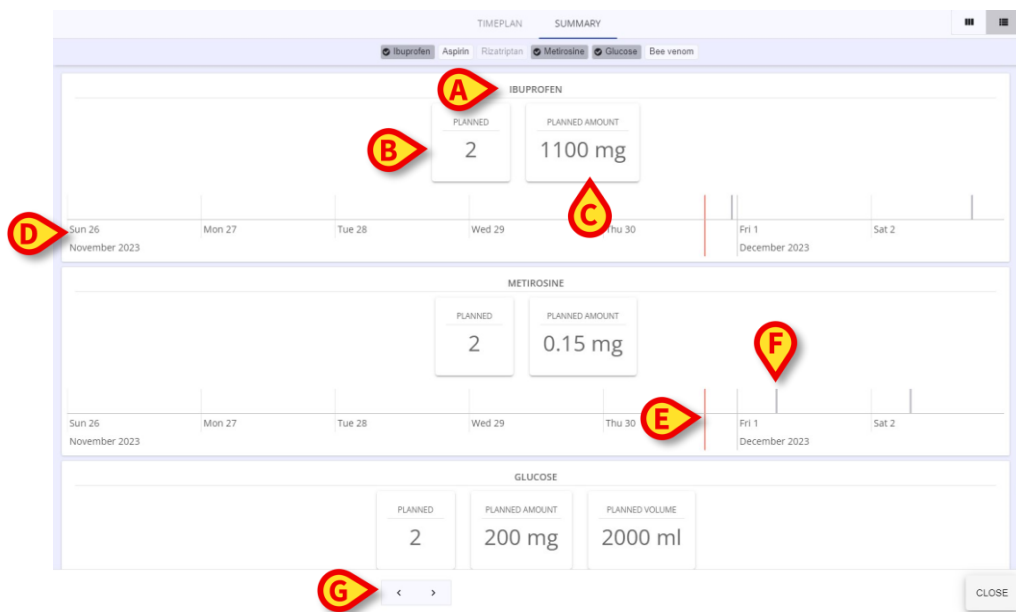

Ábra 69

- A különálló és átfedő csempék listáján (Ábra 67 E). A gyógyszerek/kezelések neve a fejlécben található (Ábra 69 A) minden kártya esetében az adminisztrációk száma (Ábra 69 B) a kiválasztott időszakra és a tervezett adagokra (Ábra 69 C) két vagy több különálló cellában láthatók. Ezen kívül egy vonaldiagram (Ábra 69 D) az egyes kártyák rendelési ütemtervével. A piros sáv (Ábra 69 E) amely függőlegesen átvág a grafikonon a "most" pillanatnak felel meg, míg a rövidebb, különböző színű függőleges sávok (Ábra 69 F) képviselik a közigazgatást.

Az összefoglaló oldal heti ciklusonként jeleníthető meg a **Heti** opció kiválasztásával (Ábra 64 D), napi ciklus szerint a **Napi** (Ábra 64 E), vagy váltással a **Shift** (Ábra 64 F). Az idővonal vízszintesen görgethető a bal és jobb nyilakkal (Ábra 69 G) a múltbeli és jövőbeli rendelések megjelenítésére szolgál.

4.15. Nyomtatson ki egy elkészített receptlistát



Ábra 70

Kattintson a **Nyomtatás** gombra (Ábra 70 A) a kiválasztott beteg kezelési tervét tartalmazó PDF dokumentum létrehozásához és esetleges letöltéséhez.

4.16. Frissítse a terápiás ciklust



Ábra 71

A kezelési tervfrissítési eljárás lehetővé teszi a felírt rendelések frissítését és a lejárt vagy eltávolítandó rendelések törlését.

A kezelési terv frissítéséhez:

- Kattintson a **Frissítés** gombra a parancssorban (Ábra 71 **A**).

PRESCRIPTION	DATE			
Ibuprofen — Capsule DOSE: 400 mg — Oral — 11:00 PM, 12/2/2023, 6:00 PM, 12/4/2023, 11:00 PM, 12/6/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 11:00 PM	Future	☐	
Aspirin — Effervescent tablet DOSE: 100 mg — Oral — 11/30/2023, 5:16 PM	11/30/2023, 5:16 PM	Expired	☐	
Metirosine — Capsule DOSE: 0.075 mg — Oral — once a day at 7:00 AM — effective: 12/1/2023, 7:00 AM — until 12/31/2023, 7:00 AM	12/1/2023, 7:00 AM	Future	☐	
Glucose — Infusion DOSE: 100 mg in 1000 ml at 1 mg/h — Route of administration not applicable — Monday, Thursday, Saturday, Wednesday at 10:00 PM — until 12/6/2023, 10:00 PM	11/30/2023, 10:00 PM	Future	☐	
Bee venom — Powder and solvent for solution for injection DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 2 times in 24 h — until 12/1/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 6:00 PM	Ready	☐	
	12/1/2023, 6:00 AM	Future	☐	



Ábra 72

Megnyílik a **Terápia áttekintése** ablak a **Receptek** lapon (Ábra 72 **A**) mutatja az összes elkészített vényre vonatkozó rendelést vénynevek szerint csoportosítva. Kattintson a **Dátum** fülre (Ábra 72 **B**), a vényrendelések dátuma és időpontja, valamint állapotuk szerint jelennek meg (először a **kész** rendelések, majd a **jövőbeli** rendelések, végül a **lejártak**).

A kiválasztott pácienshez tartozó vényrendelések a következő információkat tartalmazzák:

- Teljes **vényköteles** (Ábra 72 **C**);
- **Ütemezett dátum-idő** (Ábra 72 **D**) minden rendelésre;
- **Állapot** (jövőben, lejárt vagy kész) (Ábra 72 **E**);
- **Színes cellák** (Ábra 72 **F**) a megrendelés állapotától függően (szürke a Future, piros a Lejárt és zöld a Ready);
- **Gombok** (Ábra 72 **G**) a vényrendelések kiválasztásához/kijelölésének törléséhez.

PRESCRIPTION		DATE		THERAPY REVIEW		SELECT EXPIRED	
Ibuprofen — Capsule	DOSE: 550 mg — Oral — 11/30/2023, 11:00 PM, 12/2/2023, 6:00 PM, 12/4/2023, 11:00 PM, 12/6/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 11:00 PM	Future	☐			
Aspirin — Effervescent tablet	DOSE: 100 mg — Oral — 11/30/2023, 5:16 PM	11/30/2023, 5:16 PM	Expired	☒			
Metirosine — Capsule	DOSE: 0.075 mg — Oral — once a day at 7:00 AM — effective: 12/1/2023, 7:00 AM — until 12/31/2023, 7:00 AM	12/1/2023, 7:00 AM	Future	☐			
Glucose — Infusion	DOSE: 100 mg in 1000 ml at 1 mg/h — Route of administration not applicable — Monday, Thursday, Saturday, Wednesday at 10:00 PM — until 12/6/2023, 10:00 PM	11/30/2023, 10:00 PM	Future	☐			
Bee venom — Powder and solvent for solution for injection	DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 2 times in 24 h — until 12/1/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 6:00 PM	Ready	☐			
		12/1/2023, 6:00 AM	Future	☐			

Ábra 73

A lejárt rendelések törlése:

- Manuálisan válassza ki egyenként a lejárt rendeléseket, vagy kattintson a **Lejárt kiválasztása** kék gombra (Ábra 72 H) az összes lejárt megbízás egyidejű kiválasztására szolgál;

Az összes lejárt rendelés automatikusan kiválasztásra kerül, és egy **kuka** ikonnal (Ábra 73 A).

- Kattintson a **Frissítés** gombra (Ábra 72 L). A **Therapy Review** ablak automatikusan bezárul.

PRESCRIPTION		DATE		THERAPY REVIEW		SELECT EXPIRED	
Ibuprofen — Capsule	DOSE: 550 mg — Oral — 11/30/2023, 11:00 PM, 12/2/2023, 6:00 PM, 12/4/2023, 11:00 PM, 12/6/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 11:00 PM	Expired	☒			
Aspirin — Effervescent tablet	DOSE: 100 mg — Oral — 11/30/2023, 5:16 PM	11/30/2023, 5:16 PM	Expired	☒			
Metirosine — Capsule	DOSE: 0.075 mg — Oral — once a day at 7:00 AM — effective: 12/1/2023, 7:00 AM — until 12/31/2023, 7:00 AM	12/1/2023, 7:00 AM	Future	☐			
Glucose — Infusion	DOSE: 100 mg in 1000 ml at 1 mg/h — Route of administration not applicable — Monday, Thursday, Saturday, Wednesday at 10:00 PM — until 12/6/2023, 10:00 PM	11/30/2023, 10:00 PM	Future	☐			
Bee venom — Powder and solvent for solution for injection	DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 2 times in 24 h — until 12/1/2023, 6:00 AM	11/30/2023, 6:00 PM	Ready	☐			
		12/1/2023, 6:00 AM	Future	☐			

Ábra 74

Lehetőség van a le nem járt rendelések törlésére is (Ábra 74 A):

- Manuálisan válassza ki az eltávolítandó rendeléseket;
- Kattintson a **Frissítés** gombra. A **Therapy Review** ablak automatikusan bezárul.

A **Terápia áttekintése** ablakban az eltávolításra kiválasztott rendelések többé nem jelennek meg a páciens felírási listáján.

A **Mégse** gomb (Ábra 72 I) az ablak bezárásához frissítés nélkül.

5. A „Therapy Execution” modul

A „Therapy Execution” egy olyan alkalmazás, amelynek célja az ápolószemélyzet segítése az előírt kezelések lebonyolításának dokumentálásával kapcsolatos feladatokban.

Az adminisztrációs rendelések az orvos által a „Terápiafelírás” modulon meghatározott kezelési terv szerint készülnek (lásd a részt4). A generált rendelések téglalapok formájában jelennek meg, és a „Terápia végrehajtása” modul főképernyőjén, egy „kezelési ütemterv” táblázatban jelennek meg. Az ápolószemélyzet a rendelkezésre álló eszközökkel dokumentálhatja az előírt kezelések beadását.


5.1. „Therapy Execution” modul kiválasztása

A „Therapy Execution” modul kiválasztásához

- Kattintson a megfelelőre  az oldalsó rúdon.

5.2. Fő képernyő

Megjelenik a modul főképernyője. Nézze meg Ábra 75 példaként.

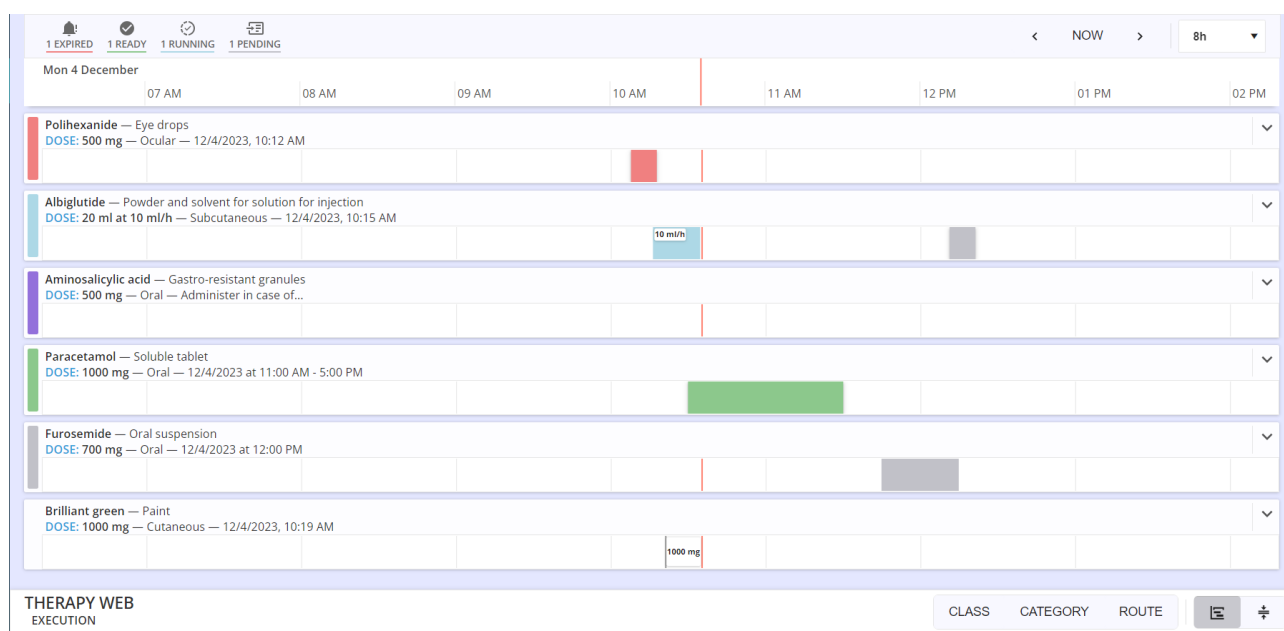

Ábra 75

5.3. Előírt megrendelések képviselte

A „Recept” modulon felírt kezelések sorokban jelennek meg.



Ábra 76

A sor bal oldalán található szín információt nyújt a felírás állapotáról és/vagy típusáról. Lásd a részt 5.3.1 a színekért legenda.

A sor bal oldalán található a recepthoz rendelkezésre álló információ. **Ábra 76 Például** a rendelkezésre álló információk a következők: kezelés neve és típusa, dózis, beadási mód, beadási ütemterv).

Az útvonalon lévő téglalapok az egyes ügyintézési parancsokat (Ábra 76 B). Lásd a részt 5.4 az adminisztrációs táblázat leírásához.

A sor felső fele -  - kattintva megnyithatók az adminisztrációs adatok és parancsok.

5.3.1. Színek legenda

A különböző színek tájékoztatást adnak a felírás állapotáról és/vagy típusáról.

6 szín lehetséges:

 Furosemide — Oral suspension DOSE: 700 mg — Oral — 12/4/2023 at 12:00 PM	A szürke azokat az aktív recepteket jellemzi, amelyek rendeléseit a jövőben be kell adni.
 Brilliant green — Paint DOSE: 1000 mg — Cutaneous — 12/4/2023, 10:19 AM	A fehér szín jellemzi a kitöltött recepteket.
 Paracetamol — Soluble tablet DOSE: 1000 mg — Oral — 12/4/2023 at 11:00 AM - 5:00 PM	A zöld a „beadásra kész” rendeléssel rendelkező recepteket jellemzi.
 Polihexanide — Eye drops DOSE: 500 mg — Ocular — 12/4/2023, 10:12 AM	A piros a legalább egy „késői” rendeléssel rendelkező recepteket jelzi.
 Albiglutide — Powder and solvent for solution for injection DOSE: 20 ml at 10 ml/h — Subcutaneous — 12/4/2023, 10:15 AM	A cián az egy rendelés alatt álló tartós recepteket jellemzi (lásd a bekezdést 3.3 a tartós receptek leírásához)
 Aminosalicylic acid — Gastro-resistant granules DOSE: 500 mg — Oral — Administer in case of...	A lila a feltételes előírásokat jellemzi; ezek a kezelések csak speciális állapotok előfordulása esetén adhatók.

A négyzetek „sürgősséggel” jelennek meg az „Adminisztráció” képernyőn. Felül vannak a „késői” megbízások, majd a „kész”, majd a folyamatban lévő „duratív” megbízások, majd a „feltételes”, majd a jövőben végrehajtandók. A végén a kitöltött recepteknek megfelelő dobozok találhatók.

Ezért a színek ebben a sorrendben jelennek meg a képernyő tetejétől:




1. piros
2. zöld
3. cián
4. lila
5. világos szürke
6. fehér

A kezelések egyébként a jobb alsó sarokban található gombok segítségével rendezhetők a bekezdésben leírtak szerint 5.9.

5.4. A rendelési táblázat

Az adminisztrációs képernyő diagramon megjeleníti az összes már generált megbízást (a már végrehajtottakat, a jövőbenieket, a folyamatban lévőket -Ábra 77).

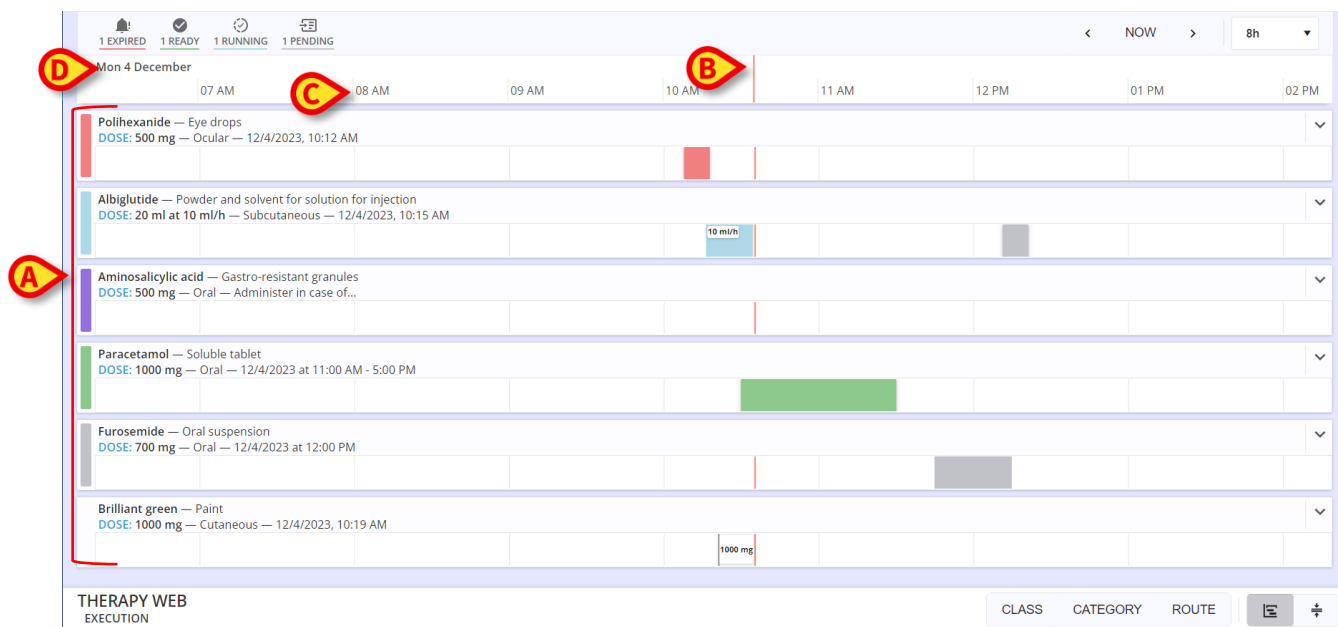

Ábra 77

A rendelések sorokból és oszlopokból álló rácsban helyezkednek el. Az azonos kezeléshez tartozó rendelések ugyanabban a sorban vannak (inÁbra 77 bal oldalon hat előírt kezelés található -Ábra 77 A); az oszlopok a nap óráinak felelnek meg.

A piros sáv (Ábra 77 B) a jelenlegi időt jelzi. A képernyő balra gördül az idő múlásával, így a sáv minden sorban a jelen pillanatot jelzi. Ban benÁbra 77 kb 10:40 van. Az idő felül olvasható (Ábra 77 C). A dátum a bal felső sarokban jelenik meg (Ábra 77 D).

5.4.1. A megrendelések grafikus ábrázolása

A színes téglalapok a különböző megbízásokat ábrázolják, az előírt ügyintézési idejüknek (vagy végrehajtási időnek, ha már végrehajtották) megfelelő helyre elhelyezve.

5.4.1.1. Adminisztrációs tolerancia időszaka


A téglalapok hossza arányos azzal az időtartammal, amelyet a rendelés felírásakor „tűrés időként” jelöltek meg (lásd a részt 4.13).

Például: ha a kezelést 13:00-kor írják elő, és a beadási tűrésidő 30 percre van beállítva, akkor a táblázatban feltüntetett adagolási idő 12:30-tól 13:30-ig tart.

A téglalapok helyzete megfelel az előírt beadási időeknek. A téglalapok hossza arányos a tűrésidővel.

5.4.1.2. Rendelés állapota

A téglalap színe a megrendelés állapotát jelzi.

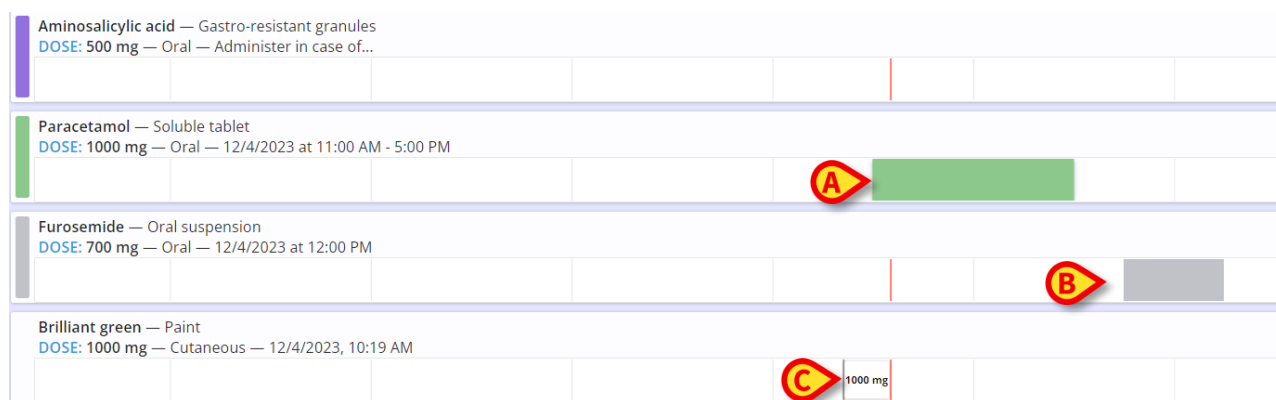

Ábra 78

A zöld azt jelenti, hogy a rendelést azonnal be kell adni, azaz az adminisztrációs tűréshatáron belül van. Amikor a téglalap zöld, a függőleges időszám metszi a téglalapot (Ábra 78 **A**).

A világosszürke azt jelenti, hogy a megbízást a jövőben végre kell hajtani. Ha a téglalap világosszürke, a függőleges időszám a téglalap bal oldalán található (Ábra 78 **B**).


A kezelés beadásakor egy függőleges szürke sáv kerül a felírási sorba, a pontos beadási időnek megfelelő helyre. A beadott adag a közelben van megadva. A függőleges időszám a jobb oldalon található (Ábra 78 **C**).



A végrehajtott megbízásnak megfelelő dobozok hossza lecsökkentve jelzi a pontos ügyintézési időt. A tűrésidő már nem jelenik meg. Ha a felírás tartós (például csepegtető), az alkalmazás időtartama teljes egészében szürkén jelenik meg. Lásd a bekezdést 5.5.2 a tartós megbízások ügyintézési eljárásához.


A piros azt jelenti, hogy a megrendelés adminisztrációja késik; azaz a tűrésidő lejárt (Ábra 79 **A**). Ha a téglalap piros, a függőleges időszám a téglalap jobb oldalán található.

A cian a folyamatban lévő duratív adminisztrációkat jellemzi (Ábra 79 **B**). A függőleges időszám ezekben az esetekben egybeesik a téglalap jobb oldalával. A beadott adag a téglalap belsejében, a bal oldalon van megadva. A tartós adminisztrációhoz automatikusan „Stop” megbízás generálódik, az adminisztráció ütemezett időtartamának megfelelően elhelyezve (Ábra 79 **C**).

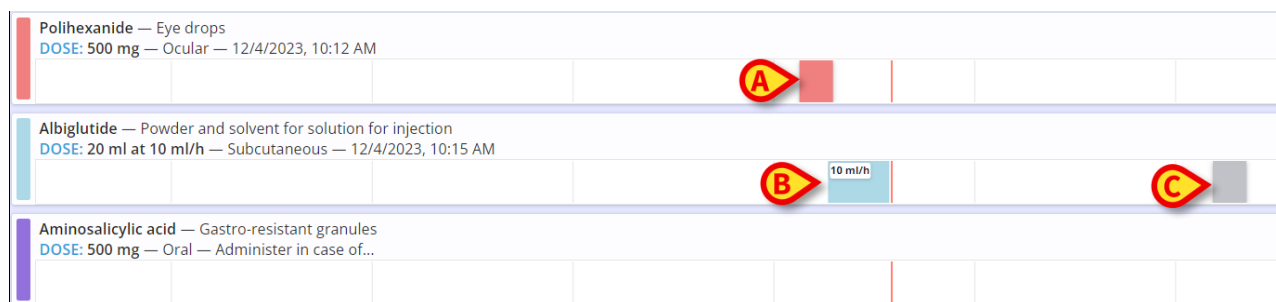


Ábra 79

Az adagolás időtartama cián színnel jelenik meg. Az adagolás leállításakor az időtartam szürkévé válik (Ábra 80). Az adagolási dózis lehetséges módosításai a téglalapon belül vannak megadva.

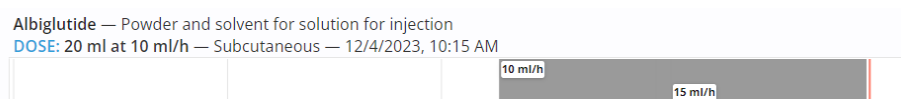

Ábra 80

Amikor az  ikon jelenik meg egy téglalap bal oldalán (Ábra 81), ez azt jelenti, hogy a megrendelés még nincs érvényesítve, vagy lejárt. Lásd a részt 3.3.3 a „rendelés érvényesítése” fogalom magyarázatához. A nem érvényesített megbízások egy meghatározott eljárással adhatók le. Ezt az eljárást a szakasz ismerteti 5.5.5 .

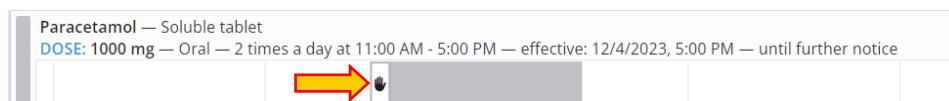

Ábra 81

5.5. Hogyan kell rögzíteni a kezelés beadását

5.5.1. Pontos kezelés beadása


A kezelés beadásának rögzítéséhez,

- Kattintson a beadandó kezelésnek megfelelő sor felső felére (Ábra 82 **A**).



Ábra 82

A sor megnagyobbodik, hogy megjelenjen a receptösszegzés és az adminisztrációs parancsok (Ábra 83).

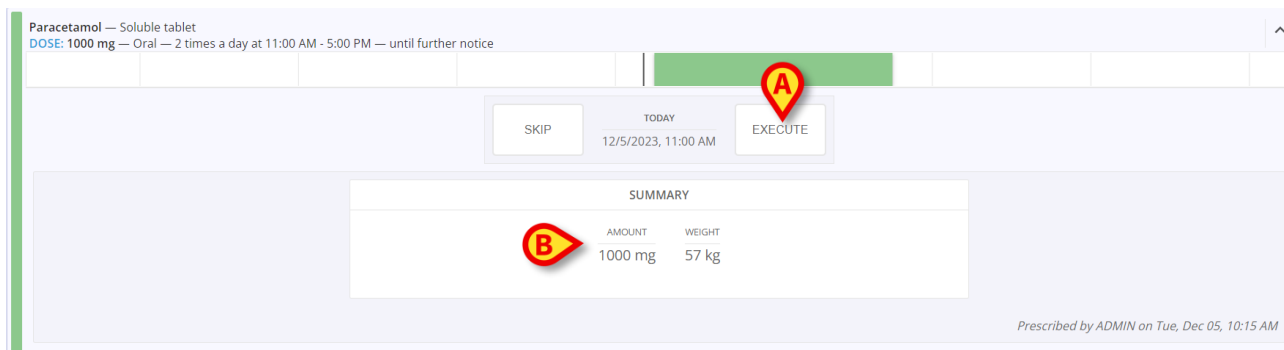

Ábra 83

- Kattintson a **Végrehajtás** gombra (Ábra 83 **A**).



*pontjában jelzett „összefoglaló”. Ábra 83 **A B** az előírt értékekre vonatkozik, nem pedig egy adott beadás értékeire. Ezért, ha egy adminisztráció értékei megváltoznak, az összefoglaló értékek változatlanok maradnak.*

A következő ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi az adminisztrációs értékek megerősítését vagy módosítását. Az ablak leírása a fejezetben található 5.6 .

A sor megnagyobbodik, hogy megjelenítse a receptösszesítést és az adminisztrációs parancsokat (Ábra 87).

Morphine — Infusion
DOSE: 10 mg in 500 ml at 10 mg/h — Route of administration not applicable — 12/7/2023, 11:17 AM

SKIP TODAY 12/7/2023, 11:17 AM EXECUTE

SUMMARY						
AMOUNT	VOLUME	CONCENTRATION	SPEED	DRUG SPEED	DURATION	WEIGHT
10 mg	500 ml	0.02 mg/ml	500 ml/h	10 mg/h	1h	90 kg

Prescribed by ADMIN on Thu, Dec 07, 11:16 AM

Ábra 87

- Kattintson a **Végrehajtás** gombra (Ábra 87 **A**).

A következő ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi az adminisztrációs értékek megerősítését vagy módosítását. Az ablak leírása a bekezdésben található 5.6.

Morphine — Infusion
DOSE: 10 mg in 500 ml at 10 mg/h — Route of administration not applicable — 12/7/2023, 11:17 AM

Speed: 500 ml/h

TODAY AT 11:17 AM

SUMMARY						
AMOUNT	VOLUME	CONCENTRATION	SPEED	DRUG SPEED	DURATION	WEIGHT
10 mg	500 ml	0.02 mg/ml	500 ml/h	10 mg/h	1h	90 kg

11:19 AM 12/7/2023

1h 30min 10min

NOTES

CANCEL START


Ábra 88

- Kattintson a **Start** gombra az adminisztráció kezdetének rögzítéséhez (Ábra 88 **A**).

Az adott sorrendnek megfelelő téglalap cián színűvé válik. Az adminisztráció során egy cián sáv rajzolódik a diagramra; egy címke jelzi az infúzió sebességét (Ábra 89 **A**). A sorban egy stop jelzés jön létre az ügyintézés időpontjában jelzett értékek szerint. A „Stop” téglalap az infúzió teljes időtartamának megfelelően helyezkedik el (Ábra 89 **B**).



A „Stop” téglalap akkor jelenik meg, ha a duratív beadás időtartama meg van határozva, a kezelés konfigurálásától függően. Vannak olyan tartós adminisztrációk, amelyeknél nincs jelen a „Stop” téglalap.

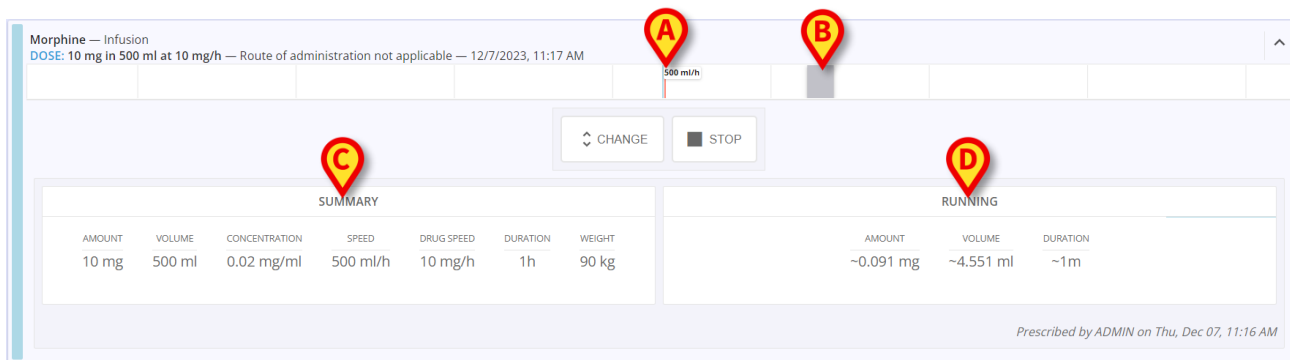


Ábra 89

Az előírt adagolási értékek a bal oldalon jelennek meg (Ábra 89 **C** – Összefoglalás). A beadott értékek a jobb oldalon jelennek meg (Ábra 89 **D** – Összeg, mennyiség, időtartam – ezek az értékek valós időben frissülnek).



*pontjában jelzett „összefoglaló”. Ábra 89 **A C** a felírt értékekre vonatkozik, nem pedig egy adott beadás értékeire. Ezért, ha egy adminisztráció értékei megváltoznak, az összefoglaló értékek változatlanok maradnak.*


Ha megjelenik a „Stop” téglalap, amikor a piros „most” sáv metszi azt, zöldre vált (Ábra 90 **A**). Ettől a pillanattól kezdve a „Módosítás” gomb már nem elérhető (Ábra 90 **B**). Az infúzió „idejében” leállításának tűréshatára 15 perc (konfigurálható).

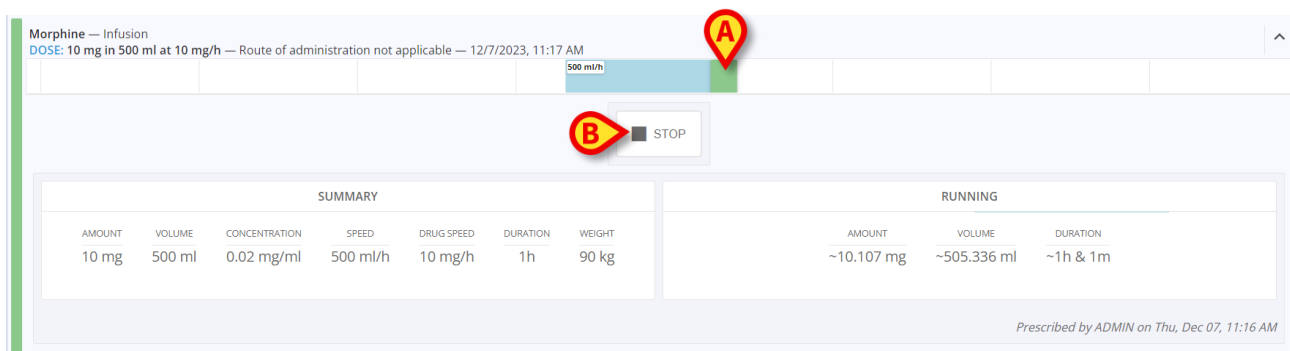

Ábra 90

- Kattintson a **STOP** gombra a tartós adminisztráció leállításához.


Megjelenik egy adminisztrációs ablak (Ábra 91). Igény esetén itt lehetőség van jegyzetek beszúrására vagy a rögzített ügyintézési időre történő műveletre (lásd a bekezdést 5.6).

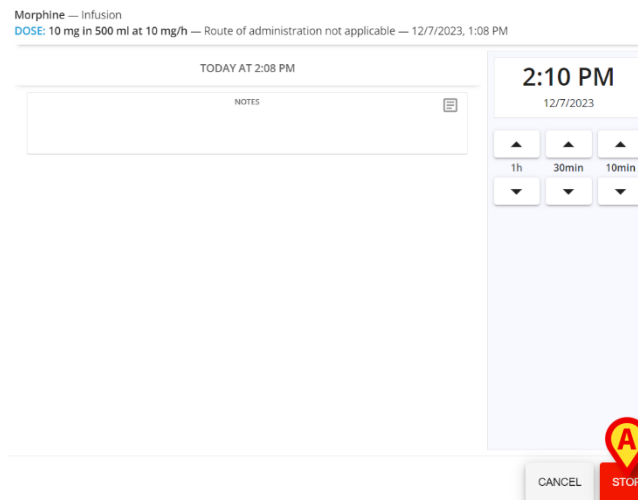

Ábra 91

- Kattintson a **Stop** gombra az adminisztrációs ablakban (Ábra 91 **A**).

A kezelt rendelés sötétszürke téglalapként marad a diagramon, hossza megfelel a tényleges időtartamnak (Ábra 92 **A**).

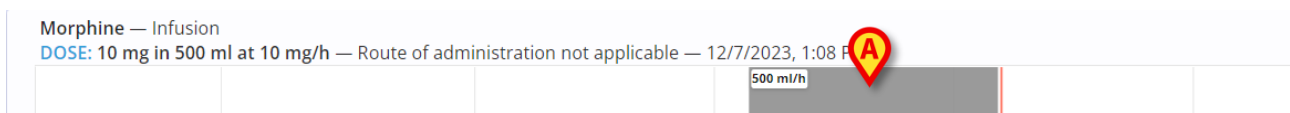


Ábra 92

5.5.3. A tartós beadás befejezése a tervezett időpont előtt vagy után

Ha a tartós beadás időtartama meg van határozva, és az adminisztrációt a tervezett időpont előtt leállítják (azaz amikor a „Stop” téglalap szürke, a piros „most” sáv jobb oldalán található – lásd a példát Ábra 91 **A** és **B**), majd a **STOP** gombra kattintás után a felhasználónak megjegyzésben meg kell adnia az adminisztráció befejezésének előrelátható okát. A megjegyzés ezután megjelenik az adminisztrációs ablakban (Ábra 91).

A tartós beadás „időben” leállításának tűrési ideje 15 perc (konfigurálható). 15 perc elteltével a „Stop order” késik, és a „Stop téglalap” pirosra vált (Ábra 93 **A**). Az adminisztráció megy tovább.

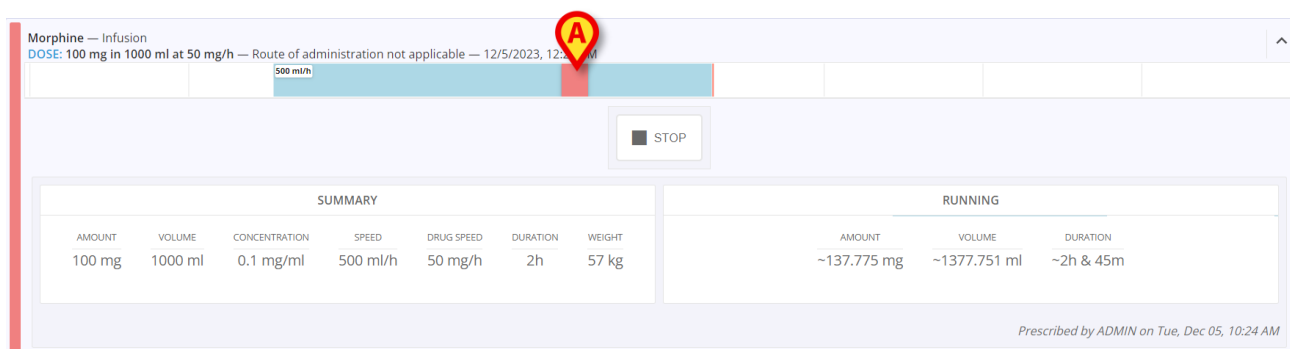

Ábra 93

Az adminisztráció ütemezett időpont utáni leállításához a felhasználónak megjegyzésben meg kell adnia az adminisztráció befejezésének késleltetésének okát is. A megjegyzés ezután megjelenik az adminisztrációs ablakban (Ábra 91).

Mindkét esetben a kezelt megbízások sötétszürke téglalapoként maradnak a diagramon, hosszuk megfelel a tényleges időtartamuknak.

5.5.4. Az adminisztrációs értékek módosítása

Lehetőség van a tartós adminisztráció adminisztrációs értékeinek megváltoztatására, miközben az adminisztráció folyamatban van. Ehhez:

- Kattintson a sor felső felére (Ábra 94 **A**).

Megjelennek az adminisztrációs adatok és parancsok (Ábra 94 **B**).

SUMMARY							RUNNING		
AMOUNT	VOLUME	CONCENTRATION	SPEED	DRUG SPEED	DURATION	WEIGHT	AMOUNT	VOLUME	DURATION
10 mg	500 ml	0.02 mg/ml	500 ml/h	10 mg/h	1h	57 kg	~2.677 mg	~133.866 ml	~16m

Prescribed by ADMIN on Thu, Dec 07, 09:05 AM

Ábra 94

- Kattintson a **MÓDOSÍTÁS** gombra (Ábra 94 **C**).

Megjelenik az adminisztrációs részletek ablak (Ábra 95).

Speed: 500 ml/h

NOTES

9:24 AM
12/7/2023

1h 30min 10min

CANCEL CHANGE

Ábra 95

- Használja a virtuális billentyűzetet vagy a munkaállomás billentyűzetét az új érték beszúrásához a jelzett mezőbe **Ábra 95 A**.

Az ablak a képen látható módon változik **Ábra 96**. A felhasználónak megjegyzésben kell jeleznie az adminisztrációs értékek megváltoztatásának okát (**Ábra 96 A**).

Ábra 96

- Kattintson a **MÓDOSÍTÁS** gombra (**Ábra 96 B**).

Az adminisztrációs táblázat az alábbiak szerint változik. Az új sebességet egy címke jelzi (**Ábra 97 A**).

SUMMARY							RUNNING		
AMOUNT	VOLUME	CONCENTRATION	SPEED	DRUG SPEED	DURATION	WEIGHT	AMOUNT	VOLUME	DURATION
10 mg	500 ml	0.02 mg/ml	500 ml/h	10 mg/h	1h	57 kg	~3.26 mg	~163.012 ml	~19m

Ábra 97




A változást a „Recept” modulon a ikon jelzi a vényköteles asztalon. Az ikon azt jelenti, hogy a „Végrehajtás” modulon rögzített értékek eltérnek az „Előírás”-on megadott értékektől.

5.5.5. Megrendelés adminisztrációja lejárt vagy még nem érvényesített

A megrendelés érvényessége egy bizonyos idő után lejár (lásd a bekezdést 3.3.4 további információért). A lejárt rendelés egyébként adminisztrálható, de ehhez speciális felhasználói


engedélyek és meghatározott eljárás szükséges. A lejárt rendelésekre jellemző a 🚫 ikon (Ábra 98).

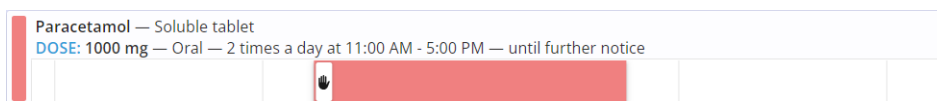

Ábra 98

Lejárt (vagy még nem érvényesített) megrendelés adminisztrálása:

- Kattintson a sor felső felére. Megjelennek az adminisztrációs adatok és parancsok (Ábra 99).

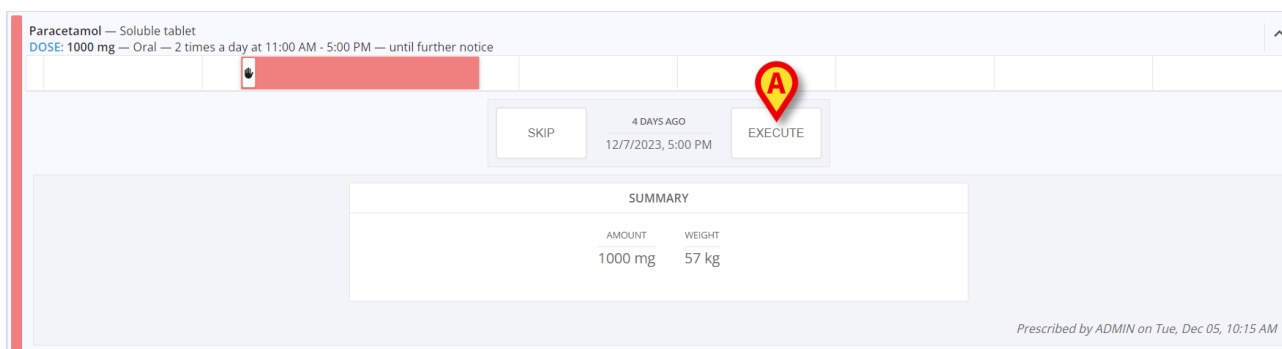

Ábra 99


- Kattintson a **Végrehajtás** gombra (Ábra 99 **A**).

Megnyílik egy ablak, amelyben meg kell adni a lejárt rendelés adminisztrálásának okát.

- Megjegyzésben adja meg a lejárt megbízás kezelésének okát.

- Kattintson a **Tovább** gombra.

Ekkor megjelenik az adminisztrációs részleteket tartalmazó ablak. A jegyzet megjelenik az ablakon (Ábra 100 **A**).

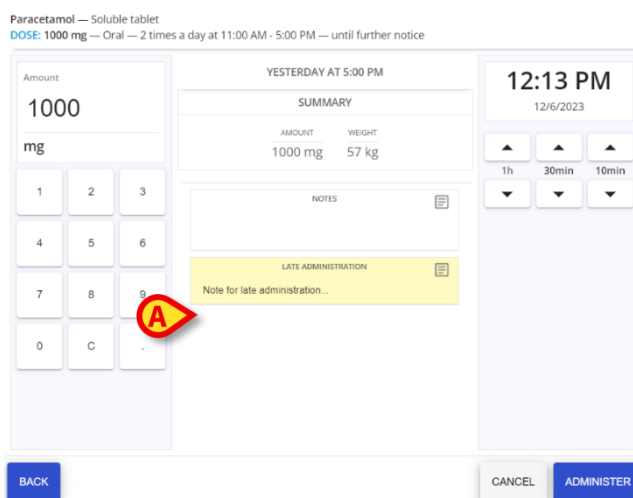

Ábra 100

- Kattintson az **Adminisztrálás** gombra a megrendelés kezeléséhez.



Ugyanezzel az eljárással rögzíthető egy jövőbeli, még nem érvényesített megbízás ügyintézése is.

5.5.6. Adminisztráció kihagyása

Annak dokumentálásához, hogy egy bizonyos kezelést nem alkalmaztak:

- Kattintson a sor felső felére. Megjelennek az adminisztrációs adatok és parancsok (Ábra 101).

Polihexanide — Eye drops
DOSE: 1000 mg — Ocular — 12/13/2023, 10:13 AM

SKIP TODAY 12/13/2023, 10:13 AM EXECUTE

SUMMARY	
AMOUNT	WEIGHT
1000 mg	57 kg

Prescribed by ADMIN on Wed, Dec 13, 10:13 AM

Ábra 101

- Kattintson a **Kihagyás** gombra (Ábra 101 A).
- Megjegyzésben adja meg a kezelés elmulasztásának okát (Ábra 102 A).

Polihexanide — Eye drops
DOSE: 1000 mg — Ocular — 12/13/2023, 10:13 AM

WARNING

please insert a note with the reason you are canceling this order

SKIPPED EXECUTION

Note for skipping the administration of a treatment

CANCEL NEXT

Ábra 102

- Kattintson a **Tovább** gombra (Ábra 102 B).

Megjelenik az adminisztrációs részletek ablaka. A jegyzet megjelenik az ablakon (Ábra 103 A).

Polihexanide — Eye drops
DOSE: 1000 mg — Ocular — 12/13/2023, 10:13 AM

TODAY AT 10:13 AM

NOTES

SKIPPED EXECUTION
Note for skipping the administration of a treatment

BACK CANCEL DO NOT ADMINISTER

Ábra 103

- Kattintson a **Ne adminisztrálás lehetőségre** az adminisztráció kihagyásához (Ábra 103).

5.6. Az adminisztrációs ablak

A kezelés beadási ablaka (Ábra 104) lehetővé teszi az adminisztráció egyes értékeinek szerkesztését a „Therapy Execution” modulon.

Paracetamol — Soluble tablet
DOSE: 1000 mg — Oral — 2 times a day at 11:00 AM - 5:00 PM — until further notice

TODAY AT 11:00 AM

SUMMARY

AMOUNT	WEIGHT
1000 mg	57 kg

NOTES

LATE ADMINISTRATION
Note

11:56 AM
12/11/2023

1h 30min 10min

BACK CANCEL ADMINISTER

Ábra 104

Az előírt értékek felül vannak feltüntetve (Ábra 104 **A**).

Az ablak középső részén a következő információk jelennek meg:

- Adminisztráció ütemezett időpontja (Ábra 104 **B**).
- Adminisztrációs összefoglaló (Ábra 104 **C** – Megjegyzés: az ezen a területen megadott értékek a kezelés típusától függenek).

- Általános felhasználói megjegyzések (Ábra 104 **D**).
- Megjegyzések a következőkkel kapcsolatban: késői/korai ügyintézés; az adminisztrációs értékek változásai; az ügyintézési idő változásai (Ábra 104 **E**).

A bal oldalon található numerikus billentyűzet lehetővé teszi a beadott mennyiségek módosítását (Ábra 104 **F**).

Az adminisztrációs összegek módosítása:

- A virtuális billentyűzet segítségével adja meg az új összeget. Az ablak a képen látható módon változik (Ábra 105).
- Írjon be egy megjegyzést (kötelező), amely elmagyarázza a változtatások okát (Ábra 105 **B**).
- Kattintson az **Adminisztrálás** gombra (Ábra 105 **C**).

Paracetamol — Soluble tablet
DOSE: 1000 mg — Oral — 2 times a day at 11:00 AM - 5:00 PM — until further notice

Amount: 800 mg

YESTERDAY AT 11:00 AM

SUMMARY	
AMOUNT	WEIGHT
800 mg	57 kg

12:55 PM
12/12/2023

1h 30min 10min

Reason for changes

VALUE CHANGED

LATE ADMINISTRATION

Late administration note

BACK CANCEL ADMINISTER

Ábra 105

Az idő kijelzése a jobb oldalon (Ábra 105 **D**) fel kell tüntetnie a kezelés tényleges beadásának időpontját. Az alapértelmezetten megjelenített időpont az adminisztrációs ablak megnyílik. Ha a megbízás adminisztrációjának rögzítése a tényleges ügyintézés időpontjától eltérő időpontban kerül rögzítésre, lehetőség van a megjelenített időpont módosítására és a helyes ügyintézési idő feltüntetésére.

Ehhez:

- Használja az idő kijelző alatt elhelyezett nyíl gombokat (Ábra 105 **D**).

A felfelé mutató nyilak 1 órát (balra nyíl), 30 percet (középen), 10 percet (balra) adnak a megjelenített időhöz.

A lefelé mutató nyilak levonnak 1 órát (balra nyíl), 30 percet (középen), 10 percet (balra) a megjelenített időből.

Az ablak a következő módon változik:Ábra 106).

Paracetamol — Soluble tablet
DOSE: 1000 mg — Oral — 2 times a day at 11:00 AM - 5:00 PM — until further notice

Amount: 800 mg

YESTERDAY AT 11:00 AM

SUMMARY

AMOUNT	WEIGHT
800 mg	57 kg

NOTES

VALUE CHANGED

Reason for changes

TIME CHANGED

Time changed note

LATE ADMINISTRATION

Late administration note

1:05 PM
12/12/2023

1h 30min 10min


BACK CANCEL ADMINISTER

Callouts: A points to the time/date display, B points to the 'Time changed note' field, and C points to the 'ADMINISTER' button.

Ábra 106

- Írjon be egy megjegyzést (kötelező), amely elmagyarázza az időváltozások okát (Ábra 106 B).
- Kattintson az **Adminisztrálás** gombra (Ábra 106 C).


Az adminisztrációs sáv vagy téglalap (tartós ügyintézés esetén) az adminisztrációs ablakon megadott idő és értékek szerint kerül a diagramba (Ábra 107).

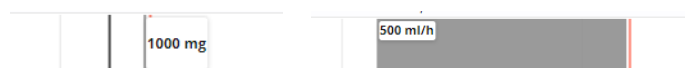

Ábra 107

5.7. „Végrehajtás” modul felszólítja

A „Végrehajtás” képernyő bal felső sarkában különböző ikonok jeleníthetők meg a felhasználó számára a kezelési terv általános állapotával kapcsolatban (Ábra 108 **A**).

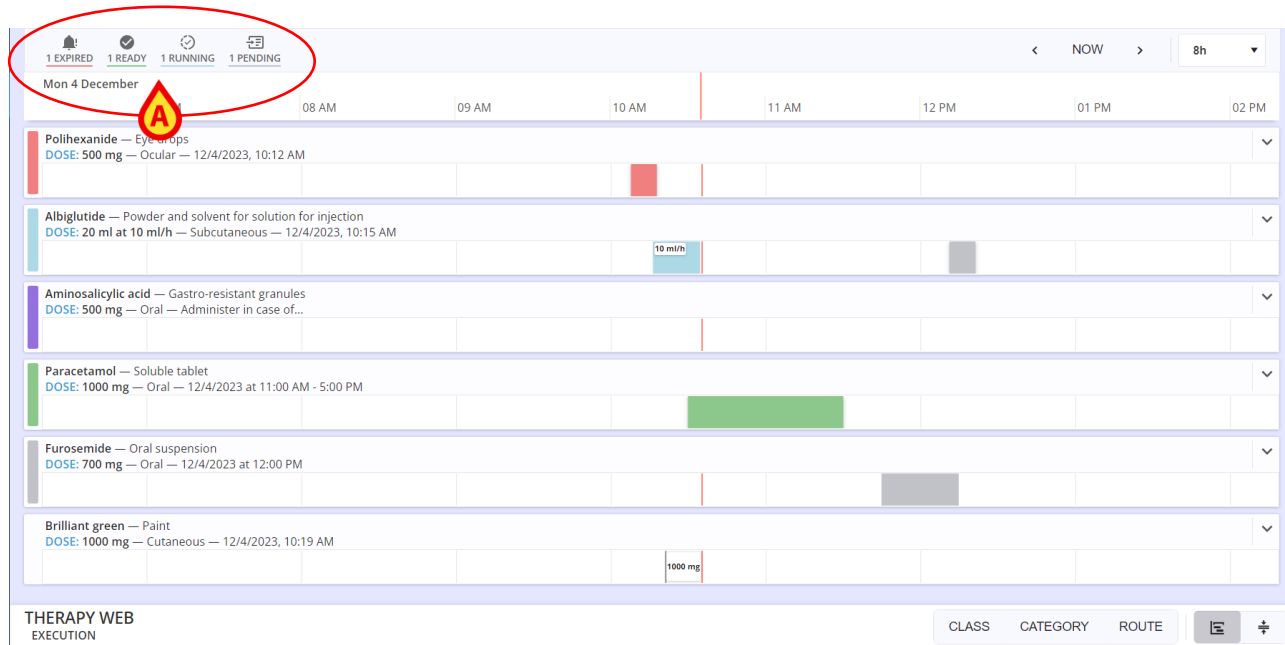


Ábra 108

Ban benÁbra 108 **Például** az ikonok azt jelzik, hogy a kezelési tervben a következők szerepelnek:

- 1 rendelés lejárt (piros)
- 1 rendelés kész (zöld)
- 1 rendelés fut (ciánkék)
- 1 megrendelés függőben (szürke)


Lásd, beÁbra 109 , kinagyított nézet.

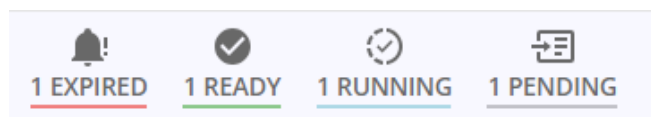

Ábra 109


5.8. „Végrehajtás” időtartomány kijelzése

A „Végrehajtás” képernyő jobb felső sarkában elérhető parancsok lehetővé teszik a megjelenített időtartomány módosítását (Ábra 110 A).

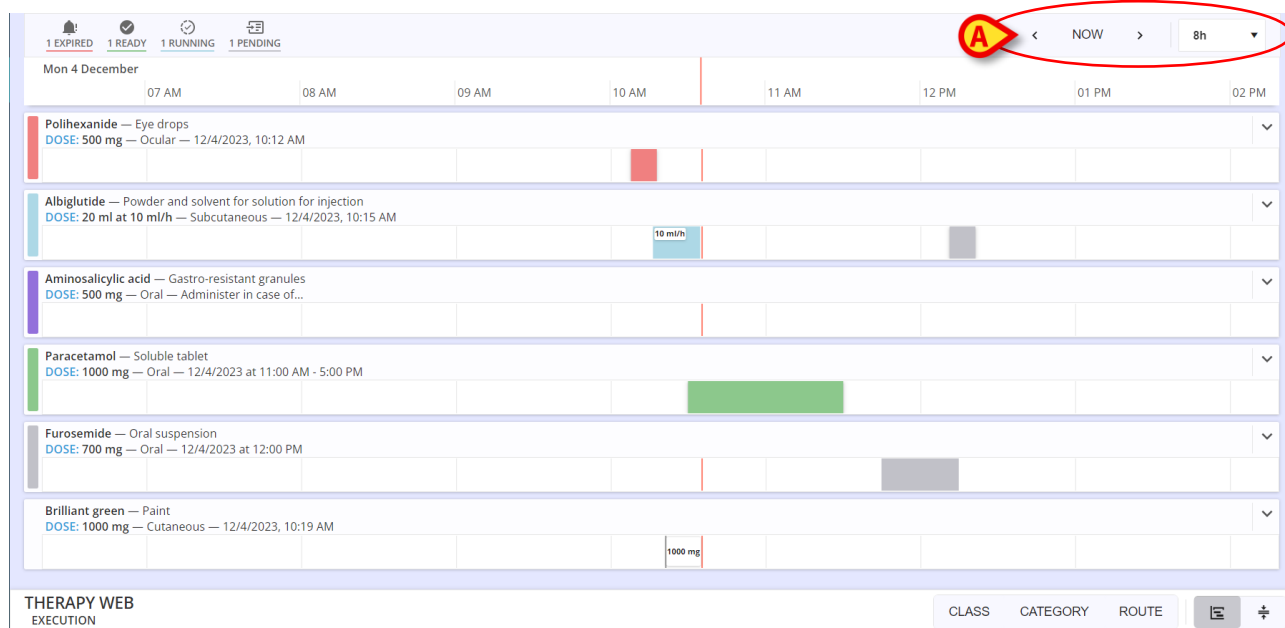


Ábra 110

Használja a megjelölt legördülő menüt Ábra 111 A megjelenítési mód **megváltoztatásához**.

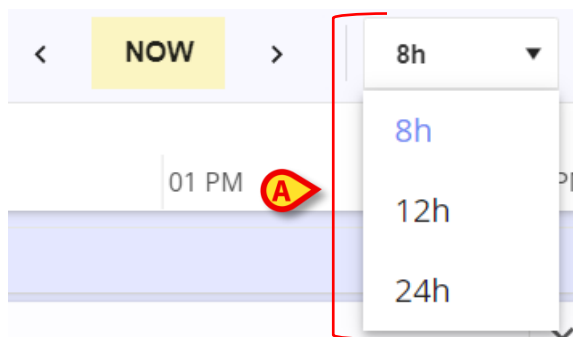

Ábra 111

Az alapértelmezett megjelenítési tartomány 8 óra. Kattintson a 12h vagy 24h gombra a megfelelő tartomány megjelenítéséhez. Ábra 112 példaként egy 24 órás kijelző részletét mutatja.

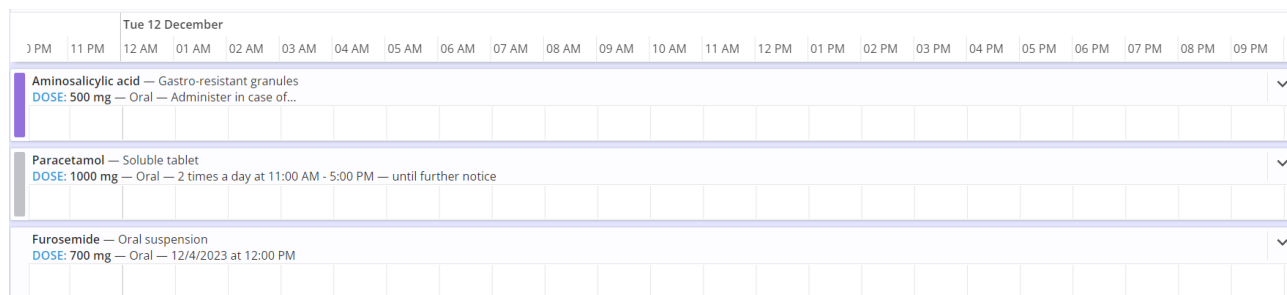

Ábra 112 - 24 órás kijelző (részletek)

Használja a bal és jobb nyilat (Ábra 113 **A**) a képernyő tartalmának hátra (balra) és előre (jobbra) görgetéséhez.



Ábra 113

A nyíl gomb egyetlen kattintása a mezőben megadott időtartományra mozgatja a képernyőt (azaz ha 8h van kiválasztva - mint az ábrán -, kattintson egyszer a bal nyílra az előző 8 óra megjelenítéséhez, kattintson egyszer a jobb nyílra a 8 óra után; ha a 12h van kiválasztva, a képernyő kattintásonként 12 órát mozog).


A **MOST** gombbal ismét megjelenítheti a pontos időt.

5.9. Kezelés válogató gombok

-ban jelzett gombok Ábra 114 **Lehetővé** teszi a meglévő kezelések osztály, kategória vagy beadási mód szerinti rendezését és csoportosítását.




A kezelés osztálya, kategóriája és útvonala a kezelés konfigurációja során kerül meghatározásra.

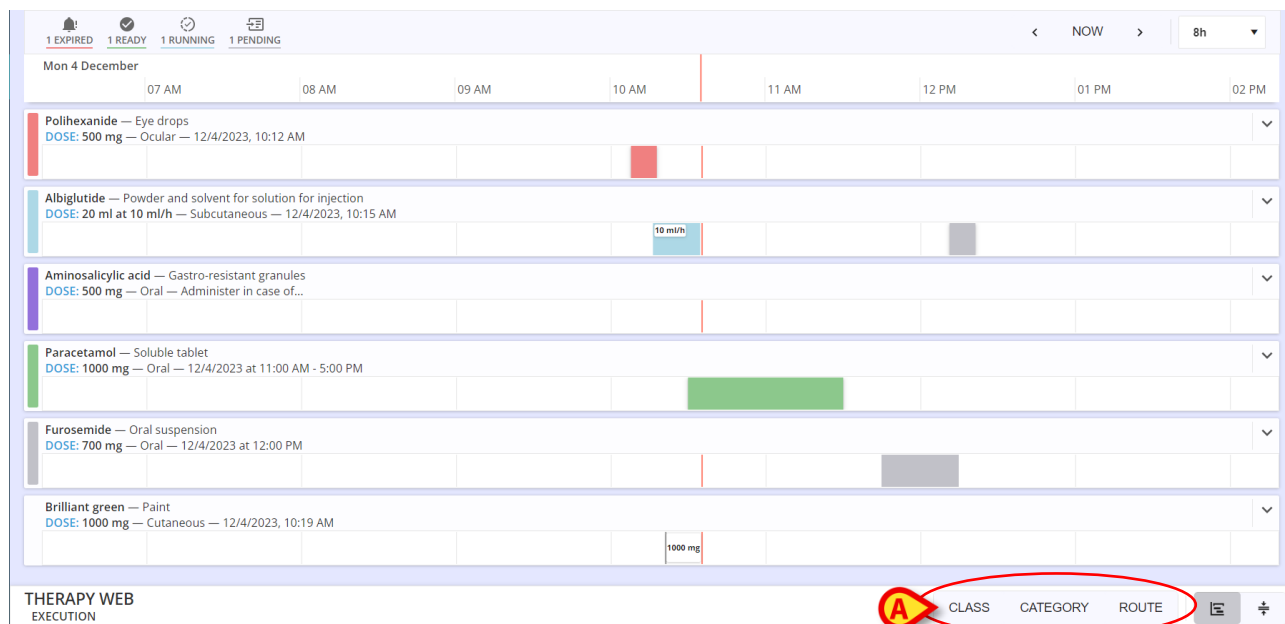

Ábra 114

Kattintson egy gombra a kezelések rendezéséhez a kapcsolódó rendezési szempont szerint. Lásd például in Ábra 115 , a kezelések beadási mód szerint rendezve (az ábrán: Orális, Ocularis, Subcutan, Cutan).


Kattintson ismét a gombra az eredeti rendezéshez való visszatéréshez.

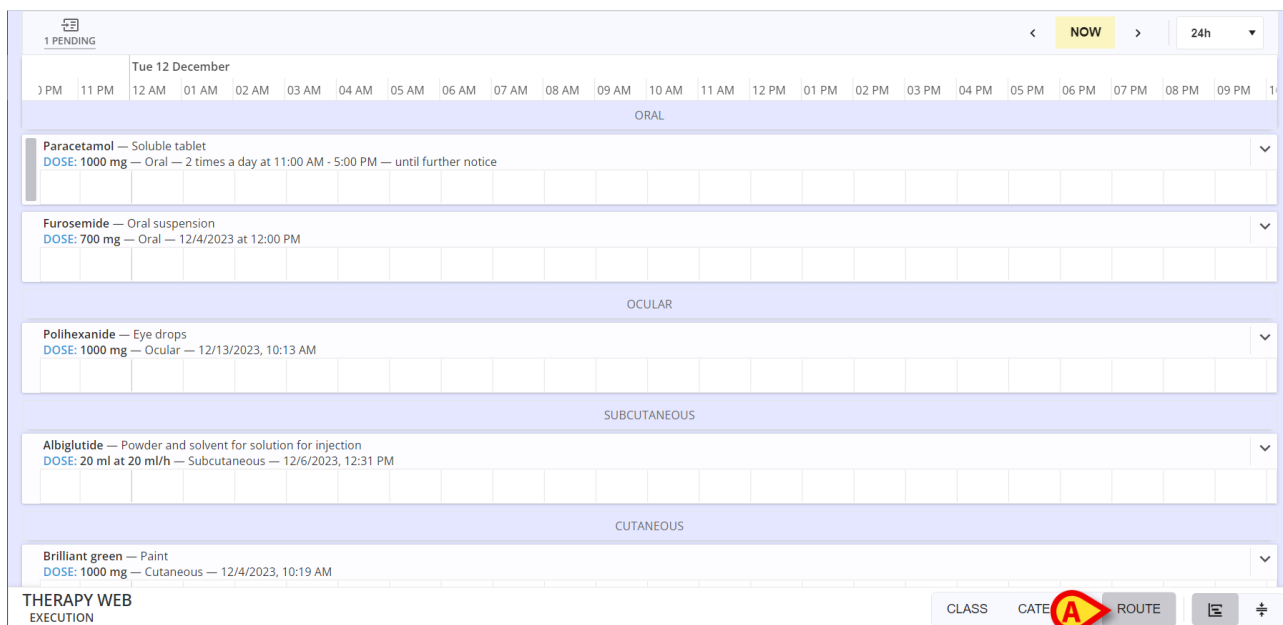

Ábra 115

5.10. Kompakt nézet

Használja a jelzett gombokat Ábra 116 A kompaktabb megjelenítési módra **váltáshoz** (és vissza normálra). Ábra 116 a normál nézetet mutatja.

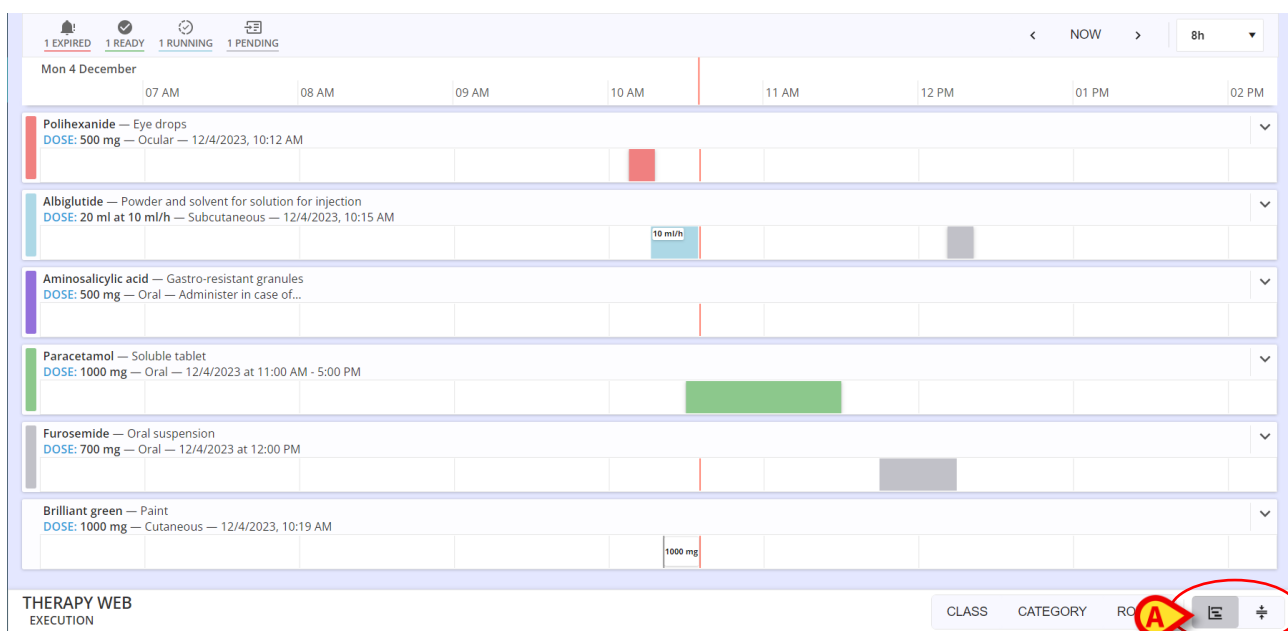

Ábra 116

Ábra 117 kompakt nézetet mutat.

< NOW > 8h		Tue 12 December 12 AM04 AM08 AM12 PM04 PM08 PM						▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Aminosalicic acid DOSE: 500 mg								
Paracetamol DOSE: 1000 mg								
Furosemide DOSE: 700 mg								
Polihexanide DOSE: 1000 mg								
Albiglutide DOSE: 20 ml at 20 ml/h								
Brilliant green DOSE: 1000 mg								
Morphine DOSE: 10 mg in 500 ml at 10 mg/h								
THERAPY WEB EXECUTION								CLASS CATEGORY ROUTE 🔍 ⛶

Ábra 117

A jobb oldali nyilak segítségével kinagyíthatja a kezelési sorokat, és megjelenítheti az adminisztrációs részleteket és parancsokat (lásd pl.Ábra 118).

<

NOW

>

8h

Tue 12 December

12 AM

04 AM

08 AM

12 PM

04 PM

08 PM

Aminosalicic acid

DOSE: 500 mg

Paracetamol — Soluble tablet

DOSE: 1000 mg — Oral — 2 times a day at 11:00 AM - 5:00 PM — until further notice

SKIP

TOMORROW

12/14/2023, 5:00 PM

EXECUTE

SUMMARY

AMOUNT

WEIGHT

1000 mg

57 kg

Prescribed by ADMIN on Tue, Dec 05, 10:15 AM

Furosemide

DOSE: 700 mg

Polihexanide

DOSE: 1000 mg

Albiglutide

DOSE: 20 ml at 20 ml/h

Brilliant green

DOSE: 1000 mg

THERAPY WEB

EXECUTION

CLASS

CATEGORY

ROUTE

🔍

⛶

Ábra 118