



Patient Explorer

Gebruikshandleiding

Versie 3.0

2023-03-27

Inhoud

1 Patient Explorer.....	3
1.1 Toegang tot de Patiënt Explorer-module	3
1.2 Opgenomen patiënten	4
1.2.1 Historiseren van patiëntgegevens	5
1.3 Patiënten zoeken	5
1.3.1 Lokaal zoeken	6
1.3.2 Op afstand zoeken	8
1.4 Patiënten van ADT (Admission/Discharge/Transfer).....	9
1.5 Patiënten "In overplaatsing"	10
1.6 Opname anonieme patiënt	12
1.7 Afstemming en Externe afstemming	13
1.8 De werkbalk	14
1.8.1 Patiënten selecteren.....	14
1.8.2 Nieuwe/Opname patiënt.....	15
1.8.3 Patiënt bewerken.....	15
1.8.4 Verplaatsen.....	16
1.8.5 Opnemen.....	17
1.8.6 Ontslaan	18
1.8.7 Wissen	19
1.8.8 Wijzigen	20
1.8.9 Patiënt deselecteren.....	21
1.8.10	Sluiten

1 Patient Explorer



Zie de specifieke documenten van het Product voor algemene en gedetailleerde informatie over de productomgeving en de instructies voor het gebruik van de Control Bar-software. De kennis en het begrijpen van deze documenten is verplicht voor een correct en veilig gebruik van de applicatie Patient Explorer, zoals beschreven in dit document.

Met de Patient Explorer-module kan de patiëntendatabase van een of meer ziekenhuizen op een eenvoudige en aangepaste manier worden beheerd.

De hoofdgegevens van elke bekende patiënt kunnen snel worden geopend, weergegeven, bewerkt en, indien nodig, automatisch in een geselecteerd(e) document/module worden ingevoegd.



Patient Explorer is volledig aanpasbaar aan de behoeften van de zorgstructuur die het gebruikt. De mogelijke configuraties zijn potentieel onbeperkt. Deze handleiding beschrijft een voorbeeld van een standaardconfiguratie om de belangrijkste functies en procedures van de module te illustreren.

1.1 Toegang tot de Patiënt Explorer-module

Om toegang te krijgen tot [Patiënt Explorer](#):

- Klik op de knop **Patiënt** op de [Bedieningsbalk](#) (Fig. 1)



Fig. 1

Een venster met een lijst van de patiënten die op een bepaalde afdeling zijn opgenomen, wordt weergegeven (vergelijkbaar met Fig 2).

1.2 Opgenomen patiënten

Het scherm dat wordt weergegeven in Fig 2 geeft alle patiënten weer die zijn opgenomen op een specifieke afdeling, meestal een intensive care-afdeling.

PATIËNTEN OPGENOMEN	1 ICU Jack White OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	9 ICU Frances Gardner OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05
PATIËNTEN ZOEKEN	2 ICU John Smith OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	10 ICU
	3 ICU John Brown OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	11 ICU Patient 49 OPNAMEDATUM: 01/04/2020 13:41
	4 ICU John Doe OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	12 ICU
	5 ICU Lenny Malmsteen OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	13 ICU Jean Osburne OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05
	6 ICU Bruce Satriani OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	14 ICU Mary Black OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05
	7 ICU Patti Zappa OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05	15 ICU
	8 ICU Frank White OPNAMEDATUM: 22/01/2020 09:15	16 ICU
IN BED	IN OVERPLAATSING	
PATIENT EXPLORER + NIEUW/O... WIJZIGEN		
GEEN SLUITEN		

Fig 2

De genummerde toetsen zijn de bedden (Fig 3).

4	John Doe
ICU	OPNAMEDATUM: 08/11/2016 17:05

Fig 3

De volgende informatie wordt weergegeven voor iedere "bedtoets" (van links naar rechts):

- Het bednummer en de naam van de afdeling.
- De naam van de patiënt die in het bed ligt.
- Datum en tijd van opname (onder de naam van de patiënt).

Om een patiënt te selecteren en de gegevens ervan weer te geven

- Klik op de bijbehorende "Bedtoets".

Nu is de patiënt geselecteerd. De naam verschijnt op toets **PATIËNT** op Control Bar (Fig 4).

ROSE, PATIENT 4	♀	Age 30 years Code 20000004	Day 28
--------------------	---	-------------------------------	--------

Fig 4

1.2.1 Historiseren van patiëntgegevens

Afhankelijk van de configuratie kunt u om schijfruimte te besparen patiëntgegevens archiveren na een door u in te stellen aantal dagen. Het kost tijd om de gegevens van "gearchiveerde" patiënten op te vragen. Daarom wordt bij het selecteren van een "gearchiveerde" patiënt meegedeeld dat de patiëntgegevens uit het archief moeten worden opgehaald en dat dit enkele minuten kan duren.

- Klik op **Yes** (Ja) in het venster om verder te gaan.

Het is nog steeds mogelijk om Digistat te gebruiken voor andere patiënten terwijl op de achtergrond de gegevens worden opgehaald,

Zodra de procedure is voltooid, verschijnt er een dialoogvenster met de mededeling dat het nu mogelijk is de patiënt te selecteren.



Hoeveel tijd het herstellen van patiëntgegevens in beslag neemt valt niet te voorspellen, dit is afhankelijk van de omvang van de patiëntgegevens en de technische behoeften.

1.3 Patiënten zoeken

Met de toetsen in de linkerbovenhoek (weergegeven in Fig 5 **A**) kan ofwel de lijst met opgenomen patiënten, ofwel de zoekfunctie van de patiënten worden geselecteerd.

Als toets **OPGENOMEN PATIËNTEN** is geselecteerd, zijn alle functies die in de vorige paragraaf worden beschreven geactiveerd.

Als toets **PATIËNTEN ZOEKEN** is geselecteerd, zijn de functies geactiveerd die in deze en de volgende paragrafen worden beschreven (patiënten zoekfunctie). In dat geval wordt het scherm weergegeven dat wordt getoond in Fig 5.

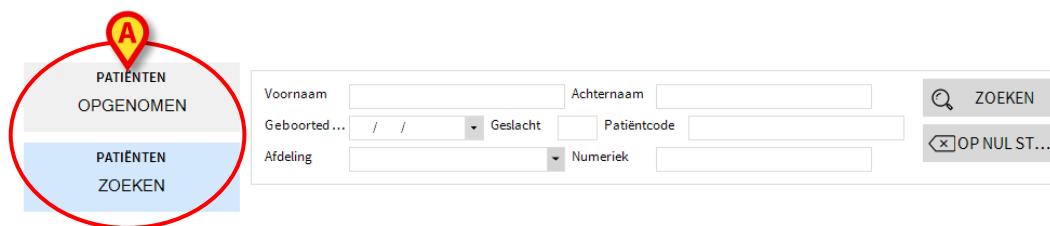



Fig 5

Er zijn twee manieren waarop de patiënt kan worden gezocht. Ze worden geselecteerd met de toetsen die zich in de werkbalk bevinden (Fig 5 **B**):

LOKAAL ZOEKEN, waarmee tussen de patiënten kan worden gezocht die zich in het systeem bevinden.

OP AFSTAND ZOEKEN, waarmee tussen de patiënten kan worden gezocht, waarvan de gegevens zich in het ziekenhuisregister bevinden.

AFSTEMMING en **EXTERNE AFSTEMMING** (Fig 5 **C**) - Deze procedure maakt het mogelijk om de gegevens van de onbekende/tijdelijke patiënten die zijn aangemaakt in de mobiele Identity-applicatie af te stemmen met de werkelijke patiëntgegevens die zijn ingevoegd in de patiëntarchieven van het ziekenhuis. AFSTEMMING zoekt in de Digistat-database. EXTERNE AFSTEMMING zoekt in de ADT van het ziekenhuis.

Met de toets **ANONIEME** (Fig 5 **D**) kan een anonieme patiënt (waarvan de gegevens onbekend zijn) in één van de bedden van het domein worden opgenomen.



Het OP AFSTAND ZOEKEN en EXTERNE AFSTEMMING zijn alleen beschikbaar als de passende koppelingen tussen het Digistat systeem en het ziekenhuisregister zijn verricht.

1.3.1 Lokaal zoeken

Met de zoekvelden bovenaan is het mogelijk om de relevante patiëntinformatie te specificeren.

Voornaam Achternaam **B** ZOEKEN

A / / Geslacht Patiëntcode

Afdeling

C

Voornaam	Achternaam	Geslacht	Geboortedatum	Patiëntcode	Opnamedatum	Opnamecode
White	Frank	I	12/01/1966	45634	22/01/2020	
White	Jack	M	01/01/1951	35246	08/11/2016	A0111

OP NUL ST...

Fig 6

Om een patiënt te zoeken

- Voer de gegevens van de patiënt in die u zoekt (Fig 6 **A**).
- Klik op toets **ZOEKEN** (Fig 6 **B**).

In het midden van het scherm worden in de vorm van een tabel alle patiënten weergegeven, waarvan de gegevens overeenkomen met de gespecificeerde (Fig 6 **C**).

Wanneer het veld **AFDELING** is geselecteerd en op die manier een bestaande "Afdeling" is aangegeven, wordt tussen de patiënten gezocht die zich al in een bed van de gespecificeerde afdeling bevinden.

- Dubbelklik op de regel die bij een patiënt hoort om die patiënt te selecteren.
- Met toets "**OPSCHONEN**" kunnen alle zoekfilters worden opgeschoond.

1.3.2 Op afstand zoeken

Als toets **ZOEKEN OP AFSTAND** is geselecteerd, wordt tussen alle patiënten gezocht die zich in het ziekenhuisregister bevinden.

- Klik op **EXTERN ZOEKEN**.

Het venster "EXTERN ZOEKEN" wordt weergegeven (Fig 7).

PATIËNTEN OPGENOMEN

PATIËNTEN ZOEKEN

Voornaam Achternaam

Geboortedatum / / Geslacht Patiëntcode

ZOEKEN

OP NUL ST...

LOKAAL ZOEKEN

ZOEKEN OP AFSTAND

ANONIEME

AFSTEMMING

EXTERNE AFSTEMMING

Fig 7

- Voer de gegevens van de patiënt die u zoekt in de zoekvelden in.
- Klik op toets **ZOEKEN**.

Nu wordt de lijst met resultaten weergegeven.

- Dubbelklik op de regel die bij een patiënt hoort om die patiënt te selecteren.

Het venster "NIEUW/PATIËNT OPNEMEN" wordt weergegeven. (Fig 8).

NIEUW/OPNEMEN PATIËNT

Achternaam Voornaam Initialen

Patient **Test**

Patiëntcode Geboortedatum Geslacht

56342

Opmerkingen

Opnamedatum - tijd 20/01/2020 10:42:53 Ontslagdatum - tijd

Opnamecode Lengte [cm] Gewicht [kg]

Afdeling ICU Bed 11

OK ANNULEREN

Fig 8

- Verifiëren/bewerken van patiëntgegevens (Fig 8 **A**) en klik dan op **OK**.

Een patiënt wordt op deze wijze opgenomen. Zijn/haar naam verschijnt bij de gekozen bedknop in het venster "OPGENOMEN PATIËNTEN" (Fig 2).

1.4 Patiënten van ADT (Admission/Discharge/Transfer)



Met de knoppen op de opdrachtbalk activeert u specifieke zoekopdrachten in de beschikbare databanken, waarvan hier twee voorbeelden worden beschreven: "Patiënten uit ADT" (Opname, Ontslag en Overdracht) en "Patiënten in overdracht".

Indien een speciale softwarecomponent server-side is geïnstalleerd, kan het **Smart Central** systeem de patiëntgegevens van de ADT van het Gezondheidszorginstelling verzamelen.

Als het systeem op deze wijze geconfigureerd is en informatie over het bed wordt verstrekt, kan de patiënt rechtstreeks door de ADT in het bed worden opgenomen. In dit geval krijgt het personeel van de afdeling automatisch de nieuwe patiënt op de lijst met opgenomen patiënten te zien.

Anders worden de patiënten die door de ADT aan de afdeling worden toegewezen op een speciaal scherm weergegeven. Om naar dit scherm te gaan:

- Klik op de toets ADT op de werkbalk (indien van toepassing).

De door de ADT toegewezen patiënten zijn weergegeven in het centrale gebied.

Voor iedere patiënt wordt de volgende informatie weergegeven:

- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Patiëntcode

Om een patiënt te selecteren:

- dubbelklik op de rij die bij de patiënt hoort.

Het venster **Nieuwe/Opname patiënt** met de beschikbare patiëntgegevens wordt nu getoond (Fig 9).

NIEUW/OPNEMEN PATIËNT

Achternaam: **Patient** Voornaam: **Test** Initialen:

Patiëntcode: **56342** Geboortedatum: Geslacht:

Opmerkingen:

Opnamedatum - tijd: **20/01/2020 10:42:53** Ontslagdatum - tijd:

Opnamecode: Lengte [cm]: Gewicht [kg]:

Afdeling: **ICU** Bed: **11**

✓ OK ✗ ANNULEREN

Fig 9

- Verifiëren/bewerken van patiëntgegevens (Fig 9 **A**) en klik dan op **OK**.

Een patiënt wordt op deze wijze opgenomen. Zijn/haar naam verschijnt bij de gekozen bedknop in het venster "OPGENOMEN PATIËNTEN" (Fig 2).

1.5 Patiënten "In overplaatsing"

Met twee toetsen in de werkbalk, die worden getoond in Fig 10 **A**, kunnen ofwel de patiënten "In bed" ofwel de patiënten "In overplaatsing" worden weergegeven.

Als toets "**In bed**" is geselecteerd, wordt het scherm weergegeven zoals getoond in Fig 2. Als toets "**In overplaatsing**" is gekozen, wordt het scherm weergegeven dat wordt getoond in Fig 10.



De patiënten "In overplaatsing" kunnen alleen worden weergegeven als de geschikte verbindingen tussen Digistat en de ziekenhuissystemen zijn gemaakt.

	Voornaam	Achternaam	Geslacht	Geboortedatum	Patiëntcode
PATIËNTEN OPGENOMEN	Doe	John	M	23/01/1971	43563
PATIËNTEN ZOEKEN	Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

IN BED IN OVERPLAATSING

Fig 10

Dit scherm laat alle patiënten zien die zich "In overplaatsing" bevinden. De patiënten "In overplaatsing" zijn patiënten die al door de operationele eenheden voorzien van werkstation zijn overgenomen (d.w.z. de patiënten waarvan de opname geopend is voor de specifieke afdelingen) maar aan wie nog geen bed is toegewezen.

Iedere regel stelt een patiënt voor en vermeldt de voornaam, achternaam, het geslacht, de geboortedatum en de patiëntcode.

- Dubbelklik op de regel die bij de gewenste patiënt hoort om hem/haar een bed toe te wijzen.

Nu wordt het volgende venster geopend.

NIEUW/OPNEMEN PATIËNT

Achternaam	Voornaam	Initialen
Patient	Test	
Patiëntcode	Geboortedatum	Geslacht
56342		
Opmerkingen		
Opnamedatum - tijd		
20/01/2020 10:42:53		
Ontslagdatum - tijd		
Opnamecode	Lengte [cm]	Gewicht [kg]
Afdeling	Bed	
ICU	11	

✓ OK ✗ ANNULEREN

Fig 11

- Geef het bed en de afdeling aan in de velden die worden aangegeven in Fig 11.
- Klik op **OK**.

Op die manier wordt een bed aan de patiënt toegewezen. De naam verschijnt op de bijbehorende bedtoets (gezien in Fig 3).

1.6 Opname anonieme patiënt

Met het "Anonieme Patiënt" scherm is het mogelijk een patiënt op te nemen van wie de gegevens nog niet beschikbaar zijn.

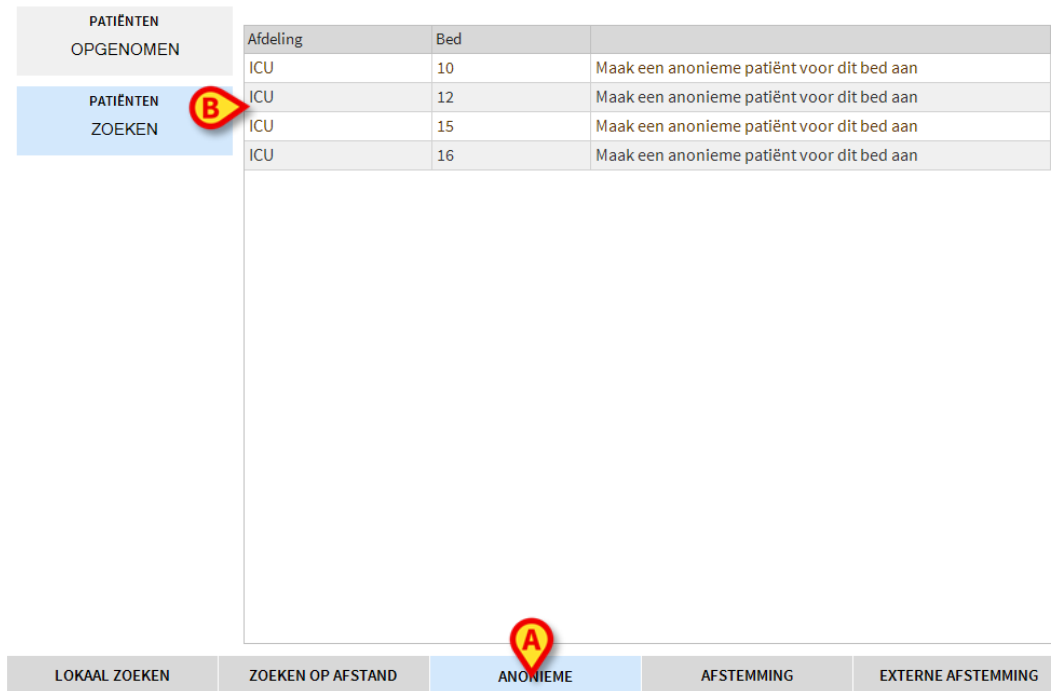


Fig 12

Om toegang te krijgen tot deze functie,

- klikt u op de knop **Anoniem** in de taakbalk (Fig 12 **A**).

Een venster met alle lege bedden op de afdeling wordt weergegeven (Fig 12 **B**).

Om een anonieme patiënt een bed toe te wijzen:

- dubbelklik op de rij die bij het gewenste bed hoort.

Bevestiging van de gebruiker is vereist.

- Klik op **Ja** om de patiënt op te nemen.

Er wordt automatisch een tijdelijke naam toegewezen (bijvoorbeeld: patiënt 10).

Patiëntgegevens kunnen later worden bijgewerkt met behulp van de functie "Patiënt bewerken" (zie paragraaf 1.8.3).

1.7 Afstemming en Externe afstemming



Deze procedure is alleen relevant als de Identity Mobile applicatie in gebruik is.

Deze procedure maakt het mogelijk om de gegevens van de onbekende/tijdelijke patiënten die zijn aangemaakt in de mobiele Identity-applicatie af te stemmen met de werkelijke patiëntgegevens die zijn ingevoegd in de patiëntarchieven van het ziekenhuis **AFSTEMMING** zoekt in de database. **EXTERNE AFSTEMMING** zoekt in de ADT van het ziekenhuis.

- Selecteer de onbekende/tijdelijke patiënt die al in bed ligt.
- Klik op (Externe) **Afstemming**

Een zoekscherm wordt geopend.

- Zoek naar de patiënt wiens gegevens de werkelijke zijn voor de onbekende/tijdelijke patiënt. Gebruik de zoekfunctionaliteit zoals beschreven in de vorige paragraaf.
- Dubbelklik op de rij met de juiste informatie voor de tijdelijke patiënt.

Er verschijnt een melding met de vraag of de gekozen patiëntgegevens de tijdelijke patiëntgegevens moeten overschrijven.

- Klik op **Ja** om de gegevens te overschrijven.

De patiëntgegevens zijn nu afgestemd. De onbekende/tijdelijke patiëntgegevens zijn vervangen door de juiste gegevens en de bedknop is bijgewerkt om de nieuwe informatie weer te geven.

1.8De werkbalk

De werkbalk (Fig 13) heeft toetsen waar verschillende handelingen mee kunnen worden verricht.



Fig 13

- 1) **Nieuwe/Opname patiënt** (Fig 13 **A**) – Met deze toets kan een nieuwe patiënt in de database worden ingevoerd en worden toegewezen aan een bed (zie paragraaf 1.8.2 voor de gedetailleerde procedure).
- 2) **Patiënt Wijzigen** (Fig 13 **B**) – Met deze toets kunnen de gegevens van de patiënt worden bewerkt (zie paragraaf 1.8.3).
- 3) **Afdrukken** (Fig 13 **C**) - Wanneer deze toets is ingeschakeld, kan hiermee het momenteel op het scherm weergegeven rooster worden afgedrukt.
- 4) **Exporteren** (Fig 13 **D**) - Wanneer deze toets is ingeschakeld, kunnen hiermee de huidige gegevens naar een XLS-bestand worden geëxporteerd.
- 5) **Selecteren** (Fig 20 **E**) - Met deze toets kan een patiënt worden geselecteerd.
- 6) **Geen** (Fig 13 **F**) – Met deze toets kan een patiënt worden gedeselecteerd wanneer hij/zij is geselecteerd. Nadat op de toets **Geen** wordt geklikt, verdwijnt de naam van de eerder geselecteerde patiënt van toets **Patiënt** (zie paragraaf 1.8.9).
- 7) **Sluiten** (Fig 13 **G**) – Deze toets sluit de zoekpagina (zie paragraaf 1.8.10).

1.8.1 Patiënten selecteren

In Digistat Suite, wordt de naam van de gekozen patiënt onder de knop **PATIËNT** in de besturingsbalk weergegeven (Fig. 14).

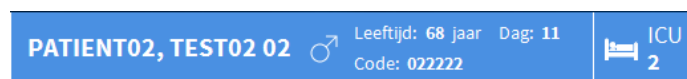


Fig. 14

Een patiënt kan, afhankelijk van de gebruikte workflows, op verschillende modulespecifieke manieren worden geselecteerd. De selectie in de module "Patiënt zoeken" gebeurt als volgt:

- 1) Klik op de bedknop van een patiënt (Fig 3).
- 2) Dubbelklik op de rij met de patiëntgegevens (bijv. na een zoekopdracht voor patiënten zoals weergegeven in Fig 6 **C**).
- 3) Klik op de rij met de patiëntgegevens om deze te selecteren en klik vervolgens op **Selecteren** in de opdrachtbalk (Fig 13 **E**).

1.8.2 Nieuwe/Opname patiënt

Met de toets **Nieuwe/Opname patiënt** (Fig 15) kan een nieuwe patiënt in de database worden ingevoerd en aan een bed worden toegewezen.



Fig 15

Om een nieuwe patiënt in te voeren:

- Klik op de toets **Nieuwe/Opname patiënt**.

Het volgende venster wordt geopend (Fig 16).

A form titled 'NIEUW/OPNEMEN PATIËNT' with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields: 'Achternaam', 'Voornaam', 'Initialen', 'Patiëntcode', 'Geboortedatum', 'Geslacht', 'Opmerkingen' (a text area), 'Opnamedatum - tijd' (set to 20/01/2020 10:46:49), 'Ontslagdatum - tijd', 'Opnamecode', 'Lengte [cm]', 'Gewicht [kg]', 'Afdeling' (set to ICU), and 'Bed'. There are icons for a person, a house with a plus, and a bed with a red 'A' warning sign. At the bottom are 'OK' and 'ANNULEREN' buttons.

Fig 16

- Voer de gegevens van de nieuwe patiënt in. De in roze gemarkeerde velden zijn verplicht.
- Klik op **Ok** om te bevestigen.

De nieuwe patiënt is nu in de database geregistreerd en opgenomen in het bed/op de afdeling, aangegeven in de velden "Afdeling" en "Bed" (Fig 16).

1.8.3 Patiënt bewerken

Met de toets **Wijzigen** (Fig 17) kunnen de gegevens van een geselecteerde patiënt worden bewerkt.

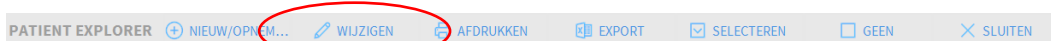


Fig 17

Deze toets kunt u alleen gebruiken wanneer een patiënt is geselecteerd. De naam moet op de toets **Patiënt** van de Control Bar verschijnen (Fig 18).

De uitgevoerde bewerkingen hebben altijd betrekking op de patiënt wiens naam op de toets **Patiënt** verschijnt (Fig 18).

ROSE, PATIENT 4	♀	Age 30 years	Day 28
		Code 20000004	

Fig 18

Om de gegevens van de patiënt te bewerken:

- Selecteer de patiënt van wie u de gegevens wilt bewerken
- Klik op de toets **Patiënt Wijzigen**.

Er verschijnt een menu met verschillende opties (Fig 19).



Fig 19

Met iedere optie kunt u een verschillende handeling verrichten. De functies van de verschillende toetsen van het menu worden in de volgende paragrafen beschreven.

1.8.4 Verplaatsen

Met de toets **Verplaatsen** (Fig 19 **A**) kan de verplaatsing van een geselecteerde patiënt naar een ander bed of een andere afdeling worden geregistreerd.

Om een patiënt te verplaatsen:

- Selecteer de patiënt.

De naam van de geselecteerde patiënt is weergegeven op de toets **Patiënt**.

- Klik op de toets **Patiënt Wijzigen**.

Er verschijnt een uitklapmenu met verschillende opties (Fig 19).

- Klik op de toets **Verplaatsen** (Fig 19 **A**).

Het volgende venster wordt geopend (Fig 20).



Fig 20

- Gebruik de pijltjestoetsen (Fig 20 **A**) om het bed waarnaar de patiënt wordt verplaatst, te selecteren.

De bovenste toets opent een lijst van alle beschikbare afdelingen.

De onderste toets opent een lijst van alle beschikbare bedden op de geselecteerde afdeling.

Als de naam van een patiënt verschijnt naast het bednummer, is het bed al bezet.

- Klik op **Ok** om te bevestigen.

Als een bezet bed wordt geselecteerd en er op de toets **Ok** wordt gedrukt, verschijnt er een pop-upbericht dat vraagt of we de patiënten van de twee bedden willen omwisselen.



Fig 21

1.8.5 Opnemen

Met toets **OPNEMEN** kan de opname van een patiënt op een geselecteerde afdeling worden geregistreerd.

Om een patiënt op te nemen

- selecteer de patiënt. De naam van de geselecteerde patiënt verschijnt nu op toets **PATIËNT**.
- Klik op toets **PATIËNT WIJZIGEN** in de werkbalk. Er wordt nu een menu geopend met verschillende opties (Fig 22).



Fig 22

- Klik op toets **OPNEMEN** (Fig 22 **A**).

Een venster met alleen de beschikbare bedden, zoals afgebeeld in Fig 20, wordt geopend.

- Gebruik het keuzemenu (Fig 20 **A**) voor het selecteren van locatie/bed.
- Klik op **OK** om te bevestigen.

1.8.6 Ontslaan

Met de toets **Ontslaan** kan het ontslag van een patiënt worden geregistreerd.

Om een patiënt te verplaatsen:

- Selecteer de patiënt.

De naam van de geselecteerde patiënt wordt weergegeven op de toets **Patiënt**.

- Klik op de toets **Patiënt Wijzigen**.

Er verschijnt een menu met meerdere opties (Fig 23).



Fig 23

- Klik op de toets **Ontslaan** (Fig 23 **A**).

Er verschijnt een pop-upbericht dat om bevestiging vraagt (Fig 24).

WEET U ZEKER DAT U DEZE PATIËNT WILT ONTSLAAN?

YES NO ↺

Fig 24

- Klik op **Ja** om door te gaan met het ontslag van de patiënt.

Deze handeling opent het venster met de patiëntgegevens (Fig 25 – anders dan in het venster afgebeeld in Fig 16, kunt u hier de ontslagdatum en -tijd wijzigen).

WIJZIGEN PATIËNT

Achternaam: Patient 4 Voornaam: Rose Initialen:

Patiëntcode: 20000004 Geboortedatum: 03/05/1992 Geslacht: V

Opmerkingen:

Opnamedatum - tijd: 27/12/2017 10:24:32 Ontslagdatum - tijd: 15/01/2018 16:02:24

Opnamecode: 20000004#1 Lengte [cm]: 165 Gewicht [kg]: 55

OK ANNULEREN

Fig 25

- Klik op **Ok** om de ontslagprocedure te voltooien (Fig 25 A)

1.8.7 Wissen

Met de toets **Wissen** kunnen alle patiëntgegevens uit de database worden verwijderd.

Om de gegevens van de patiënt te wissen

- Selecteer de patiënt.

De naam van de geselecteerde patiënt wordt weergegeven op de toets **Patiënt**.

- Klik op de toets **Patiënt Wijzigen**.

Er verschijnt een menu met meerdere opties (Fig 26).



Fig 26

- Klik op de toets **Wissen** (Fig 26 **A**).

Er verschijnt een pop-upbericht dat om bevestiging vraagt (Fig 27).

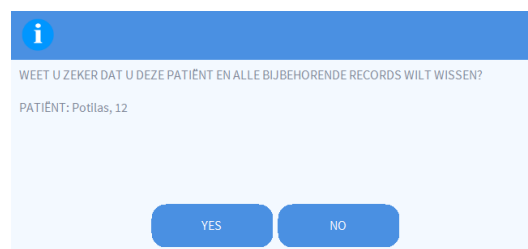


Fig 27

- Klik op **Ja** om de procedure van verwijdering te voltooien.



Het verwijderen van een patiënt uit de database is een onomkeerbare handeling. Na verwijdering van een patiënt, zijn de door middel van de Product verkregen documenten betreffende deze persoon niet langer beschikbaar. Daarom dient u uiterst voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van deze handeling.

1.8.8 Wijzigen

Met de toets **Wijzigen** kunnen de gegevens van een geselecteerde patiënt worden bewerkt.

Om de gegevens van een patiënt te bewerken:

- Selecteer de patiënt.

De naam van de geselecteerde patiënt is weergegeven op de toets **Patiënt**.

- Klik op de toets **Patiënt Wijzigen**.

Er verschijnt een menu met meerdere opties (Fig 28).



Fig 28

- Klik op de toets **Wijzigen** (Fig 28 A).

Er verschijnt een venster met de patiëntgegevens (Fig 29).

 A window titled 'WIJZIGEN PATIËNT' with a close button (X). It contains several input fields:

- Achternaam: Potilas
- Voornaam: 12
- Initialen: (empty)
- Patiëntcode: 12
- Geboortedatum: (empty)
- Geslacht: O
- Opmerkingen: (empty text area)
- Opnamedatum - tijd: 12/01/2018 15:43:58
- Ontslagdatum - tijd: (empty)
- Opnamecode: AN_12
- Lengte [cm]: (empty)
- Gewicht [kg]: (empty)

 At the bottom are buttons: OK (with a checkmark icon) and ANNULEREN (with an X icon). A red 'A' icon is placed over the OK button.

Fig 29

- Bewerk de patiëntgegevens.
- Klik op **Ok** om te bevestigen (Fig 29 A).

1.8.9 Patiënt deselecteren

Met de toets **Geen** (Fig 30) kan de geselecteerde patiënt (wiens naam op de toets PATIËNT is weergegeven) worden gedeselecteerd.

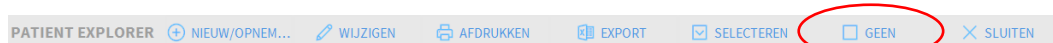


Fig 30

Om een patiënt te deselecteren:

- Klik op de toets **Geen** (Fig 30).

De naam van de patiënt verdwijnt van de toets **Patiënt**.

1.8.10 Sluiten

De toets **Sluiten** (Fig 31) maakt het mogelijk om het weergegeven scherm te sluiten.



Fig 31

Om het zoekscherm van de patiënt te sluiten:

- Klik op de toets **Sluiten** op de pagina (Fig 31 **B**).