



Fluid Balance Web Användarmanual

Version 3.0

2024-11-28

Innehåll

Fluid Balance	4
1. Introduktion	4
2. Modulval	4
3. Val av patient	4
4. Huvudskärm	5
4.1. Ikonbeskrivning.....	6
4.2. Bryttid	6
4.3. Måttenhetsindikation	6
4.4. Tabellöversikt	7
4.5. Hur tabellen läses - rader	7
4.5.1. Datum.....	7
4.5.2. Tid	8
4.5.3. Mål.....	8
4.5.4. Vikt	8
4.5.5. Totala balanser	9
4.5.6. Blodbalans	9
4.5.7. Detaljerade in- och utvärden.....	9
4.5.8. Senast redigerade användare	10
4.6. Hur tabellen läses - kolumner	10
4.7. Inaktivera daglig balans	11
5. Diagram	12
6. Tidsintervallväljare	14
7. Kommandofältet	15
7.1. Datainmatning: "Ny".....	16
7.1.1. Datum/tid-indikator (Figur 26 A)	16
7.1.2. Patientviktsindikation (Figur 26 B)	17
7.1.3. Balanser (Figur 28 C)	17
7.1.4. Anteckningar (Figur 29 A)	18
7.2. Infoga balansvärden	19
7.3. Hur man lägger till en balanspost	20
7.4. Redigera befintlig balans	23
7.5. Ta bort befintlig balans	24
8. "Ackumulerad" vätskebalans	25
9. Totaler	26
10. Visningsläge "Vikt"	27
11. Daglig vy	28

12. Mål	29
13. Historik	30
14. Rapporter	31

Fluid Balance



För information om produktmiljön, försiktighetsåtgärder, varningar och avsedd användning, vänligen se *USR SWE Digistat Care* och/eller *USR SWE Digistat Docs* (beroende på installerade moduler - för *Digistat Suite EU*) eller *USR ENG Digistat Suite NA* (för *Digistat Suite NA*). Kunskapen om och förståelsen av lämpligt dokument är obligatoriskt för en korrekt och säker användning av *Fluid Balance Web*, som beskrivs i detta dokument.

1. Introduktion

Fluid Balance Web gör det möjligt att dokumentera patientens vätskebalans genom att registrera dagligt vätskeintag och utflöde. De administrerade volymerna kan antingen hämtas automatiskt från de konfigurerade infusionssystemen eller matas in manuellt. Systemet beräknar både del- och totala balanser. Posterna "in" och "ut" är konfigurerbara utefter avdelningens behov.

2. Modulval

För att välja Fluid Balance Web-modulen

- Klicka på motsvarande ikon -  - på sidofältet.

Om ingen patient väljs är modulens funktioner inte tillgängliga. Ett specifikt meddelande ges i det här fallet: "Fluid Balance Web kräver att patient är vald. När en patient valts visar skärmen den valda patientens data.

3. Val av patient

För att välja en patient,

- Klicka på **Välj patient** från kontrollfältet (Figur 1 A).



Figur 1

Webbmodulen Patient Explorer öppnas. Se användarhandboken för Patient Explorer Web (*USR SWE Patient Explorer Web*) för instruktioner.



Andra moduler kan konfigureras för patientvalet i stället för Patient Explorer Web, beroende på konfigurationen av Digistat Web Suite. Om så är fallet, se den specifika dokumentationen för instruktioner.

När en patient väljs, visas data på skärmen relaterat till patienten (se Figur 2 till exempel).

4. Huvudskärm

Fluid Balance huvudskärm är en tabell (Figur 2 **A** - se avsnitt 5 för beskrivningen) som visar alla in- och utvärden för vätskorna till och från patienten, vilket samtidigt ger total och partiell fluid balances.

En menyrad visas i Figur 2 **B**, gör det möjligt att utlösa olika procedurer, som beskrivs i avsnittet 7.

E Table Chart Totals **F** NORMAL ACCRUING BY WEIGHT DAILY VIEW

C Target Last Edit Fluids Bloods Incoming Outgoing From Pump Weight History **D** Balance Time: 03:00 PM All data without unit are expressed in mL

	Date	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/29/2024
	Time	09:27 AM	Daily	12:15 PM	Daily	11:38 PM	12:36 PM	Daily
Target								
Weight (g)		5892		5737		5507	5686	
TOTAL BALANCE		-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	26.46	-136.12	-109.66
FLUID TOTAL		-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	-173.54	-136.12	-309.66
FLUID IN		100	100		0	0	100	100
FLUID OUT		-216.25	-216.25		-188.37	-173.54	-236.12	-409.66
BLOOD TOTAL		0	0	0	0	200	0	200
BLOOD IN		0	0	0	0	200	0	200
BLOOD OUT		0	0	0	0	0	0	0
Water		100	100				100	100
EXTRA IN								
GenericItem								
NONPERMANENT_SCRIPT_NOAUTORUN								
Fluid IN								
Nicola_test_IN								
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN								

KOMMANDOFÄLT **B**

FLUID BALANCE WEB NEW EDIT TARGET HISTORY DELETE PRINT 10/27/2024-10/30/2024 ascom

G

Figur 2

En ikonbeskrivning visar möjliga ikoner och färgkoden som används för att definiera balansposterna (Figur 2 **C**, sektion 4.1).

Balansen sluttid anges i Figur 2 **D**. Se avsnitt 4.2 för förklaring.

För de insamlade värdena finns tre olika vyer tillgängliga för huvudsidan (Figur 2 **E**):

- Tabell (Figur 2, beskrivs i avsnitt 4).
- Diagram (Figur 18, beskrivs i avsnitt 5).
- Totaler (Figur 51, beskrivs i avsnitt 9).

Välj visningsläge som anges i Figur 2 **E** för att ändra vy.

Fyra olika balansvisningslägen är möjliga (Figur 2 **F**):


- Standard (Figur 2, beskrivs i avsnitt 4).
- Ackumulerade (Figur 46 och Figur 47, beskrivs i avsnitt 8).
- Vikt (beskrivs i avsnitt 10).
- Daglig vy (beskrivs i avsnitt 11).

Använd visningsläge som anges i Figur 2 **F** för att ändra vy.

Tidsintervall indikerad i Figur 2 **G** gör det möjligt att välja datumintervall som visas på skärmen. Se avsnitt 6 för beskrivningen.

4.1. Ikonbeskrivning

Ikonbeskrivningen gör det möjligt att förstå innebörden av ikonerna och färgerna som kännetecknar de olika balansposterna (Figur 2 C, Figur 3).

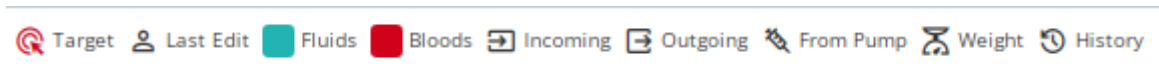

Figur 3

Mål - indikerar det dagliga målet. Se avsnitt 12.

Senaste redigering - indikerar akronymen för användaren som senast redigerade en post i vätskebalansen.

Vätskor - indikerar de föremål som tillhör klassen "Vätskor".

Blod - indikerar föremål som tillhör klassen "Blod".

In - indikerar inmatningsposterna.

Ut - indikerar utgångsposterna.

Från pump - indikerar de värden som automatiskt erhålls från infusionspumparna.

Vikt – anger vikten för den valda patienten.

Historik – indikerar att vätskebalansposten har ändrats och har en historik över värden som angetts tidigare.

4.2. Bryttid

Vätskedygnets bryttid visas på huvudsidan (Figur 2 D, Figur 4).

mp Weight History

Balance Time: 03:00 PM

All data without unit are expressed in mL

Figur 4

Vätskedygnets bryttid är den tid på dagen då den dagliga balansen är sammanställd (vanligtvis en gång per 24 timmar). Se avsnitt 4.5.1.

4.3. Måttenhetsindikation

En indikation anger att all data som inte har en explicit måttenhet uttrycks i mL (Figur 5).

All data without unit are expressed in mL

Figur 5

4.4. Tabellöversikt

Tabellen (Figur 6) visar alla in- och utvärden för vätskorna till och från patienten, och ger samtidigt total och uppdelad vätskebalans.

	Date	15/7/2023										16/7/2023	15/7/2023	16/7/2023			
	Time	:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	Daily	11:00	12:00	13:00
TARGET																	
Weight (g)																	
TOTAL BALANCE		39.15	239.15	239.15	238.95	239.35	238.95	239.09	239.41	239.61	240.61	239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	239.61
FLUID TOTAL		39.15	239.15	239.15	238.95	239.35	238.95	239.09	239.41	239.61	240.61	239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	239.61
FLUID IN		39.15	239.15	239.15	238.95	239.35	238.95	239.09	239.41	239.61	240.61	239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	239.61
FLUID OUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOOD TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOOD IN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOOD OUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amiodaron		23.92	23.92	23.92	23.90	23.94	23.90	23.90	23.90	23.92	24.02	23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	23.90
Eptifibatide		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frusemide		23.92	23.92	23.92	23.90	23.94	23.90	23.90	23.90	23.92	24.02	23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	23.90
Midazolam		11.96	11.96	11.96	11.95	11.97	11.95	11.95	11.95	11.96	12.01	11.96	11.96	287.08	11.96	11.95	11.95
Noradrenaline		23.92	23.92	23.92	23.90	23.94	23.90	23.90	23.90	23.92	24.02	23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	23.90
Vecuronium		35.88	35.88	35.88	35.85	35.91	35.85	35.96	36.08	36.11	36.26	36.11	36.11	862.49	36.11	36.08	36.08
INFUSION		19.55	119.55	119.55	119.45	119.65	119.45	119.48	119.68	119.78	120.28	119.78	119.78	2870.82	119.78	119.68	119.68
Other Generic																	
Other Generic (Label1)																	
Other Generic (Label2)																	
GenericItem																	
GenericItem (Item gasdg kjasd h ashd 01)																	
GenericItem (Item2 dfdsf dsf dsfds)																	

Figur 6

4.5. Hur tabellen läses - rader

Namnen på vätskebalansposterna vars värden anges i tabellen finns till vänster (Figur 6 A). Den första cellen i varje rad visar antingen en ikon som anger vilken typ av information som finns i raden eller visar färgen på den klass som balansposten tillhör (se Förklaringen – avsnittet 4.1 - för mer information).

4.5.1. Datum

Den första raden anger det datum som värdena i tabellen avser.

	Date	15/7/2023										16/7/2023		15/7/2023	16/7/2023	
	Time	:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	Daily	11:00	12:00

Figur 7

Fluid Balance Web betraktar en 24-timmarsperiod (konfigurerbar) som en "klinisk dag". Om den "kliniska dagen" börjar, som i exemplet som visas här, klockan 11:00 (konfigurerbart), så tilldelas alla värden som registrerats under 24 timmar från 11:00 till 11:00 till samma dag total saldoberäkning. Dvs: med denna konfiguration börjar saldot för en viss dag kl. 11:00 och slutar kl. 11:00 följande dag. Därför, till exempel, ett värde som infogats kl. 10:48 deltar i saldot för föregående dag, medan ett värde som infogats kl. 11:07 är en del av saldot för följande dag. Värdena anges under det faktiska datumet/tiden vid vilken de registreras eller vid det datum/tid som användaren tilldelat (se avsnittet 7.1 för proceduren).

16/7/2023		15/7/2023	16/7/2023		
09:00	10:00	Daily	11:00	12:00	13
239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	2
239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	2
239.61	239.61	5742.87	239.61	239.41	2
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	
0	0	0	0	0	
23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	
11.96	11.96	287.08	11.96	11.95	
23.92	23.92	574.16	23.92	23.90	
36.11	36.11	862.49	36.11	36.08	
119.78	119.78	2870.82	119.78	119.68	1

Figur 8

Se Figur 8 för ett annat exempel. Värdena som anges i figur **A** förvärvades kl 10:00 den 16/7 2023. Värdena som anges i Figur 8 **B** förvärvades kl 11:00 den 16/7 2023. Kolumnen som anges i Figur 8 **C** visar det dagliga totala saldot den 15/7/2023 (beräknad kl. 11:00 den 16/7). Därför är de värden som anges i Figur 8 **A** och Figur 8 **B** tillhör de dagliga totala saldoberäkningarna för två olika dagar (Figur 8 **A** är en del av 15/7; Figur 8 **B** är en del av 16/7).

4.5.2. Tid

Den andra raden visar tiden för varje vätskebalansinmatning.

Date	15/7/2023												16/7/2023	15/7/2023	16/7/2023	
Time	:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	Daily	11:00	12:00	13

Figur 9

Tiden visas automatiskt vid varje inmatning. Se avsnitt 7.2 för fluid balance datainmatningsprocedur, inklusive förfarandena vid tidsspecifikation. Om en liten gul triangulär markering visas inuti "Tid"-cellen, betyder det att det finns användaranteckningar som hänvisar till balansen. "Tid"-cellen i kolumnen som visar de dagliga totala balanserna är märkt som "Dagligen".

4.5.3. Mål

Den tredje raden visar det dagliga målet, dvs den målbilans som anges för patienten.

Date	15/7/2023			
Time	:00	00:00	01:00	02:00
TARGET				

Figur 10 - Mål

Det dagliga målet kan anges både för innevarande- och för följande dag. Se stycket 12 för den dagliga målinställningsproceduren.

4.5.4. Vikt

Den fjärde raden visar patientens vikt, om den ställts in vid datainmatning.

	Date
	Time
	TARGET
	Weight (g)

Figur 11 - Vikt

Se avsnitt 7.1 för patientens viktspecifikationsprocedur.

4.5.5. Totala balanser

Tre rader, kännetecknade av olika nyanser av blått, visar de totala balanserna (Figur 12).

	Date
	Time
	Target
	Weight (g)
	TOTAL BALANCE
	FLUID TOTAL
	FLUID IN
	FLUID OUT
	BLOOD TOTAL
	BLOOD IN
	BLOOD OUT

Figur 12 - Totala saldon

Dessa är: den totala vätskebalansen, Vätska total, totalt "Vätska In" och det totala "Vätska ut".

4.5.6. Blodbalans

Tre rader, kännetecknade av olika nyanser av rött, visar blodbalansen (Figur 13).

	Date
	Time
	Target
	Weight (g)
	TOTAL BALANCE
	FLUID TOTAL
	FLUID IN
	FLUID OUT
	BLOOD TOTAL
	BLOOD IN
	BLOOD OUT

Figur 13 - Blodbalans

Dessa är: den totala blodbalansen, de totala Blod in och de totala Blod ut.

4.5.7. Detaljerade in- och utvärden

Raderna markerade med  ikonen visar vätska in (Figur 14 **A**).

Raderna markerade med  ikonen visar vätska ut (Figur 14 **B**).

	Date	
	Time	
Fluid IN		→
DIURESIS		→
Exemplar		→
PERSPIRATION		→
YCT_TEST_OUT		→
DRAINAGES		→
EXTRA OUT		→
Fluid OUT		→
FFP		→
PLTs		→
Blood IN		→
Blood OUT 0		→
Blood OUT 0 (Blood OUT)		→

Figur 14



Om infusionsmodulen är installerad inhämtas de värden som kommer från infusionspumparna automatiskt och indikeras med  ikon.

4.5.8. Senast redigerade användare

Den sista raden visar förkortningen för den senaste användare som redigerade vätskebalansen (den specifika kolumnen -Figur 15).

 Last Edit User	SQA	ADM
--	-----	-----

Figur 15

4.6. Hur tabellen läses - kolumner

En kolumn läggs till i tabellen vid varje vätskebalanspost. Det vill säga: varje gång proceduren som utlöses av knappen **Ny** slutförs, se avsnittet 7.2.

Den första cellen i varje kolumn visar som standardtiden då kolumnen lades till. Tiden som visas som standard är därför datainmatningstiden (Figur 16 **A**). Vid inmatning av data är det möjligt att redigera tidpunkten för en vätskebalans (om det till exempel inte gick att registrera ett visst värde vid den faktiska administrationstiden - se avsnitt 4.5.2 för proceduren). I dessa fall visar den första cellen den tid som anges av användaren. Kolumner visas i kronologisk ordning enligt den tid som visas i den första cellen.

Date	8/29/2023							8/28/2023	8/30/2023	8/30/2023
Time	03:30 AM	04:30 AM	05:30 AM	06:30 AM	07:30 AM	08:30 AM	09:30 AM	Daily	11:43 AM	Daily
TARGET										
Weight (g)	87203	97059	74860	82641	76018	85007	70161		23	
TOTAL BALANCE	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-75900	454.68	454.68
FLUID TOTAL	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-75900	454.68	454.68
FLUID IN	0	0	0	0	0	0	0	100	257	257
FLUID OUT	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-3040	-76000	197.68	197.68
BLOOD TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOOD IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOOD OUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRA IN									23	23
EXTRA IN (EXTRA IN 2)										
EXTRA IN (EXTRA IN 3)										
GenericItem									234	234
GenericItem (Item)										
GenericItem (Item2)										
GenericItem (Item3)										

Figur 16 - Tabell

De totala vätskevärdena som hänvisar till en klinisk dag visas i en specifik kolumn, kännetecknad av den grå bakgrundsfärgen, och indikeras som "Dagligen" i "tid"-cellen (Figur 16 B). Denna kolumn läggs till automatiskt när den kliniska dagen börjar och uppdateras automatiskt under dagen med de nya värdespecifikationerna. Vid stängningstidpunkten för det dagliga saldot är kolumnen "frost" och en ny kolumn skapas för den nya dagen. Den dagliga stängningstiden för saldot beror på en konfigurationsparameter. I den konfiguration som förklaras här slutar den kliniska dagen kl. 11:00. Den sista kolumnen i tabellen (Figur 16 C) visar de totala värdena för den aktuella dagen uppdaterade till den senaste datainmatningen.

Den första cellen i kolumnen "Dagligen" visar datumet som de totala saldon avser (Figur 17 A); den andra cellen är markerad som "Dagligen" (Figur 17 B); den tredje kolumnen visar, om det anges, det dagliga målet (Figur 17 C).

A	8/3/2023
B	Daily
C	4001
	995.22
	559.20
	581.20
	-22

Figur 17

4.7. Inaktivera daglig balans


Ett konfigurationsalternativ gör det möjligt att inaktivera den dagliga vätskebalansen (dvs den grå kolumnen som anges i Figur 16 B) och visa i stället en enda totalsaldokolumn till höger. När detta läge är aktiverat är **Mål**-knappen inaktiverad (ref. avsnitt 12).

Detta visningsläge aktiveras/inaktiveras av system option *DisableDailyBalance*. Mer information finns hos systemadministratörerna.

5. Diagram

De dagliga balanserna visas också i diagram (Figur 18).


- Klicka på fliken **Diagram** (Figur 18 **A**) för att visa vätskebalansdiagrammen.

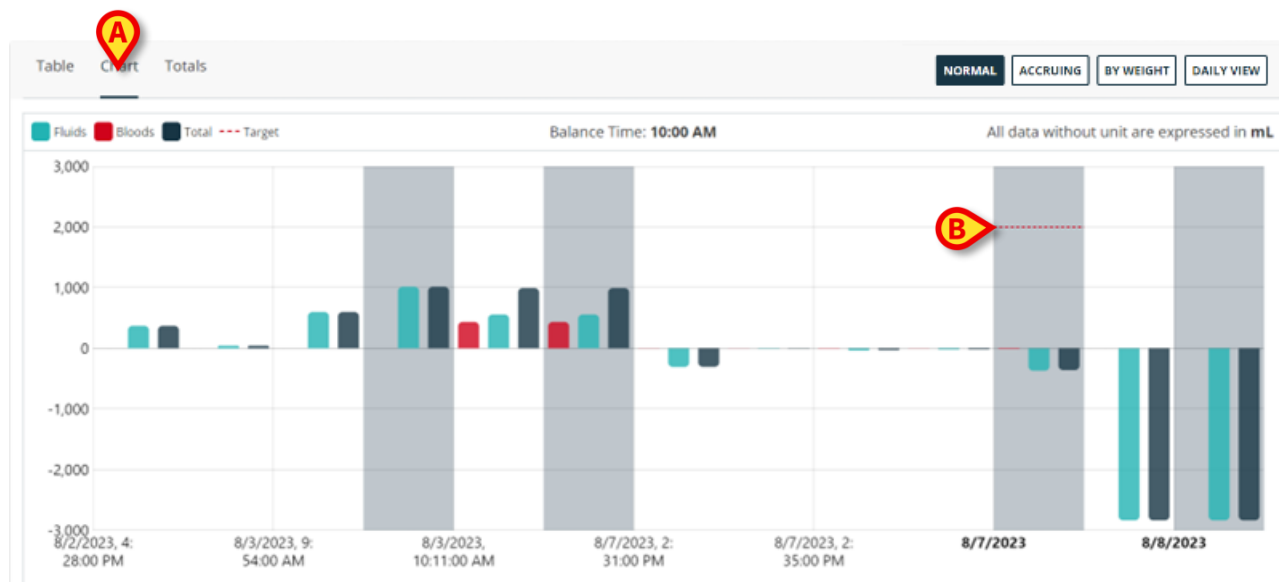

Figur 18


In- och utvärden kan avläsas på den vertikala axeln (Figur 19 **A**).

Vätskebalansens datum och tid kan avläsas på den horisontella axeln (Figur 19 **B**).

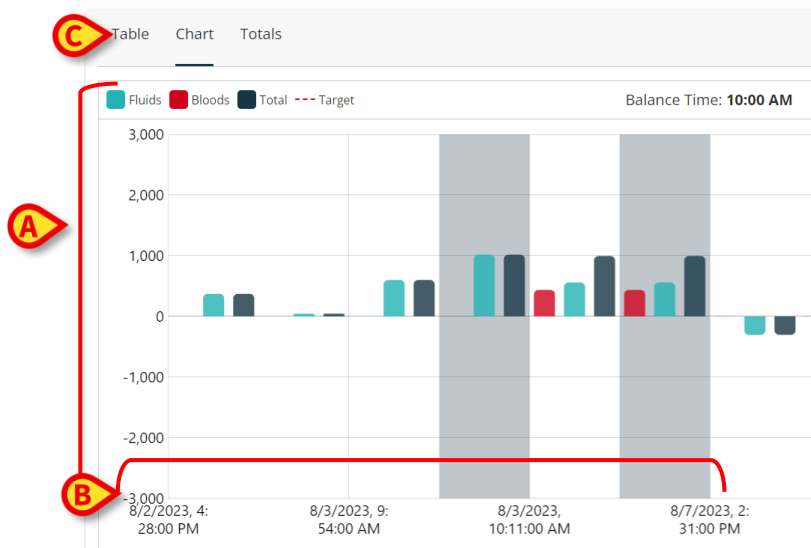

Figur 19 - Diagram


Variationerna i vätskebalansen representeras av vertikala staplar. Färgen motsvarar färgen på motsvarande klass, enligt förklaringen (Figur 19 **C**). Staplarna ovanför nollan representerar vätska IN staplarna under nollan representerar vätska UT. En röd prickad linje på diagrammet indikerar det dagliga målet, om det är inställt (Figur 18 **B**, Figur 20 **A**).

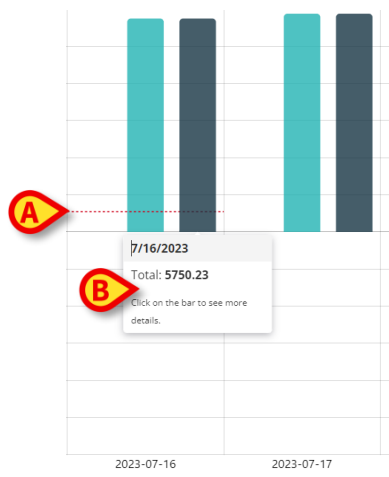

Figur 20

Flytta muspekaren på en av staplarna i diagrammet för att visa ett tooltip med ytterligare information (Figur 20 **B**).

- Klicka på tooltip för att visa ett fönster som innehåller motsvarande balansdetaljer (Figur 21).

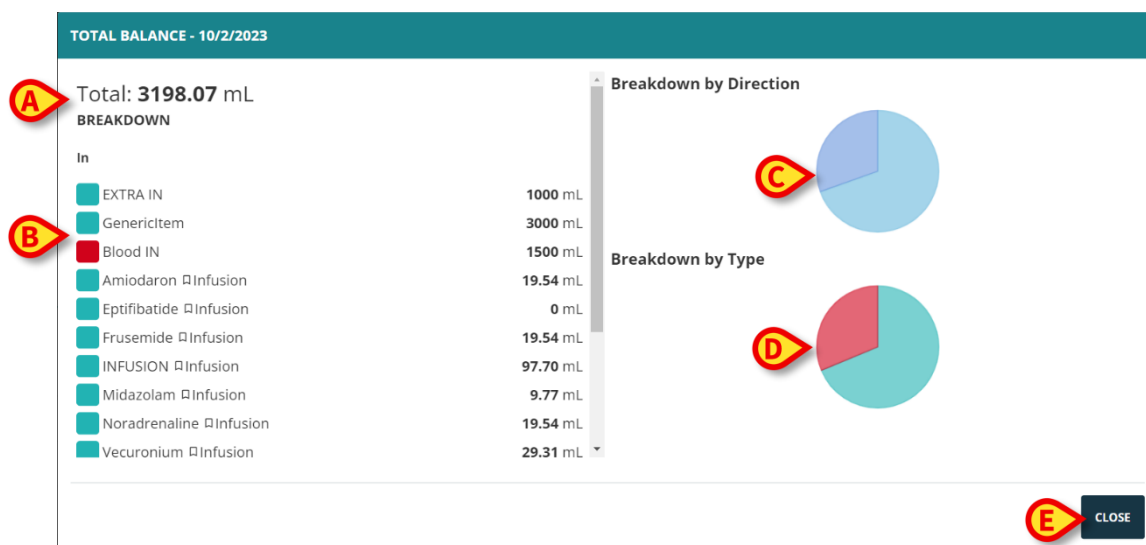

Figur 21

Summan visas i det övre vänstra hörnet (Figur 21 **A**).


Kolumnen "Fördelning" listar detaljerna för alla in- och utvärden. Varje artikel listas tillsammans med dess beloppsvärde (Figur 21 **B**).

"Fördelning efter riktning" visar separerade in- och utvärden ett cirkeldiagram (Figur 21 **C**).

"Fördelning efter typ" visar separerade vätskor och blod i ett cirkeldiagram (Figur 21 **D**).

Flytta muspekaren på cirkeldiagrammet för att läsa motsvarande procentsatser.

- Klicka på cirkeldiagrammet för att framhäva den klickade diagramdelen (Figur 22 **A**) och markera (Figur 22 **B**) motsvarande balanser på listan.

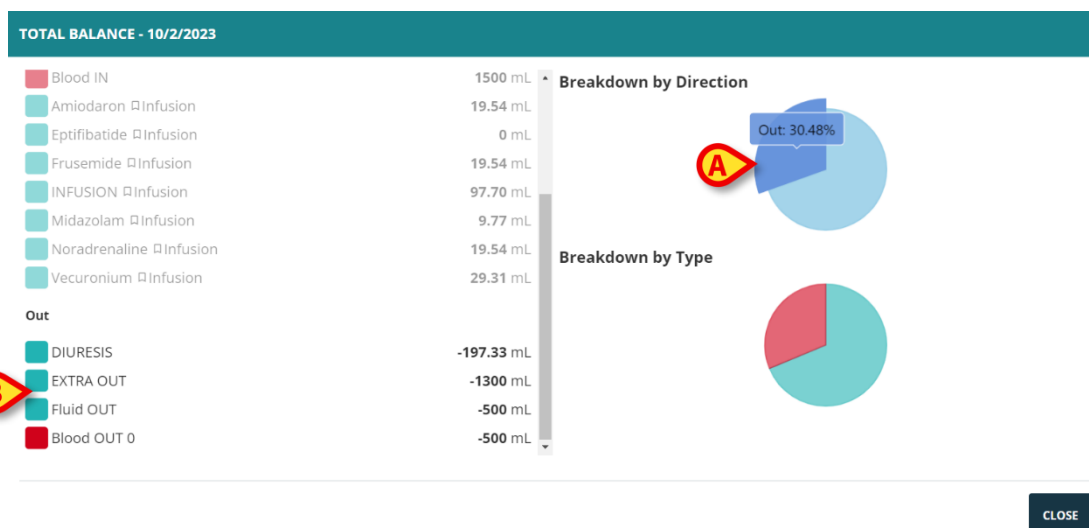

Figur 22

- Klicka på **Stäng** (Figur 21 E) för att stänga fönstret.

6. Tidsintervallväljare

En tidsintervallväljare finns i det nedre högra hörnet av huvudskärmen. Den gör det möjligt att visa data som hänvisar till ett valt tidsintervall, oberoende av vilken typ av vy som valts (tabell, diagram, totaler) eller visningsläge (standard, ackumulerade, vikt).

|< < 8/21/2023-8/28/2023 > >|

Figur 23 – Tidsintervallväljare


Antalet kliniska dagar som visas definieras under konfigurationen.

Använd < och > pilarna för att flytta bakåt (vänster) och framåt (höger) i tidslinjen, ett "steg" per klick. Det vill säga: om den konfigurerade luckan är 7 dagar och det valda intervallet är 21/08 – 28/08, visar ett klick på vänsterpilen intervallet 14/08 – 21/08.

Använd pilarna |< och >| för att gå till början och slutet av den relevanta perioden (vanligtvis från patientens inläggning till nuvarande ögonblick, men som kan konfigureras annorlunda enligt vårdstrukturens behov; till exempel kan en specifik markör för operationssalen tas som början eller slutet på den relevanta perioden).

7. Kommandofältet

Menyn på huvudskärmens kommandofält utlöser olika funktioner, här kortfattat beskrivna. Se de angivna avsnitten för fullständiga funktioner.

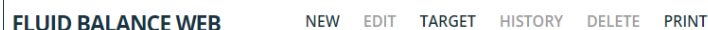A screenshot of the 'FLUID BALANCE WEB' application's command menu. The menu is displayed as a horizontal list of options: NEW, EDIT, TARGET, HISTORY, DELETE, and PRINT. The text 'FLUID BALANCE WEB' is on the left, followed by a vertical line and then the menu items.

FLUID BALANCE WEB NEW EDIT TARGET HISTORY DELETE PRINT

Figur 24 - Kommandofältet

Ny - använd för att infoga en ny saldopost (dvs en ny kolumn i tabellen - se avsnitt 7.1).

Redigera - använd för att redigera värdena för ett redan existerande saldo (se avsnitt 7.4).

Mål – använd för att ställa in eller redigera det dagliga målet (se avsnittet 12).

Historik - använd för att visa ett fönster som innehåller historiken för ändringar som gjorts i en vald post.

Ta bort - använd för att radera en av de infogade saldoposterna (dvs en kolumn i saldotabellen - se avsnitt 7.5).

Skriv ut – använd för att ladda ner de befintliga konfigurerade utskriftsrapporterna (se avsnittet 14).

7.1. Datainmatning: "Ny".

Ny- på kommandoraden (Figur 25) tillåter datainmatning (se avsnitt 7.2 för proceduren).

FLUID BALANCE WEB

NEW

EDIT

TARGET

HISTORY

DELETE

PRINT

Figur 25 - Kommandofältet

- Klicka på **Ny** för att öppna följande fönster (Figur 26).

Edit Instance

A Date 07/19/2023 09:37 AM

B Weight + -

In

Amiodaron Infusion	14.74	+	-
Eptifibatide Infusion	0	+	-
EXTRA IN EXTRA IN		+	-
Frusemide Infusion	14.74	+	-
GenericItem GenericItem		+	-
INFUSION Infusion	73.7	+	-

7 8 9
4 5 6
1 2 3
C 0 .
^ +/- v

CLOSE SAVE

Figur 26 - datainmatningsfönster

I fönstret finns följande verktyg:

7.1.1. Datum/tid-indikator (Figur 26 A)

Aktuellt datum/tid är här inställt som standard, dvs tiden som visas här är den tid då knappen **Ny** klickas. Om tidpunkten för inmatning av data inte överensstämmer med den faktiska saldotiden är det möjligt att ställa in ett annat datum/tid. Detta görs genom att:

- Klicka på .

En kalender/klocka öppnas (Figur 27).

Figur 27

Välj datum i kalendern (vänster -Figur 27 **A**); välj tiden i listan till höger (Figur 27 **B**). Datum och tid kan också skrivas in manuellt i fältet (Figur 27 **C**).

Det är inte möjligt att ställa in ett framtida datum/tid.

7.1.2. Patientviktsindikation (Figur 26 B)

Patientviktindikeringen kan aktiveras genom konfiguration. Tre alternativ är tillgängliga:

- patientens vikt är inte relevant, fältet "Vikt" är inaktiverat;
- patientens viktspecifikation är valfri;
- patientviktsspecifikation är obligatorisk.

Patientens vikt kan också registreras automatiskt av en konfigurerad källa och automatiskt infogas i fältet "Vikt" vid inmatning av data. Det infogade värdet är fortfarande redigerbart.

Se systemadministratörerna för mer information om konfigurationsalternativ.

7.1.3. Balanser (Figur 28 C)

De möjliga saldoposterna listas till vänster i fönstret (Figur 28 **A**), grupperade som IN och OUT. För att ange värdet för en specifik post, klicka på fältet bredvid namnet på posten och sätt in värdet (antingen genom att skriva det på arbetsstations-tangentbordet eller använda det virtuella tangentbordet på skärmen -Figur 28 **B**).

Figur 28

Olika ikoner kan visas bredvid ett objekt för att ge ytterligare information om förvärvsläget. Dessa är:


- Beräkningsverktyg tillgängligt, som i   Fluid Balance Web-modulen tillhandahåller en beräkningsmotor som tillåter skapandet av specifika beräkningsverktyg för härledda data (till exempel: övergripande värden från olika patientparametrar). Kontakta systemadministratören för information relaterad till denna produkts funktion. I dessa fall aktiveras beräkningsverktyget av  knappen på det numeriska tangentbordet.
- Data från infusionspumpar, som i   - När denna ikon finns, hämtas värdet automatiskt från infusionspumparna. Fortfarande redigerbar av användaren.
- **Autorun**, som i   - När den här ikonen finns, hämtas och infogas värdet automatiskt vid specifika konfigurerade tidpunkter. Fortfarande redigerbar av användaren.

Knapparna + och - till höger om fältet adderar eller subtraherar 1 till det infogade värdet.

De balansposter som finns för en specifik patient definieras under konfigurationen. Nya objekt kan läggas till med hjälp av proceduren som beskrivs i avsnittet 7.3 . De ytterligare balansposterna förblir tillgängliga även för andra patienter, enligt användarbehörigheter och platskonfiguration.

7.1.4. Anteckningar (Figur 29 A)

I anteckningsområdet är det möjligt att lägga till valfri anteckning som fritext.

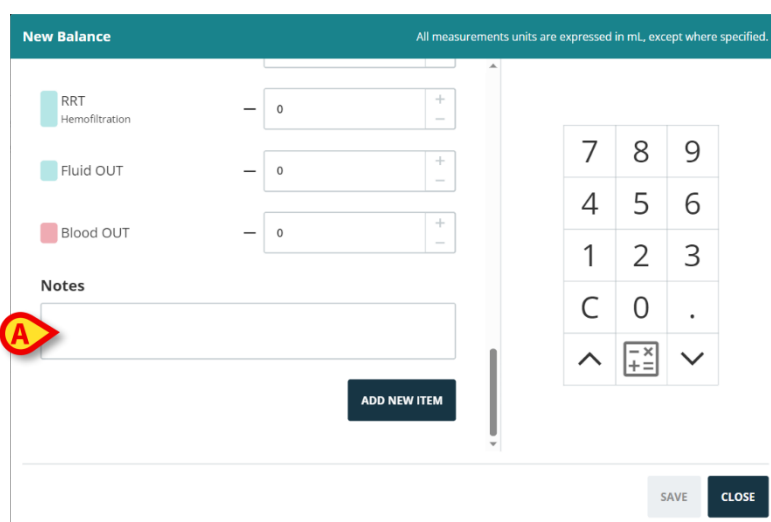

Figur 29

Om det finns en notering som hänvisar till en balansspecifikation, visas en gul triangel i balanstabellen, i cellen "tid" (Figur 30 A). Flytta muspekaren på triangeln för att visa ett

tooltip som innehåller anteckningstexten. Klicka på triangeln för att läsa hela anteckningen i ett särskilt fönster.




19/7/2023	
12:00	12:30
	80350
239	119.40
239	119.40
239	119.40
0	0
0	0

Figur 30


7.2. Infoga balansvärden

Detta stycke beskriver, med hjälp av ett exempel, proceduren för inmatning av vätskebalansvärden. Figur 31 visar en skärm som hänvisar till en patient utan balansvärden.

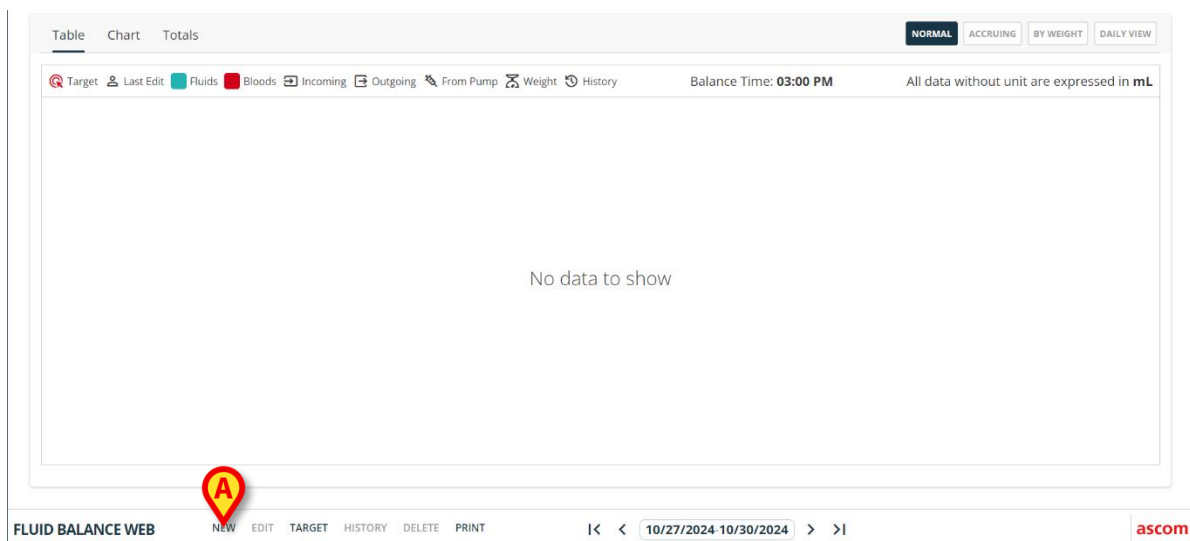

Figur 31

- Klicka på **Ny** i kommandofältet (Figur 31 **A**). Följande fönster öppnas (Figur 32).

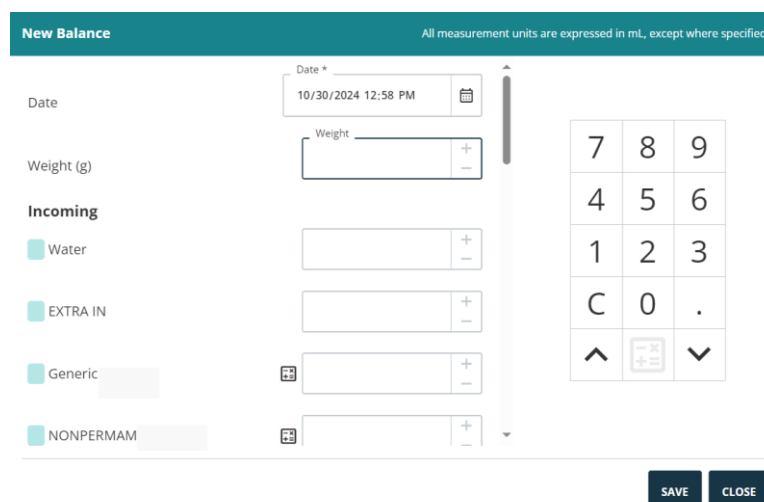

Figur 32

- Infoga balansvärden med antingen arbetsstationens tangentbord eller det virtuella tangentbordet till höger (Figur 33 **B**). Sätt in patientens vikt om det behövs (Figur 33 **A**).

New Balance All measurement units are expressed in mL, except where specified.

Date: 10/30/2024 12:58 PM

Weight (g): 54400

Incoming

☒ Water: 250

☐ EXTRA IN

☐ Generic

☐ NONPERMAM

SAVE CLOSE

Figur 33

- Klicka på **Spara** (Figur 33 **C**). En kolumn läggs till i balanstabellen (Figur 34 **A**).

	Date	10/30/2024	10/29/2024
Target	Time	12:58 PM	Daily
Weight (g)		54400	
TOTAL BALANCE		148	148
FLUID TOTAL		148	148
FLUID IN		250	250
FLUID OUT		-102	-102
BLOOD TOTAL		0	0
BLOOD IN		0	0
BLOOD OUT		0	0
Water		250	250
EXTRA IN			
GenericItem			
NONPERMAM			
Fluid IN			
Nic			
AUTOFILL			

Figur 34

Beräkningar av totala och partiella balanser utförs automatiskt.

7.3. Hur man lägger till en balanspost

Balansposterna som listas i vyn ställs in under konfigurationen. Det är möjligt att lägga till nya objekt till de som listas i vyn. Detta görs genom att:

- Klicka på **Lägg till nytt objekt** i vyn (Figur 35 **A**). Knappen **Lägg till ny post** finns i slutet av saldobostlistan; för att visa det är det nödvändigt att rulla nedåt i rullningslistan som anges i Figur 35 **B**.

Figur 35 - Lägg till nytt föremål


Följande fönster visas.

Figur 36 - Välj nytt objekt

- Klicka på pilen som anges i Figur 36 **A** . En meny som innehåller alla valbara poster öppnas (listan definieras under konfigurationen - Figur 37). Använd den laterala rullningslisten för att visa alla objekt på menyn.

Figur 37


- Klicka på objektet som ska läggas till. Objektets namn visas i fältet "namn" (Figur 38).

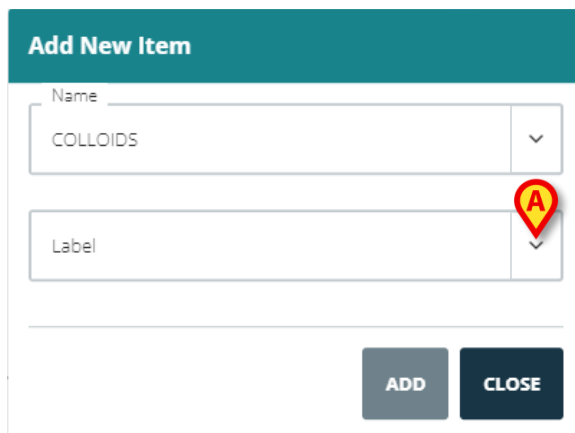

The screenshot shows a form titled "Add New Item". It has two dropdown menus: "Name" and "Label". The "Name" dropdown is open, showing "COLLOIDS" as the selected option. The "Label" dropdown is closed. A red location pin icon with the letter "A" is positioned next to the "Label" dropdown. At the bottom of the form are two buttons: "ADD" and "CLOSE".

Figur 38

Använd menyn "Etikett" för att ytterligare specificera objektet, om det behövs. Se Figur 39 till exempel.

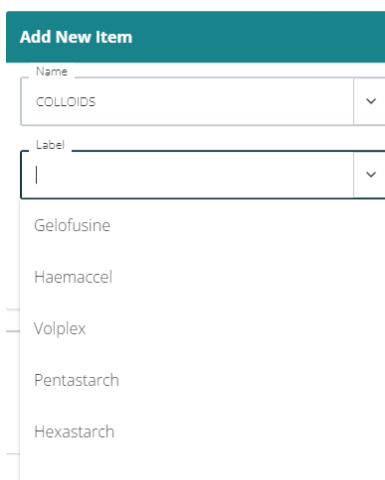


The screenshot shows the "Add New Item" form with the "Label" dropdown menu open. The dropdown list shows several options: Gelofusine, Haemaccel, Volplex, Pentastarch, and Hexastarch. A red location pin icon with the letter "A" is positioned next to the dropdown menu. At the bottom of the form are two buttons: "ADD" and "CLOSE".

Figur 39

Efter etikettspecifikation (valfritt),

- Klicka på **Lägg till** för att lägga till objektet i objekttabellen (Figur 40 A).

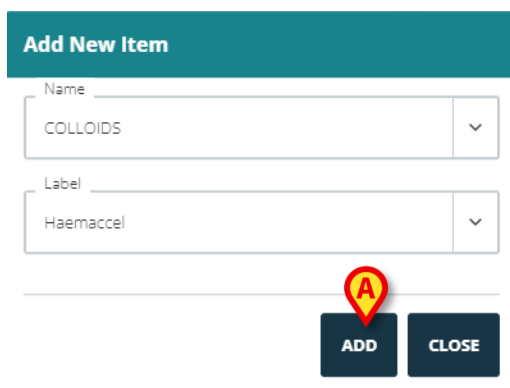

The screenshot shows the "Add New Item" form. The "Name" dropdown menu is open, showing "COLLOIDS" as the selected option. The "Label" dropdown menu is open, showing "Haemaccel" as the selected option. A red location pin icon with the letter "A" is positioned next to the "ADD" button. At the bottom of the form are two buttons: "ADD" and "CLOSE".


Figur 40

Balansposterna som läggs till med denna procedur förblir tillgängliga även för andra patienter, enligt användartillstånd och platskonfiguration.

7.4. Redigera befintlig balans

För att redigera en befintlig saldopost

- Klicka på kolumnen som motsvarar balans som ska redigeras. Den valda kolumnen visas som inringad (Figur 41 A).

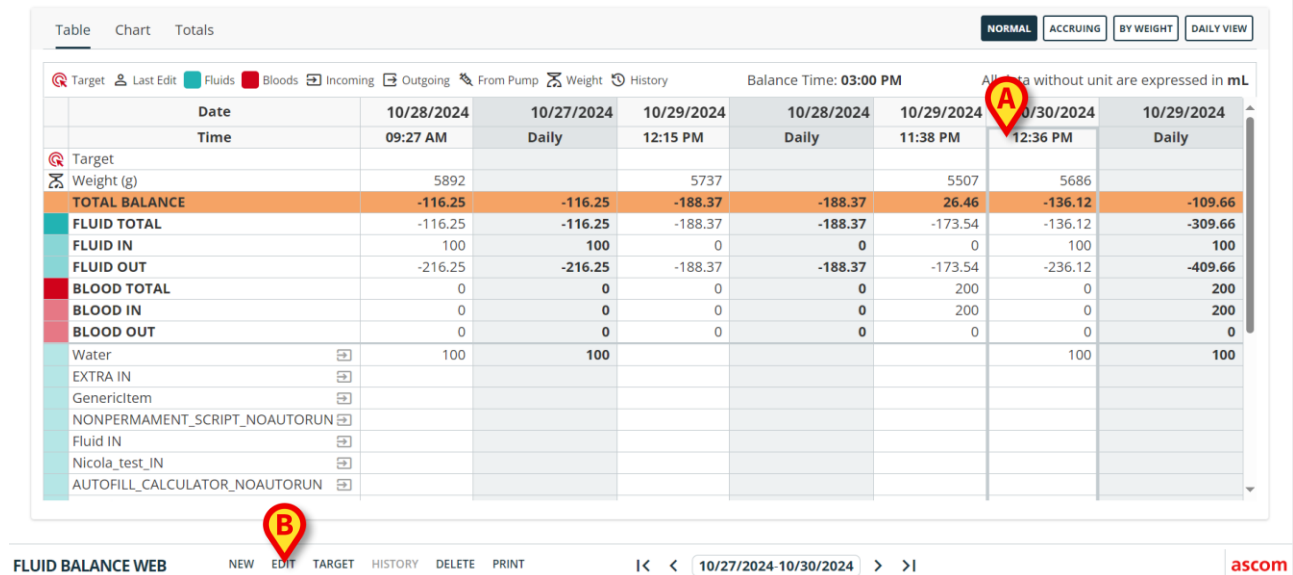


	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/29/2024
Date	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/29/2024
Time	09:27 AM	Daily	12:15 PM	Daily	11:38 PM	12:36 PM	Daily
Target							
Weight (g)	5892		5737		5507	5686	
TOTAL BALANCE	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	26.46	-136.12	-109.66
FLUID TOTAL	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	-173.54	-136.12	-309.66
FLUID IN	100	100	0	0	0	100	100
FLUID OUT	-216.25	-216.25	-188.37	-188.37	-173.54	-236.12	-409.66
BLOOD TOTAL	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD IN	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD OUT	0	0	0	0	0	0	0
Water	100	100				100	100
EXTRA IN							
GenericItem							
NONPERMAMENT_SCRIPT_NOAUTORUN							
Fluid IN							
Nicola_test_IN							
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN							

Figur 41

- Klicka på **Redigera** i kommandofältet (Figur 41 B).

Datainmatningsfönstret öppnas och innehåller värdena för den valda kolumnen (Figur 42).

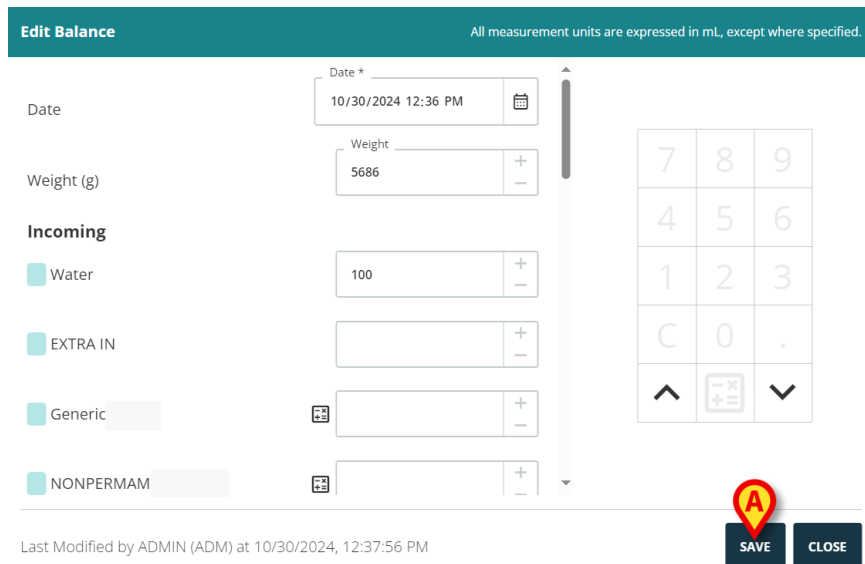

Edit Balance All measurement units are expressed in mL, except where specified.

Date * 10/30/2024 12:36 PM

Weight (g) 5686

Incoming

- ☒ Water 100
- ☐ EXTRA IN
- ☐ Generic
- ☐ NONPERMAM

Last Modified by ADMIN (ADM) at 10/30/2024, 12:37:56 PM

SAVE **CLOSE**

Figur 42

I det här fönstret är det möjligt att

- a) Redigera värdena för de befintliga objekten.


- Redigera datum/tid. Efter att ha sparat kommer kolumnen som motsvarar balansen att placeras i tabellen enligt det nya datumet/tiden (kolumnernas ordning är kronologisk).
- Redigera patientens vikt.
- Lägg till nya objekt med funktionen "Lägg till nytt objekt" som beskrivs i stycket 7.3 .

➤ Klicka på **Spara** för att spara ändringarna (Figur 42 **B**).

7.5. Ta bort befintlig balans

För att radera ett befintligt saldo

- Klicka på kolumnen som hänför sig till balans som ska raderas. Den valda kolumnen visas som markerad (Figur 43 **A**).

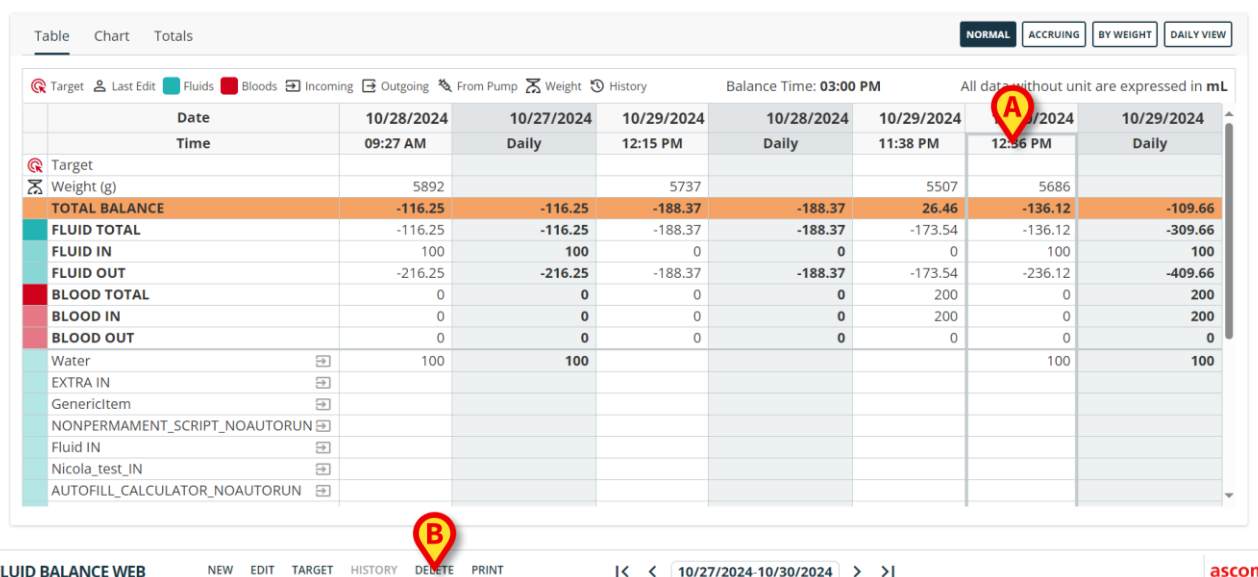

	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/29/2024	10/29/2024
Date	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/29/2024	10/29/2024
Time	09:27 AM	Daily	12:15 PM	Daily	11:38 PM	12:36 PM	Daily
Target							
Weight (g)	5892		5737		5507	5686	
TOTAL BALANCE	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	26.46	-136.12	-109.66
FLUID TOTAL	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	-173.54	-136.12	-309.66
FLUID IN	100	100	0	0	0	100	100
FLUID OUT	-216.25	-216.25	-188.37	-188.37	-173.54	-236.12	-409.66
BLOOD TOTAL	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD IN	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD OUT	0	0	0	0	0	0	0
Water	100	100				100	100
EXTRA IN							
GenericItem							
NONPERMANENT_SCRIPT_NOAUTORUN							
Fluid IN							
Nicola_test_IN							
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN							

Figur 43

- Klicka på **Ta bort** i kommandofältet (Figur 43 **B**).

Användarbekräftelse krävs (Figur 44).

Confirm Delete

Are you sure to delete the balance for
10/30/2024, 12:36:00 PM?

YES


NO

Figur 44

- Klicka på **Ja** för att ta bort balans/kolumnen.

8. "Ackumulerad" vätskebalans

Alternativet **ackumulering** (Figur 45) gör det möjligt att ändra visningsläget för balanstabellen till "Ackumulerad".

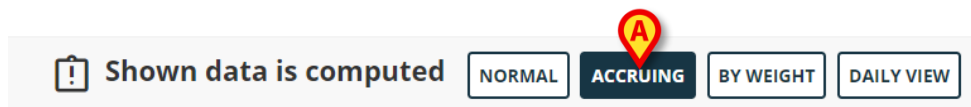

Figur 45

Följande exempel visar skillnaden mellan de två visningslägena (Figur 46 och Figur 47):

Date	01:30 PM	01:35 PM	01:41 PM	10/29/2024
Target				
Weight (g)	5836	5646	5615	
TOTAL BALANCE	-120.83	-17.36	-39.35	-177.54
FLUID TOTAL	-120.83	-17.36	-39.35	-177.54
FLUID IN	100	100	100	300
FLUID OUT	-220.83	-117.36	-139.35	-477.54
BLOOD TOTAL	0	0	0	0
BLOOD IN	0	0	0	0
BLOOD OUT	0	0	0	0
Water	100	100	100	300
EXTRA IN				
Generic				
NONPERMAM				
Fluid IN				
Nic				
AUTOFILL				

Figur 46 - Standardvy

Date	01:30 PM	01:35 PM	01:41 PM	10/29/2024
Target				
Weight (g)	5836	5646	5615	
TOTAL BALANCE	-120.83	-138.19	-177.54	-177.54
FLUID TOTAL	-120.83	-138.19	-177.54	-177.54
FLUID IN	100	200	300	300
FLUID OUT	-220.83	-338.19	-477.54	-477.54
BLOOD TOTAL	0	0	0	0
BLOOD IN	0	0	0	0
BLOOD OUT	0	0	0	0
Water	100	200	300	300
EXTRA IN				
Generic				
NONPERM				
Fluid IN				
Nic				
AUTOFILL				

Figur 47 - Ackumulerad vy

De två tabellerna som visas i Figur 46 och Figur 47 hänvisa till samma balans. Den första visas i "Standard"-läge, den andra visas i "Ackumulerad"-läge.

Tabellen hänvisar till tre efterföljande datainmatningar. Den första klockan 11:56 (100 ml GenericItem); den andra klockan 11:57 (100 ml GenericItem); den tredje kl. 11:59 (100 ml GenericItem).

Lägg märke till, värdena som hänvisar till den GenericItem (röd inringad i figuren).


I Figur 46 (Standardläge), den andra kolumnen visar värdet 100, den tredje kolumnen visar värdet 100.

I Figur 47 (Ackumuleringsläge), den andra kolumnen visar värdet 200 (100+100), den tredje kolumnen visar värdet 300 (100+100+100).


Totala värden visas i den fjärde kolumnen. De är detsamma i båda siffrorna (300 MI IN är det totala saldobärdet för den GenericItem).

När läget "Ackumulering" är aktiverat, visas en varning för att påminna användaren om att de data som visas är beräknade och inte faktiska data (Figur 45).

Visningsläget "Ackumulering" kan också tillämpas på "Diagram"-vyn (Figur 48 och Figur 49).

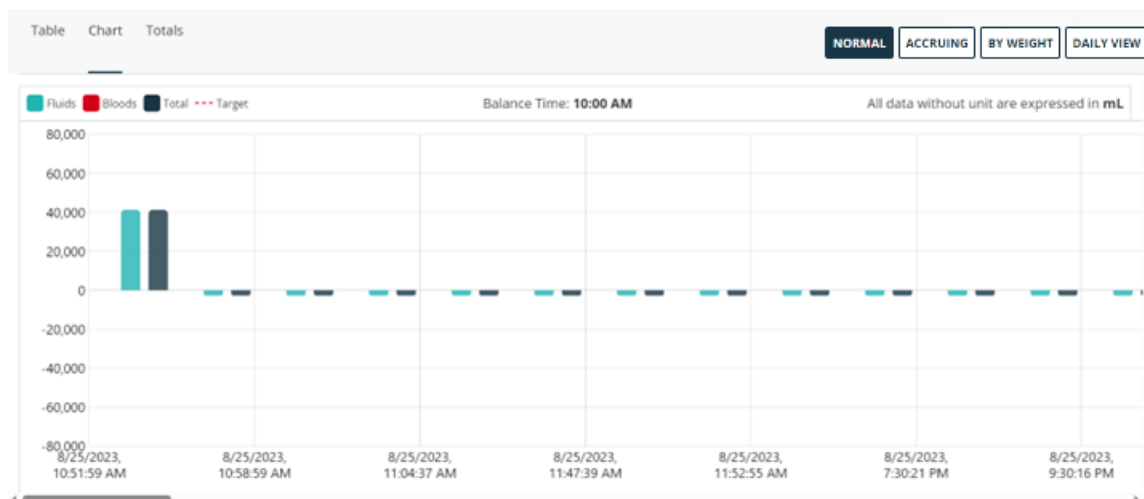

Figur 48 – Diagram: Standard

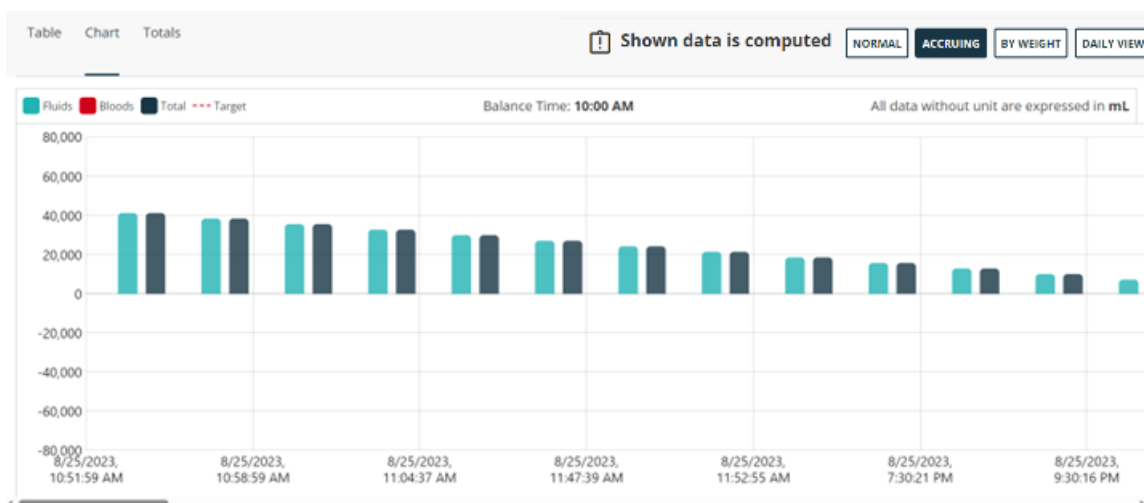


Figur 49 – Diagram: ackumuleringsläge

9. Totaler

Vyn "Totaler" (Figur 50 A) visar trenderna och den totala balansen för varje enskild post med hänsyn till den totala patientvistelsen.

- Klicka på alternativet "Totaler" (Figur 50 A) för att aktivera denna vy.

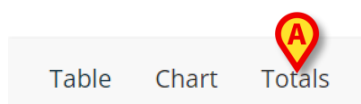


Figur 50

Följande skärm visas (Figur 51).

11. Daglig vy

Alternativet "Daglig vy" gör det möjligt att endast visa de kolumner som hänvisar till de dagliga summorna (dvs. de grå kolumnerna). Att göra det:


- Klicka på knappen **Daglig vy** som anges i Figur 53 A.

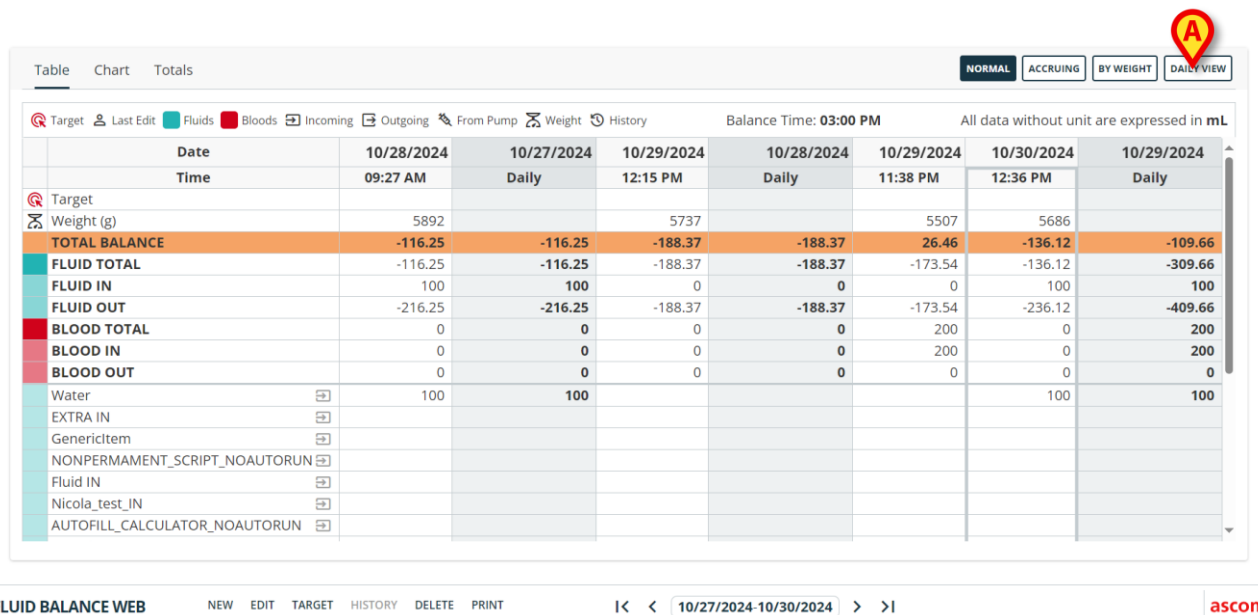

Date	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/29/2024
Time	09:27 AM	Daily	12:15 PM	Daily	11:38 PM	12:36 PM	Daily
Target							
Weight (g)	5892		5737		5507	5686	
TOTAL BALANCE	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	26.46	-136.12	-109.66
FLUID TOTAL	-116.25	-116.25	-188.37	-188.37	-173.54	-136.12	-309.66
FLUID IN	100	100	0	0	0	100	100
FLUID OUT	-216.25	-216.25	-188.37	-188.37	-173.54	-236.12	-409.66
BLOOD TOTAL	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD IN	0	0	0	0	200	0	200
BLOOD OUT	0	0	0	0	0	0	0
Water	100	100				100	100
EXTRA IN							
GenericItem							
NONPERMAMENT_SCRIPT_NOAUTORUN							
Fluid IN							
Nicola_test_IN							
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN							

Figur 53

Skärmen kommer att ändras på följande sätt (Figur 54)

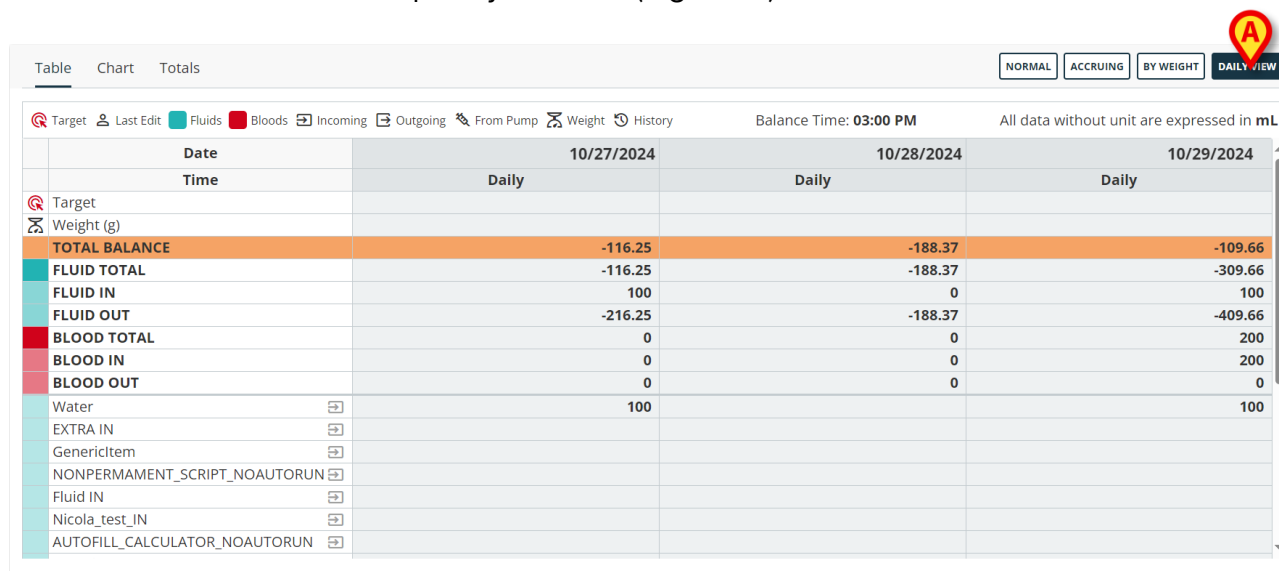

Date	10/27/2024	10/28/2024	10/29/2024
Time	Daily	Daily	Daily
Target			
Weight (g)			
TOTAL BALANCE	-116.25	-188.37	-109.66
FLUID TOTAL	-116.25	-188.37	-309.66
FLUID IN	100	0	100
FLUID OUT	-216.25	-188.37	-409.66
BLOOD TOTAL	0	0	200
BLOOD IN	0	0	200
BLOOD OUT	0	0	0
Water	100		100
EXTRA IN			
GenericItem			
NONPERMAMENT_SCRIPT_NOAUTORUN			
Fluid IN			
Nicola_test_IN			
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN			

Figur 54

I Figur 54 visas endast kolumnen som hänvisar till dagliga totaler. **Daglig vy**-knappen visas som vald (Figur 54 A).

Visningsläget "Vikt" kan också tillämpas på diagram.



När läget "efter vikt" är aktiverat kan de dagliga totala balanserna inte beräknas.

12. Mål

Mål på kommandoraden (Figur 55) gör det möjligt att specificera det dagliga balansmålet.

FLUID BALANCE WEB

NEW

EDIT

TARGET

HISTORY

DELETE

PRINT

Figur 55

Det dagliga målet kan anges både för den aktuella dagen och för nästa dag. Så här anger du det dagliga målet:

- Klicka på **Mål**. Följande fönster öppnas (Figur 56).

The 'Edit Target' window has a teal header. Below it, there are two sections: 'Previous Targets' (empty) and 'Today'. The 'Today' section has a label 'Today' and a text input field for 'Amount (mL)' with a value of '0' and plus/minus buttons. Below this is a text area for 'Note'. The 'Tomorrow' section has a label 'Tomorrow' and a text input field for 'Amount (mL)' with a value of '0' and plus/minus buttons. Below this is a text area for 'Note'. At the bottom right are 'SAVE' and 'CLOSE' buttons.

Figur 56 - Vätskebalansmål

- Skriv in målvärdet (mängd i ml) i fältet "Idag" / "I morgon" (eller båda -Figur 56 **A**). Lägga till anteckningar om det behövs (Figur 56 **B**).
- Klicka på **Spara** (Figur 56 **C**).


Vätskebalansmålet visas i vätskebalanstabellen, i raden "Mål" i kolumnen "Dagligen" (Figur 57 **A**).

Date	20/7/2023		19/7/2023
Time	09:54	Daily	500
TARGET			

Figur 57

Om det anges, kommer målet för morgondagen att visas när kolumnen "Dagligen" för påföljande dag visas.

Alla mål som angetts under patientvistelsen listas under "Föregående mål" till vänster om fönstret "Redigera mål". För varje post på listan (varje tidigare mål) anges datumet för specifikation, beloppet, förkortningen för användaren som angav det (Figur 58 **A**).

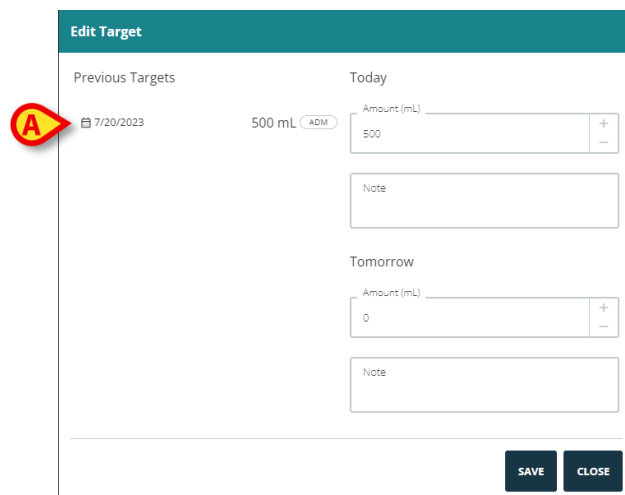

Edit Target

Previous Targets: 7/20/2023 500 mL ADM

Today: Amount (mL) 500

Note:

Tomorrow: Amount (mL) 0

Note:

SAVE CLOSE

Figur 58

13. Historik

Historik på kommandoraden visar alla ändringar som gjorts i en balanspost (dvs en kolumn i tabellen). Kolumnerna som redigerades efter den första infogningen visar en liten "historik"-ikon -  - i det övre vänstra hörnet. Det här är de poster för vilka alternativet "Historik" är aktiverat. Så här visar du historiken:

- Klicka på kolumnen som motsvarar den relevanta balansen. Den valda kolumnen är inringad (Figur 59 A).

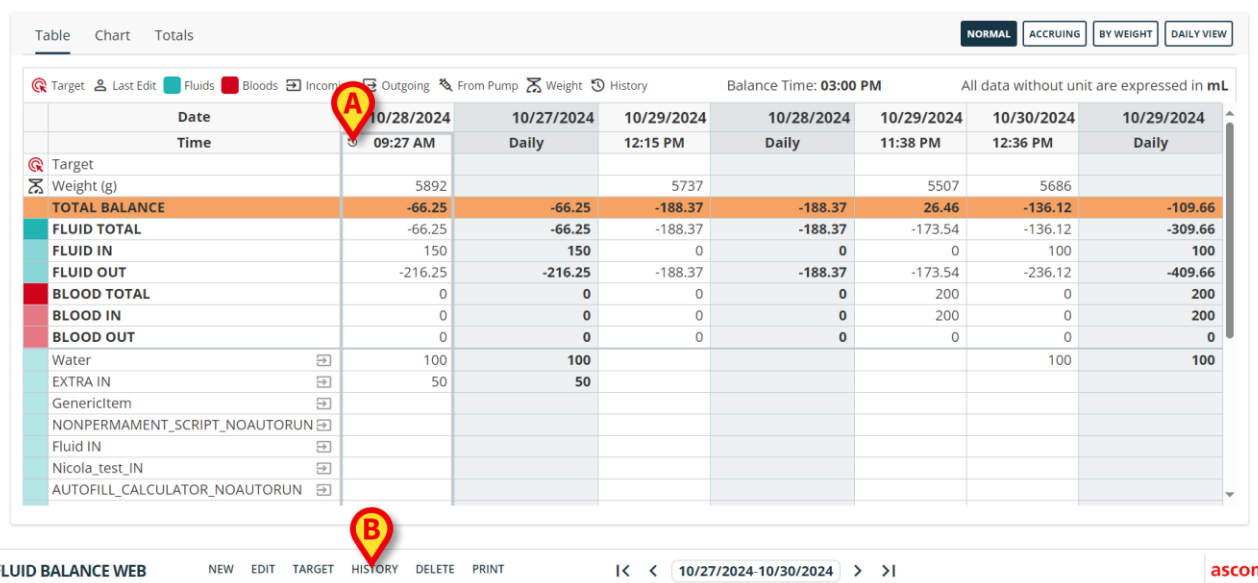


Table Chart Totals NORMAL ACCRUING BY WEIGHT DAILY VIEW

Target Last Edit Fluids Bloods Incoming Outgoing From Pump Weight History Balance Time: 03:00 PM All data without unit are expressed in mL

	Date	10/28/2024	10/27/2024	10/29/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/29/2024
	Time	09:27 AM	Daily	12:15 PM	Daily	11:38 PM	12:36 PM	Daily
Target								
Weight (g)		5892		5737		5507	5686	
TOTAL BALANCE		-66.25	-66.25	-188.37	-188.37	26.46	-136.12	-109.66
FLUID TOTAL		-66.25	-66.25	-188.37	-188.37	-173.54	-136.12	-309.66
FLUID IN		150	150	0	0	0	100	100
FLUID OUT		-216.25	-216.25	-188.37	-188.37	-173.54	-236.12	-409.66
BLOOD TOTAL		0	0	0	0	200	0	200
BLOOD IN		0	0	0	0	200	0	200
BLOOD OUT		0	0	0	0	0	0	0
Water		100	100				100	100
EXTRA IN		50	50					
GenericItem								
NONPERMANENT_SCRIPT_NOAUTORUN								
Fluid IN								
Nicola_test_IN								
AUTOFILL_CALCULATOR_NOAUTORUN								

FLUID BALANCE WEB NEW EDIT TARGET HISTORY DELETE PRINT 10/27/2024-10/30/2024 ascom

Figur 59

- Klicka på Historik i kommandofältet (Figur 59 B).

"Historikfönstret" öppnas (Figur 60).



History for Balance of 10/28/2024, 9:27:00 AM		All data without unit are expressed in mL	
Edit Date	10/30/2024	10/28/2024	
Edit Time	01:23 PM	09:28 AM	
Weight (g)	5892	5892	
Water (Water)	100	100	
DIURESIS (DIURESIS)	-216.25	-216.25	
EXTRA IN (EXTRA IN)	50		
Clinical Time	10/28/2024, 9:27:00 AM	10/28/2024, 9:27:00 AM	
Last Edit User	ADM	ADM	

CLOSE

Figur 60

Rubriken anger saldot som "Historikfönstret" refererar till (Figur 60 **A**).

De ändringar som gjorts i det specifika saldot sammanfattas i en tabell.

- Den första raden i tabellen anger det datum då ändringarna gjordes.
- Den andra raden anger tidpunkten då ändringarna gjordes.
- Den tredje raden anger patientens vikt.
- Var och en av följande rader indikerar de ändrade posterna med tillhörande belopp.
- Den näst sista raden anger den kliniska tidpunkten som ändringen avser. Det innebär till exempel att om en balans registreras den 19^e klockan 13:00 och en post i den balansen senare redigeras den 20^e klockan 12:00, då hänvisar redigeringen som utförts den 20^e till en klinisk tid som är den 19^e klockan 13:00; detta sista värde är det som visas på raden "Klinisk tid".
- Den sista raden anger förkortningen för den användare som senast redigerade saldot.

Varje kolumn i tabellen motsvarar en redigering av saldot, som visar värdena för den specifika redigeringen (datum/tid, patientvikt, mängder, klinisk tid, användare).

14. Rapporter

Skriv ut på kommandofältet gör det möjligt att skapa utskriftsrapporter av Vätskebalansen (Figur 61).


FLUID BALANCE WEB	NEW	EDIT	TARGET	HISTORY	DELETE	PRINT
-------------------	-----	------	--------	---------	--------	-------

Figur 61

För att skapa en utskriftsrapport

- Klicka på **Skriv ut**.

Olika utskriftsrapporter kan konfigureras enligt sjukvårdens strukturbedov. Ett fönster med de tillgängliga utskriftsrapporterna visas (Figur 62).

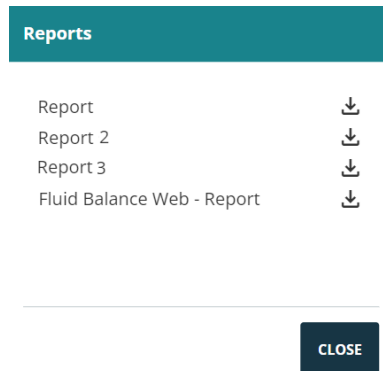

Figur 62

- Klicka på  ikonen för att ladda ner rapporten.