



Control Bar Web Kullanım Kılavuzu

Sürüm 3.0

2024-10-31

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

İçerik

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Web'i Başlatma	3
1.2 Kullanıcı girişi	4
1.3 Çalışma Alanı.....	6
1.3.1 Bir modül seçme.....	6
1.4 Control Bar.....	7
1.5 Ana Menü.....	8
1.5.1 Şifreyi değiştir	8
1.5.2 Kullanıcı Sorunu raporlama	9
1.6 Ek alt modüller.....	10
1.6.1 CDSS Configurator	10
1.6.2 Identity	11

1. Control Bar Web



Ürün ortamı, önlemler, uyarılar ve kullanım amacı hakkında bilgi için *USR TUR Digistat Care* ve/veya *USR TUR Digistat Docs* (kurulu modüllere bağlı olarak - *Digistat Suite EU* için) veya *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* için) bölümüne bakınız. Bu belgede açıklanan *Control Bar Web*'in doğru ve güvenli kullanımı için uygun belgenin bilinmesi ve anlaşılması zorunludur.

1.1 Control Bar Web'i Başlatma

Control Bar Web'i başlatmak için:

- Belirli bir adresi tarayıcı adres çubuğuna yazın.

Aşağıdaki sayfa açılır:

Şekil 1

1.2 Kullanıcı girişı

Sistem işlevlerini etkinleştirmek için Kullanıcı Girişı gereklidir.

login

A

Username

B

Password

C

login

Şekil 2

Giriş yapmak için:

- "Kullanıcı adı" alanına (Şekil 2 **A**) kullanıcı adınızı girin.
- "Şifre" alanına (Şekil 2 **B**) şifrenizi girin
- **Oturum Aç** düğmesine (Şekil 2 **C**) tıklayın.

Kullanıcı bu şekilde oturum açmıştır.



Kullanıcı adı ve şifre, sistem yöneticisi tarafından verilir. Kullanıcı adınız ve şifreniz yoksa, Ürünü kullanma yetkiniz yoktur.

Sisteme eriştikten sonra, kontrol çubuğundaki (Control Bar) **Kullanıcı** düğmesinde oturum açan kullanıcıya karşılık gelen bir kısaltma görüntülenir (kısaltma Şekil 3 **A**'da ADMIN'dir).



Şekil 3




Kimlik bilgileri Kullanıcı düğmesinde görüntülenen kullanıcı, Ürün üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemlerden sorumludur. Sistemin yanlış kullanımını önlemek için Ürün iş istasyonundan ayrılmadan önce oturumu kapatmanız önemle tavsiye edilir.



Ürünü, harici bir sistem üzerinden oturum açmaya izin verecek şekilde yapılandırmak mümkündür ("single sign on"). Bu durumlarda, Oturum Açma ekranında özel bir düğme görüntülenir.


Oturumu kapatmak için, çalışma oturumu sırasında **Kullanıcı** düğmesine tıklayın. Aşağıdaki menü açılır (Şekil 4).

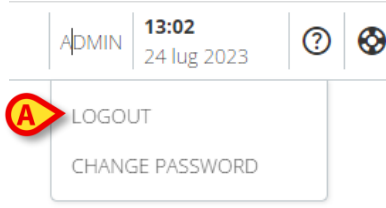

Şekil 4

➤ **ÇIKIŞ** (Şekil 4 **A**) seçeneğini tıklayın.

Kullanıcı onayı gereklidir. Onaydan sonra kullanıcının oturumu kapatılır. Tekrar oturum açmak için, **Kullanıcı** düğmesine tekrar tıklayın. Şekil 2'de gösterilen ekran tekrar görüntülenecektir.

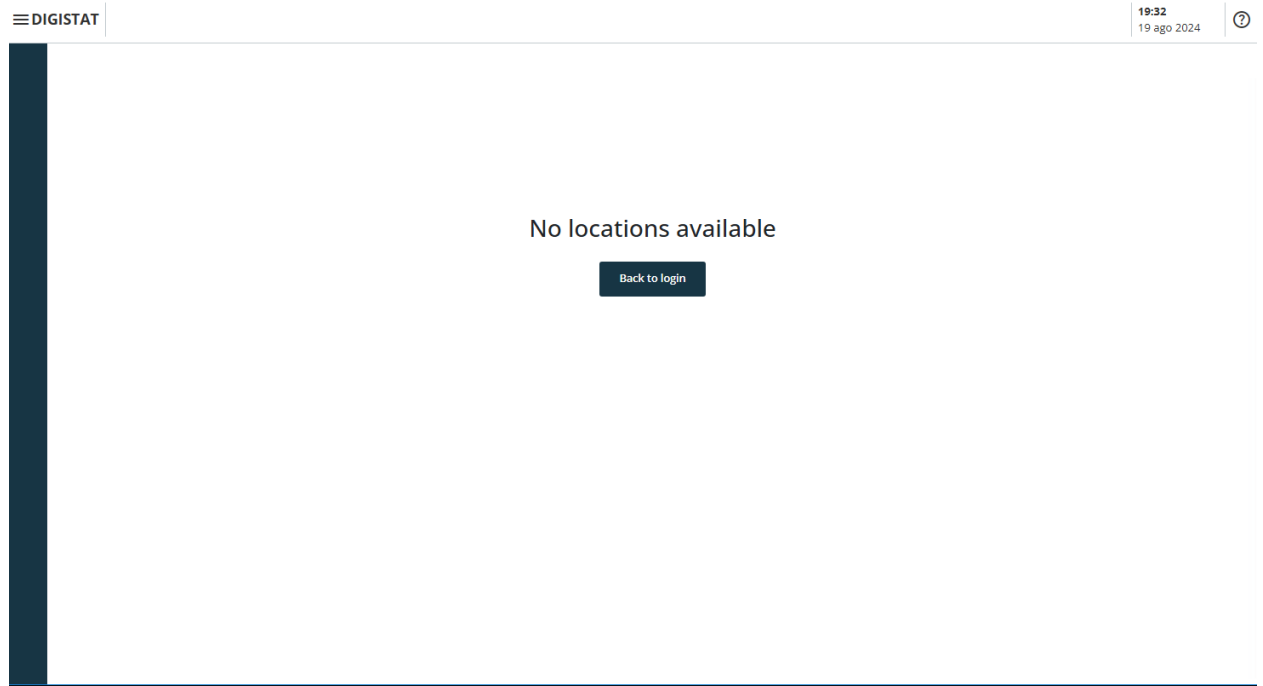

Şekil 5


Kullanıcının daha önce ilişkilendirilmiş bir konumu yoksa (kullanıcı-konum ilişkilendirmesinin yapılandırması için *CGF ENG Digistat Suite MDR* kılavuzuna bakın), modülde oturum açmak mümkün değildir. Bu durumda "Konum yok" mesajı görüntülenir (Şekil 5). Buna ek olarak, giriş sayfasına geri dönmek ve yeni bir kullanıcıyla veya kullanıcı-konum ilişkilendirmesinden sonra aynı kullanıcıyla oturum açmayı yeniden denemek için bir **Giriş Sayfasına Geri Dön** düğmesi sağlanır.



"Konum", sağlık hizmeti yapısının belirli bir alanına karşılık gelen bir Digistat yapılandırma varlığıdır. Örneğin, sağlık yapısının gereksinimlerine bağlı olarak bir bölüm, bir koğu, bir ameliyat bloğu vb. olabilir. Daha fazla bilgi için sistem yöneticilerine başvurun.

1.3 Çalışma Alanı

Kullanıcı oturum açtıktan sonra, mevcut Digistat Web modüllerine karşılık gelen simgeler yanıl çubukta (Şekil 6 A) görüntülenir. Çalışma alanı (Şekil 6 B), yanıl çubukta seçilen modülün ekranlarını ve işlevlerini görüntüler.

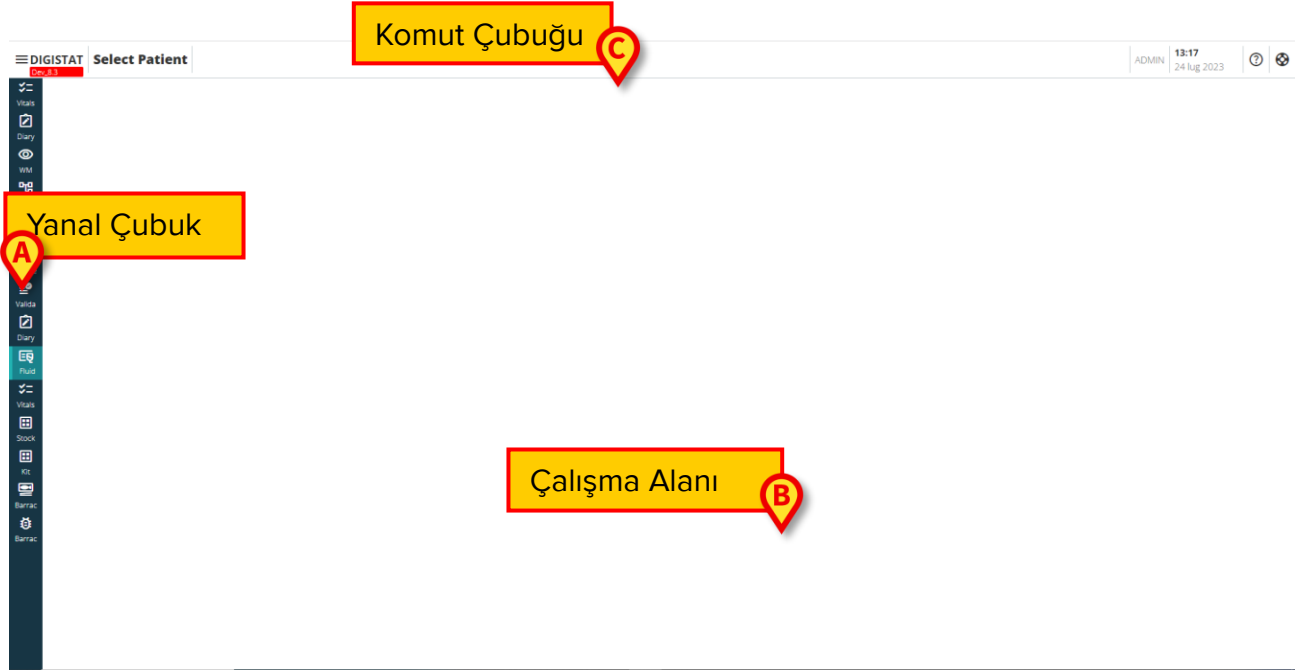

Şekil 6


Control Bar (Şekil 6 C), 1.4 ve sonraki bölümlerde açıklanmıştır. Şu anda seçili olan modül vurgulanır.

1.3.1 Bir modül seçme

Bir modül seçmek için:

- Yanıl çubuktaki ilgili simgeyi tıklatın.

Simge vurgulanacak ve modülün işlevleri Çalışma Alanı içinde görüntülenecektir.

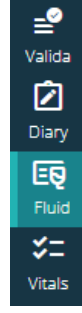

Şekil 7

1.4 Control Bar

Ekranın üst kısmında görünen Control Bar tüm modüller için ortaktır. Başlıca özellikleri aşağıda listelenmiştir.



Şekil 8

- **Menü** düğmesi (Şekil 8 A), Control Bar Web ana menüsünü açar. Bölüm 1.5'e bakınız.
- **Hasta** düğmesi (Şekil 8 B). Hiçbir hasta seçilmemişse, hasta seçim prosedürünü başlatmak için bu düğmeye tıklanabilir. Hasta seçiminden sonra hastanın adı ve ana verileri görüntülenir. Kabul edilen hastalar için yatak numarası ve bölüm adı da görüntülenir. Seçilen hasta için belirli ek Control Bar Web işlevleri mevcutsa, bu işlevlere erişime izin veren bir açılır menüyü görüntülemek için hasta düğmesine tıklanabilir (daha fazla bilgi için 1.6 bölüme bakın). Hastanın adının yanında bir asma kilit simgesi -  - görüntüleniyorsa, bu, o hasta için bazı hasta verilerinin/işlevlerinin kilitli olduğu anlamına gelir.




Hasta seçim prosedürü genellikle Digistat Patient Explorer Web modülü üzerinde gerçekleştirilir. Hasta yönetimi işlevleriyle ilgili talimatlar için Patient Explorer Web kullanım kılavuzuna (belge USR TUR Patient Explorer Web) bakın. Hasta seçimi için Patient Explorer Web yerine diğer modüller yapılandırılabilir. Bu durumda, talimatlar için özel belgelere bakın.

- Şekil 8 C ile belirtilen alan, kullanıcı için bildirimler olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
- Kullanıcı düğmesi, oturum açma/kapatma ve şifre değiştirme işlevlerine (Şekil 8 D) erişim sağlar.
- Tarih - saat göstergesi (Şekil 8 E).
- Çevrimiçi yardıma erişmek için **Yardım** düğmesini (Şekil 8 F) kullanın.
- Destek için teknik yardıma gönderilecek bir sorun raporu oluşturmak için  (Şekil 8 G) simgesine tıklayın. Bölüm 1.5.2'e bakınız.

1.5 Ana Menü

Menü düğmesi (Şekil 8 **A**) aşağıdaki menüyü açar (Şekil 9).

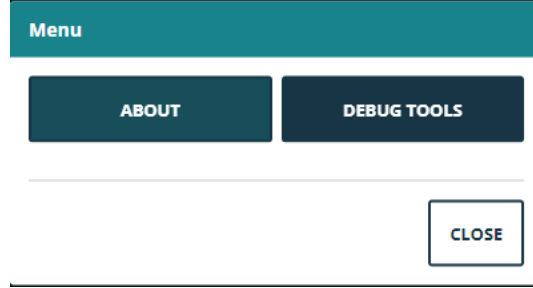

Şekil 9

Hakkında düğmesi, yüklü Digistat Suite sürümü ve ilgili lisanslar hakkında bilgi içeren bir pencere görüntüler (daha fazla bilgi için özel belgelere bakın).


Ürünün gerçek etiketi, Digistat Suite'in kurulu olduğu istemci iş istasyonlarında, mobil cihazlarda ve web modüllerinde görüntülenen Hakkında Kutusu'dur.

Hata Ayıklama Araçları düğmesi sistem yöneticilerine ayrılmıştır.

1.5.1 Şifreyi değiştir


Kullanıcı şifresini değiştirmek için:

- Control Bar'ndaki (Şekil 10 **A**) **Kullanıcı** düğmesine tıklayın.

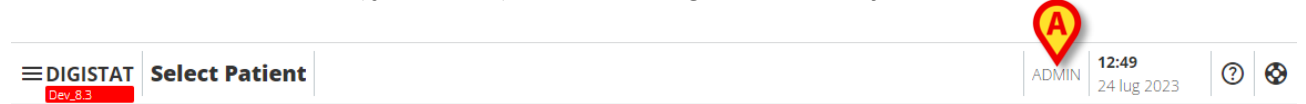

Şekil 10


- Aşağıdaki menü açılır (Şekil 11).

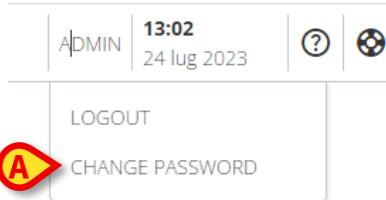

Şekil 11

- **Şifreyi Değiştir** (Şekil 11 **A**) seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki ekran açılır (Şekil 12).

CHANGE PASSWORD

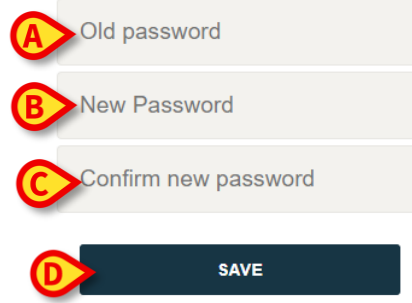

The image shows a 'CHANGE PASSWORD' form. It has three input fields: 'Old password' (labeled A), 'New Password' (labeled B), and 'Confirm new password' (labeled C). Below these fields is a 'SAVE' button (labeled D).

Şekil 12

- Geçerli şifreyi "ESKİ şifre" alanına yazın (Şekil 12 **A**)
- Yeni şifreyi "Yeni şifre" alanına yazın (Şekil 12 **B**).
- "Yeni şifreyi onayla" (Şekil 12 **C**) alanına yeni şifreyi tekrar yazın.
- **Kaydet'e** (Şekil 12 **D**) tıklayın.

1.5.2 Kullanıcı Sorunu raporlama

Varsa, Kontrol Çubuğundaki  (Şekil 13 **A**) simge, bir "sorun" raporu oluşturmanıza ve sorun olması durumunda teknik destek almanıza olanak tanır.



The image shows a header bar with the following elements: a menu icon, 'DIGISTAT' with a red 'Dev 8.3' tag, 'Select Patient', 'ADMIN', '12:49', '24 Aug 2023', a help icon, and a problem icon (labeled A).


Şekil 13



Simgenin varlığı, EnableUserIssueReporting Sistem Seçeneğine bağlıdır. Daha fazla bilgi için sistem yöneticilerine başvurun.

Bunu yapmak için:

-  simgesine (Şekil 13 **A**) tıklayın. Aşağıdaki pencere açılır (Şekil 14).

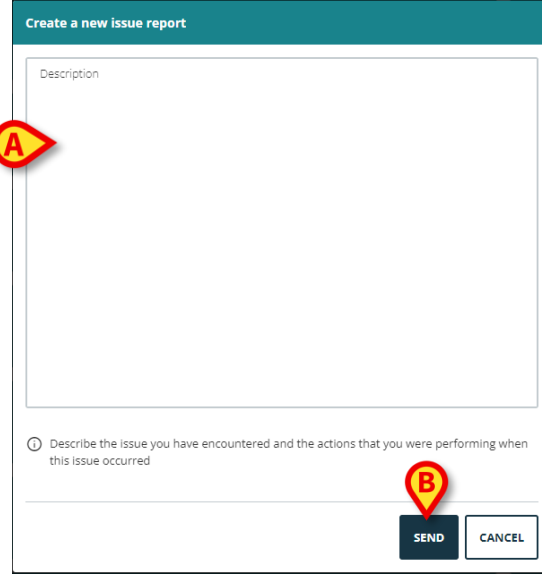

Şekil 14

- "Açıklama" alanına (Şekil 14 A) sorunla ilgili bir açıklama girin.
- **Gönder'e** (Şekil 14 B) tıklayın.

Bir sorun kimlik numarası da dahil olmak üzere bir onay sağlanır.

1.6 Ek alt modüller

Bu bölümde açıklanan alt modüller, Ürünün Sağlık Kuruluşundaki yapılandırmasına bağlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir. Her alt modül, hasta düğmesinin yanında görüntülenen bir açılır menüdeki belirli bir menü ögesine tıklanarak açılabilir. Bunlar hastayla ilgilidir, yani yalnızca bir hasta zaten seçilmişse kullanılabilir.

1.6.1 CDSS Configurator

CDSS Configurator alt modülü, Control Bar Web'in ek bir bölümü olarak yapılandırma ile etkinleştirilebilir. CDSS Configurator alt modülünü açmak için:

- İlgili hastayı seçin.



Hasta seçim prosedürü için Patient Explorer Web kullanım kılavuzuna bakın (belge USR TUR Patient Explorer Web).

Hasta seçiminden sonra, ek Control Bar alt modülleri mevcutsa, hasta düğmesinde simgesi görüntülenir (Şekil 15 A).



Şekil 15

-  simgesine tıklayın.

Mevcut ek alt modülleri listeleyen bir açılır pencere görüntülenir (Şekil 16).



Şekil 16

- "CDSS Yapılandırması" üzerine tıklayın (Şekil 16 A).

Seçili olan hastayla ilişkili kuralların listelendiği aşağıdaki pencere görüntülenir (Şekil 17).

RULES		
✓	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
✓	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
✓	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Şekil 17

Bu alt modülün tam açıklaması ve kullanım talimatları için CDSS Configurator kullanım kılavuzuna bakın (belge USR TUR CDSS Web).

1.6.2 Identity

Identity alt modülü, Control Bar Web'in ek bir bölümü olarak yapılandırma ile etkinleştirilebilir. Identity alt modülünü açmak için:

- İlgili hastayı seçin.



Hasta seçim prosedürü için Patient Explorer Web kullanım kılavuzuna bakın (belge: USR TUR Patient Explorer Web).

Hasta seçiminden sonra, ek Control Bar alt modülleri mevcutsa, hasta düğmesinde simgesi görüntülenir (Şekil 18 A).



Şekil 18

➤  simgesine tıklayın.


Mevcut ek bölümleri listeleyen bir açılır pencere görüntülenir (Şekil 19).



Şekil 19

➤ "İlişkili cihazlar" üzerine tıklayın (Şekil 19 A).

Seçili olan hastayla ilişkili cihazların listelendiği aşağıdaki pencere görüntülenir (Şekil 20).

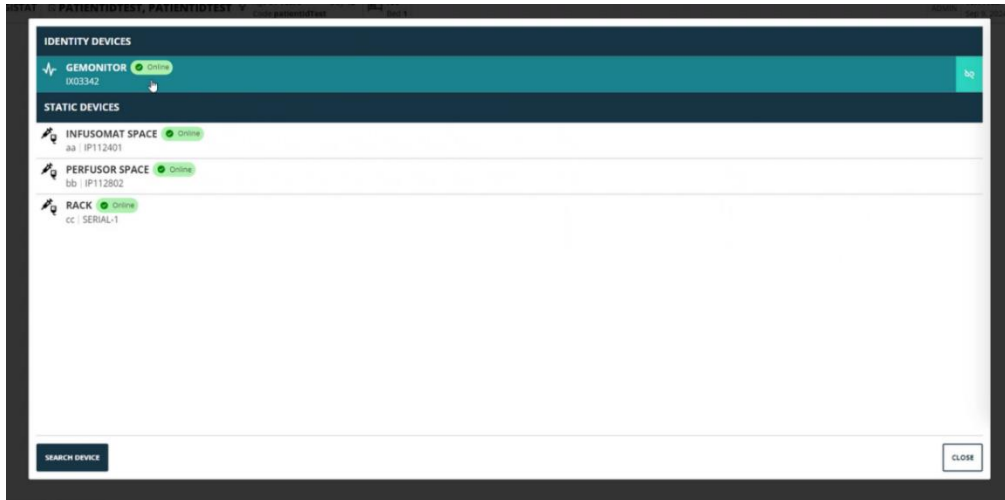

Şekil 20

Bu alt modülün tam açıklaması ve kullanım talimatları için Identity kullanım kılavuzuna bakın (USR TUR Identity Web belgesi).