



Patient Explorer Kullanım Kılavuzu

Versiyon 2.0

2023-05-25

İçerik

1. Patient Explorer	3
1.1. Hasta Gezgini modülüne erişim	3
1.2. Kabul Edilen Hastalar	4
1.2.1. Hasta verilerinin arşivlenmesi	5
1.3. Hasta Arama	5
1.3.1. Yerel Arama	6
1.3.2. Uzaktan Arama.....	7
1.4. ADT'den gelen hastalar	8
1.5. "Transfer" Halindeki Hastalar	9
1.6. Mutabakat (Yerel ve Uzak).....	11
1.7. Anonim Hasta	11
1.8. Komut Çubuğu	13
1.8.1. Hasta seçimi.....	13
1.8.2. Yeni/Hasta Kabulü.....	14
1.8.3. Hasta Düzenle	14
1.8.4. Hasta Transferi	15
1.8.5. Kabul	16
1.8.6. Taburcu	17
1.8.7. Sil.....	18
1.8.8. Düzenle	19
1.8.9. Hasta seçimini kaldırmak.....	20
1.8.10. Kapat	20

1. Patient Explorer



Ürün ortamı, önlemler, uyarılar ve kullanım amacı hakkında bilgi için *USR TUR Digistat Care* ve/veya *USR TUR Digistat Docs* (kurulu modüllere bağlı olarak - *Digistat Suite EU* için) veya *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* için) bölümlerine bakınız. Bu belgede açıklanan Patient Explorer'nin doğru ve güvenli kullanımı için ilgili belgenin bilinmesi ve anlaşılması zorunludur.

Patient Explorer / Hasta Gezgini modülü, bir veya daha fazla hastanenin hasta veri tabanının basit ve özelleştirilmiş bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Hastanın ana verilerine hızlı bir şekilde erişilebilir, bunlar görüntülenebilir, düzenlenebilir ve gerektiğinde yapılandırılmış bir iş akışına göre seçilen bir belgeye/modüle otomatik olarak eklenebilir.



Hasta Gezgini geniş ölçüde özelleştirilebilir. İş akışları ve prosedürler, sağlık kuruluşu tarafından seçilen yapılandırmaya göre değişir.

Bu nedenle, kullanılan gerçek sistemde görüntülenen ekranlar bu kılavuzda açıklananlardan farklı olabilir.

Bu kılavuzda örnek olarak standart bir yapılandırma açıklanmaktadır.

1.1. Hasta Gezgini modülüne erişim

Hasta Gezgini modülüne erişmek için:

- Kontrol Çubuğundaki **Hasta** düğmesini tıklayın



Şekil 1

Belirli bir bölüme kabul edilen hastaların listelendiği bir ekran görüntülenir (Şekil 2'de gösterilene benzer).

1.2. Kabul Edilen Hastalar

BuradaŞekil 2’de gösterilen ekran, bir bölüme (örneğin Yoğun Bakım Ünitesi) kabul edilen tüm hastaları görüntüler.

PATIENTS ADMITTED	1 Jack White ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	9 Frances Gardner ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05
PATIENTS SEARCH	2 John Smith ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	10 ICU
	3 John Brown ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	11 ICU
	4 John Doe ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	12 ICU
	5 Lenny Malmsteen ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	13 Jean Osburne ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05
	6 Bruce Satriani ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	14 Mary Black ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05
	7 Patti Zappa ICU ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05	15 ICU
	8 Frank White ICU ADMISSION DATE: 22/01/2020 09:15	16 ICU

IN BED

IN TRANSFER

PATIENT EXPLORER + NEW/ADMIT EDIT NONE X CLOSE

Şekil 2

Numaralı düğmeler yatakları temsil eder (Şekil 3).

4	John Doe
ICU	ADMISSION DATE: 08/11/2016 17:05

Şekil 3

Her yatak düğmesinde aşağıdaki bilgiler görüntülenir (soldan başlayarak):

- Yatak numarası ve bölüm adı.
- O yatakta yatan hastanın adı.
- Kabul tarihi ve saati (hasta adının altında).

Bir hasta seçmek ve verilerini görüntülemek için:

- Yatak düğmesini tıklayın.

Hasta seçilir. Adı, 'Kontrol Çubuğu'ndaki **HASTA** düğmesinde görüntülenir. (Şekil 4).

ROSE,	♀	Age 30 years	Day 28
PATIENT 4		Code 20000004	

Şekil 4

1.2.1. Hasta verilerinin arşivlenmesi

Yapılandırmaya göre, disk alanından tasarruf etmek için hasta verileri belirleyeceğiniz bir gün sayısından sonra arşivlenebilir. "Arşivlenmiş" hastalar için veri erişimi zaman alır. Bu nedenle, "arşivlenmiş" bir hasta seçildiğinde, hasta verilerinin arşivden alınması gerektiği ve bunun birkaç dakika sürebileceği konusunda uyarıcı bir açılır pencere görüntülenir.

- Devam etmek için açılır pencerede **Evet**'e tıklayın.

Arama arka planda yürütülürken Digistat diğer hastalarla kullanılmaya devam edilebilir.

Arama tamamlandığında, hastayı seçmenin artık mümkün olduğunu bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir.



Hasta verilerinin bulunması, hasta verilerinin boyutuna ve teknik ihtiyaçlara bağlı olarak belirsiz bir süre alır.

1.3. Hasta Arama

Ekranın sol üst köşesindeki düğmelerle (Şekil 5 **A**) ya kabul edilen hastalar listesi, ya hasta arama işlevi seçilebilir.

KABUL EDİLEN HASTALAR düğmesi tıklanırsa, önceki bölümlerde açıklanan işlevsellik etkinleştirilir.

HASTA ARA düğmesi tıklanırsa, aşağıdaki bölümlerde açıklanan işlevsellik etkinleştirilir (**HASTA ARA** işlevi). Bu durumda, Şekil 5'de gösterilen ekran görüntülenir.

Şekil 5

Komut çubuğunda hangi düğmenin seçildiğine bağlı olarak iki arama olasılığı vardır (Şekil 5 B):

1. **YEREL ARAMA**, yerel veritabanında arama yapılmasını sağlar.
2. **UZAKTAN ARAMA**, hastane hasta arşivlerindeki tüm hastaların aranmasını sağlar.

MUTABAKAT (YEREL ve UZAKTAN), (Şekil 5C) IDENTITY mobil uygulamasında oluşturulan bilinmeyen/geçici hastaların verilerinin, hastane hasta arşivlerine eklenen gerçek hasta verileriyle uzlaştırılmasını sağlar. **YEREL MUTABAKAT** Digistat Suite veritabanında arama yapar. **UZAKTAN MUTABAKAT** hastane HIS'inde arama yapar.

ANONİM düğmesi (Şekil 5 B) alandaki yataklardan birine isimsiz hastaların (yani tüm hasta verileri bilinmemektedir) kabul edilmesini sağlar.



UZAKTAN ARAMA ve UZAKTAN MUTABAKAT, yalnızca Digistat Suite ile hastanedeki hasta arşivlerinde uygun bağlantı kuruluysa kullanılabilir.

1.3.1. Yerel Arama

Üst alandaki arama alanları, ilgili hasta bilgilerinin belirlenmesini sağlar.

First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code	Admission date	Admission code
White	Frank	I	12/01/1966	45634	22/01/2020	
White	Jack	M	01/01/1951	35246	08/11/2016	A0111

Şekil 6

Bir hastayı aramak için:

- Hasta verilerini bir veya daha fazla alana girin (Şekil 6 A).
- **ARA** düğmesini tıklayın (Şekil 6 B).

Merkezi alanda, verileri belirtilenlerle eşleşen tüm hastaları listeleyen bir tablo görünür (Şekil 6 C).

Konum seçilirse ve bu şekilde gerçek bir konum belirlenirse, seçilen konumda halen yatan hastalar arasında arama yapılır.

- Bir hastayı seçmek için hastaya karşılık gelen satırı çift tıklayın.

Hasta verileri Digistat Suite modüllerinde görünür.


- Arama filtrelerini temizlemek için **TEMİZLE** düğmesini kullanın.

1.3.2. Uzaktan Arama

UZAKTAN ARAMA seçilirse, arama uzaktan bağlı arşivlerde bulunan tüm hastalar içinde gerçekleştirilir.

- UZAKTAN ARAMA'yı tıklayın.

'UZAKTAN ARAMA' ekranı görüntülenir (Şekil 7).

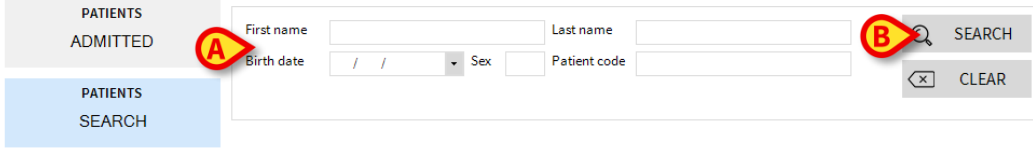

LOCAL SEARCH	REMOTE SEARCH	ANONYMOUS	LOCAL RECONCILIATION	REMOTE RECONCILIATION
--------------	---------------	-----------	----------------------	-----------------------

Şekil 7

Bir hastayı aramak için:

- Hasta verilerini bir veya daha fazla alana girin (Şekil 7 A).
- **ARA** düğmesini tıklayın (Şekil 7 B).

Sonuçların listesi görüntülenir (Şekil 7 C).

- Gerekli hastaya karşılık gelen satırı çift tıklayın.

'YENİ/HASTA KABUL' penceresi görüntülenir (Şekil 8).

NEW/ADMIT PATIENT ✕

Family Name	Given Name	Initials
Doe	John	
Patient Code	Birth Date	Sex
333333	23/06/1998	M
Notes		
A		
Admission Date - time	Discharge Date - time	
19/03/2020	12:56:18	
Admission Code	Height [cm]	Weight [kg]
Location	Bed	
ICU	6	

✓ OK ✕ CANCEL

Şekil 8

- Hasta verilerini doğrulayın/düzenleyin (Şekil 8 A) ve **Tamam**'a tıklayın.

Hasta kabul edilir. Adı, 'KABUL EDİLEN HASTALAR' ekranındaki yatak düğmelerinden birinde görüntülenir (Şekil 2).

1.4. ADT'den gelen hastalar



Komut çubuğundaki düğmeler mevcut veritabanlarında belirli sorguları tetikler, Burada iki örnek açıklanmaktadır: "ADT'den gelen hastalar" ve "Transfer halindeki hastalar".

Sunucu tarafında belirli bir yazılım bileşeni kurulursa, sistem hasta verilerini Sağlık Kuruluşu ADT sisteminden (ADT: **A**dmission/**D**ischarge/**T**ransfer, yani: Kabul/Taburcu/Transfer) alabilir.

Sistem bu şekilde yapılandırılmışsa ve yatak bilgileri sağlanmışsa, hasta ADT tarafından doğrudan bir yatağa atanabilir. Bu durumda servis personeli yeni hastaları otomatik olarak kabul edilen hastalar listesinde (Şekil 2) görecektir.

Aksi takdirde, ADT tarafından bölüme atanan hastalar belirli bir ekranda listelenecektir. Bu ekrana erişmek için:

- Komut çubuğundaki (mevcutsa) ADT düğmesini tıklayın.

ADT tarafından atanan hastalar ekranın orta kısmında listelenir.


Her hasta için aşağıdaki bilgiler verilir:

- Ad
- Soyad
- Cinsiyet
- Doğum tarihi
- Hasta Kodu

Hasta seçmek için:

- Hastaya karşılık gelen satırı çift tıklayın.

Hasta verilerini içeren **Yeni/Hasta Kabulü** penceresi görüntülenecektir (Şekil 9).

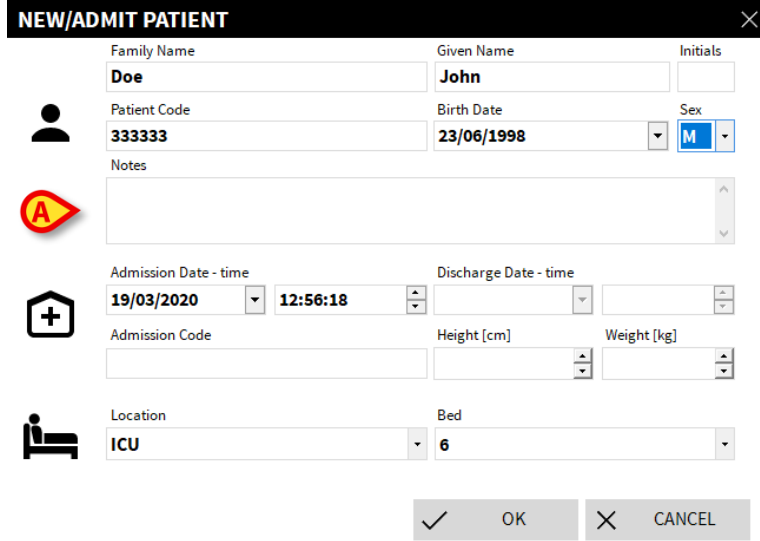

Şekil 9

- Hasta verilerini doğrulayın/düzenleyin (Şekil 8 A) ve **Tamam**'a tıklayın.

Hasta kabul edilmiştir. Adı, 'KABUL EDİLEN HASTALAR' ekranındaki belirli yatak düğmesinde görüntülenir (Şekil 2).

1.5. "Transfer" Halindeki Hastalar

Şekil 10 A'da komut çubuğundaki iki düğme ile "Yatakta" olan hastalar veya "Transfer" halindeki hastalar görüntülenebilir.

YATAKTA düğmesi tıklanırsa, Şekil 2'de gösterilen ekran görüntülenir.

TRANSFER düğmesi tıklanırsa, Şekil 10'de gösterilen ekran görüntülenir.



"Transfer" halindeki hastalar yalnızca Digistat Suite ile hastane hasta arşivleri arasındaki bağlantılar kuruluysa görüntülenir.

HASTALAR
KABUL EDİLDİ

HASTALAR
ARA

İsim	Soyadı	Cinsiyet	Doğum tarihi	Hasta kodu
Doe	John	M	23/01/1971	43563
Edward	Van Halen	I	17/09/1956	456378
Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

YATAKTA

TRANSFERDE

Şekil 10

Bu ekran, “Transfer” halindeki tüm hastaları listeler. “Transfer” halindeki hastalar, kendilerine henüz yatak tahsis edilmemiş, ama kullanımda olan iş istasyonunun kapsadığı hastane birimleri tarafından kabul edilmiş hastalardır (yani hastane kabul işlemi tamamlanmış).

Her satır bir hastayı temsil eder ve ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi ve hasta kodunu içerir.

- Hastaya yatak atamak için ilgili satırı çift tıklayın.

Aşağıdaki pencere açılır (Şekil 11).

YENİ/KABUL ET HASTA

Soyadı

Do

İsim

John

Baş harfler

Hasta Kodu

43563

Doğum Tarihi

23/01/1971

Cinsiyet

_cli

Notlar

Kabul Tarihi - süre

22/01/2020 12:02:01

Gönderme Tarihi - süre

Kabul Kodu

Boy [cm]

Ağırlık (kg)

Konum

ICU

Yatak

10

TAMAM

IPTAL

Şekil 11

- Şekil 11’da belirtilen varış **Konumu** (departman) ve **Yatak**’ı belirtin.
- **TAMAM**’ı tıklayın.

Hasta artık belirli bir konuma ve yatağa atanmıştır ve adı ilgili yatak düğmesinde görüntülenir (Şekil 3).

1.6. Mutabakat (Yerel ve Uzak)



Bu prosedür yalnızca Identity Mobile uygulaması kullanımdaysa geçerlidir.

Bu prosedür, IDENTITY mobil uygulamasında oluşturulan bilinmeyen/geçici hastaların verilerinin, hastane hasta arşivlerine eklenen gerçek hasta verileriyle uzlaştırılmasını sağlar. **YEREL MUTABAKAT** Digistat Suite veritabanında arama yapar. **UZAKTAN MUTABAKAT** hastane HIS'inde arama yapar.

- Halen yatağa atanmış bilinmeyen/geçici hastayı seçin (Şekil 3).
- **Mutabakat**'ı tıklayın

Bir arama ekranı açılır.

- Bilinmeyen/geçici hasta verilerinin aslında ait olduğu hastayı arayın. Arama işlevini önceki paragrafta açıklandığı gibi kullanın.
- Geçici hasta için doğru bilgileri içeren satırı çift tıklayın.

Seçilen hasta verilerinin geçici hasta verilerinin üzerine yazılıp yazılmayacağını soran bir bildirim görüntülenir.

- Verilerin üzerine yazmak için **Evet**'i tıklayın.

Hasta verileri artık uzlaştırılmıştır. Bilinmeyen/geçici hasta verileri doğru verilerle değiştirilmiş ve yatak düğmesi yeni bilgileri gösterecek şekilde güncellenmiştir.

1.7. Anonim Hasta

Bu işlev ile verileri bilinmeyen bir hasta bir yatağa kabul edilebilir. İsimsiz bir hastayı kabul etmek için:

- Komut çubuğunda **ANONİM** seçeneğini tıklayın (Şekil 12 A).

Alandaki tüm boş yatakları listeleyen bir ekran görüntülenir (Şekil 12 B).

PATIENTS ADMITTED	Location	Bed	
	ICU	10	Create an anonymous patient on this bed
	ICU	12	Create an anonymous patient on this bed
	ICU	15	Create an anonymous patient on this bed
	ICU	16	Create an anonymous patient on this bed


LOCAL SEARCH	REMOTE SEARCH	ANONYMOUS	LOCAL RECONCILIATION	REMOTE RECONCILIATION

- Uygun yatağa karşılık gelen satırı çift tıklayın

- Hastayı kabul etmek için **EVET**'i tıklayın.

1.8. Komut Çubuğu

Komut çubuğunda (Şekil 13), farklı prosedürleri gerçekleştirmeye yarayan düğmeler vardır.

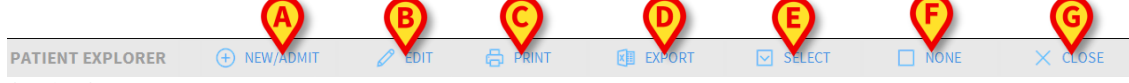

Şekil 13

- 1) **Yeni/Kabul** (Şekil 13 **A**) – Veri tabanına yeni bir hasta girilir ve bir yatağa atanır (prosedür için bkz. bölüm 1.8.2).
- 2) **Düzenle** (Şekil 13 **B**) – Bu düğme ile hastanın verileri düzenlenebilir (bkz. bölüm 1.8.8).
- 3) **Yazdır** (Şekil 13 **C**) - Yazdırılacak raporlar oluşturulur (rapor sayısı ve türü yapılandırmada belirlenir).
- 4) **Dışa Aktar** (Şekil 13 **D**) - Mevcut verileri bir XLS dosyasına aktarılır.
- 5) **Seç** (Şekil 13 **E**) - Hasta seçilir.
- 6) **Hiçbiri** düğmesi (Şekil 13 **F**) – bir hasta seçildikten sonra seçimini kaldırır. **YOK** seçeneğini tıkladıktan sonra, daha önce seçilen hastanın adı **HASTA** düğmesinden yok olur
- 7) **Kapat** düğmesi (Şekil 13 **G**) – Hasta Gezini modülünü kapatır.

1.8.1. Hasta seçimi

Digistat Suite'te, seçilen hasta, Kontrol Çubuğundaki (Şekil 14) **HASTA** düğmesinde adı görüntülenen hastadır.



Şekil 14

Bir hasta, kullanılan iş akışlarına bağlı olarak modüle özgü farklı şekillerde seçilebilir:

- 1) Yatak düğmesini tıklayın (Şekil 3).
- 2) Hasta verilerini içeren satıra çift tıklayın (örneğin bir hasta arama prosedüründen sonra - Şekil 7 **C**).
- 3) Hasta verilerini içeren satırı vurgulamak için tıklayın ve ardından komut çubuğunda **Seç**'e tıklayın (Şekil 13 **E**).

1.8.2. Yeni/Hasta Kabulü

Yeni/Hasta Kabulü düğmesi (Şekil 15), yeni bir hastanın verilerinin girilmesini ve bir yatağa atanmasını sağlar.



Şekil 15

Yeni bir hasta girmek için:

- Komut çubuğunda **Yeni/Kabul** düğmesini tıklayın

Aşağıdaki pencere açılır (Şekil 16).

The image shows a form titled 'NEW/ADMIT PATIENT' with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields: 'Family Name', 'Given Name', 'Initials', 'Patient Code', 'Birth Date', 'Sex', 'Notes' (a text area), 'Admission Date - time' (set to 19/03/2020), 'Discharge Date - time', 'Admission Code', 'Height [cm]', 'Weight [kg]', 'Location' (set to ICU), and 'Bed' (set to 6). There are also icons for a person, a house, and a bed. At the bottom, there are 'OK' and 'CANCEL' buttons with checkmark and X icons respectively.

Şekil 16

- Yeni hastanın verilerini girin.


Kırmızı ile işaretlenmiş alanlar zorunludur

- Onaylamak için **TAMAM**'ı tıklayın.

Yeni hasta bu şekilde oluşturulur ve "Konum" ve "Yatak" alanlarında (Şekil 16) belirtilen yatağa/bölüme kabul edilir.

1.8.3. Hasta Düzenle

DÜZENLE düğmesi (Şekil 17) ile veritabanında zaten mevcut olan bir hastanın verileri düzenlenebilir.

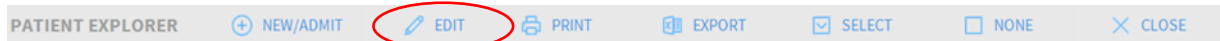


Şekil 17

Hasta verileri yalnızca hasta seçildikten sonra düzenlenebilir. Hasta arama ve seçim prosedürleri için önceki bölümlere bakın. "Düzenleme" prosedürleri her zaman adı "Kontrol Çubuğu" üzerindeki **HASTA** düğmesinde gösterilen hastayı ilgilendirir (Şekil 14).

Hastanın verilerini düzenlemek için:

- Verileri düzenlenecek hastayı seçin.
- **DÜZENLE**'yi tıklayın.

Beş seçenek içeren bir menü açılır (Şekil 18).

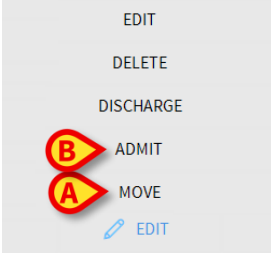

Şekil 18

Her seçenek farklı bir işlem gerçekleştirmeye yarar. Bunlar, aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

1.8.4. Hasta Transferi

Bir hastayı farklı bir yatağa ve/veya yere taşımak için **Hasta Transferi** seçeneğini kullanın (Şekil 18 **A**). Bir hastayı nakletmek için:

- Hastayı seçin.


HASTA düğmesinde seçilen hastanın adı görüntülenir.

- Komut çubuğunda **DÜZENLE** düğmesini tıklayın.

Şekil 18'de gösterilen menü açılır.

- **Hasta Transferi** düğmesini tıklayın (Şekil 18 **A**)

Aşağıdaki pencere açılır (Şekil 19).

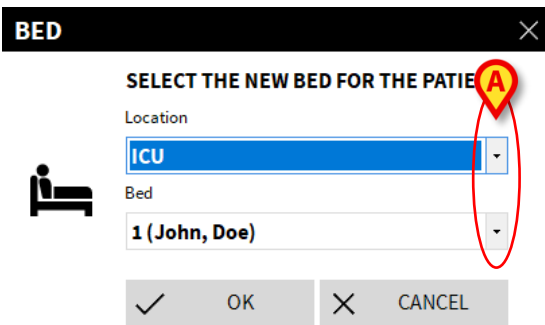

Şekil 19

- Ok düğmelerini kullanarak (Şekil 19 A) hastanın nakledileceği yeri ve yatağı seçin


Üstteki düğme, mevcut konumları listeler.

Altteki düğme, seçilen konumda bulunan yatakları listeler.

Yatak numarasının yanında bir hastanın adı görünüyorsa yatak zaten dolu demektir.

- Onaylamak için **TAMAM**'ı tıklayın.

Dolu bir yatak seçilir ve **Tamam** düğmesine tıklanırsa, kullanıcının iki yataktaki hastaların yerini değiştirmek isteyip istemediğini soran bir mesaj görüntülenir.

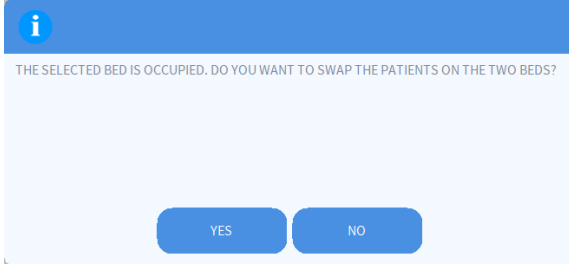

Şekil 20

1.8.5. Kabul

KABUL seçeneği, bir hastanın belirli bir yere kabulünü kaydeder.

Bir hastayı kabul etmek için:

- Hastayı seçin.

HASTA düğmesinde seçilen hastanın adı görüntülenir.

- Komut çubuğunda **DÜZENLE** düğmesini tıklayın.

Şekil 18'de gösterilen menü açılır.

- **KABUL** seçeneğini tıklayın (Şekil 18 B).

Şekil 19'de gösterilen ve yalnızca mevcut yatakların listelendiği pencere açılır.

- Ok düğmelerini kullanarak (Şekil 19 A) hastanın nakledileceği yeri ve yatağı seçin
- Onaylamak için **TAMAM**'ı tıklayın.

1.8.6. Taburcu


TABURCU seçeneği bir hastanın taburcu edilmesini kaydeder. Bir hastayı taburcu etmek

- Hastayı seçin.

HASTA düğmesinde seçilen hastanın adı görüntülenir.

- Komut çubuğunda **DÜZENLE**'yi tıklayın.

Aşağıdaki menü görüntülenir (Şekil 21).

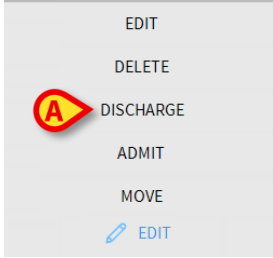

Şekil 21

- **TABURCU** seçeneğini tıklayın (Şekil 21 A)

Onay istenir

- Hastayı taburcu etmek için **EVET**'i tıklayın.

Bu eylem, hastanın verilerini içeren pencereyi açar

Şekil 22

Burada taburcu tarihini ve saatini değiştirmek mümkündür.

- Taburcu prosedürünü tamamlamak için **TAMAM**'ı tıklayın (Şekil 22 A).

1.8.7. Sil


SİL seçeneği, bir hastaya ait tüm verileri veritabanından siler. Bir hastanın verilerini silmek için:

- Hastayı seçin.

HASTA düğmesinde seçilen hastanın adı görüntülenir.

- Komut çubuğunda **DÜZENLE**'yi tıklayın.

Aşağıdaki menü görüntülenir (Şekil 23).

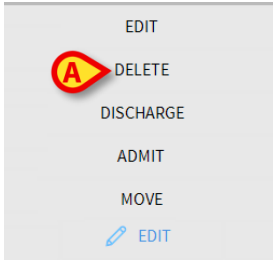

Şekil 23

- **SİL**'i tıklayın (Şekil 23 A)

Onay istenir

- Hastayı silmek için **EVET**'i tıklayın.



Hastayı silmek, geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Bir hasta silindiğinde, Digistat Suite aracılığıyla hasta ile ilgili elde edilen hiçbir belgeye erişmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu prosedür dikkatle yapılmalıdır.

Yalnızca belirli izinlere sahip kullanıcıların hasta verilerini silme yetkisi vardır.

1.8.8. Düzenle


DÜZENLE düğmesi, seçilen bir hastanın verilerini düzenlemeye yarar. Bir hastanın verilerini düzenlemek için:

- Hastayı seçin.

HASTA düğmesinde seçilen hastanın adı görüntülenir.

- Komut çubuğunda **DÜZENLE**'yi tıklayın.

Aşağıdaki menü görüntülenir (Şekil 24).

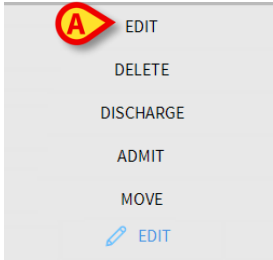

Şekil 24

- **DÜZENLE**'yi tıklayın (Şekil 24 A)

Hastanın verilerini içeren bir pencere görüntülenir (Şekil 25).

EDIT PATIENT

Family Name	Given Name	Initials
Smith	John	
Patient Code	Birth Date	Sex
676765	12/03/1967	M
Notes		
Admission Date - time	Discharge Date - time	
16/03/2020 18:45:03		
Admission Code	Height [cm]	Weight [kg]
	167	62,000

OK CANCEL

Şekil 25

- Hasta verilerini düzenleyin.
- Onaylamak için **TAMAM**'ı tıklayın (Şekil 25 A).

1.8.9. Hasta seçimini kaldırmak

Hiç biri düğmesiyle (Şekil 26), seçilen bir hastanın seçimini kaldırılır.



Şekil 26


Hasta seçimini kaldırmak için:

- **Hiç biri** düğmesine tıklayın (Şekil 26).

Hasta adı **HASTA** düğmesinden kaybolur.

1.8.10. Kapat

Kapat düğmesi, Hasta Gezgini modülünü kapatır (Şekil 27)

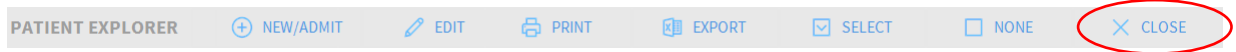

Şekil 27